



솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발

화면설계서 – NEUROGAIT-HCP Web

Document Version : V1.7.6

Release Date : 2022.01

Organization : 솔티드

Author : 제갈훈

구분	소속	역할	담당자	확인일	확인
작성	솔티드	기획PA	제갈훈		
동료검토	솔티드	기획PA	유병규		
동료검토	픽스프레임	기획PL	정수화		
동료검토	솔티드	개발PL	최성찬		
동료검토	솔티드	디자인PL	박지혜		
동료검토	픽스프레임	PM	김상환		
검토	솔티드	사업총괄	연상근		
인수/승인	솔티드	총괄PM	강경훈		

날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.09.06	0.1	최초 작성	<ul style="list-style-type: none"> 최초 작성 	유병규
2021.10.15	0.5	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 홈-스케줄 등록 팝업 추가 프로그램 관리 메뉴 삭제 스케줄 등록 시나리오 변경 문의 관리 메뉴 삭제 	유병규
2021.10.19	0.9.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 홈 수정 환자 관리 리스트 항목 수정 동영상 플레이어 수정 스케줄 관리 > 환자 목록 출력 항목 수정 	제갈훈
2021.10.26	0.9.2	수정사항 반영	<ul style="list-style-type: none"> 브랜드명 수정 Neuro GAIT □ NEUROGAIT, 뉴로 게이트 □ 뉴로게이트 레이아웃 수정 (GNB 등) IA 레이블링 동기화 Description 내용 수정 통계/자주 묻는 질문/시스템 문의 등 추가 	김상환
2021.11.01	0.9.3	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 문의 메뉴 추가 	유병규
2021.11.05	1.0	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 환자 코드 연결 시나리오 추가 	유병규
2021.11.08	1.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> GNB 수정 자주 하는 질문 관리 콘텐츠로 수정 Screen ID 업데이트 설정 - 이용약관/개인정보처리방침 메뉴 추가 설정 - 회원탈퇴 메뉴 위치 변경(계정 정보로 이동) 	유병규
2021.11.10	1.2	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 환자 정보 수정 시 필수 입력 항목 추가 	유병규
2021.11.10	1.3	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 회원가입 - 국가 선택 추가 회원가입 - 국외 의료진 회원가입 추가 메인화면 - 달성률 리스트 <ul style="list-style-type: none"> - 환자 코드 삭제, 등록일자 추가 - 검색 조건 변경 환자 <ul style="list-style-type: none"> - 환자코드, 성별 삭제 - 생년 월일 추가 - 일반 정보 우측 등록일자 추가 스케줄 - 환자 코드, 질환명 위치 변경 문의 <ul style="list-style-type: none"> - 답변 수정 추가 - 국외 환자 답변 추가 설정 - 공지사항 추가 	유병규

날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.11.19	1.4	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 회원 가입 <ul style="list-style-type: none"> - 회원 가입 시 국가 : 한국, 한국 외 2개 표시 계정 정보 <ul style="list-style-type: none"> - 의료진의 국가 선택에 따른 계정 정보 화면 추가 공통 <ul style="list-style-type: none"> - 페이지 상단 : 국가에 따른 의료진 명 표시 방법 추가 	유병규
2021.11.24	1.5	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 환자 정보 <ul style="list-style-type: none"> - 환자 정보 디자인 변경(P25~31) - 운동 기록 > 운동 명 우측 운동 종류 추가(P36) <ul style="list-style-type: none"> > 운동 결과 하단 목록 이동 버튼 추가(P41~44) - 환자 정보 수정 : 화면 디자인 변경(P45~48) 스케줄 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 화면 디자인 변경(P50~58) 설정 <ul style="list-style-type: none"> - 공지사항 상세화면 : 목록 이동 버튼 추가(P83) 	유병규
2021.11.26	1.6	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 회원 가입 <ul style="list-style-type: none"> - 직군 선택 : 직접 입력 박스 1개 삭제 및 문구 변경(p9~10) 스케줄 <ul style="list-style-type: none"> - 스케줄 추가 및 수정 : 삭제 및 동영상 촬영 여부 버튼 위치 변경(p56~58) 문의 <ul style="list-style-type: none"> - 문의 리스트 : 문의 명 삭제, 문의 내용 추가(p60) - 문의 상세 : 운동 명 위치 변경(p61~64) 계정정보 <ul style="list-style-type: none"> - 정보 수정 : 직접 입력 입력박스 문구 변경(P78,80) - 회원탈퇴 : 문구 변경 및 버튼 추가(P81) 	유병규
2021.11.30	1.6.5	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 로그인 - 알럿 메시지 링크 추가(p6) 홈 - 재활 달성도 : 질환 삭제(p20) 환자 정보 - 운동 기록 : 환자 미연결 시 문구 변경(p34) 문의 - 문의 상세 : 생년월일 추가(P61~64) 	유병규
2021.12.02	1.6.6	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 보행 결과 화면 UI 수정: 디자인 sync, 계산식 추가(p31,p37,p38) 	제갈훈
2021.12.14	1.6.7	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> HCP App UI sync 	제갈훈
2021.12.16	1.6.8	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 환자-검색 입력 칸 안내 문구 추가 	유병규
2021.12.20	1.6.9	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> UI 수정: HCP-W-06-6, HCP-W-06-8 Description 보완: HCP-W-06-7, HCP-W-06-9 	제갈훈

날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.12.29	1.7.0	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> HCP App UI sync: HCP-W-06-1 고려대병원 요구사항 반영 - 운동 Session 및 activity 추가: 	제갈훈
2022.01.04	1.7.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 서비스 이용 관련 동의 항목 재정의: 앱 서비스 이용약관 동의,개인정보 수집 및 이용 동의, 개인정보 처리방침, 마케팅 정보 수신 동의 	제갈훈
2022.01.12	1.7.2	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> HCP App UI sync UI 수정: HCP-W-02 문진 수정 기능 추가 Session 및 운동 용어 통일 Heel Session 삭제 검사 결과 가이드 추가 	제갈훈
2022.01.19	1.7.3	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> Heel Session 복원 	제갈훈
2022.01.27	1.7.4	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> HCP App 및 퍼블리싱 UI sync 환자 계정 연결 일자 UI 추가: HCP-W-05, HCP-W-05-4 	제갈훈
2022.01.28	1.7.5	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 스케줄 > 부분부하 	정수화
2022.02.04	1.7.6	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 동료검토 후 보완 	정수화

2022.01.12 수정

2022.01.19 수정

2022.01.27 수정

2022.01.28 수정

2022.02.04 수정

로그인

Page Description	로그인	Screen ID	HCP-W-01	Description
<div> <div>NEUROGAIT</div> <div>로그인</div> <div>아이디</div> <div>1비밀번호</div> <div>계정 코드</div> <div>2 <div>○ 자동 로그인</div> <div>3아이디를 잊으셨나요?</div> <div>4비밀번호를 잊으셨나요?</div> <div>5회원가입</div> <div>6로그인</div> </div> </div>				<p>오프라인에서 계정이 생성된 의료진에 한해서 사용 가능</p> <ol style="list-style-type: none"> 이메일, 비밀번호, 계정 코드 입력 비밀번호 마스킹 처리 클릭 시 자동 로그인 활성화 자동 로그인 설정 후 로그인 시 로그인 화면 skip 아이디 찾기 페이지로 이동 비밀번호 재설정하기 페이지로 이동 회원가입 페이지로 이동 이메일, 비밀번호, 계정 코드 체크 정보가 맞을 경우 메인 화면으로 이동 정보가 맞지 않을 경우 알럿 메시지 출력 (알럿 메시지 확인은 아래 url 참고) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276
<div> <div> <div>SALTED</div> <div> 사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호 대표자 : 조형진 개인정보보호 책임자 : 김대성 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F © Copyright 2021 SALTED.LTD </div> </div> <div> <div>CES</div> <div>Consumer Technology Association</div> </div> <div> <div>ISPO</div> <div>Munich</div> </div> </div>				6

회원 가입

Page Description	회원 가입 > 국가 선택	Screen ID	HCP-W-01-7	Description
<div data-bbox="20 89 229 158">P2</div>	<div data-bbox="229 89 1160 1389"><div data-bbox="229 89 1160 158">NEUROGAIT</div><div data-bbox="229 158 1160 1389"><div data-bbox="229 158 1160 187">국가를 선택해 주세요.</div><div data-bbox="229 187 1160 668"><div data-bbox="229 187 1160 215">1</div><div data-bbox="229 215 1160 668"><div data-bbox="229 215 1160 668">국가를 선택해 주세요.</div><div data-bbox="229 668 1160 696">▼</div></div></div><div data-bbox="229 668 1160 1389"><div data-bbox="229 668 1160 1389"><div data-bbox="229 668 1160 1389">다음</div></div></div></div></div>			<div data-bbox="1560 89 2051 1389"><div data-bbox="1560 89 2051 1389"><div data-bbox="1560 89 2051 1389">1. 국가 선택</div><div data-bbox="1560 132 2051 189"><div data-bbox="1560 132 2051 161">- 국내/국외 선택에 따라 회원가입 화면 변경 됨</div><div data-bbox="1560 161 2051 189">- 국가 : 한국, 한국 외</div></div></div></div>
<div data-bbox="20 1389 229 1418"><div data-bbox="20 1389 229 1418">SALTED</div></div>	<div data-bbox="229 1389 1160 1418"><div data-bbox="229 1389 1160 1418">사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호 대표자 : 조형진 개인정보보호 책임자 : 김대성 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F © Copyright 2021 SALTED.LTD</div></div>	<div data-bbox="1160 1389 1305 1418"><div data-bbox="1160 1389 1305 1418">CES Consumer Technology Association</div></div>	<div data-bbox="1305 1389 1560 1418"><div data-bbox="1305 1389 1560 1418">ISPO Munich</div></div>	<div data-bbox="1560 1389 2051 1418"><div data-bbox="1560 1389 2051 1418">App UI 및 퍼블리싱 Sync (2022.01.27)</div></div>

NEUROGAIT

회원가입

- 1 **이름*** 이름을 띄어쓰기 없이 입력해 주세요. a
- 2 **이메일*** 업무에 사용하시는 이메일 주소를 입력해 주세요.
- 3 **비밀번호*** 영문, 숫자, 특수문자를 조합하여 8자 이상 입력해 주세요. b
- 4 **휴대폰 번호** '-' 없이 숫자만 입력해 주세요.
- 5 **계정 코드*** 계정코드를 입력해 주세요.
- 6 **직군***

의료진

물리치료사

운동치료사

직접 입력

진료과를 직접 입력해 주세요.

- 7 [필수] **이용약관**에 동의합니다.
 - ☐ [필수] 개인정보 처리방침에 동의합니다.
 - ☐ [필수] 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.
 - ☐ [선택] 마케팅 정보 수신에 동의합니다.

- 8

회원가입

- a. 클릭 전 입력 값에 대한 안내 문구 출력
클릭 후 안내 문구 사라지며 키패드 노출
1. 띄어쓰기, 숫자, 특수문자, 이모지 입력 불가
2. 이메일 주소 유효성 검사: '@','/'으로 확인
- 유효성이 맞지 않는 이메일 입력 시 알럿 메시지 출력
3. 비밀번호 입력 시 문자가 보이고 가려짐 (기본 비밀번호는 마스킹 처리됨)
b. 비밀번호보기 off 상태, on일 경우 비밀번호 보여짐
4. 숫자만 입력 가능, 이외 문자 입력 불가
5. 계정 코드 입력
6. 1) 의사 선택 시 근무과 입력란 활성화
2) 근무과 입력창에는 숫자, 특수문자, 이모지 입력 불가
3) 직접 입력 선택 시 진료과 입력란 활성화 (직군에 따른 별도 권한 분리 없음)
4) 기타 직군 입력창에는 특수문자, 이모지 입력 불가
7. 클릭 시 해당 약관 내용 안내(팝업 /이후 페이지 참조) / 입력한 데이터는 임시저장되어 삭제되지 않음
8. 텍스트 클릭 시 해당 약관 안내 페이지로 출력(팝업/페이지)
9. 입력필드에 값이 모두 채워진 경우 버튼이 활성화 됨
오입력된 내용이 없는 경우 가입완료 절차 진행
오입력된 항목이 있는 경우 클릭 시 알럿 메시지 출력
(알럿 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276
완료 후 로그인 화면으로 이동
10. 로그인 화면으로 이동

P2

NEUROGAIT

회원가입

이름* 이름을 띄어쓰기 없이 입력해 주세요.

1

성* 성을 띄어쓰기 없이 입력해 주세요.

a

2

이메일* 업무에 사용하시는 이메일 주소를 입력해 주세요.

3

비밀번호* 영문, 숫자, 특수문자를 조합하여 8자 이상 입력해 주세요.

b

4

휴대폰 번호 숫자만 입력해 주세요.

5

계정 코드* 계정코드를 입력해 주세요.

6

직군*

7

☐ [필수] 이용약관에 동의합니다.☐ [필수] 개인정보 처리방침에 동의합니다.☐ [필수] 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.☐ [선택] 마케팅 정보 수신에 동의합니다.

8

회원가입

a. 클릭 전 입력 값에 대한 안내 문구 출력
클릭 후 안내 문구 사라지며 키패드 노출1. 띄어쓰기, 숫자, 특수문자, 이모지 입력 불가
2. 이메일 주소 유효성 검사: '@','/'으로 확인
- 유효성이 맞지 않는 이메일 입력 시 알럿 메시지 출력3. 비밀번호 입력 시 문자가 보이고 가려짐
(기본 비밀번호는 마스킹 처리됨)b. 비밀번호보기 off 상태, on일 경우
비밀번호 보여짐4. 국가 코드 선택, 숫자만 입력 가능, 이외
문자 입력 불가

5. 계정 코드 입력

6. 1) 의사 선택 시 근무와 입력란 활성화
2) 근무와 입력창에는 숫자, 특수문자, 이모지
입력 불가3) 직접 입력 선택 시 진료과 입력란 활성화
(직군에 따른 별도 권한 분리 없음)4) 기타 직군 입력창에는 특수문자, 이모지
입력 불가7. 클릭 시 해당 약관 내용 안내(팝업 /이후
페이지 참조) / 입력한 데이터는
임시저장되어 삭제되지 않음8. 입력필드에 값이 모두 채워진 경우 버튼이
활성화 됨
오입력된 내용이 없는 경우 가입완료 절차
진행오입력된 항목이 있는 경우 클릭 시 알럿
메시지 출력
(알럿 메시지 확인은 아래 url 참고)https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

완료 후 로그인 화면으로 이동

9. 로그인 화면으로 이동

서비스 이용 약관

개인정보 처리방침

개인정보 수집 및 이용 동의

마케팅 정보 수신 동의

아이디 찾기

NEUROGAIT

이메일 찾기

1

이름

회원가입 시에 입력한 이름을 띄어쓰기 없이 입력해 주세요.

휴대폰 번호

'-' 없이 숫자만 입력해 주세요.




a

- * 입력하신 정보에 맞는 이메일을 찾을 수 없습니다.
- * 연구용 계정의 경우 고객센터로 연락해 주시기 바랍니다.

2

이메일 찾기

- 이름, 전화번호 입력
 - 중복되는 정보가 없을 경우 가이드 출력
- 클릭 시 페이지 이동, 입력한 정보와 중복되는 이메일 주소 출력

Page Description	이메일 찾기 > 성공	Screen ID	HCP-W-01-2	Description
<div><div>NEUROGAIT</div><div><div>1</div><div>000 님의 이메일은 다음과 같습니다. 개인정보 보호를 위해 일부 정보가 가려집니다.</div></div><div><div>2</div><div>emailaddr***@neurogait.io</div></div><div><div>3</div><div>비밀번호를 잊으셨나요?</div></div><div><div>4</div><div>로그인 화면으로 이동</div></div></div>				<div><div>1. 출력되는 메일 계정의 이름 출력</div><div>2. 이메일 정보 출력</div><div>3. 클릭 시 비밀번호 로그인 화면으로 이동</div><div>4. 클릭 시 로그인 화면으로 이동</div></div>
<div><div>사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호 대표자 : 조형진 개인정보보호 책임자 : 김대성 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F © Copyright 2021 SALTED.LTD</div><div>CESConsumer Technology Association</div><div>ISPO Munich</div></div> <div><div>App UI Sync (2022.01.12)</div></div>				

비밀번호 재설정

NEUROGAIT

비밀번호 재설정

이메일	업무에 사용하시는 이메일 주소를 입력해 주세요.	재설정 코드 받기
1 새 비밀번호	영문, 숫자, 특수문자를 조합하여 8자 이상 입력해 주세요.	2
재설정 코드	이메일로 전송된 코드값을 입력하세요.	

* 연구용 계정의 경우 고객센터로 연락해 주시기 바랍니다.

비밀번호 변경

1. 비밀번호 마스킹 처리
2. 클릭 시 마스킹 해제
3. 모든 항목을 입력하고 오입력이 없을 경우 비밀번호 변경 버튼 활성화 및 비밀번호 설정 완료
4. 입력된 이메일로 인증 메일 발송
이메일 오입력 시 인증받기 버튼 클릭 후 알럿 메시지 출력
(알럿 메시지는 이후 페이지 참조)

App UI Sync
(2022.01.12)

App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

로그인 정보 오입력 시 알럿 메시지

구분	상황	메시지
로그인	기타 오류로 인한 로그인 실패	로그인에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.
	인증되지 않은 이메일	아직 메인 인증이 완료되지 않았습니다. 가입하신 주소로 발송된 인증 메일로 계정을 활성화해주세요.
	유효하지 않은 비밀번호	이메일이나 비밀번호가 맞지 않습니다.
	유효하지 않은 이메일	
	통신 오류로 인한 로그인 실패	통신에 연결되어 있는지 확인해 주세요.
비밀번호 재설정	만료된 재설정 코드 입력	만료된 재설정 코드를 다시 받아 진행해 주세요.
	유효하지 않은 재설정 코드 입력	유효하지 않은 재설정 코드입니다. 코드를 다시 확인해 주세요.
회원가입	기타 오류로 인한 계정 생성 실패	계정 생성에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.
	통신 오류로 인한 계정 생성 실패	계정 생성에 실패했습니다. 네트워크에 연결되어 있는지 확인해 주세요.
	유효하지 않은 비밀번호 입력	비밀번호가 조건을 충족하지 않습니다.

Google Drive Message List 참고:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

101

SALTED

5 000님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

1 오늘의 일정을 바로 확인하세요.

전체 환자

22명

전체 운동 달성률

80%

* 작일 기준

답변한 문의

22/50


* 10/28 - 11/3 기준

주간 운동 달성률

1 검색어를 입력하세요

검색

no	이름	생년월일	최근 검사	등록일자
12	홍길동	1990.00.00	2021.00.00	2021.08.01
11	김철수	1980.00.00	2021.00.00	2021.07.31
10	김영희	1992.00.00	2021.00.00	2021.07.30
9	이장군	1973.00.00	2021.00.00	2021.07.30
8	박성준	1964.00.00	2021.00.00	2021.07.30
7	이성계	1965.00.00	2021.00.00	2021.07.30
6	최민수	1975.00.00	2021.00.00	2021.07.30
5	김도영	1965.00.00	2021.00.00	2021.07.30

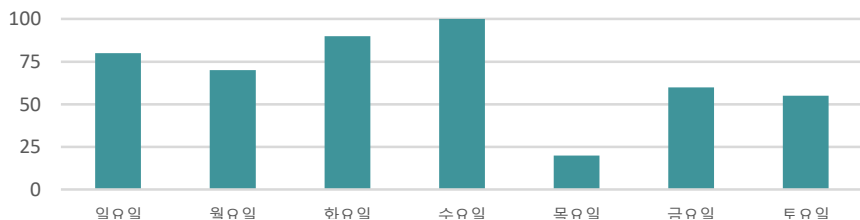

2 스케줄

오늘

◀ 9월 ▶

일	월	화	수	목	금	토
29	30	31	1	2	3	4
				7명	8명	
5	6	7	8	9	10	11
		6명	5명	2명	10명	
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
	5명	3명	2명	8명		

3 오늘의 운동 현황

신규 스케줄 추가

10	홍길동	#개	달성률 ##%	▶
9	사공민아	#개	달성률 ##%	▶
8	김민준	#개	달성률 ##%	▶
7	김민지	#개	달성률 ##%	▶
6	이무개	#개	달성률 ##%	▶

1. 카드 데이터

- 전체 환자 수 : 의료진에게 진료 받고 있는 전체 환자 수
- 운동 달성도 : 전일 기준 전체 운동 달성도 퍼센트 표시
- 환자 문의 답변 : 금주 기준 환자의 프로그램에 작성된 문의에 대한 답변완료 수

2. 재활 스케줄

- 월별 스케줄 표시
- > 스케줄 관리에 등록된 재활 스케줄 동일하게 표현
- > 오늘 날짜 표시
- > 오늘 버튼 선택 시 오늘 날짜로 캘린더 이동
- 날짜 선택 시 캘린더 하단에 선택한 스케줄 표시

3. 오늘 스케줄

- default 금일 운동 스케줄 정보 표시
- 캘린더에서 다른 요일 선택 시 선택된 요일의 스케줄 표시
- 신규 스케줄 추가를 이용하여 스케줄 추가
- > 스케줄 화면으로 이동
- 선택한 날짜에 스케줄이 없을 경우 문구 표시

4. 주간 운동 달성률 차트(환자)

- 리스트에서 선택된 환자의 7일간 재활 달성도 표시
- 리스트 : 최근 검사 날짜 순으로 표시
- 리스트에서 국가에 따른 이름 구분
- > 한국 : 이름 표시
- > 국외 : 이름 + 성 표시
- default : 최근 진단 날짜의 환자 표시
- 검색어 조회를 통한 환자 조회 기능
- > 검색 조건 : 이름, 성

5. 의료진 명

- 한국 : 이름 전체 표시
- 한국 외 : 이름, 성 순서로 표시

운동 달성률 UI 수정
(2022.01.12)App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

오늘의 일정을 바로 확인하세요.

전체 환자

22명

전체 운동 달성률

80%

* 작일 기준

답변한 문의

22/50

* 10/28 - 11/3 기준

주간 운동 달성률

검색어를 입력하세요

검색

no	이름	생년월일	최근 검사	등록일자
12	홍길동	1990.00.00	2021.00.00	2021.08.01
11	김철수	1980.00.00	2021.00.00	2021.07.31
10	김영희	1992.00.00	2021.00.00	2021.07.30
9	이장군	1973.00.00	2021.00.00	2021.07.30
8	박성춘	1964.00.00	2021.00.00	2021.07.30
7	이성계	1965.00.00	2021.00.00	2021.07.30
6	최민수	1975.00.00	2021.00.00	2021.07.30
5	김도영	1965.00.00	2021.00.00	2021.07.30

4

달성률을 조회할 환자 분을 위에서 선택해 주세요.

스케줄

오늘

◀ 9월 ▶

일	월	화	수	목	금	토
29	30	31	1	2	3	4
				7명	8명	
5	6	7	8	9	10	11
		6명	5명	2명	10명	
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
	5명	3명	2명	8명		

3

오늘의 운동 현황

신규 스케줄 추가

등록된 스케줄 및 운동이 없습니다.

- 오늘 스케줄
- 선택한 날짜에 스케줄이 없을 경우 문구 표시
- 주간 운동 달성률 차트(환자)
- 환자 미선택 시 문구 출력

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

Page Description		Screen ID	HCP-W-02-1	Description
<div><div>1</div><div><div>title</div><div>Body 영역</div><div>버튼 1 버튼 2</div></div></div> <div><div>2</div><div><div>title</div><div>Body 영역</div><div>버튼 1</div></div></div>				<div><div>1. 팝업1</div><div>- 버튼 2개인 팝업</div><div>2. 팝업2</div><div>- 버튼 1개인 팝업</div></div> <div>팝업 사이즈는 디자인 시 협의</div>

환자



ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

손쉽게 환자를 관리할 수 있습니다.

1

이름or생년월일(8자리)을 입력해주세요

검색

2

NO	이름	생년월일	운동 달성률	최근 검사	등록일자
38	홍길동	1900.00.00	##%	2021.07.28	2021.08.02
37	사공민아	1900.00.00	##%	2021.07.29	2021.08.01
36	김민준	1900.00.00	##%	2021.07.30	2021.08.01
35	김민지	1900.00.00	##%	2021.07.31	2021.07.31
34	이무개	1900.00.00	##%	2021.08.01	2021.07.30
33	제갈훈	1900.00.00	##%	2021.08.02	2021.07.30
32	유병규	1900.00.00	##%	2021.08.01	2021.07.30
31	박지혜	1900.00.00	##%	2021.08.02	2021.07.30
30	김상환	1900.00.00	##%	2021.08.01	2021.07.30
29	정수화	1900.00.00	##%	2021.08.02	2021.07.30

<<
 <
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 >
 >>

- 검색 조건
 - 이름, 생년월일
- 리스트
 - 이름, 생년월일, 운동 달성률, 최근진단, 등록일자 표시
 - 리스트에서 국가에 따른 이름 구분
 - > 한국 : 이름 표시
 - > 국외 : 이름 표시(성 제외)
 - 리스트 기준 최근 등록일자 기준
 - 리스트에서 환자 선택 시 환자 상세 정보 화면으로 이동



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

환자 정보

1

일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드	W1234	성별	남자
이름	제갈훈	국가	한국
		거주지	서울
생년월일	1991.01.01	휴대폰 번호	010-1234-5678
이메일	Salted@gmail.com	연결일자	아직 환자와 연결되지 않았습니다.
메모	메모를 작성해 주세요. 편집		

2

신체 정보

키	180.x cm
체중	79.xkg
발 사이즈	175.xcm
다리 길이(왼쪽)	90.xcm
다리 길이(오른쪽)	95.xcm

3

문진	Upright Posture	촬영 검사	운동 기록	0000-00-00	00:00:00	조회
----	-----------------	-------	-------	------------	----------	----

4

최근 작성 : 2021.11.02

수정

1. 환자분에게 해당하는 가족력을 모두 선택해 주세요.

없음	고혈압	당뇨	뇌혈관 질환	심장질환	골다공증	암	기타
----	-----	----	--------	------	------	---	----

2. 병원 진단이나 수술을 받은 이력이 있다면 모두 선택해 주세요.

없음	근골격계 질환	심혈관계 질환	호흡계 질환	신경계 질환	내분비계 질환	디스크 질환	기타
----	---------	---------	--------	--------	---------	--------	----

직접 입력

6

▼ 스크롤

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



- 일반 정보
 - 등록일자 표시
 - 환자 코드, 이름, 생년월일, 성별, 국적, 거주지, 연락처, 이메일 표시
 - 메모한 내용 출력
 - > 환자 매칭 시 patient app과 HCP APP에서 마지막으로 작성한 정보로 업데이트
- 신체 정보
 - 키, 몸무게, 발사이즈, 다리길이 표시
- HCP APP 정보
 - 의사가 HCP APP에서 등록 및 측정한 정보 표시
 - 문진, Upright Posture, 촬영 검사
 - 정보가 없을 경우 해당 블록 미표시
- 문진
 - 최근 문진 작성일 기준으로 표시
 - 최근 문진 표시
 - "수정" 버튼 클릭 시 문진 수정 가능
- 날짜 선택
 - 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능
 - > 데이터 없는 날짜 선택 불가
- 운동 정보
 - HCP APP 정보 하단에 patient app에서 실행한 운동 정보 표시
 - 환자와 매칭 되지 않았을 경우 매칭 버튼 표시
- 수정
 - 해당 버튼 클릭 시 환자 정보 수정 화면으로 이동
 - 환자 정보 및 신체 정보 수정
- 삭제
 - patient app과 연결이 되어 있을 경우 patient app과 연결 끊고, 환자 삭제
 - 해당 버튼 클릭 시 삭제 팝업 표시
- 문진 수정화면으로 이동

1. App UI Sync
 2. 문진 수정 기능 추가
 3. 회원 정보>메모 추가
 (2022.01.12)

연결일자 UI 추가
 (2022.01.27)

P2



ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

환자 정보

1

일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드	W1234	성별	남자
이름	훈	국가	한국
성	제갈	거주지	서울
생년월일	1991.01.01	휴대폰 번호	010-1234-5678
이메일	Saltded@gmail.com	연결일자	2021.00.00
메모	입력한 메모 내용이 출력됩니다.		

편집

2

신체 정보

키	180.x cm
체중	79.xkg
발 사이즈	175.xcm
다리 길이(왼쪽)	90.xcm
다리 길이(오른쪽)	95.xcm

삭제

8

연결 끊기

3

문진

Upright Posture

촬영 검사

운동 기록

5

0000-00-00



00:00:00



조회

최근 작성 : 2021.11.02

수정

4

1. 환자분에게 해당하는 가족력을 모두 선택해 주세요.

없음

고혈압

당뇨

뇌혈관 질환

심장질환

골다공증

암

기타

2. 병원 진단이나 수술을 받은 이력이 있다면 모두 선택해 주세요.

없음

근골격계 질환

심혈관계 질환

호흡계 질환

신경계 질환

내분비계 질환

디스크 질환

기타

직접 입력

6

▼ 스크롤

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



- 일반 정보
 - 등록일자 표시
 - 환자 코드, 이름, 성, 생년월일, 성별, 국적, 거주지, 연락처, 이메일 표시
 - > 환자 매칭 시 patient app과 HCP APP에서 마지막으로 작성한 정보로 업데이트
- 신체 정보
 - 키, 몸무게, 발사이즈, 다리길이 표시
- HCP APP 정보
 - 의사가 HCP APP에서 측정한 정보 및 환자 운동 기록 표시
 - 문진, Upright Posture, 촬영 검사, 운동 기록
- 문진
 - 최근 문진 작성일 기준으로 표시
 - 최근 문진 표시
- 날짜 선택
 - 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능
 - > 데이터 없는 날짜 선택 불가
- 운동 정보
 - HCP APP 정보 하단에 patient app에서 실행한 운동 정보 표시
 - 환자와 매칭 되지 않았을 경우 매칭 버튼 표시
- 삭제
 - patient app과 연결이 되어 있을 경우 patient app과 연결 끊고, 환자 삭제
 - 해당 버튼 클릭 시 삭제 팝업 표시
- 연결 끊기
 - patient app과 연결 끊음
 - 매칭 하지 않았을 경우 미노출
- 문진 수정화면으로 이동

1. App UI Sync
 2. 문진 수정 기능 추가
 3. 회원 정보>메모 추가
 (2022.01.12)

연결일자 UI 추가
 (2022.01.27)

Page Description	홈 > 환자 > 환자 정보 > 문진 선택	Screen ID	HCP-W-05-4	Description	
<div><div>문진</div><div>Upright Posture</div><div>촬영 검사</div><div>운동 기록</div><div>0000-00-00</div><div></div><div>00:00:00</div><div>▼</div><div>조회</div></div> <div>최근 작성 : 2021.11.02<div>수정1</div></div> <div>3. 지난 일주일 동안 격렬한 신체활동(무거운 물건 나르기, 달리기, 빠른 속도로 자전거 타기 등)을 며칠 하셨나요?<div><div>안 함</div><div></div></div><div>4. 3번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?<div><div>___ 시간 ___ 분</div><div>확실하지 않음</div></div><div>5. 지난 일주일 동안 중간 정도의 신체활동(가벼운 물건 나르기, 복식 테니스, 중간 속도로 자전거 타기 등)을 며칠 하셨나요?<div><div>안 함</div><div></div></div><div>6. 5번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?<div><div>___ 시간 ___ 분</div><div>확실하지 않음</div></div><div>7. 지난 일주일 동안 10분 이상 걸은 날은 며칠인가요?<div><div>안 함</div><div></div></div><div>8. 7번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?<div><div>___ 시간 ___ 분</div><div>확실하지 않음</div></div><div>9. 지난 일주일 동안 하루에 평균 몇 시간을 앉아 계시나요?<div><div>___ 시간 ___ 분</div><div>확실하지 않음</div></div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>1. 문진 클릭 시 수정 가능 문진 수정은 최근 1건에 대해서만 가능</div> <div>App UI Sync 문진 수정 버튼 추가 (2022.01.12)</div>

Page Description	홈 > 환자 > 환자 정보 > Upright Posture 선택	Screen ID	HCP-W-06-1	Description
<div> <div>문진</div> <div>Upright Posture</div> <div>촬영 검사</div> <div>운동 기록</div> </div> <div> <div>2</div> <div>0000-00-00</div> <div></div> <div>00:00:00</div> <div>▼</div> <div>조회</div> </div> <p>* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.</p> <div> <div>메모: 촬영 시 입력한 메모 내용이 출력됩니다. 메모메모메모메모메모</div> <div>편집</div> </div> <div> <div>1</div> <div>최근 촬영 : 2021.11.02</div> </div> <div> <div>정면</div> <div>측면</div> </div> <div> <div> <div> <div>●□ 정상(이상 없음)</div> <div>○□ 전신 왼쪽 편중</div> <div>○□ 전신 오른쪽 편중</div> <div>○□ 어깨 불균형</div> <div>○□ 골반 불균형</div> <div>○□ O다리</div> <div>○□ X다리</div> </div> <div> <div>○□ 정상(이상 없음)</div> <div>○□ 거북목</div> <div>○□ 일자목</div> <div>●□ 골반 전방 변위</div> <div>○□ 골반 후방 변위</div> </div> </div> <div> <div>후면</div> </div> <div> <div> <div>●□ 정상(이상 없음)</div> <div>●□ 견갑골 회전</div> <div>○□ 상부 척추 불균형</div> <div>○□ 하부 척추 불균형</div> </div> </div> <div> <div>▼ 스크롤</div> </div> </div>				<div> <div>1. Upright Posture</div> <div>- 최근 검사된 화면 표시</div> <div>- 최근 검사 날짜 표시</div> <div>- HCP APP에서 촬영된 화면 및 항목 표시</div> <div>> 화면 클릭 시 화면 팝업으로 표시</div> <div>2. 날짜 선택</div> <div>- 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능</div> <div>> 데이터 없는 날짜 선택 불가</div> <div>- 조회 선택 시 최근 검사 날짜 삭제</div> </div> <div> <div>App UI Sync (2022.01.12)</div> <div>App UI Sync (2022.01.27)</div> </div>

▲ 스크롤

문진

Upright
Posture

촬영 검사

운동 기록

2 0000-00-00

00:00:00

조회

1 최근 검사 : 2021.11.02

3 Ankle

Heel

Sarcopenia

Balance

Gait

Partial Weight
Bearing


* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.

4 메모: 촬영 시 입력한 메모 내용이 출력됩니다. 메모메모메모메모메모

편집


운동명

5

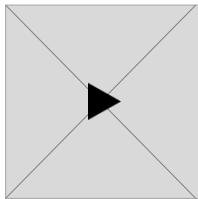


결과지는 준비중에 있습니다.

Max ev- & Inversion

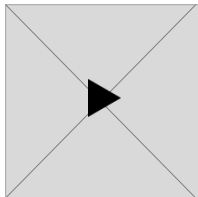

결과지는 준비중에 있습니다.

Single Leg Balance

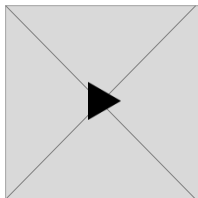

결과지는 준비중에 있습니다.

a

Ankle 메모

촬영 시 입력한 메모
내용이 출력됩니다.
메모메모메모메모메모

취소 | 저장

1. 촬영 검사

- 최근 검사된 화면 표시
- 최근 검사 날짜 표시
- HCP APP에서 촬영된 화면 및 항목 표시
- > 검사 :

* Ankle: 10 m Walking, Max ev- & Inversion, Single Leg Balance, Single Leg Lift, One Leg Squat, Single Leg Hop, Two Leg Jump, Side Step

* Heel: Double Heel Raise, Single Heel Raise

* Sarcopenia: 6 min Walking, Sit-to-stand, Timed Up & Go

* Balance: 제자리 서기, 스쿼트, 원발 외발서기, 오른발 외발서기, 까치발, 계단 오르기/내리기, 의자에서 앉기/서기

* Gait: Gait, 원발 부분부하, 오른발 부분부하

2. 날짜 선택

- 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능
- > 데이터 없는 날짜 선택 불가

3. 촬영 검사 콘텐츠 탭:

- Ankle 선택 기본값

4. 메모 영역:

- session 촬영 당시 작성한 메모 내용 출력
- a. 편집 버튼 터치 시 메모 작성 창 팝업
- 알고리즘이 있는 운동의 경우 썸네일, 족저압, 밸런스 결과 출력
- 알고리즘이 없는 운동의 경우 촬영 동영상 썸네일만 출력
- 결과 상세화면으로 이동

1. App UI Sync
2. 검사 결과 가이드 추가 (2022.01.12)

Heel Session 복원
(2022.01.12)

▼ 스크롤

Page Description	홈 > 환자 > 환자 정보 > 촬영 검사 선택 -Partial Weight Bearing	Screen ID	HCP-W-06-12(1)	Description
<div> <div>▲ 스크롤</div> <div> <div>문진</div> <div>Upright Posture</div> <div>촬영 검사</div> <div>운동 기록</div> </div> <div> <div>2</div> <div>0000-00-00</div> <div></div> <div>0000-00-00</div> <div>▼</div> <div>조회</div> </div> </div> <div> <div>1</div> <div>최근 검사 : 2021.11.02</div> </div> <div> <div>3</div> <div> <div>Ankle</div> <div>Heel</div> <div>Sarcopenia</div> <div>Balance</div> <div>Gait</div> <div>Partial Weight Bearing</div> </div> </div> <div> <div>4</div> <div> <div>메모: 촬영 시 입력한 메모 내용이 출력됩니다. 메모메모메모메모메모</div> <div>편집</div> </div> </div> <div> <div>5</div> <div>Left Partial Weight Bearing</div> <div> <div>6</div> <div>총 00회의 잘못된 보행이 측정되었습니다.</div> <div>자세히</div> </div> </div> <div> <div>Right Partial Weight Bearing</div> <div> <div>총 00회의 잘못된 보행이 측정되었습니다.</div> <div>자세히</div> </div> </div>				<div>1. 촬영 검사</div> <div>- 최근 검사된 화면 표시</div> <div>- 최근 검사 날짜 표시</div> <div>- HCP APP에서 촬영된 화면 및 항목 표시</div> <div>> 검사 :</div> <div>* Ankle: 10 m Walking, Max ev- & Inversion, Single Leg Balance, Single Leg Lift, One Leg Squat, Single Leg Hop, Two Leg Jump, Side Step</div> <div>* Heel: Double Heel Raise, Single Heel Raise</div> <div>* Sarcopenia: 6 min Walking, Sit-to-stand, Timed Up & Go</div> <div>* Balance: 제자리 서기, 스쿼트, 원발 외발서기, 오른발 외발서기, 까치발, 계단 오르기/내리기, 의자에서 앉기/서기</div> <div>* Gait: Gait, 원발 부분부하, 오른발 부분부하</div> <div>2. 날짜 선택</div> <div>- 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능</div> <div>> 데이터 없는 날짜 선택 불가</div> <div>3. 촬영 검사 콘텐츠 탭:</div> <div>- Ankle 선택 기본값</div> <div>4. 메모 영역:</div> <div>- session 촬영 당시 작성한 메모 내용 출력</div> <div>5. 촬영 영상 표시</div> <div>- 영상 클릭 시 영상 플레이어 팝업 표시</div> <div>6. 입력 수치가 초과된 횟수 출력</div> <div>7. 선택한 날의 진행한 회수 출력</div>
<div>* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.</div>				<div>부분부하보행 결과 신규 화면 (2022.02.03)</div>

▲ 스크롤

문진

Upright
Posture

촬영 검사

운동 기록

0000-00-00



00:00:00



조회

1 최근 검사 : 2021.11.02

3

Ankle

Heel

Sarcopenia

Balance

Gait

Partial Weight
Bearing

* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.

4

메모: 입력된 메모가 없습니다.

편집

5

촬영한 운동이 없습니다.

촬영 검사를 새로 진행하여 본 세션을 다시 촬영할 수 있습니다.

1. 촬영 검사

- 최근 검사된 화면 표시
- 최근 검사 날짜 표시
- HCP APP에서 촬영된 화면 및 항목 표시
 - > 검사 :
 - * Ankle Func: 10 m Walking, Max ev- & Inversion, Single Leg Balance, Single Leg Lift, One Leg Squat, Single Leg Hop, Two Leg Jump, Side Step
 - * 6 min Walking, Sit-to-stand, Timed Up & Go
 - * Balance: 제자리 서기, 스쿼트, 원발 외발서기, 오른발 외발서기, 까치발, 계단 오르기/내리기, 의자에서 앉기/서기
 - * Gait: Gait, 원발 부분부하, 오른발 부분부하

2. 날짜 선택

- 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능
 - > 데이터 없는 날짜 선택 불가

3. 촬영 검사 콘텐츠 탭:

- Ankle 선택 기본값

4. 메모 영역:

- session 촬영 당시 작성한 메모 내용 출력
 - a. 편집 버튼 터치 시 메모 작성 창 팝업

App UI Sync
(2022.01.12)Heel Session 복원
(2022.01.12)

▲ 스크롤

문진

Upright
Posture

촬영 검사

운동 기록

2 0000-00-00



00:00:00



조회

1 최근 검사 : 2021.11.02

Ankle

Heel

Sarcopenia

Balance

Gait

Partial Weight
Bearing

* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.


3

메모: 촬영 시 입력한 메모 내용이 출력됩니다. 메모메모메모메모메모

편집

4

보행1

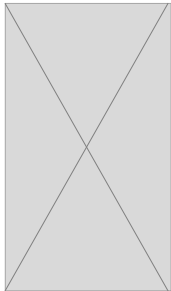

보행 분석

발을 끄는 경향이 있으며, 보행속도가 느린편입니다.
보행 안정성을 위해서 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로
걸어보세요.

좌/우 GCT 밸런스(ms)

오른쪽으로 치우침

원발 GCT
300오른발 GCT
280

보행 길이(cm)

보장(Step Length)

성인 평균 64~74cm

원발 00

오른발 00

활보장(Stride Length)

성인 평균 135~150cm

원발 오른발 합계 124

보행 주기

입각기

유각기

표준

60%

40%

원발

67%

33%

오른발

63%

37%

표준

원발

오른발

양발 지지기

Load Response

Pre Swing

양발 지지기

외발 서기

10%

10%

20%

40%

6%

32%

38%

28%

32%

6%

38%

16%

▼ 스크롤

1. 촬영 검사

- 최근 검사된 화면 표시
- 최근 검사 날짜 표시
- HCP APP에서 촬영된 화면 및 항목 표시
 - > 검사 : 보행, 제자리 서기, 스쿼트, 원발 외발 서기, 오른발 외발 서기

2. 날짜 선택

- 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능
 - > 데이터 없는 날짜 선택 불가

3. 메모 영역:

- session 촬영 당시 작성한 메모 내용 출력

4. 보행

- 촬영 영상, 보행 패턴, 보행분석, 좌/우 GCT 밸런스, 보행 길이, 보행 주기 표시
- 영상 클릭 시 영상 플레이어 팝업 표시
- 보행이 여러 개 일 경우 밑으로 보행 추가
 - a. 좌우 게이지: 가운데 50을 중심으로 좌우 최대 100의 게이지 채워짐
 - b. 도트 게이지: a 게이지 채워지는 정도에 맞춰 좌우 최대 6개가 채워짐
- * 기준(소수점 둘째 자리 버림):
 - 50~57.9 : ●, 58~66.9 : ●●,
 - 67~74.9 : ●●●, 75~82.9 : ●●●●,
 - 83~90.9 : ●●●●●, 91~100.0 : ●●●●●●


5. 제자리서기, 스쿼트

- 촬영 영상, cop 패턴, 평균 밸런스, 자세분석 표시
- 영상 클릭 시 영상 플레이어 팝업 표시

App UI Sync
(2022.01.12)Heel Session 복원
(2022.01.12)

▲ 스크롤

1 제자리 서기

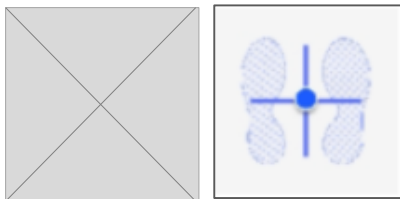

평균 밸런스


좌 : 우(표준 50 :50)
50 : 50앞 : 뒤(표준 40 :60)
47 : 53

자세 분석

올바른 밸런스를 보입니다.



1 스쿼트

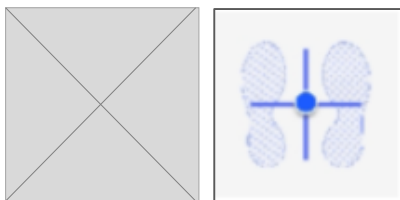

평균 밸런스


좌 : 우(표준 50 :50)
50 : 50앞 : 뒤(표준 40 :60)
47 : 53

자세 분석

올바른 밸런스를 보입니다.



2 왼발 외발서기

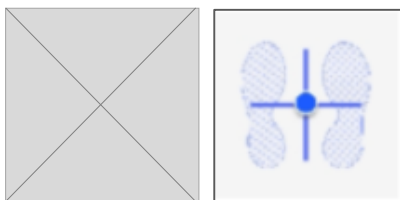

운동 데이터


흔들림 정도 (추천 : 10% 이하) 외발 서기 시간
7% 00초

자세 분석

올바른 밸런스를 보입니다.



2 오른발 외발서기

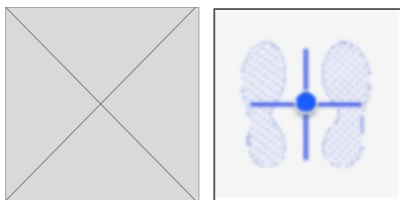

운동 데이터



흔들림 정도 (추천 : 10% 이하) 외발 서기 시간
7% 00초

자세 분석

올바른 밸런스를 보입니다.



1. 제자리서기, 스쿼트
 - 촬영 영상, cop 패턴, 평균 밸런스, 자세분석 표시
 - 영상 클릭 시 영상 플레이어 팝업 표시
2. 왼발/오른발 외발서기
 - 촬영 영상, cop 패턴, 흔들림 정도, 외발 서기 시간, 자세분석 표시
 - 영상 클릭 시 영상 플레이어 팝업 표시

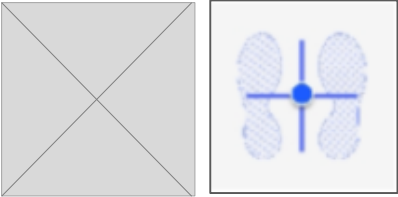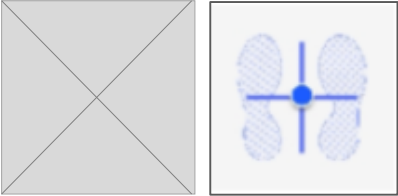Page Description	홈 > 환자 > 환자 정보 > 촬영 검사 선택 – Partial Weight Bearing	Screen ID	HCP-W-06-2(1)	Description
<div>▲ 스크롤</div> <div> <div> <div>1</div> <div>Left Partial Weight Bearing</div> <div>  </div> <div> <div> <div>2</div> <div>총 00회의 잘못된 보행이 측정되었습니다.</div> </div> <div> <div>평균 밸런스</div> <div> <div>좌 : 우(표준 50 :50)</div> <div>50 : 50</div> </div> <div> <div>앞 : 뒤(표준 40 :60)</div> <div>47 : 53</div> </div> </div> <div> <div>자세 분석</div> <div>올바른 밸런스를 보입니다.</div> <div> <div>평균</div> <div>100</div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Right Partial Weight Bearing</div> <div>  </div> <div> <div> <div>총 00회의 잘못된 보행이 측정되었습니다.</div> </div> <div> <div>평균 밸런스</div> <div> <div>좌 : 우(표준 50 :50)</div> <div>50 : 50</div> </div> <div> <div>앞 : 뒤(표준 40 :60)</div> <div>47 : 53</div> </div> </div> <div> <div>자세 분석</div> <div>올바른 밸런스를 보입니다.</div> <div> <div>평균</div> <div>100</div> </div> </div> </div> </div> </div>				<ol style="list-style-type: none"> 촬영 영상, cop 패턴, 평균 밸런스, 자세분석 표시 - 영상 클릭 시 영상 플레이어 팝업 표시 입력 수치가 초과된 횟수 출력
<div> <div>부분부하보행 결과 신규 화면 (2022.02.03)</div> </div>				

Page Description	영상 플레이어 팝업	Screen ID	HCP-W-06-11	Description
	<div><div>운동 영상</div><div><div></div><div><div><div><div></div><div>L 75%</div><div>R 25%</div><div>입력 데이터 ###</div><div><div>RIGHT</div><div>LEFT</div><div>L 80%</div><div>R 80%</div><div>TOE</div><div>HEEL</div><div>H 80%</div><div>T 80%</div></div></div></div></div><div><div>00:21</div><div></div><div>00:30</div></div></div></div>			-

영상 썸네일 터치 시 플레이어 팝업 출력

운동 영상

수술전 기준1
L###, 30%
R###, 70%

Left Partial
Weight
Bearing

L 75%

R 25%

입력 데이터 ###

00:21

00:30

화면 추가
(2022.02.04)

P2

▲ 스크롤

1

문진

Upright
Posture

촬영 검사

운동 기록

환자 분과 연결되지 않았습니다.

처방한 운동 기록을 확인하려면 아래 경로에서 환자 코드를 확인 후
"환자 데이터 연결"을 통해 환자의 데이터를 연결해 주세요.

환자 데이터 연결 코드 확인 방법
Patient App 로그인 > 설정 > 센터/병원 정보 > "데이터 연결" 버튼

2

환자 데이터 연결

3

데이터 코드 입력

취소

연결

4

환자 연결

'이름'과 연결 되었습니다.

확인

1. 운동 기록

- Patient APP 과 연결된 환자의 운동 기록 확인
- patient app과 연결 되지 않았을 경우 환자 데이터를 이용하여 연결하라는 문구 표시

2. 버튼

- 버튼 클릭 시 ③ 표시

3. 환자코드 입력 팝업

- 환자코드 입력칸 표시
- Patient APP의 환자코드 입력 후 확인 시 ④팝업 표시

4. 환자 연결 팝업

- Patient APP과 연결 성공 표시
- 확인 클릭시 화면 refresh

▲ 스크롤

문진

Upright
Posture

촬영 검사

운동 기록

1 등록된 스케줄 및 운동이 없습니다.

2

신규 스케줄 추가

- 운동 기록
 - 환자 스케줄이 등록 되지 않았을 경우 화면
- 신규 스케줄 추가
 - 해당 버튼 클릭 시 스케줄 화면으로 이동

▲ 스크롤

문진

Upright
Posture

촬영 검사

운동 기록

◀ 9월 ▶

일	월	화	수	목	금	토
29	30	31	1	2	3	4
			00개	00개	00개	00개
5	6	7	8	9	10	11
00개	00개	00개	00개	00개	00개	00개
12	13	14	15	16	17	18
00개	00개	00개	00개	00개	00개	00개
19	20	21	22	23	24	25
00개	00개	00개	00개	00개	00개	00개
26	27	28	29	30	1	2
00개	00개	00개	00개	00개		

[Balance] Stand in place

운동 진행 상태 : 진행중

운동 달성률: 00%

문의

답변하기

자세히 >

[session] 운동명

운동 진행 상태 : 완료

운동 달성률: 100%

문의

답변하기

촬영 영상 보기 >

[session] 운동명

운동 진행 상태 : 미진행

운동 달성률: 0%

문의

답변하기

- 운동 기록
 - 환자 스케줄이 등록되어 있을 경우 화면
- 스케줄
 - 월 달력 표시
 - 요일 하단 등록된 운동 수 표시
 - 오늘 날짜와 선택한 날짜 따로 구분
 - 운동 명, 운동 종류, 운동 진행 상태, 운동 달성률, 문의, 결과 보기 표시
 - 문의 내용 있을 경우 답변하기 버튼 활성화
 - > 답변하기 클릭 시 해당 문의글 답변 화면으로 이동
 - 결과보기 클릭 시 선택 운동 결과 화면으로 이동
- 알고리즘이 있는 운동의 경우 자세히 버튼 출력
 - 클릭 시 운동 상세 결과 화면으로 이동
- 알고리즘이 없는 운동의 경우 촬영 영상 보기 버튼 출력
 - 클릭 시 영상 플레이어 연결
- 알고리즘이 없는 운동 중 촬영 영상이 없는 경우 버튼 미노출

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1

Gait 결과

2021.00.00(OO요일)

* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.

2

전체

▼

3 운동 시간 13:55:00~14:55:00/8세트/22분 30초

4

걸음 수(단위 보) 1000

5

보행 분석

분당 걸음 수(단위 spm) 90

발을 끄는 경향이 있으며, 보행속도가 느린편입니다.
보행 안정성을 위해서 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로
걸어보세요.

6

좌/우 GCT 밸런스(ms)

오른쪽으로 치우침

원발 GCT
300오른발 GCT
280

7

보행 길이(cm)

보장(Step Length)

성인 평균 64~74cm

원발 00

오른발 00

활보장(Stride Length)

성인 평균 135~150cm

원발 오른발 합계 124

8

보행 주기

입각기

유각기

표준

60%

40%

원발

67%

33%

오른발

63%

37%

표준

양발 지지기		양발 지지기		외발 서기	
Load Response	Pre Swing	Load Response	Pre Swing	Load Response	Pre Swing
10%	10%	20%	40%	20%	40%
6%	32%	38%	28%	38%	28%
32%	6%	38%	16%	38%	16%

9

목록

- 선택된 날짜의 운동 결과 표시
- 시간 선택
 - 전체, Gait 운동을 한 시간 선택
 - Gait 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 Gait 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : Gait 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, Gait 운동 세트 표시, 오늘 총 Gait 운동 시간
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, Gait 운동 시간 표시
- 걸음 데이터
 - 운동 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 보행 분석
 - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
- 좌우 GCT 밸런스
 - 좌우 게이지: 가운데 50을 중심으로 좌우 최대 100의 게이지 채워짐
 - 도트 게이지: a 게이지 채워지는 정도에 맞춰 좌우 최대 6개가 채워짐

* 기준(소수점 둘째 자리 버림):
 50~57.9 : ●, 58~66.9 : ●●,
 67~74.9 : ●●●, 75~82.9 : ●●●●,
 83~90.9 : ●●●●●, 91~100.0 : ●●●●●●
- 보행 길이
 - 신규 인솔에서 제공하는 데이터
 - 신규 인솔 판매 전까지 미표시
- 보행 주기
 - 운동 시간 내 보행 주기 표시
- 목록
 - 이전화면으로 돌아가기

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 언주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1. App UI Sync
 2. 검사 결과 가이드 추가
 (2022.01.12)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃


홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

Gait 결과

2021.00.00(OO요일)

* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.

1 00세트 2 운동 시간 13:55:00~13:59:10/4분10초

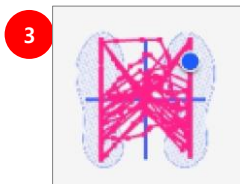

영상 보기

4 걸음 수 1000

분당 걸음 수 90spm

보행 분석

발을 끄는 경향이 있으며, 보행속도가 느린편입니다.
보행 안정성을 위해서 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로
걸어보세요.

6 좌/우 GCT 밸런스(ms)

오른쪽으로 치우침

원발 GCT
300오른발 GCT
280

보장(Step Length)

성인 평균 64~74cm

원발 00 오른발 00

활보장(Stride Length)

성인 평균 135~150cm

원발 오른발 합계 124

8 보행 주기

입각기

유각기

표준

60%

40%

원발

67%

33%

오른발

63%

37%

표준

양발 지지기

Load Response Pre Swing

10% 10%

원발

6% 32%

오른발

32% 6%

양발 지지기

외발 서기

20% 40%

원발 6% 38%

오른발 38% 16%

9 목록

- 시간 선택
 - 전체, Gait 운동을 한 시간 선택
 - Gait 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 Gait 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : Gait 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 세트 표시, 오늘 총 보행 운동 시간
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 시간 표시
- 압력 중심 이동 패턴
 - 운동 시간 동안 압력 중심 이동 패턴 표시
 - 영상 보기 클릭 시 영상(죽어잡or동영상) 팝업 표시
- 걸음 데이터
 - 운동 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 보행 분석
 - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
- 좌우 GCT 밸런스
 - 좌우 게이지: 가운데 50을 중심으로 좌우 최대 100의 게이지 채워짐
 - 도트 게이지: a 게이지 채워지는 정도에 맞춰 좌우 최대 6개가 채워짐

* 기준(소수점 둘째 자리 버림):
 50~57.9 : ●, 58~66.9 : ●●,
 67~74.9 : ●●●, 75~82.9 : ●●●●,
 83~90.9 : ●●●●●, 91~100.0 : ●●●●●●
- 보행 길이
 - 신규 인솔에서 제공하는 데이터
 - 신규 인솔 판매 전까지 미표시
- 지면 접촉 시간
 - 좌우 밸런스 및 분석 결과 표시
- 보행 주기
 - 운동 시간 내 보행 주기 표시
- 목록
 - 이전화면으로 돌아가기

SALTED


사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1. App UI Sync
 2. 검사 결과 가이드 추가
 (2022.01.12)

1

운동 영상 보기

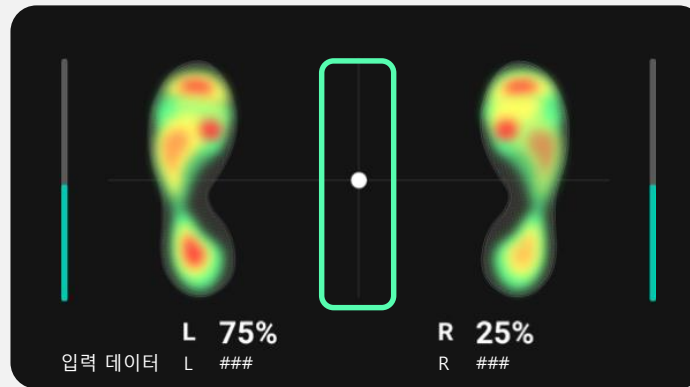


왼발
발끝 ##%
뒤꿈치 ##%

오른발
발끝 ##%
뒤꿈치 ##%



00:21


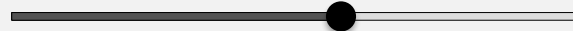


00:30


- 환자가 운동한 영상 확인
 - 동영상 촬영 여부 no일 경우 족저압 촬영 화면 표시
 - 동영상 촬영 여부 YES일 경우 동영상 촬영 화면 표시

1

운동 영상 보기

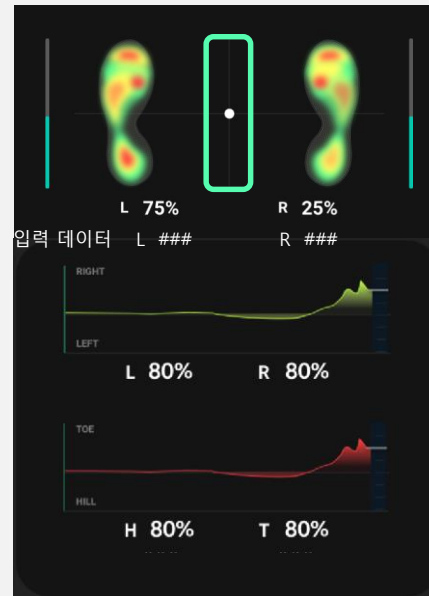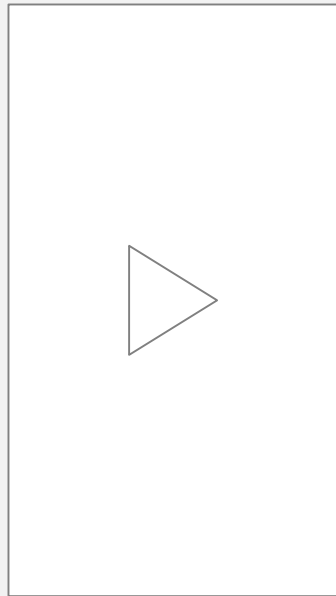

00:21

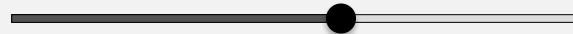

00:30

1. 환자가 운동한 영상 확인

- 동영상 촬영 여부 no일 경우 족저압 촬영 화면 표시
- 동영상 촬영 여부 YES일 경우 동영상 촬영 화면 표시

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1

000 결과

2021.00.00(OO요일)

* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.

2

전체



3

운동 시간 13:55:00~14:55:00/8세트

4

평균 밸런스

좌 : 우

50 :50

표준 50 :50

앞 : 뒤

47 :53

표준 40 :60

5

자세 분석

평균

100

6

목록

1. 선택된 날짜의 운동 결과 표시
2. 시간 선택
 - 전체, Gait 운동을 한 시간 선택
 - Gait 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 Gait 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : Gait 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
3. 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
4. 평균 밸런스
 - 좌/우, 앞/뒤 밸런스 표시
5. 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
6. 목록
 - 이전 화면으로 돌아가기

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1. App UI Sync
 2. 검사 결과 가이드 추가
 (2022.01.12)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1

ooo 결과 2021.00.00(OO요일)

9

전체 ▼

운동 시간 13:55:00~14:55:00 / 10세트

3

4

총 00의 보행 중 00회의 잘못된 보행이 측정되었습니다.

5


수술 전 기준 : L ### 30%

7

기준



8



6

목록

* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 언주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1. 선택된 날짜의 운동 결과 표시
2. -
3. 운동 시간
- 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
- 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
4. 보행 수(왼쪽 부분부하보행일 경우 왼쪽 걸음 수 체크) 와 입력 수치가 초과된 횟수 출력
5. 수술전 설정값 출력
6. 목록
- 이전 화면으로 돌아가기
7. 진행했던 세트별 그래프 이어서 보여주기
8. 데이터 길어질 경우 가로 스크롤 발생
9. 시간 선택
- 전체, 운동을 한 시간 선택
- 세트 선택
세트 선택 시 해당 세트의 결과 출력

부분부하보행 결과 신규 화면
(2022.02.03)

1. App UI Sync
2. 검사 결과 가이드 추가
(2022.01.12)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1

000 결과

2021.00.00(OO요일)

* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.

2

00세트


▼

3

운동 시간 13:55:00~14:55:00/00초

4

운동 자세

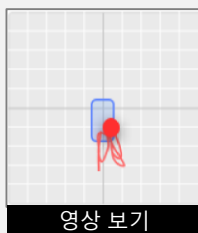

5

평균 밸런스

좌 : 우

앞 : 뒤

50 : 50


47 : 53

표준 50 : 50

표준 40 : 60

6

자세 분석

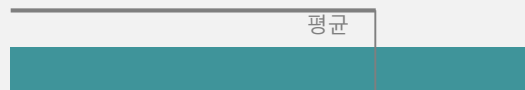

100

7

밸런스 분석

오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.

8

목록

1. 선택된 날짜의 운동 결과 표시
2. 시간 선택
 - 전체, Gait 운동을 한 시간 선택
 - Gait 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 Gait 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : Gait 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
3. 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
4. 운동 자세
 - cop 이동 패턴 표시
 - 영상 보기 클릭 시 영상(축저압or동영상) 팝업 표시
5. 평균 밸런스
 - 좌/우, 앞/뒤 밸런스 표시
6. 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
7. 밸런스 분석
 - 밸런스 계산하여 문구 표시
 - ② 드롭다운에서 "전체" 선택 시 출력되지 않음
8. 목록
 - 이전화면으로 이동

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 언주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1. App UI Sync
 2. 검사 결과 가이드 추가
 (2022.01.12)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1

000 결과

2021.00.00(OO요일)

* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.

2

전체



3 운동 시간 13:55:00~14:55:00/8세트

7

평균 00회의 잘못된 보행이 측정되었습니다.

4

평균 밸런스

좌 : 우

50 :50

표준 50 :50

앞 : 뒤

47 :53

표준 40 :60

5

자세 분석

평균

100

6

목록

- 선택된 날짜의 운동 결과 표시
- 시간 선택
 - 전체, Gait 운동을 한 시간 선택
 - Gait 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 Gait 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : Gait 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
- 평균 밸런스
 - 좌/우, 앞/뒤 밸런스 표시
- 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
- 목록
 - 이전 화면으로 돌아가기
- 입력 수치가 초과된 횟수의 평균 값 출력 (총 회수/세트)

부분부하보행 결과 신규 화면
(2022.02.03)

1. App UI Sync
2. 검사 결과 가이드 추가
(2022.01.12)

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1

000 결과

2021.00.00(OO요일)

* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.

2

00세트


▼ 3 운동 시간 13:55:00~14:55:00/00초

9

총 00회의 잘못된 보행이 측정되었습니다.

4

운동 자세

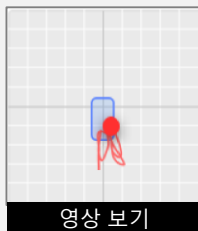

5

평균 밸런스

좌 : 우

앞 : 뒤

50 : 50


47 : 53

표준 50 : 50

표준 40 : 60

6

자세 분석

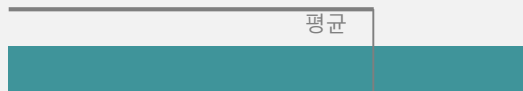

100

7

밸런스 분석

오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.

8

목록

- 선택된 날짜의 운동 결과 표시
- 시간 선택
 - 전체, Gait 운동을 한 시간 선택
 - Gait 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 Gait 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : Gait 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
- 운동 자세
 - cop 이동 패턴 표시
 - 영상 보기 클릭 시 영상(축거압or동영상) 팝업 표시
- 평균 밸런스
 - 좌/우, 앞/뒤 밸런스 표시
- 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
- 밸런스 분석
 - 밸런스 계산하여 문구 표시
 - ② 드롭다운에서 "전체" 선택 시 출력되지 않음
- 목록
 - 이전화면으로 이동
- 입력 수치가 초과된 횟수 출력

부분부하보행 결과 화면 추가
(2022.02.03)

1. App UI Sync
2. 검사 결과 가이드 추가
(2022.01.12)

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1

000 결과

2021.00.00(00요일)

* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.

2

전체 ▼

3

운동 시간 13:55:00~14:55:00/8세트

4

흔들림 정도

외발 서기 시간

5

자세 분석

7%

00초

평균

100

6

목록

- 선택된 날짜의 운동 결과 표시
- 시간 선택
 - 전체, Gait 운동을 한 시간 선택
 - Gait 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 Gait 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : Gait 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
- 흔들림 정도, 외발 서기 시간
 - 흔들림 정보, 외발 서기 시간 표시
- 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
- 목록
 - 이전화면으로 이동

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1. App UI Sync
 2. 검사 결과 가이드 추가
 (2022.01.12)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1

000 결과

2021.00.00(OO요일)

* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있습니다.

2


00세트

▼

3 운동 시간 13:55:00~14:55:00/00초

4

운동 자세

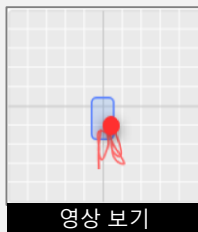

영상 보기

5

흔들림 정도

외발 서기 시간

7%

00초

6

자세 분석

평균

100

7

밸런스 분석

오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.

8

목록

1. 선택된 날짜의 운동 결과 표시
2. 시간 선택
 - 전체, Gait 운동을 한 시간 선택
 - Gait 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 Gait 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : Gait 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
3. 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
4. 운동 자세
 - cop 이동 패턴 표시
 - 영상 보기 클릭 시 영상(축저압or동영상) 팝업 표시
5. 흔들림 정도, 외발 서기 시간
 - 흔들림 정보, 외발 서기 시간 표시
6. 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
7. 밸런스 분석
 - 밸런스 계산하여 문구 표시
 - ② 드롭다운에서 "전체" 선택 시 출력되지 않음
8. 목록
 - 이전화면으로 이동

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1. App UI Sync
 2. 검사 결과 가이드 추가
 (2022.01.12)

Page Description

환자 > 국내 환자 선택 > 수정

Screen ID

HCP-W-05-3

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

환자 정보

2

취소

저장

1

일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드	W1234	성별	남자
이름	제갈훈	국가	한국
		거주지	서울
생년월일	1991.01.01	휴대폰 번호	010-1234-5678
		이메일	Salted@gmail.com
메모			

신체 정보

키	180.x cm
체중	79.xkg
발 사이즈	175.xcm
다리 길이(왼쪽)	90.xcm
다리 길이(오른쪽)	95.xcm

1. 환자 정보/신체 정보 수정

- 필수 입력 : 이름, 생년 월일, 연락처

2. 버튼

- 취소 : 수정 취소 후 이전 화면으로 이동

- 저장 : 수정 정보 저장 팝업 표시

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

CES

Consumer Technology Association

ISPO Munich

1. 메모 기능 추가 (2022.01.12)

Page Description

환자 > 국외 환자 선택 > 수정

Screen ID

HCP-W-05-6

Description

P2

환자

스케줄

문의

통계

설정

환자 정보

취소

저장

1

일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드	W1234	성별	남자
이름	훈	국가	한국
성	제갈	거주지	서울
		휴대폰 번호	010-1234-5678
생년월일	1991.01.01	이메일	Salted@gmail.com
메모			

신체 정보

키	180.x cm
체중	79.xkg
발 사이즈	175.xcm
다리 길이(왼쪽)	90.xcm
다리 길이(오른쪽)	95.xcm

2

환자 정보/신체 정보 수정

필수 입력 : 이름, 성, 생년월일, 연락처

버튼

취소 : 수정 취소 후 이전 화면으로 이동

저장 : 수정 정보 저장 팝업 표시

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

CES

Consumer Technology Association

ISPO Munich

1. 메모 기능 추가 (2022.01.12)

스케줄

P2

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

운동 스케줄

환자에게 알맞은 운동 스케줄을 등록할 수 있습니다.

◀ 9월 ▶

월

주

1일	월	화	수	목	금	토
29	30	31	1	2	3	4
			10명	00명	00명	00명
5	6	7	8	9	10	11
10명	00명	00명	00명	10명	00명	00명
12	13	14	15	16	17	18
10명	00명	00명	00명	10명	00명	00명
19	20	21	22	23	24	25
10명	00명	00명	00명	10명	00명	00명
26	27	28	29	30	1	2
10명	00명	00명	00명	10명		

09.01 환자 운동 스케줄

신규 추가

10 전체 일정 0000.00.00~0000.00.00
 이름 총 달성률: ##%
 환자 코드: W1234
 [session] 운동명 00%
 [balance] Squats 00%
 [balance] Stand in place 00%

09 전체 일정 0000.00.00~0000.00.00
 이름 총 달성률: ##%
 환자 코드: W1234
 [session] 운동명 00%
 [session] 운동명 00%
 [session] 운동명 00%

08 전체 일정 0000.00.00~0000.00.00
 이름 총 달성률: ##%
 환자 코드: W1234
 [session] 운동명 00%

1. 스케줄

- 주/월 캘린더
 - > 오늘 날짜 : 일 뒤에 원으로 포커스
 - > 선택 날짜 : 해당 요일 박스 테두리
- default 월 캘린더
- 월 : 선택 요일 스케줄에 등록된 환자 수 표시
- 주 : 선택 요일 스케줄에 등록된 이름(국외 환자 : 이름 성), 표시

2. 요일 스케줄

- 선택한 요일 스케줄에 등록된 환자 리스트
 - > 이름(국외 환자 : 이름 성), 환자 코드, 운동 전체 달성률 표시, 환자코드
 - > 운동 명, 운동 달성률 표시
 - > 스케줄 등록된 환자의 스케줄 시작/종료일
- 환자 선택 시 환자 스케줄 화면으로 이동

session 적용
(2022.01.12)App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)**SALTED**

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

운동 스케줄

환자에게 알맞은 운동 스케줄을 등록할 수 있습니다.

◀ 9월 ▶

월

주

1 일	월	화	수	목	금	토
30	30	31	1	2	3	4
이름1	이름1	이름1	이름1	이름1	이름1	이름1
이름2	이름2	이름2	이름2	이름2	이름2	이름2
이름3	이름3	이름3	이름3	이름3	이름3	이름3
이름4	이름4	이름4	이름4	이름4	이름4	이름4
이름5		이름5	이름5	이름5	이름5	이름5
		이름6	이름6	이름6	이름6	이름6
			이름7	이름7	이름7	이름7
			이름8	이름8	이름8	이름8
			이름9	이름9	이름9	이름9
			이름10	이름10	이름10	이름10

09.01 환자 운동 스케줄

신규 추가

10

이름

환자 코드: W1234

[session] 운동명

총 달성률: ###%

00%

[session] 운동명

00%

[session] 운동명

00%

09

이름

환자 코드: W1234

[session] 운동명

총 달성률: ###%

00%

[session] 운동명

00%

[session] 운동명 명

00%

08

이름

환자 코드: W1234

[session] 운동명

전체 일정 0000.00.00~0000.00.00

총 달성률: ###%

00%

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1.

App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

스케줄 추가

환자에게 알맞은 운동 스케줄을 등록할 수 있습니다.

4

취소

추가

선택 날짜 :

1



2021.09

2021.10



일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토
29	30	31	1	2	3	4						1	2
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30

3

운동 리스트

선택

2

환자 정보

선택 버튼을 눌러 환자를 추가하세요

선택

- 스케줄
 - 2달씩 표시
 - 캘린더에서 시작 날짜, 종료 날짜 선택
 - 우측 ◀ ▶ Tap 시 2달 씩 이동
 - 시작 날짜를 종료 날짜 이후 선택 시 기존 선택 되었던 시작 날짜가 종료 날짜로 변경
- 환자 정보
 - 환자 선택
 - > 환자 선택 버튼 클릭 시 환자 선택 팝업 표시
 - 선택된 환자 정보 표시
 - > 이름(국외 환자 : 이름 성),
 - 환자코드 미표시
- 운동 리스트
 - 운동 선택
 - > 운동 선택 버튼 클릭 시 운동 선택 팝업 표시
 - 선택된 운동 리스트 표시
- 버튼
 - 추가 : 해당 스케줄 추가 완료
 - 취소 : 취소

App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

Page Description	스케줄 관리 > 신규 스케줄 추가 > 시작 종료 날짜 선택	Screen ID	HCP-W-07-03	Description
<div> <div>SALTED</div> <div>ooo님 환영합니다 로그아웃</div> </div> <div> <div> <div>홈</div> <div>환자</div> <div>스케줄</div> <div>문의</div> <div>통계</div> <div>설정</div> </div> <div> <div>스케줄 추가</div> <div>환자에게 알맞은 운동 스케줄을 등록할 수 있습니다.</div> <div>취소</div> <div>추가</div> </div> </div> <div> <div> <div>선택 날짜 : 2021.09.20-2021.10.07</div> <div> <div> <div>◀</div> <div>2021.09</div> <div>▶</div> </div> <div> <div> <div>일</div><div>월</div><div>화</div><div>수</div><div>목</div><div>금</div><div>토</div> <div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div> <div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div> <div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div> <div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div> <div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div> </div> </div> <div> <div>2021.10</div> <div> <div>일</div><div>월</div><div>화</div><div>수</div><div>목</div><div>금</div><div>토</div> <div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>1</div> <div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div> <div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div> <div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div> <div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div> <div>30</div> </div> </div> </div> <div> <div>환자 정보</div> <div> <div>선택 버튼을 눌러 환자를 추가하세요</div> <div>선택</div> </div> </div> <div> <div>운동 리스트</div> <div>선택</div> </div> </div> </div>				
<div> <div>App UI 및 퍼블리싱 Sync</div> <div>(2022.01.27)</div> </div>				

스�크롤

환자 선택

1 전체 ▼ 2 검색어를 입력하세요 조회

00건

No	이름	생년월일	최근 검사	등록일자	구분
20	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
19	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
18	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
17	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
16	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
15	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
14	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
13	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
12	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
11	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택

< 1 2 >

- 환자 조회
 - 검색 조건 : 전체, 이름, 생년월일
- 조회 결과
 - 전체 조회 건수 표시
 - patient app 과 매칭된 환자 리스트만 표시
 - 선택 버튼 클릭 시 환자 선택 팝업 닫힘, 선택된 환자 정보는 신규 스케줄 추가 환자 정보에 입력

운동 선택

1 Session ▼ 검색어를 입력하세요. 조회

2 00건

No	session	운동 명	구분
20	Balance	000	<input type="checkbox"/>
19	Heel	000	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Gait	000	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Ankle	000	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Sarcopenia	000	<input type="checkbox"/>
15		000	<input type="checkbox"/>
14		000	<input type="checkbox"/>
13		000	<input type="checkbox"/>
12		000	<input type="checkbox"/>
11		000	<input type="checkbox"/>

< 1 2 >

선택

- 운동 조회
 - 검색 조건 : 전체, session 명
gait , balance, Ankle, Heel, Sarcopenia, partial weight bearing
- 조회 결과
 - 전체 조회 건수 표시
 - 운동 복수 선택
 - 선택 후 선택 버튼 클릭 시 운동 리스트에 운동 추가

Heel Session 복원
(2022.01.12)

App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

스케줄 추가

환자에게 알맞은 운동 스케줄을 등록할 수 있습니다.

취소

추가

선택 날짜 : 2021.09.20-2021.10.07

환자 정보

OOO

환자코드

A123456789

생년월일

1900.00.00

환자 선택

운동 리스트 추가

운동 리스트

1 01 [session] 운동명

삭제

월 화 수 목 금 토 일

1세트 ▼

2분 ▼

동영상 촬영

도움말 입력해주세요

2 02 [Partial Weight Bearing] Left Partial Weight Bearing

운동 기준 값 선택 ▼

삭제

월 화 수 목 금 토 일

4 1세트 ▼

1. session 적용
2. 운동부위 삭제
(2022.01.12)

App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

부분 부하일 경우 case 추가
부분부하보행의 경우 동영상촬영
없음
(2022.01.28)

1. 운동 정보

- 운동 선택에서 선택된 운동들 배치
- 운동 명, 운동 부위 표시
- 동영상 촬영 여부 선택
- 운동 요일, 세트, 시간 선택
 - > 운동 요일 복수개 선택 가능
 - > 운동 요일은 월/수/금 이나 스케줄이 화요일부터 시작할 경우, 운동은 수요일부터 배치
 - > 운동 시간 : 30초/1분/1분 30초/2분 선택
- 도움말 입력 가능
- 바 우측 '='버튼을 이용하여 순서 변경 가능
- 운동명 우측 삭제 버튼을 이용하여 운동 삭제

2. 부분 부하의 경우 운동 선택 후 수술 전 기준치 선택 셀렉트 박스 추가

3. HCP App에서 설정한 운동 기준값 목록 출력/ 최근 등록한 5개 기준값 출력

운동 기준 값 선택 ▼

2022.01.20 L ### 30%, R ### 70%
2022.01.20 L ### 40%, R ### 60%
2022.01.20 L ### 45%, R ### 55%
2022.01.20 L ### 47%, R ### 53%
2021.05.20 L ### 50%, R ### 50%

4. 1세트~10세트까지 선택 가능

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

스케줄 추가

환자에게 알맞은 운동 스케줄을 등록할 수 있습니다.

4

취소

수정

선택 날짜 : 2021.09.20-2021.10.07

2

환자 정보

OOO

환자코드

A123456789

생년월일

1900.00.00

1



운동 리스트

3

01 [session] 운동명

월

화

수

목

금

토

일

1세트

2분

동영상 촬영 ☐

도움말 입력해주세요

02 [Partial Weight Bearing] Left Partial Weight Bearing

2022.01.20 L ### 30%, R ### 70%

월

화

수

목

금

토

일

1세트

- 스케줄
 - 종료 날짜를 오늘 및 이전 날짜로 변경 불가
- 환자 정보
 - 환자 정보 수정 불가
- 운동 정보
 - 오늘 및 이전 날짜
 - > 운동 추가 불가, 운동 선택 버튼 미노출
 - > 동영상 촬영 여부, 운동 요일, 운동 세트 수정 불가
 - > 도움말 수정 불가
 - > 운동 순서 변경, 삭제 버튼 미노출
 - 오늘 이후 날짜
 - > 운동 추가 가능
 - > 운동 요일, 운동 세트 수정 가능
 - > 도움말 수정 가능
- 버튼
 - 수정 : 수정 완료 후 이전 화면으로 이동
 - 취소 : 수정 취소 후 이전 화면으로 이동

부분 부하일 경우 case 추가
(2022.01.28)

App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

스케줄 추가

환자에게 알맞은 운동 스케줄을 등록할 수 있습니다.

취소

수정

선택 날짜 : 2021.09.20-2021.10.07

2021.09

일

월

화

수

목

금

토

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2021.10

일

월

화

수

목

금

토

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

환자 정보

OOO

환자코드

A123456789

생년월일

1900.00.00

운동 리스트

운동 리스트 추가

3

01 [session] 운동명

삭제

월 화 수 목 금 토 일

1세트 ▼ 2분 ▼

동영상 촬영 ☐

도움말 입력해주세요

02 [Partial Weight Bearing] Left Partial Weight Bearing

2022.01.20 L ### 30%, R ### 70% ▼

삭제

월 화 수 목 금 토 일

1세트 ▼

- 스케줄
 - 오늘 및 이전 날짜로 종료 날짜 변경 불가
- 환자 정보
 - 환자 정보 수정 불가
- 운동 정보
 - 오늘 및 이전 날짜
 - > 운동 추가 불가, 운동 선택 버튼 미노출
 - > 동영상 촬영 여부, 운동 요일, 운동 세트 수정 불가
 - > 도움말 수정 불가
 - > 운동 순서 변경, 삭제 버튼 미노출
 - 오늘 이후 날짜
 - > 운동 추가 가능
 - > 동영상 촬영여부, 운동 요일, 운동 세트 수정 가능
 - > 도움말 수정 가능

부분 부하일 경우 case 추가
(2022.01.28)

App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

문의

P2

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

환자의 문의에 대하여 쉽게 답변할 수 있습니다.

1 전체 2 전체 3 검색어를 입력하세요 4 검색

NO	운동명	문의 내용	작성자	작성일	답변 상태
38			홍길동	2021.07.27	답변 대기
37			사공민아	2021.07.27	임시 저장
36			김민준	2021.07.27	답변 완료
35			김민지	2021.07.27	
34			이무개	2021.07.27	
33			제갈훈	2021.07.27	
32			유병규	2021.07.27	
31			박지혜	2021.07.27	
30			김상환	2021.07.27	
29			정수화	2021.07.27	

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 검색 조건 1
 - 답변 상태 : 전체, 미확인, 임시저장, 답변완료
2. 검색 조건 2
 - 운동 : 전체, 운동1, 운동2, 운동3...
3. 검색
 - 이름
4. 리스트
 - 문의 내용, 이름, 운동명, 작성일시, 답변 상태
 - > 문의 내용이 길면 '...'처리 및 1줄 표시
 - 리스트에서 국가에 따른 이름 구분
 - > 한국 : 이름 표시
 - > 국외 : 이름 표시(성 제외)
 - 리스트 행 선택 시 답변 화면으로 이동
5. 답변 상태
 - 문의글 미확인/미답변 : 답변대기
 - 문의글 임시저장 : 임시저장
 - 문의글 답변완료 : 답변완료

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

운동 명 2021.11.01 00:00:00

환자코드	W1234	성별	남	이름	제갈훈	생년월일	1990.00.00
문의 내용							
첨부 파일	admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg						
답변 내용							
첨부 파일	<div>파일 선택</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div>						

목록

임시저장

답변 등록

- 환자 정보
 - 환자코드, 이름, 성별, 작성 일시, 운동명 표시
- 문의 내용
 - 환자가 등록한 문의 내용 및 첨부 파일 표시
 - 첨부파일 클릭 시 다운로드
- 답변 내용
 - 답변 내용 작성
 - 첨부파일 : 5개까지 등록 가능
 - > 용량 정의 필요
- 버튼
 - 목록 : 문의 답변 작성 취소 후 이전 화면으로 이동
 - 임시저장 : 문의 글 저장, 답변 등록하지 않음, 답변 내용 수정 가능
 - 답변 등록 : 답변 등록
 - > 답변 등록 시 patient APP으로 알림 전송

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 언주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
 (2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

운동명 2021.11.01 00:00:00

환자코드	W1234	성별	남	이름	훈	성	제갈	생년월일	1990.00.00
문의 내용									
첨부 파일	admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg								
답변 내용									
첨부 파일	<div>파일 선택</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div>								

목록

임시저장

답변 등록

- 환자 정보
 - 환자코드, 이름, 성, 성별, 작성 일시, 운동명 표시
- 문의 내용
 - 환자가 등록한 문의 내용 및 첨부 파일 표시
 - 첨부파일 클릭 시 다운로드
- 답변 내용
 - 답변 내용 작성
 - 첨부파일 : 5개까지 등록 가능
 - > 용량 정의 필요
- 버튼
 - 목록 : 문의 답변 작성 취소 후 이전 화면으로 이동
 - 임시저장 : 문의 글 저장, 답변 등록하지 않음, 답변 내용 수정 가능
 - 답변 등록 : 답변 등록
 - > 답변 등록 시 patient APP으로 알림 전송

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

Page Description

문의 > 답변하기(답변 상태 : 답변완료)

Screen ID

HCP-W-08-2

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

운동 명

2021.11.01 00:00:00

환자코드	W1234	성별	남	이름	훈	성	제갈	생년월일	1990.00.00
문의 내용									
첨부 파일	admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg								
<div>1</div> 답변 (2021.11.01 00:00:00)									
첨부 파일	admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg								

2

목록

3

수정

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

CES

Consumer Technology Association

ISPO Munich

App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

1. 답변 내용

- 답변 등록 날짜 및 시간 표시

- 첨부파일 다운로드 가능

2. 목록 버튼

- 이전 화면으로 이동

3. 수정 버튼

- 수정 화면으로 변경

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

운동 명 2021.11.01 00:00:00

환자코드	W1234	성별	남	이름	훈	성	제갈	생년월일	1990.00.00
문의 내용									
첨부 파일	admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg								
답변 내용									
첨부 파일	<div>파일 선택</div> <div>admin_registered_image.jpeg ✕</div> <div>admin_registered_image.jpeg ✕</div> <div>admin_registered_image.jpeg ✕</div> <div>admin_registered_image.jpeg ✕</div> <div>admin_registered_image.jpeg ✕</div>								

1

목록

수정 완료

- 버튼
 - 수정 완료 : 답변 수정 완료 후 이전 화면으로 이동
 - > 수정된 날짜 및 시간으로 답변 날짜 변경
 - 목록 : 답변 수정 취소 후 이전 화면으로 이동

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

통계

P2

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

환자 통계 | 운동 통계 | 환자별 통계

환자 및 재활 운동의 통계를 확인할 수 있습니다.

1

기간

☐ 1개월
 ☐ 3개월
 ☐ 6개월
 ☐ 1년
 ☐ 직접설정

2021.09.01

-

2021.09.30

성별

☐ 전체
 ☐ 남자
 ☐ 여자


연령대

☐ 전체
 ☐ 10대
 ☐ 20대
 ☐ 30대
 ☐ 40대
 ☐ 50대
 ☐ 60대
 ☐ 70대
 ☐ 80대
 ☐ 90대

통계 다운로드

조회

초기화

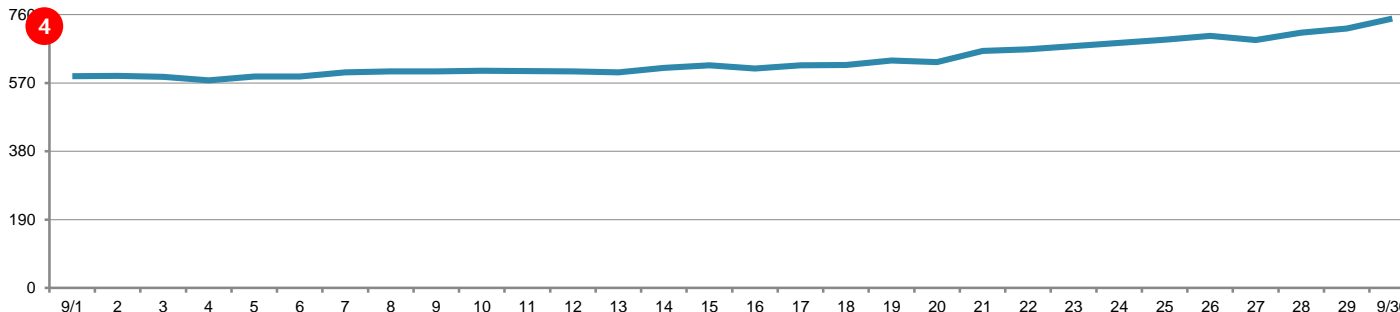

5	환자 수	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대
09/30	749	300	449	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/29	721	300	421	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/28	710	300	410	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/27	689	289	400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/26	701	270	431	000	000	000	000	000	000	000	000	000

- 통계 조건
 - 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
 - 성별 : 전체, 남자, 여자
 - 연령대 : 전체, 10~90대
- 조회, 초기화
 - 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
 - 초기화 : 통계 초기화
- 통계 다운로드
 - 조회된 통계 자료 다운로드
 - 5번 영역의 로우데이터 다운로드
- 그래프 : 일별 총 환자 수 추이 출력
- 일별 성별, 연령별 (매핑되어 있는) 환자 수 출력

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계 운동 통계 환자별 통계					

환자 및 재활 운동의 통계를 확인할 수 있습니다.

1 통계 종류 ☒ 운동 처방 ☐ 운동 달성률

기간 ☐ 1개월 ☐ 3개월 ☐ 6개월 ☐ 1년 ☐ 직접설정 2021.09.01 - 2021.09.30

재활 운동 ☐ 전체 ☐ upright posture ☐ gait ☐ balance ☐ Ankle ☐ Heel ☐ Sarcopenia ☐ partial weight bearing


성별 ☐ 전체 ☐ 남자 ☐ 여자

연령대 ☐ 전체 ☐ 10대 ☐ 20대 ☐ 30대 ☐ 40대 ☐ 50대 ☐ 60대 ☐ 70대 ☐ 80대 ☐ 90대

통계 다운로드

조회

초기화

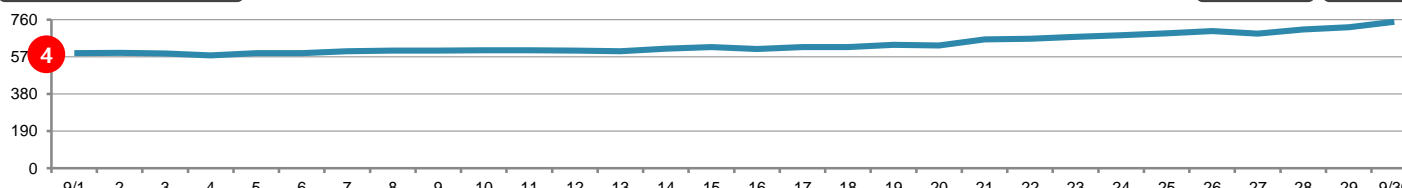

	환자 수	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대
09/30	749	300	449	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/29	721	300	421	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/28	710	300	410	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/27	689	289	400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/26	701	270	431	000	000	000	000	000	000	000	000	000

1. 통계 조건

- 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
- 재활 운동 : 전체, 운동 명 선택
- 성별 : 전체, 남자, 여자
- 연령대 : 전체, 10~90대

2. 조회, 초기화

- 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
- 초기화 : 통계 초기화

3. 통계 다운로드

- 조회된 통계 자료 다운로드
- 5번 영역의 로우데이터 다운로드

4. 차트

- 처방된 운동의 환자 수

5. 차트&데이터

- 재활 운동 : 전체, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방 환자 수(차트 및 표에 표시)
 - > 남자/여자/ 전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 전체, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방 된 환자 수(차트 및 표에 표시)
 - > 남자/여자/ 전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 선택 운동 처방 된 환자 수
 - > 남자/여자/전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 전체
 - > 선택 운동 처방 된 환자 수
 - > 선택 성별/전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 선택
 - > 선택 운동 처방 된 선택 성별 환자 수
 - > 선택 연령대 표시

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계	운동 통계	환자별 통계			

1

통계 종류 ○ 운동 처방 ● 운동 달성률

기간 ○ 1개월 ○ 3개월 ○ 6개월 ○ 1년 ○ 직접설정 2021.09.01 - 2021.09.30

재활 운동 ☐ 전체 ☐ upright posture ☐ gait ☐ balance ☐ Ankle ☐ Heel ☐ Sarcopenia ☐ partial weight bearing


성별 ○ 전체 ○ 남자 ○ 여자

연령대 ○ 전체 ○ 10대 ○ 20대 ○ 30대 ○ 40대 ○ 50대 ○ 60대 ○ 70대 ○ 80대 ○ 90대

통계 다운로드

조회

초기화

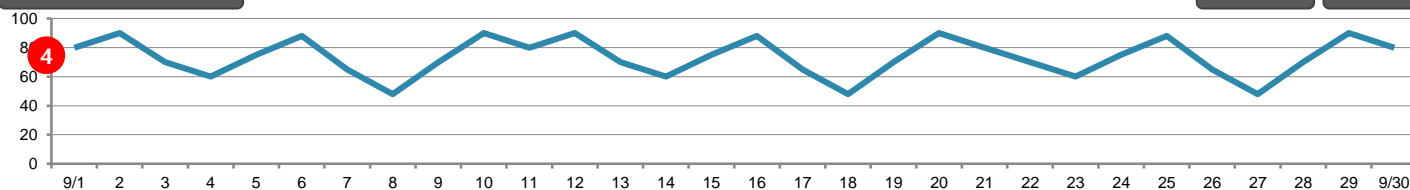

	달성률	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대
09/30	90%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/29	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/28	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/27	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/26	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%

1. 통계 조건

- 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
- 재활 운동 : 전체, 운동 명 선택
- 성별 : 전체, 남자, 여자
- 연령대 : 전체, 10~90대

2. 조회, 초기화

- 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
- 초기화 : 통계 초기화

3. 통계 다운로드

- 조회된 통계 자료 다운로드
- 5번 영역의 로우데이터 다운로드

4. 차트

- 운동 달성률 표시

5. 차트&데이터

- 재활 운동 : 전체, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방 환자 달성률(차트 및 표에 표시)
 - > 남자/여자/ 전체 연령대 달성률 표시
- 재활 운동 : 전체, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방 된 환자 달성률(차트 및 표에 표시)
 - > 남자/여자/ 전체 연령대 달성률 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 선택 운동 처방 된 환자 달성률
 - > 남자/여자/전체 연령대 달성률 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 전체
 - > 선택 운동 처방 된 환자 달성률
 - > 선택 성별/전체 연령대 달성률 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 선택
 - > 선택 운동 처방 된 선택 성별 환자 달성률
 - > 선택 연령대 달성률 표시

6. 달성률 체크 시 부분보하보험은 비활성화 처리

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

환자 통계 | 운동 통계 | **환자별 통계**

1

환자	선택	이름 : OOO 생년월일 : 1900.00.00	환자코드 : A123456789
기간	<input type="radio"/> 1개월 <input type="radio"/> 3개월 <input type="radio"/> 6개월 <input type="radio"/> 1년 <input type="radio"/> 지난달 <input type="radio"/> 작년 <input type="radio"/> 직접설정 <div>2021.09.01 - 2021.09.30</div>		
재할 운동	<input type="checkbox"/> upright posture <input type="checkbox"/> balance <input type="checkbox"/> Ankle <input type="checkbox"/> Heel <input type="checkbox"/> Sarcopenia <input type="checkbox"/> gait <input type="checkbox"/> partial weight bearing		


통계 다운로드

3

조회

2

초기화

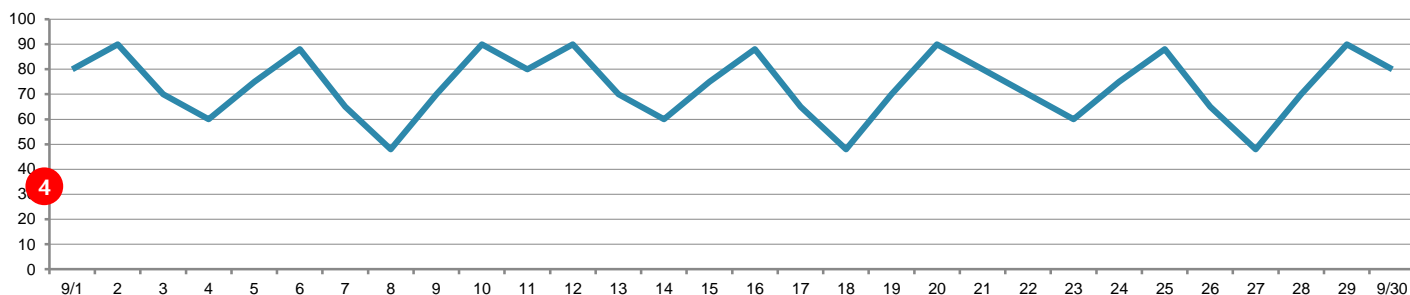

4

5

	평균 달성률	upright posture	balance	Ankle	Heel	Sarcopenia
09/30	90%	00%	00%	00%	00%	00%
09/29	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/28	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/27	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/26	00%	00%	00%	00%	00%	00%

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



- 통계 조건
 - 환자 : 환자 선택
 - > 환자 선택 시 환자 선택 팝업 표시(스케줄의 환자선택 팝업과 동일)
 - 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
 - 재할 운동 : 재할 운동 중 gait/부분부하보행 제외
gait와 부분부하보행은 각각 선택 가능
- 조회, 초기화
 - 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
 - 초기화 : 통계 초기화
- 통계 다운로드
 - 조회된 통계 자료 다운로드
 - 5번 영역의 로우데이터 다운로드
- 차트
 - 조회된 결과의 평균 달성률 표시
- 데이터
 - 전체 운동의 평균 달성률, 개별 운동 달성률

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃


홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계	운동 통계	환자별 통계			

1

환자	선택	이름 : OOO 생년월일 : 1900.00.00	환자코드 : A123456789
기간	<input type="radio"/> 1개월 <input type="radio"/> 3개월 <input type="radio"/> 6개월 <input type="radio"/> 1년 <input type="radio"/> 지난달 <input type="radio"/> 작년 <input type="radio"/> 직접설정	2021.09.01	- 2021.09.30
재활 운동	<input type="checkbox"/> upright posture <input type="checkbox"/> balance <input type="checkbox"/> Ankle <input type="checkbox"/> Heel <input type="checkbox"/> Sarcopenia <input checked="" type="checkbox"/> gait <input type="checkbox"/> partial weight bearing		

통계 다운로드 3

조회 2 초기화

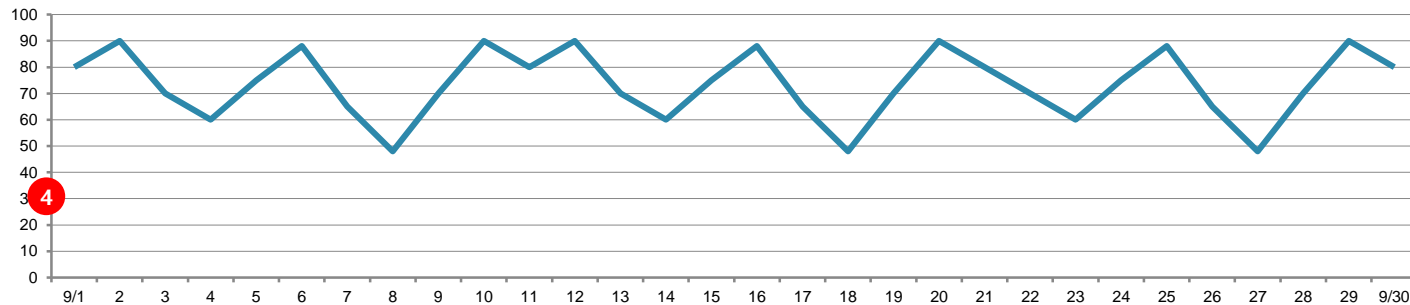

4

5

	Gait
09/30	00%
09/29	00%
09/28	00%
09/27	00%
09/26	00%

- 통계 조건
 - 환자 : 환자 선택
 - > 환자 선택 시 환자 선택 팝업 표시
 - 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
 - 재활 운동 : gait
- 조회, 초기화
 - 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
 - 초기화 : 통계 초기화
- 통계 다운로드
 - 조회된 통계 자료 다운로드
 - 5번 영역의 로우데이터 다운로드
- 차트
 - 조회된 환자수 표시
- 데이터
 - 선택 운동 달성률

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃


홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계	운동 통계	환자별 통계			

1

환자	선택	이름 : OOO 생년월일 : 1900.00.00	환자코드 : A123456789
기간	<input type="radio"/> 1개월 <input type="radio"/> 3개월 <input type="radio"/> 6개월 <input type="radio"/> 1년 <input type="radio"/> 지난달 <input type="radio"/> 작년 <input type="radio"/> 직접설정	2021.09.01	- 2021.09.30
재활 운동	<input type="checkbox"/> upright posture <input type="checkbox"/> balance <input type="checkbox"/> Ankle <input type="checkbox"/> Heel <input type="checkbox"/> Sarcopenia <input type="checkbox"/> gait <input checked="" type="checkbox"/> partial weight bearing		

3

2

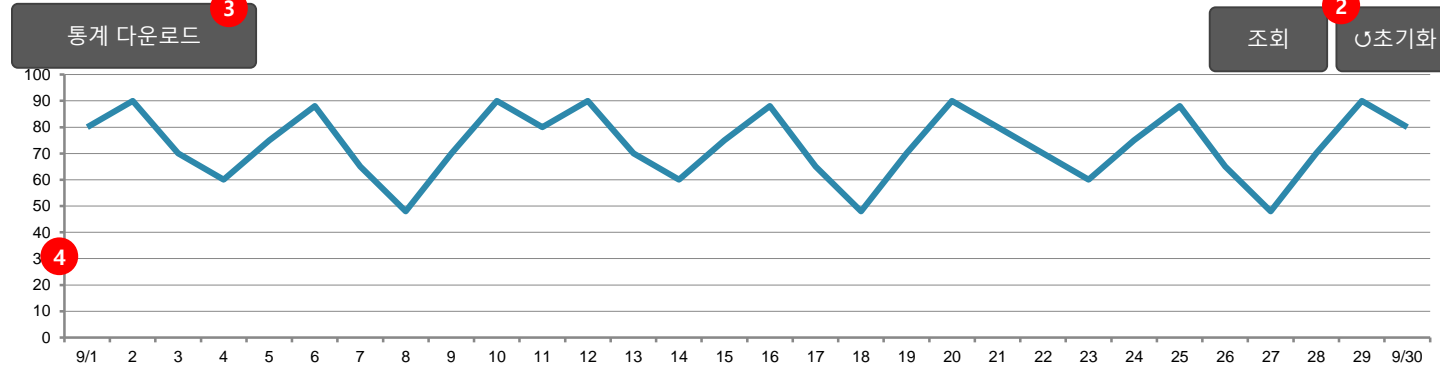

4

	초과 보행 %	총 보행 수	총 기준값 초과 보행 수
09/30	15%	203	30
09/29	11%	202	28
09/28	9.8%	184	17
09/27	35%	291	42
09/26	40%	189	30

5

- 통계 조건
 - 환자 : 환자 선택
 - > 환자 선택 시 환자 선택 팝업 표시
 - 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
 - 재활 운동 : 부분부하보행 선택 시
- 조회, 초기화
 - 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
 - 초기화 : 통계 초기화
- 통계 다운로드
 - 조회된 통계 자료 다운로드
 - 5번 영역의 로우데이터 다운로드
- 차트
 - 초과 보행 % 출력
- 데이터
 - 선택 운동 달성률

SALTED

설정

Page Description

설정 > 계정 정보

Screen ID

HCP-W-10

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

계정 정보

공지사항

자주 묻는 질문

시스템 문의

서비스 이용약관

개인정보 처리방침

개인정보 수집 및 이용

마케팅 정보 수신

계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.

계정 정보

수정

국가

한국

이름

제갈훈

이메일

hoon.jg@salted.ltd

비밀번호

●●●●●●●●

휴대폰 번호

01012345678

계정 코드

SULASN123456

직군

의료진

회원 탈퇴

1. 클릭 시 “계정 정보 수정” 페이지 로드

2. 회원정보 출력

3. 클릭 시 “의료진 계정 삭제” 페이지 로드

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 언주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

CES

Consumer Technology Association

ISPO Munich

App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

계정 정보 | 공지사항 | 자주 묻는 질문 | 시스템 문의 | 서비스 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 개인정보 수집 및 이용 | 마케팅 정보 수신

계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.

1 계정 정보 수정

2

취소

3

저장

국가 한국

이름 제갈훈

이메일 hoon.jg@salted.ltd

4

비밀번호

a

비밀번호를 입력해 주세요.

b

비밀번호를 한 번 더 입력해 주세요.

5

휴대폰 번호

휴대폰 번호를 입력해 주세요.

계정 코드 SULASN123456

직군



의료진



물리치료사



운동치료사



직접 입력

6

진료과를 직접 입력해 주세요.

1. "계정 정보 수정"으로 바뀐 타이틀
2. 1) 수정 내역이 없는 상태에서 버튼 클릭 시 "계정 정보" 페이지 로드
2) 수정 내역이 있는 상태에서 버튼 클릭 시 변경 내용 폐기 Confirm 팝업: "정보 수정을 취소하고 변경 사항을 폐기하시겠습니까?; 이 작업은 복구할 수 없습니다.: 수정 계속, 변경사항 폐기"
3. 버튼 클릭 시 내용 저장, "계정 정보" 페이지 로드
4. 1) [a], [b]를 입력하지 않은 상태에서 정보 수정 및 저장 가능
2) [a], [b] 중 하나를 입력하지 않은 상태에서 후 "저장" 버튼 클릭 시 Alert: "변경할 비밀번호가 입력되지 않았습니다."
- 3) [a], [b]의 입력 내용이 다를 경우 [a] 아래에 가이드 문구 출력: "비밀번호가 일치하지 않습니다."
4) [a], [b]의 입력 내용이 같을 경우 [a] 아래에 가이드 문구 출력: "비밀번호가 일치합니다."
5. 1) 11자 제한, 숫자만 입력 가능
2) 유효성 체크
> 앞 3자리 010, 나머지 8자 입력
3) 유효성이 맞지 않는 휴대폰 번호 입력 시 text box 하단 안내 문구 표시: "유효하지 않은 번호입니다. 입력하신 내용을 다시 한 번 확인해 주세요."
6. 1) 직군 "직접 입력" 라디오 선택 시 텍스트필드 활성화
2) 특수문자, 이모지 입력 불가

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

Page Description	설정 > 계정 정보 (국가 : 국외)	Screen ID	HCP-W-10-3	Description			
P2	ooo님 환영합니다 로그아웃			1. 클릭 시 “계정 정보 수정” 페이지 로드 2. 회원정보 출력 3. 클릭 시 “의료진 계정 삭제” 페이지 로드			
	홈	환자	스케줄		문의	통계	설정
	계정 정보 공지사항 자주 묻는 질문 시스템 문의 서비스 이용약관 개인정보 처리방침 개인정보 수집 및 이용 마케팅 정보 수신						
	계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.						
	계정 정보						
2	<div>국가<div>한국 외 국가</div></div> <div>이름<div>훈성제갈</div></div> <div>이메일<div>hoon.jg@salted.ltd</div></div> <div>비밀번호<div>●●●●●●●●</div></div> <div>휴대폰 번호<div>01012345678</div></div> <div>계정 코드<div>SULASN123456</div></div> <div>직군<div>의료진</div></div> <div>1<div>수정</div></div> <div>회원 탈퇴</div>						
<div>SALTED</div> <div>사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호 대표자 : 조형진 개인정보보호 책임자 : 김대성 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F © Copyright 2021 SALTED.LTD</div> <div><div>CES</div><div>Consumer Technology Association</div></div> <div><div>ISPO</div><div>Munich</div></div>							
<div>App UI 및 퍼블리싱 Sync (2022.01.27)</div>							

P2



ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

[계정 정보](#) | [공지사항](#) | [자주 묻는 질문](#) | [시스템 문의](#) | [서비스 이용약관](#) | [개인정보 처리방침](#) | [개인정보 수집 및 이용](#) | [마케팅 정보 수신](#)

계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.

1 계정 정보 수정

2

취소

3

저장

국가 한국 외 국가

이름 훈 성 제갈

이메일 hoon.jg@salted.ltd

4

비밀번호

a

비밀번호를 입력해 주세요.

b

비밀번호를 한 번 더 입력해 주세요.

5

휴대폰 번호

휴대폰 번호를 입력해 주세요.

계정 코드 SULASN123456

직군



의료진



물리치료사



운동치료사



직접 입력

6

진료과를 직접 입력해 주세요.

1. "계정 정보 수정"으로 바뀐 타이틀
2. 1) 수정 내역이 없는 상태에서 버튼 클릭 시 "계정 정보" 페이지 로드
2) 수정 내역이 있는 상태에서 버튼 클릭 시 변경 내용 폐기 Confirm 팝업: "정보 수정을 취소하고 변경사항을 폐기하시겠습니까?; 이 작업은 복구할 수 없습니다.: 수정 계속, 변경사항 폐기"
3. 버튼 클릭 시 내용 저장, "계정 정보" 페이지 로드
4. 1) [a], [b]를 입력하지 않은 상태에서 정보 수정 및 저장 가능
2) [a], [b] 중 하나를 입력하지 않은 상태에서 후 "저장" 버튼 클릭 시 Alert: "변경할 비밀번호가 입력되지 않았습니다."
3) [a], [b]의 입력 내용이 다를 경우 [a] 아래에 가이드 문구 출력: "비밀번호가 일치하지 않습니다."
4) [a], [b]의 입력 내용이 같을 경우 [a] 아래에 가이드 문구 출력: "비밀번호가 일치합니다."
5. 1) 11자 제한, 숫자만 입력 가능
2) 유효성 체크
> 앞 3자리 010, 나머지 8자 입력
3) 유효성이 맞지 않는 휴대폰 번호 입력 시 text box 하단 안내 문구 표시: "유효하지 않은 번호입니다. 입력하신 내용을 다시 한 번 확인해 주세요."
6. 1) 직군 "직접 입력" 라디오 선택 시 텍스트필드 활성화
2) 특수문자, 이모지 입력 불가

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

계정 정보 | 공지사항 | 자주 묻는 질문 | 시스템 문의 | 서비스 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 개인정보 수집 및 이용 | 마케팅 정보 수신

계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.

회원 탈퇴

의료진 계정은 환자의 민감정보 보호를 위해 삭제 후 동일한 계정으로 재가입할 수 없으며 서비스를 재이용하실 경우 계정 승인을 받아야 합니다.

또한 환자 정보와 검사 기록은 다시 조회하거나 다운로드 받을 수 없습니다.

1



위의 내용을 이해하였으며, 회원에서 탈퇴하겠습니다.

2

회원 탈퇴

1. 회원 탈퇴 동의

2. 회원 탈퇴 버튼

1번 체크 하지 않을 경우 버튼 비활성화
체크 시 버튼 활성화

클릭 시 계정 삭제, "로그인" 페이지로 이동

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

계정 정보 | **공지사항** | 자주 묻는 질문 | 시스템 문의 | 서비스 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 개인정보 수집 및 이용 | 마케팅 정보 수신

계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.

공지사항

2

검색

전체 ▼

1

NO	카테고리	제목	등록일
중요	카테고리1	3 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.08.02
중요	카테고리2	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.08.01
중요	카테고리3	4 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.08.01
35	카테고리4	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.31
34	카테고리1	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30
33	카테고리2	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30
32	카테고리1	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30
31	카테고리2	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30
30	카테고리3	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30
29	카테고리4	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30

◀◀ ◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ▶ ▶▶

1. 클릭 시 카테고리 펼침

전체 ▼

전체

카테고리1

카테고리2

카테고리3

카테고리4

2. 검색 조건 : 제목/내용

- 카테고리 명, 제목, 등록일자 표시
> 상단 3개 공지글은 master admin에서 상단 고정으로 설정한 공지글 표시
> 고정 기준 : 최근 수정일 기준
- 리스트 클릭 시 공지사항 상세 화면으로 이동

관리자에서 등록된 콘텐츠 출력

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

계정 정보

공지사항

자주 묻는 질문

시스템 문의

서비스 이용약관

개인정보 처리방침

개인정보 수집 및 이용

마케팅 정보 수신

1

계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.

공지사항

카테고리	[카테고리명]		
제목	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	등록일	2021.11.17
내용	<p>나만 아는 '솔티드 스마트 인솔'</p> <p>함께 알면 골프가, 운동이 2배, 3배 재밌을 텐데!</p> <p>솔티드, 어떻게 소문낼 수 있을까?</p> <p>코로나19이후 언택트 시대가 가속화되면서 김남기프로'가 솔티드 '스마트인솔'을 활용하여 언택트 레슨을 진행하였는데요!</p> <div> </div>		
첨부 파일	abcd.pdf abcd.gif abcd.zip		

2

목록

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호

대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F

© Copyright 2021 SALTED.LTD

1. 공지 사항 콘텐츠

2. 목록

- 이전 화면으로 이동

관리자에서 등록된 콘텐츠 출력

App UI 및 퍼블리싱 Sync

(2022.01.27)

85

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
계정 정보	공지사항	자주 묻는 질문	시스템 문의	서비스 이용약관	개인정보 처리방침
			개인정보 수집 및 이용		마케팅 정보 수신

계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

전체 ▼

[카테고리명]

인술 구매 문의는 어디로 해야 하나요?

인술 구매 문의는 고객 센터로 연락해주세요.

문의 전화 080-4048-3912

고객 센터 운영시간 09:30 ~ 17:30

[인술 제품 소개서.pdf](#)

[카테고리명]

문의는 어디로 해야 하나요?

[카테고리명]

문의는 어디로 해야 하나요?

[카테고리명]

문의는 어디로 해야 하나요?

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1. 클릭 시 카테고리 펼침

전체 ▼

전체

카테고리1

카테고리2

카테고리3

카테고리4

2. 클릭 시 내용이 펼쳐짐 (아코디언)

재 클릭 시 내용이 닫힘

3. 시스템 문의 이메일 링크 :

cs@salted.ltd

관리자에서 등록된 콘텐츠 출력

App UI 및 퍼블리싱 Sync
 (2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

계정 정보 | 공지사항 | 자주 묻는 질문 | 시스템 문의 | 서비스 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 개인정보 수집 및 이용 | 마케팅 정보 수신

계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.

서비스 이용 약관

2

2021.10.10 ▼

제1장 약관의 적용

제1조 목적

솔티드㈜(이하 '회사')가 제공하는 서비스를 이용해 주셔서 감사합니다. 회사는 이용자(이 약관에 동의하지 않은 비회원을 말합니다) 또는 회원(이 약관에 동의하여 회사와 이용계약을 체결하고 회사가 제공하는 서비스를 이용할 수 있는 자를 말합니다)이 회사가 제공하는 솔티드 서비스(이하 '서비스')에 통합 적용될 수 있는 솔티드㈜ 통합 약관(이하 '본 약관')을 마련하였습니다. 본 약관은 이용자가 서비스를 이용하는 데 필요한 권리, 의무 및 책임사항, 이용조건 및 절차 등 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

• '솔티드 서비스'라 함은 회사가 제공하는 "SALTED" 브랜드를 사용하는 서비스(예: SALTED Golf)를 의미합니다.

제2조 약관의 명시, 효력 및 변경

1. 본 약관의 내용은 회사가 제공하는 개별 서비스 또는 서비스 초기 화면에 게시하거나 기타의 방법으로 공지하고, 본 약관에 동의한 이용자와 회원 모두(이하 '이용자')에게 그 효력이 발생합니다.

2. 회사는 필요한 경우 관련법령을 위배하지 않는 범위 내에서 본 약관을 변경할 수 있습니다. 본 약관이 변경되는 경우 회사는 변경사항을 시행일자 7일 전부터 이용자에게 홈페이지의 공지사항에서 공지하는 것을 원칙으로 하며, 이용자에게 불리한 내용으로 변경할 경우에는 30일 이전의 사전 유예기간을 두고 홈페이지에 게시하거나, 이용자가 등록한 메일 주소로 이메일을, 휴대폰번호로 문자메시지를 보내는 등 합리적으로 가능한 방법으로 변경사항을 공지 또는 통지합니다.

3. 회사가 전 항에 따라 공지 또는 통지를 하면서 공지 또는 통지일로부터 개정약관 시행일까지 거부의료진을 표시하지 아니하면 승인한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 고지하였음에도 이용자의 의료진표시가 없는 경우에는 변경된 약관을 승인한 것으로 봅니다. 이용자가 개정약관에 동의하지 않을 경우 이용자는 제13조 제1항에 따라 이용계약을 해지할 수 있습니다.

제3조 약관 외 준칙

본 약관에 규정되지 않은 사항에 대해서는 관련법령 또는 회사가 정한 서비스의 개별 이용약관, 운영정책 및 규칙 등(이하 '세부지침')의 규정에 따릅니다. 또한 본 약관과 세부지침의 내용이 충돌할 경우 세부지침에 따릅니다.

제2장 회원

제4조 회원가입

1. SALTED 계정이란

- 이용 약관 전문 출력
내용은 아래 경로 참조
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6>
- 가장 최근 약관 세팅
개정된 약관 히스토리를 볼 수 있도록 목록 출력 (개정일 기준)

SALTED

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

계정 정보 | 공지사항 | 자주 묻는 질문 | 시스템 문의 | 서비스 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 개인정보 수집 및 이용 | 마케팅 정보 수신

계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.

개인정보 처리방침

2

2021.10.10 ▼

제1장 약관의 적용

제1조 목적

솔티드㈜(이하 '회사')가 제공하는 서비스를 이용해 주셔서 감사합니다. 회사는 이용자(이 약관에 동의하지 않은 비회원을 말합니다) 또는 회원(이 약관에 동의하여 회사와 이용계약을 체결하고 회사가 제공하는 서비스를 이용할 수 있는 자를 말합니다)이 회사가 제공하는 솔티드 서비스(이하 '서비스')에 통합 적용될 수 있는 솔티드㈜ 통합 약관(이하 '본 약관')을 마련하였습니다. 본 약관은 이용자가 서비스를 이용하는 데 필요한 권리, 의무 및 책임사항, 이용조건 및 절차 등 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

• '솔티드 서비스'라 함은 회사가 제공하는 "SALTED" 브랜드를 사용하는 서비스(예:SALTED Golf)를 의미합니다.

제2조 약관의 명시, 효력 및 변경

1. 본 약관의 내용은 회사가 제공하는 개별 서비스 또는 서비스 초기 화면에 게시하거나 기타의 방법으로 공지하고, 본 약관에 동의한 이용자와 회원 모두(이하 '이용자')에게 그 효력이 발생합니다.

2. 회사는 필요한 경우 관련법령을 위배하지 않는 범위 내에서 본 약관을 변경할 수 있습니다. 본 약관이 변경되는 경우 회사는 변경사항을 시행일자 7일 전부터 이용자에게 홈페이지의 공지사항에서 공지하는 것을 원칙으로 하며, 이용자에게 불리한 내용으로 변경할 경우에는 30일 이전의 사전 유예기간을 두고 홈페이지에 게시하거나, 이용자가 등록한 메일 주소로 이메일을, 휴대폰번호로 문자메시지를 보내는 등 합리적으로 가능한 방법으로 변경사항을 공지 또는 통지합니다.

3. 회사가 전 항에 따라 공지 또는 통지를 하면서 공지 또는 통지일로부터 개정약관 시행일까지 거부의료진을 표시하지 아니하면 승인한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 고지하였음에도 이용자의 의의진표시가 없는 경우에는 변경된 약관을 승인한 것으로 봅니다. 이용자가 개정약관에 동의하지 않을 경우 이용자는 제13조 제1항에 따라 이용계약을 해지할 수 있습니다.

제3조 약관 외 준칙

본 약관에 규정되지 않은 사항에 대해서는 관련법령 또는 회사가 정한 서비스의 개별 이용약관, 운영정책 및 규칙 등(이하 '세부지침')의 규정에 따릅니다. 또한 본 약관과 세부지침의 내용이 충돌할 경우 세부지침에 따릅니다.

제2장 회원

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

계정 정보 | 공지사항 | 자주 묻는 질문 | 시스템 문의 | 서비스 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 개인정보 수집 및 이용 | 마케팅 정보 수신

계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.

개인정보 수집 및 이용

2

2021.10.10 ▼

1

약관 내용 출력

- 약관 출력
내용은 아래 경로 참조
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6>
- 가장 최근 약관 세팅
개정된 약관 히스토리를 볼 수 있도록 목록 출력 (개정일 기준)

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

계정 정보 | 공지사항 | 자주 묻는 질문 | 시스템 문의 | 서비스 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 개인정보 수집 및 이용 | 마케팅 정보 수신

계정 설정 및 공지사항을 확인할 수 있습니다.

마케팅 정보 수신

2

2021.10.10 ▼

1

약관 내용 출력

- 약관 출력
내용은 아래 경로 참조
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6>
- 가장 최근 약관 세팅
개정된 약관 히스토리를 볼 수 있도록 목록 출력 (개정일 기준)

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD



App UI 및 퍼블리싱 Sync
(2022.01.27)

End Of Document