



# 솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발

## 화면설계서 – NEUROGAIT – Patient App

**Document Version :** v2.2.4

**Release Date :** 2022.01

**Organization :** 솔티드

**Author :** 유병규

| 구분    | 소속     | 역할   | 담당자 | 확인일 | 확인 |
|-------|--------|------|-----|-----|----|
| 작성    | 솔티드(주) | PA   | 유병규 |     |    |
| 동료검토  | 솔티드(주) | 기획PA | 제갈훈 |     |    |
| 동료검토  | 픽스프레임  | 기획PL | 정수화 |     |    |
| 동료검토  | 솔티드(주) | 개발PL | 최성찬 |     |    |
| 동료검토  | 픽스프레임  | PM   | 김상환 |     |    |
| 검토    | 솔티드    | 사업총괄 | 연상근 |     |    |
| 인수/승인 | 솔티드    | 총괄PM | 강경훈 |     |    |

| 날짜         | 버전   | 변경사유  | 변경내용   | 작성자     |
|------------|------|-------|--|---------|
| 2021.10.05 | 0.1  | 최초 작성 | <ul style="list-style-type: none"><li>최초 작성</li></ul>  | 유병규     |
| 2021.10.07 | 0.2  | 업데이트  | <ul style="list-style-type: none"><li>이용안내 작성</li><li>로그인, 회원가입, 홈 수정</li></ul>  | 유병규     |
| 2021.10.07 | 0.3  | 업데이트  | <ul style="list-style-type: none"><li>회원가입 수정<ul style="list-style-type: none"><li>매칭 번호 입력 추가</li><li>이용 약관 정책 및 흐름 수정</li></ul></li><li>홈 수정<ul style="list-style-type: none"><li>병원 변경 기능 제거</li></ul></li><li>스케줄 관리<ul style="list-style-type: none"><li>처방 운동 아이콘 삭제 및 바 추가</li></ul></li></ul>  | 유병규     |
| 2021.10.14 | 0.4  | 업데이트  | <ul style="list-style-type: none"><li>회원가입 - 문진 정보, 추가 정보 입력 화면 추가</li><li>걸음 수 화면 추가</li><li>종합 결과 화면 추가</li></ul>  | 유병규     |
| 2021.10.15 | 0.5  | 업데이트  | <ul style="list-style-type: none"><li>문서 통합</li></ul>  | 유병규     |
| 2021.10.15 | 0.9  | 업데이트  | <ul style="list-style-type: none"><li>문서 통합</li></ul>  | 제갈훈     |
| 2021.10.18 | 0.45 | 업데이트  | <ul style="list-style-type: none"><li>회원가입 수정<ul style="list-style-type: none"><li>발 사이즈, 다리 길이 입력 추가</li></ul></li><li>홈 데이터 수정</li><li>아이디 비밀번호 찾기 수정</li><li>설정 수정</li></ul>  | 유병규/정수화 |
| 2021.10.19 | 0.46 | 업데이트  | <ul style="list-style-type: none"><li>회원가입 수정<ul style="list-style-type: none"><li>거주지 추가</li></ul></li><li>홈 수정<ul style="list-style-type: none"><li>보행 데이터 변경</li></ul></li></ul>  | 유병규     |
| 2021.10.21 | 0.47 | 업데이트  | <ul style="list-style-type: none"><li>메인화면<ul style="list-style-type: none"><li>보행 데이터 변경</li><li>날짜별 데이터 표시 방안 추가</li></ul></li><li>회원가입 수정<ul style="list-style-type: none"><li>국내/국외 회원 가입 시 휴대폰/이메일 인증 수단 변경</li></ul></li><li>아이디/비밀번호 찾기<ul style="list-style-type: none"><li>인증 수단 변경</li></ul></li><li>오늘의 운동<ul style="list-style-type: none"><li>오늘 운동 추가 시 종료 날짜 선택, 요일 선택 삭제</li><li>운동 촬영 시나리오 변경</li></ul></li><li>설정<ul style="list-style-type: none"><li>이메일/휴대폰/비밀번호 변경 화면 수정</li></ul></li><li>알림<ul style="list-style-type: none"><li>메뉴 이동 기능 추가</li></ul></li></ul> | 유병규     |

| 날짜         | 버전    | 변경사유 | 변경내용  | 작성자 |
|------------|-------|------|---|-----|
| 2021.10.22 | 0.48  | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 오늘의 운동<ul style="list-style-type: none"><li>- 오늘 운동 추가 시 종료 날짜 선택, 요일 선택 삭제</li><li>- 운동 촬영 시나리오 변경</li></ul></li><li>• 스케줄 관리<ul style="list-style-type: none"><li>- 운동 추가 화면 변경</li></ul></li><li>• 인솔 관리<ul style="list-style-type: none"><li>- 인솔 이름 변경 팝업 추가</li></ul></li></ul> | 유병규 |
| 2021.10.29 | 0.496 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 로그인- 로그인 실패, 휴면, 차단 시나리오 추가</li><li>• 문진정보- 1,2번 항목 답변 순서 변경 및 기타 tap시 입력박스 추가</li><li>• 홈- 화면 구성 변경</li><li>• 운동- 과거 운동 선택 시 결과 보기 시나리오 변경</li><li>• 종합 결과- 종합 결과 전체 수정</li><li>• 설정- 이벤트, 공지사항, FAQ 메뉴 위치 변경</li></ul>  | 유병규 |
| 2021.11.01 | 0.497 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 로그인 화면- Native &gt; hybrid 변경</li></ul>   | 유병규 |
| 2021.11.04 | 0.498 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 회원가입<ul style="list-style-type: none"><li>- 국가 외국일 경우 성 입력 칸 추가</li></ul></li><li>• 회원정보 수정<ul style="list-style-type: none"><li>- 국가 외국일 경우 성 수정 칸 추가</li><li>- 거주지 수정 추가</li></ul></li></ul>  | 유병규 |
| 2021.11.05 | 1.0   | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 병원 정보<ul style="list-style-type: none"><li>- 코드 입력 시나리오 삭제</li><li>- 코드 보기 추가</li></ul></li><li>• 회원 정조<ul style="list-style-type: none"><li>- 문진 보기 화면 추가</li></ul></li><li>• 전체 : 운동 횟수, #회 &gt; 세트로 변경</li></ul>   | 유병규 |
| 2021.11.08 | 1.1   | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 스케줄<ul style="list-style-type: none"><li>- 스케줄 추가 화면 시나리오 변경</li></ul></li><li>• 운동<ul style="list-style-type: none"><li>- # 회차 &gt; 세트 # 으로 변경</li></ul></li></ul>   | 유병규 |
| 2021.11.11 | 1.1.1 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Screen ID 최신화</li></ul>   | 제갈훈 |
| 2021.11.18 | 1.2   | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 회원가입<ul style="list-style-type: none"><li>- 국외 환자 이름 입력 순서 : 이름, 성 순서로 변경</li><li>- 매칭코드 이용한 회원가입 시나리오 삭제</li></ul></li><li>• 스케줄 추가<ul style="list-style-type: none"><li>- 날짜 선택 UI 변경</li></ul></li></ul>   | 유병규 |
| 2021.11.18 | 1.2.1 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 약관 동의 html 페이지 추가</li></ul>   | 제갈훈 |


| 날짜         | 버전    | 변경사유 | 변경내용  | 작성자 |
|------------|-------|------|---|-----|
| 2021.11.24 | 1.3   | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>아이디 찾기- 휴대폰 번호 입력 시 국가 선택 추가</li> <li>비밀번호 재설정- 휴대폰 번호 입력 시 국가 선택 추가</li> <li>비밀번호 재설정- 휴대폰 번호 표시 시 국가 번호도 함께 표시</li> <li>오늘의 걸음 - 걸음 시간 변경</li> <li>운동 - 운동 부위 썸네일 삭제</li> <li>설정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가에 따른 회원 명 표시 방법 추가</li> </ul> </li> <li>- 한국 회원 이름/ 성 구분 삭제</li> <li>- 국외 회원 정보 화면 추가</li> <li>- 휴대폰 번호 /이메일 변경               <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 회원의 국가에 따른 별도 화면 추가</li> </ul> </li> </ul> | 유병규 |
| 2021.11.24 | 1.4   | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>로그인 - 회원 종류 선택 셀렉트 박스 추가</li> <li>아이디 찾기- 회원 종류 선택 셀렉트 박스 추가</li> <li>비밀번호 재설정(1/2)- 회원 종류 선택 셀렉트 박스 추가</li> <li>회원 가입 - 회원 종류 선택 화면 추가</li> </ul>   | 유병규 |
| 2021.11.30 | 1.45  | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>알림 메시지 관련 디스크립션 추가</li> </ul>  | 정수화 |
| 2021.12.01 | 1.5   | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>홈 - 추천 운동 tap 시 이동 시나리오 추가(p39,p41)</li> <li>운동(동영상 비촬영) &gt; 족저압 녹화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 러닝 운동 시 인솔 연결 끊김 발생 시나리오 추가(p65)</li> </ul> </li> </ul>  | 유병규 |
| 2021.12.02 | 1.5.1 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>보행 결과 화면 UI 수정: 디자인 sync, 계산식 추가(p44,p45,p94,p95)</li> </ul>   | 제갈훈 |
| 2021.12.07 | 2.0   | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>HCP 연동 안될 경우 케이스 체크</li> </ul>   | 정수화 |
| 2021.12.20 | 2.0.1 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>인솔 보정 Description 보완</li> <li>인솔 이름 변경 프로세스 보완</li> </ul>  | 제갈훈 |
| 2021.12.24 | 2.0.2 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>알럿 메시지 추가</li> </ul>   | 정수화 |
| 2021.12.28 | 2.0.3 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>인솔 이름 등록 및 변경 관련 메시지 수정</li> </ul>   | 정수화 |
| 2022.01.05 | 2.1   | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>고대안암병원 요구사항 반영</li> </ul>  | 정수화 |
| 2022.01.11 | 2.1.1 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>최신화</li> </ul>   | 정수화 |
| 2022.01.13 | 2.1.2 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>DH팀 요청사항 반영</li> </ul>   | 정수화 |

2022.01.05 수정

2022.01.13 수정

| 날짜         | 버전    | 변경사유 | 변경내용  | 작성자 |
|------------|-------|------|---|-----|
| 2022.01.14 | 2.1.3 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>디자인, 퍼블리싱 sync 및 문서 현행화</li><li>단어 "달성률"을 "달성율"로 수정</li><li>필수 접근 권한 재정의: PT-A-01-1</li></ul> | 제갈훈 |
| 2022.01.18 | 2.1.4 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>환자 정보 항목 수정(HCP와 동일하게 업데이트)</li><li>데이터 동기화, 운동 데이터 다운로드 정의</li></ul>                         | 정수화 |
| 2022.01.20 | 2.1.5 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>데이터 동기화/다운로드 시점 정의</li><li>운동 문의/메모 기능, 영상 촬영 완료 시 등 기능 정의</li></ul>                          | 정수화 |
| 2022.01.24 | 2.1.8 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>튜토리얼 &gt; 인슐린 구매 안내 화면 삭제</li></ul>   | 정수화 |
| 2022.01.27 | 2.1.8 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>부분부하보행 운동 시나리오 보완</li></ul>   | 정수화 |
| 2022.02.03 | 2.2   | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>부분부하보행 운동 시나리오 보완</li><li>결과 화면 추가</li><li>회원 가입 시 이메일 선택 카테고리 추가</li></ul>                   | 정수화 |
| 2022.02.04 | 2.2.1 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>동료검토 후 보완</li></ul>   | 정수화 |
| 2022.02.07 | 2.2.2 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>부분부하보행 결과 그래프 보완</li></ul>  | 정수화 |
| 2022.02.08 | 2.2.3 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>튜토리얼 문구 최신화</li></ul>   | 제갈훈 |
| 2022.02.08 | 2.2.3 | 업데이트 | <ul style="list-style-type: none"><li>튜토리얼 문구 최신화</li><li>회원 가입 시 휴대폰 중복일 경우 디스크립션 보완</li></ul>                                     | 제갈훈 |

native

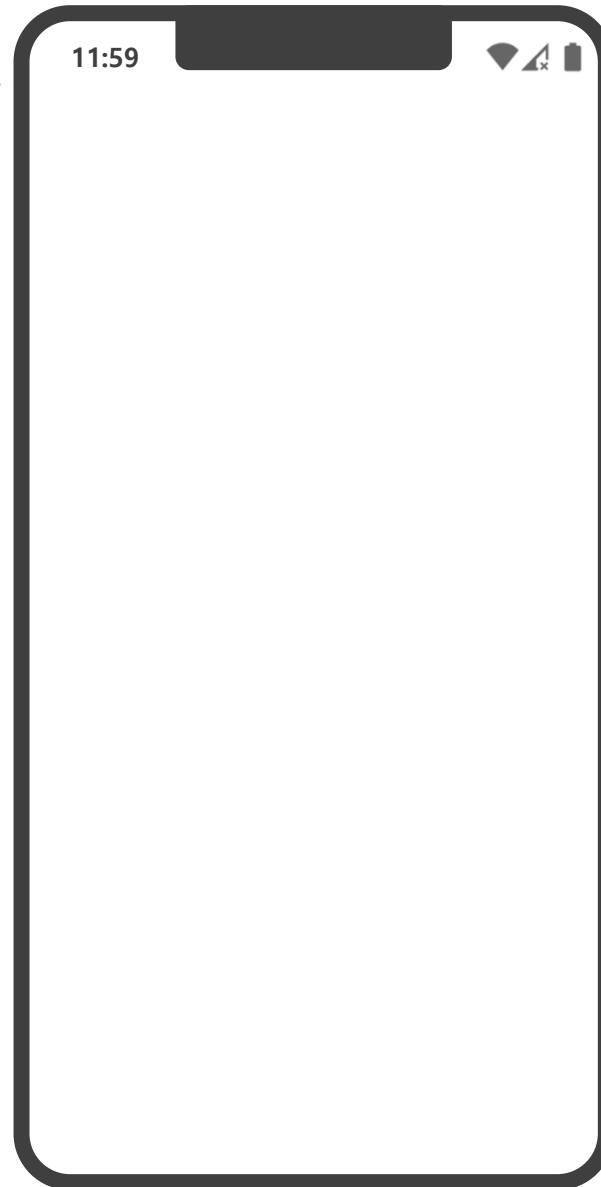


스플래쉬

스플래쉬에서 모바일 데이터 연결 확인  
- 모바일 미연결 시 기존 로그인 정보를  
이용하여 로그인 후 stand alone 으로 APP  
이용

튜토리얼 > 인솔 구매 화면  
삭제  
(2022.01.2)


native

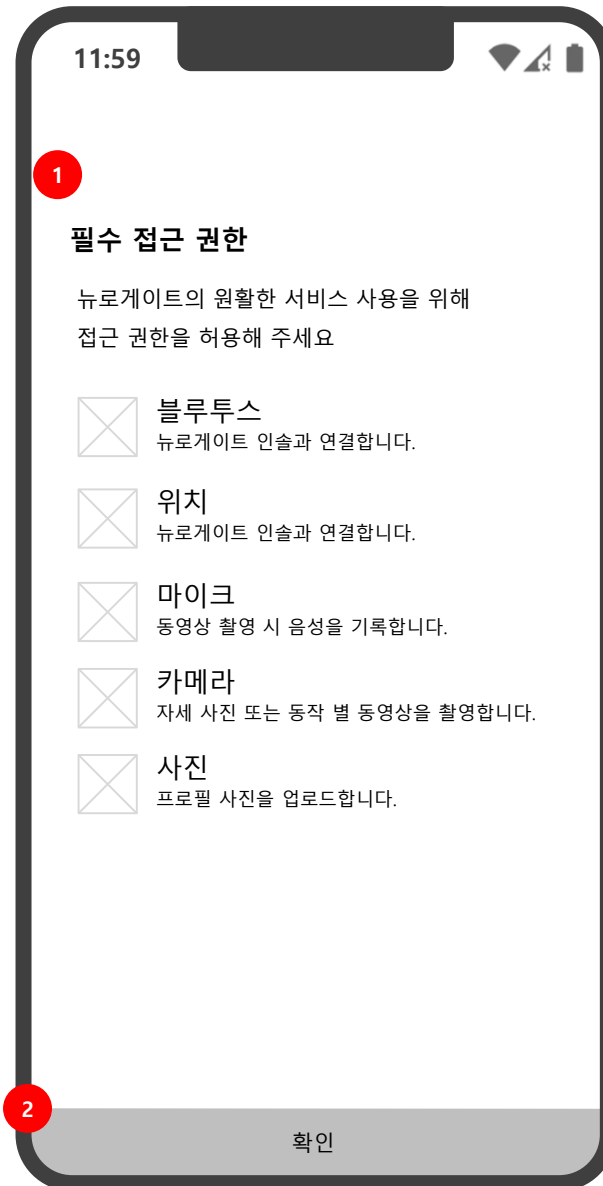

- 필수 접근 권한 안내 페이지
- 확인 버튼
  - Tap
    - > 안드로이드 : 권한 요청 팝업 표시
    - > ios : APP 처음 실행 시 인솔 안내
- 안드로이드 이전버튼 tap
  - 1번 : '뒤로 가기 버튼을 한 번 더 누르면 종료됩니다.' 토스트 메시지 표시
  - 2번 : APP 종료

필수 접근 권한 재정의  
(2022.01.14)

native

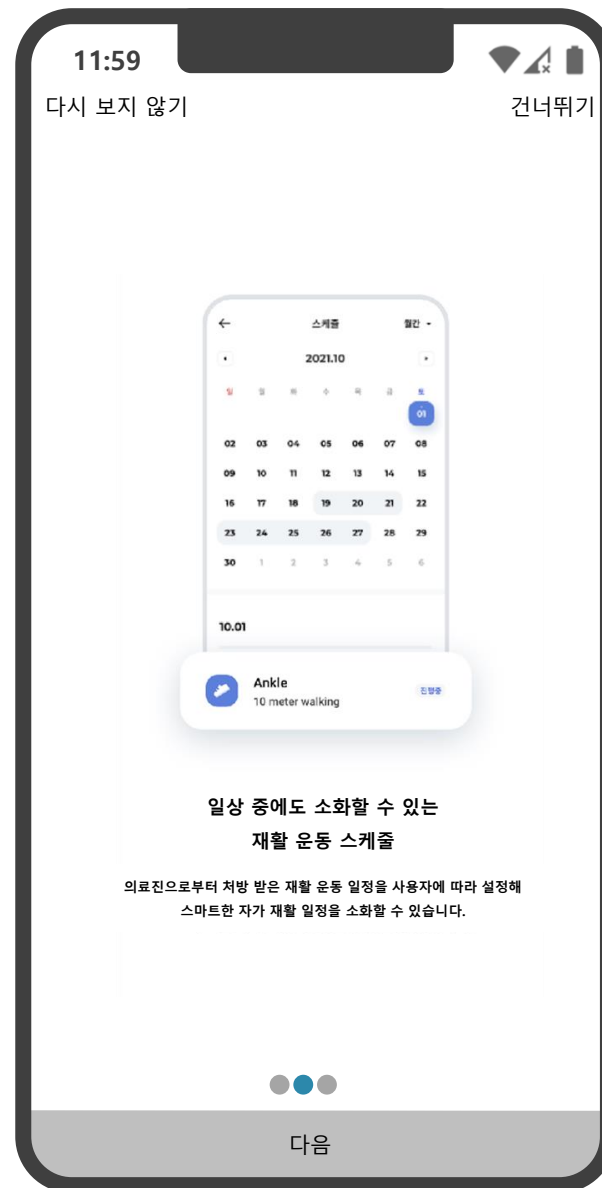


1. 앱 이용안내 페이지
  - 좌/우 swipe를 이용하여 페이지 전환
  - 첫 페이지 : 좌 swipe 막기
  - 마지막 페이지 : 우 swipe 막기
2. 다음
  - tap 시 앱 이용안내 다음 페이지로 이동
  - > 마지막 페이지에서 로그인 버튼으로 변경
3. 다시 보지 않기
  - 앱 실행 시 이용안내 표시 하지 않음
  - 로그인 화면으로 이동
4. 건너뛰기
  - 로그인 화면으로 이동
  - > 마지막 페이지에서는 비노출
5. 안드로이드 이전버튼 tap
  - 로그인 화면으로 이동

튜토리얼 문구 수정  
(2022.02.08)



native

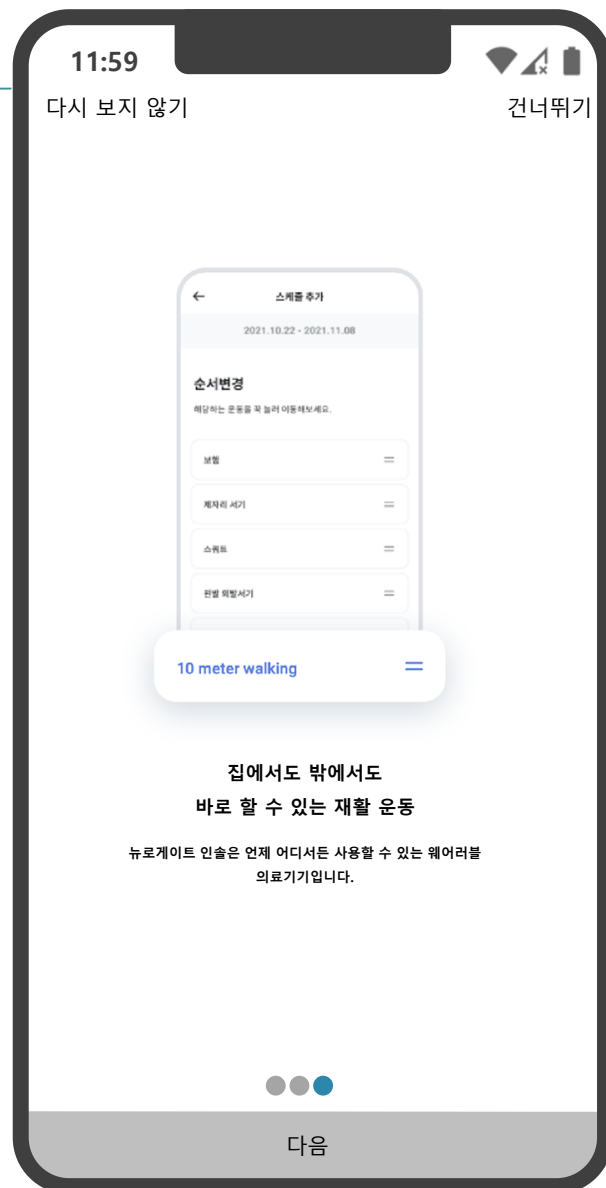

집에서도 밖에서도  
바로 할 수 있는 재활 운동

뉴로게이트 인술은 언제 어디서든 사용할 수 있는 웨어러블  
의료기기입니다.



의료진과의 소통을 통한  
효율적인 자가 재활 운동

뉴로게이트는 의료진과 소통할 수 있는 채널임과 동시에 효율적인 재활  
치료를 돕는 또 하나의 도구입니다.

1. 앱 이용안내 페이지
  - 좌/우 swipe를 이용하여 페이지 전환
  - 첫 페이지 : 좌 swipe 막기
  - 마지막 페이지 : 우 swipe 막기
2. 다음
  - tap 시 앱 이용안내 다음 페이지로 이동
  - > 마지막 페이지에서 로그인 버튼으로 변경
3. 다시 보지 않기
  - 앱 실행 시 이용안내 표시 하지 않음
  - 로그인 화면으로 이동
4. 건너뛰기
  - 로그인 화면으로 이동
  - > 마지막 페이지에서는 비노출
5. 안드로이드 이전버튼 tap
  - 로그인 화면으로 이동

튜토리얼 문구 수정  
(2022.02.08)

| Page Description | 로그인 | Screen ID | PT-A-03 | Description   |
|------------------|-----|-----------|---------|---|
|                  |     |           |         | <ol style="list-style-type: none"> <li>아이디, 비밀번호 입력 <ul style="list-style-type: none"> <li>비밀번호 마스킹 처리</li> </ul> </li> <li>자동 로그인 <ul style="list-style-type: none"> <li>APP 종료 후 재 진입 시 자동 로그인</li> </ul> </li> <li>아이디/비밀번호 찾기 화면으로 이동</li> <li>로그인 시도 <ul style="list-style-type: none"> <li>로그인 성공 : 홈으로 이동</li> <li>로그인 실패 : 로그인 실패 팝업㉠ 표시 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 로그인 시도 5회 실패 시 1시간 계정 잠김, 잠김 안내</li> <li>로그인 제한 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 로그인 재시도 시 남은 시간 안내</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>팝업㉠ 표시 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1분 이하로 시간 남았을 때 '1분간 로그인할 수 없습니다'로 팝업문구 표시, 별도 초단위 표시 하지 않음</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>로그인 성공 시 데이터 동기화(업로드) 진행</li> <li>회원가입 <ul style="list-style-type: none"> <li>회원 가입 화면으로 이동</li> </ul> </li> <li>환자 종류 <ul style="list-style-type: none"> <li>회원가입 시 선택한 환자 종류 선택</li> <li>연구/일반 선택</li> </ul> </li> <li>안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> <li>1번 : <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 로그인 화면 : '뒤로 가기 버튼을 한 번 더 누르면 종료 됩니다.' 토스트 메시지 표시</li> </ul> </li> <li>&gt; 팝업 : 팝업 닫기</li> <li>2번 : APP 종료</li> </ul> </li> </ol> |

데이터 동기화 시점 정의  
(2022.01.20)

| Page Description   | 로그인(로그인 휴면/동시로그인) | Screen ID | PT-A-03 | Description  |
|--|-------------------|-----------|---------|--|
|  <p>The screenshot shows the NEUROGAIT login interface. At the top, the status bar shows 11:59 and connectivity icons. The app title 'NEUROGAIT' is centered. Below it is the '로그인' (Login) section. This section includes a dropdown menu currently set to '연구' (Research), followed by input fields for '아이디' (ID) and '비밀번호' (Password). Below these fields is a checkbox labeled '○ 자동 로그인' (Auto login). A large grey '로그인' button is positioned below the checkbox. Underneath the button is the text '계정이 없으신가요? 회원가입하기' (Don't have an account? Sign up). At the bottom, there are links for '아이디 찾기' (Find ID) and '비밀번호 찾기' (Find password). Two callouts are present: Callout 'a' points to the login button and contains an announcement about account dormancy after 1 year of inactivity, with options to '확인' (Confirm) or '취소' (Cancel). Callout 'b' points to the '자동 로그인' checkbox and contains an announcement about auto-login from other devices, with options to '확인' (Confirm) or '취소' (Cancel).</p> |                   |           |         | <p>1. 계정 휴면</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용자가 1년동안 APP 로그인 하지 않았을 경우 계정 휴면처리됨</li> <li>- 휴면계정 되기 30일 전 휴면계정 전환 안내 메일or문자 발송</li> <li>- 로그인 시도 시 계정 비활성화 안내 팝업㉠ 표시</li> </ul> <p>1. 동시 로그인</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 로그인시 다른 디바이스에서 자동 로그아웃 된다는 안내 팝업㉡ 표시</li> <li>- 확인 : 로그인 처리 후 홈화면으로 이동</li> <li>- 취소 : 로그인 처리 X</li> </ul> <p>1. 안드로이드 이전버튼 tap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1번 : 팝업 닫힘</li> <li>&gt; 동시 로그인 팝업 : 취소처리</li> </ul> |

| Page Description   | 아이디 찾기 | Screen ID | PT-A-03-01 | Description  |
|--|--------|-----------|------------|--|
| <div data-bbox="507 125 1108 1306"> <div>5</div> <div>11:59</div> <div>취소</div> <div>아이디 찾기</div> <div>1</div> <div>회원가입 시 인증한 수단으로 진행하시기 바랍니다</div> <div>8</div> <div>휴대폰 이메일</div> <div>7</div> <div>선택</div> <div>연구 ▼</div> <div>2</div> <div>휴대폰 번호</div> <div>+82 ▼ ' '없이 입력</div> <div>* 핸드폰 번호로 가입하신 아이디를 보내드립니다.</div> <div>3</div> <div>이메일</div> <div>직접입력 ▼</div> <div>* 이메일 주소로 가입하신 아이디를 보내드립니다.</div> <div>4</div> <div>아이디 찾기</div> </div> <div data-bbox="58 806 103 849">6</div> <div data-bbox="155 849 341 878">인증수단 확인 필요</div> <div data-bbox="20 921 486 978">해당 인증수단으로 회원가입된 회원이 없습니다.<br/>인증 수단을 확인해주세요</div> <div data-bbox="223 1013 269 1042">확인</div> |        |           |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>안내 문구 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회원가입시 인증한 수단으로 진행 요청 문구 표시</li> </ul> </li> <li>휴대폰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 휴대폰 번호 입력</li> </ul> </li> <li>이메일 주소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이메일 주소 입력</li> </ul> </li> <li>아이디 찾기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입력된 휴대폰&amp;이메일로 아이디 전송</li> <li>- 회원 가입시 인증한 휴대폰 &amp; 이메일 없을 경우 인증 수단 확인 팝업⑥ 표시</li> <li>- 아이디 전송 후 홈으로 이동</li> </ul> </li> <li>취소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 로그인 화면으로 이동</li> </ul> </li> <li>인증수단 확인 실패 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인증 수단으로 등록된 회원이 없을 경우 인증 수단 확인 안내 팝업 표시</li> </ul> </li> <li>환자 종류 선택 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구/일반 선택</li> </ul> </li> <li><b>휴대폰 선택 시 휴대폰 번호 입력란이 이메일 선택 시 이메일 입력란이 출력</b></li> <li>직접입력 <ul style="list-style-type: none"> <li>@gmail.com</li> <li>@daum.net</li> <li>@hanmail.net</li> <li>@nate.com</li> <li>@naver.com</li> <li>@hotmail.com</li> </ul> </li> </ol> |

| Page Description | 비밀번호 재설정(1/2 step) | Screen ID | PT-A-03-02 | Description   |
|------------------|--------------------|-----------|------------|---|
|                  |                    |           |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 안내 문구 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회원가입시 인증한 수단으로 진행 요청 문구 표시</li> </ul> </li> <li>2. 휴대폰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 휴대폰 번호 입력</li> </ul> </li> <li>3. 이메일 주소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이메일 주소 입력</li> </ul> </li> <li>4. 재설정 코드 받기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입력된 휴대폰&amp;이메일로 재설정 코드 전송</li> <li>- 회원 가입시 인증한 휴대폰&amp;이메일 없을 경우 인증 수단 확인 팝업⑥ 표시</li> <li>- 재설정코드 전송 후 다음 화면으로 이동</li> </ul> </li> <li>5. 취소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 로그인 화면으로 이동</li> </ul> </li> <li>6. 인증수단 확인 실패 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인증 수단으로 등록된 회원이 없을 경우 인증 수단 확인 안내 팝업 표시</li> </ul> </li> <li>7. 환자 종류 선택 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구/일반 선택</li> </ul> </li> <li>8. 휴대폰 선택 시 휴대폰 번호 입력란이<br/>이메일 선택 시 이메일 입력란이 출력</li> </ol> |

| Page Description | 비밀번호 재설정(2/2 step)   | Screen ID | PT-A-03-03 | Description   |
|------------------|--|-----------|------------|---|
|                  | <div> <div> <div>5</div> <div>11:59</div> <div>취소</div> <div>비밀번호 재설정</div> </div> <div> <div>1</div> <div>휴대폰 번호</div> <div>+82 00-0000-0000</div> <div>이메일</div> <div>000@000.com</div> </div> <div> <div>2</div> <div>새 비밀번호 (영문+숫자+특수문자/8~16자리)</div> <div></div> </div> <div> <div>3</div> <div>재설정 코드</div> <div>재설정코드 입력</div> </div> <div> <div>4</div> <div>비밀번호 변경</div> </div> </div> |           |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>휴대폰 번호 or 이메일 표시 <ul style="list-style-type: none"> <li>비밀번호 재설정 코드를 받은 휴대폰 번호 or 이메일 표시</li> </ul> </li> <li>새 비밀번호 <ul style="list-style-type: none"> <li>새 비밀 번호 입력</li> <li>오류 시 텍스트 박스 하단 오류 문구 표시</li> </ul> </li> <li>재설정 코드 <ul style="list-style-type: none"> <li>휴대폰 or 이메일로 받은 재설정 코드 입력</li> </ul> </li> <li>비밀번호 변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>비밀번호 변경</li> </ul> </li> <li>안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> <li>이전 화면으로 이동</li> </ul> </li> </ol> <div> <div> <div>새 비밀번호 (영문+숫자+특수문자/8~16자리)</div> <div> <div>비밀번호가 형식에 맞지 않습니다.</div> </div> </div> <div> <div>재설정 코드</div> <div>123adsfa</div> <div>재설정코드가 올바르지 않습니다.<br/>다시 확인해주세요.</div> </div> <div> <div>비밀번호 재설정- 휴대폰 번호 표시 시 국가 번호도 함께 표시 (2021.11.25)</div> <div>UI 변경 (2022.01.14)</div> </div> </div> |

| Page Description   | 회원가입 – 국가 선택 | Screen ID | PT-A-04-1 | Description  |
|--|--------------|-----------|-----------|--|
| <div><div><div><div><div><div>11:59</div><div>취소</div><div>회원가입</div><div>01/03</div></div><div><div>3</div></div><div><div><div>1</div><div>국가 선택</div><div>선택</div></div><div><div>2</div></div></div></div><div><div>국가 선택</div><div>선택</div></div></div></div></div> |              |           |           | <div><div>1. 국가 선택</div><div><div>- admin에서 생성된 국가 리스트 표시</div><div>- 로그인 전까지 모바일 기준의 언어로 출력</div><div>- 국가 선택 후 회원 가입 화면부터 선택 국가의 언어로 표시</div></div><div>2. 다음</div><div><div>- 국가 선택 선택 전까지 비활성화</div><div>- 국가 선택 후 다음 tap 시 회원가입 다음 단계로 이동</div></div><div>3. 이전</div><div><div>- 로그인 화면으로 이동</div></div><div>4. 안드로이드 이전버튼 tap</div><div><div>- 로그인 화면으로 이동</div></div></div> |

| Page Description | 회원가입 - 환자 종류 선택   | Screen ID | PT-A-04-13 | Description   |
|------------------|---|-----------|------------|---|
|                  |  |           |            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 환자 종류 선택<br/>- 연구/일반 선택</li><li>2. 다음<br/>- 연구&amp;일반 선택 전까지 비활성화<br/>- 다음 tap 시 회원가입 다음 단계로 이동</li><li>3. 이전<br/>- 로그인 화면으로 이동</li><li>4. 안드로이드 이전버튼 tap<br/>- 이전 화면으로 이동</li></ol> <div data-bbox="1647 1128 2026 1256">회원가입 시 환자 종류 선택 화면<br/>추가<br/>(2021.11.25)</div> |



11:59

취소 회원가입 03/03

1 아이디(아이디입력) **중복확인**

2 비밀번호(영문+숫자+특수문자/8~16자리)

3 이름(실명 입력)

6 생년월일(YYYY.MM.DD)

5 ☐ 남자 ☐ 여자

9 국가 선택 ▼ '·'없이 입력

10 **인증번호 받기**

인증번호 **인증번호 확인**

4 이메일 직접입력 ▼

7 거주지

키 \_\_\_\_cm

체중 \_\_\_\_kg

8 발 사이즈 \_\_\_\_mm

다리 길이(선택) 왼쪽 : \_\_\_\_cm / 오른쪽 : \_\_\_\_cm ?

이용약관, 개인정보처리방침, 개인정보 수집·이용, 민감정보 수집·이용, 개인(민감)정보 제3자 제공, 마케팅 정보 수신에 동의 하십니까?

☐ 전체 동의

☐ 이용약관(필수) 전문보기

☐ 개인정보처리방침(필수) 전문보기

☐ 개인정보 수집·이용 동의(필수) 전문보기

☐ 민감정보 수집·이용 동의(필수) 전문보기

☐ 개인(민감)정보 제3자 제공 동의(필수) 전문보기

☐ 마케팅 정보 수신 동의(선택) 전문보기

키, 체중 추가  
(2022.01.18)

약관 최종 항목 적용  
(2022.01.05)

회원 가입

- 아이디 입력
  - 10자 제한
  - 중복 확인 버튼
  - > 아이디 중복 시 text box 하단 아이디 중복 문구 표시
- 비밀번호
  - 16자리 제한
  - 8~16 자리, 영문/숫자/특수문자
  - 입력 비밀번호 마스킹 처리
  - > 눈 아이콘 tap시 마스킹 해제
  - 유효성이 맞지 않는 비밀번호 입력 시 text box 하단 안내 문구 표시
- 이름
  - 10자 제한
- 이메일
  - 기본 이메일 입력
- 성별
  - default 미선택
  - 선택 시 박스와 폰트 색상 변경
- 생년월일
  - 8자 제한
  - 영역 tap 시 숫자 키패드 표시
  - 유효성 체크
  - > DATA 체크
- 거주지
  - 거주지 입력
- 발 사이즈 / 다리 길이
  - 발 사이즈 / 다리길이 단위는 국가 선택에 따라 변경 됨
  - > 한국 선택 시 한국식 단위, 한국 이외 국가 시 영국식 단위 표시
  - 다리길이 왼쪽/ 오른쪽 2개 입력
  - 발 사이즈/ 다리 길이 입력 영역 tap 시 숫자 + 소수점 키패드 표시
  - 우측 도움말 아이콘 tap 시 안내 팝업 표시
- 휴대폰 번호
  - 한국 가입자는 휴대폰 인증 제공
  - 휴대폰 번호 국가 선택
  - 앞 단계에서 선택한 국가의 코드가 자동 세팅
  - > 리스트 : 국가명(국가번호) 표시
  - 11자 제한, 숫자 키패드 제공
  - 유효성 체크(국내 기준)
  - > 앞 3자리 010, 나머지 8자 입력
  - 유효성이 맞지 않는 휴대폰 번호 입력 시 text box 하단 안내 문구 표시
- 인증번호 받기 버튼
  - 입력한 휴대폰 번호로 인증번호 전송
  - 인증번호 확인 버튼을 이용하여 인증 번호 유효성 체크

다리길이 외 모두 필수 입력 사항

다음 페이지 계속

11:59

취소

회원가입 03/03

아이디(아이디입력) **중복확인**

비밀번호(영문+숫자+특수문자/8~16자리)

이름(실명 입력)

생년월일(YYYY.MM.DD)

남자 여자

국가 선택 ♥ '·'없이 입력

**인증번호 받기**

인증번호 **인증번호 확인**

이메일 직접입력 ▼

거주지

키 \_\_\_\_cm

체중 \_\_\_\_kg

발 사이즈 \_\_\_\_mm

다리 길이(선택) 왼쪽 : \_\_\_\_cm / 오른쪽 : \_\_\_\_cm

11 이용약관, 개인정보처리방침, 개인정보 수집 · 이용, 민감정보 수집 · 이용, 개인(민감)정보 제3자 제공, 마케팅 정보 수신에 동의 하십니까?

☐ 전체 동의

☐ 이용약관(필수) 전문보기

☐ 개인정보처리방침(필수) 전문보기

☐ 개인정보 수집 · 이용 동의(필수) 전문보기

☐ 민감정보 수집 · 이용 동의(필수) 전문보기

☐ 개인(민감)정보 제3자 제공 동의(필수) 전문보기

☐ 마케팅 정보 수신 동의(선택) 전문보기

14 발 사이즈 / 다리 길이 측정 방법

1. 발 사이즈

- 발을 종이 위에 올리고 가장 긴 발가락 끝과 발뒤꿈치를 기준으로 체크 합니다.

1. 다리 길이

- 골반에서 안쪽 복사뼈까지 길이를 기준으로 체크 합니다.



확인

12

회원 가입

11. 약관

- 개별 약관 체크박스/전문 보기 Tap시 해당 약관 화면으로 이동
  - > 약관 화면에서 동의 버튼 tap 시 해당 약관 체크박스 체크 된 상태로 변경
  - > 체크 해제 가능
- 전체 약관 동의 시 전체 약관 화면 표시
  - > 약관화면에서 동의 시 회원가입 화면으로 이동 후 '전체 동의' 체크 박스가 체크 된 상태로 변경
- 약관 종류
  - > 필수 : 이용약관, 개인정보수집 및 동의, 민감정보 제공 동의,
  - > 선택블루투스 통신 동의, 위치정보 이용 동의, 마케팅정보 수신 동의, 개인정보 제 3자 제공 동의
  - > 약관 종류 수정 가능

12. 회원 가입

- 필수 입력 사항 미 입력 시 비활성화
- 회원가입 완료 팝업 표시박스
- 오류 있을 때 각 텍스트 박스 하단 오류 문구 표시

> 유효성 체크 실패 : 텍스트 **다리길이 외 모두 필수 입력 사항**

13. 취소

- 로그인 화면으로 이동

14. 툴팁 아이콘 클릭 시 안내 팝업 출력 확인 버튼 클릭 시 닫힘

키, 체중 추가  
(2022.01.18)

약관 최종 항목 적용  
(2022.01.05)

| Page Description | 회원가입 - 정보 입력(국가 : 국외)   | Screen ID   | PT-A-04-3 | Description |
|------------------|---|---|-----------|-------------|
|                  | <div><div><div>11:59</div><div>취소</div><div>회원가입</div><div>03/03</div></div><div><div><div>아이디(아이디입력)</div><div>중복확인</div></div><div><div>비밀번호(영문+숫자+특수문자/8~16자리)</div></div><div><div>3</div><div><div>이름(이름 입력)</div><div>성(성 입력)</div></div><div><div>생년월일(YYYY.MM.DD)</div></div><div><div>남자</div><div>여자</div></div><div><div>2</div><div>국가 선택 ▼ '-없이 입력</div></div><div><div>1</div><div>이메일</div><div>직접입력 ▼</div></div><div><div>인증번호 받기</div></div><div><div>인증번호</div><div>인증번호 확인</div></div><div><div>거주지</div></div><div><div>키 ____cm</div></div><div><div>체중 ____kg</div></div><div><div>발 사이즈 ____mm</div></div><div><div>다리 길이(선택) 왼쪽 : ____cm / 오른쪽 : ____cm</div><div>?</div></div></div></div><div><div><div>이용약관, 개인정보처리방침, 개인정보 수집 · 이용, 민감정보 수집 · 이용, 개인(민감)정보 제3자 제공, 마케팅 정보 수신에 동의 하십니까?</div><div><div><input type="checkbox"/>이용약관(필수)</div><div><input type="checkbox"/>개인정보처리방침(필수)</div><div><input type="checkbox"/>개인정보 수집 · 이용 동의(필수)</div><div><input type="checkbox"/>민감정보 수집 · 이용 동의(필수)</div><div><input type="checkbox"/>개인(민감)정보 제3자 제공 동의(필수)</div><div><input type="checkbox"/>마케팅 정보 수신 동의(선택)</div></div><div><div><input type="checkbox"/>전체 동의</div><div><a href="#">전문보기</a></div><div><a href="#">전문보기</a></div><div><a href="#">전문보기</a></div><div><a href="#">전문보기</a></div></div></div></div><div>회원 가입</div></div> | <div><div>1. 국가 한국 외 가입자는 이메일 인증을 통한 회원가입 진행</div><div>2. 휴대폰 선택 입력</div><div>3. 해외일 경우 이름, 성 입력</div></div> <div><div>키, 체중 추가<br/>(2022.01.18)</div><div>약관 최종 항목 적용<br/>(2022.01.05)</div></div> |           |             |

11:59

회원가입

아이디(아이디입력) 중복확인

비밀번호(영문+숫자+특수문자/8~16자리)

이름(이름입력)

성(성입력)

생년월일(YYYY.MM.DD)

남자

여자

국가 선택 ▼ '·'없이 입력

인증번호 받기

인증번호

인증번호 확인

이메일 직접입력 ▼

거주지

키 \_\_\_\_cm

체중 \_\_\_\_kg

발 사이즈 \_\_\_\_mm

다리 길이(선택) 왼쪽 : \_\_\_\_cm / 오른쪽 : \_\_\_\_cm

아이디  
OOOOO 중복확인

아이디 중복확인

이미 사용중인 아이디 입니다.

남자 여자

휴대폰 번호  
'·'를 제외한 휴대폰 번호 입력 인증번호 받기

휴대폰 번호  
010-0000-000 인증번호 받기

휴대폰 번호를 확인해 주세요.

비밀번호  
(영문+숫자+특수문자/8~16자리)

비밀번호  
(영문+숫자+특수문자/8~16자리)

비밀번호가 형식에 맞지 않습니다.

생년월일(8자리)  
19XX/XX/XX

생년월일(8자리)  
19001335

생년월일을 확인해 주세요.

이메일  
abc@example.com

이메일  
abc@examplecom

이메일 주소를 확인해 주세요.

매칭코드  
XXXXXXXX

유효하지 않은 매칭 코드입니다.

11. 매칭 코드
  - HCP APP에서 생성한 매칭 코드 입력
  - 유효성이 맞지 않은 매칭 코드 입력 시 text box 하단 안내 문구 표시
12. 약관
  - 개별 약관 체크박스/전문 보기 Tap시 해당 약관 화면으로 이동
    - > 약관 화면에서 동의 버튼 tap 시 해당 약관 체크박스 체크 된 상태로 변경
    - > 체크 해제 가능
  - 전체 약관 동의 시 전체 약관 화면 표시
    - > 전체 동의 시 회원가입 화면으로 이동 후 '전체 동의' 체크 박스가 체크 된 상태로 변경
13. 회원 가입
  - 필수 입력 사항 미 입력 시 비활성화
  - 회원가입 완료 팝업 표시박스
  - 오류 있을 때 각 텍스트 박스 하단 오류 문구 표시
    - > 유효성 체크 실패 : 텍스트
14. 취소
  - 로그인 화면으로 이동
15. 안드로이드 이전버튼 tap
  - 국가 선택 화면으로 이동

약관 최종 항목 적용  
(2022.01.05)

UI 변경  
(2022.01.14)


| Page Description   | 약관 | Screen ID | PT-A-04-5<br>PT-A-04-6 | Description   |
|--|----|-----------|------------------------|---|
| <div> <div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>이용약관</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>동의</div> <div>3</div> </div> <div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>개인정보처리방침</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>동의</div> <div>3</div> </div> </div> |    |           |                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>약관 영역 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부 스크롤 필요</li> </ul>           약관 참고<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6</a> </li> <li>동의 버튼 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 약관 스크롤이 하단까지 내려와야 활성화</li> <li>- 동의 버튼 tap 시 회원가입 화면으로 이동 및 해당 약관 체크박스 체크 된 상태로 변경</li> </ul> </li> <li>이전 버튼 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이전 화면으로 이동</li> </ul> </li> <li>안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이전 화면으로 이동</li> </ul> </li> </ol> |

약관 최종 항목 적용  
(2022.01.05)

| Page Description   | 약관 | Screen ID | PT-A-04-7 | Description  |
|--|----|-----------|-----------|--|
| <div> <div> <div>11:59</div> <div>3</div> <div>이전</div> <div>개인정보 수집 · 이용 동의</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>동의</div> </div> <div> <div>11:59</div> <div>3</div> <div>이전</div> <div>민감정보 수집 · 이용 동의</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>동의</div> </div> </div> |    |           |           | <ol style="list-style-type: none"> <li>약관 영역 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부 스크롤 필요</li> </ul>           약관 참고<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6</a> </li> <li>동의 버튼 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 약관 스크롤이 하단까지 내려와야 활성화</li> <li>- 동의 버튼 tap 시 회원가입 화면으로 이동 및 해당 약관 체크박스 체크 된 상태로 변경</li> </ul> </li> <li>이전 버튼 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이전 화면으로 이동</li> </ul> </li> <li>안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이전 화면으로 이동</li> </ul> </li> </ol> <div>민감 정보 타이틀 수정<br/>(2022.01.20)</div> <div>약관 최종 항목 적용<br/>(2022.01.05)</div> |

| Page Description   | 약관 | Screen ID | PT-A-04-11<br>PT-A-04-10 | Description   |
|--|----|-----------|--------------------------|---|
| <div> <div> <div>11:59</div> <div>3</div> <div>이전</div> <div>개인(민감)정보 제3자 제공 동의</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>동의</div> </div> <div> <div>11:59</div> <div>3</div> <div>이전</div> <div>마케팅 정보 수신 동의</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>동의</div> </div> </div> |    |           |                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>약관 영역 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부 스크롤 필요</li> </ul>           약관 참고<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6</a> </li> <li>동의 버튼 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 약관 스크롤이 하단까지 내려와야 활성화</li> <li>- 동의 버튼 tap 시 회원가입 화면으로 이동 및 해당 약관 체크박스 체크 된 상태로 변경</li> </ul> </li> <li>이전 버튼 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이전 화면으로 이동</li> </ul> </li> <li>안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이전 화면으로 이동</li> </ul> </li> </ol> |

약관 최종 항목 적용  
(2022.01.05)

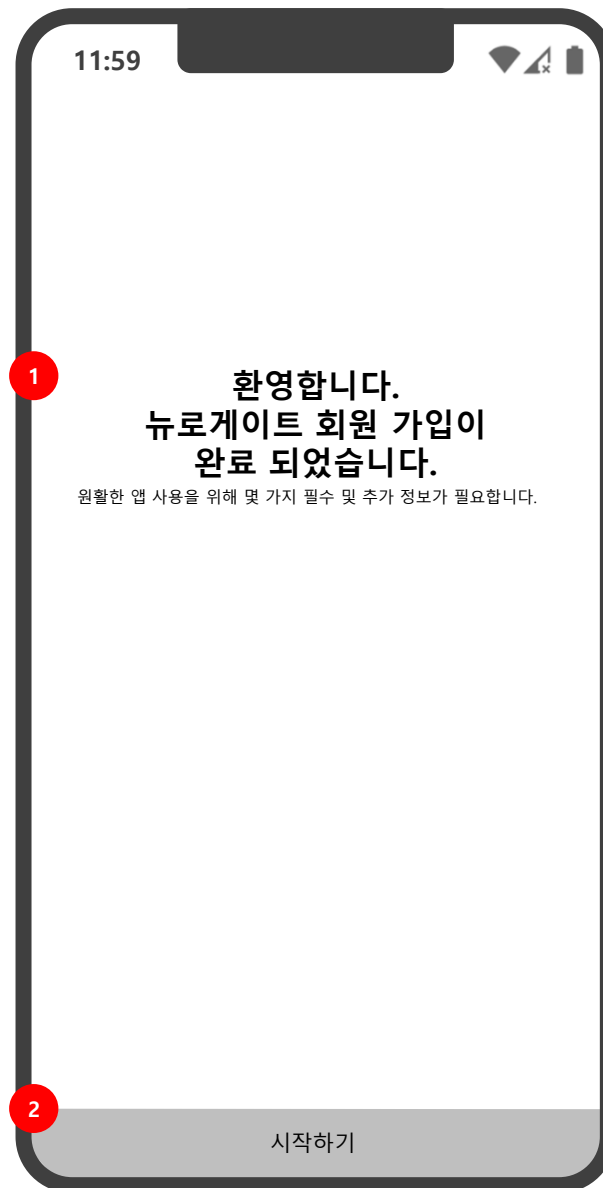

1. 환영 인사
  - APP 가입 환영 인사 표시
  - 필수 및 추가 정보 필요 안내 문구 표시
2. 시작하기
  - 필수 및 추가 정보 입력 화면으로 이동
  - 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 문진 정보 입력 화면 표시



| Page Description  | 필수 및 추가 정보(문진 정보) | Screen ID | PT-A-04-12 | Description  |
|---|-------------------|-----------|------------|--|
|  <p>11:59</p> <p>1 문진 정보 4 건너뛰기</p> <p>2</p> <p>1. 가족 병력을 선택해 주세요.</p> <p>없음 고혈압 당뇨</p> <p>뇌혈관 질환 심장 질환 골다공증</p> <p>암 기타</p> <p>a</p> <p>3 다음</p> |                   |           |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>문진 정보 <ul style="list-style-type: none"> <li>선택 항목</li> <li>현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시</li> </ul> </li> <li>질문 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>없음을 제외한 나머지 항목 중복 선택 가능</li> <li>없음 선택 시 다른 항목 선택 불가능</li> <li>기타 선택 시 직접입력 텍스트박스® 표시</li> </ul> </li> <li>다음 <ul style="list-style-type: none"> <li>다음 문진 정보 입력 화면으로 이동</li> </ul> </li> <li>건너뛰기 <ul style="list-style-type: none"> <li>버튼 tap시 홈으로 이동</li> </ul> </li> <li>안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> <li>1번 : '뒤로 가기 버튼을 한 번 더 누르면 종료됩니다.' 토스트 메시지 표시</li> <li>2번 : APP 종료</li> </ul> </li> </ol> |

| Page Description | 필수 및 추가 정보(문진 정보) | Screen ID | PT-A-04-12 | Description  |
|------------------|-------------------|-----------|------------|--|
|                  |                   |           |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>문진 정보 <ul style="list-style-type: none"> <li>선택 항목</li> <li>현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시</li> </ul> </li> <li>질문 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>'없음'을 제외한 나머지 항목 중복 선택 가능</li> <li>없음 선택 시 다른 항목 선택 불가능</li> <li>기타 선택 시 직접입력 텍스트박스㉠ 표시</li> </ul> </li> <li>다음 <ul style="list-style-type: none"> <li>질문 답변 미 입력 시 비활성화</li> <li>다음 문진 정보 입력 화면으로 이동</li> </ul> </li> <li>Skip <ul style="list-style-type: none"> <li>skip 버튼 tap시 홈으로 이동</li> </ul> </li> <li>이전 <ul style="list-style-type: none"> <li>이전 화면으로 이동</li> </ul> </li> <li>안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> <li>1번 : 이전 화면으로 이동</li> </ul> </li> </ol> |

11:59

이전

문진 정보

skip

3. 지난 7일간 무거운 물건 나르기, 달리기, 에어로빅, 빠른 속도로 자전거 타기 등과 같은 격렬한 신체 활동을 며칠간 하였습니다가?

☐ 활동함      일주일에 총기간수입력 일

☐ 활동하지 않음

다음

11:59

이전

문진 정보

skip

4. 그런 날 중 하루에 격렬한 신체활동을 하면서 보낸 시간이 보통 얼마나 됩니까?

☐ 활동함      하루에 시간입력 시간 분입력 분

☐ 확실하지 않음

다음

- 문진 정보
  - 선택 항목
  - 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시
- 질문 3
  - (활동함)라디오 버튼 터치 시 입력란 활성화
  - 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시
  - 숫자 입력 후 '없음' tap 시 입력 박스 초기화
- 질문 4
  - (활동함)라디오 버튼 터치 시 입력란 활성화
  - 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시
  - 숫자 입력 후 '확실하지 않음' tap 시 입력 박스 초기화
- 다음
  - 질문 답변 미 입력 시 비활성화
  - 질문 3
    - > '있음(숫자 입력)' 선택 후 다음 Tap 시 질문 4번 으로 이동
    - > '없음' 선택 후 다음 Tap 시 질문 5번 으로 이동
  - 질문 4
    - > 질문 5번으로 이동
- Skip
  - skip 버튼 tap시 홈으로 이동
- 이전
  - 이전 화면으로 이동
- 안드로이드 이전버튼 tap
  - 1번 : 이전 화면으로 이동

11:59 이전 문진 정보 skip

5. 지난 7일 간 가벼운 물건 나르기, 보통 속도로 자전거 타기, 복식 테니스 등과 같은 중간정도 신체 활동을 며칠 간 하였습니다. 걷기는 포함시키지 마십시오.

☐ 활동함 일주일에 총기간수입력 일

☐ 활동하지 않음

다음

11:59 이전 문진 정보 skip

6. 그런 날 중 하루에 중간정도 신체활동을 하면서 보낸 시간이 보통 얼마나 됩니까?


☐ 활동함 하루에 시간입력 시간 분입력분



☐ 확실하지 않음

다음

- 문진 정보
  - 선택 항목
  - 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시
- 질문 5
  - 라디오 버튼 터치 후 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시
  - 숫자 입력 후 '없음' tap 시 입력 박스 초기화
- 질문 6
  - 라디오 버튼 터치 후 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시
    - 시간 및 분 개별 선택
  - 숫자 입력 후 '확실하지 않음' tap 시 입력 박스 초기화
- 다음
  - 질문 답변 미 입력 시 비활성화
  - 질문 5
    - '있음(숫자 입력)' 선택 후 다음 Tap 시 질문 6번 으로 이동
    - '없음' 선택 후 다음 Tap 시 질문 7번 으로 이동
  - 질문 6
    - 질문 7번으로 이동
- Skip
  - skip 버튼 tap시 홈으로 이동
- 이전
  - 이전 화면으로 이동
- 안드로이드 이전버튼 tap
  - 1번 : 이전 화면으로 이동
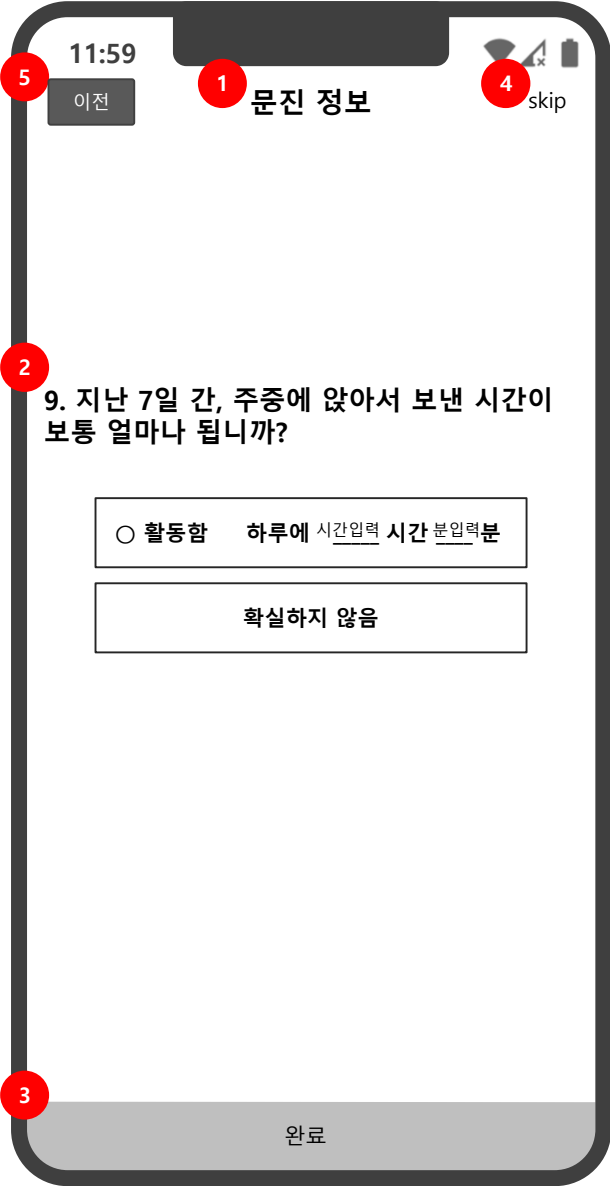
| Page Description  | 필수 및 추가 정보(문진 정보) | Screen ID | PT-A-04-12 | Description   |
|---|-------------------|-----------|------------|---|
| <div> <div> <div>6</div> <div>11:59</div> <div>1</div> <div>문진 정보</div> <div>5</div> <div>skip</div> <div>2</div> <div>7. 지난 7일 간, 한 번에 적어도 10분 이상 걸은 날이 며칠입니까?</div> <div> <div>○ 활동함</div> <div>일주일<span>에</span> <u>          </u> <span>총기간수입력</span> 일</div> <div>○ 없음</div> </div> <div>4</div> <div>다음</div> </div> <div> <div>6</div> <div>11:59</div> <div>3</div> <div>문진 정보</div> <div>5</div> <div>skip</div> <div>8. 그런 날 중 하루에 걸으면서 보낸 시간이 보통 얼마나 됩니까?</div> <div> <div>○ 활동함</div> <div>하루<span>에</span> <u>          </u> <span>시간</span> <u>          </u> <span>분</span> <u>          </u> <span>입력</span> 분</div> <div>○ 확실하지 않음</div> </div> <div>4</div> <div>다음</div> </div> </div> |                   |           |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>문진 정보 <ul style="list-style-type: none"> <li>선택 항목</li> <li>현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시</li> </ul> </li> <li>질문 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>라디오 버튼 터치 시 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시</li> <li>숫자 입력 후 '없음' tap 시 입력 박스 초기화</li> </ul> </li> <li>질문 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>라디오 버튼 터치 시 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시 <ul style="list-style-type: none"> <li>시간 및 분 개별 선택</li> </ul> </li> <li>숫자 입력 후 '확실하지 않음' tap 시 입력 박스 초기화</li> </ul> </li> <li>다음 <ul style="list-style-type: none"> <li>질문 답변 미 입력 시 비활성화</li> <li>질문 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>'있음(숫자 입력)' 선택 후 다음 Tap 시 질문 8번 으로 이동</li> <li>'없음' 선택 후 다음 Tap 시 질문 9번 으로 이동</li> </ul> </li> <li>질문 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>질문 9번으로 이동</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Skip <ul style="list-style-type: none"> <li>skip 버튼 tap시 홈으로 이동</li> </ul> </li> <li>이전 <ul style="list-style-type: none"> <li>이전 화면으로 이동</li> </ul> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> <li>1번 : 이전 화면으로 이동</li> </ul> </li> </ol> |

| Page Description  | 필수 및 추가 정보(문진 정보) | Screen ID | PT-A-04-12 | Description  |
|---|-------------------|-----------|------------|--|
| <div></div> |                   |           |            | <div><div><div>1. 문진 정보<ul style="list-style-type: none"><li>- 선택 항목</li><li>- 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시</li></ul></div><div>2. 질문 9<ul style="list-style-type: none"><li>- 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 시간 및 분 개별 선택</li></ul></li><li>- 숫자 입력 후 '확인하지 않음' tap 시 입력 박스 초기화</li></ul></div><div>3. 완료<ul style="list-style-type: none"><li>- 질문 답변 미 입력 시 비활성화</li><li>- 완료 버튼 tap시 홈으로 이동</li></ul></div><div>4. Skip<ul style="list-style-type: none"><li>- skip 버튼 tap시 홈으로 이동</li></ul></div><div>5. 이전<ul style="list-style-type: none"><li>- 이전 화면으로 이동</li></ul></div></div><div>1. 안드로이드 이전버튼 tap<ul style="list-style-type: none"><li>- 1번 : 이전 화면으로 이동</li></ul></div></div> |

| Page Description | 회원 가입_문진 작성 완료   | Screen ID | PT-A-04-12 | Description  |
|------------------|--|-----------|------------|--|
|                  | <div data-bbox="507 128 1108 1306"><div data-bbox="569 164 642 199">11:59</div><div data-bbox="984 164 1087 199"></div><div data-bbox="507 471 549 521">1</div><div data-bbox="590 485 1025 521"><b>문진 작성이 완료 되었습니다.</b></div><div data-bbox="611 535 1004 564">문진 운동은 설정에서 확인 및 신규 작성 가능합니다.</div><div data-bbox="507 1199 549 1249">2</div><div data-bbox="756 1235 859 1270">시작하기</div></div> |           |            | <div data-bbox="1574 92 1792 171"><ol style="list-style-type: none"><li>1. 무진 작성 완료 문구</li><li>2. 시작하기<ul style="list-style-type: none"><li>- 홈으로 이동</li></ul></li></ol></div> |

| Page Description | 팝업&띠배너 화면  | Screen ID | PT-A-05-11 | Description  |
|------------------|--|-----------|------------|--|
|                  | <div data-bbox="147 129 747 1305"> </div> <div data-bbox="861 129 1462 1305"> </div> |           |            | <div data-bbox="1583 104 2030 835"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 팝업 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 앱 진입 시 이벤트 팝업</li> <li>- master admin에서 관리</li> </ul> </li> <li>1. 팝업 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 앱 사용 중 알림 팝업</li> <li>- master admin에서 관리 가능</li> <li>- 예) 낙상 위험 안내, 보행 이상, 운동 스케줄 안내</li> <li>- 버튼 1 : 이동하기(알림에 관련된 화면으로 이동하기), 확인</li> <li>- 버튼 2 : 닫기</li> </ul> </li> <li>1. 푸시메시지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 앱 사용 중 알림 배너</li> <li>- 썸네일 및 텍스트 표시 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 텍스트 영역 넘어가면 넘어가는 텍스트 ... 표시</li> </ul> </li> <li>- master admin에서 관리</li> </ul> </li> </ol> </div> |



1010

native

hybrid

native



- 홈
  - 주 캘린더, To-Do, 오늘 운동 달성율, 오늘 운동 밸런스 종합 결과, 보행 분석 결과, 보행 분석 결과 표시
- 주 캘린더
  - 앱 진입 시 default 오늘 날짜 표시
    - > 운동이 등록된 요일은 일 하단 '표시'
    - 다른 날짜 선택 시 하단 '오늘의 운동 스케줄'에 해당 날짜의 운동 스케줄 표시
- 오늘의 운동 달성율
  - 오늘의 운동 달성율, 오늘의 운동 수, 미진행 운동 수 표시
  - 달성율
    - > 진행 전 : 0%,
    - > 진행중 : 세트 수에 따라 변경
      - 1세트 : N, 1세트 완료하지 않았을 경우 0%
      - 전체 5세트 중 N세트 진행 완료 시
      - 5/N: 달성율(소수점 1자리 이하 버림)
    - 완료 : 100%
    - 전체 운동(n)의 달성율(x)을 계산하여 표시
      - >  $x1+x2+x3+.../n$  : 오늘 전체 운동 달성율 (소수점 1자리 이하 버림)
- 오늘의 운동 수
  - 오늘의 운동 : 오늘 스케줄에 등록된 운동 수 표시
  - 미진행 : 완료 되지 않은 운동 수
- 
- 오늘의 운동
  - 의료진/직접 추가한 운동 카드 색상 구분 필요
  - 운동 스케줄이 등록되어 있지 않을 경우 운동 목록 카드 출력
  - 카드 tap 시 해당 운동의 운동 화면으로 이동
    - a. session명 출력
    - b. session에 속한 운동명 출력
    - c. 운동 상태 출력
      - 상태값 : 진행중, 대기, 완료
  - 등록된 운동 스케줄 중 아래와 같은 순서로 출력
    - 진행중 -> 대기 -> 완료 -> 운동 더하기
- 오늘의 걸음
  - 걸음 분석 데이터 표시
  - 오늘 자율 보행을 진행하지 않았을 경우 기록하기 버튼 표시
  - 기록하기 버튼 tap 시 걸음 기록 \*화면으로 이동
  - 오늘의 걸음은 오늘만 가능
- 메뉴
  - 메뉴 5개 표시
  - 메뉴 선택 시 각 메뉴 화면으로 이동

UI 현행화  
(2022.01.14)

session 적용  
오늘의 결과 (밸런스, 보행) 삭제  
(2022.01.05)


| Page Description  | 홈(오늘의 걸음 진행) | Screen ID | PT-A-05-1 | Description   |    |        |      |      |       |                  |           |        |            |                  |           |     |            |  |
|---|--------------|-----------|-----------|---|----|--------|------|------|-------|------------------|-----------|--------|------------|------------------|-----------|-----|------------|--|
|   |              |           |           | <p>1. 오늘의 걸음</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오늘 걸음 데이터를 이용하여 분석 데이터 표시</li> <li>- 오늘 걸음 시간 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 오늘의 걸음 측정한 총 시간 표시</li> </ul> </li> <li>- 좌/우 밸런스 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 오늘 걸음 평균 좌/우 밸런스 표시</li> <li>&gt; 그래프 내 문구 하단 표 참조</li> </ul> </li> <li>- 걸음 수 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 오늘 걸음 총 걸음 수 표시</li> </ul> </li> <li>- 상세 결과 보기 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 오늘의 걸음 종합 결과 화면으로 이동</li> </ul> </li> </ul> <p>2. 기록하기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오늘의 걸음 재실행 버튼</li> </ul> |    |        |      |      |       |                  |           |        |            |                  |           |     |            |  |
|   |              |           |           | <div> <div>session 적용</div> <div>오늘의 결과 (밸런스, 보행) 삭제</div> <div>(2022.01.05)</div> </div>   |    |        |      |      |       |                  |           |        |            |                  |           |     |            |  |
| <table> <tr> <td>보행 밸런스 등급</td> <td>문구</td> <td>텍스트 색상</td> </tr> <tr> <td>균형잡힘</td> <td>good</td> <td>green</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">약한 왼쪽 또는 오른쪽 치우침</td> <td>약한 왼쪽 치우침</td> <td rowspan="2">orange</td> </tr> <tr> <td>약한 오른쪽 치우침</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">심한 왼쪽 또는 오른쪽 치우침</td> <td>심한 왼쪽 치우침</td> <td rowspan="2">red</td> </tr> <tr> <td>심한 오른쪽 치우침</td> </tr> </table> |              |           |           | 보행 밸런스 등급   | 문구 | 텍스트 색상 | 균형잡힘 | good | green | 약한 왼쪽 또는 오른쪽 치우침 | 약한 왼쪽 치우침 | orange | 약한 오른쪽 치우침 | 심한 왼쪽 또는 오른쪽 치우침 | 심한 왼쪽 치우침 | red | 심한 오른쪽 치우침 | <div> <div>UI 현행화</div> <div>(2022.01.14)</div> </div> |
| 보행 밸런스 등급   | 문구           | 텍스트 색상    |           |   |    |        |      |      |       |                  |           |        |            |                  |           |     |            |  |
| 균형잡힘  | good         | green     |           |   |    |        |      |      |       |                  |           |        |            |                  |           |     |            |  |
| 약한 왼쪽 또는 오른쪽 치우침  | 약한 왼쪽 치우침    | orange    |           |   |    |        |      |      |       |                  |           |        |            |                  |           |     |            |  |
|   | 약한 오른쪽 치우침   |           |           |   |    |        |      |      |       |                  |           |        |            |                  |           |     |            |  |
| 심한 왼쪽 또는 오른쪽 치우침  | 심한 왼쪽 치우침    | red       |           |   |    |        |      |      |       |                  |           |        |            |                  |           |     |            |  |
|   | 심한 오른쪽 치우침   |           |           |   |    |        |      |      |       |                  |           |        |            |                  |           |     |            |  |



- - 오늘의 걸음
    - '걸음 데이터가 없습니다. 오늘의 걸음을 기록해보세요.' 문구 표시
    - 기록하기 버튼 표시
- 오늘의 걸음은 오늘날만 측정 가능  
오늘이 아닌 날에 기록하기 터치 시 알럿 메시지 출력  
"오늘 날짜를 선택 후 오늘의 걸음을 기록해주세요."

session 적용  
오늘의 결과 (밸런스, 보행) 삭제  
(2022.01.05)

UI 현행화  
(2022.01.14)

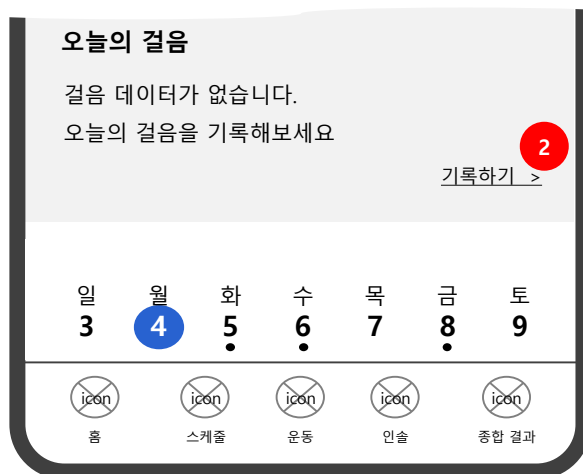

1. - 전체 운동 목록 출력  
- session 명 터치 시 해당 session에 속하는 운동 목록만 출력  
- 운동 tap 시 운동의 스케줄 자동 생성 후 운동 메뉴로 이동, 선택된 운동 포커스  
    > 스케줄 : 오늘, 운동 세트 : 3세트 : 운동 시간 : 30초
2. 기록하기 버튼 클릭 시 측정하기 화면으로 이동  
오늘이 아닌 일(이전,이후)은 기록하기 버튼 숨김 / **오늘의 걸음은 오늘만 측정 가능**  
**오늘이 아닌 날에 기록하기 터치 시 알럿 메시지 출력**  
**"오늘 날짜를 선택 후 오늘의 걸음을 기록해주세요."**


운동 목록 아래 시트 참조

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppiDbphGDD6pkt4HbX9YxQXdVPTGrVbE/edit#gid=1376998621>

session 적용 /  
activity 목록 화면 추가  
(2022.01.05)

추천 운동 타이틀 삭제  
(2022.01.13)

1. UI 현행화  
2. Heel Session 삭제  
(2022.01.14)

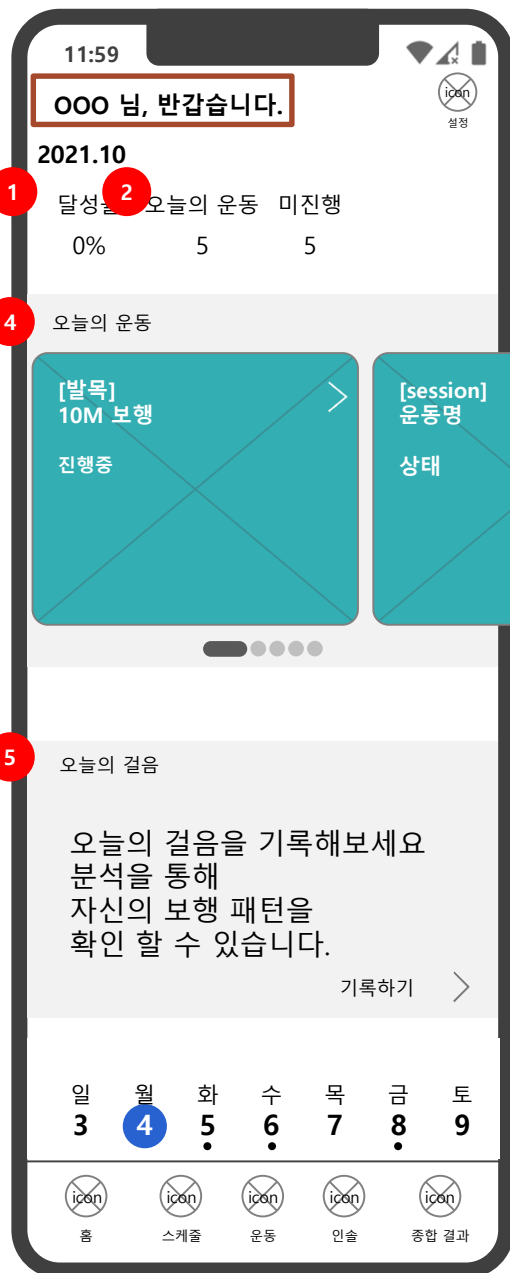

- 오늘의 운동 달성율
  - 오늘의 운동 달성율, 오늘의 운동 수, 미진행 운동 수 표시
  - 달성율
    - > 진행 전 : 0%,
    - > 진행중 : 세트 수에 따라 변경  
1세트 : N, 1세트 완료하지 않았을 경우 0%  
전체 5세트 중 N세트 진행 완료 시  
5/N: 달성율(소수점 1자리 이하 버림)
  - 완료 : 100%
  - 전체 운동(n)의 달성율(x)을 계산하여 표시  
>  $x1+x2+x3+.../n$  : 오늘 전체 운동 달성율 (소수점 1자리 이하 버림)
- 오늘의 운동 수
  - 오늘의 운동 : 스케줄에 등록된 운동 수 표시
  - 미진행 : 완료 되지 않은 운동 수
- 
- 오늘의 운동
  - 의료진/직접 추가한 운동 카드 색상 구분 필요
  - 운동 스케줄이 등록되어 있지 않을 경우 운동 목록 표시
  - 카드 tap 시 해당 운동의 운동 화면으로 이동
- 오늘의 걸음
  - 기록하기 tap 시 기록하기 화면으로 이동
  - 오늘의 걸음은 오늘날 측정 가능**
  - 오늘이 아닌 날에 기록하기 터치 시 알럿 메시지 출력**
  - "오늘 날짜를 선택 후 오늘의 걸음을 기록해주세요."**

session 적용  
오늘의 결과 (밸런스, 보행) 삭제  
(2022.01.05)

UI 현행화  
(2022.01.14)



1. - session 목록 표시  
- session 터치 시 운동 목록 출력  
- 운동 tap 시 운동의 스케줄 자동 생성 후 운동 메뉴로 이동, 선택된 운동 포커스  
    > 스케줄 : 오늘, 운동 세트 : 3세트 : 운동 시간 : 30초
2. 오늘의 걸음은 오늘날 측정 가능  
    오늘이 아닌 날에 기록하기 터치 시 알럿 메시지 출력  
    "오늘 날짜를 선택 후 오늘의 걸음을 기록해주세요."

운동 목록 아래 시트 참조

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ofXnAI35vyDpB1n8pW9INkz45mSL6iD69UBTKw4/edit#gid=0>

스케줄 없는 화면의 용도

session 적용  
(2022.01.05)


추천 운동 타이틀 삭제  
(2022.01.13)

1. UI 현행화  
2. Heel Session 삭제  
(2022.01.14)

| Page Description | 홈 > 오늘의 걸음 > 기록하기 > 시간 선택   | Screen ID | PT-A-05-7 | Description   |
|------------------|---|-----------|-----------|---|
|                  |  |           |           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 보행 시간 선택<br/>- 시간 선택 시 선택된 시간 포커스</li><li>2. 시작<br/>시작 tap 시 측정 화면으로 이동</li><li>3. 이전<br/>- 홈으로 이동</li><li>4. 안드로이드 이전버튼 tap<br/>- 1번 : 홈으로 이동</li></ol> |





| Page Description                             | 홈 > 오늘의 걸음 > 기록하기 > 걸음 측정 하기- 실행        | Screen ID | PT-A-05-8 | Description  |
|--|---|-----------|-----------|--|
| <div data-bbox="20 714 124 756">native</div> | <div data-bbox="232 82 839 1306"></div> |           |           | <div data-bbox="1574 92 1968 307"><ol style="list-style-type: none"><li>1. 타이머 표시<ul style="list-style-type: none"><li>- 타이머 종료 시 홈으로 이동</li><li>- 홈에서 분석된 데이터 표시</li></ul></li><li>2. 족저압<ul style="list-style-type: none"><li>- 측정 중 실시간 족저압 및 밸런스 표시</li></ul></li><li>3. 종료<ul style="list-style-type: none"><li>- 측정 강제 종료</li><li>- 측정 시간에 종료 버튼 tap한 시간까지 계산하여 표시</li></ul></li></ol></div> |

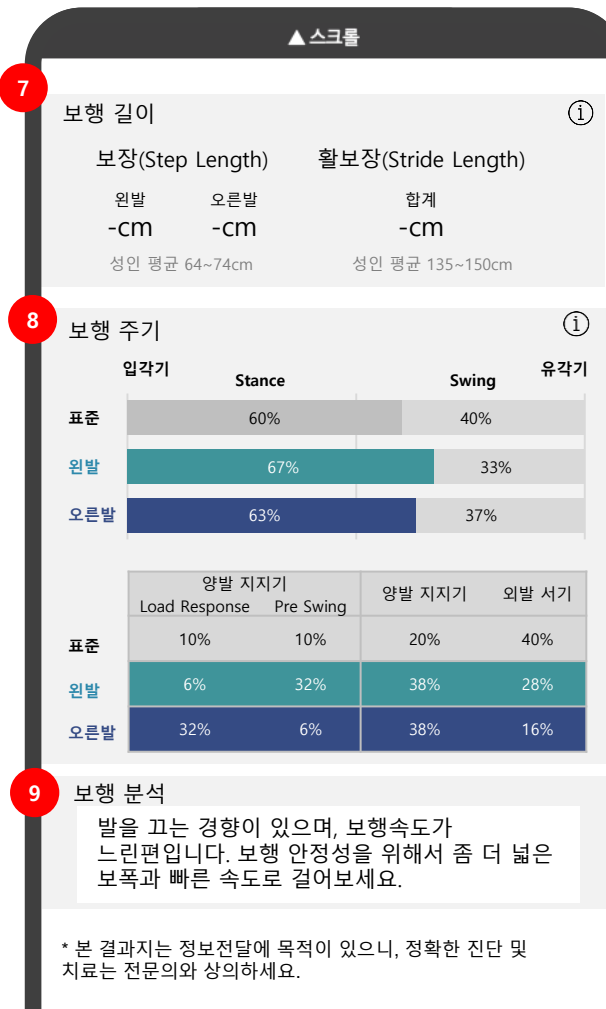

| Gait Case  | 문구   |
|------------|--|
| Gait_Case1 | 양발의 보행 안정성이 좋습니다.  |
| Gait_Case2 | 오른발을 끄는 경향이 있습니다. 오른발의 안정성을 위해 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로 걸어보세요.            |
| Gait_Case5 | 발을 끄는 경향이 있으며, 보행속도가 느린편입니다. 보행 안정성을 위해서 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로 걸어보세요.  |
| Gait_Case6 | 왼발이 안정성이 떨어지며 차고 나가는 능력이 부족합니다.                                    |
| Gait_Case7 | 오른발이 안정성이 떨어지며 차고 나가는 능력이 부족합니다.                                   |
| Gait_Case8 | 왼발을 끄는 경향이 있으며, 보행속도가 느린편입니다. 보행 안정성을 위해서 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로 걸어보세요. |

- 치우침 그래프
  - 일별 치우침을 그래프로 표시
  - 하루 평균 데이터를 이용하여 표시
  - 당일 데이터 점으로 표시, 데이터는 선으로 이어서 표시
  - > 데이터가 없을 경우 표시 하지 않음
- 날짜 선택
  - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
  - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
  - > 오늘 이후 날짜 선택 불가
  - > 오늘의 걸음을 하지 않은 날짜 선택 불가
  - 날짜 선택 시 하단에 자율 보행 측정된 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
  - 전체, 자율 보행을 한 시간 선택
  - 자율 보행 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
  - 2건 이상일 때 표시
  - 전체 : 선택된 날의 자율 보행 전체 데이터 평균
  - 시간 : 측정 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 측정 시간
  - 전체 : 오늘 총 걸음 시간,
  - 시간 : 선택 시간 걸음 시간
- 걸음 데이터
  - 측정 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 좌/우 GCT 밸런스
  - 좌우 밸런스 및 분석 결과 표시
  - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
  - a. 좌우 게이지: 가운데 50을 중심으로 좌우 최대 100의 게이지 채워짐
  - b. 도트 게이지: a 게이지 채워지는 정도에 맞춰 좌우 최대 6개가 채워짐
  - \* 기준(소수점 둘째 자리 버림):
  - 50~57.9 : ●, 58~66.9 : ●●,
  - 67~74.9 : ●●●, 75~82.9 : ●●●●,
  - 83~90.9 : ●●●●●, 91~100.0 : ●●●●●●
- 보행 길이
  - 신규 인솔에서 제공하는 데이터
  - 신규 인솔 판매 전까지 미표시
  - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 주기
  - 측정 시간 내 보행 주기 표시
  - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 분석
  - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
  - 하단 보행 분석 문구 참조

안내문구 추가  
(2022.01.13)

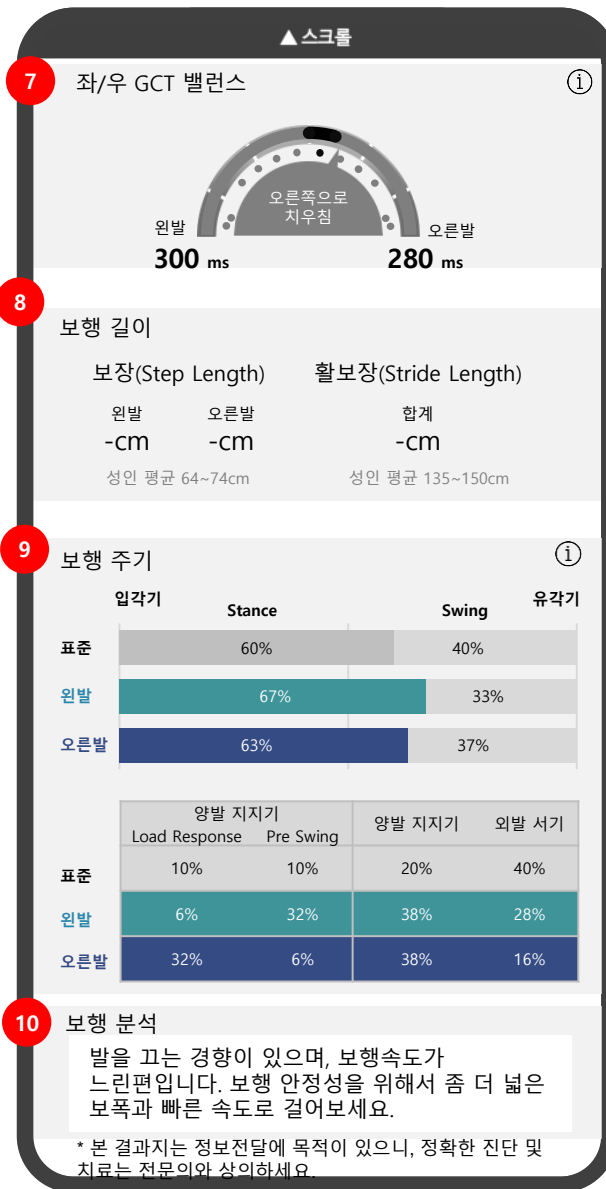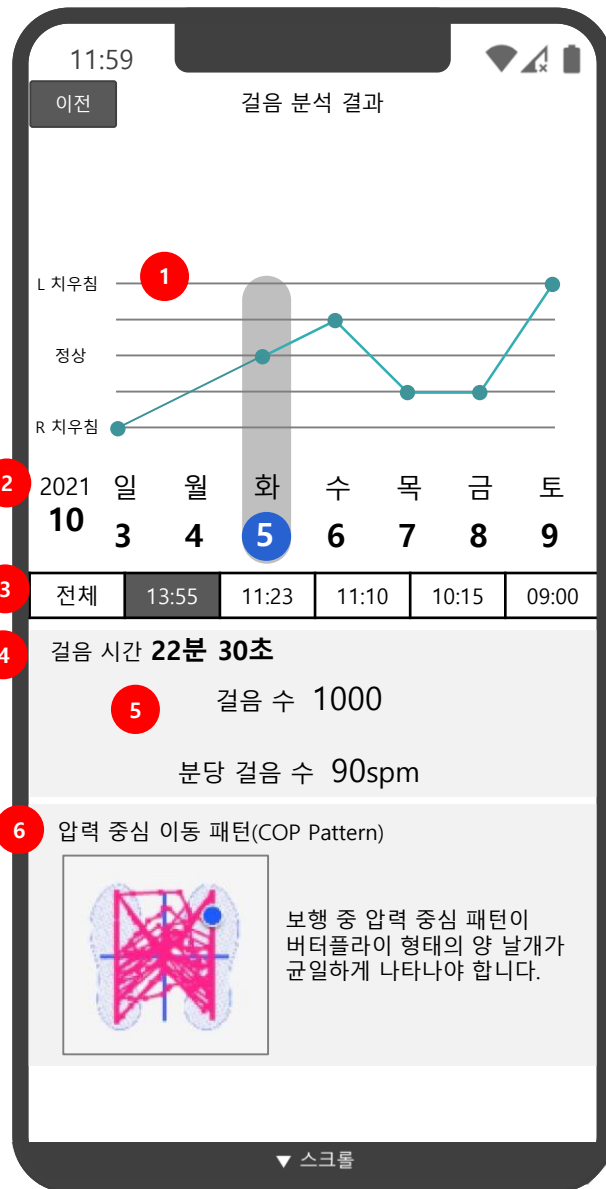

- 치우침 그래프
  - 일별 치우침을 그래프로 표시
  - 하루 평균 데이터를 이용하여 표시
  - 당일 데이터 점으로 표시, 데이터는 선으로 이어서 표시
  - > 데이터가 없을 경우 표시 하지 않음
- 날짜 선택
  - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
  - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
  - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
  - 날짜 선택 시 하단에 자을 보행 측정된 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
  - 전체, 오늘의 걸음을 시작한 시간 표시
  - 오늘의 걸음 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
  - 2건 이상일 때 표시
  - 전체: 선택된 날의 오늘의 걸음 전체 데이터 평균
  - 시간: 오늘의 걸음 측정 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 걸음 시간
  - 전체: 오늘 총 걸음 시간,
  - 시간: 선택 시간 걸음 시간
- 걸음 데이터
  - 측정 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 압력 중심 이동 패턴
  - 측정 시간 동안 압력 중심 이동 패턴 표시
- 지면 접촉 시간(GCT)
  - 좌우 밸런스 및 분석 결과 표시
- 보행 길이
  - 신규 인솔에서 제공하는 데이터
  - 신규 인솔 판매 전까지 미표시
  - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 주기
  - 측정 시간 내 보행 주기 표시
  - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 분석
  - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
  - 하단 보행 분석 문구 참조

| Page Description | 홈 > 자율 보행 > 상세 결과 보기 > ① 아이콘 선택  | Screen ID | PT-A-05-10   | Description |
|------------------|--|-----------|--|-------------|
|                  | <div data-bbox="43 159 779 418"> <div data-bbox="78 178 747 225"> <span>i</span> <b>지면 접촉 시간 (GCT)</b> <span>×</span> </div> <div data-bbox="126 258 634 334"> <p>각발이 지면에 닿아있는 시간이 각발의 GCT입니다.<br/>GCT밸런스는 각 시간을 비율로 환산한 값으로 51.2% 이내이면 정상 밸런스로 간주합니다.</p> <p>GCT밸런스 차이가 클 수록 좌우의 비대칭을 보여 줍니다.</p> </div> </div> <div data-bbox="43 439 779 1025"> <div data-bbox="78 458 747 505"> <span>i</span> <b>보행 주기 (Gait Cycle)</b> <span>×</span> </div> <div data-bbox="70 538 741 995"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stance (입각기) / Swing (유각기)<br/>보행 주기는 크게 지면에 닿아 있는 Stance(입각기)와 Swing (유각기)로 분류됩니다. 해당 주기는 60:40의 비율이 일반적입니다.</li> <li>2. Stance 주기 내 Double / Single support<br/>Stance 주기는 크게 양발을 동시에 디디는 Double support와 한발만 디디는 Single Support 로 구분됩니다.<br/>해당 비율은 20:40의 비율이 일반적입니다.<br/><br/>Double support는 Stance 시작시 발생하는 Load response 구간과 Stance 끝날 때 발생하는 Pre swing 구간으로 나뉘며, 이는 10:10의 비율이 일반적입니다.</li> <li>3. 분석 포인트<br/>보행 주기별 왼발 오른발 비율이 큰 차이없이 나타나야 합니다.<br/>특히 보행 안정성이 떨어지거나 균형 능력이 떨어졌을 때 Double support의 비율이 길어지게 됩니다</li> </ol> </div> </div> |           | <div data-bbox="810 159 1535 481"> <div data-bbox="837 178 1506 225"> <span>i</span> <b>보행 길이 (Gait Length)</b> <span>×</span> </div> <div data-bbox="828 254 1510 455"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 보장 (Step Length)<br/>보장은 양발이 동시에 디딜 때 두 발 사이의 거리이며 한쪽 발의 뒤꿈치와 반대편 발의 뒤꿈치 사이의 거리를 의미합니다.</li> <li>2. 활보장 (Stride Length)<br/>활보장은 입각기와 유각기 전체 보행주기의 거리로 한 발의 입각기 초기 접지점에서 같은 발의 말기 유각기 접지점 사이의 거리입니다.</li> </ol> </div> </div> |             |

스케줄



- 캘린더
  - 주/월 캘린더 제공
  - 오늘 버튼 선택 시 오늘 날짜로 이동
  - default 오늘 요일 표시
  - 스케줄이 있는 요일의 일 하단에 '표시'
  - 오늘 날짜와 선택된 날짜 색상 별도 표시
  - 선택된 날짜 하단에 해당 날짜의 스케줄 표시
  - > 스케줄이 없을 경우 '스케줄이 없습니다' 표시
- 스케줄
  - 스케줄에 등록 된 운동 리스트 표시
  - 스케줄 순서
    - > 1순위 : 의료진 등록한 운동
    - > 2순위 : 자신이 등록한 운동
    - > 3순위 : 진행중, 미진행, 완료 순서
  - 카드형 데이터 표시
    - > 카드 좌측에 의료진 처방 운동/본인 등록 운동 구분 색상 바 표시
    - > 의료진이 처방한 스케줄이 있을 경우 본인이 등록한 운동은 하단으로 이동
  - 의료진 코멘트가 있을 경우 해당 카드 하단에 의료진 코멘트 표시
    - > 의료진 코멘트 2줄 이상 시 ... 처리
  - 카드 tap 시 선택 '운동 > 해당요일 > 선택 운동' 화면으로 이동
- 스케줄 추가
  - 신규 스케줄 추가
- 도움말이 등록된 경우 출력
  - 운동 부위, 도움말 등록되지 않은 경우 빈 공간으로 보여짐
- 이전
  - 홈으로 이동

session 적용  
(2022.01.05)

11:59

취소

## 스케줄 추가

### 날짜 선택

추가 하려는 날짜 및 기간을 선택하세요.

0000.00.00 - 0000.00.00

다음

2021.09-2021.10

일 월 화 수 목 금 토

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

취소 선택 완료

- 스케줄
  - 시작 및 종료 날짜 선택
    - > 영역 탭시 ④팝업 표시
- 날짜 표시 및 다음 버튼
  - 선택된 날짜 표시
  - 버튼 Tap 시 운동 선택 화면으로 이동
- 취소
  - 이전 화면으로 이동
- 날짜 선택
  - 2달씩 표시
  - 캘린더에서 시작 날짜, 종료 날짜 선택
  - 우측 ◀▶ Tap 시 2달 씩 이동
  - 시작 날짜를 종료 날짜 이후 선택 시 기존 선택 되었던 시작 날짜가 종료 날짜로 변경
  - 선택 완료
    - > 선택 된 날짜 캘린더에 표시
  - 취소 : 팝업 닫힘



1. 이전  
- 날짜 선택 화면으로 이동
2. 다음  
- 선택한 운동이 없는 상태에서 비활성화  
- 운동 선택 시 다음 단계로 진행
3. 운동 선택 가이드 문구
4. 선택 상태의 운동 카드  
선택 시 컬러 변경으로 활성화 표시
5. 미선택 상태의 운동 카드
6. **부분부하보행의 경우 왼발 부분부하보행과 오른발 부분부하보행을 함께 선택 할 수 없음**

전체 운동 리스트는 아래 링크 참조

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ofXnAl35vyDpP1m8pVkv9INckz5SnSL8iiD69U8TKw4/e dit#gid=0>

부분부하보행 디스크립션 보완  
(2022.02.04)

session 적용  
(2022.01.05)



11:59

이전 스케줄 추가

**요일 및 세트 선택**  
운동마다 진행할 요일/세트를 다르게 지정할 수 있어요.

3 [발목] 10M 보행 [발목] 왼발 외발 서기 [발뒤꿈치] Double heel raise

4 **요일 지정(복수 선택 가능)**  
월 화 수 목 금 토 일

5 **세트 지정**  
1 세트 2 세트 3 세트 4 세트

6 **보행 최대 시간 지정**  
2 분 ▼

7 **부분부하보행 기준치 입력**  
[입력란]

8 다음

session 적용  
(2022.01.05)

부분부하보행운동 추가 시 수치 입력  
추가  
(2022.02.03)

- 이전 버튼:  
- Tap 시 운동 선택 단계로 복귀, 선택한 운동 상태 유지
- 추가 버튼:  
1) ㉠의 모든 항목이 요일과 세트가 지정되지 않을 경우 비활성화  
2) Tap 시 입력 및 선택 내용 스케줄 추가에 표시
- 선택한 운동 표시:  
- 맨 왼쪽 카드 선택 상태로 페이지 로드
- 요일 지정 영역:  
- 미선택 상태로 페이지 로드  
- 중복 선택 가능  
- 미지정 불가능  
- 선택한 스케줄 기간에 해당되지 않은 요일은 비활성화
- 세트 지정 영역:  
1) 1세트 선택 상태로 페이지 로드 / 최대 10세트까지 지정 가능  
2) 중복 선택 불가능  
3) 미지정 불가능
- 보행 시간 선택  
-보행 선택 시에만 입력 가능하도록 활성화됨  
-시간은 서버에서 설정
- 운동에 따라 출력(왼발 부분부하 운동일 경우 왼쪽 측정값 입력 / 오른발 부분부하의 경우 오른쪽 측정값 입력)
- 다음  
- 순서 변경 화면으로 이동

| Page Description   | Screen ID | Description  |
|--|-----------|--|
| 신규 스케줄 추가 > 운동 선택 > 요일, 세트 지정 > 날짜 및 운동 추가   | PT-A-07-4 |  |
| <div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>스케줄 추가</div><div>0000-00-00 - 0000-00-00</div><div>순서 변경</div><div>해당하는 운동을 꼭 눌러 이동해보세요.</div><div><div>[발목] 10M 보행</div><div>[발목] 왼발 외발 서기</div><div>[발뒤꿈치] Double heel raise</div></div><div>추가</div></div><div><div>4</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div></div> |           | <div><div>1. 스케줄</div><div>- 시작&amp;종료 날짜 표시</div><div>2. 운동 리스트</div><div>- 순서 변경</div><div>&gt; 추가된 운동 우측 순서 변경 아이콘을 drag&amp;drop 하여 순서 변경</div><div>[session] 운동명 형태는 디자인 시 위치 조정</div><div>3. 운동 추가</div><div>운동 추가 및 스케줄 화면으로 이동</div><div>4. 운동 요일/세트 지정 화면으로 이동</div></div> <div>session 적용<br/>(2022.01.05)</div> |




| Page Description | 신규 스케줄 추가 > 운동 선택 > 요일, 세트 지정 > 날짜 및 운동 추가> 순서 변경(drag&drop)  | Screen ID | PT-A-07-4 | Description  |
|------------------|---|-----------|-----------|--|
|                  | <div data-bbox="424 128 1025 1306"><div>11:59</div><div>이전스케줄 추가</div><div>0000-00-00 — 0000-00-00</div><div>순서 변경</div><div>해당하는 운동을 꼭 눌러 이동해보세요.</div><div><div>[발목] 10M 보행</div><div>[발목] 원발 외발 서기</div><div>[발뒤꿈치] Double heel raise</div><div>1 [발목] 10M 보행</div></div><div>추가</div></div> |           |           | <div>1. 순서 변경</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- 우측 순서변경 아이콘 tap 시 선택된 항목의 박스 색상 변경 및 크기 변경</li><li>- 위치 변경 후 tap stop 시 기본 박스로 변경</li></ul> <div>session 적용<br/>(2022.01.05)</div> |



| Page Description   | 운동(의료진이 추가한 운동) | Screen ID | PT-A-06-1 | Description   |
|--|-----------------|-----------|-----------|---|
| <div> <div> <div>8</div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>운동</div> <div>1</div> <div>2021.10</div> <div>일</div> <div>월</div> <div>화</div> <div>수</div> <div>목</div> <div>금</div> <div>토</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>2</div> <div>운동 리스트</div> <div> <div>[발목]</div> <div>최대 외전 뒤꿈치 들기</div> <div>진행중</div> <div>&gt;</div> </div> <div>3</div> <div>●○○○○</div> <div>운동 부위</div> <div>※ 운동 부위는 운동 효과와 관계가 없으며 참고 사항임을 알려드립니다.</div> <div> <div>골반</div> <div>허벅지</div> <div>무릎</div> <div>종아리</div> <div>발목</div> <div>발바닥</div> </div> <div>4</div> <div>운동 방법</div> <div> <div>▶</div> </div> <div>▼ 스크롤</div> </div> <div> <div>+</div> <div>운동 추가</div> </div> <div> <div>스크롤</div> <div>5</div> <div>도움말</div> <div>무릎이 욱신거리면 운동을 중단하고 이후 같은 운동을 하실 때 세트를 1번씩 줄이세요.</div> <div>6</div> <div>의료진에게 문의</div> <div>문의 페이지로 이동</div> <div>7</div> <div>운동 진행</div> </div> </div> |                 |           |           | <ol style="list-style-type: none"> <li>스케줄 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주 캘린더 표시</li> <li>- 오늘 요일 표시</li> </ul> </li> <li>운동 리스트 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 카드형 데이터 표시 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; default 첫번째 카드 표시</li> </ul> </li> <li>- 의료진과 내가 추가한 운동 색상 다르게 표시</li> <li>- 마지막 카드에서 운동 생성 카드 표시 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 운동 추가는 당일 운동만 추가 가능</li> <li>&gt; 오늘 이전 날짜의 운동리스트에서 '운동 추가' 미표시</li> </ul> </li> <li>- 운동 추가 버튼 tap 시 운동 추가 화면으로 이동 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 운동에서 운동추가는 당일 운동만 추가</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>운동 부위: <ul style="list-style-type: none"> <li>- master-admin에서 등록된 이미지 및 레이블 표시</li> <li>- master-admin에서 운동 부위 추가 하지 않았을 경우 해당영역 숨김처리</li> <li>- 서버에 등록된 운동 부위 표시 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 운동 부위 없을 경우 해당 영역 숨김</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>운동 방법 동영상: <ol style="list-style-type: none"> <li>썸네일: 마스터 관리자가 첨부한 정방향 이미지 출력</li> <li>Tap 시 동영상 플레이어 팝업; 동영상 비율은 landscape 16:9</li> </ol> </li> <li>도움말 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의료진이 등록한 코멘트 표시</li> </ul> </li> <li>의료진에게 문의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tap 시 "의료진에게 문의" 페이지 팝업</li> <li>- 오늘 이후 날짜의 운동에서 미노출</li> </ul> </li> <li>운동 진행 버튼: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tap 시 운동 진행</li> <li>- 운동 완료 : 결과 보기로 변경</li> <li>- 오늘 이전 운동 : <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 운동 진행했을 경우 : 결과 보기로 변경, 과거 운동 결과 화면으로 이동</li> </ul> </li> <li>- 오늘 이후 운동 : 운동 진행 버튼 미노출</li> </ul> </li> <li>이전 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이전 Tap 시 홈으로 이동</li> </ul> </li> </ol> |

session 적용  
(2022.01.05)

| Page Description | 운동(의료진이 추가한 운동) > 의료진에게 문의 | Screen ID | PT-A-06-14 | Description  |
|------------------|----------------------------|-----------|------------|--|
| <div> </div>     |                            |           |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>이전 버튼:<br/>- Tap 시 back</li> <li>문의 내용 작성 영역:<br/>a. 인풋 박스 영역을 초과할 시 내부 스크롤<br/>b. 버튼 전체 Tap 시 첨부 파일 삭제 confirm 출력<br/>c. Tap 시 디바이스 앨범 팝업<br/>d-1. ㉠에 입력한 내용이 없는 경우 버튼 비활성화<br/>d-2. Tap 시 본 페이지 새로 고침, ㉡의 가장 상단에 작성글 출력</li> <li>Q&amp;A 내역 영역:<br/>1) 환자/의료진 작성글 분리<br/>2) 작성 일시 기준 최신순 정렬</li> <li>첨부파일 보기 버튼:<br/>1) 각 작성글 아래에 출력,<br/>2) Tap 시 플레이어(동영상) 또는 뷰어(이미지) 팝업</li> </ol> |

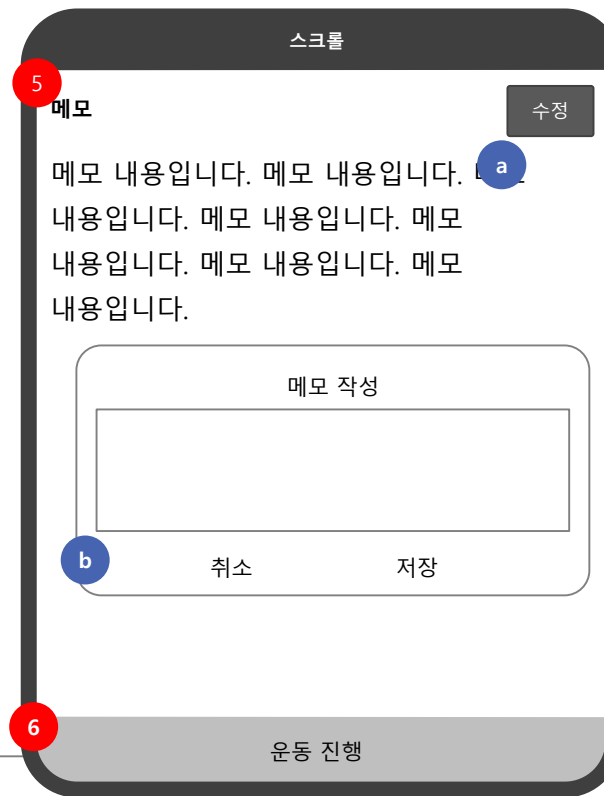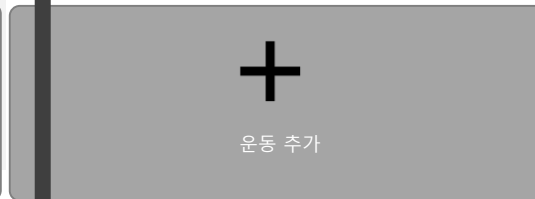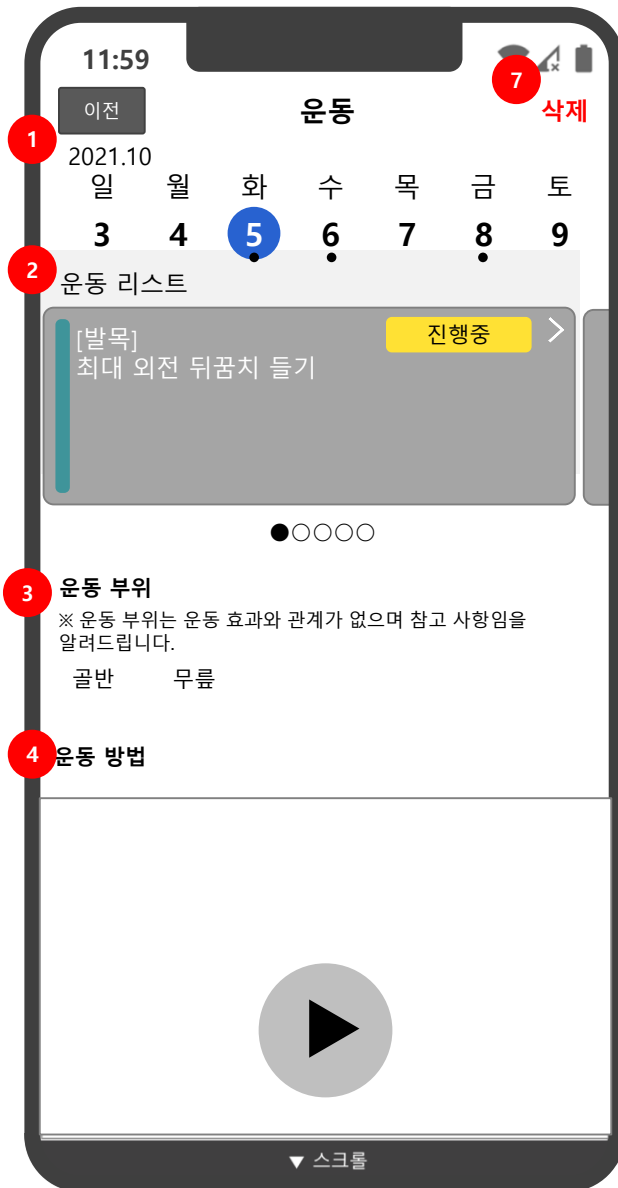

- 스케줄
  - 주 캘린더 표시
  - 오늘 요일 표시
- 운동 리스트
  - 카드형 데이터 표시
  - > default 첫번째 카드 표시
  - 의료진과 내가 추가한 운동 색상 다르게 표시
  - 마지막 카드에서 운동 생성 카드 표시
- 운동 부위:
  - master-admin에서 등록된 이미지 및 레이블 표시
  - master-admin에서 운동 부위 추가 하지 않았을 경우 해당영역 숨김처리
  - 서버에 등록된 운동 부위 표시
  - > 운동 부위 없을 경우 해당 영역 숨김
- 운동 방법 동영상:
  - 1) 썸네일: 마스터 관리자가 첨부한 정방향 이미지 출력
  - 2) Tap 시 동영상 플레이어 팝업; 동영상 비율은 landscape 16:9
- 메모:
  - 사용자가 운동 진행 또는 본 화면에서 입력한 메모 내용 출력
  - a. Tap 시 메모 작성 인풋박스 팝업
  - b-1. 100자 제한
  - b-2. "취소" 버튼 Tap 시 팝업 닫음, "저장" 버튼 Tap 시 인풋박스에 입력한 내용이 화면에 출력
- 운동 진행 버튼:
  - Tap 시 운동 진행
  - 운동 완료 : 결과보기로 변경
  - 오늘 이전 운동
  - > 운동 진행했을 경우 : 결과 보기로 변경, 과거 운동 결과 화면으로 이동
  - 오늘 이후 운동 : 운동 진행 버튼 미노출
- 삭제 버튼:
  - 환자 본인이 생성한 운동 삭제
  - > 의료진이 생성한 운동에서는 삭제 버튼 없음
  - 삭제 tap 시 삭제 확인 팝업 표시

session 적용  
(2022.01.05)



1. 취소 버튼:  
- 이전 화면으로 이동
2. 다음 버튼:  
- 선택한 운동이 없는 상태에서 비활성화  
- 다음 화면으로 이동
3. 운동 선택 가이드:  
- 가이드 위아래 여백 배치  
- 아래로 스크롤 시 위아래 여백 최소화하여 헤더와 붙어 고정 표시
4. 운동  
- 운동 선택 시 운동 카드 색상 변경  
- 다른 카드 선택 시 이전 카드 선택 취소 처리  
- ~~master-admin~~에서 서버에서 운동 부위 추가 하지 않았을 경우 해당영역 숨김처리
5. **부분부하보행의 경우 왼발 부분부하보행과 오른발 부분부하보행을 함께 선택 할 수 없음**

전체 운동 리스트는 아래 링크 참조  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ofXnAl35vyDpP1m8pVkv9INckz5SnSL8iiD69U8TKw4/edit#gid=0>



부분부하보행 디스크립션 보완  
(2022.02.04)

session 적용  
(2022.01.05)



| Page Description | 운동 > 운동 추가 > 세트 지정 | Screen ID | PT-A-06-4 | Description  |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|--|
|                  |                    |           |           | <ol style="list-style-type: none"> <li>이전<br/>- Tap 시 운동 선택 단계로 이동, 선택한 운동 상태 유지</li> <li>선택한 운동 표시<br/>스케줄에 추가될 거예요.</li> <li>세트 지정 영역:<br/>- default : 1세트 선택<br/>- 중복 선택 불가능<br/>- 미지정 불가능</li> <li>보행 시간 선택<br/>- 보행 선택 시에만 선택 가능하도록 활성화됨<br/>- 분 선택 시 드롭 다운 메뉴 표시</li> <li>운동 별 최종 일정 확인 영역:<br/>- 3,4에서 선택한 값이 즉각 반영<br/>부분부하운동만 진행할 경우 00세트 라는 문구는 출력되지 않음</li> <li>완료<br/>- 모든 항목이 입력 상태가 아닐 경우 비활성화<br/>- Tap 시 운동 화면으로 이동 후 해당 운동 포커스</li> <li>입력한 기준치 출력</li> </ol> |
|                  |                    |           |           | <div> <div>부분부하보행운동 추가 시 수치 입력 추가<br/>(2022.02.03)</div> <div>session 적용<br/>(2022.01.05)</div> </div>   |

native

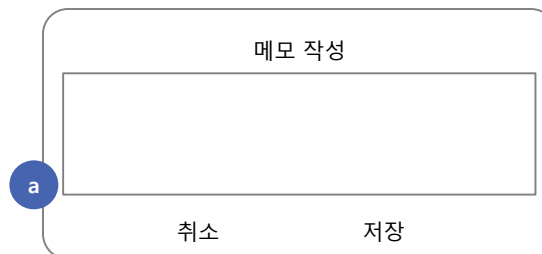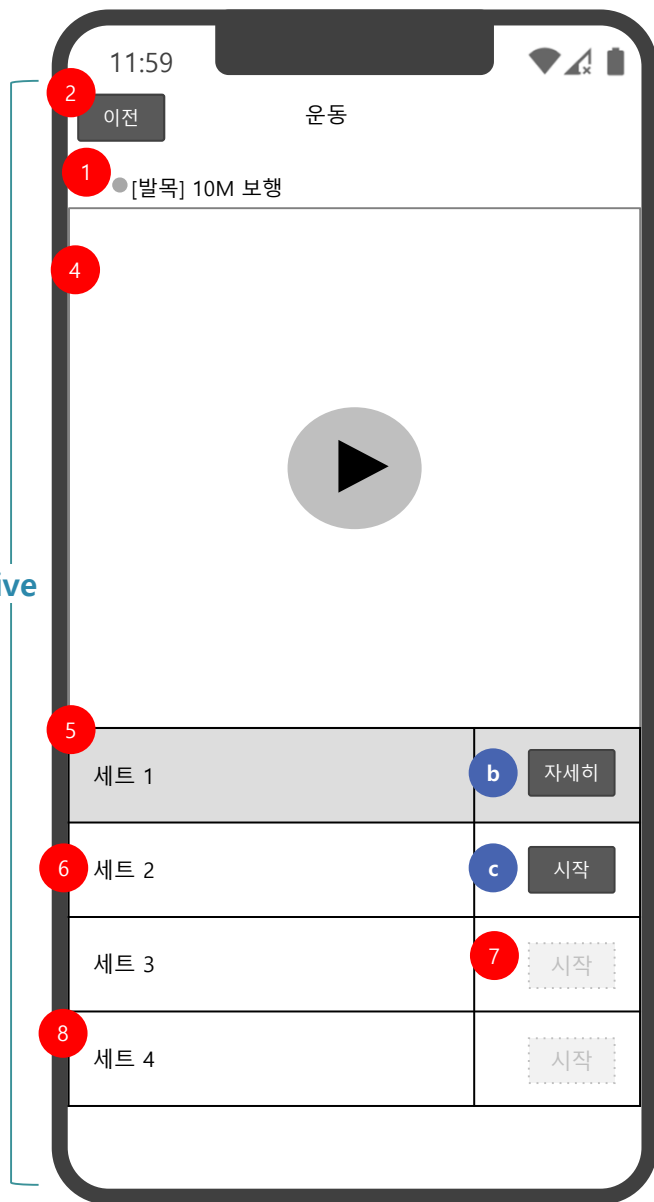

운동 목록에서 자세히 버튼 클릭 시 데이터  
다운로드(강제) 진행 / 모든 운동 화면 공통


- 타이틀:
  - 진행하는 [session] 운동명 출력
  - 운동명 길 경우 ... 처리 / 최대 운동명 글자수는 디자인 시 결정
  - 본인 추가 운동일 경우 뱃지 표시
- 이전 버튼:
  - Tap 시 이전 화면으로 이동
  - 진행률 재산정
- 
- 정방향 운동 가이드 동영상:
  - 페이지 로드 시 일시정지 상태
  - 반복 재생 없음
- 1회 차:
  - 완료된 상태 배경색 적용
- 2회차:
  - 미진행 상태 배경색 표시
  - 버튼 Tap 시 즉저압 운동 페이지 팝업 표시
- 지난 일의 경우 시작 버튼 보여지지 않음(지난 일은 운동 진행 불가)
- 미진행 상태의 시작 버튼
  - 직전 세트를 완료하기 전 버튼 비활성화
- 마지막 세트 완료 시 운동 완료 피드백 팝업 표시

native 구간에서  
메모 기능 삭제 / 타이틀 영역 변경  
(2022.01.20)

다운로드 정의  
(2022.01.18)

session 적용  
(2022.01.05)

native

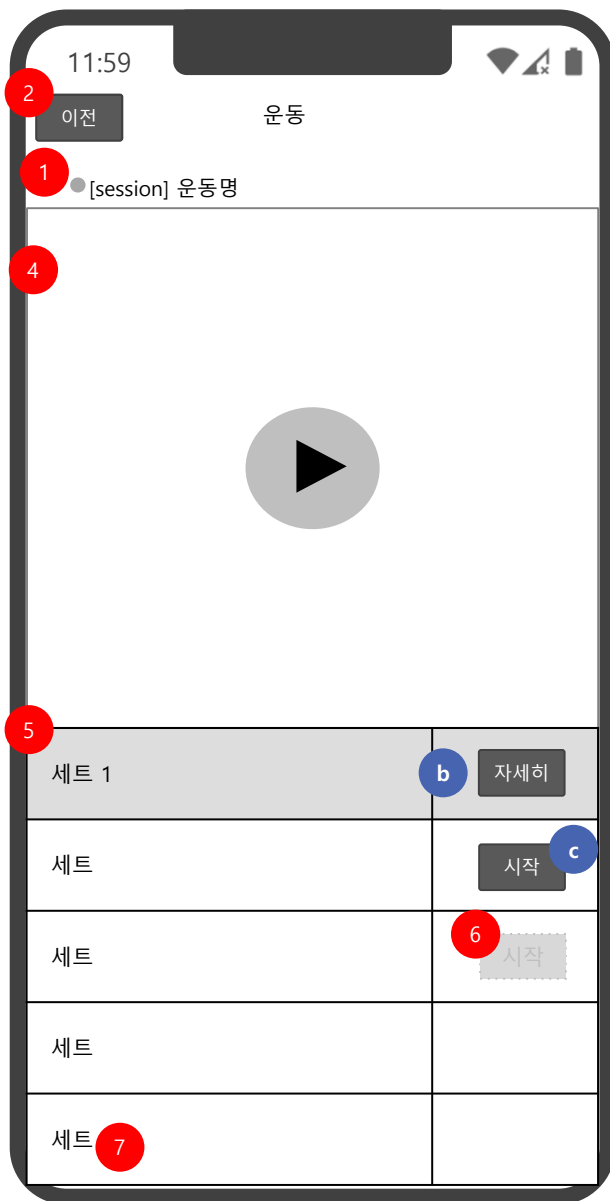

운동 목록에서 자세히 버튼 클릭 시 데이터  
다운로드(강제) 진행 / 모든 운동 화면 공통

- 타이틀:
  - 진행하는 [session] 운동명 출력
  - 운동명 길 경우 ... 처리 / 최대 운동명 글자수는 디자인 시 결정
  - 본인 추가 운동일 경우 뱃지 표시
- 이전 버튼:
  - Tap 시 이전 화면으로 이동
  - 진행률 재산정
- 
- 정방향 운동 가이드 동영상:
  - 페이지 로드 시 일시정지 상태
  - 반복 재생 없음
- 부분부하의 경우 1회 차로 디폴트 출력:
  - 완료된 상태 배경색 적용
  - b. Tap 시 족저압 확인 화면으로 이동
  - c. 버튼 Tap 시 족저압 운동 페이지 팝업 표시

지난 일의 경우 시작 버튼 보여지지 않음(지난 일은 운동 진행 불가)
- 미진행 상태의 시작 버튼
  - 직전 세트를 완료하기 전 버튼 비활성화
- 마지막 세트 완료 시 운동 완료 피드백 팝업 표시

native 구간에서  
메모 기능 삭제 / 타이틀 영역 변경  
(2022.01.20)

다운로드 정의  
(2022.01.18)

session 적용  
(2022.01.05)


native



1. -
2. 버튼
  - 운동 완료한 운동 우측에 자세히 버튼 표시
  - 운동을 진행하지 않았을 경우 미진행 표시


native 구간에서  
메모 기능 삭제/ 타이틀  
영역 변경  
(2022.01.20)

session 적용  
(2022.01.05)


| Page Description  | 운동(의료진이 추가한 운동) > 운동 대기(동영상 미촬영) | Screen ID | PT-A-06-6 | Description  |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|--|
| <div> <div>native</div>  </div> |                                  |           |           | <p>1. 타이틀:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 진행하는 운동명 출력</li> <li>2) 의료진 추가 운동 뱃지 표시</li> <li>3) 운동명 길 경우 ... 처리 / 최대 운동명 글자수는 디자인 시 결정</li> </ol> |

native 구간에서  
문의 기능 삭제/ 타이틀  
영역 변경  
(2022.01.20)

session 적용  
(2022.01.05)

| Page Description   | 운동(의료진이 추가한 운동, 이전 날짜의 운동) > 결과보기(동영상 미촬영) | Screen ID | PT-A-06-17 | Description   |
|--|--|-----------|------------|---|
| <div><div>native</div></div> |  |           |            | <div>1. 버튼<ul style="list-style-type: none"><li>- 운동 완료한 운동 우측에 자세히 버튼 표시</li><li>- 운동을 진행하지 않았을 경우 미진행 표시</li></ul></div> <div>native 구간에서<br/>문의 기능 삭제/ 타이틀<br/>영역 변경<br/>(2022.01.20)</div> <div>session 적용<br/>(2022.01.05)</div> |

native

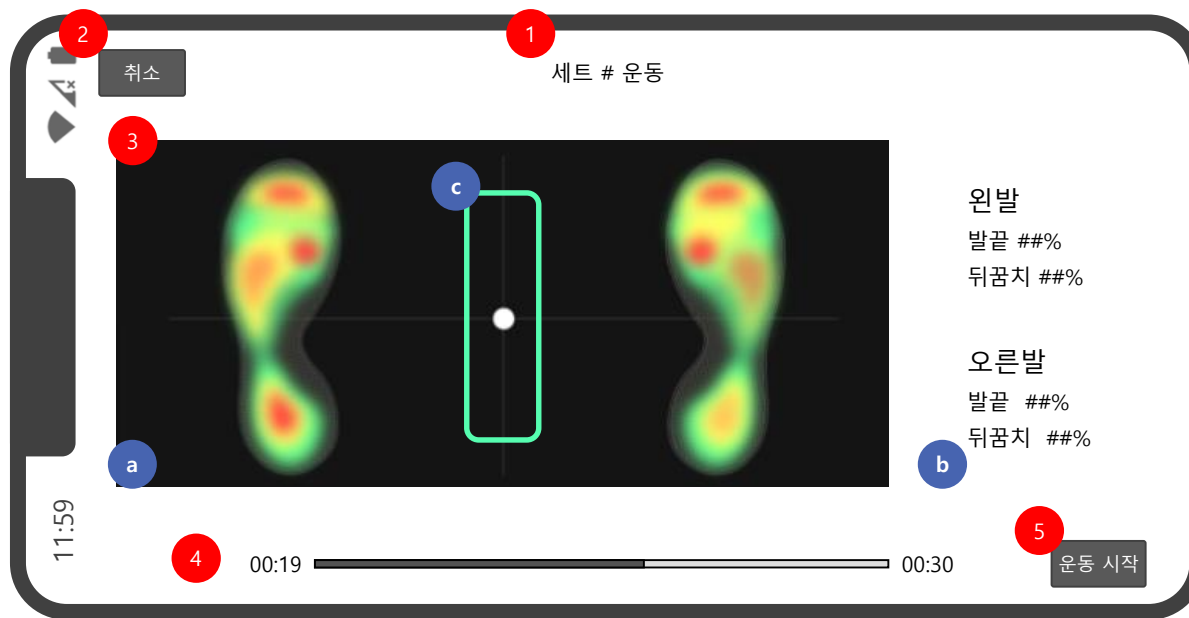

- 타이틀:  
- 운동 세트 # 출력
- 취소 버튼:  
- Tap 시 이전 화면으로 이동
- 족저압 운동 영역:  
a. 족저압 출력  
b. 양쪽 밸런스 비중 출력  
c. 밸런스 가이드 출력
- 타이머  
1) ⑤ 버튼 Tap “운동 시작”인 상태에서 Tap 시 3초 카운트다운 후 운동 시작  
2) ⑤ 버튼이 “중지”인 상태에서 Tap 시 게이지 및 시간 초기화
- 족저압 운동 컨트롤 버튼:  
1) 페이지 진입 시 “운동 시작” 레이블 출력, Tap 시 운동 진행, 운동 완료 시 자동으로 운동 조회 화면으로 이동  
2) 운동 진행 중 “중지” 레이블 출력, Tap 시 운동 중지, 운동 초기화
- 인솔 연결 끊김 알럿 메시지  
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화, 컨트롤 버튼 운동 시작으로 변경  
2) “운동 중단” Tap 시 운동 정보 휘발, 세트 운동 페이지 닫음  
3) “인솔 연결” Tap 시 인솔 연결 시도

6


인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고 운동을 재개하시겠어요?

중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이 연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.

운동 중단

인솔 연결

native

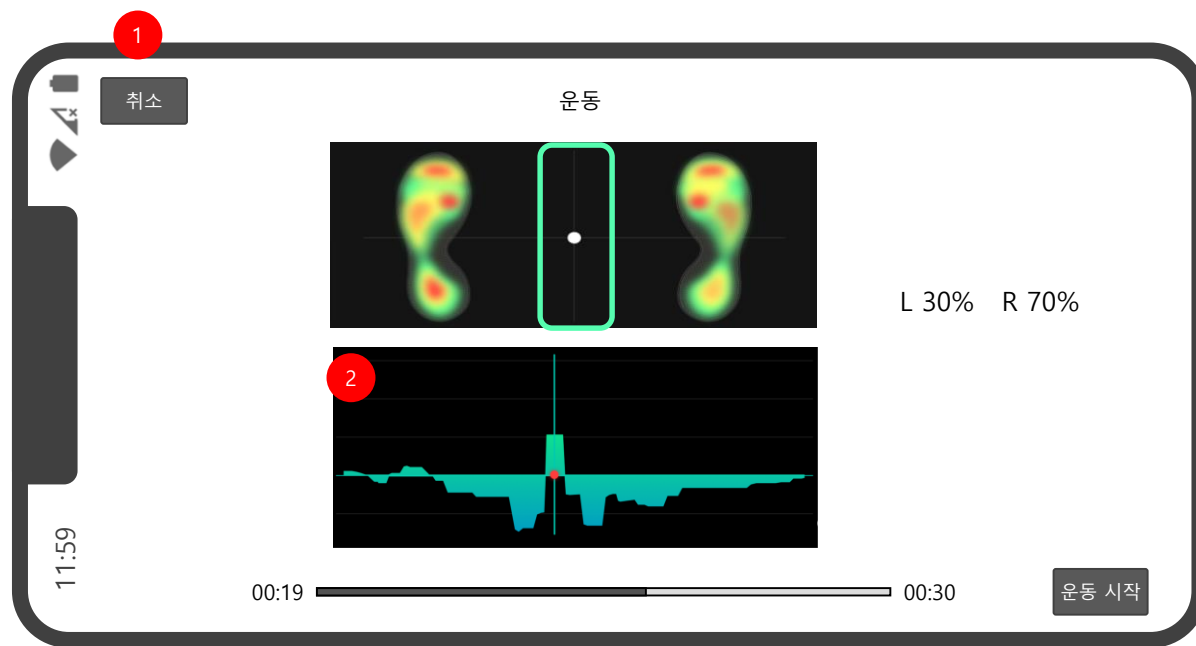

3

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고  
운동을 재개하시겠어요?

중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이  
연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수  
없습니다.

운동 중단


인솔 연결

1. 부분부하보행의 경우 Patient app은 족저압만 촬영
2. 신규 그래프 추가
3. 인솔 연결 끊김 알럿 메시지
  - 1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화, 컨트롤 버튼 운동 시작으로 변경
  - 2) "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 세트 운동 페이지 닫음
  - 3) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

부분부하보행 족저압 촬영 화면 추가  
(2022.02.03)



native

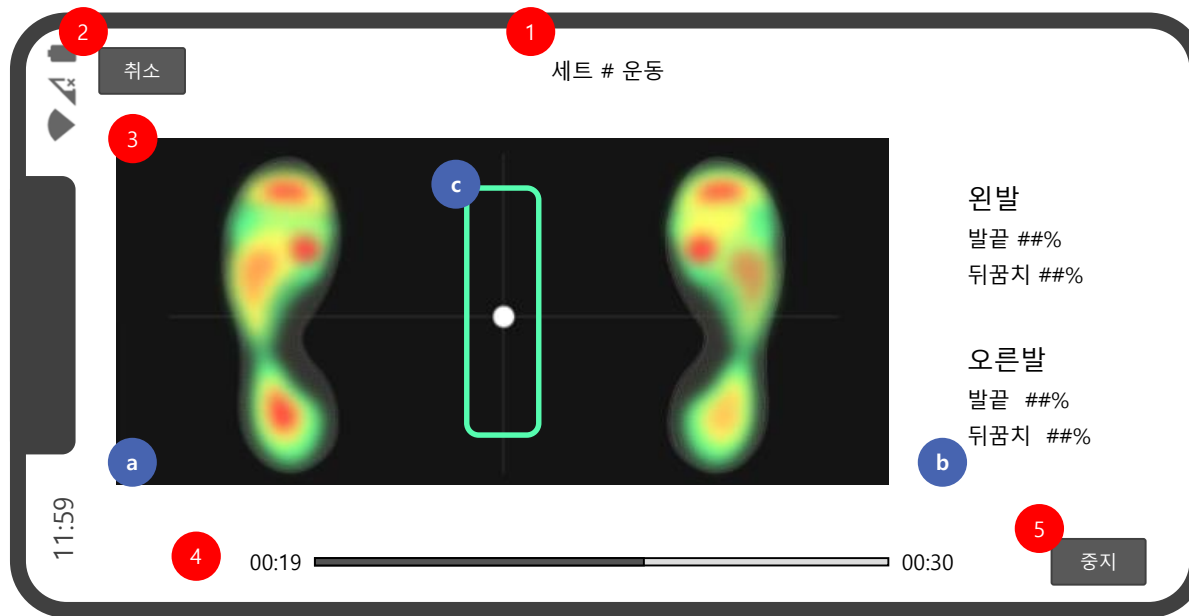

1. 타이틀:  
- 운동 세트 출력
2. 취소 버튼:  
- Tap 시 이전 화면으로 이동
3. 족저압 운동 영역:  
a. 족저압 출력  
b. 양쪽 밸런스 비중 출력  
c. 밸런스 가이드 출력
4. 족저압 운동 게이지:  
1) ⑤ 버튼이 "운동 시작"인 상태에서 Tap 시 3초 카운트다운 후 운동 시작  
2) ⑤ 버튼이 "중지"인 상태에서 Tap 시 게이지 및 시간 초기화
5. 족저압 운동 컨트롤 버튼:  
1) 페이지 진입 시 "운동 시작" 레이블 출력, Tap 시 운동 진행, 운동 완료 시 자동으로 운동 조회 화면으로 이동  
2) 운동 진행 중 "중지" 레이블 출력, Tap 시 운동 중지, 운동 초기화
6. 인솔 연결 끊김 알림 메시지  
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화, 컨트롤 버튼 운동 시작으로 변경  
2) "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 세트 운동 페이지 닫음  
3) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도
7. 러닝 운동 중 인솔 연결 끊김 알림 메시지  
- 러닝 운동은 동영상 촬영 시나리오 없음  
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 일시정지, 컨트롤 ⑤ 버튼 '이어하기'로 변경  
2) 팝업에서 "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 세트 운동 페이지 닫음  
3) 팝업에서 "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

6

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고 운동을 재개하시겠어요?

중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이 연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.

운동 중단      인솔 연결


7

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고 운동을 이어 하시겠어요?

인솔이 연결 되면 운동을 이어서 진행 가능합니다.

인솔이 연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.  
운동 중단      인솔 연결

native

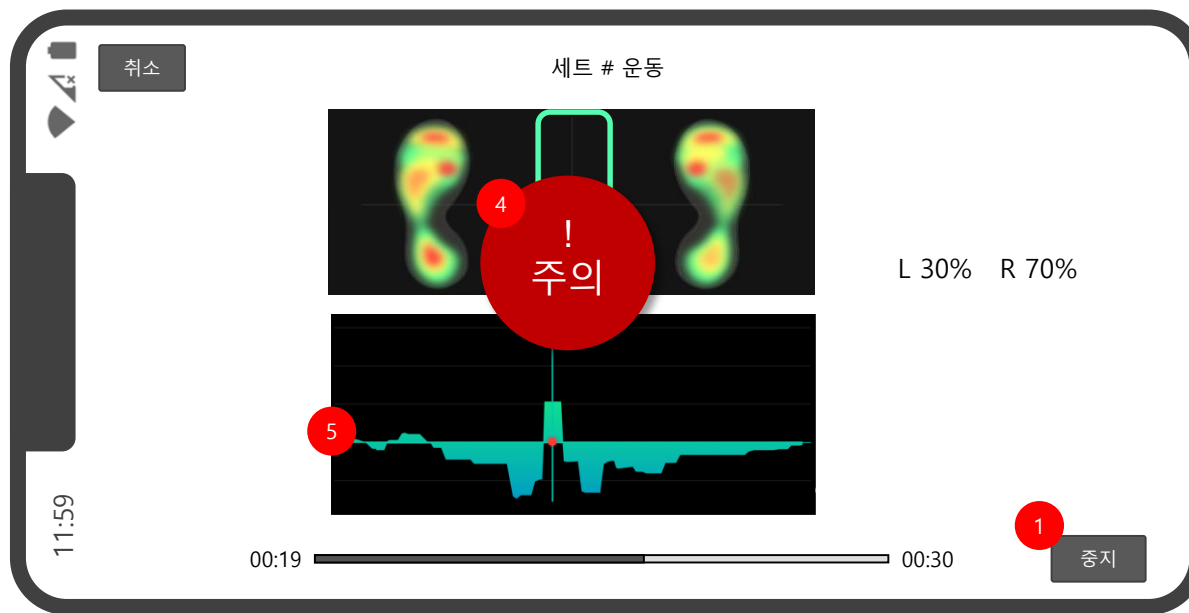

부분부하보행운동(partial weight bearing)의 경우 의료진이 설정한 %를 넘어갈 시 화면에 알림(경고) 표시가 되며, 인솔 진동과 경고음이 울림

1. 족저압 운동 컨트롤 버튼:
  - 1) 페이지 진입 시 "운동 시작" 레이블 출력, Tap 시 운동 진행, 운동 완료 시 자동으로 운동 조회 화면으로 이동
  - 2) 운동 진행 중 "중지" 레이블 출력, Tap 시 운동 중지, 운동 초기화
2. 인솔 연결 끊김 알림 메시지
  - 1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화, 컨트롤 버튼 운동 시작으로 변경
  - 2) "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 세트 운동 페이지 닫음
  - 3) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도
3. 러닝 운동 중 인솔 연결 끊김 알림 메시지 - 러닝 운동은 동영상 촬영 시나리오 없음
  - 1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 일시정지, 컨트롤⑤ 버튼 '이어하기'으로 변경
  - 2) 팝업에서 "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 세트 운동 페이지 닫음
  - 3) 팝업에서 "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도
4. 정해진 수치를 넘어갈 경우 알림(경고) 표시 출력
5. 압 수치에 대해 그래프 표기  
정해진 수치 內 일 경우 기준 선의 하단에 수치를 넘길 경우 기준 선의 상단에 표현

부분부하보행 족저압 촬영 화면 추가  
(2022.02.03)

2

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고 운동을 재개하시겠어요?

중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이 연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.

운동 중단      인솔 연결


3

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고 운동을 이어 하시겠어요?

인솔이 연결 되면 운동을 이어서 진행 가능합니다.

인솔이 연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.  
운동 중단      인솔 연결


native

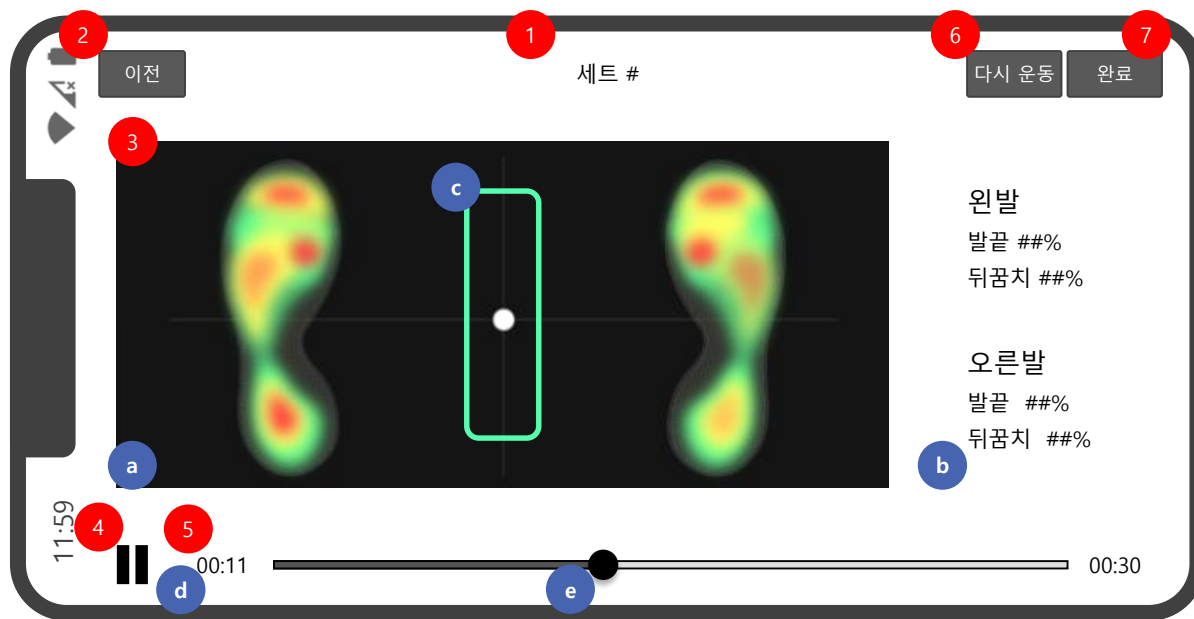

1. 타이틀:  
- 세트 # 출력
2. 이전 버튼:  
1) Tap 시 이전 화면으로 이동  
2) 영상 저장되지 않음
3. 족저압 영역:  
a. 운동된 족저압 출력  
b. 양쪽 밸런스 비중 출력  
c. 밸런스 가이드 출력
4. 재생/일시정지 버튼:  
- Tap 시 ⑤ 타임라인 재생 및 ③의 데이터 재생/일시정지
5. 타임라인:  
d. 현재 @가 위치한 시점 출력  
e. seeker: 좌우 스와이프하여 해당 시점의 ③의 데이터 출력
6. 다시 운동  
- 현재 데이터 제거 후 해당 운동 족저압 녹화 화면으로 이동  
- 오늘 이전 날짜의 운동 운동 확인 시 다시 운동 버튼 비노출
7. 버튼 클릭 시 촬영 데이터 저장과 함께 팝업창 닫힘

완료 버튼 추가  
(2022.01.20)

native

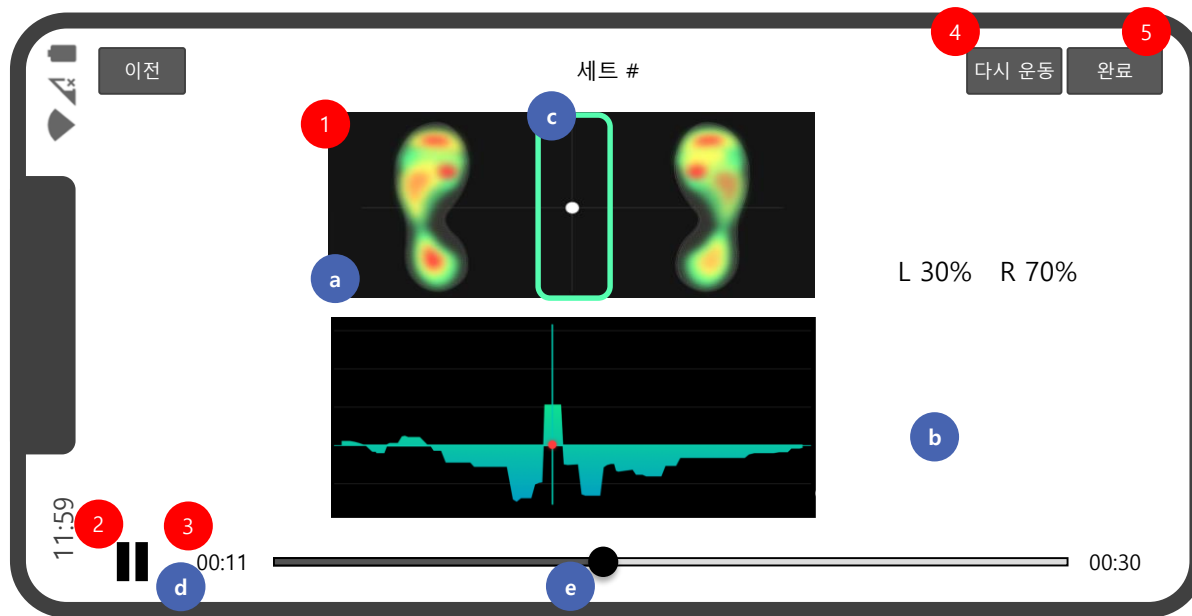


1. 족저압 영역:
  - a. 운동된 족저압 출력
  - b. 양쪽 밸런스 비중 출력
  - c. 밸런스 가이드 출력
2. 재생/일시정지 버튼:
  - Tap 시 ⑤ 타임라인 재생 및 ③의 데이터 재생/일시정지
3. 타임라인:
  - d. 현재 ④가 위치한 시점 출력
  - e. seeker: 좌우 스와이프하여 해당 시점의 ③의 데이터 출력
4. 다시 운동
  - 현재 데이터 제거 후 해당 운동 족저압 녹화 화면으로 이동
  - 오늘 이전 날짜의 운동 운동 확인 시 다시 운동 버튼 비노출
5. 버튼 클릭 시 촬영 데이터 저장과 함께 팝업창 닫힘

부분부하보행 족저압 촬영 화면 추가  
(2022.02.03)

완료 버튼 추가  
(2022.01.20)


native

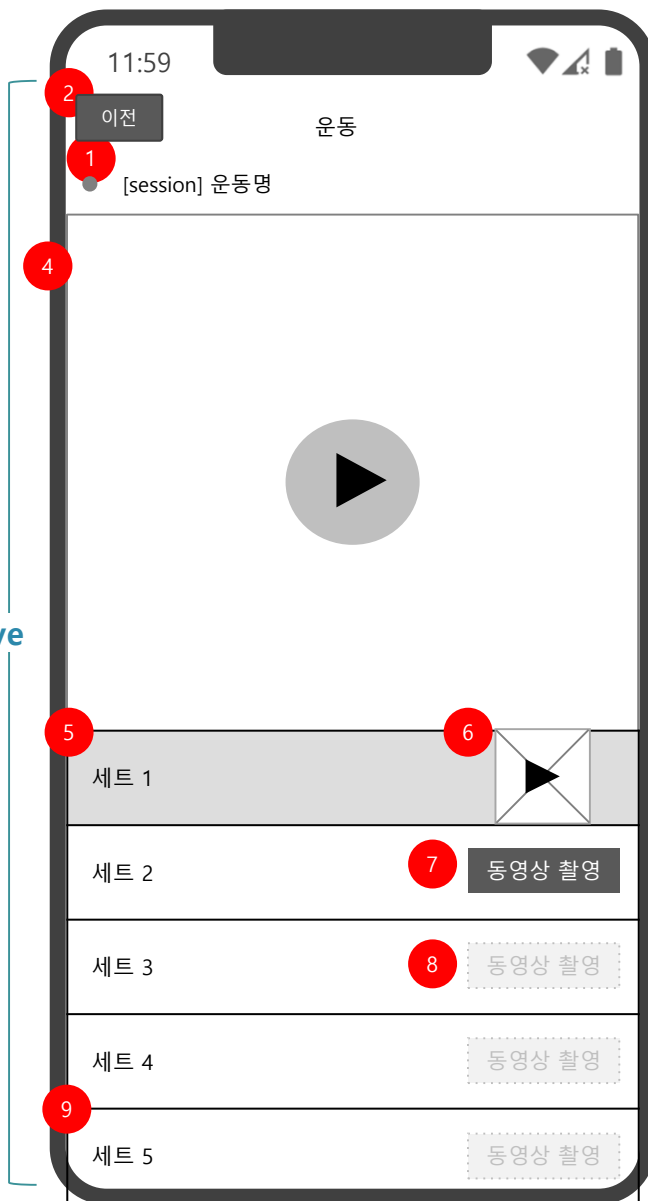


1. 타이틀:
  - 1) 진행하는 운동명 출력
  - 2) 본인 추가 운동 배지 표시
  - 3) 운동명 길 경우 ... 처리 / 최대 운동명 글자수는 디자인 시 결정
2. 이전 버튼:
  - Tap 시 이전 화면으로 이동
  - 진행률 재산정
3. -
4. 정방향 운동 가이드 동영상:
  - 1) 페이지 로드 시 일시정지 상태
  - 2) 반복 재생 없음
5. 1세트:
  - 배경색 적용
6. 동영상 썸네일:
  - 1) 동영상 파일의 첫 프레임 출력
  - 2) Tap 시 동영상 플레이어 화면으로 이동
7. 동영상 촬영 버튼:
  - 1) Tap 시 동영상 촬영 카메라 화면으로 이동
  - 2) 동영상 촬영 완료 시 ⑥으로 변경
8. 미진행 상태의 동영상 촬영 버튼:
  - 직전 세트를 완료하기 전 버튼 비활성화
9. 마지막 세트 완료 시 운동 완료 피드백 팝업 표시

native 구간에서  
문의 기능 삭제/ 타이틀  
영역 변경  
(2022.01.20)

session 적용  
(2022.01.05)
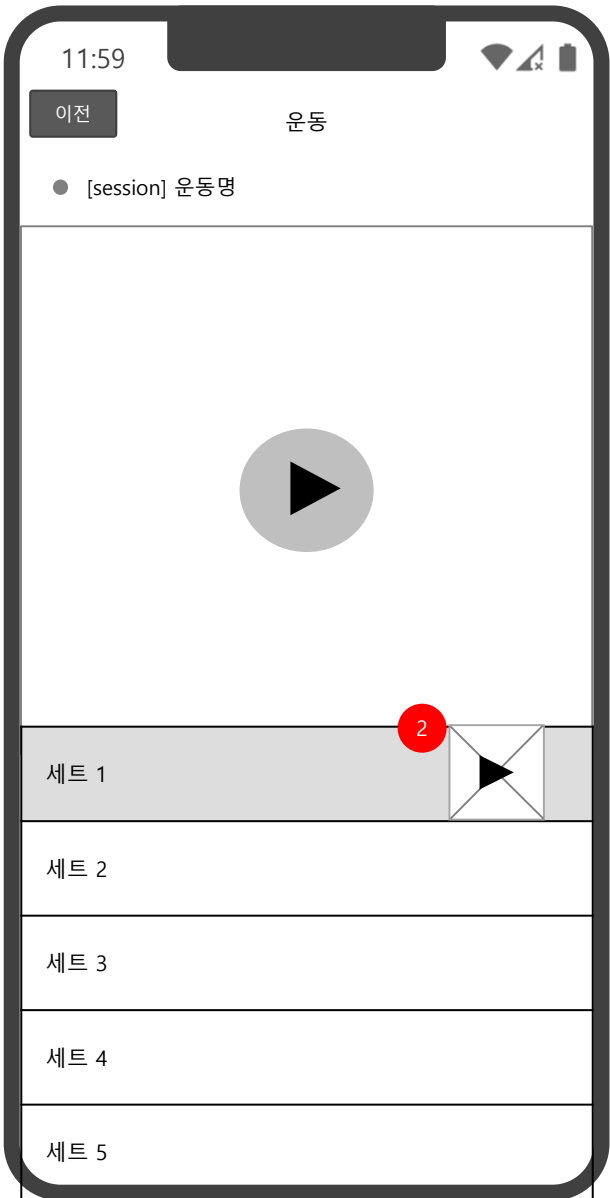
| Page Description                             | 운동(의료진이 추가한 운동, 이전 날짜의 운동) > 결과 보기(동영상 촬영)   | Screen ID | PT-A-06-10   | Description  |
|--|--|-----------|--|--|
| <div data-bbox="37 749 134 782">native</div> |  |           | <div data-bbox="1342 1061 1728 1199">native 구간에서<br/>문의 기능 삭제/ 타이틀 영역 변경<br/>(2022.01.20)</div> <div data-bbox="1632 1246 1984 1408">session 적용<br/>(2022.01.05)</div> | <div data-bbox="1570 89 1974 182">1. -<br/>2. 버튼<br/>- 운동 완료한 운동 우측에 썸네일 표시<br/>- 운동을 진행하지 않았을 경우 버튼 미표시</div> |

native

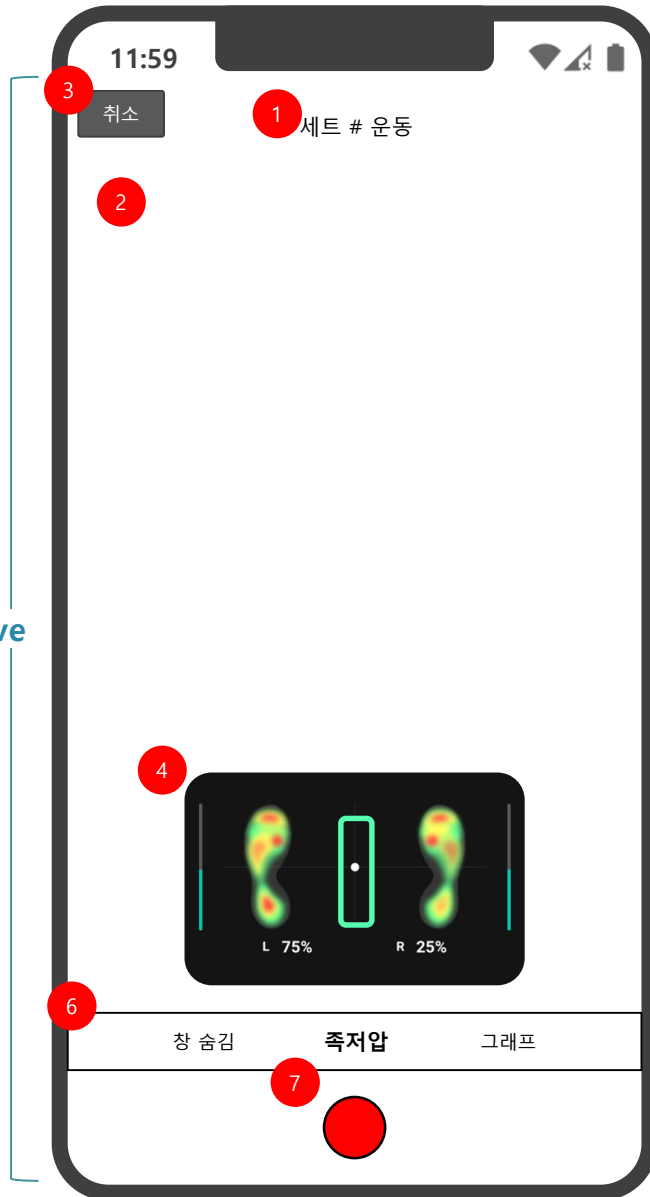

7


인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하시겠어요?

인솔이 연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.

운동 중단

인솔 연결

5

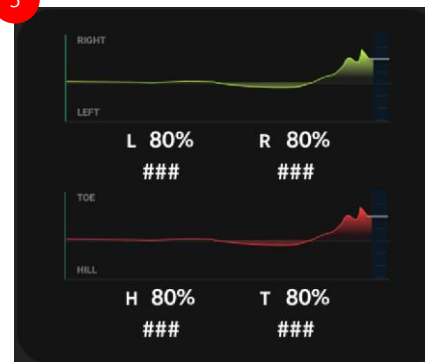


1. 타이틀:
  - 촬영 세트 출력
2. 뷰파인더
  - 1) 화면 전체 범위
  - 2) 족저압 레이어와 별개로 촬영
3. 취소 버튼:
  - Tap 시 이전 화면으로 이동
4. 족저압 레이어
5. 그래프 레이어
6. 레이어 컨트롤 바:
  - 1) 현재 상태 레이블 강조
  - 2) 창 숨김 Tap 시 레이어 숨김
  - 3) 족저압 Tap 시 족저압 레이어 표시
  - 4) 그래프 Tap 시 그래프 레이어 표시
7. 녹화 버튼
  - Tap 시 녹화 시작
8. 인솔 연결 끊김 알럿 메시지:
  - 1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화
  - 2) "운동 중단" Tap 시 운동 진행 화면으로 이동
  - 2) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

| Page Description  | 운동(의료진이 추가한 운동) > 운동 대기 (동영상 촬영) > 동영상 촬영(운동 진행)  | Screen ID  | PT-A-06-12 | Description |
|-------------------|---|--|------------|-------------|
| <div>native</div> | <div><div><div><div>11:59</div><div>1 • 00:19</div></div><div><div><div>L 75%</div><div>R 25%</div></div></div><div><div>창 숨김</div><div>족저압</div><div>그래프</div></div><div><div>2</div><div></div></div></div></div> <div><div>3</div><div><div>인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고 운동을 재개하시겠어요?</div><div>중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이 연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.</div><div>운동 중단      인솔 연결</div></div></div> | <div>1. 촬영 타이머:<br/>1) 운동별 시간에 맞춰 타이머 재생<br/>2) 타이머 만료 시 촬영 완료 후 운동 조회 화면으로 이동</div> <div>2. 녹화 중단 버튼:<br/>- Tap 시 녹화 중단, 운동 초기화</div> <div>3. 인솔 연결 끊김 알럿 메시지:<br/>1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화<br/>2) "운동 중단" Tap 시 촬영 동영상 휘발, 카메라 닫음<br/>3) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도</div> |            |             |




native

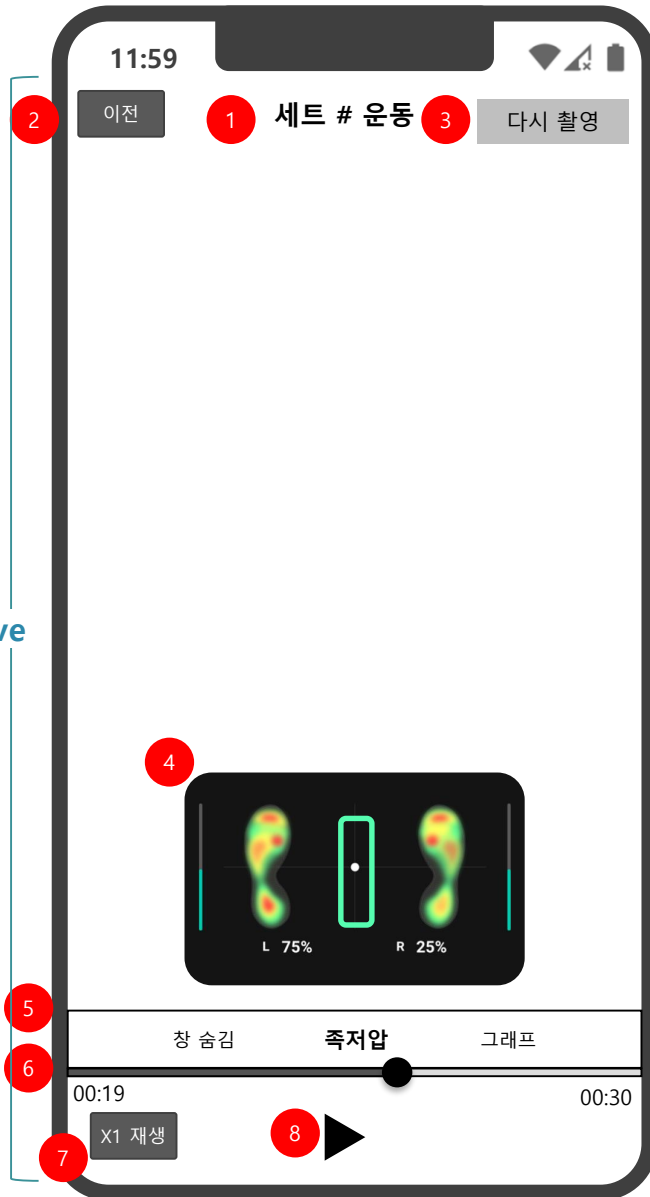

- 타이틀:
  - 촬영 세트 출력
- 닫기 버튼:
  - Tap 시 운동 대기 화면으로 이동
- 다시 촬영 버튼:
  - Tap 시 운동 다시 촬영,
  - 오늘 이전 날짜의 운동 운동 확인 시 다시 운동 버튼 비노출
- 족저압 레이어
- 레이어 컨트롤 바:
  - 현재 상태 레이블 강조
  - 창 숨김 Tap 시 레이어 숨김
  - 족저압 Tap 시 족저압 레이어 표시
  - 그래프 Tap 시 그래프 레이어 표시
  - ⑥ 조작에 따라 데이터 출력
- 비디오 Seeker:
  - 좌우로 슬라이드하여 재생 컨트롤
  - 좌측 하단 영상 현재 시간 표시
  - 우측 하단 영상 전체 시간 표시
- 재생 속도 조절 버튼:
  - Tap 시 "x1", "x1/2", "x1/4" 순서로 버튼 레이블 로테이션 및 동영상 재생 속도 조절
- 재생/일시정지 버튼:
  - 터치하여 동영상 재생 또는 일시정지

native


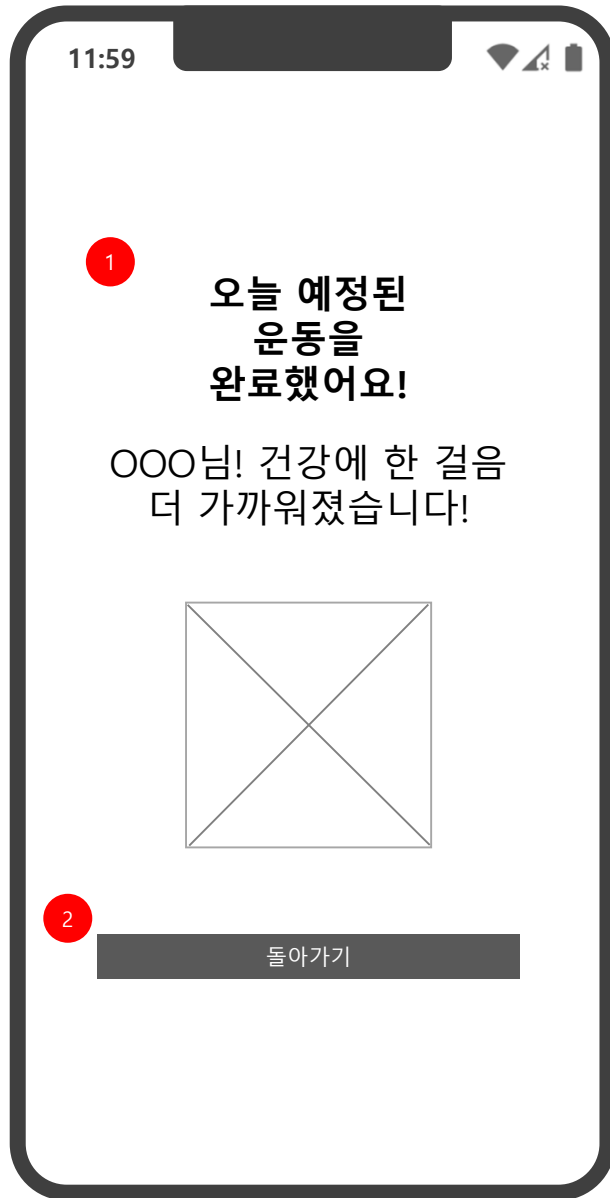


1. 운동 완료 피드백:
  - 오늘 예정된 운동 전체 진행 시 나타나는 화면
  - 마지막 운동의 운동 확인 화면에서 이전 버튼 tap 하여 운동 대기 화면으로 이동 시 해당 팝업 표시
  - 사용자 이름 출력
  - 안내 문구 아래 운동 완료를 나타내는 일러스트 출력
2. 돌아가기 버튼:
  - Tap 시 팝업창 닫음

인솔


| Page Description                             | 전체 메뉴 > 인솔 관리 - 빈 데이터  | Screen ID | PT-A-08 | Description   |
|--|--|-----------|---------|---|
| <div data-bbox="20 749 134 782">native</div> | <div data-bbox="113 142 762 1335"><p>The screenshot shows a mobile application interface for '인솔 관리' (Instructor Management). At the top, there is a status bar with the time '11:59' and icons for Wi-Fi, signal, and battery. Below the status bar, there is a header bar with a back button labeled '이전' (Previous) and the title '인솔 관리'. The main content area displays a message: '등록된 인솔이 없습니다.' (There are no registered instructors.) followed by '아래 버튼을 눌러 인솔을 등록해 주세요.' (Please press the button below to register the instructor.). At the bottom of the screen, there is a button labeled '신규 등록' (New Registration). Three red circles with numbers 1, 2, and 3 are overlaid on the screen to indicate the sequence of actions: 1 points to the back button, 2 points to the message, and 3 points to the '신규 등록' button.</p></div> |           |         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 터치 시 홈으로 이동</li><li>2. 빈 데이터 출력<ul style="list-style-type: none"><li>- 등록된 인솔이 없을 시 출력</li></ul></li><li>3. 터치 시 인솔 연결 가이드 팝업<ul style="list-style-type: none"><li>- 인솔 등록 프로세스 진행</li></ul></li></ol> |

native

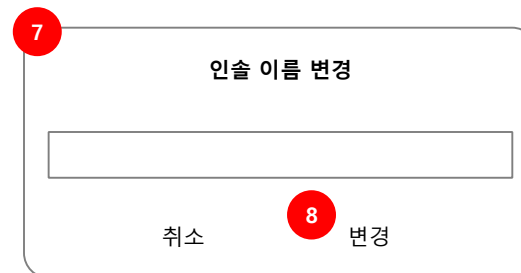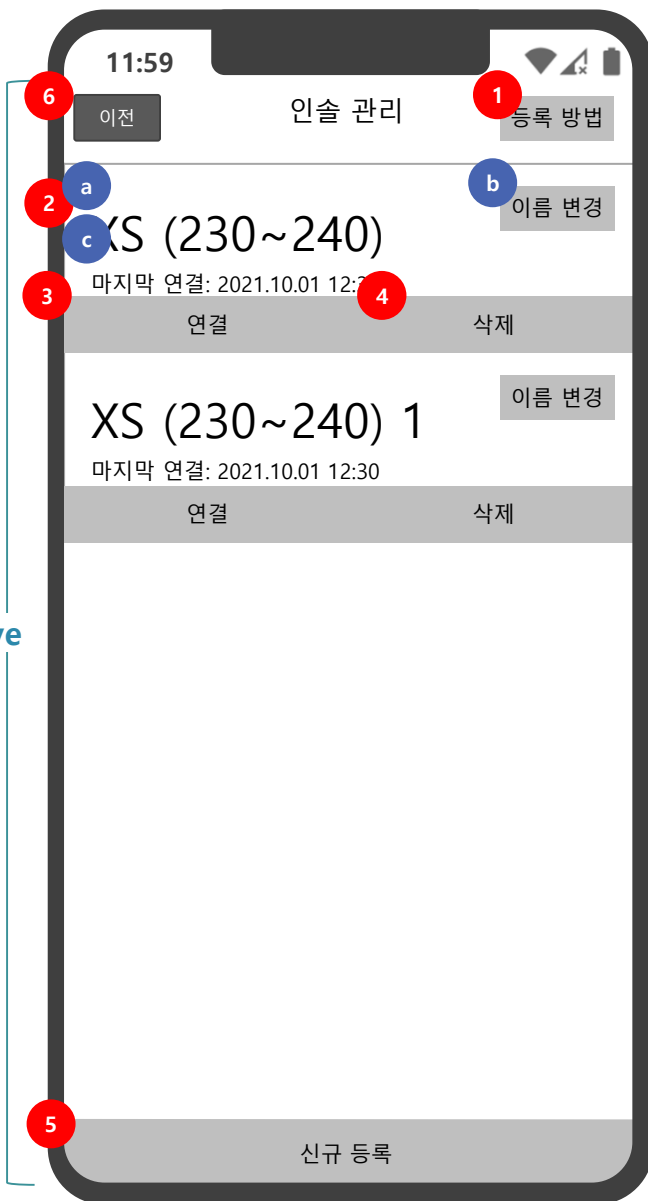


1. 터치 시 인솔 연결 가이드 팝업
2. 1) 정렬 기준: 등록 일시 기준 최고(最古)순  
2) 인터페이스:  
a) 등록 또는 변경한 인솔 이름 출력  
b) 터치 시 기존 이름이 입력된 상태로 이름 변경 인풋 필드 팝업  
c) 사용자의 디바이스와의 연결 일시 출력
3. 터치 시 디바이스와 “연결 중” 상태 화면 팝업
4. 터치 시 등록 정보 삭제 confirm 출력  
(confirm 메시지는 아래 url 참고)  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8\\_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276)
5. 터치 시 인솔 연결 가이드 팝업  
- 인솔 등록 프로세스 진행
6. 이전  
- 홈으로 이동
7. 인솔 이름 변경  
- 모든 문자 입력 가능, 20자 초과 입력 시 입력 불가
8. 변경  
- 변경 Tap 시 기등록 인솔과 이름 겹칠 시 알럿 메시지 출력  
- 겹치는 이름이 없을 경우 인솔 등록  
- 이름 등록하지 않을 경우(입력값이 0일 경우) 변경 버튼 비활성화  
아래 시트 93,94번 메시지 참조  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8\\_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276)

native

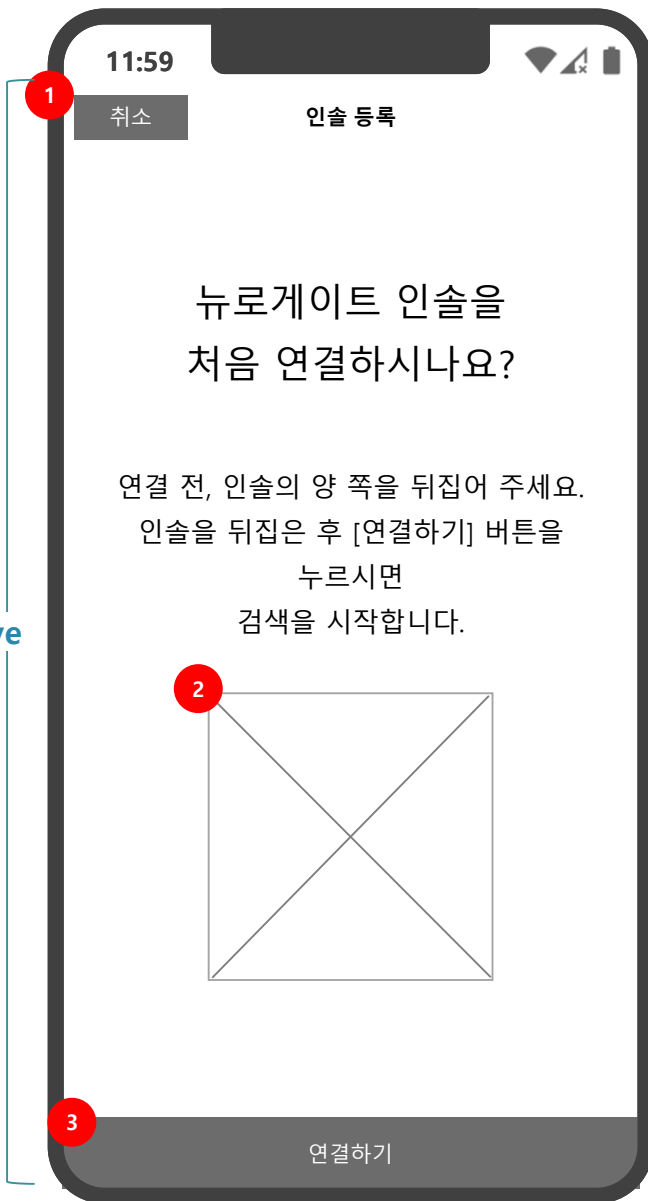



1. 터치 시 인슐 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음
2. 인슐을 뒤집는 액션을 시각적으로 표현하는 이미지 표시
3. 터치 시 인슐 블루투스 검색 진행

native

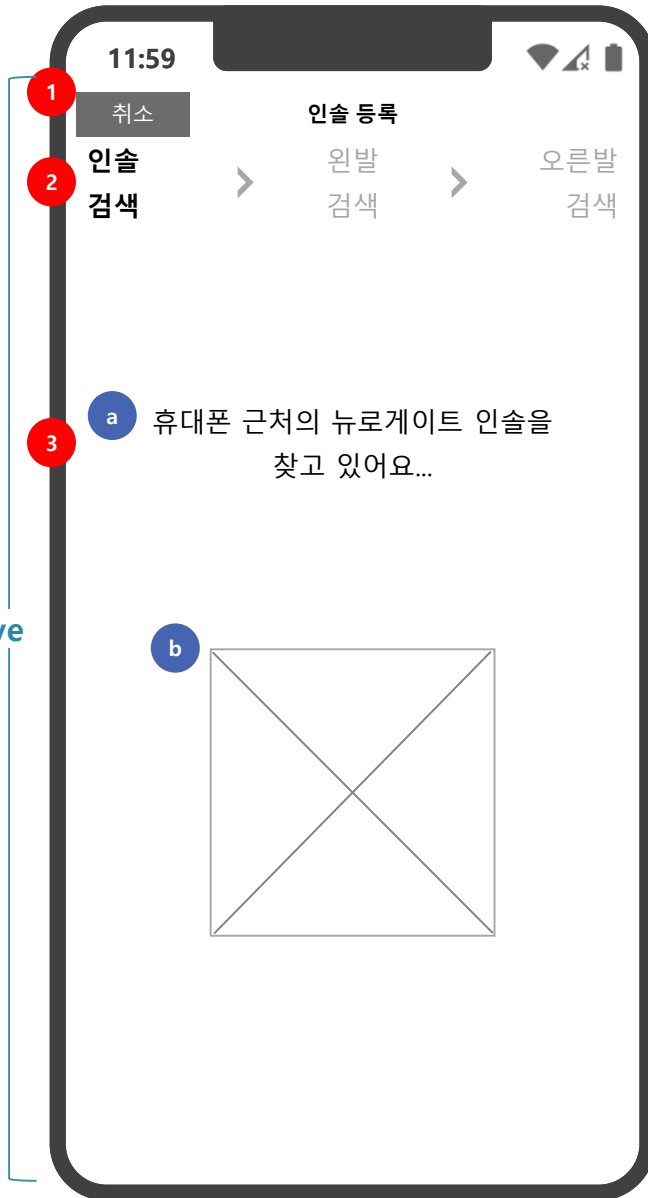

1. 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음
2. 인솔 등록 프로세스 표시 UI
  - 1) 인솔 등록 전체 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조
  - 2) 5초간 검색, 검색 시 바로 원발 검색 프로세스로 진행, 미검색 시 실패 피드백
3. "인솔 검색 중" 문구 및 인솔을 검색하는 액션을 시각적으로 표현하는 애니메이션 또는 gif 표시

native

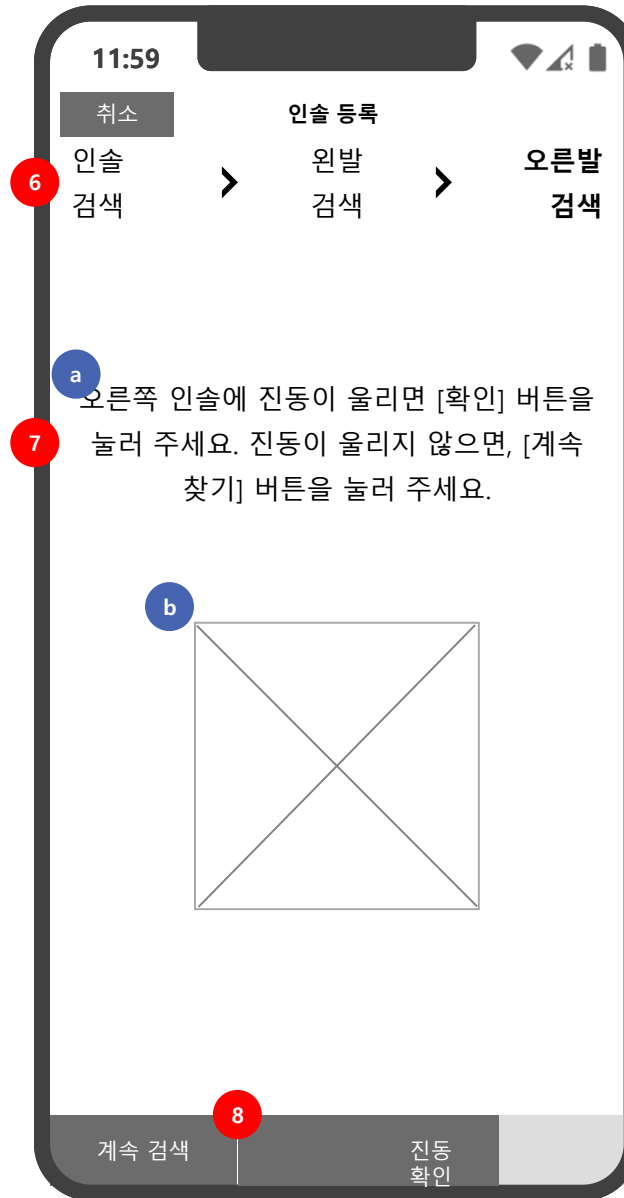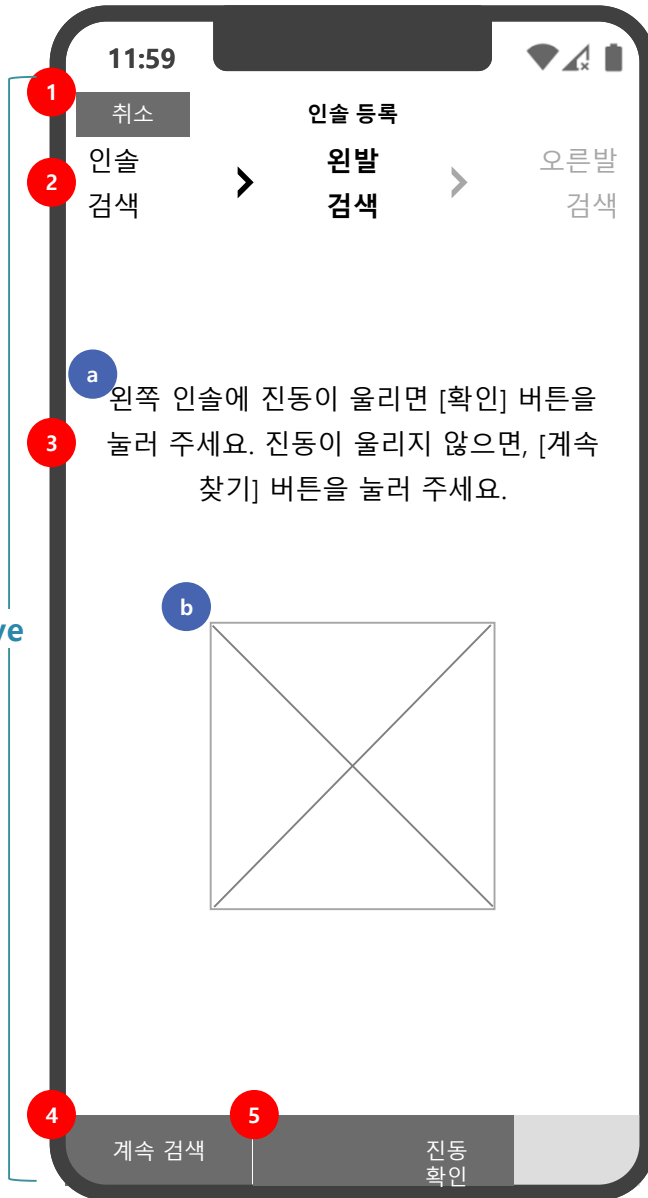


- 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음
- 인솔 등록 프로세스 표시 UI
  - 인솔 등록 전체 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조
  - 5초간 검색, 검색 시 바로 원발 검색 프로세스로 진행, 미검색 시 실패 피드백
- 왼쪽 검색 확인 UI
  - 인솔 확인 안내 문구 출력
  - 인솔 진동을 시각적으로 표현하는 이미지 표시
- ⑤ 버튼의 게이지가 다 채워진 후에 터치 가능
  - 터치 시 검색된 인솔에 진동 명령
- 화면 로드 시 버튼 내 게이지가 왼쪽에서부터 채워지며 왼쪽 인솔에 진동 명령
  - 게이지가 다 채워진 후에 터치 가능
  - 터치 시 오른쪽 진동 명령
- 오른쪽 검색 확인 UI
  - 인솔 확인 안내 문구 출력
  - 인솔 진동을 시각적으로 표현하는 이미지 표시



| Page Description   | 전체 메뉴 > 인솔 관리 > 신규 등록 - 검색 실패 | Screen ID | PT-A-08-3 | Description  |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|--|
| <div><div>11:59</div><div>취소</div><div>인솔 &gt; 왼발 &gt; 오른발<br/>검색    검색    검색</div><div>a 인솔 검색에 실패했습니다.</div><div>다시 한 번 시도해 주세요.</div><div>b</div><div>다시 시도</div></div> <div>native</div> |                               |           |           | <ol style="list-style-type: none"><li>터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 다음</li><li>검색 실패 피드백 UI<ol style="list-style-type: none"><li>인솔 검색 실패 문구 출력</li><li>인솔 검색 실패 상태를 시각적으로 표현하는 이미지 표시</li></ol></li><li>터치 시 인솔 재검색 진행, 검색중 UI 출력</li></ol> |

native

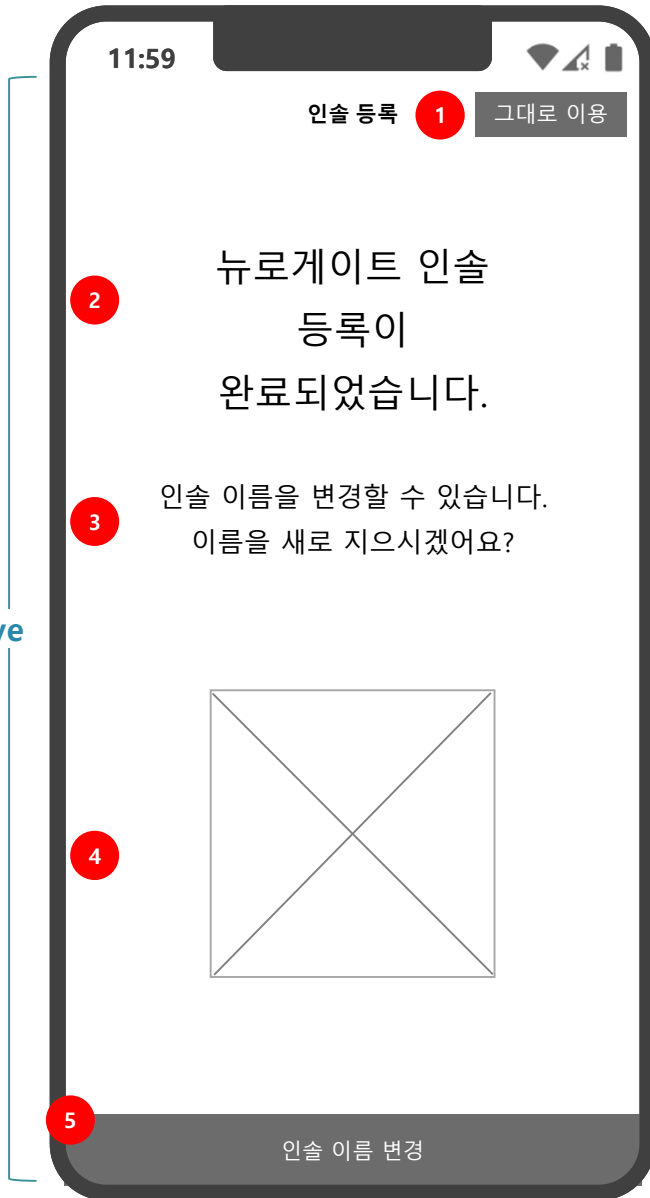

0. 안드로이드의 경우 back 시 창 닫음, "인솔 보정" 화면 로드
1. 터치 시 창 닫음, "보정" 프로세스 진행
2. 인솔 등록 완료 문구 출력
3. 인솔 이름 변경 가능 문구 출력
4. 인솔 연결 완료를 시각적으로 표현하는 이미지 표시
5. 터치 시 이름 변경 페이지 로드

native

11:59

인솔 등록 1 다음에 변경

2 뉴로게이트 인솔 이름 변경


나만의 인솔을 구분하기 쉽도록 변경해 주세요.

3 XS (230~240) 1

4 입력한 이름으로 변경


- 터치 시 페이지 다음, "인솔 정보" 화면 로드
- 인솔 이름 변경 타이틀 및 변경 안내 문구 출력
- 1) 검색된 인솔의 사이즈가 인풋박스에 자동 입력, 기등록 인솔 중 이미 해당 이름이 있는 경우 자동 입력된 이름 뒤에 숫자 추가 입력  
\* ex) XS (230~240) 1
  - 2) 사이즈별 이름 자동 입력 품:  
- XS: XS (230~240)  
- S: S (245~255)  
- M: M (260~270)  
- L: L (275~285)  
- XL: XL (290~300)
  - 3) 모든 문자 입력 가능, 20자 초과 입력 시 입력 불가
- 1) 인솔 이름 입력 창에 입력된 값이 0일 경우 입력한 이름으로 변경 버튼 비활성화 처리
  - 2) 등록된 인솔과 이름 겹칠 시 알럿 메시지 출력  
아래 시트 94번 메시지 출력  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8\\_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276)

native

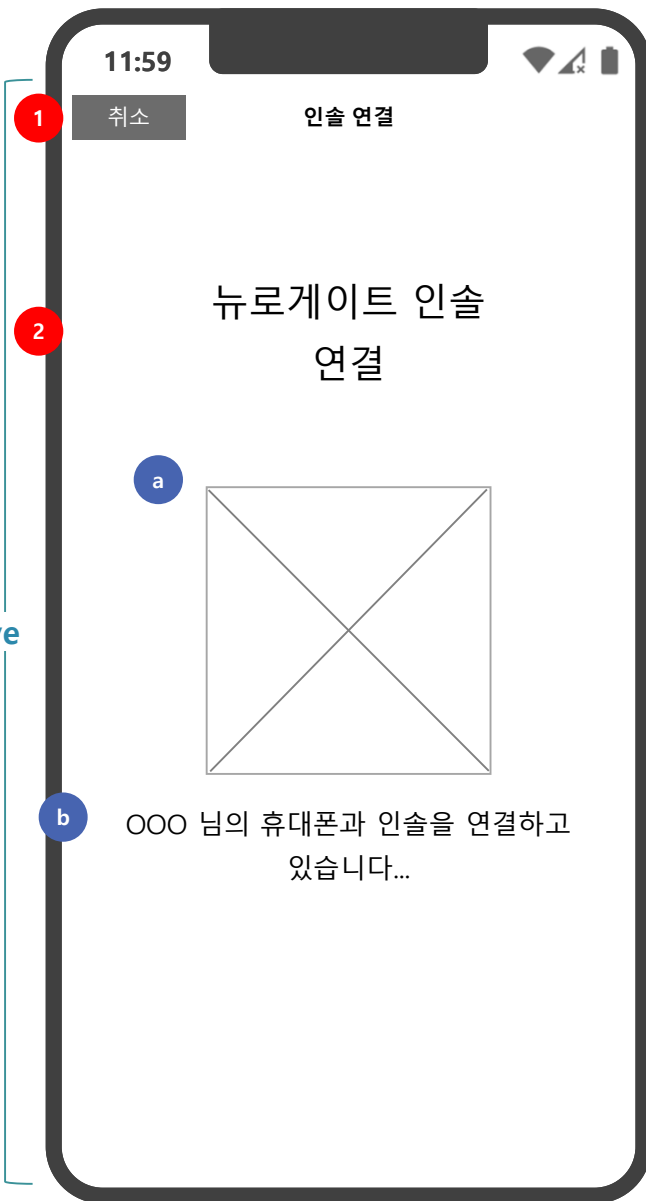


1. 터치 시 연결 중단, "연결 중" 상태 창 닫음
2. 인솔 연결 상태 안내 UI
  - a. 인솔과 디바이스의 연결 시도 액션을 시각적으로 표현하는 애니메이션 또는 gif 표시
  - b. 인솔 연결 중 문구 출력

native

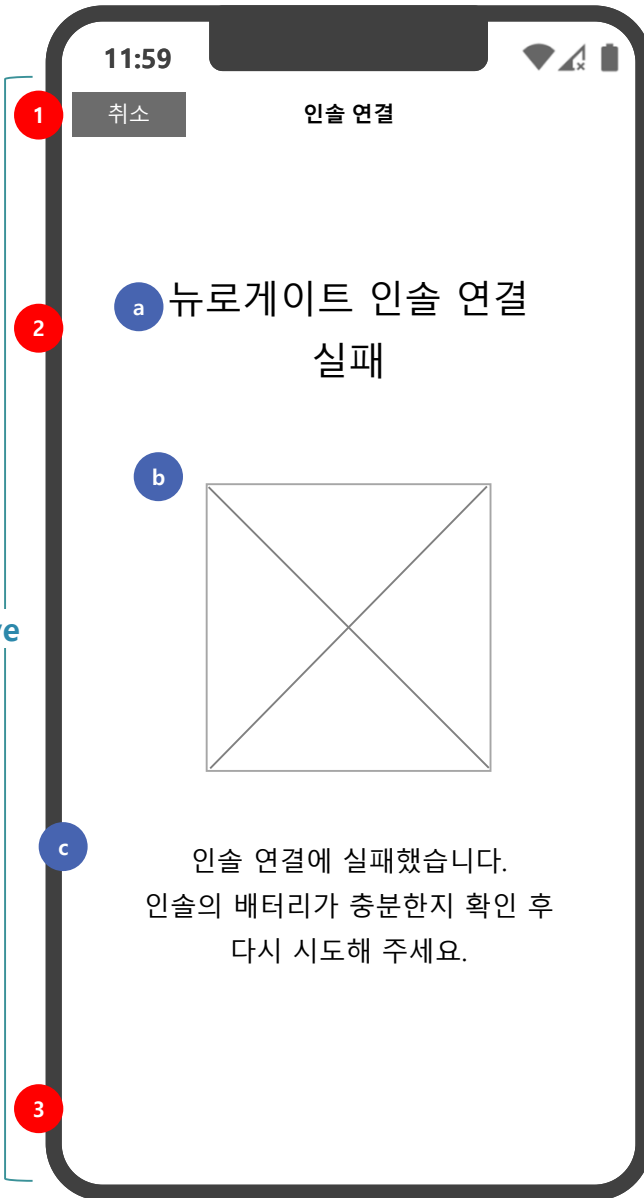

1. 터치 시 연결 중단, 창 닫음
2. 인슐 연결 상태 안내 UI
  - a) 타이틀 출력
  - b) 인슐과 디바이스와의 연결 실패를 시각적으로 표현하는 이미지
  - c) 인슐 연결 실패 피드백 문구 출력
3. 터치 시 인슐 연결 재시도

native

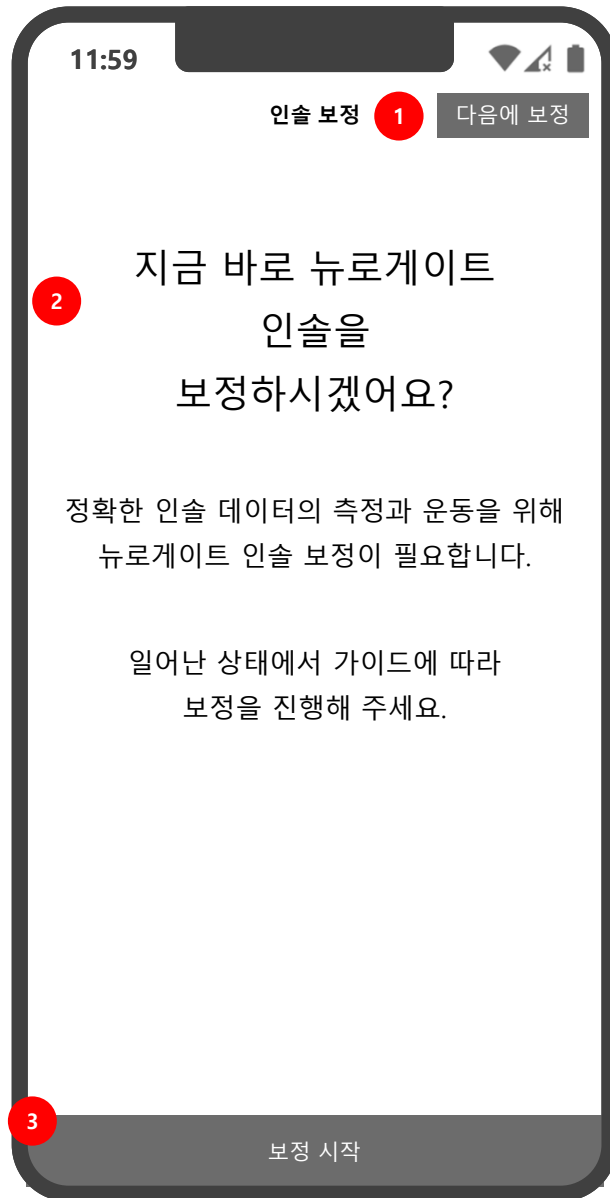



1. 터치 시 페이지 다음, "인솔 정보" 화면 로드
2. 인솔 보정 물음 타이틀 및 안내 문구 출력
3. 터치 시 보정 프로세스 진행

| Page Description   | 전체 메뉴 > 인슐 관리 - 인슐 보정                                       | Screen ID | PT-A-08-9 | Description  |
|--|---|-----------|-----------|--|
| <div data-bbox="20 749 134 782" data-label="Text">native</div> | <div data-bbox="113 142 762 1332" data-label="Image"></div> |           |           | <div data-bbox="1562 95 1999 188" data-label="List-Group"><ol style="list-style-type: none"><li>1. 터치 시 인슐 보정 프로세스 중단, 가이드 닫음</li><li>2. 인슐 보정 가이드 문구 표시</li><li>3. 터치 시 원발 보정 프로세스 진행</li></ol></div> |

| Page Description   | 전체 메뉴 > 인슐 관리 - 인슐 보정 안내                                    | Screen ID | PT-A-08-10 | Description   |
|--|---|-----------|------------|---|
| <div data-bbox="37 753 132 779" data-label="Text">native</div> | <div data-bbox="155 145 762 1332" data-label="Image"></div> |           |            | <div data-bbox="1570 97 1885 187" data-label="List-Group"><ol style="list-style-type: none"><li>1. 터치 시 페이지 닫음</li><li>2. 인슐 보정 가이드 문구 표시</li><li>3. 터치 시 원발 보정 프로세스 진행</li></ol></div> |




native

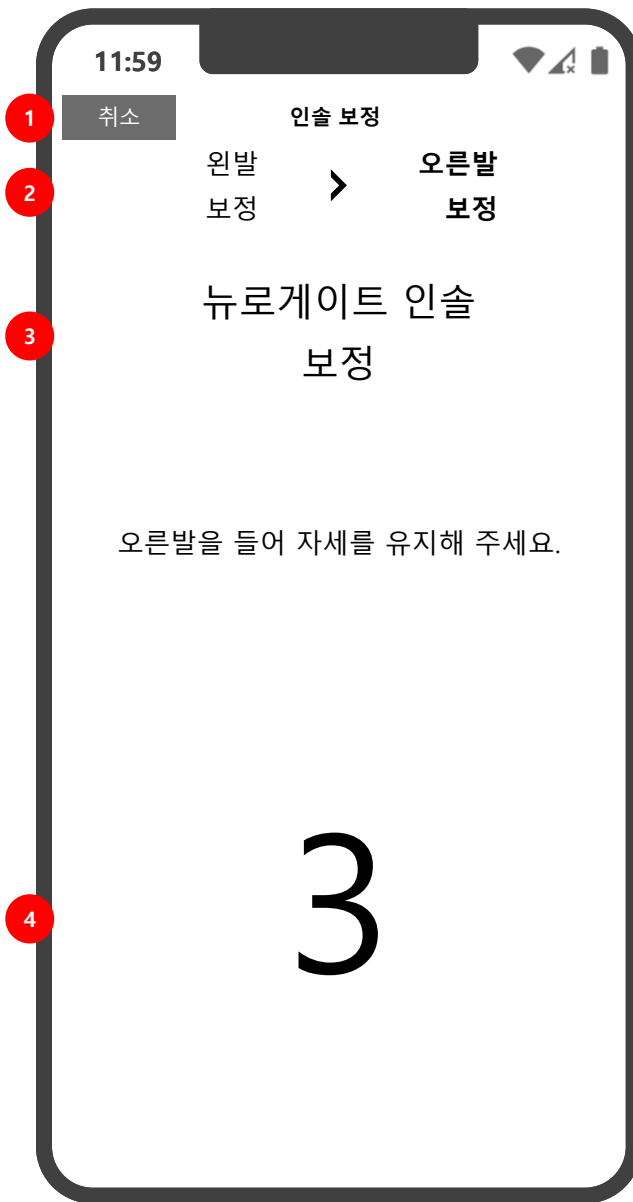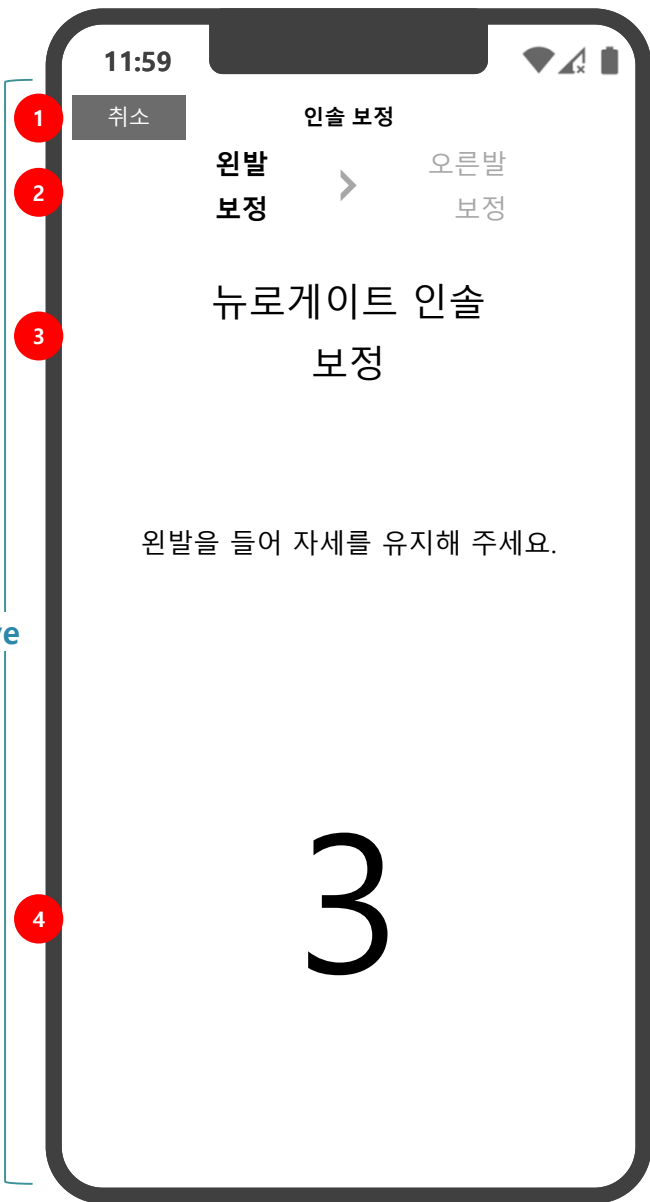


1. 터치 시 인솔 보정 프로세스 중단, 가이드 다음
2. 인솔 보정 프로세스 표시 UI
  - 1) 인솔 왼발/오른발 보정 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조
3. "인솔 보정" 타이틀 및 문구 출력
4.
  - 1) 화면 로드 시 숫자 출력되지 않음
  - 2) 왼발/오른발 인솔에서 측정되는 데이터의 크기의 최소값이 유지될 경우 3초 카운트
  - 3) 3초 카운트 동안 데이터 크기가 변하지 않을 경우 오른발 보정 진행
  - 4) 3초 카운트 동안 데이터 크기가 변할 경우 보정 실패 피드백

native

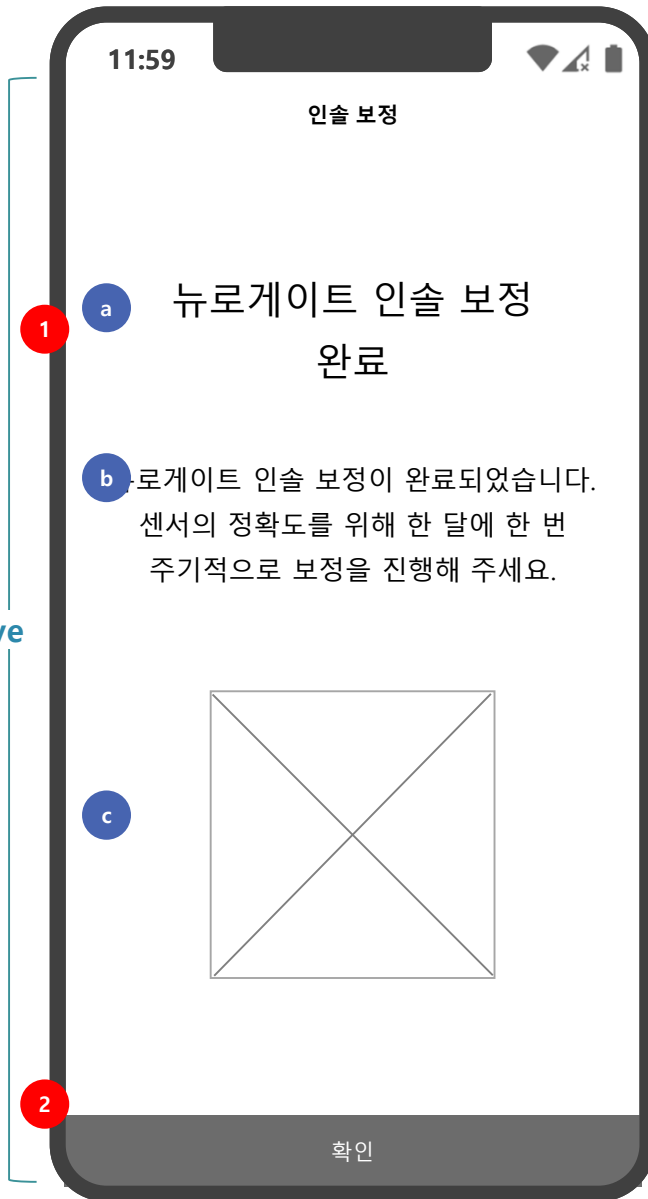

1. 인슐 보정 완료 안내 UI
  - a) 타이틀 출력
  - b) 인슐 보정 완료 문구 출력
  - c) 인슐 보정 완료를 시각적으로 표현하는 이미지 표시
2. 터치 시 창 닫음

native

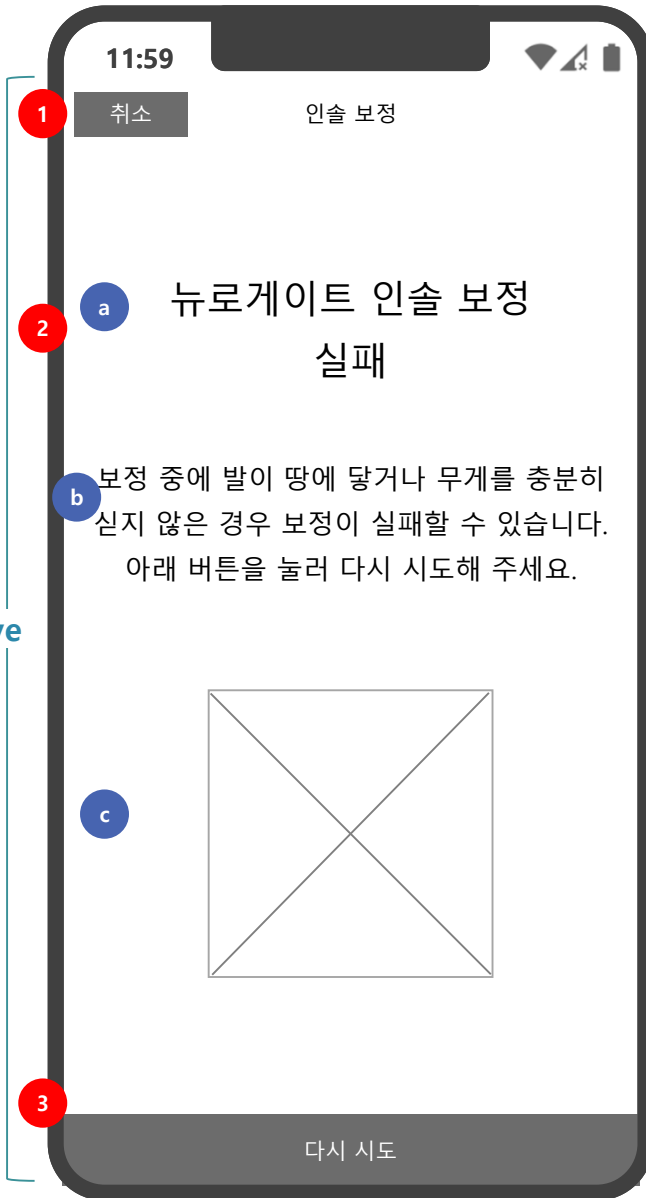

- 터치 시 보정 취소 confirm 출력  
(confirm 메시지 확인은 아래 url 참고)  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8\\_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276)
- 인솔 보정 실패 안내 UI
  - 보정 중 데이터가 변화하거나 연결이 끊겼을 경우 보정 실패 출력
  - a) 타이틀 출력
  - b) 인솔 보정 실패 문구 출력
  - c) 인솔 보정 실패를 시각적으로 표현하는 이미지 표시
- 터치 시 인솔 보정 프로세스 진행
  - 왼쪽 보정 진행
  - 인솔 연결 끊김으로 인한 실패 시 인솔 선택 화면으로 이동
  - 실패 시 메시지 출력(아래 시트 69번)  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8\\_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276)

| Page Description               | 전체 메뉴 > 인솔 관리 - 인솔 정보   | Screen ID | PT-A-08-14 | Description |
|--------------------------------|---|-----------|------------|-------------|
| <div> <div>native</div> </div> | <ol style="list-style-type: none"> <li>터치 시 홈으로 이동</li> <li>터치 시 인솔 보정 가이드 팝업<br/>- 인솔 보정 프로세스 진행</li> <li>인솔 이미지 표시</li> <li>양쪽 인솔의 배터리 잔량 출력:             <ol style="list-style-type: none"> <li>배터리 80~100%</li> <li>배터리 양호 : 50~79%</li> <li>배터리 부족 : 11~49%</li> <li>배터리 충전 필요 : 1~10%</li> </ol> </li> <li>연결된 인솔의 이름 출력</li> <li>터치 시 기존 이름이 입력된 상태로 이름 변경 인풋 필드 팝업</li> <li>인솔 전원 차단 UI:             <ol style="list-style-type: none"> <li>섹션 타이틀</li> <li>off 시 연결 해제 및 인솔 전원 차단</li> <li>전원 off 상황 및 on 가이드</li> </ol> </li> <li>터치 시 인솔 연결 해제 confirm 출력<br/>(confirm 메시지 확인은 아래 url 참고)<br/><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276</a></li> </ol> |           |            |             |

## 종합 결과



진행한 운동 목록 모두 출력  
(session 별 그룹핑하여 출력)

1. 종합 결과
  - APP 사용 기간의 전체 운동 결과 표시
  - 운동 등급, 운동 수행 순위, 운동 요일, 운동별 결과 보기 제공
2. 환영 문구
  - 고객 명 + 환영 문구 표시
  - 운동 시작일, 마지막 운동일 표시
3. 총 운동 횟수, 시간 표시
4. 운동 수행 순위
  - 완료된 운동들의 수행 순위 표시
  - 운동명 길 경우 ... 처리 (최대 글자수는 디자인 시 결정)
  - 5위 까지 표시
  - 전체 순위 Tap 시 전체 리스트 확인 화면으로 이동
5. 운동 수행 요일
  - 완료된 운동들의 수행 요일 순위 표시
  - 5위 까지 표시
  - 더보기 Tap 시 전체 리스트 확인 화면으로 이동
6. 운동별 결과 보기
  - 탭 시 상세 결과 페이지로 이동



가이드 문구 위치 수정  
(2022.01.20)

보행, 밸런스 운동 평균 등급  
삭제  
session 별 운동 적용  
(2022.01.05)

안내문구 추가  
(2022.01.13)

1. UI 현행화  
2. Heel 운동 삭제  
(2022.01.14)

| Page Description   | 홈 > 종합 결과 > 전체 순위 보기 선택 | Screen ID | PT-A-09-1 | Description |      |       |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |   |   |               |   |
|--|-------------------------|-----------|-----------|-------------|------|-------|---|---------------|----|---|---------------|----|---|---------------|----|---|---------------|----|---|---------------|---|---|---------------|---|
| <div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>운동 수행 순위</div><div>2021.10.03 ~ 2021.10.13 기준</div><table><tr><th>순위</th><th>운동 명</th><th>수행 횟수</th></tr><tr><td>1</td><td>[session] 운동명</td><td>33</td></tr><tr><td>2</td><td>[session] 운동명</td><td>32</td></tr><tr><td>3</td><td>[session] 운동명</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>[session] 운동명</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>[session] 운동명</td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td>[session] 운동명</td><td>0</td></tr></table></div></div> <div><div>1. 전체 운동 수행 순위 표시</div><div>2. [session] 운동명은 ... 처리 없이 모두 출력</div><div>전체 운동 리스트는 아래 링크 참조<br/><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ofXnAl35vyDpP1m8pVkV9lNckz5SnSL8iiD69U8TKw4/edit#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ofXnAl35vyDpP1m8pVkV9lNckz5SnSL8iiD69U8TKw4/edit#gid=0</a></div></div> <div><div>session 별 운동 적용<br/>(2022.01.05)</div><div>UI 현행화<br/>(2022.01.14)</div></div> |                         |           |           | 순위          | 운동 명 | 수행 횟수 | 1 | [session] 운동명 | 33 | 2 | [session] 운동명 | 32 | 3 | [session] 운동명 | 15 | 4 | [session] 운동명 | 10 | 5 | [session] 운동명 | 6 | 6 | [session] 운동명 | 0 |
| 순위   | 운동 명                    | 수행 횟수     |           |             |      |       |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |   |   |               |   |
| 1  | [session] 운동명           | 33        |           |             |      |       |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |   |   |               |   |
| 2  | [session] 운동명           | 32        |           |             |      |       |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |   |   |               |   |
| 3  | [session] 운동명           | 15        |           |             |      |       |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |   |   |               |   |
| 4  | [session] 운동명           | 10        |           |             |      |       |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |   |   |               |   |
| 5  | [session] 운동명           | 6         |           |             |      |       |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |   |   |               |   |
| 6  | [session] 운동명           | 0         |           |             |      |       |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |    |   |               |   |   |               |   |

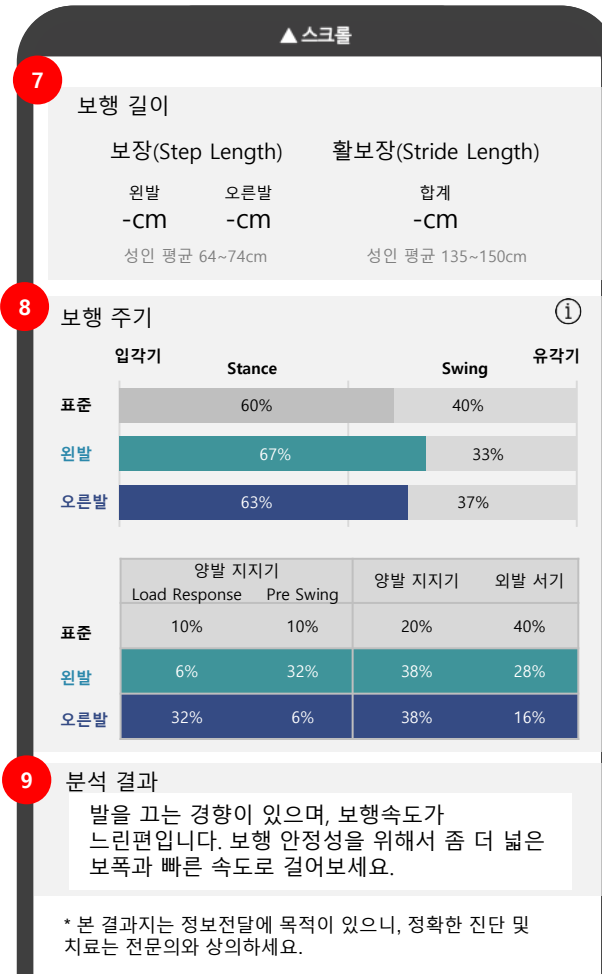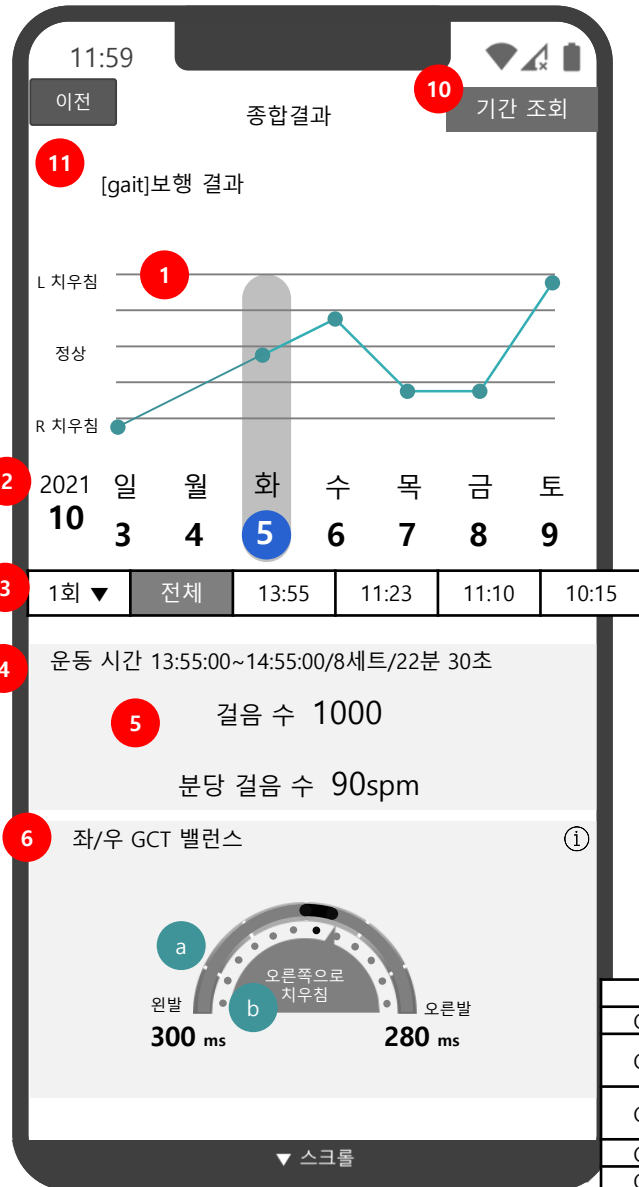

| Gait Case  | 문구   |
|------------|--|
| Gait_Case1 | 양발의 보행 안정성이 좋습니다.  |
| Gait_Case2 | 오른발을 끄는 경향이 있습니다. 오른발의 안정성을 위해 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로 걸어보세요.            |
| Gait_Case5 | 발을 끄는 경향이 있으며, 보행속도가 느린편입니다. 보행 안정성을 위해서 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로 걸어보세요.  |
| Gait_Case6 | 왼발이 안정성이 떨어지며 차고 나가는 능력이 부족합니다.                                    |
| Gait_Case7 | 오른발이 안정성이 떨어지며 차고 나가는 능력이 부족합니다.                                   |
| Gait_Case8 | 왼발을 끄는 경향이 있으며, 보행속도가 느린편입니다. 보행 안정성을 위해서 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로 걸어보세요. |

- 치우침 그래프
  - 일별 치우침을 그래프로 표시
  - 하루 평균 데이터를 이용하여 표시
  - 당일 데이터 점으로 표시, 데이터는 선으로 이어서 표시
  - > 데이터가 없을 경우 표시 하지 않음
- 날짜 선택
  - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
  - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
  - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
  - 보행 운동을 하지 않은 날짜 선택 불가
  - > 해당 날짜 색상 변경
  - 날짜 선택 시 하단에 보행 운동 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
  - 전체, 보행 운동을 한 시간 선택
  - 보행 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
  - 2건 이상일 때 표시
  - 전체 : 선택된 날의 보행 운동 전체 데이터 평균
  - 시간 : 보행 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
  - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 세트 표시, 오늘 총 보행 운동 시간
  - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 시간 표시
- 걸음 데이터
  - 운동 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 보행 길이
  - 신규 인솔에서 제공하는 데이터
  - 신규 인솔 판매 전까지 미표시
  - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 지면 접촉 시간
  - 좌우 밸런스 및 분석 결과 표시
  - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
  - a. 좌우 게이지: 가운데 50을 중심으로 좌우 최대 100의 게이지 채워짐
  - b. 도트 게이지: a 게이지 채워지는 정도에 맞춰 좌우 최대 6개가 채워짐
  - \* 기준(소수점 둘째 자리 버림):
  - 50~57.9 : ●, 58~66.9 : ●●, 67~74.9 : ●●●, 75~82.9 : ●●●●, 83~90.9 : ●●●●●, 91~100.0 : ●●●●●●
- 보행 주기
  - 운동 시간 내 보행 주기 표시
  - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 분석
  - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
  - 하단 보행 분석 문구 참조
- 기간 조회
  - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
  - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동
11. "[session] 운동명 결과"로 타이틀 출력  
걸 경우 .. 처리


가이드 문구  
타이틀  
(2022.01.13)

회 셀렉트박스 추가  
(2022.01.18)

session 별 운동 적용  
(2022.01.05)

안내문구 추가  
(2022.01.13)



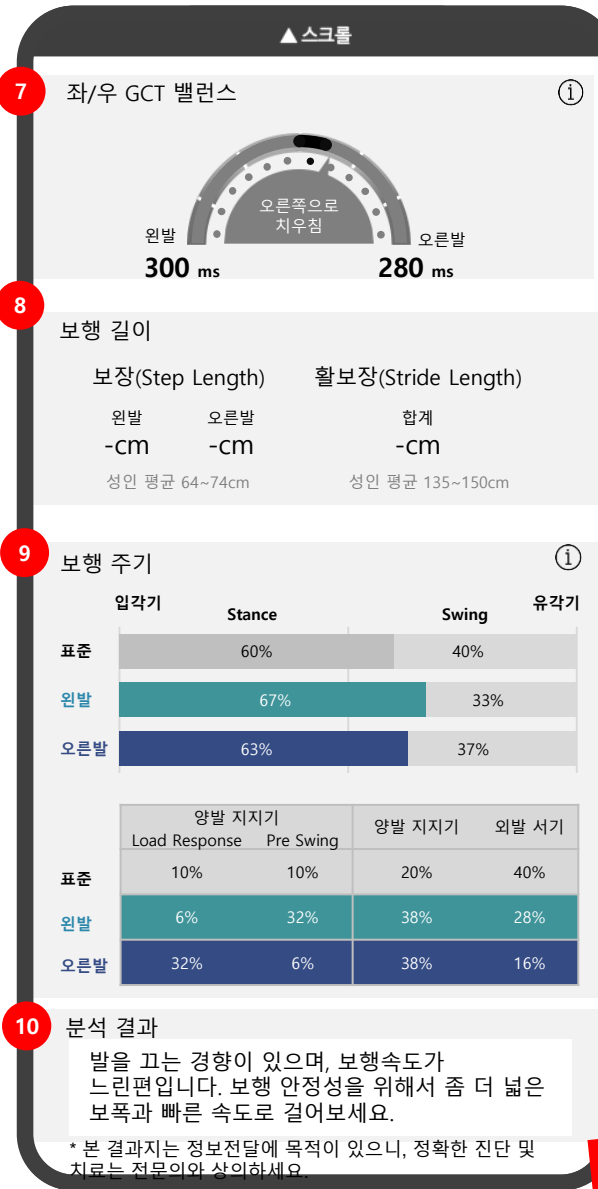

- 치우침 그래프
  - 일별 치우침을 그래프로 표시
  - 하루 평균 데이터를 이용하여 표시
  - 당일 데이터 점으로 표시, 데이터는 선으로 이어서 표시
  - > 데이터가 없을 경우 표시 하지 않음
- 날짜 선택
  - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
  - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
  - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
  - 보행 운동을 하지 않은 날짜 선택 불가
  - > 해당 날짜 색상 변경
  - 날짜 선택 시 하단에 보행 운동 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
  - 전체, 보행 운동을 한 시간 선택
  - 보행 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
  - 2건 이상일 때 표시
  - 전체 : 선택된 날의 보행 운동 전체 데이터 평균
  - 시간 : 보행 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
  - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 세트 표시, 오늘 총 보행 운동 시간
  - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 시간 표시
- 걸음 데이터
  - 운동 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 압력 중심 이동 패턴
  - 운동 시간 동안 압력 중심 이동 패턴 표시
  - 패턴 Tap 시 해당 세트의 운동 영상 or 족저압 조회 화면으로 이동
- 좌/우 GCT 밸런스
  - 좌우 밸런스 및 분석 결과 표시
  - 분석 결과 하단 보행 밸런스 등급 문구 참조
  - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 길이
  - 신규 인솔에서 제공하는 데이터
  - 신규 인솔 판매 전까지 미표시
  - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 주기
  - 측정 시간 내 보행 주기 표시
  - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 분석
  - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
  - 하단 보행 분석 문구 참조
- 기간 조회
  - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
  - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동

가이드 문구 위치 수정/  
타일을 영역 변경  
(2022.01.20)

안내문구 추가  
(2022.01.13)

회 셀렉트박스 추가  
(2022.01.18)

11:59

이전 종합결과 7 기간 조회

[밸런스] 운동명 결과

2021.10

일 월 화 수 목 금 토

3 4 5 6 7 8 9

2 1회 ▼ 전체 1세트 2세트 3세트 4세트 5세트 6세트

3 운동 시간 13:55:00~14:55:00/8세트

4 흔들림 정도 외발 서기 시간

7% 00초

추천 : 10% 이하

5 자세 분석

평균 100

6 분석 결과

지지하는 다리쪽 골반이 바깥쪽으로 빠지거나 무너졌을 확률이 높습니다.

\* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있으니, 정확한 진단 및 치료는 전문의와 상의하세요.

1. 날짜 선택
  - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
  - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
  - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
  - 날짜 선택 시 하단에 운동 시간 및 전체 표시
2. 시간 선택
  - 전체, 선택된 운동을 한 시간 선택
  - 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
  - 2건 이상일 때 표시
  - 전체 : 선택된 날의 선택 운동 전체 데이터 평균
  - 시간 : 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
3. 운동 시간
  - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
  - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
4. 흔들림 정도, 외발 서기 시간
  - 흔들림 정도, 외발 서기 시간 표시
5. 자세 분석
  - 운동 점수 표시
  - > 평균 : 70 고정
  - 바 색상
  - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
6. 밸런스 분석
  - 밸런스 계산하여 문구 표시
7. 기간 조회
  - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
  - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동


가이드 문구 위치 수정/  
타이틀 영역 변경  
(2022.01.20)

| 분석 포인트    | 요약문구   |
|-----------|--|
| 균형        | 균형감이 매우 좋습니다.  |
| 내측 쏠림     | (내측 쏠림) 골반이 지지하는 다리 안쪽으로 틀어졌거나 반대 쪽 골반이 올라가 있을 확률이 높습니다. |
| 외측 쏠림     | (외측 쏠림) 지지하는 다리쪽 골반이 바깥쪽으로 빠지거나 무너졌을 확률이 높습니다.           |
| 흔들림 (불균형) | 흔들림이 크고 균형감이 떨어집니다.                                      |

session 별 운동 적용  
(2022.01.05)

안내문구 추가  
(2022.01.13)

회 셀렉트박스 추가  
(2022.01.18)

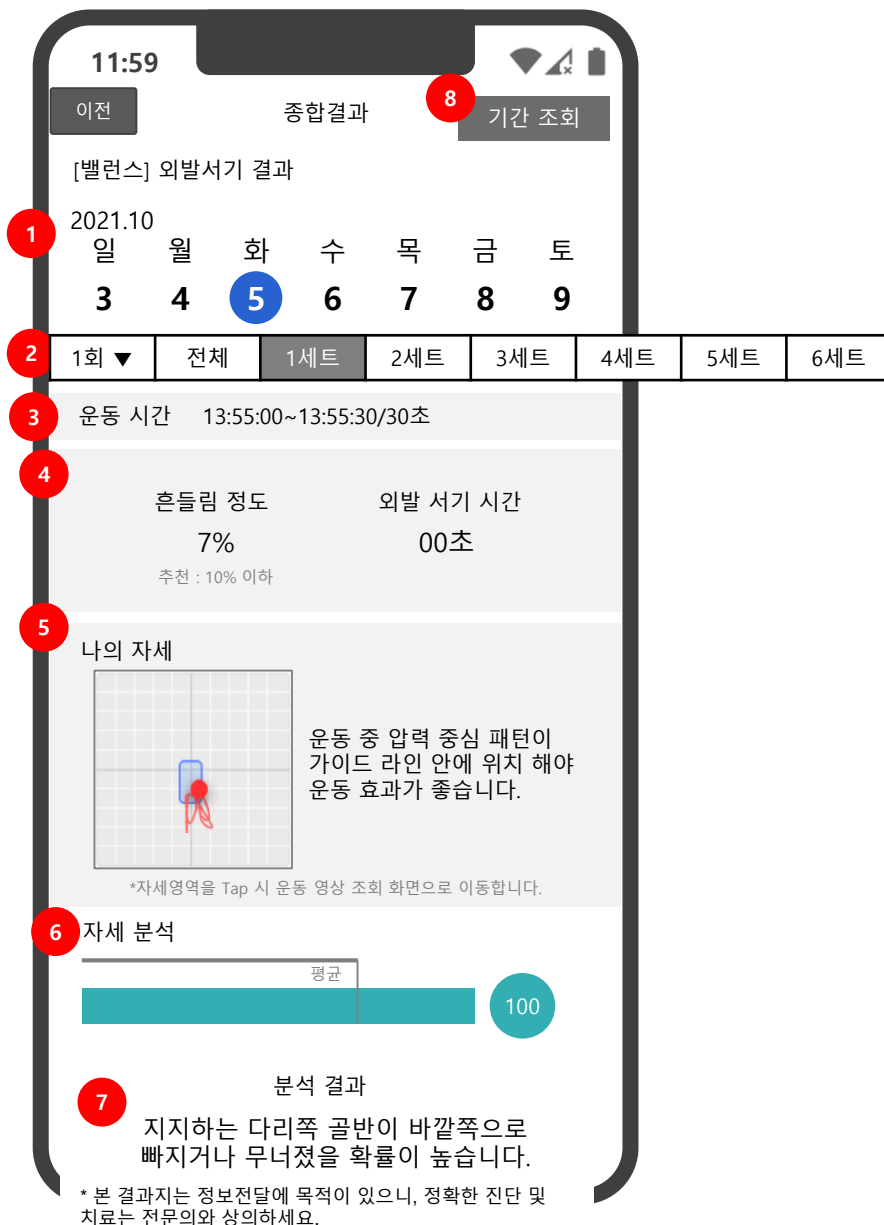

가이드 문구 위치 수정/  
타이틀 영역 변경  
(2022.01.20)

1. 날짜 선택
  - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
  - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
  - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
  - 날짜 선택 시 하단에 운동 시간 및 전체 표시
2. 시간 선택
  - 전체, 선택된 운동을 한 시간 선택
  - 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
  - 2건 이상일 때 표시
  - 전체: 선택된 날의 선택 운동 전체 데이터 평균
  - 시간: 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
3. 운동 시간
  - 전체: 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
  - 시간: 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
4. 흔들림 정도, 외발 서기 시간
  - 흔들림 정보, 외발 서기 시간 표시
5. 나의 자세
  - cop 이동 패턴 표시
  - 패턴 Tap 시 해당 세트의 운동 영상 or 족저압 조회 화면으로 이동
6. 자세 분석
  - 운동 점수 표시
  - > 평균: 70 고정
  - 바 색상
  - > 70 이상: 블루, 70 미만: 주황
7. 밸런스 분석
  - 밸런스 계산하여 문구 표시
8. 기간 조회
  - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
  - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동

| 분석 포인트    | 요약문구   |
|-----------|--|
| 균형        | 균형감이 매우 좋습니다.  |
| 내측 쓸림     | (내측 쓸림) 골반이 지지하는 다리 안쪽으로 틀어졌거나 반대 쪽 골반이 올라가 있을 확률이 높습니다. |
| 외측 쓸림     | (외측 쓸림) 지지하는 다리쪽 골반이 바깥쪽으로 빠지거나 무너졌을 확률이 높습니다.           |
| 흔들림 (불균형) | 흔들림이 크고 균형감이 떨어집니다.                                      |

회 셀렉트박스 추가  
(2022.01.18)

안내문구 추가  
(2022.01.13)

11:59

이전 종합결과 7 기간 조회

[밸런스] 운동명 결과

2021.10

1 일 월 화 수 목 금 토

3 4 5 6 7 8 9

2 1회 ▼ 전체 1세트 2세트 3세트 4세트 5세트 6세트

3 운동 시간 13:55:00~14:55:00/8세트

4 평균 밸런스

좌 : 우 앞 : 뒤

50 :50 47 :53

표준 50 :50 표준 40 :60

5 자세 분석

평균

100

6 분석 결과

오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.

\* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있으니, 정확한 진단 및 치료는 전문의와 상의하세요.

## 제자리 서기

| 분석 포인트               | 요약 문구                        |
|----------------------|------------------------------|
| 정 중앙에 고정 (GOOD)      | 올바른 밸런스를 보입니다.               |
| 왼쪽 치우침               | 왼쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.           |
| 오른쪽 치우침              | 오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.          |
| 앞쪽 치우침               | 앞쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.           |
| 뒤쪽 치우침               | 뒤쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.           |
| 왼쪽 앞쪽 치우침            | 왼쪽으로 치우치고 앞쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.  |
| 왼쪽 뒤쪽 치우침            | 왼쪽으로 치우치고 뒤쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.  |
| 오른쪽 앞쪽 치우침           | 오른쪽으로 치우치고 앞쪽으로 쏠린 경향을 보입니다. |
| 오른쪽 뒤쪽 치우침           | 오른쪽으로 치우치고 뒤쪽으로 쏠린 경향을 보입니다. |
| 앞뒤 편차 심한 경우          | 앞뒤 흔들림이 심한 경향을 보입니다.         |
| 좌우 편차 심한 경우          | 좌우 흔들림이 심한 경향을 보입니다.         |
| 좌/우, 앞/뒤 편차 모두 심한 경우 | 좌우, 앞뒤 모두 흔들림이 심한 경향을 보입니다.  |

## 스쿼트

| 분석 포인트  | 요약 문구                    |
|---------|--------------------------|
| 올바른 자세  | 올바른 움직임을 보입니다.           |
| 왼쪽 치우침  | 왼쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.     |
| 오른쪽 치우침 | 오른쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.    |
| 좌/우 흔들림 | 좌/우 지나치게 흔들리는 움직임을 보입니다. |
| 뒤쪽 치우침  | 뒤쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.     |
| 앞쪽 치우침  | 앞쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.     |
| 앞/뒤 흔들림 | 앞/뒤 지나치게 흔들리는 움직임을 보입니다. |

1. 날짜 선택
  - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
  - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
  - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
  - 날짜 선택 시 하단에 운동 시간 및 전체 표시
2. 시간 선택
  - 전체, 선택된 운동을 한 시간 선택
  - 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
  - 2건 이상일 때 표시
  - 전체 : 선택된 날의 선택 운동 전체 데이터 평균
  - 시간 : 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
3. 운동 시간
  - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
  - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
4. 평균 밸런스
  - 좌/우, 앞/뒤 밸런스 표시
5. 자세 분석
  - 운동 점수 표시
  - > 평균 : 70 고정
  - 바 색상
  - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
6. 밸런스 분석
  - 밸런스 계산하여 문구 표시
7. 기간 조회
  - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
  - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동

회 셀렉트박스 추가  
(2022.01.18)

안내문구 추가  
(2022.01.13)

가이드 문구 위치 수정/  
타이틀 영역 변경  
(2022.01.20)




- 날짜 선택
  - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
  - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
  - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
  - 날짜 선택 시 하단에 운동 시간 및 전체 표시
- 운동 시간
  - 전체 : 전체 운동 시간의 합(예 : 운동을 4분씩 3세트를 수행했으면 -> 운동시간 12:00 / 3세트)
- 시간 선택
  - 전체, 각 세트 선택
  - 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
  - 2건 이상일 때 표시
  - 전체 : 총합(총 보행수, 초과 보행수, 운동 진행한 세트)
- 세트 별 잘못된 보행 수 카운트 체크
  - X축 : 총 10세트 기준
  - Y축 : 0부터 가장 많은 횟수 최대값으로 표현
  - 진행하지 않은 세트는 공란으로 표기
- 모든 세트의 보행수와 기준치 초과한 보행 수의 총합 출력

그래프 정의 및 형태 변경  
(2022.02.09)

운동 시간 / 그래프 기능 정의  
(2022.02.07)

부분부하보행 종합결과 신규 화면  
부분부하보행은 세트 별 운동 없음  
기간조희 제공하지 않음  
(2022.02.03)

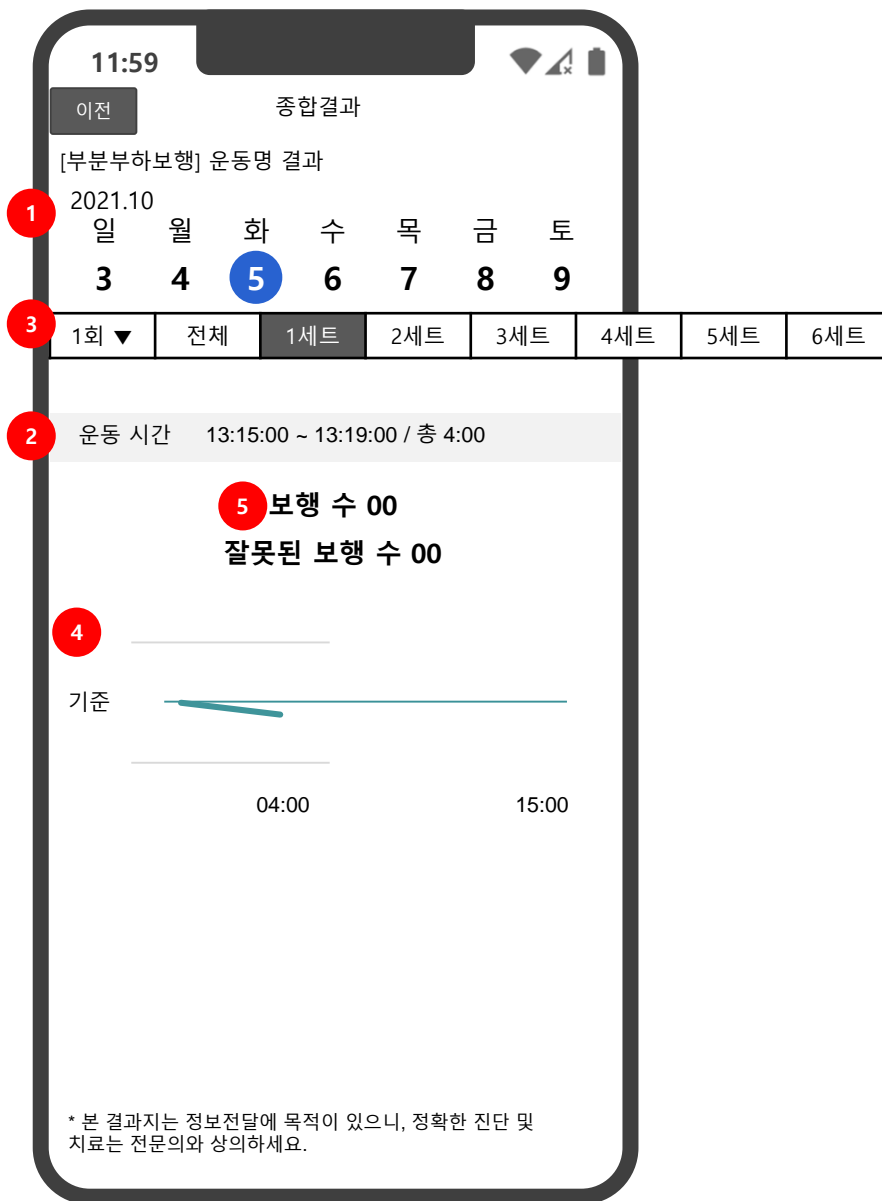

- 날짜 선택
  - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
  - 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
  - 오늘 이후 날짜 선택 안됨
  - 날짜 선택 시 하단에 운동 시간 및 전체 표시
- 세트 : 각 세트의 경우 세트 별 운동 시간 표시
- 시간 선택
  - 전체, 각 세트 선택
  - 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
  - 2건 이상일 때 표시
  - 전체 : 총합(총 보행수, 초과 보행수, 운동 진행한 세트)
- 선택한 세트의 결과만 출력
 

y축

  - 기준 값 표현
  - 수치는 그래프에 별도 표기 하지 않음
  - 기준값이 중앙에 보여지고 기준값 기준 상위 120%까지 표현

x축

  - 최대 15분을 기준
  - 운동한 시간 만큼만 그래프와 시간이 표현되며 운동하지 않은 나머지 시간은 공란(그래프 출력되지 않음)으로 보여짐
- 해당 세트의 보행수와 기준치 초과와 보행 수의 총합 출력

운동 시간 / 그래프 기능 정의  
(2022.02.07)

부분부하보행 종합결과 신규 화면  
기간조회 제공하지 않음  
(2022.02.03)

11:59

이전

종합결과

8

기간 조회

[밸런스] 운동명 결과

2021.10

1

일

월

화

수

목

금

토

3

4

5

6

7

8

9

2

1회 ▼

전체

1세트

2세트

3세트

4세트

5세트

6세트

3

운동 시간

13:55:00~13:55:30/30초

4

평균 밸런스

좌 : 우

앞 : 뒤

50 : 50

47 : 53

표준 50 : 50

표준 40 : 60

5

나의 자세

운동 중 압력 중심 패턴이 가이드 라인 안에 위치 해야 운동 효과가 좋습니다.

\*자세영역을 Tap 시 운동 영상 조회 화면으로 이동합니다.

6

자세 분석

평균

100

7

분석 결과

오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.

## 제자리 서기

| 분석 포인트               | 요약 문구                        |
|----------------------|------------------------------|
| 정 중앙에 고정 (GOOD)      | 올바른 밸런스를 보입니다.               |
| 왼쪽 치우침               | 왼쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.           |
| 오른쪽 치우침              | 오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.          |
| 앞쪽 치우침               | 앞쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.           |
| 뒤쪽 치우침               | 뒤쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.           |
| 왼쪽 앞쪽 치우침            | 왼쪽으로 치우치고 앞쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.  |
| 왼쪽 뒤쪽 치우침            | 왼쪽으로 치우치고 뒤쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.  |
| 오른쪽 앞쪽 치우침           | 오른쪽으로 치우치고 앞쪽으로 쏠린 경향을 보입니다. |
| 오른쪽 뒤쪽 치우침           | 오른쪽으로 치우치고 뒤쪽으로 쏠린 경향을 보입니다. |
| 앞뒤 편차 심한 경우          | 앞뒤 흔들림이 심한 경향을 보입니다.         |
| 좌우 편차 심한 경우          | 좌우 흔들림이 심한 경향을 보입니다.         |
| 좌/우, 앞/뒤 편차 모두 심한 경우 | 좌우, 앞뒤 모두 흔들림이 심한 경향을 보입니다.  |


## 스쿼트

| 분석 포인트  | 요약 문구                    |
|---------|--------------------------|
| 올바른 자세  | 올바른 움직임을 보입니다.           |
| 왼쪽 치우침  | 왼쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.     |
| 오른쪽 치우침 | 오른쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.    |
| 좌/우 흔들림 | 좌/우 지나치게 흔들리는 움직임을 보입니다. |
| 뒤쪽 치우침  | 뒤쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.     |
| 앞쪽 치우침  | 앞쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.     |
| 앞/뒤 흔들림 | 앞/뒤 지나치게 흔들리는 움직임을 보입니다. |

- 날짜 선택
  - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
  - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
  - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
  - 날짜 선택 시 하단에 운동 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
  - 전체, 선택된 운동을 한 시간 선택
  - 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
  - 2건 이상일 때 표시
  - 전체 : 선택된 날의 선택 운동 전체 데이터 평균
  - 시간 : 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
  - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
  - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
- 평균 밸런스
  - 좌/우, 앞/뒤 밸런스 표시
- 나의 자세
  - cop 이동 패턴 표시
  - 패턴 Tap 시 해당 세트의 운동 영상 or 족저압 조회 화면으로 이동
- 자세 분석
  - 운동 점수 표시
  - > 평균 : 70 고정
  - 바 색상
  - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
- 밸런스 분석
  - 밸런스 계산하여 문구 표시
- 기간 조회
  - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
  - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동

회 선택박스 추가  
(2022.01.18)안내문구 추가  
(2022.01.13)가이드 문구 위치 수정/  
타이틀 영역 변경  
(2022.01.20)

\* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있으니, 정확한 진단 및 치료는 전문의와 상의하세요.

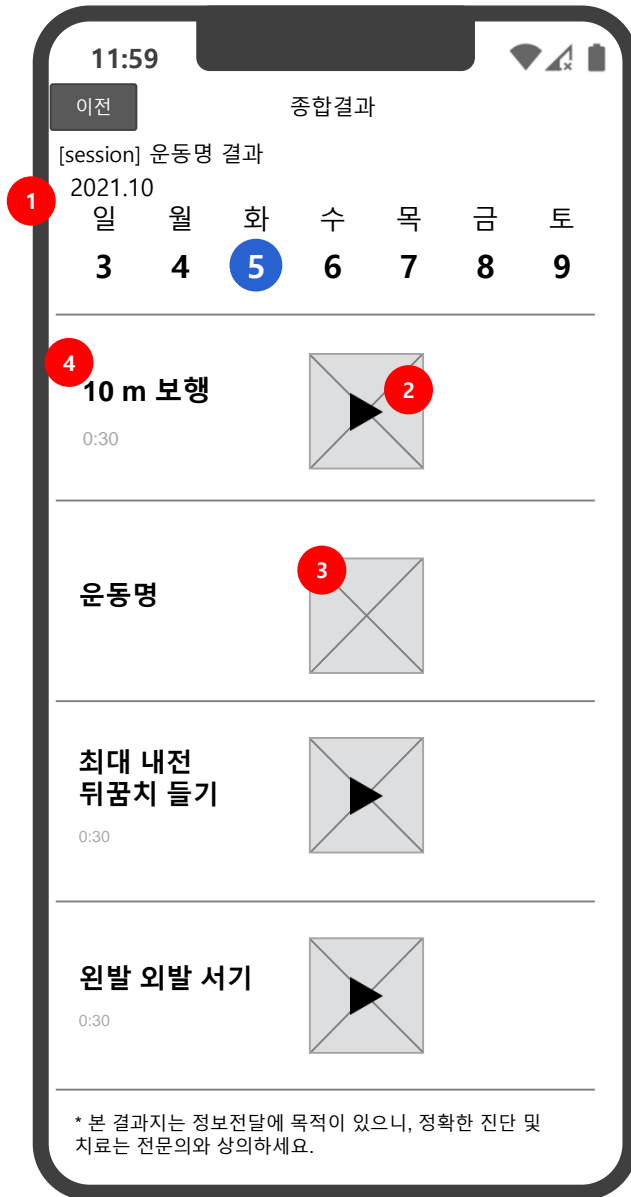

플레이 버튼 클릭 시 다운로드 진행

## 1. 날짜 선택

- 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
- > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
- > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
- 날짜 선택 시 하단에 운동 시간 및 전체 표시

## 2. 동영상 촬영을 한 경우 촬영한 동영상의 첫 프레임 출력

동영상 썸네일 터치 시 강제 다운로드 진행

## 3. 동영상 촬영이 없는 경우 터치 시 즉저압 결과 화면으로 이동

## 4. 운동명 모두 출력

신규 session(발목, 발뒤꿈치, 근육감소증, 부분부하보행운동)별 운동은 기간조회 기능 제공하지 않음

운동 리스트는 아래 링크 참조

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ofXnAl35vyDpP1m8pVkv9lNckz5SnSL8iiD69U8TKw4/edit#gid=0>

안내문구 추가  
(2022.01.13)

다운로드 데이터 정의  
(2022.01.18)

가이드 문구 위치 수정/  
타이틀 영역 변경  
(2022.01.20)

session 별 운동 적용  
분석 결과 알고리즘 없을 경우 상세화면  
조회만 가능  
(2022.01.05)



11:59

이전 기간 조회

1 0000-00-00 0000-00-00

2 조회

운동 별 결과 출력  
(결과 화면은 이후 페이지 참조)

\* 본 결과지는 정보전달에 목적이 있으니, 정확한 진단 및 치료는 전문의와 상의하세요.

a

안내



조회는 최대 30일까지 조회 할 수 있습니다.

확인

1. 시작 종료일 선택
    - 시작 및 종료 날짜 표시
      - > 시작 날짜, 종료 날짜 영역 Tap 시 달력 표시
      - > 달력 노출 시 어제 날짜 포커스
      - > 시작 날짜/종료 날짜를 오늘 및 오늘 이후 날짜로 선택 불가
    - 전체 기간 최대 30일까지 선택 가능
      - > 30일 이상 시 @팝업 표시
  - 기간 조회 화면 진입 시 오늘 포함 30일 이전의 날짜까지 조회 결과 화면 표시
  - 기간 조회는 앱 서비스 사용 시점부터 전부 가능
2. 조회
    - 조회 Tap 시 하단에 결과 표시

안내문구 추가  
(2022.01.13)

가이드 문구 위치 수정  
(2022.01.20)

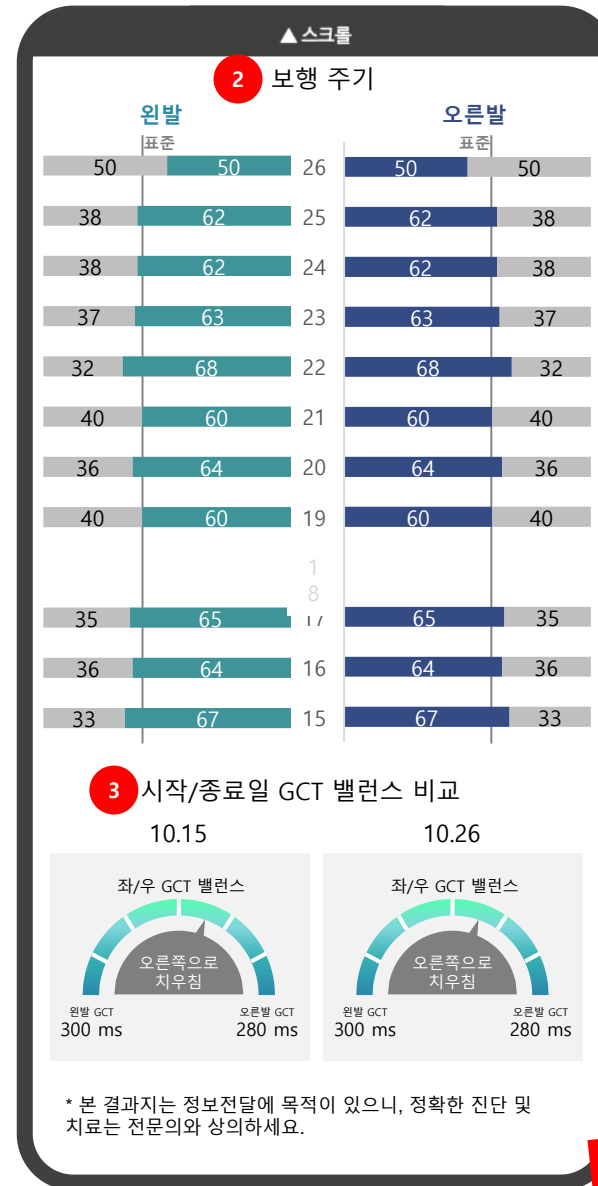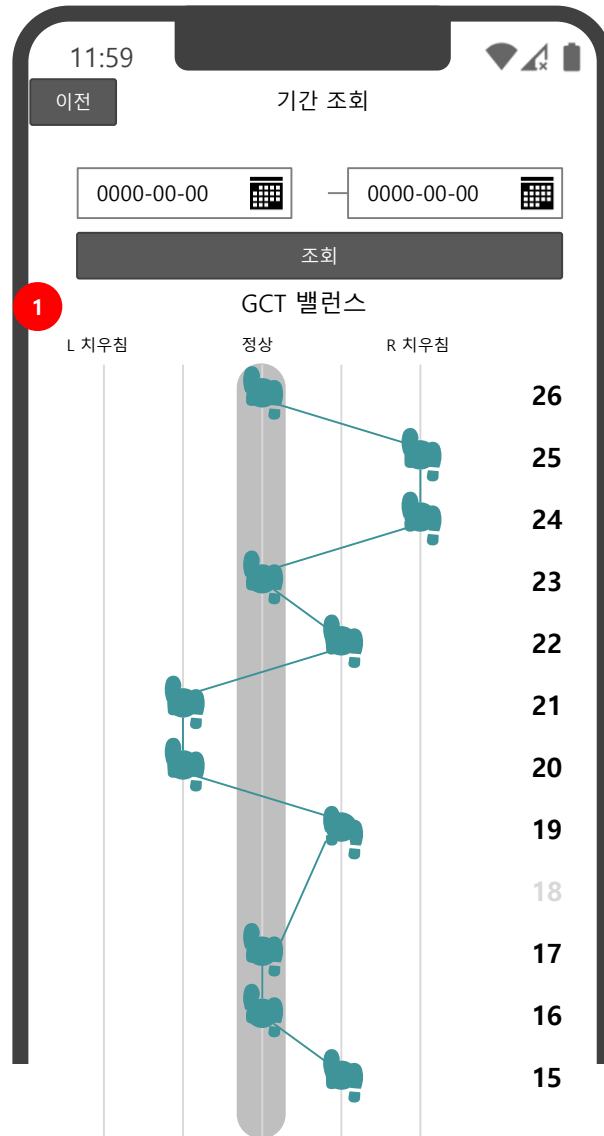


- GCT 밸런스
  - 5단계 표시
    - > 1 : 심한 왼쪽 치우침
    - > 2 : 약한 왼쪽 치우침
    - > 3 : 정상
    - > 4 : 약한 오른쪽 치우침
    - > 5 : 심한 오른쪽 치우침
  - 정상 라인에 별도 색상 필요
  - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
  - 그래프는 전날과 다음날 이어서 표시
  - 상하 스와이프를 이용하여 날짜 이동
- 보행주기
  - 원발, 오른발 100% 가로 그래프 표시
  - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
  - 그래프 빈 부분으로 표시
  - 상하 스와이프를 이용하여 날짜 이동
- 시작/종료일 GCT 밸런스 비교
  - 조회 시작 및 종료일 GCT 밸런스 표시

부분부하보행 기간 조회 결과 추가  
(2022.02.03)

안내문구 추가  
(2022.01.13)

가이드 문구 위치 수정  
(2022.01.20)


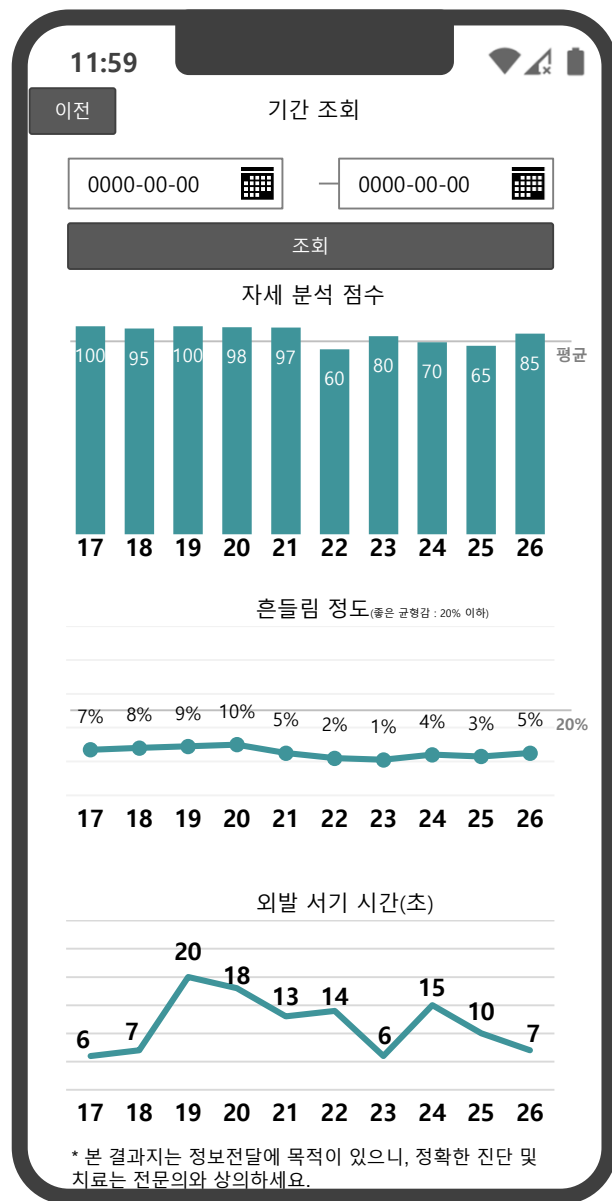


- 자세 분석 점수
  - 선택 운동의 자세 점수 표시
  - 평균 : 70점
  - > 평균 이하 점수 주황색 표시
  - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
  - > 그래프 빈 부분으로 표시
  - 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
- 흔들림 정도
  - 단위 : %
  - 흔들림 퍼센트 그래프 표시
  - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
  - > 그래프 빈 부분으로 표시
  - 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
- 외발 서기 시간
  - 단위 : 초
  - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
  - > 그래프 빈 부분으로 표시
  - 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동

안내문구 추가  
(2022.01.13)

가이드 문구 위치 수정  
(2022.01.20)

설정

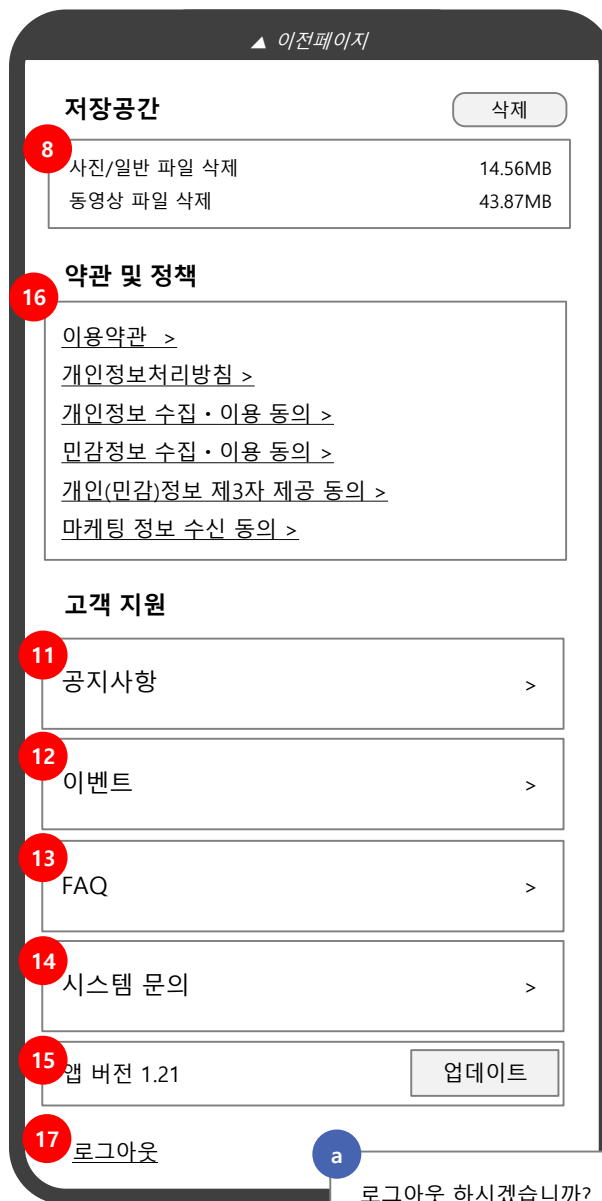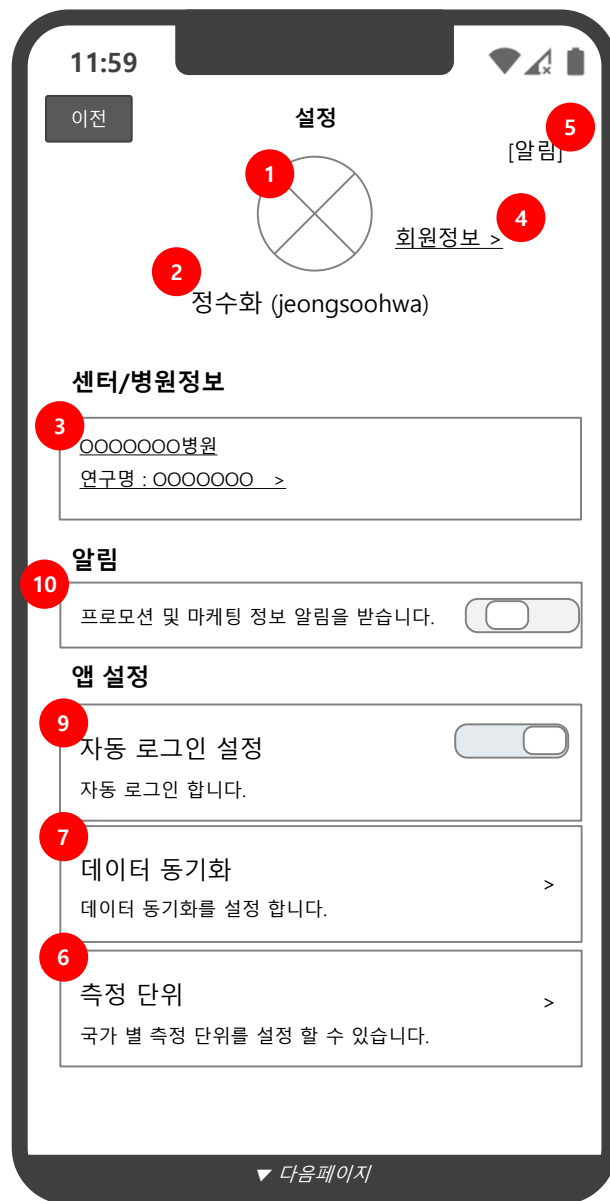

a

로그아웃 하시겠습니까?

취소 확인

1. 등록된 이미지 출력
2. 회원명, 센터 정보  
- 한국 회원 : 이름 전체, 국외 회원 : 이름만 표시
3. 센터 매칭 되었을 때 센터 명 표시  
> 매칭된 센터가 연구용 센터 일 경우  
병원 명 하단에 연구 명 표시  
- 병원 정보 화면으로 이동 / 일반 환자의  
경우 연구명 나오지 않음
4. 회원정보 상세 화면으로 이동-
5. 알림 메시지함으로 이동
6. 측정 단위 설정 화면으로 이동
7. 데이터 동기화 설정 화면으로 이동
8. 삭제 시 앱 폴더 내 저장된 사진/일반  
파일/동영상 파일 전체 삭제
9. 로그인 시 자동 로그인 체크된 경우 on  
상태 유지  
off 시 앱 종료 후 실행 시 로그인 화면부터  
진입
10. 일반 알림 설정으로 기본 알림 off로 설정  
(필수 알림에 대한 알림 설정 관리는  
별도로 존재하지 않으며 선택  
사항(광고성)에 대한 알림 설정만 관리함)
11. 공지사항 페이지로 이동
12. 이벤트 페이지로 이동
13. FAQ 페이지로 이동
14. 메일 실행
15. 최신 버전일 경우 '최신버전'표시, 버튼  
비활성화처리  
최신버전
16. 클릭 시 약관 상세 내용 화면으로 이동
17. 로그아웃 Tap 시 아래 알럿(a) 출력  
확인 Tap 시 로그인 화면으로 이동

## 회원정보(일반회원)

11:59

이전 회원정보 완료

1 9

프로필 사진 변경

아이디 soohwajeong

이름 정수화

성별 2 ☐ 남성 ☒ 여성

생년월일 3 1999.01.01

국가 5 대한민국

거주지 6 서울

휴대폰번호 +82 10-1234-5678 변경 >

이메일 abcd@salted.ltd 변경 >

비밀번호 \*\*\*\*\* 변경 >

11

## 발 사이즈 / 다리 길이 측정 방법

- 발 사이즈
  - 발을 종이 위에 올리고 가장 긴 발가락 끝과 발뒤꿈치를 기준으로 체크 합니다.
- 다리 길이
  - 골반에서 안쪽 복사뼈까지 길이를 기준으로 체크 합니다.



확인

키 170 cm

체중 55 kg

발 사이즈 \_\_\_\_mm

다리 길이(선택) 왼쪽 : \_\_\_\_cm / 오른쪽 : \_\_\_\_cm

문진보기

문진보기

8 회원탈퇴

1. Tap 시 이미지 업로드 가능  
썸네일 사이즈는 디자인 시 협의  
최초 프로필 사진 디폴트 이미지로 세팅
2. 선택 후 회원 정보 수정 버튼 Tap 시 변경
3. 생년월일 입력 박스 Tap 시 재 입력 가능  
(OS 기본 데이터피커 제공)

3

20일

취소 선택

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 2017년 | 7월  | 8월  |
| 2018년 | 8월  | 9월  |
| 2019년 | 9월  | 10월 |
| 2020년 | 10월 | 11월 |
| 2021년 | 11월 | 12월 |
| 2022년 | 12월 | 13월 |
| 2023년 | 1월  | 14월 |

4. 작성한 문진보기 화면으로 이동
5. 회원 가입 시 선택한 국가 출력  
국가 번호는 코드 관리함
6. 거주지 입력하여 변경
7. 변경하기 Tap 시 정보 수정 및 인증 페이지로 이동
  - 국가가 한국 일 경우 이메일 인증 없음  
> 이메일 영역 입력 박스로 변경
  - 국가가 한국 이외 나라 일 경우 휴대폰 인증 없음  
> 휴대폰 영역 입력 박스로 변경
8. 회원탈퇴 페이지로 이동
9. 프로필 사진 삭제  
디폴트 이미지 출력
10. 변경된 내용 저장
11. 터치 시 가이드 안내 팝업 출력

키, 체중 추가  
(2022.01.18)

## 회원정보(일반회원)

11:59

이전 회원정보 완료

프로필 사진 변경

아이디 soohwajeong

이름 수화

성 정

성별 ☐ 남성 ☒ 여성

생년월일 1999.01.01

국가 대한민국

거주지 서울

휴대폰번호 +82 10-1234-5678

이메일 abcd@salted.ltd

11

## 발 사이즈 / 다리 길이 측정 방법

- 발 사이즈
  - 발을 종이 위에 올리고 가장 긴 발가락 끝과 발뒤꿈치를 기준으로 체크 합니다.
- 다리 길이
  - 골반에서 안쪽 복사뼈까지 길이를 기준으로 체크 합니다.



확인

비밀번호 \*\*\*\*\* 변경 >

키 170 cm

체중 55 kg

발 사이즈 \_\_\_\_ mm

다리 길이(선택) 왼쪽 : \_\_\_\_ cm / 오른쪽 : \_\_\_\_ cm

문진보기 문진보기

회원탈퇴

1. Tap 시 이미지 업로드 가능  
썸네일 사이즈는 디자인 시 협의  
최초 프로필 사진 디폴트 이미지로 세팅
2. 선택 후 회원 정보 수정 버튼 Tap 시 변경
3. 생년월일 입력 박스 Tap 시 재 입력 가능  
(OS 기본 데이트피커 제공)

3

20일

취소 선택

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 2017년 | 7월  | 8월  |
| 2018년 | 8월  | 9월  |
| 2019년 | 9월  | 10월 |
| 2020년 | 10월 | 11월 |
| 2021년 | 11월 | 12월 |
| 2022년 | 12월 | 13월 |
| 2023년 | 1월  | 14월 |

4. 작성한 문진보기 화면으로 이동
5. 회원 가입 시 선택한 국가 출력  
국가 번호는 코드 관리함
6. 거주지 입력하여 변경
7. 변경하기 Tap 시 정보 수정 및 인증  
페이지로 이동
  - 국가가 한국 일 경우 이메일 인증 없음  
> 이메일 영역 입력 박스로 변경
  - 국가가 한국 이외 나라 일 경우 휴대폰  
인증 없음  
> 휴대폰 영역 입력 박스로 변경
8. 회원탈퇴 페이지로 이동
9. 프로필 사진 삭제  
디폴트 이미지 출력
10. 변경된 내용 저장
11. 터치 시 가이드 안내 팝업 출력

키, 체중 추가  
(2022.01.18)

| Page Description | 설정 > 회원정보 > 문진 보기 > 데이터 없음               | Screen ID | PT-A-10-11 | Description   |
|------------------|--|-----------|------------|---|
|                  | <div data-bbox="155 142 762 1335"></div> |           |            | <div data-bbox="1583 97 2040 542"><ol style="list-style-type: none"><li>1. 문진 보기<ul style="list-style-type: none"><li>- 작성된 문진이 없을 경우 문진 작성 요청 문구 표시</li></ul></li><li>2. 신규 작성<ul style="list-style-type: none"><li>- 신규 문진 작성</li><li>- 회원가입 &gt; 필수 및 추가 정보(문진 정보)화면 표시<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 작성 완료 화면에서 '시작하기' 버튼이 '나가기' 버튼으로 변경</li><li>&gt; 나가기 시 문진 보기 화면으로 이동</li></ul></li></ul></li><li>3. 이전<ul style="list-style-type: none"><li>이전 화면으로 이동</li></ul></li></ol></div> |



11:59

3 이전 1 문진 보기 2 신규 작성

1. 환자분에게 해당하는 가족력을 모두 선택해 주세요.

|      |     |    |        |      |
|------|-----|----|--------|------|
| 없음   | 고혈압 | 당뇨 | 뇌혈관 질환 | 심장질환 |
| 골다공증 | 암   | 기타 |        |      |

2. 병원 진단이나 수술을 받은 이력이 있다면 모두 선택해 주세요.

|         |         |         |        |        |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 없음      | 근골격계 질환 | 심혈관계 질환 | 호흡계 질환 | 신경계 질환 |
| 내분비계 질환 | 디스크 질환  | 기타      |        |        |

3. 지난 일주일 동안 격렬한 신체활동(무거운 물건 나르기, 달리기, 빠른 속도로 자전거 타기 등)을 며칠 하셨나요?

일주일예 \_\_\_\_\_ 일

4. 3번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?

하루에 \_\_\_\_ 시간 \_\_\_\_ 분

다음페이지

▲ 이전페이지

5. 지난 일주일 동안 중간 정도의 신체활동(가벼운 물건 나르기, 복식 테니스, 중간 속도로 자전거 타기 등)을 며칠 하셨나요?

안 함 일주일예 \_\_\_\_\_ 일

6. 5번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?

하루에 \_\_\_\_ 시간 \_\_\_\_ 분

확실하지 않음

7. 지난 일주일 동안 10분 이상 걷은 날은 며칠인가요?

안 함 일주일예 \_\_\_\_\_ 일

8. 7번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?

하루에 \_\_\_\_ 시간 \_\_\_\_ 분

확실하지 않음

9. 지난 일주일 동안 하루에 평균 몇 시간을 앉아 계시나요?


하루에 \_\_\_\_ 시간 \_\_\_\_ 분

확실하지 않음

- 기존 문진 보기
  - 기존 작성된 문진 표시
  - 기존 문진은 수정 불가
- 신규 작성
  - 신규 문진 작성
  - 회원가입 > 필수 및 추가 정보(문진 정보)화면 표시
    - > 작성 완료 화면에서 '시작하기' 버튼이 '나가기' 버튼으로 변경
    - > 나가기 시 문진 보기 화면으로 이동
- 이전
  - 이전 화면으로 이동

| Page Description | 설정 > 회원정보 > 휴대폰번호 변경하기 (국가 : 한국)   | Screen ID | PT-A-10_02 | Description   |
|------------------|--|-----------|------------|---|
|                  | <div data-bbox="155 142 762 1332"> <div> <div>11:59</div> <div> <div>취소</div> <div>휴대폰번호 변경</div> <div>완료</div> </div> </div> <div> <div>아이디, 비밀번호 찾기 등 본인 확인이 필요한 경우 사용할 휴대폰 번호입니다.</div> <div>변경할 휴대폰 번호</div> <div> <div>국가 선택 ▼ 핸드폰 번호 입력</div> <div>인증번호 받기</div> <div>인증번호 입력</div> <div>인증번호 확인</div> </div> <div> <div>인증번호 재발송</div> </div> </div> </div> <div data-bbox="938 385 1377 806"> <div> <div>a</div> <div> <div>휴대폰 번호</div> <div>국가 선택 ▼ 010-0000-000</div> <div>휴대폰 번호를 확인해 주세요.</div> </div> </div> <div> <div>b</div> <div> <div>입력하신 번호로 인증번호가 발송되었습니다.</div> <div>확인</div> </div> </div> <div> <div>c</div> <div> <div>인증번호</div> <div>dadf</div> <div>인증번호를 확인해 주세요.</div> </div> </div> </div> |           |            | <div> <div>1. Tap 시 해당 핸드폰으로 인증 번호 발송</div> <div> <div>a. 휴대폰 번호 오입력 또는 정보 없을 경우 오류 문구 표시</div> <div>b. 인증번호 발송 시 알럿 메시지 출력</div> </div> <div>2. 인증번호 재발송</div> <div> <div>b. 인증번호 발송 시 알럿 메시지 출력</div> </div> <div>3. 완료</div> <div> <div>- 인증번호가 일치 할때 변경된 정보 업데이트</div> <div>c. 인증번호가 일치 하지 않을 경우 오류 문구 표시</div> </div> </div> |

| Page Description | 설정 > 회원정보 > 휴대폰번호 변경하기(국가 : 국외)  | Screen ID | PT-A-10_12 | Description                               |
|------------------|--|-----------|------------|---|
|                  | <div data-bbox="155 147 762 1332"><div><div>11:59</div><div></div><div></div></div><div><div>취소</div><div>휴대폰번호 변경</div><div>완료</div></div><div>아이디, 비밀번호 찾기 등 본인 확인이 필요한 경우 사용할 휴대폰 번호입니다.</div><div>변경할 휴대폰번호</div><div><div>국가 선택 ▼</div><div>핸드폰 번호 입력</div></div></div> |           |            | <div>1. 완료</div> <div>- 변경된 정보 업데이트</div> |
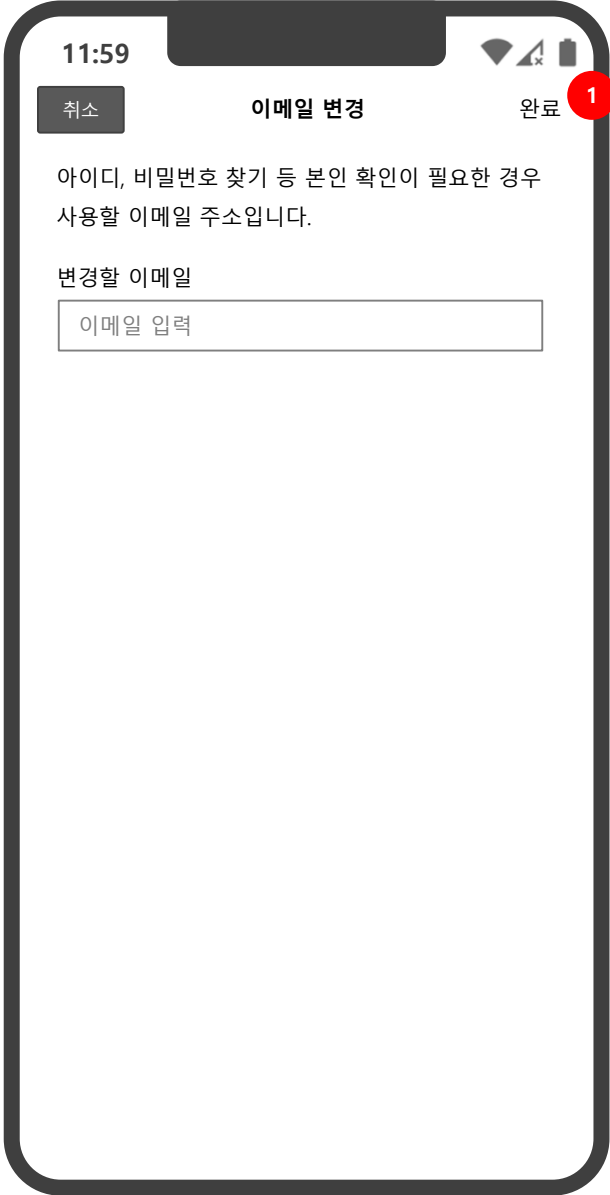
| Page Description | 설정 > 회원정보 > 이메일 변경하기 (국가 : 한국)   | Screen ID | PT-A-10_03 | Description  |
|------------------|--|-----------|------------|--|
|                  |  |           |            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 완료<ul style="list-style-type: none"><li>- 변경된 정보 업데이트</li></ul></li></ol> |

| Page Description   | 설정 > 회원정보 > 이메일 변경하기 (국가 : 국외) | Screen ID | PT-A-10_13 | Description  |
|--|--------------------------------|-----------|------------|--|
| <div><div><div>11:59</div><div>취소이메일 변경완료</div><div>아이디, 비밀번호 찾기 등 본인 확인이 필요한 경우 사용할 이메일 주소입니다.</div><div>변경할 이메일</div><div><div>이메일 입력</div><div>인증번호 받기</div></div><div><div>인증번호 입력</div><div>인증번호 확인</div></div><div>인증번호 재발송</div></div></div> <div><div>a이메일<br/>ddd@dd</div><div>인증번호 받기</div><div>이메일 주소를 확인해 주세요.</div><div>b입력하신 이메일 주소로 인증번호가 발송되었습니다.</div><div>확인</div><div>c인증번호<br/>dadf</div><div>인증번호를 확인해 주세요.</div></div> |                                |           |            | <div>1. 입력한 메일 주소로 인증 번호 발송</div> <div>a. 이메일 오입력 또는 정보 없을 경우 오류 문구 표시</div> <div>b. 인증번호 발송 시 알럿 메시지 출력</div> <div>2. 인증번호 재발송</div> <div>b. 인증번호 발송 시 알럿 메시지 출력</div> <div>3. 완료</div> <div>- 인증번호가 일치 할때 변경된 정보 업데이트</div> <div>c. 인증번호가 일치 하지 않을 경우 오류 문구 표시</div> |

11:59

취소 비밀번호 변경 완료

주기적인 비밀번호 업데이트로 개인정보를 안전하게 보호하세요.

현재 비밀번호

1 입력하세요

새로운 비밀번호

/8~16자리, 영문/숫자/특수문자 조합

비밀번호 재입력

비밀번호를 확인

2 현재 비밀번호

.....

a 비밀번호

비밀번호가 일치 하지 않습니다.

b 비밀번호 (영문+숫자+특수문자/8~16자리)

영문+숫자+특수문자/8~16자리이 아닙니다.

c 비밀번호 재입력


신규 비밀번호와 일치하지 않습니다.

- 비밀번호 입력 후 키패드 닫을 때 현재 비밀번호 정보가 맞는지 확인  
정보 확인이 완료 된 후 변경할 새로운 비밀번호 입력란 활성화  
a. 비밀번호 오입력 시 오류 문구 표시
- 비밀번호 입력 시 마스킹 처리
- 오류 발생  
b. 신규 비밀번호가 비밀번호 조건과 맞지 않을 경우 오류 문구 표시  
c. 재입력 비밀번호가 신규 비밀번호와 일치 하지 않을 경우 오류 문구 표시


| Page Description  | 설정 > 회원탈퇴 | Screen ID | PT-A-10_05 | Description  |
|---|-----------|-----------|------------|--|
| <div><div><div><div>회원탈퇴</div><div>취소</div><div>회원탈퇴</div><div>회원탈퇴의 사유를 알려주세요.<br/>서비스 개선에 중요한 자료로 활용하겠습니다.</div><div><div>1</div><div><div><input type="checkbox"/> 앱 사용이 불편함</div><div><input type="checkbox"/> 나에게 필요한 데이터가 없음</div><div><input type="checkbox"/> 사용 빈도가 낮음</div><div><input type="checkbox"/> 개인 정보 및 재활 운동 삭제 목적</div><div><input type="checkbox"/> 기타</div></div></div><div><div>2</div><div></div></div><div><div><div>회원탈퇴 시 등록한 프로그램, 보행 패턴 분석 데이터, 의사 선생님 코멘트, 스케줄 등 '뉴로게이트' 앱의 서비스를 이용하실 수 없습니다.</div><div>회원탈퇴 시 회원님의 회원 정보가 모두 삭제되며 복구할 수 없습니다.</div><div>회원탈퇴 후 재가입은 가능하지만 탈퇴한 회원 ID로 재가입을 하실 수 없습니다.</div></div></div><div><div><div>3</div><div><input type="radio"/> 모든 정보를 삭제하는 것에 동의합니다.</div></div></div><div><div>탈퇴하기</div><div>4</div></div></div></div><div><div>회원탈퇴 완료</div><div>회원탈퇴</div><div>회원탈퇴가 완료되었습니다.<br/>그동안 뉴로게이트 앱을 이용해 주셔서 감사합니다.</div><div><div>5</div><div>로그인으로 가기</div></div></div></div> |           |           |            | <div>선택 : 서비스 개선 설문 사항(1번 내용)<br/>필수 : 정보 삭제 동의(3번 내용)</div> <div><div>1. 다중 선택 가능</div><div>2. 기타 선택 시 텍스트 입력란 활성화</div><div>3. 체크 시 탈퇴하기 버튼 활성화되며 탈퇴 가능</div><div>4. 탈퇴하기 버튼 Tap 시 완료 페이지로 이동<br/>탈퇴 안내 메일 발송<br/>회원탈퇴 시 일반, 소속 센터에서의 데이터 등 모든 정보 일괄 삭제</div><div>5. Tap 시 로그인 화면으로 이동</div></div> |

| Page Description  | 설정 > 병원정보 | Screen ID | PT-A-10_06 | Description   |
|---|-----------|-----------|------------|---|
| <div><div><div>매칭된 병원이 없는 경우</div><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>센터/병원 정보</div><div>데이터 연결</div></div><div>1000님의 건강한 삶을 응원합니다.</div><div>매칭된 센터/병원이 없습니다.</div></div></div><div><div>매칭된 병원이 있는 경우</div><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>센터/병원 정보</div><div>데이터 연결</div></div><div>000님의 건강한 삶을 응원합니다.</div><div><div>강남연세세브란스 병원 재활의학과 김아무개</div><div>매칭 날짜 2021.10.07</div></div><div><div>원주연세세브란스 병원 신경과 최아무개</div><div>매칭 날짜 2021.10.01</div></div></div></div></div> |           |           |            | <div><div>1. 환자(사용자) 이름 출력</div><div>2. 매칭된 병원 없을 경우 문구 출력</div><div>3. 데이터 연결<ul style="list-style-type: none"><li>- 병원이 연결하기 위한 데이터 연결 코드 볼 수 있는 버튼</li><li>- tap 시 데이터 연결 코드 팝업 표시</li></ul></div><div>4. 병원 리스트<ul style="list-style-type: none"><li>- 매칭되었던 병원 목록 출력</li><li>- 현재 진료중인 병원이 가장 상단으로 출력되며 매칭 날짜 기준으로 나열</li></ul></div><div>5. 데이터 연결 코드 보기 팝업<ul style="list-style-type: none"><li>- 나의 코드 표시</li></ul></div></div> |
|   |           |           |            | <div><div>5<div>데이터 연결 코드</div><div>나의 코드 : 000000</div><div>확인</div></div></div>   |

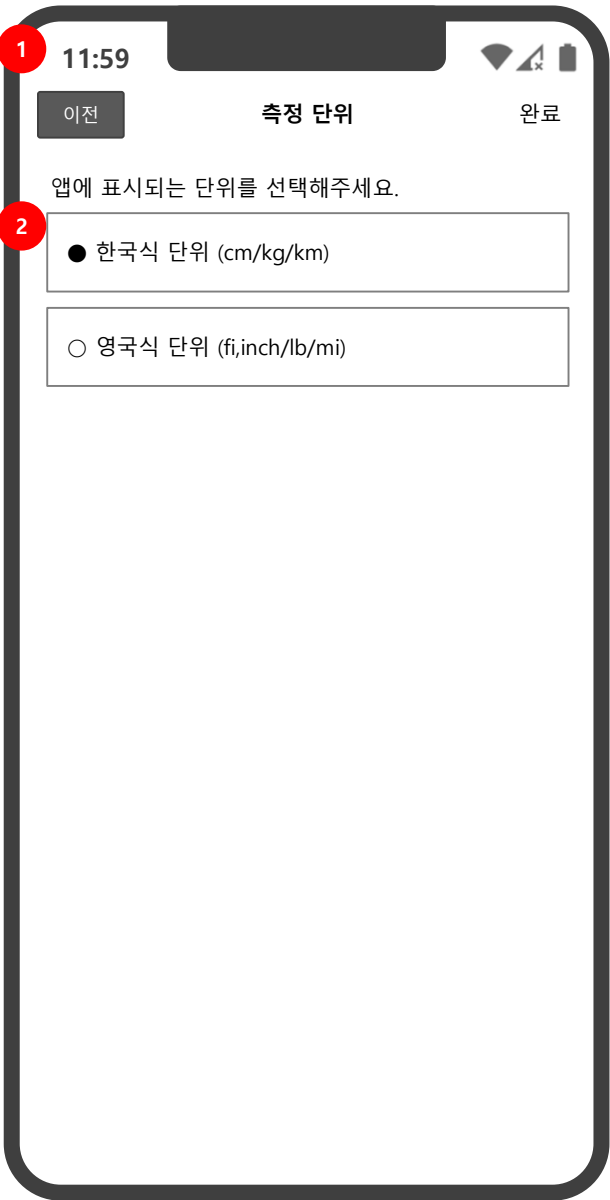

| Page Description | 설정 > 측정 단위   | Screen ID | PT-A-10_7 | Description   |
|------------------|--|-----------|-----------|---|
|                  |  |           |           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. master admin 코드관리&gt;국가에 등록이 되고 서비스 오픈된 지역에 한해 목록에 출력</li><li>2. 기본 설정은 회원가입 시 등록한 국가 기준</li></ol> |

| Page Description   | 설정 > 데이터 백업 | Screen ID | PT-A-10_8 | Description  |
|--|-------------|-----------|-----------|--|
| <div><div><div><div>11:59</div><div>이전      데이터 동기화      완료</div><div>정확한 분석을 위해 데이터 동기화를 선택하세요.<br/>와이파이 연결 시 요금제에 따라 추가 데이터<br/>요금이 발생 될 수 있습니다.</div><div><div><div><div>● 항상</div></div><div><div>○ 와이파이 연결 시 1</div></div><div><div>지금 데이터 백업하기 2</div></div></div></div></div></div></div> |             |           |           | <div><div>1. 기본 설정 값 – 와이파이 연결 시 자동<br/>데이터 백업<br/>백업 주기는 정책에 따름(정책정의서 내<br/>동기화 항목 참고)<br/><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TP1nqiWv0WUQ_XSvczVF0rHppW_u1Nb_a_jpGRl4sHmc/edit#gid=1535546166">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TP1nqiWv0WUQ_XSvczVF0rHppW_u1Nb_a_jpGRl4sHmc/edit#gid=1535546166</a></div><div>2. Tap 시 데이터 백업(동기화 진행)<br/>a. 데이터 백업이 완료될 때까지 페이지<br/>이동 불가</div></div> |
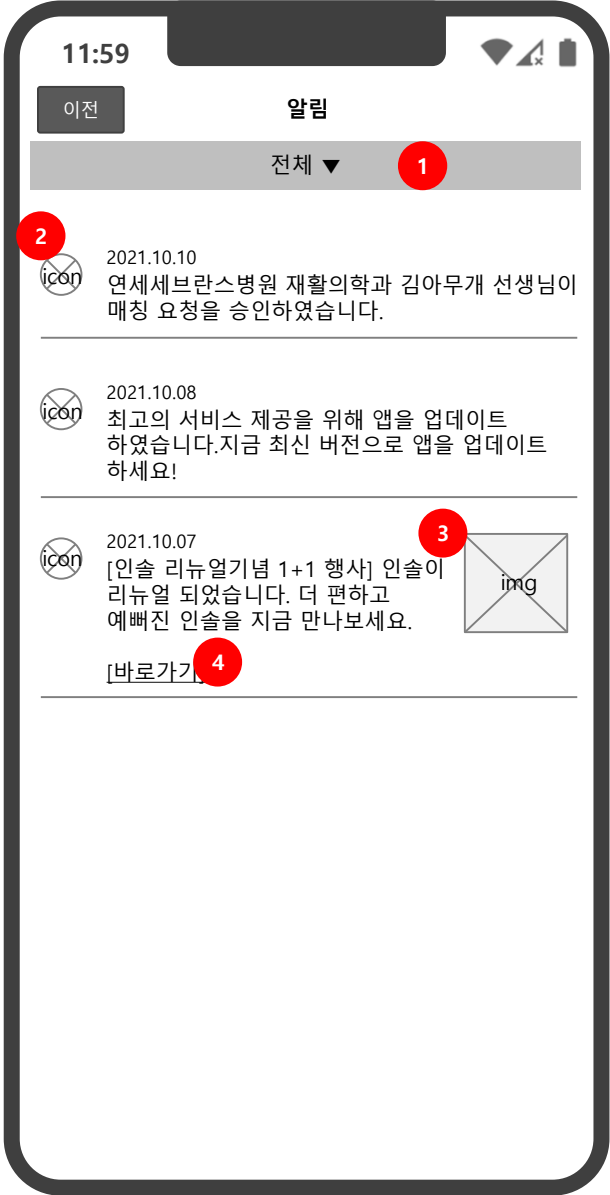
| Page Description   | 설정 > 알림 | Screen ID | PT-A-10_9 | Description   |
|--|---------|-----------|-----------|---|
|  |         |           |           | <p>1. 메뉴 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- default : 알림</li> <li>- 메뉴 종류 : 알림, 이벤트, 공지사항</li> <li>- 오늘 기준 세달 전까지의 알림 확인이 가능하며, 페이징 없음</li> <li>- 게시글의 경우에만 해당 글의 상세페이지로 이동</li> </ul> <p>2. 카테고리 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- default : 전체</li> </ul> <p>3. 리스트</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최근 등록일 순으로 표시</li> <li>- 등록일, 내용, 이미지 출력(등록 시) / 이미지 사이즈는 디자인 시 협의</li> <li>- 별도 상세페이지 없으며 알림 메시지 모두 펼침</li> <li>- 알림 목록은 갯수가 아닌 기간으로 지정하여 오늘 부터 3달치 까지만 페이징 없이 출력</li> </ul> <p>4. 바로가기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내용 내 링크 입력된 경우 Tap 시 해당 페이지로 이동</li> <li>&gt; 외부 웹페이지 오픈</li> </ul> <p>[알림 메시지 종류]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mater admin에서 발송한 푸시 메시지 출력</li> <li>- 문의글 답변 등록 시, 의료진이 스케줄 등록하였을 시, 의료진과 매칭되었을 시 아래 시트의 푸시 메시지 자동 발송 (85~87번)</li> </ul> <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276</a></p> |

게시판  
공통 UI

## 목록 페이지



상단고정

1

카테고리 영역

2

검색 (검색 조건 : 제목&내용)

3

4

상단 고정 게시물


목록 개수는 15개 (상단 게시물 개수 제외)  
최신 등록일 순으로 출력

페이지


6

1. 이전버튼 / 메뉴명 영역은 상단 고정
2. Tap 시 카테고리 목록 펼침  
카테고리는 관리자 화면에서 코드관리하며  
카테고리가 없는 경우 해당 영역 사라짐  
(UI는 이후 페이지 참조)
3. Tap 시 안내 키워드 사라지며 키보드 활성화 (UI는 이후 페이지 참조)
4. 관리자 화면에서 게시물 등록 시  
상단 고정 체크된 게시물 출력  
상단 고정 체크된 게시물 중 최근 등록순으로 출력  
상단 고정 게시물은 최대 3개까지 가능  
(관리자 기능은 관리자 화면설계서 참조)
5. 게시글은 카테고리명, 등록일, 제목 순으로 출력 (항목이 없을 경우 노출 안됨)
6. << 1페이지로 이동  
>> 마지막 페이지로 이동  
< , > 10페이지 씩 이동  
숫자 Tap 시 해당 페이지로 이동  
현재 페이지 숫자는 굵게 또는 밑줄 또는 컬러로 표시 (디자인 시 협의)

## 목록 페이지 &gt; 카테고리 Tap 시

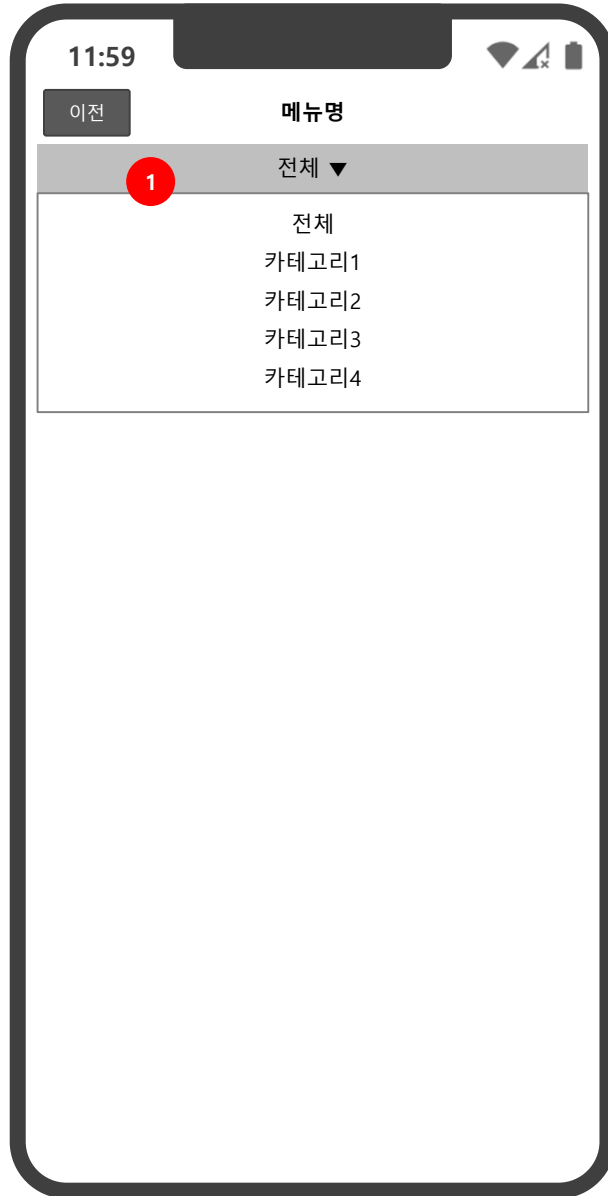

## 상세페이지

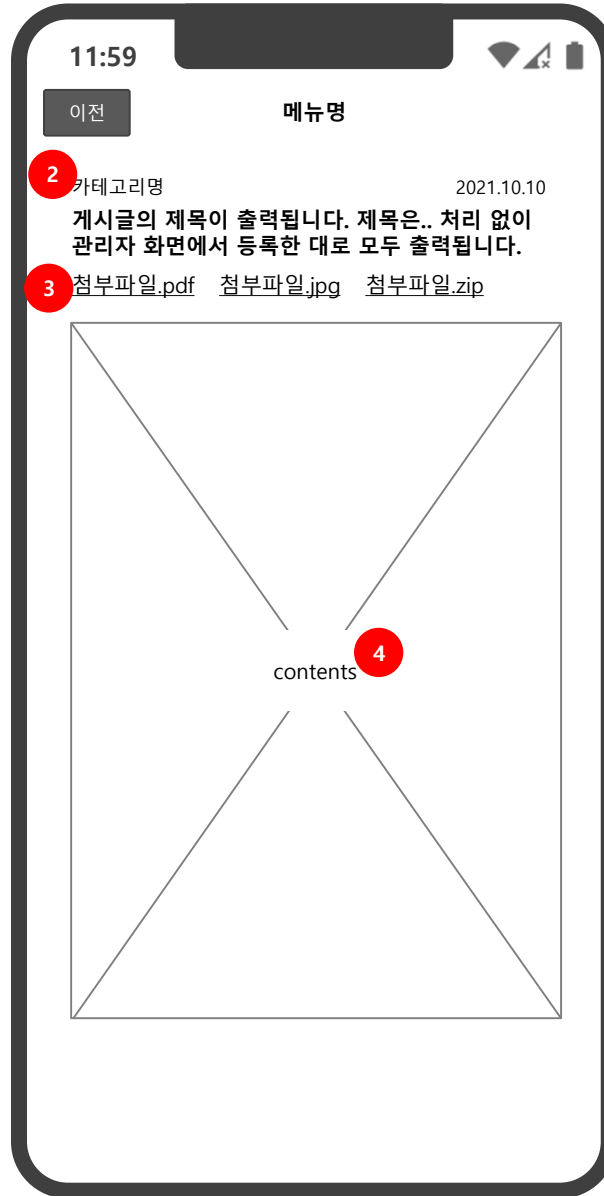


1. 카테고리, 메뉴 공통
  - Tap 시 카테고리, 메뉴 목록 출력
  - 카테고리 : 관리자에서 세팅된 카테고리가 없는 경우 해당 영역 나타나지 않음
2. 상세페이지 내 상단은 카테고리명, 등록일, 타이틀 순으로 출력  
카테고리 관리를 하지 않는 메뉴일 경우 해당 영역에 카테고리명 출력 안됨
3. 관리자 화면에서 등록 한 첨부파일의 이름출력  
Tap 시 다운로드
4. 등록된 게시글/이미지 출력

| Page Description  | 게시판 공통 UI | Screen ID | Description   |
|---|-----------|-----------|---|
| <div> <div> <div>검색결과 있을 때</div> <div> <div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>메뉴명</div> <div>전체 ▼</div> <div> <div>솔티드</div> <div>1</div> <div>🔍</div> </div> <div> <div>[카테고리명]</div> <div>2021.09.30</div> <div>일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div> </div> <div> <div>[카테고리명]</div> <div>2021.09.30</div> <div>솔티드 스마트 게이트 앱이 출시하였습니다.</div> </div> <div> <div>[카테고리명]</div> <div>2021.01.01</div> <div>올 한해도 많은 성원과 관심 부탁드립니다.</div> </div> <div>⋮</div> <div> <div>&lt;&lt;</div> <div>&lt;</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>&gt;</div> <div>&gt;&gt;</div> <div>3</div> </div> </div> </div> <div> <div>검색결과 없을 때</div> <div> <div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>메뉴명</div> <div>전체 ▼</div> <div> <div>솔티드</div> <div></div> <div>🔍</div> </div> <div> <div>찾으시는 검색 결과가 없습니다.</div> <div>4</div> </div> <div> <div>5</div> <div>전체 목록 보기</div> </div> </div> </div> </div> </div></div> |           |           | <ol style="list-style-type: none"> <li> <div> <div>- 검색 : 제목&amp;내용 내 키워드 검색 결과를 출력함</div> <div>- 결과 페이지에 상위 고정된 게시글은 보여 주지 않음</div> <div>- 입력한 검색어는 검색 결과 페이지에서도 입력란에 유지되어 어떤 키워드로 검색하였는지 확인 할 수 있도록 함</div> <div>- 등록순 기준으로 출력</div> </div> </li> <li> <div> <div>검색 키워드 강조(컬러 또는 볼드 처리</div> <div>내용 내 검색 키워드가 있을 경우 상세 페이지에서 별도로 키워드를 강조 하지 않음</div> </div> </li> <li> <div> <div>검색 결과가 15개 이상일 경우 페이지징 처리하여 보여줌</div> <div>상세 페이지에서 이전 버튼 Tap 시 검색 결과 화면(해당 게시물이 있던 이전 목록화면)으로 이동</div> </div> </li> <li> <div> <div>검색 결과가 없을 경우 안내 문구 출력</div> </div> </li> <li> <div> <div>Tap 시 전체 목록 1페이지로 이동</div> </div> </li> </ol> |

이벤트

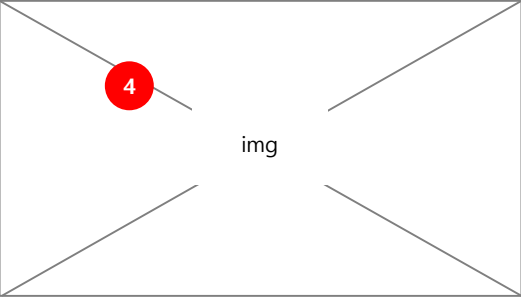

| Page Description  | 이벤트 | Screen ID | PT-A-11 | Description   |
|---|-----|-----------|---------|---|
| <div><div>목록</div><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>이벤트</div></div><div><div>1</div><div>전체 ▼</div></div><div><div>2</div><div>[진행중] 2021.10.10 ~ 2021.11.10</div><div><div>3</div><div>'스마트인솔' 언택트 레슨 유튜브 영상 공유 이벤트</div></div><div><div>4</div><div>img</div></div><div><div>5</div><div>[종료] 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div></div><div><div>[종료] 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div></div><div><div>6</div><div>더보기</div></div></div></div></div> |     |           |         | <div><div>1. 전체, 진행중, 종료</div><div>2. 기본 전체로 보여지며 선택 시 해당 상태의 이벤트만 출력됨</div><div>3. 제목 출력<br/>최대 글자수는 디자인 시 협의</div><div>4. 이미지 등록 시 출력<br/>이미지 사이즈는 디자인 시 협의</div><div>5. 기간이 지난 이벤트의 경우 종료 처리됨<br/>종료된 이벤트의 진행 기간은 보여지지 않음</div><div>6. 게시물 추가 출력</div></div> |

공지사항

| Page Description | 공지사항   | Screen ID<br>PT-A-12  | Description |
|------------------|--|---|-------------|
|                  | <div> <div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>공지사항</div> <div>전체 ▼</div> <div>6</div> <div>제목/내용</div> <div>1</div> <div>[카테고리명] 2021.09.30</div> <div>일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div> <div>2</div> <div>[카테고리명] 2021.09.30</div> <div>일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div> <div>3</div> <div>[카테고리명] 2021.09.30</div> <div>일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div> <div>[카테고리명] 2021.09.30</div> <div>일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div> <div>[카테고리명] 2021.09.30</div> <div>일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div> <div>⋮</div> <div>더보기</div> </div> <div>상세</div> <div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>공지사항</div> <div>4</div> <div>[카테고리명] 2021.09.30</div> <div>일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div> <div>abcd.pdf abcd.gif abcd.zip</div> <div>나만 아는 '솔티드 뉴로게이트 인솔' 함께 알면 골프가, 운동이 2배, 3배 재밌을 텐데! 솔티드, 어떻게 소문낼 수 있을까? 코로나19이후 언택트 시대가 가속화되면서 김남기프로'가 솔티드 '스마트인솔'을 활용하여 언택트 레슨을 진행하였는데요! 그래서 솔티드가 여러분에게 소문낼 수 있게 판을 열었습니다!</div> <div>5</div> <div>img</div> </div> </div> | <ol style="list-style-type: none"> <li>상위 고정 게시글 제목 출력<br/>관리자에서 공지사항 등록 시 상위 고정으로 체크된 게시글 제목이 상단에 출력됨<br/>고정 게시물은 최대 3일 이며 최신 수정일 기준으로 출력<br/>상위 고정 게시물은 1페이지에서만 출력<br/>상위 고정 게시물을 제외한 15개의 목록이 한 페이지에서 출력됨</li> <li>카테고리 설정하여 관리 시 카테고리명 출력<br/>카테고리 설정이 되어 있지 않을 경우 출력 안됨</li> <li>등록일 / 제목 출력<br/>제목 출력 글자수는 디자인 시 협의</li> <li>첨부 파일 있을 경우 다운로드 제공</li> <li>이미지 등록 시 텍스트 이후 하단에 출력</li> <li>카테고리 터치, 검색 기능은 게시판 공통 UI 기능 적용함</li> </ol> |             |

FAQ

| Page Description | FAQ   | Screen ID  | PT-A-13   | Description |
|------------------|---|--|---|-------------|
|                  | <div><div>목록</div><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>FAQ ▼</div><div>전체 ▼ 1</div><div><div>[카테고리명]<br/>인솔 구매 문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div><div><div>[카테고리명]<br/>문의는 어디로 해야 하나요? 2 ▼</div><div><div>[카테고리명]<br/>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div><div><div>[카테고리명]<br/>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div><div><div>[카테고리명]<br/>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div><div><div>[카테고리명]<br/>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div><div><div>더보기</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> | <div><div>목록(펼침)</div><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>FAQ ▼</div><div>전체 ▼</div><div><div>[카테고리명]<br/>인솔 구매 문의는 어디로 해야 하나요? 2 ▼</div><div><div>인솔 구매 문의는 고객 센터로 연락해주세요.<br/>문의 전화 080-4048-3912<br/>고객 센터 운영시간 09:30 ~ 17:30<br/>인솔 제품 소개서.pdf</div><div><div>[카테고리명]<br/>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div><div><div>[카테고리명]<br/>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div><div><div>[카테고리명]<br/>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div><div><div>[카테고리명]<br/>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div><div><div>[카테고리명]<br/>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div><div><div>더보기</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> | <div><div>1. 선택 시 카테고리 펼침</div><div>2. Tap 시 내용이 펼쳐짐<br/>재 Tap 시 내용이 닫힘</div></div> |             |

| Page Description | 설정 > 약관  | Screen ID | PT-A-15 | Description  |
|------------------|--|-----------|---------|--|
|                  | <div data-bbox="155 147 762 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>이용약관</div></div><div><div>변경일 2021.10.07 ▼</div><div>1</div></div><div><div>contents</div><div>2</div></div></div></div> <div data-bbox="818 147 1425 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>개인정보처리방침</div></div><div><div>변경일 2021.10.07 ▼</div><div>1</div></div><div><div>contents</div><div>2</div></div></div></div> |           |         | <div data-bbox="1580 97 2030 285"><div>1. 가장 최신 변경 이력 내용 세팅</div><div>2. 내용 출력<br/>약관 참고<br/><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6</a></div></div> |


| Page Description | 설정 > 약관  | Screen ID | PT-A-15 | Description  |
|------------------|--|-----------|---------|--|
|                  | <div data-bbox="155 147 762 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>개인정보 수집 · 이용 동의</div></div><div><div>변경일 2021.10.07 ▼</div><div>1</div></div><div><div>contents</div><div>2</div></div></div></div> <div data-bbox="818 147 1425 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>민감정보 수집 · 이용 동의</div></div><div><div>변경일 2021.10.07 ▼</div><div>1</div></div><div><div>contents</div><div>2</div></div></div></div> |           |         | <div data-bbox="1580 97 2030 285"><div>1. 가장 최신 변경 이력 내용 세팅</div><div>2. 내용 출력<br/>약관 참고<br/><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6</a></div></div> |

| Page Description | 설정 > 약관  | Screen ID | PT-A-15 | Description  |
|------------------|--|-----------|---------|--|
|                  | <div data-bbox="155 147 762 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>개인(민감)정보 제3자 제공 동의</div></div><div><div>변경일 2021.10.07</div><div>▼</div><div>1</div></div><div><div>contents</div><div>2</div></div></div></div> <div data-bbox="818 147 1425 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>마케팅 정보 수신 동의</div></div><div><div>변경일 2021.10.07</div><div>▼</div><div>1</div></div><div><div>contents</div><div>2</div></div></div></div> |           |         | <div data-bbox="1580 97 2030 285"><div>1. 가장 최신 변경 이력 내용 세팅</div><div>2. 내용 출력</div><div>약관 참고</div><div><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bb2OtTZlamhVYjNDEESndv8Mvjxoa0S6</a></div></div> |



| Page Description | 앱 사용중 모바일 데이터 연결이 끊겼을 경우   | Screen ID | Care-E-07 | Description  |
|------------------|--|-----------|-----------|--|
|                  | <div data-bbox="155 142 762 1332"><div><div>11:59</div><div>NEUROGAIT</div></div><div><div>1</div><div>모바일 데이터(5G/LTE/WiFi) 연결이 끊겼습니다.<br/>Offline모드로 앱 사용을 계속 합니다.<br/>*offline 모드는 앱 전체 기능을 이용 할 수 없습니다.<br/><br/>확인</div></div><div><div>icon</div><div>홈</div><div>icon</div><div>스케줄</div><div>icon</div><div>운동</div><div>icon</div><div>인슐</div><div>icon</div><div>종합 결과</div></div></div> |           |           | <div>1. 앱 사용중 모바일 데이터가 끊겼을 경우 나오는 팝업</div> <div><div>- 현재 화면에서 홈화면으로 강제 이동 후 stand alone으로 앱 변경</div><div>- 운동 중이었을 경우 운동 완료 후 팝업 표시</div></div> |

| Page Description  | HCP 환자 등록 시 SMS 약관 동의 | Screen ID | Care-E-16 | Description  |
|---|-----------------------|-----------|-----------|--|
| <div><div><div>11:59</div><div>뉴로게이트 약관 동의</div><div><div>1</div><div><div><div><input type="radio"/> 전체 동의(필수, 선택 모두 포함)</div><div></div></div><div><div><div><input type="radio"/> 개인정보처리방침(필수) <div>2</div><div>[보기]</div></div><div><input type="radio"/> 개인정보 수집 · 이용 동의(필수) <div>[보기]</div></div><div><input type="radio"/> 민감정보 수집 · 이용 동의(필수) <div>[보기]</div></div><div><input type="radio"/> 개인(민감)정보 제3자 제공 동의(필수) <div>[보기]</div></div><div><input type="radio"/> 마케팅 정보 수신 동의 (선택) &gt; <div>[보기]</div></div></div></div><div><div>3</div><div>다음</div></div></div></div></div></div> |                       |           |           | <div><div>1. 터치 시 전체 항목 체크박스 체크</div><div>2. 보기 터치 시 약관 전문 페이지 새 탭 열기</div><div>3. - 필수 항목 전체 동의 시까지 비활성화<br/>- 활성화 상태에서 터치 시 동의 완료, 동의 완료 페이지 로드</div></div> <div><div>약관 최종 항목 적용<br/>(2022.01.05)</div></div> |
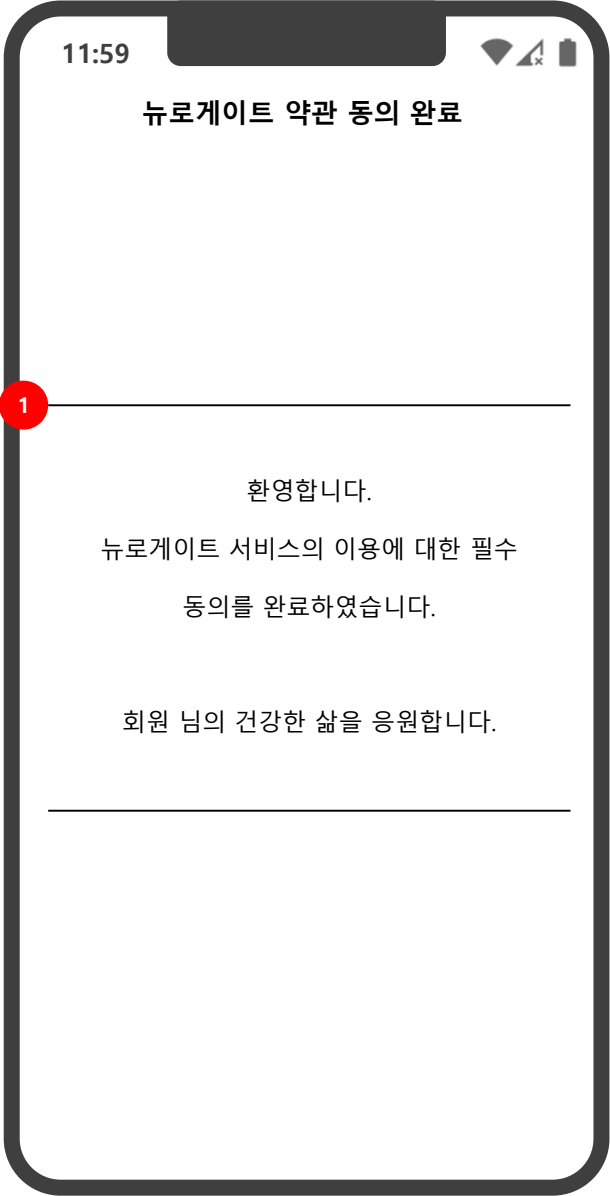
| Page Description | HCP 환자 등록 시 SMS 약관 동의 완료  | Screen ID | Care-E-17 | Description        |
|------------------|---|-----------|-----------|--------------------|
|                  |  <p>11:59</p> <p>뉴로게이트 약관 동의 완료</p> <p>1</p> <p>환영합니다.</p> <p>뉴로게이트 서비스의 이용에 대한 필수<br/>동의를 완료하였습니다.</p> <p>회원님의 건강한 삶을 응원합니다.</p> |           |           | <p>1. 동의 완료 문구</p> |

**End Of Document**