



솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발

화면설계서 – NEUROGAIT-HCP Web

Document Version : V1.6.6

Release Date : 2021.11.30


Organization : 솔티드

Author : 제갈훈

구분	소속	역할	담당자	확인일	확인
작성	솔티드	기획PA	제갈훈		
동료검토	솔티드	기획PA	유병규		
동료검토	픽스프레임	기획PL	정수화		
동료검토	솔티드	개발PL	최성찬		
동료검토	솔티드	디자인PL	박지혜		
동료검토	픽스프레임	PM	김상환		
검토	솔티드	사업총괄	연상근		
인수/승인	솔티드	총괄PM	강경훈		

날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.09.06	0.1	최초 작성	<ul style="list-style-type: none"> 최초 작성 	유병규
2021.10.15	0.5	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 홈-스케줄 등록 팝업 추가 프로그램 관리 메뉴 삭제 스케줄 등록 시나리오 변경 문의 관리 메뉴 삭제 	유병규
2021.10.19	0.9.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 홈 수정 환자 관리 리스트 항목 수정 동영상 플레이어 수정 스케줄 관리 > 환자 목록 출력 항목 수정 	제갈훈
2021.10.26	0.9.2	수정사항 반영	<ul style="list-style-type: none"> 브랜드명 수정 Neuro GAIT □ NEUROGAIT, 뉴로 게이트 □ 뉴로게이트 레이아웃 수정 (GNB 등) IA 레이블링 동기화 Description 내용 수정 통계/자주 묻는 질문/시스템 문의 등 추가 	김상환
2021.11.01	0.9.3	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 문의 메뉴 추가 	유병규
2021.11.05	1.0	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 환자 코드 연결 시나리오 추가 	유병규
2021.11.08	1.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> GNB 수정 자주 하는 질문 관리 콘텐츠로 수정 Screen ID 업데이트 설정 - 이용약관/개인정보처리방침 메뉴 추가 설정 - 회원탈퇴 메뉴 위치 변경(계정 정보로 이동) 	유병규
2021.11.10	1.2	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 환자 정보 수정 시 필수 입력 항목 추가 	유병규
2021.11.10	1.3	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 회원가입 - 국가 선택 추가 회원가입 - 국외 의료진 회원가입 추가 메인화면 - 달성률 리스트 <ul style="list-style-type: none"> - 환자 코드 삭제, 등록일자 추가 - 검색 조건 변경 환자 <ul style="list-style-type: none"> - 환자코드, 성별 삭제 - 생년 월일 추가 - 일반 정보 우측 등록일자 추가 스케줄 - 환자 코드, 질환명 위치 변경 문의 <ul style="list-style-type: none"> - 답변 수정 추가 - 국외 환자 답변 추가 설정 - 공지사항 추가 	유병규

날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.11.19	1.4	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 회원 가입 <ul style="list-style-type: none"> - 회원 가입 시 국가 : 한국, 한국 외 2개 표시 계정 정보 <ul style="list-style-type: none"> - 의료진의 국가 선택에 따른 계정 정보 화면 추가 공통 <ul style="list-style-type: none"> - 페이지 상단 : 국가에 따른 의료진 명 표시 방법 추가 	유병규
2021.11.24	1.5	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 환자 정보 <ul style="list-style-type: none"> - 환자 정보 디자인 변경(P25~31) - 운동 기록 > 운동 명 우측 운동 종류 추가(P36) <ul style="list-style-type: none"> > 운동 결과 하단 목록 이동 버튼 추가(P41~44) - 환자 정보 수정 : 화면 디자인 변경(P45~48) 스케줄 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 화면 디자인 변경(P50~58) 설정 <ul style="list-style-type: none"> - 공지사항 상세화면 : 목록 이동 버튼 추가(P83) 	유병규
2021.11.26	1.6	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 회원 가입 <ul style="list-style-type: none"> - 직군 선택 : 직접 입력 박스 1개 삭제 및 문구 변경(p9~10) 스케줄 <ul style="list-style-type: none"> - 스케줄 추가 및 수정 : 삭제 및 동영상 촬영 여부 버튼 위치 변경(p56~58) 문의 <ul style="list-style-type: none"> - 문의 리스트 : 문의 명 삭제, 문의 내용 추가(p60) - 문의 상세 : 운동 명 위치 변경(p61~64) 계정정보 <ul style="list-style-type: none"> - 정보 수정 : 직접 입력 입력박스 문구 변경(P78,80) - 회원탈퇴 : 문구 변경 및 버튼 추가(P81) 	유병규
2021.11.30	1.6.5	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 로그인 - 알럿 메시지 링크 추가(p6) 홈 - 재활 달성도 : 질환 삭제(p20) 환자 정보 - 운동 기록 : 환자 미연결 시 문구 변경(p34) 문의 - 문의 상세 : 생년월일 추가(P61~64) <div>2021.11.30 수정</div>	유병규
2021.12.02	1.6.6	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 보행 결과 화면 UI 수정: 디자인 sync, 계산식 추가(p31,p37,p38) <div>2021.12.02 수정</div>	제갈훈

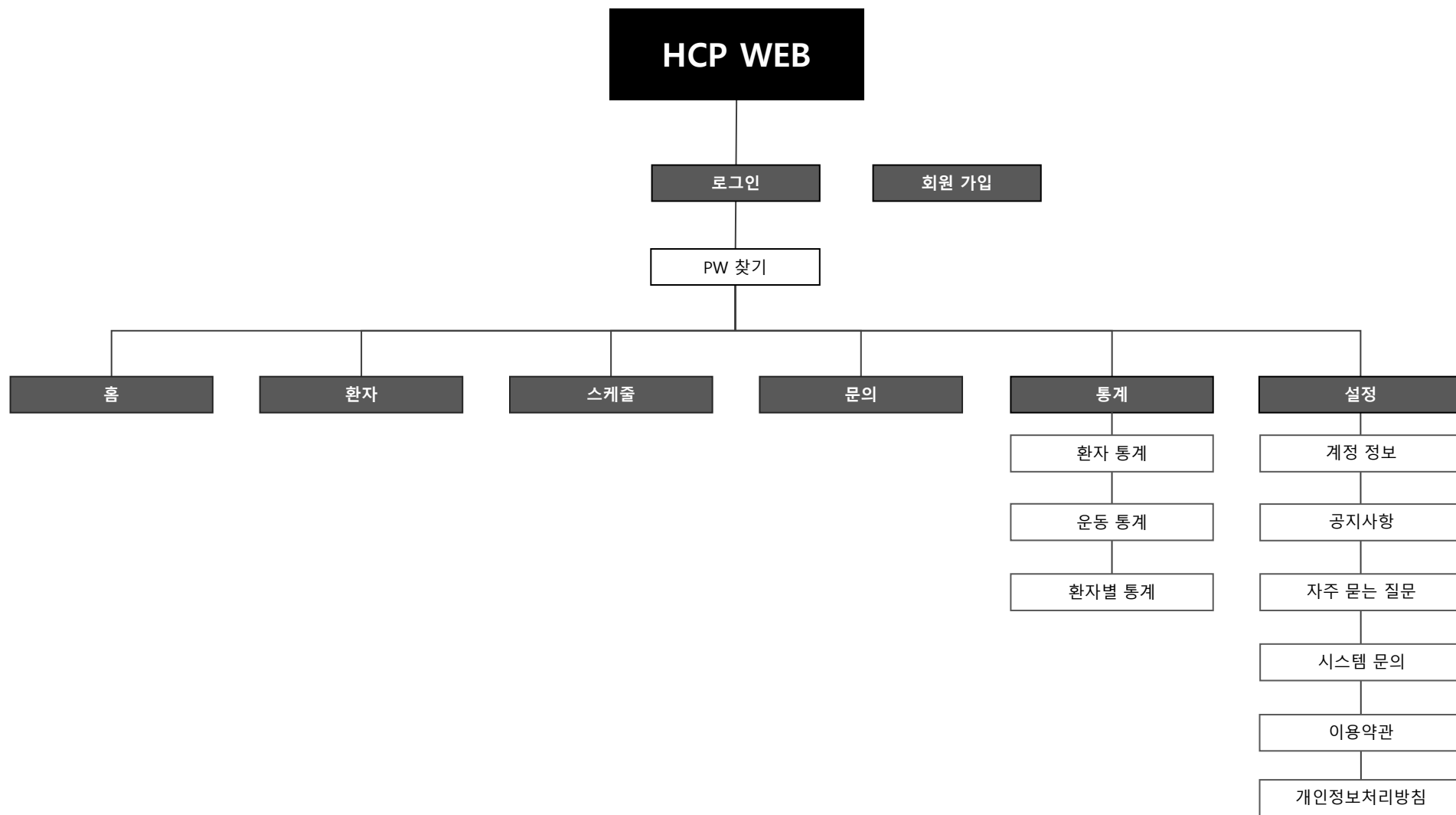

로그인

Page Description	로그인	Screen ID	HCP-W-01	Description
	<div> <div>NEUROGAIT</div> <div>로그인</div> <div>아이디</div> <div>1</div> <div>패스워드</div> <div>계정 코드</div> <div>2</div> <div> <input type="radio"/> 자동 로그인 <div>3</div> <div>4</div> <div>아이디를 잊으셨나요?</div> <div>비밀번호를 잊으셨나요?</div> <div>5</div> <div>의료진으로 가입</div> <div>6</div> <div>로그인</div> </div> </div>			<p>오프라인에서 계정이 생성된 의료진에 한해서 사용 가능</p> <ol style="list-style-type: none"> 이메일, 비밀번호, 계정 코드 입력 비밀번호 마스킹 처리 클릭 시 자동 로그인 활성화 자동 로그인 설정 후 로그인 시 로그인 화면 skip 아이디 찾기 페이지로 이동 비밀번호 재설정하기 페이지로 이동 회원가입 페이지로 이동 이메일, 비밀번호, 계정 코드 체크 정보가 맞을 경우 메인 화면으로 이동 정보가 맞지 않을 경우 알럿 메시지 출력 (알럿 메시지 확인은 아래 url 참고) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276 <div>알럿 메시지 링크 추가 (2021.11.30)</div>
	<div> <div>SALTED</div> <div> 사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호 대표자 : 조형진 개인정보보호 책임자 : 김대성 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F © Copyright 2021 SALTED.LTD </div> </div>	<div> <div>CES</div> <div>Consumer Technology Association</div> </div> <div> <div>ISPO</div> <div>Munich</div> </div>		6

회원 가입

NEUROGAIT

국가 선택

1

선택



다음

1. 국가 선택

- 국내/국외 선택에 따라 회원가입 화면 변경 됨
- 국가 : 한국, 한국 외

NEUROGAIT

의료진으로 가입

- 1 이름* 이름을 띄어쓰기 없이 입력해 주세요. a
- 2 이메일* 업무에 사용하시는 이메일 주소를 입력해 주세요.
- 3 비밀번호* 영문, 숫자, 특수문자를 조합하여 8자 이상 입력해 주세요. b
- 4 전화번호 숫자만 입력해 주세요.
- 5 계정 코드* 계정코드를 입력해 주세요.
- 6 직군*

의사
물리치료사
운동치료사
직접 입력

진료과를 직접 입력해 주세요.

7 ☐ 가입과 동시에 이용약관 / 개인정보 취급방침에 동의합니다.

8

9

회원 가입

- a. 클릭 전 입력 값에 대한 안내 문구 출력
클릭 후 안내 문구 사라지며 키패드 노출
1. 띄어쓰기, 숫자, 특수문자, 이모지 입력 불가
2. 이메일 주소 유효성 검사: '@','/'으로 확인
- 유효성이 맞지 않는 이메일 입력 시 알럿 메시지 출력
3. 비밀번호 입력 시 문자가 보이고 가려짐 (기본 비밀번호는 마스킹 처리됨)
b. 비밀번호보기 off 상태, on일 경우 비밀번호 보여짐
4. 숫자만 입력 가능, 이외 문자 입력 불가
5. 계정 코드 입력
6. 1) 의사 선택 시 근무과 입력란 활성화
2) 근무과 입력창에는 숫자, 특수문자, 이모지 입력 불가
3) 직접 입력 선택 시 진료과 입력란 활성화 (직군에 따른 별도 권한 분리 없음)
4) 기타 직군 입력창에는 특수문자, 이모지 입력 불가
7. 클릭 시 해당 약관 내용 안내(팝업 /이후 페이지 참조) / 입력한 데이터는 임시저장되어 삭제되지 않음
8. 텍스트 클릭 시 해당 약관 안내 페이지로 출력(팝업/페이지)
9. 입력필드에 값이 모두 채워진 경우 버튼이 활성화 됨
오입력된 내용이 없는 경우 가입완료 절차 진행
오입력된 항목이 있는 경우 클릭 시 알럿 메시지 출력

직군-직접 입력 박스 1개 삭제 및
문구 변경
(2021.11.26)

8 j38c4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

완료 후 로그인 화면으로 이동

10. 로그인 화면으로 이동

NEUROGAIT

의료진으로 가입

1 **이름*** 이름을 띄어쓰기 없이 입력해 주세요.

2 **성*** 성을 띄어쓰기 없이 입력해 주세요. a

3 **이메일*** 업무에 사용하시는 이메일 주소를 입력해 주세요.

4 **비밀번호*** 영문, 숫자, 특수문자를 조합하여 8자 이상 입력해 주세요. b

5 **전화번호** 선택 ▼ 숫자만 입력해 주세요.

6 **계정 코드*** 계정코드를 입력해 주세요.

7 **직군***
 진료과를 직접 입력해 주세요.

8 ○ 가입과 동시에 이용약관 / 개인정보 취급방침에 동의합니다.




9 **회원 가입**

- a. 클릭 전 입력 값에 대한 안내 문구 출력
클릭 후 안내 문구 사라지며 키패드 노출
1. 띄어쓰기, 숫자, 특수문자, 이모지 입력 불가
 2. 이메일 주소 유효성 검사: '@','/'으로 확인
- 유효성이 맞지 않는 이메일 입력 시 알럿 메시지 출력
 3. 비밀번호 입력 시 문자가 보이고 가려짐 (기본 비밀번호는 마스킹 처리됨)
b. 비밀번호보기 off 상태, on일 경우 비밀번호 보여짐
 4. 국가 코드 선택, 숫자만 입력 가능, 이외 문자 입력 불가
 5. 계정 코드 입력
 6. 1) 의사 선택 시 근무과 입력란 활성화
2) 근무과 입력창에는 숫자, 특수문자, 이모지 입력 불가
3) 직접 입력 선택 시 진료과 입력란 활성화 (직군에 따른 별도 권한 분리 없음)
4) 기타 직군 입력창에는 특수문자, 이모지 입력 불가
 7. 클릭 시 해당 약관 내용 안내(팝업 /이후 페이지 참조) / 입력한 데이터는 임시저장되어 삭제되지 않음
 8. 텍스트 클릭 시 해당 약관 안내 페이지로 출력(팝업/페이지)
 9. 입력필드에 값이 모두 채워진 경우 버튼이 활성화 됨
오입력된 내용이 없는 경우 가입완료 절차 진행
오입력된 항목이 있는 경우 클릭 시 알럿 메시지 출력
(알럿 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276
 10. 로직: 직군-직접 입력 박스 1개 삭제 및 문구 변경 (2021.11.26)

NEUROGAIT 이용 약관

NEUROGAIT 개인정보 처리 방침

아이디 찾기

Page Description	이메일 찾기	Screen ID	HCP-W-01-1	Description
<div><h1>NEUROGAIT</h1><h2>이메일 찾기</h2><div><div>1</div><div>이름</div><div>회원가입 시에 입력한 이름을 띄어쓰기 없이 입력해 주세요.</div></div><div><div>전화 번호</div><div>숫자만 입력해 주세요.</div></div><div><div>a</div><div>* 입력하신 정보에 맞는 이메일을 찾을 수 없습니다.</div></div><div><div>2</div><div>이메일 찾기</div></div></div> <div><div>1. 이름, 전화번호 입력<div>a. 중복되는 정보가 없을 경우 가이드 출력</div></div><div>2. 클릭 시 페이지 이동, 입력한 정보와 중복되는 이메일 주소 출력</div></div>				
<div><div>사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호 대표자 : 조형진 개인정보보호 책임자 : 김대성 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F © Copyright 2021 SALTED.LTD</div><div>CESConsumer Technology Association</div><div>ISPO Munich</div></div>				

Page Description	이메일 찾기 > 성공	Screen ID	HCP-W-01-2	Description
	<div data-bbox="451 261 1166 1096"> <h2 data-bbox="660 261 880 299">NEUROGAIT</h2> <div data-bbox="497 342 1073 425"> <div data-bbox="497 342 547 386">1</div> <div data-bbox="547 372 1073 425"> <p>ooo님의 정보로 찾은 이메일 주소는 다음과 같습니다. 개인정보 보호를 위해 일부 정보가 가려집니다.</p> </div> </div> <div data-bbox="451 544 1166 672"> <div data-bbox="466 582 515 626">2</div> <div data-bbox="650 592 965 624">emailaddr***@neurogait.io</div> </div> <div data-bbox="638 889 926 933"> <div data-bbox="638 889 687 933">3</div> <div data-bbox="687 903 926 929">비밀번호를 잊으셨나요?</div> </div> <div data-bbox="401 991 1156 1096"> <div data-bbox="401 991 451 1035">4</div> <div data-bbox="656 1036 919 1068">로그인 화면으로 이동</div> </div> </div>			<div data-bbox="1570 97 1989 247"> <ol style="list-style-type: none"> 출력되는 메일 계정의 이름 출력 이메일 정보 출력 클릭 시 비밀번호 로그인 화면으로 이동 클릭 시 로그인 화면으로 이동 </div>
	<div data-bbox="51 1303 1073 1378">  <p> 사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호 대표자 : 조형진 개인정보보호 책임자 : 김대성 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F © Copyright 2021 SALTED.LTD </p> </div>	<div data-bbox="1166 1310 1317 1352">  <div> CES <div>Consumer Technology Association</div> </div> </div>	<div data-bbox="1355 1308 1460 1358">  </div>	15

비밀번호 재설정

Page Description	비밀번호 재설정하기	Screen ID	HCP-W-01-3	Description
	<div><div>NEUROGAIT</div><div><div>비밀번호 재설정하기</div><div><div><div>이메일</div><div>인증받기</div></div><div><div>새 비밀번호</div><div>1</div><div>2</div></div><div><div>재설정 코드</div><div>3</div></div></div><div><div>* 영문, 숫자, 특수문자를 조합하여 8자 이상 입력해 주세요.</div><div><div>비밀번호 변경</div><div>4</div></div></div></div></div>			<div>1. 비밀번호 마스킹 처리</div> <div>2. 클릭 시 마스킹 해제</div> <div>3. 모든 항목을 입력하고 오입력이 없을 경우 비밀번호 변경 버튼 활성화 및 비밀번호 설정 완료</div> <div>4. 입력된 이메일로 인증 메일 발송 이메일 오입력 시 인증받기 버튼 클릭 후 알럿 메시지 출력 (알럿 메시지는 이후 페이지 참조)</div>
<div><div><div>SALTED</div><div>사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호 대표자 : 조형진 개인정보보호 책임자 : 김대성 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F © Copyright 2021 SALTED.LTD</div></div><div><div>CES</div><div>Consumer Technology Association</div></div><div><div>ISPO Munich</div><div></div></div></div>				

로그인 정보 오입력 시 알럿 메시지

구분	상황	메시지
로그인	기타 오류로 인한 로그인 실패	로그인에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.
	인증되지 않은 이메일	아직 메인 인증이 완료되지 않았습니다. 가입하신 주소로 발송된 인증 메일로 계정을 활성화 해주세요.
	유효하지 않은 비밀번호	비밀번호가 맞지 않습니다.
	유효하지 않은 이메일	이메일 주소가 맞지 않습니다.
	통신 오류로 인한 로그인 실패	로그인에 실패했습니다. 네트워크에 연결되어 있는지 확인해 주세요.
비밀번호 재설정	만료된 재설정 코드 입력	재설정 코드가 만료되었습니다. 재설정 코드를 다시 받아 진행해 주세요.
	유효하지 않은 재설정 코드 입력	유효하지 않은 재설정 코드입니다. 코드를 다시 확인해 주세요.
회원가입	기타 오류로 인한 계정 생성 실패	계정 생성에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.
	통신 오류로 인한 계정 생성 실패	계정 생성에 실패했습니다. 네트워크에 연결되어 있는지 확인해 주세요.
	유효하지 않은 비밀번호 입력	비밀번호가 조건을 충족하지 않습니다.

101

SALTED

5 000님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

전체 환자

22명

재활 달성도

80%


* 전일 기준

환자 문의 답변

22/50

* 월요일~일요일 기준

000 환자 운동 달성률

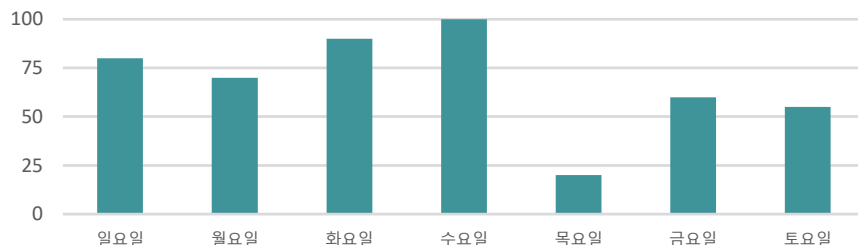

검색

no	이름	생년월일	질환 명	진단 날짜	등록일자
12	홍길동	1990.00.00	퇴행성뇌질환	2021.00.00	2021.08.01
11	김철수	1980.00.00	RH	2021.00.00	2021.07.31
10	김영희	1992.00.00	DPN	2021.00.00	2021.07.30
9	이장군	1973.00.00	DPN	2021.00.00	2021.07.30
8	박성춘	1964.00.00	RH	2021.00.00	2021.07.30
7	이성계	1965.00.00	퇴행성뇌질환	2021.00.00	2021.07.30
6	최민수	1975.00.00	퇴행성뇌질환	2021.00.00	2021.07.30
5	김도영	1965.00.00	퇴행성뇌질환	2021.00.00	2021.07.30

통계

설정

2 재활 스케줄

오늘

◀ 9월 ▶

일	월	화	수	목	금	토
29	30	31	1	2	3	4
				7명	8명	
5	6	7	8	9	10	11
		6명	5명	2명	10명	
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
	5명	3명	2명	8명		

3 오늘의 재활 현황

신규 스케줄 추가

10	홍길동	#개	달성률 ##%	▶
9	사공민아	#개	달성률 ##%	▶
8	김민준	#개	달성률 ##%	▶
7	김민지	#개	달성률 ##%	▶
6	이무개	#개	달성률 ##%	▶

1. 카드 데이터

- 전체 환자 수 : 의료진에게 진료 받고 있는 전체 환자 수
- 재활 달성도 : 전일 기준 전체 질환/환자 재활 달성도 퍼센트 표시
- 환자 문의 답변 : 금주 기준 환자의 프로그램에 작성된 문의에 대한 답변완료 수

2. 재활 스케줄

- 월별 스케줄 표시
 - > 스케줄 관리에 등록된 재활 스케줄 동일하게 표현
 - > 오늘 날짜 표시
 - > 오늘 버튼 선택 시 오늘 날짜로 캘린더 이동
- 날짜 선택 시 캘린더 하단에 선택한 스케줄 표시

3. 오늘 스케줄

- default 금일 운동 스케줄 정보 표시
- 캘린더에서 다른 요일 선택 시 선택된 요일의 스케줄 표시
- 신규 스케줄 추가를 이용하여 스케줄 추가
 - > 스케줄 화면으로 이동

4. 재활 달성도(환자)

- 리스트에서 선택된 환자의 7일간 재활 달성도 표시
 - > 그래프 우측에 어제 날짜 표시
- 리스트 : 최신 진단 날짜 순으로 표시
 - > 의사가 연구용일 경우만 질환명 표시
- 리스트에서 국가에 따른 이름 구분
 - > 한국 : 이름 표시
 - > 국외 : 이름 + 성 표시
- default : 최신 날짜

재활 달성도 - 질환 삭제
(2021.11.30)

5. 환자 정보

- 한국 : 이름 전체 표시
- 한국 외 : 이름, 성 순서로 표시

Page Description

홈

Screen ID

HCP-W-02-1

Description

SALTED

5ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

1

전체 환자

122명

4

100

75

50

25

0

Body 영역

버튼 1

버튼 2

금요일

2

재활 스케줄

오늘

9월

일

월

화

수

목

금

토

2

3

4

7명

8명

9

10

11

2명

10명

16

17

18

23

24

25

8명

신규 스케줄 추가

2

환자 문의 답변

2

Body 영역

버튼 1

no	이름	생년월일	질환 명	진단 날짜	등록일자
12	홍길동	1990.00.00	퇴행성뇌질환	2021.00.00	2021.08.01
11	김철수	1980.00.00	RH	2021.00.00	2021.07.31
10	김영희	1992.00.00	DPN	2021.00.00	2021.07.30
9	이장군	1973.00.00	DPN	2021.00.00	2021.07.30
8	박성춘	1964.00.00	RH	2021.00.00	2021.07.30
7	이성계	1965.00.00	퇴행성뇌질환	2021.00.00	2021.07.30
6	최민수	1975.00.00	퇴행성뇌질환	2021.00.00	2021.07.30
5	김도영	1965.00.00	퇴행성뇌질환	2021.00.00	2021.07.30

10	홍길동	#개	달성률 ##%	▶
9	사공민아	#개	달성률 ##%	▶
8	김민준	#개	달성률 ##%	▶
7	김민지	#개	달성률 ##%	▶
6	이무개	#개	달성률 ##%	▶

1. 팝업1

- 버튼 2개인 팝업

2. 팝업2

- 버튼 1개인 팝업

팝업 사이즈는 디자인 시 협의

환자

Page Description환자

Screen IDHCP-W-04

Description

SALTED

000님 환영합니다 | 로그아웃

홈환자스케줄문의통계설정

1

2

검색

NO	이름	생년월일	운동 달성률	최근 진단	등록일자
38	홍길동	1900.00.00	###%	2021.07.28	2021.08.02
37	사공민아	1900.00.00	###%	2021.07.29	2021.08.01
36	김민준	1900.00.00	###%	2021.07.30	2021.08.01
35	김민지	1900.00.00	###%	2021.07.31	2021.07.31
34	이무개	1900.00.00	###%	2021.08.01	2021.07.30
33	제갈훈	1900.00.00	###%	2021.08.02	2021.07.30
32	유병규	1900.00.00	###%	2021.08.01	2021.07.30
31	박지혜	1900.00.00	###%	2021.08.02	2021.07.30
30	김상환	1900.00.00	###%	2021.08.01	2021.07.30
29	정수화	1900.00.00	###%	2021.08.02	2021.07.30

<<<

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>

>>>

1. 검색 조건

- 이름, 생년월일

2. 리스트

- 이름, 생년월일, 운동 달성률, 최근진단, 등록일자 표시

- 리스트에서 국가에 따른 이름 구분

> 한국 : 이름 표시

> 국외 : 이름 표시(성 제외)

- 리스트 기준 최근 등록일자 기준

- 리스트에서 환자 선택 시 환자 상세 정보 화면으로 이동

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호

대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F

© Copyright 2021 SALTED.LTD

CESConsumer Technology Association

ISPO Munich

Page Description환자(연구용 환자)

Screen IDHCP-W-04-1

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈환자스케줄문의통계설정

1

전체▼

검색

2

NO	이름	질환명	생년월일	운동 달성률	최근 진단	등록일자
38	홍길동		1900.00.00	##%	2021.07.28	2021.08.02
37	사공민아		1900.00.00	##%	2021.07.29	2021.08.01
36	김민준		1900.00.00	##%	2021.07.30	2021.08.01
35	김민지		1900.00.00	##%	2021.07.31	2021.07.31
34	이무개		1900.00.00	##%	2021.08.01	2021.07.30
33	제갈훈		1900.00.00	##%	2021.08.02	2021.07.30
32	유병규		1900.00.00	##%	2021.08.01	2021.07.30
31	박지혜		1900.00.00	##%	2021.08.02	2021.07.30
30	김상환		1900.00.00	##%	2021.08.01	2021.07.30
29	정수화		1900.00.00	##%	2021.08.02	2021.07.30

◀◀◀▶▶

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

환자 정보

1

일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드	W1234	성별	남자
이름	제갈훈	국적	한국
질환명	-	거주지	서울
생년월일	1991.01.01	연락처	010-1234-5678
		이메일	Salted@gmail.com

2

신체 정보

키	180.x cm
몸무게	79.xkg
발사이즈	175.xcm
다리길이(왼쪽)	90.xcm
다리길이(오른쪽)	95.xcm

3

문진

정자세

촬영 검사

운동 기록

0000-00-00



00:00:00



조회

최근 작성 : 2021.11.02

4

1. 환자분에게 해당하는 가족력을 모두 선택해 주세요.

없음

고혈압

당뇨

뇌혈관 질환

심장질환

골다공증

암

기타

2. 병원 진단이나 수술을 받은 이력이 있다면 모두 선택해 주세요.

없음

근골격계 질환

심혈관계 질환

호흡계 질환

신경계 질환

내분비계 질환

디스크 질환

기타

직접 입력

6

▼ 스크롤

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



- 일반 정보
 - 등록일자 표시
 - 환자 코드, 이름, 생년월일, 성별, 국적, 거주지, 연락처, 이메일 표시
 - > 질환명은 '-' 표시
 - > 환자 매칭 시 patient app과 HCP APP에서 마지막으로 작성한 정보로 업데이트
- 신체 정보
 - 키, 몸무게, 발사이즈, 다리길이 표시
- HCP APP 정보
 - 의사가 HCP APP에서 등록 및 측정한 정보 표시
 - 문진, 정자세, 촬영 검사
 - 정보가 없을 경우 해당 블록 미표시
- 문진
 - 최근 문진 작성일 기준으로 표시
 - 최근 문진 표시
- 날짜 선택
 - 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능
 - > 데이터 없는 날짜 선택 불가
- 운동 정보
 - HCP APP 정보 하단에 patient app에서 실행한 운동 정보 표시
 - 환자와 매칭 되지 않았을 경우 매칭 버튼 표시
- 수정
 - 해당 버튼 클릭 시 수정 화면으로 이동
 - 환자 정보 및 신체 정보 수정
- 삭제
 - patient app과 연결이 되어 있을 경우 patient app과 연결 끊고, 환자 삭제
 - 해당 버튼 클릭 시 삭제 팝업 표시
- 연결 끊기
 - patient app과 연결 끊음
 - 매칭 하지 않았을 경우 미노출

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

환자 정보

1

일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드	W1234	성별	남자
이름	훈	국적	한국
성	제갈	거주지	서울
질환명	-	연락처	010-1234-5678
생년월일	1991.01.01	이메일	Salted@gmail.com

3

문진	정자세	촬영 검사	운동 기록	0000-00-00	00:00:00	조회
----	-----	-------	-------	------------	----------	----

최근 작성 : 2021.11.02

4

1. 환자분에게 해당하는 가족력을 모두 선택해 주세요.

없음	고혈압	당뇨	뇌혈관 질환	심장질환	골다공증	암	기타
----	-----	----	--------	------	------	---	----

2. 병원 진단이나 수술을 받은 이력이 있다면 모두 선택해 주세요.

없음	근골격계 질환	심혈관계 질환	호흡계 질환	신경계 질환	내분비계 질환	디스크 질환	기타
----	---------	---------	--------	--------	---------	--------	----

직접 입력

6

▼ 스크롤

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



- 일반 정보
 - 등록일자 표시
 - 환자 코드, 이름, 성, 생년월일, 성별, 국적, 거주지, 연락처, 이메일 표시
 - > 질환명은 '-' 표시
 - > 환자 매칭 시 patient app과 HCP APP에서 마지막으로 작성한 정보로 업데이트
- 신체 정보
 - 키, 몸무게, 발사이즈, 다리길이 표시
- HCP APP 정보
 - 의사가 HCP APP에서 측정한 정보 및 환자 운동 기록 표시
 - 문진, 정자세, 촬영 검사, 운동 기록
- 문진
 - 최근 문진 작성일 기준으로 표시
 - 최근 문진 표시
- 날짜 선택
 - 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능
 - > 데이터 없는 날짜 선택 불가
- 운동 정보
 - HCP APP 정보 하단에 patient app에서 실행한 운동 정보 표시
 - 환자와 매칭 되지 않았을 경우 매칭 버튼 표시
- 수정
 - 해당 버튼 클릭 시 수정 화면으로 이동
 - 환자 정보 및 신체 정보 수정
- 삭제
 - patient app과 연결이 되어 있을 경우 patient app과 연결 끊고, 환자 삭제
 - 해당 버튼 클릭 시 삭제 팝업 표시
- 연결 끊기
 - patient app과 연결 끊음
 - 매칭 하지 않았을 경우 미노출

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

환자 정보

수정

삭제

연결 끊기

일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드	W1234	성별	남자	키	180.x cm
이름	제갈훈	국적	한국	몸무게	79.xkg
질환명	OOOOO	거주지	서울	발사이즈	175.xcm
생년월일	1991.01.01	연락처	010-1234-5678	다리길이(왼쪽)	90.xcm
		이메일	Salted@gmail.com	다리길이(오른쪽)	95.xcm

문진

정자세

촬영 검사

운동 기록

0000-00-00



00:00:00



조회

최근 작성 : 2021.11.02

1. 환자분에게 해당하는 가족력을 모두 선택해 주세요.

없음

고혈압

당뇨

뇌혈관
질환

심장질환

골다공증

암

기타

2. 병원 진단이나 수술을 받은 이력이 있다면 모두 선택해 주세요.

없음

근골격계
질환심혈관계
질환호흡계
질환신경계
질환내분비계
질환디스크
질환

기타

직접 입력

▼ 스크롤

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김태성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1. 일반 정보

- 연구 환자 일 경우 질환 명 추가
- 국내 환자 : 이름 표시
- 국외 환자 : 이름, 성 표시

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

환자 정보

수정

삭제

연결 끊기

1 일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드	W1234	성별	남자	키	180.x cm
이름	훈	국적	한국	몸무게	79.xkg
성	제갈	거주지	서울	발사이즈	175.xcm
질환명	OOOOO	연락처	010-1234-5678	다리길이(왼쪽)	90.xcm
생년월일	1991.01.01	이메일	Salted@gmail.com	다리길이(오른쪽)	95.xcm

문진

정자세

촬영 검사

운동 기록

0000-00-00



00:00:00



조회

최근 작성 : 2021.11.02

1. 환자분에게 해당하는 가족력을 모두 선택해 주세요.

없음

고혈압

당뇨

뇌혈관
질환

심장질환

골다공증

암

기타

2. 병원 진단이나 수술을 받은 이력이 있다면 모두 선택해 주세요.

없음

근골격계
질환심혈관계
질환호흡계
질환신경계
질환내분비계
질환디스크
질환

기타

직접 입력

▼ 스크롤

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김태성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD




Page Description	홈 > 환자 > 환자 정보 > 문진 선택	Screen ID	HCP-W-06	Description
<div> <div>문진</div> <div>정자세</div> <div>촬영 검사</div> <div>운동 기록</div> </div> <div> <div>0000-00-00</div> <div></div> <div>00:00:00</div> <div>▼</div> <div>조회</div> </div> <p>최근 작성 : 2021.11.02</p> <p>3. 지난 일주일 동안 격렬한 신체활동(무거운 물건 나르기, 달리기, 빠른 속도로 자전거 타기 등)을 며칠 하셨나요?</p> <div> <div>안 함</div> <div></div> </div> <p>4. 3번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?</p> <div> <div> <div>___ 시간</div> <div>___ 분</div> </div> <div>확실하지 않음</div> </div> <p>5. 지난 일주일 동안 중간 정도의 신체활동(가벼운 물건 나르기, 복식 테니스, 중간 속도로 자전거 타기 등)을 며칠 하셨나요?</p> <div> <div>안 함</div> <div></div> </div> <p>6. 5번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?</p> <div> <div> <div>___ 시간</div> <div>___ 분</div> </div> <div>확실하지 않음</div> </div> <p>7. 지난 일주일 동안 10분 이상 걸은 날은 며칠인가요?</p> <div> <div>안 함</div> <div></div> </div> <p>8. 7번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?</p> <div> <div> <div>___ 시간</div> <div>___ 분</div> </div> <div>확실하지 않음</div> </div> <p>9. 지난 일주일 동안 하루에 평균 몇 시간을 앉아 계시나요?</p> <div> <div> <div>___ 시간</div> <div>___ 분</div> </div> <div>확실하지 않음</div> </div>				<p>1. 정자세</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최근 검사된 화면 표시 - 최근 검사 날짜 표시 - HCP APP에서 촬영된 화면 및 항목 표시 <p>2. 날짜 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> - 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능 > 데이터 없는 날짜 선택 불가

Page Description	홈 > 환자 > 환자 정보 > 정자세 선택	Screen ID	HCP-W-06-1	Description
<div> <div>문진</div> <div>정자세</div> <div>촬영 검사</div> <div>운동 기록</div> </div> <div> <div>1</div> <div>최근 검사 : 2021.11.02</div> </div> <div> <div>2</div> <div>0000-00-00</div> <div>00:00:00</div> <div>조회</div> </div> <div> <div>정면</div> <div> <div> <div></div> <div> <div>● 정상(이상 없음)</div> <div>○ 전신 왼쪽 편중</div> <div>○ 전신 오른쪽 편중</div> <div>○ 어깨 불균형</div> <div>○ 골반 불균형</div> <div>○ O다리</div> <div>○ X다리</div> </div> </div> <div> <div>측면</div> <div> <div> <div></div> <div> <div>○ 정상(이상 없음)</div> <div>○ 거북목</div> <div>○ 일자목</div> <div>○ 골반 후방 변위</div> </div> </div> <div> <div>● 골반 전방 변위</div> </div> </div> </div> <div> <div>후면</div> <div> <div> <div></div> <div> <div>● 정상(이상 없음)</div> <div>○ 상부 척추 불균형</div> </div> </div> <div> <div>● 견갑골 회전</div> <div>○ 하부 척추 불균형</div> </div> </div> </div> <div>▼ 스크롤</div> </div></div>				<div>1. 정자세</div> <div> <div>- 최근 검사된 화면 표시</div> <div>- 최근 검사 날짜 표시</div> <div>- HCP APP에서 촬영된 화면 및 항목 표시</div> <div>> 화면 클릭 시 화면 팝업으로 표시</div> </div> <div>2. 날짜 선택</div> <div> <div>- 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능</div> <div>> 데이터 없는 날짜 선택 불가</div> <div>- 조회 선택 시 최근 검사 날짜 삭제</div> </div>

Page Description	홈 > 환자 > 환자 정보 > 촬영 검사 선택	Screen ID	HCP-W-06-2	Description
<div> <div>문진</div> <div>정자세</div> <div>촬영 검사</div> <div>운동 기록</div> </div> <div> <div>1</div> <div>최근 검사 : 2021.11.02</div> </div> <div> <div>2</div> <div>0000-00-00</div> <div>00:00:00</div> <div>조회</div> </div> <div> <div>3</div> <div>보행1</div> </div> <div> <div>▲ 스크롤</div> </div>				<ol style="list-style-type: none"> <div>촬영 검사</div> <ul style="list-style-type: none"> - 최근 검사된 화면 표시 - 최근 검사 날짜 표시 - HCP APP에서 촬영된 화면 및 항목 표시 <ul style="list-style-type: none"> > 검사 : 보행, 제자리 서기, 스쿼트, 원발 외발 서기, 오른발 외발 서기 <div>날짜 선택</div> <ul style="list-style-type: none"> - 날짜 및 시간 선택 후 조회 버튼을 이용하여 날짜 변경 가능 <ul style="list-style-type: none"> > 데이터 없는 날짜 선택 불가 <div>보행</div> <ul style="list-style-type: none"> - 촬영 영상, 보행 패턴, 보행분석, 좌/우 GCT 밸런스, 보행 길이, 보행 주기 표시 - 영상 클릭 시 영상 플레이어 팝업 표시 - 보행이 여러 개 일 경우 밑으로 보행 추가 <ol style="list-style-type: none"> 좌우 게이지: 가운데 50을 중심으로 좌우 최대 100의 게이지 채워짐 도트 게이지: a 게이지 채워지는 정도에 맞춰 좌우 최대 6개가 채워짐 * 기준(소수점 둘째 자리 버림): <div> <div>50~57.9 : ●, 58~66.9 : ●●,</div> <div>67~74.9 : ●●●, 75~82.9 : ●●●●,</div> <div>83~90.9 : ●●●●●, 91~100.0 : ●●●●●●</div> </div> <div>제자리서기, 스쿼트</div> <ul style="list-style-type: none"> - 촬영 영상, cop 패턴, 평균 밸런스, 자세분석 표시 - 영상 클릭 시 영상 플레이어 팝업 표시 <div> <div>좌우 GCT 밸런스 UI 수정 (2021.12.02)</div> </div>
<div> <div>▼ 스크롤</div> </div>				

▲ 스크롤

1 제자리 서기

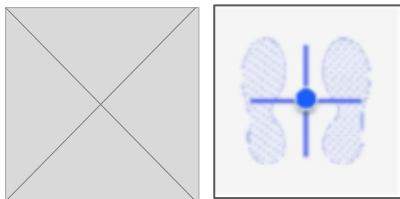

평균 밸런스


좌 : 우(표준 50 :50)
50 : 50앞 : 뒤(표준 40 :60)
47 : 53

자세 분석

올바른 밸런스를 보입니다.



1 스쿼트

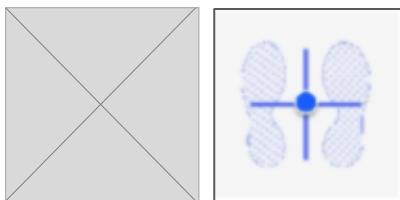

평균 밸런스


좌 : 우(표준 50 :50)
50 : 50앞 : 뒤(표준 40 :60)
47 : 53

자세 분석

올바른 밸런스를 보입니다.



2 왼발 외발서기

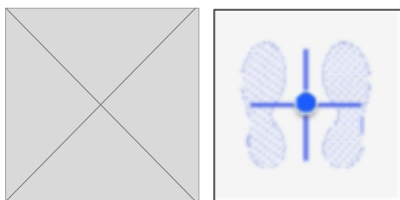

운동 데이터


흔들림 정도 (추천 : 10% 이하) 외발 서기 시간
7% 00초

자세 분석

올바른 밸런스를 보입니다.



2 오른발 외발서기

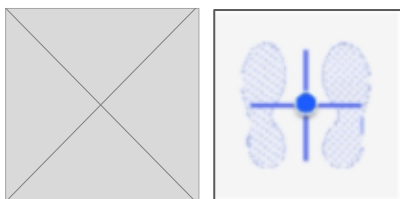

운동 데이터

흔들림 정도 (추천 : 10% 이하) 외발 서기 시간
7% 00초

자세 분석


올바른 밸런스를 보입니다.



▼ 스크롤

1. 제자리서기, 스쿼트
 - 촬영 영상, cop 패턴, 평균 밸런스, 자세분석 표시
 - 영상 클릭 시 영상 플레이어 팝업 표시
2. 왼발/오른발 외발서기
 - 촬영 영상, cop 패턴, 흔들림 정도, 외발 서기 시간, 자세분석 표시
 - 영상 클릭 시 영상 플레이어 팝업 표시

Page Description	영상 플레이어 팝업	Screen ID	HCP-W-06-11	Description
	<div><div>운동 영상</div><div><div></div><div><div><div><div></div><div>L 75%</div></div><div><div></div><div>R 25%</div></div></div><div><div><div>RIGHT</div><div>L 80%</div><div>###</div></div><div><div>LEFT</div><div>R 80%</div><div>###</div></div></div><div><div><div>TOE</div><div>H 80%</div><div>###</div></div><div><div>HILL</div><div>T 80%</div><div>###</div></div></div></div><div><div>00:21</div><div></div><div>00:30</div></div></div></div>			

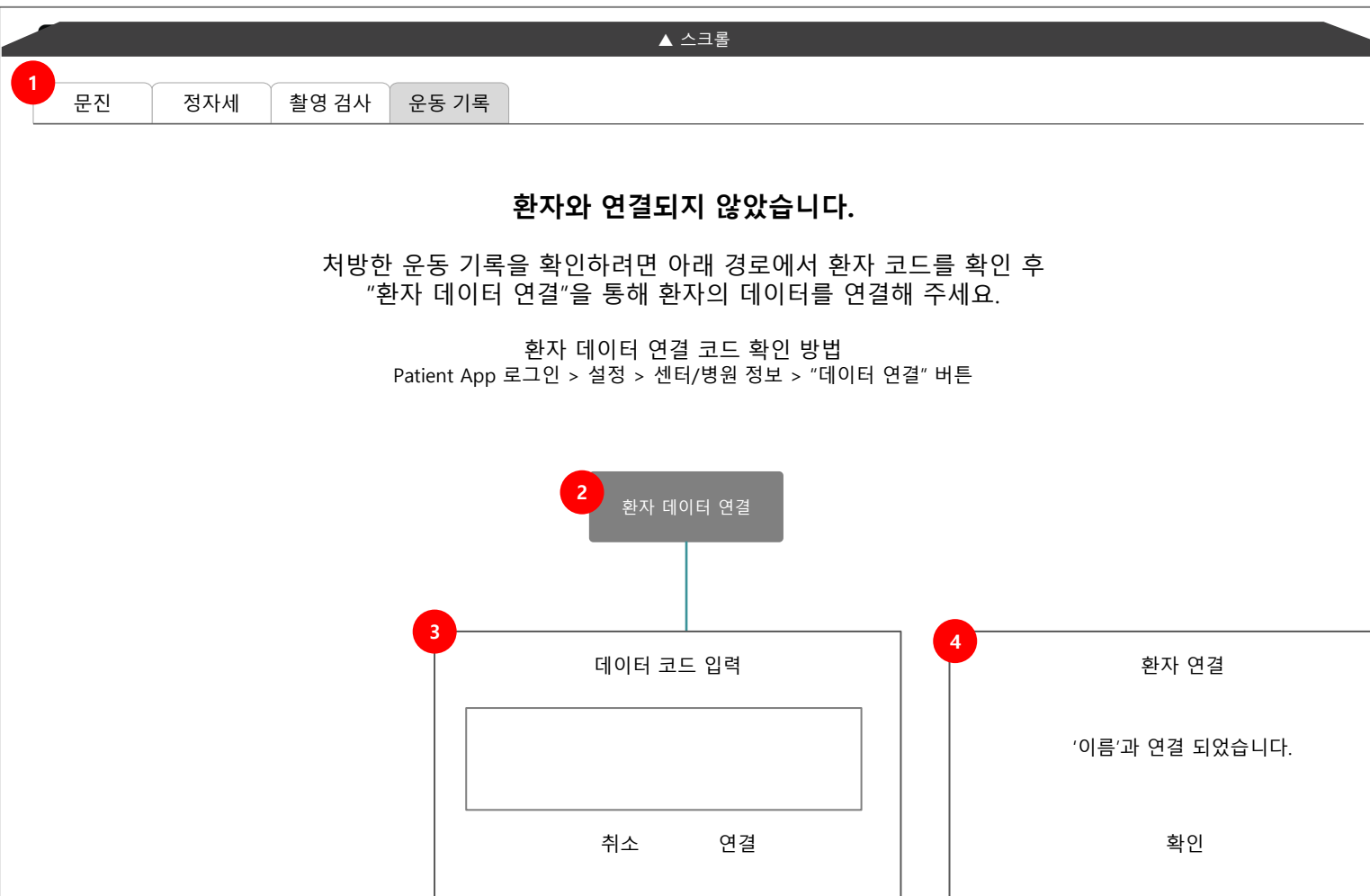

- 운동 기록
 - Patient APP 과 연결된 환자의 운동 기록 확인
 - patient app과 연결 되지 않았을 경우 환자 데이터를 이용하여 연결하라는 문구 표시
- 버튼
 - 버튼 클릭 시 ③ 표시
- 환자코드 입력 팝업
 - 환자코드 입력칸 표시
 - Patient APP의 환자코드 입력 후 확인 시 ④팝업 표시
- 환자 연결 팝업
 - Patient APP과 연결 성공 표시
 - 확인 클릭시 화면 refresh

문구 변경
(2021.11.30)

▲ 스크롤

문진

정자세

촬영 검사

운동 기록

1 등록된 스케줄 및 운동이 없습니다.

2

스케줄 등록하기

1. 운동 기록
 - 환자 스케줄이 등록 되지 않았을 경우 화면
2. 스케줄 등록하기
 - 해당 버튼 클릭 시 스케줄 화면으로 이동

▲ 스크롤

문진

정자세

촬영 검사

운동 기록

1

◀ 9월 ▶

2

일	월	화	수	목	금	토
29	30	31	1	2	3	4
			00개	00개	00개	00개
5	6	7	8	9	10	11
00개	00개	00개	00개	00개	00개	00개
12	13	14	15	16	17	18
00개	00개	00개	00개	00개	00개	00개
19	20	21	22	23	24	25
00개	00개	00개	00개	00개	00개	00개
26	27	28	29	30	1	2
00개	00개	00개	00개	00개		

운동 명 | 밸런스 운동

운동 진행 상태 : 진행중

운동 달성률: 00%

문의

답변하기

결과 보기 >

운동 명 | 보행 운동

운동 진행 상태 : 완료

운동 달성률: 100%

문의

답변하기

결과 보기 >

운동 명 | 보행 운동

운동 진행 상태 : 미진행

운동 달성률: 0%

문의

답변하기

결과 보기 >

1. 운동 기록

- 환자 스케줄이 등록되어 있을 경우 화면

2. 스케줄

- 월 달력 표시

- 요일 하단 등록된 운동 수 표시

- 오늘 날짜와 선택한 날짜 따로 구분

- 운동 명, 운동 종류, 운동 진행 상태, 운동 달성률, 문의, 결과 보기 표시

- 문의 내용 있을 경우 답변하기 버튼 활성화
> 답변하기 클릭 시 해당 문의글 답변

화면으로 이동

- 결과보기 클릭 시 선택 운동 결과 화면으로 이동

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1

보행 운동 결과 2021.00.00(OO요일)

2

전체

▼

3 운동 시간 13:55:00~14:55:00/8세트/22분 30초

4

걸음 수 1000


5

보행 분석

분당 걸음 수 90spm

발을 끄는 경향이 있으며, 보행속도가 느린편입니다.
보행 안정성을 위해서 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로
걸어보세요.

6

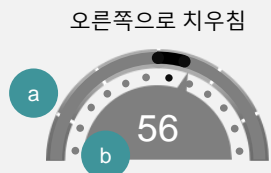좌/우 GCT 밸런스(ms)원발 GCT
300오른발 GCT
280

7

보행 길이(cm)**보장(Step Length)**

성인 평균 64~74cm

원발 00

오른발 00

활보장(Stride Length)

성인 평균 135~150cm

원발 오른발 합계 124

8

보행 주기

입각기

유각기

표준	60%	40%
원발	67%	33%
오른발	63%	37%

표준

원발

오른발

양발 지지기	양발 지지기	외발 서기
Load Response	Pre Swing	
10%	10%	20%
6%	32%	38%
32%	6%	38%
		16%

9

목록

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

SALTED

- 선택된 날짜의 운동 결과 표시
- 시간 선택
 - 전체, 보행 운동을 한 시간 선택
 - 보행 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 보행 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 보행 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 세트 표시, 오늘 총 보행 운동 시간
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 시간 표시
- 걸음 데이터
 - 운동 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 보행 분석
 - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
- 좌우 GCT 밸런스
 - a. 좌우 게이지: 가운데 50을 중심으로 좌우 최대 100의 게이지 채워짐
 - b. 도트 게이지: a 게이지 채워지는 정도에 맞춰 좌우 최대 6개가 채워짐
 - * 기준(소수점 둘째 자리 버림):
50~57.9 : ●, 58~66.9 : ●●,
67~74.9 : ●●●, 75~82.9 : ●●●●,
83~90.9 : ●●●●●, 91~100.0 : ●●●●●●
- 보행 길이
 - 신규 인솔에서 제공하는 데이터
 - 신규 인솔 판매 전까지 미표시
- 보행 주기
 - 운동 시간 내 보행 주기 표시
- 목록
 - 이전화면으로 돌아가기

좌우 GCT 밸런스 UI 수정
(2021.12.02)

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

보행 운동 결과 2021.00.00(OO요일)

1 00세트 2 운동 시간 13:55:00~13:59:10/4분10초




4 걸음 수 1000

분당 걸음 수 90spm

5 보행 분석

발을 끄는 경향이 있으며, 보행속도가 느린편입니다.
보행 안정성을 위해서 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로
걸어보세요.

6 좌/우 GCT 밸런스(ms)

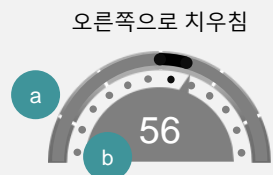

원발 GCT 300

오른발 GCT 280

7 보행 길이(cm)

보장(Step Length)

성인 평균 64~74cm

원발 00 오른발 00

활보장(Stride Length)

성인 평균 135~150cm

원발 오른발 합계 124

8 보행 주기

입각기

유각기

표준	60%	40%
원발	67%	33%
오른발	63%	37%

표준

원발

오른발

양발 지지기	양발 지지기	외발 서기
Load Response	Pre Swing	
10%	10%	20%
6%	32%	38%
32%	6%	38%
		16%

9 목록

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

SALTED



- 시간 선택
 - 전체, 보행 운동을 한 시간 선택
 - 보행 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 보행 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 보행 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 세트 표시, 오늘 총 보행 운동 시간
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 시간 표시
- 압력 중심 이동 패턴
 - 운동 시간 동안 압력 중심 이동 패턴 표시
 - 영상 보기 클릭 시 영상(족저압or동영상) 팝업 표시
- 걸음 데이터
 - 운동 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 보행 분석
 - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
- 좌우 GCT 밸런스
 - a. 좌우 게이지: 가운데 50을 중심으로 좌우 최대 100의 게이지 채워짐
 - b. 도트 게이지: a 게이지 채워지는 정도에 맞춰 좌우 최대 6개가 채워짐
 - * 기준(소수점 둘째 자리 버림):
 - 50~57.9 : ●, 58~66.9 : ●●,
 - 67~74.9 : ●●●, 75~82.9 : ●●●●,
 - 83~90.9 : ●●●●●, 91~100.0 : ●●●●●●
- 보행 길이
 - 신규 인솔에서 제공하는 데이터
 - 신규 인솔 판매 전까지 미표시
- 지면 접촉 시간
 - 좌우 밸런스 및 분석 결과 표시
- 보행 주기
 - 운동 시간 내 보행 주기 표시
- 목록
 - 이전화면으로 돌아가기

좌우 GCT 밸런스 UI 수정
(2021.12.02)

1

운동 영상 보기



왼발
발끝 ##%
뒤꿈치 ##%

오른발
발끝 ##%
뒤꿈치 ##%



00:21




00:30


- 환자가 운동한 영상 확인
 - 동영상 촬영 여부 no일 경우 족저압 촬영 화면 표시
 - 동영상 촬영 여부 YES일 경우 동영상 촬영 화면 표시

1

운동 영상 보기

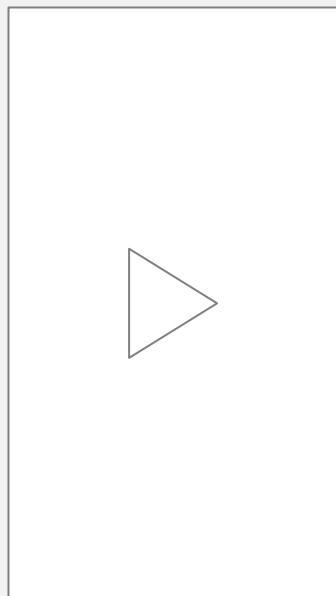

00:21

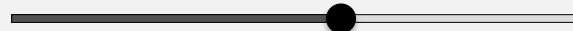

00:30

1. 환자가 운동한 영상 확인

- 동영상 촬영 여부 no일 경우 족저압 촬영 화면 표시
- 동영상 촬영 여부 YES일 경우 동영상 촬영 화면 표시

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1

000 운동 결과 2021.00.00(OO요일)

2

전체 ▼

3

운동 시간 13:55:00~14:55:00/8세트

4

평균 밸런스

좌 : 우 앞 : 뒤

50 :50 47 :53

표준 50 :50 표준 40 :60

5

자세 분석

평균

100

6

밸런스 분석

오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.

7

목록

- 선택된 날짜의 운동 결과 표시
- 시간 선택
 - 전체, 보행 운동을 한 시간 선택
 - 보행 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 보행 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 보행 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
- 평균 밸런스
 - 좌/우, 앞/뒤 밸런스 표시
- 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
- 밸런스 분석
 - 밸런스 계산하여 문구 표시
- 목록
 - 이전 화면으로 돌아가기

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 언주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1


ooo 운동 결과 2021.00.00(OO요일)

2

00세트 ▼ 3 운동 시간 13:55:00~14:55:00/00초

4

운동 자세

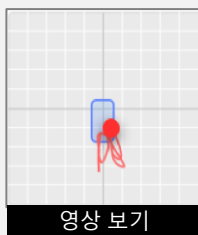

5

평균 밸런스


좌 : 우 앞 : 뒤

50 : 50 47 : 53

표준 50 : 50 표준 40 : 60

6

자세 분석

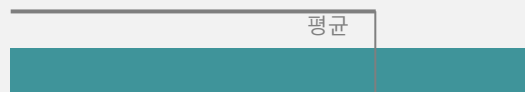

7

밸런스 분석

100

오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.

8

목록

1. 선택된 날짜의 운동 결과 표시
2. 시간 선택
 - 전체, 보행 운동을 한 시간 선택
 - 보행 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 보행 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 보행 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
3. 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
4. 운동 자세
 - cop 이동 패턴 표시
 - 영상 보기 클릭 시 영상(축제압or동영상) 팝업 표시
5. 평균 밸런스
 - 좌/우, 앞/뒤 밸런스 표시
6. 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
7. 밸런스 분석
 - 밸런스 계산하여 문구 표시
8. 목록
 - 이전화면으로 이동

SALTED

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1

ooo 운동 결과 2021.00.00(OO요일)

2

전체 ▼

3

운동 시간 13:55:00~14:55:00/8세트

4

흔들림 정도

외발 서기 시간

5

자세 분석

7%

00초

평균

100

6

밸런스 분석

지지하는 다리쪽 골반이 바깥쪽으로빠지거나 무너졌을 확률이 높습니다.

7

목록

- 선택된 날짜의 운동 결과 표시
- 시간 선택
 - 전체, 보행 운동을 한 시간 선택
 - 보행 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 보행 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 보행 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
- 흔들림 정도, 외발 서기 시간
 - 흔들림 정보, 외발 서기 시간 표시
- 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
- 밸런스 분석
 - 밸런스 계산하여 문구 표시
- 목록
 - 이전화면으로 이동

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 언주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1


ooo 운동 결과 2021.00.00(OO요일)

2

00세트 ▼ 3 운동 시간 13:55:00~14:55:00/00초

4

운동 자세

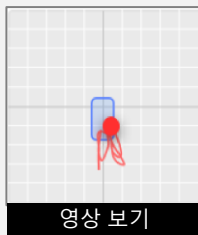

5

흔들림 정도


외발 서기 시간

7%

00초

6

자세 분석

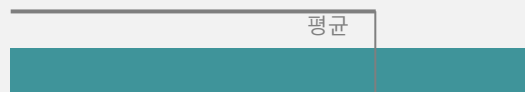

7

밸런스 분석

100

오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.

8

목록

1. 선택된 날짜의 운동 결과 표시
2. 시간 선택
 - 전체, 보행 운동을 한 시간 선택
 - 보행 운동 1회 진행 시 전체 선택 없음
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 보행 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 보행 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
3. 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
4. 운동 자세
 - cop 이동 패턴 표시
 - 영상 보기 클릭 시 영상(축저압or동영상) 팝업 표시
5. 흔들림 정도, 외발 서기 시간
 - 흔들림 정보, 외발 서기 시간 표시
6. 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
7. 밸런스 분석
 - 밸런스 계산하여 문구 표시
8. 목록
 - 이전화면으로 이동

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 언주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



Page Description

환자 > 국내 환자 선택 > 수정

Screen ID

HCP-W-05-3

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

환자 정보

2

취소

저장

1

일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드	W1234	성별	남자
이름	제갈훈	국적	한국
질환명	-	거주지	서울
생년월일	1991.01.01	연락처	010-1234-5678
		이메일	Salted@gmail.com

신체 정보

키	180.x cm
몸무게	79.xkg
발사이즈	175.xcm
다리길이(왼쪽)	90.xcm
다리길이(오른쪽)	95.xcm

1. 환자 정보/신체 정보 수정

- 필수 입력 : 이름, 생년 월일, 연락처

2. 버튼

- 취소 : 수정 취소 후 이전 화면으로 이동

- 저장 : 수정 정보 저장 팝업 표시

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

CES

Consumer Technology Association

ISPO Munich

Page Description

환자 > 국외 환자 선택 > 수정

Screen ID

HCP-W-05-6

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

환자 정보

2

취소

저장

1

일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드	W1234	성별	남자
이름	훈	국적	한국
성	제갈	거주지	서울
질환명	-	연락처	010-1234-5678
생년월일	1991.01.01	이메일	Salted@gmail.com

신체 정보

키	180.x cm
몸무게	79.xkg
발사이즈	175.xcm
다리길이(왼쪽)	90.xcm
다리길이(오른쪽)	95.xcm

1. 환자 정보/신체 정보 수정

- 필수 입력 : 이름, 성, 생년월일, 연락처

2. 버튼

- 취소 : 수정 취소 후 이전 화면으로 이동

- 저장 : 수정 정보 저장 팝업 표시

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

CES

Consumer Technology Association

ISPO Munich

Page Description

환자 > 국내 연구 환자 선택 > 수정

Screen ID

HCP-W-05-7

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

환자 정보

2

취소

저장

1

일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드

W1234

성별

남자

이름

제갈훈

국적

한국

질환명

OOOOO

거주지

서울

생년월일

1991.01.01

연락처

010-1234-5678

이메일

Salted@gmail.com

신체 정보

키

180.x cm

몸무게

79.xkg

발사이즈

175.xcm

다리길이(왼쪽)

90.xcm

다리길이(오른쪽)

95.xcm

1. 환자 정보/신체 정보 수정

- 필수 입력 : 이름, 생년 월일, 연락처

2. 버튼

- 취소 : 수정 취소 후 이전 화면으로 이동

- 저장 : 수정 정보 저장 팝업 표시

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

CES

Consumer Technology Association

ISPO Munich

Page Description

환자 > 국외 연구 환자 선택 > 수정

Screen ID

HCP-W-05-8

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

환자 정보

2

취소

저장

1

일반 정보(등록일자 : 2021.00.00)

환자코드	W1234	성별	남자
이름	훈	국적	한국
성	제갈	거주지	서울
질환명	OOOOO	연락처	010-1234-5678
생년월일	1991.01.01	이메일	Salted@gmail.com

신체 정보

키	180.x cm
몸무게	79.xkg
발사이즈	175.xcm
다리길이(왼쪽)	90.xcm
다리길이(오른쪽)	95.xcm

1. 환자 정보/신체 정보 수정

- 필수 입력 : 이름, 성, 생년월일, 연락처

2. 버튼

- 취소 : 수정 취소 후 이전 화면으로 이동

- 저장 : 수정 정보 저장 팝업 표시

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

CES

Consumer Technology Association

ISPO Munich

스케줄

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

재활 스케줄

◀ 9월 ▶

월

주

1일	월	화	수	목	금	토
29	30	31	1	2	3	4
			10명	00명	00명	00명
5	6	7	8	9	10	11
10명	00명	00명	00명	10명	00명	00명
12	13	14	15	16	17	18
10명	00명	00명	00명	10명	00명	00명
19	20	21	22	23	24	25
10명	00명	00명	00명	10명	00명	00명
26	27	28	29	30	1	2
10명	00명	00명	00명	10명		

09.01 환자 재활 스케줄

신규 추가

10

전체 일정 0000.00.00~0000.00.00

이름

총 달성률: ##%

환자 코드: W1234

질환 명: 알츠하이머

운동 명

00%

운동 명

00%

운동 명

00%

09

전체 일정 0000.00.00~0000.00.00

이름

총 달성률: ##%

환자 코드: W1234

질환 명: 알츠하이머

운동 명

00%

운동 명

00%

운동 명

00%

08

전체 일정 0000.00.00~0000.00.00

이름

총 달성률: ##%

환자 코드: W1234

질환 명: 알츠하이머

운동 명

00%

1. 스케줄

- 주/월 캘린더

> 오늘 날짜 : 일 뒤에 원으로 포커스

> 선택 날짜 : 해당 요일 박스 테두리

- default 월 캘린더

- 월 : 선택 요일 스케줄에 등록된 환자 수 표시

- 주 : 선택 요일 스케줄에 등록된 이름(국외 환자 : 이름 성), 표시

2. 요일 스케줄

- 선택한 요일 스케줄에 등록된 환자 리스트

> 이름(국외 환자 : 이름 성), 환자 코드, 질환 명 (연구 환자일 경우 표시), 운동 전체 달성률 표시, 환자코드/질환 없을 경우 미표시

> 운동 명, 운동 달성률 표시

> 스케줄 등록된 환자의 스케줄 시작/종료일

- 환자 선택 시 환자 스케줄 화면으로 이동

SALTED

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

재활 스케줄

◀ 9월 ▶

월

주

1 일	월	화	수	목	금	토
30	30	31	1	2	3	4
이름1	이름1	이름1	이름1	이름1	이름1	이름1
이름2	이름2	이름2	이름2	이름2	이름2	이름2
이름3	이름3	이름3	이름3	이름3	이름3	이름3
이름4	이름4	이름4	이름4	이름4	이름4	이름4
이름5		이름5	이름5	이름5	이름5	이름5
		이름6	이름6	이름6	이름6	이름6
			이름7	이름7	이름7	이름7
			이름8	이름8	이름8	이름8
			이름9	이름9	이름9	이름9
			이름10	이름10	이름10	이름10

09.01 환자 재활 스케줄

신규 추가

10

전체 일정 0000.00.00~0000.00.00

이름

환자 코드: W1234

총 달성률: ##%

질환 명: 알츠하이머

운동 명

00%

운동 명

00%

운동 명

00%

09

전체 일정 0000.00.00~0000.00.00

이름

환자 코드: W1234

총 달성률: ##%

질환 명: 알츠하이머

운동 명

00%

운동 명

00%

운동 명

00%

08

전체 일정 0000.00.00~0000.00.00

이름

환자 코드: W1234

총 달성률: ##%

질환 명: 알츠하이머

운동 명

00%

1. 스케줄

- 주/월 캘린더

> 오늘 날짜 : 일 뒤에 원으로 포커스

> 선택 날짜 : 해당 요일 박스 테두리

- default 월 캘린더

- 월 : 선택 요일 스케줄에 등록된 환자 수 표시

- 주 : 선택 요일 스케줄에 등록된 이름(국외 환자 : 이름 성), 표시

2. 요일 스케줄

- 선택한 요일 스케줄에 등록된 환자 리스트

> 이름(국외 환자 : 이름 성), 환자 코드, 질환

명(연구 환자일 경우 표시), 운동 전체 달성률

표시, 환자코드/질환 없을 경우 미표시

> 운동 명, 운동 달성률 표시

> 스케줄 등록된 환자의 스케줄 시작/종료일

- 환자 선택 시 환자 스케줄 화면으로 이동

SALTED

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

스케줄 추가

4

취소

추가

1

선택 날짜 :



2021.09

2021.10



2

환자 정보

일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토
29	30	31	1	2	3	4						1	2
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30

3

운동 리스트

선택

선택

- 스케줄
 - 2달씩 표시
 - 캘린더에서 시작 날짜, 종료 날짜 선택
 - 우측 ◀ ▶ Tap 시 2달 씩 이동
 - 시작 날짜를 종료 날짜 이후 선택 시 기존 선택 되었던 시작 날짜가 종료 날짜로 변경
- 환자 정보
 - 환자 선택
 - > 환자 선택 버튼 클릭 시 환자 선택 팝업 표시
 - 선택된 환자 정보 표시
 - > 이름(국외 환자 : 이름 성),
 - 연구 환자가 아닐 경우 질환 명 미표시
 - 환자코드/질환 명 없을 경우 미표시
- 운동 리스트
 - 운동 선택
 - > 운동 선택 버튼 클릭 시 운동 선택 팝업 표시
 - 선택된 운동 리스트 표시
- 버튼
 - 추가 : 해당 스케줄 추가 완료
 - 취소 : 취소

Page Description	스케줄 관리 > 신규 스케줄 추가 > 시작 종료 날짜 선택	Screen ID	HCP-W-07-03	Description
<div><div>SALTED</div><div>ooo님 환영합니다 로그아웃</div><div><div>홈</div><div>환자</div><div>스케줄</div><div>문의</div><div>통계</div><div>설정</div></div><div>스케줄 추가<div>취소</div><div>추가</div></div><div><div>선택 날짜 : 2021.09.20-2021.10.07</div><div><div><div>◀</div><div>2021.09</div><div>▶</div></div><div><div>일</div><div>월</div><div>화</div><div>수</div><div>목</div><div>금</div><div>토</div><div>일</div><div>월</div><div>화</div><div>수</div><div>목</div><div>금</div><div>토</div></div><div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>1</div><div>2</div></div><div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div><div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div></div><div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div></div><div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div></div></div><div>환자 정보</div><div>운동 리스트</div><div>선택</div></div></div>				

▲ 스크롤

환자 선택

1 전체 ▼ 검색어 조회

2 00건

No	이름	생년월일	최근 진단	등록 일	
20	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
19	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
18	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
17	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
16	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
15	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
14	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
13	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
12	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택
11	OOO	1900.00.00	2021.00.00	2021.00.00	선택

< 1 2 >

- 환자 조회
 - 검색 조건 : 전체, 이름, 생년월일
- 조회 결과
 - 전체 조회 건수 표시
 - patient app 과 매칭된 환자 리스트만 표시
 - 선택 버튼 클릭 시 환자 선택 팝업 닫힘, 선택된 환자 정보는 신규 스케줄 추가 환자 정보에 입력

운동 선택

1

전체 ▼

검색어

조회

2

00건

No	운동 종류	운동 명	운동 부위	
20	밸런스 운동	000	무릎, 어깨, 다리	<input type="checkbox"/>
19	보행 운동	000		<input checked="" type="checkbox"/>
18		000		<input checked="" type="checkbox"/>
17		000		<input checked="" type="checkbox"/>
16		000		<input type="checkbox"/>
15		000		<input type="checkbox"/>
14		000		<input type="checkbox"/>
13		000		<input type="checkbox"/>
12		000		<input type="checkbox"/>
11		000		<input type="checkbox"/>

<

1

2

>

선택

1. 운동 조회
- 검색 조건 : 전체, 운동명, 운동 부위
2. 조회 결과
- 전체 조회 건수 표시
- 운동 복수 선택
- 선택 후 선택 버튼 클릭 시 운동 리스트에 운동 추가

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

스케줄 추가

취소

추가

선택 날짜 : 2021.09.20-2021.10.07

2021.09

일

월

화

수

목

금

토

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2021.10

일

월

화

수

목

금

토

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

환자 정보

OOO

환자코드

A123456789

생년월일

1900.00.00

질환 명

OOOOO

환자 선택

운동 리스트

운동 리스트 추가

1

01 OOOO

삭제

운동 부위 : 무릎, 어깨, 다리, 발목, 배, 등

월

화

수

목

금

토

일

1세트 ▼

2분 ▼

동영상 촬영 ☐

도움말 입력해주세요

02 OOOO

삭제

운동 부위 : 무릎, 어깨, 다리, 발목, 배, 등

월

화

수

목

금

토

일

1세트 ▼

2분 ▼

동영상 촬영 ☐

1. 운동 정보

- 운동 선택에서 선택된 운동들 배치
- 운동 명, 운동 부위 표시
- 동영상 촬영 여부 선택
- 운동 요일, 세트, 시간 선택
 - > 운동 요일 복수개 선택 가능
 - > 운동 요일은 월/수/금 이나 스케줄이 화요일부터 시작할 경우, 운동은 수요일부터 배치
 - > 운동 시간 : 30초/1분/1분 30초/2분 선택
- 도움말 입력 가능
- 바 우측 '='버튼을 이용하여 순서 변경 가능
- 운동명 우측 삭제 버튼을 이용하여 운동 삭제

Page Description

스케줄 관리 > 스케줄 상세 정보 및 수정(오늘 및 이전 날짜 선택)

Screen ID

HCP-W-07-07

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

스케줄 추가

4

취소

수정

1

선택 날짜 : 2021.09.20-2021.10.07

2021.09

2021.10

일

월

화

수

목

금

토

일

월

화

수

목

금

토

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

환자 정보

OOO

환자코드

생년월일

질환 명

A123456789

1900.00.00

OOOOO

3

운동 리스트

01 OOOO

운동 부위 : 무릎, 어깨, 다리, 발목, 배, 등

월

화

수

목

금

토

일

1세트

2분

동영상 촬영

도움말 입력해주세요

02 OOOO

운동 부위 : 무릎, 어깨, 다리, 발목, 배, 등

월

화

수

목

금

토

일

1세트

2분

동영상 촬영

1. 스케줄

- 종료 날짜를 오늘 및 이전 날짜로 변경 불가

2. 환자 정보

- 환자 정보 수정 불가

3. 운동 정보

- 오늘 및 이전 날짜

> 운동 추가 불가, 운동 선택 버튼 미노출

> 동영상 촬영 여부, 운동 요일, 운동 세트 수정 불가

> 도움말 수정 불가

> 운동 순서 변경, 삭제 버튼 미노출

- 오늘 이후 날짜

> 운동 추가 가능

> 운동 요일, 운동 세트 수정 가능

> 도움말 수정 가능

4. 버튼

- 수정 : 수정 완료 후 이전 화면으로 이동

- 취소 : 수정 취소 후 이전 화면으로 이동

- 스케줄
 - 종료 날짜를 오늘 및 이전 날짜로 변경 불가
- 환자 정보
 - 환자 정보 수정 불가
- 운동 정보
 - 오늘 및 이전 날짜
 - > 운동 추가 불가, 운동 선택 버튼 미노출
 - > 동영상 촬영 여부, 운동 요일, 운동 세트 수정 불가
 - > 도움말 수정 불가
 - > 운동 순서 변경, 삭제 버튼 미노출
 - 오늘 이후 날짜
 - > 운동 추가 가능
 - > 운동 요일, 운동 세트 수정 가능
 - > 도움말 수정 가능
- 버튼
 - 수정 : 수정 완료 후 이전 화면으로 이동
 - 취소 : 수정 취소 후 이전 화면으로 이동

문의

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

1 전체 ▼

2 전체 ▼

3

검색

4 NO	문의 내용	이름	운동명	작성일시	5 답변상태
38		홍길동		2021.07.27	답변대기
37		사공민아		2021.07.27	임시저장
36		김민준		2021.07.27	답변완료
35		김민지		2021.07.27	
34		이무개		2021.07.27	
33		제갈훈		2021.07.27	
32		유병규		2021.07.27	
31		박지혜		2021.07.27	
30		김상환		2021.07.27	
29		정수화		2021.07.27	

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

- 검색 조건 1
 - 답변 상태 : 전체, 미확인, 임시저장, 답변완료
- 검색 조건 2
 - 운동 : 전체, 운동1, 운동2, 운동3...
- 검색
 - 이름
- 리스트
 - 문의 내용, 이름, 운동명, 작성일시, 답변 상태
 - > 문의 내용이 길면 '...'처리 및 1줄 표시
 - 리스트에서 국가에 따른 이름 구분
 - > 한국 : 이름 표시
 - > 국외 : 이름 표시(성 제외)
 - 리스트 행 선택 시 답변 화면으로 이동
- 답변 상태
 - 문의글 미확인/미답변 : 답변대기
 - 문의글 임시저장 : 임시저장
 - 문의글 답변완료 : 답변완료

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

문의 글

1

운동 명		환자코드	W1234	이름	제갈훈	성별	남	생년월일	1990.00.00	작성 일시	2021.11.01 00:00:00
------	--	------	-------	----	-----	----	---	------	------------	-------	------------------------

2

문의 내용	
-------	--

첨부 파일	admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg
-------	--

3

답변 내용	
-------	--

첨부 파일	<div>파일 선택</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div>
-------	---

4

취소

임시저장

답변 등록

- 환자 정보
 - 환자코드, 이름, 성별, 작성 일시, 운동명 표시
- 문의 내용
 - 환자가 등록한 문의 내용 및 첨부 파일 표시
 - 첨부파일 클릭 시 다운로드
- 답변 내용
 - 답변 내용 작성
 - 첨부파일 : 5개까지 등록 가능
 - > 용량 정의 필요
- 버튼
 - 취소 : 문의 답변 작성 취소 후 이전 화면으로 이동
 - 임시저장 : 문의 글 저장, 답변 등록하지 않음, 답변 내용 수정 가능
 - 답변 등록 : 답변 등록
 - > 답변 등록 시 patient APP으로 알림 전송

 생년월일 추가
(2021.11.30)
SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

문의 글

1

운동 명		환자코드	W1234	이름	훈	성	제갈	성별	남	생년월일	1990.00.00	작성 일시	2021.11.01 00:00:00
------	--	------	-------	----	---	---	----	----	---	------	------------	-------	------------------------

2

문의 내용

첨부 파일

admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg
admin_registered_image.jpeg

3

답변 내용

첨부 파일

파일 선택

admin_registered_image.jpeg X

admin_registered_image.jpeg X

admin_registered_image.jpeg X

admin_registered_image.jpeg X

admin_registered_image.jpeg X

4

취소

임시저장

답변 등록

- 환자 정보
 - 환자코드, 이름, 성, 성별, 작성 일시, 운동명 표시
- 문의 내용
 - 환자가 등록한 문의 내용 및 첨부 파일 표시
 - 첨부파일 클릭 시 다운로드
- 답변 내용
 - 답변 내용 작성
 - 첨부파일 : 5개까지 등록 가능
 - > 용량 정의 필요
- 버튼
 - 취소 : 문의 답변 작성 취소 후 이전 화면으로 이동
 - 임시저장 : 문의 글 저장, 답변 등록하지 않음, 답변 내용 수정 가능
 - 답변 등록 : 답변 등록
 - > 답변 등록 시 patient APP으로 알림 전송

생년월일 추가
(2021.11.30)

SALTED



ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

문의 글

운동 명		환자코드	W1234	이름	훈	성	제갈	성별	남	생년월일	1990.00.00	작성 일시	2021.11.01 00:00:00
문의 내용													
첨부 파일	admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg												
1 답변 내용 (2021.11.01 00:00:00)													
첨부 파일	admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg												

1. 답변 내용
- 답변 등록 날짜 및 시간 표시
- 첨부파일 다운로드 가능
2. 확인 버튼
- 이전 화면으로 이동
3. 수정 버튼
- 수정 화면으로 변경

생년월일 추가
(2021.11.30)

3 수정

2 확인



Page Description

문의 > 답변 수정 (답변 상태 : 답변완료)

Screen ID

HCP-W-08-3

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

문의 글

운동 명		환자코드	W1234	이름	제갈훈	성별	남	생년월일	1990.00.00	작성 일시	2021.11.01 00:00:00
문의 내용											
첨부 파일	admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg admin_registered_image.jpeg										
답변 내용 (2021.11.01 00:00:00)											
첨부 파일	<div>파일 선택</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div> <div>admin_registered_image.jpeg X</div>										

1

취소

수정 완료

1. 버튼

- 수정 완료 : 답변 수정 완료 후 이전 화면으로 이동

> 수정된 날짜 및 시간으로 답변 날짜 변경

- 취소 : 답변 수정 취소 후 이전 화면으로 이동

생년월일 추가
(2021.11.30)

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호

대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F

© Copyright 2021 SALTED.LTD

CES

Consumer Technology Association

ISPO Munich

통계

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃


홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계 운동 통계 환자별 통계					

기간	<input type="radio"/> 1개월 <input type="radio"/> 3개월 <input type="radio"/> 6개월 <input type="radio"/> 1년 <input type="radio"/> 직접설정 <div>2021.09.01 - 2021.09.30</div>
성별	<input type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 남자 <input type="radio"/> 여자 <div>연령대</div> <input type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 10대 <input type="radio"/> 20대 <input type="radio"/> 30대 <input type="radio"/> 40대 <input type="radio"/> 50대 <input type="radio"/> 60대 <input type="radio"/> 70대 <input type="radio"/> 80대 <input type="radio"/> 90대

통계 다운로드

조회

초기화

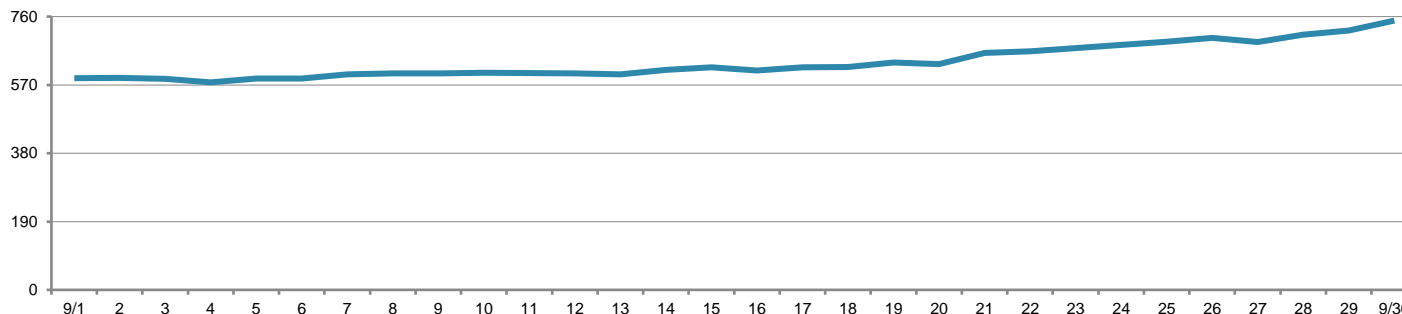

	전체 환자 수	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대
09/30	749	300	449	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/29	721	300	421	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/28	710	300	410	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/27	689	289	400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/26	701	270	431	000	000	000	000	000	000	000	000	000

- 통계 조건
 - 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
 - 성별 : 전체, 남자, 여자
 - 연령대 : 전체, 10~90대
- 조회, 초기화
 - 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
 - 초기화 : 통계 초기화
- 통계 다운로드
 - 조회된 통계 자료 다운로드
- 차트
 - 다음장에 설명
- 데이터
 - 다음장에 설명

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1. 성별 : 전체, 연령대 : 전체
- 차트 : 전체 환자 수 표시
- 데이터 : 전체 환자 수/남자/여자/ 전체 연령대 표시

	전체 환자 수	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대
09/30	749	300	449	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/29	721	300	421	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/28	710	300	410	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/27	689	289	400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/26	701	270	431	000	000	000	000	000	000	000	000	000

2. 성별 : 남자or여자, 연령대 : 전체
- 차트 : 선택 성별의 환자수 표시
- 데이터 : 남자or여자 수 / 남자or여자 전체 연령대 표시

	남자or여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대
09/30	300	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/29	300	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/28	300	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/27	289	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/26	270	000	000	000	000	000	000	000	000	000

3. 성별 : 남자or여자, 연령대 : 선택 선택
- 차트 : 선택 성별의 선택 연령대 환자수 표시
- 데이터 : 남자or여자 특정 연령대 표시

	10대
09/30	000
09/29	000
09/28	000
09/27	000
09/26	000

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃


홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계 운동 통계 환자별 통계					

기간	<input type="radio"/> 1개월 <input type="radio"/> 3개월 <input type="radio"/> 6개월 <input type="radio"/> 1년 <input type="radio"/> 직접설정 <div>2021.09.01 - 2021.09.30</div>
질환	<input type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 선택 <div>질환 명 ▼</div> <div>성별</div> <input type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 남자 <input type="radio"/> 여자
연령대	<input type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 10대 <input type="radio"/> 20대 <input type="radio"/> 30대 <input type="radio"/> 40대 <input type="radio"/> 50대 <input type="radio"/> 60대 <input type="radio"/> 70대 <input type="radio"/> 80대 <input type="radio"/> 90대

통계 다운로드

조회

초기화

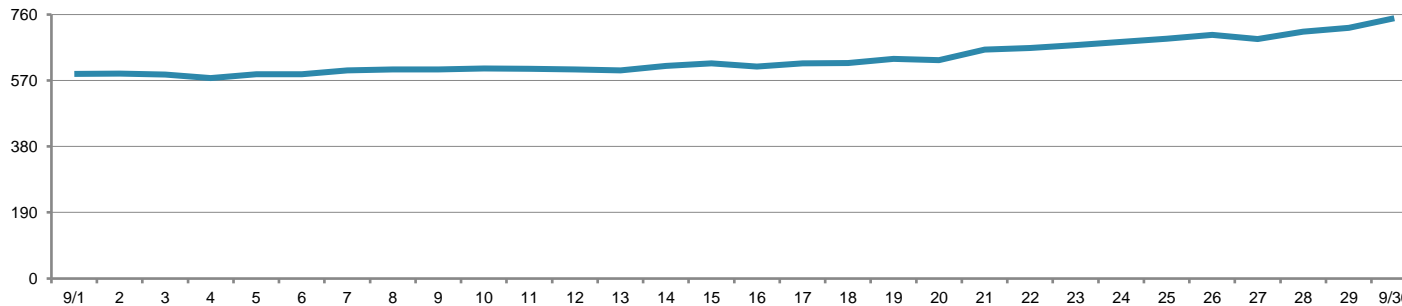

	질환 명 환자 수	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대
09/30	749	300	449	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/29	721	300	421	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/28	710	300	410	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/27	689	289	400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/26	701	270	431	000	000	000	000	000	000	000	000	000

- 통계 조건
 - 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - 직접 설정 : 시작/종료일 선택
 - 질환 : 전체, 질환 선택
 - 성별 : 전체, 남자, 여자
 - 연령대 : 전체, 10~90대
- 조회, 초기화
 - 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
 - 초기화 : 통계 초기화
- 통계 다운로드
 - 조회된 통계 자료 다운로드
- 차트
 - 조회된 환자수 표시
- 데이터
 - 질환 : 전체, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - 질환 명 전체 환자 수/남자/여자/ 전체 연령대 표시
 - 질환 : 전체, 성별 : 남자or여자, 연령대 : 특정 연령대 선택
 - 전체 질환에 해당 되는 남자or여자 수 / 남자or여자 전체 연령대 표시
 - 질환 : 전체, 성별 : 남자or여자, 특정 연령대 선택
 - 선택 질환에 해당 되는 남자or여자 수 / 남자or여자 특정 연령대 표시

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



Page Description	환자 통계(일반 환자)-조건별 결과	Screen ID	Description																																																																														
<div>1. 질환 : 전체 성별 : 전체, 연령대 : 전체</div> <div>- 차트 : 전체 질환 환자 수 표시</div> <div>- 데이터 : 전체 환자 수/남자/여자/ 전체 연령대 표시</div> <table><tr><th></th><th>전체 환자 수</th><th>남자</th><th>여자</th><th>10대</th><th>20대</th><th>30대</th><th>40대</th><th>50대</th><th>60대</th><th>70대</th><th>80대</th><th>90대</th></tr><tr><td>09/30</td><td>749</td><td>300</td><td>449</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr><tr><td>09/29</td><td>721</td><td>300</td><td>421</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr><tr><td>09/28</td><td>710</td><td>300</td><td>410</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr><tr><td>09/27</td><td>689</td><td>289</td><td>400</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr><tr><td>09/26</td><td>701</td><td>270</td><td>431</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr></table>					전체 환자 수	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대	09/30	749	300	449	000	000	000	000	000	000	000	000	000	09/29	721	300	421	000	000	000	000	000	000	000	000	000	09/28	710	300	410	000	000	000	000	000	000	000	000	000	09/27	689	289	400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	09/26	701	270	431	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	전체 환자 수	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대																																																																					
09/30	749	300	449	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																																					
09/29	721	300	421	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																																					
09/28	710	300	410	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																																					
09/27	689	289	400	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																																					
09/26	701	270	431	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																																					
<div>2. 질환 : 선택, 성별 : 전체, 연령대 : 전체</div> <div>- 차트 : 선택 질환 환자 수 표시</div> <div>- 데이터 : 선택 질환 환자 수/남자/여자/ 전체 연령대 표시</div> <table><tr><th></th><th>환자 수</th><th>남자</th><th>여자</th><th>10대</th><th>20대</th><th>30대</th><th>40대</th><th>50대</th><th>60대</th><th>70대</th><th>80대</th><th>90대</th></tr><tr><td>09/30</td><td>749</td><td>300</td><td>449</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr></table>					환자 수	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대	09/30	749	300	449	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																				
	환자 수	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대																																																																					
09/30	749	300	449	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																																					
<div>3. 질환 : 전체, 성별 : 남자or여자, 연령대 : 전체</div> <div>- 차트 : 전체 질환의 선택 성별의 환자수 표시</div> <div>- 데이터 : 남자or여자 수 / 남자or여자 전체 연령대 표시</div> <table><tr><th></th><th>남자or여자</th><th>10대</th><th>20대</th><th>30대</th><th>40대</th><th>50대</th><th>60대</th><th>70대</th><th>80대</th><th>90대</th></tr><tr><td>09/30</td><td>300</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr><tr><td>09/29</td><td>300</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr><tr><td>09/28</td><td>300</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr><tr><td>09/27</td><td>289</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr><tr><td>09/26</td><td>270</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr></table>					남자or여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대	09/30	300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	09/29	300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	09/28	300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	09/27	289	000	000	000	000	000	000	000	000	000	09/26	270	000	000	000	000	000	000	000	000	000												
	남자or여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대																																																																							
09/30	300	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																																							
09/29	300	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																																							
09/28	300	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																																							
09/27	289	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																																							
09/26	270	000	000	000	000	000	000	000	000	000																																																																							
<div>4. 질환 선택, 성별 : 남자or여자, 연령대 : 선택 선택</div> <div>- 차트 : 선택 질환,선택 성별의 선택 연령대 환자수 표시</div> <div>- 데이터 : 남자or여자 특정 연령대 표시</div> <table><tr><th></th><th>10대</th></tr><tr><td>09/30</td><td>000</td></tr><tr><td>09/29</td><td>000</td></tr></table>					10대	09/30	000	09/29	000																																																																								
	10대																																																																																
09/30	000																																																																																
09/29	000																																																																																

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃


홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계 운동 통계 환자별 통계					

통계 종류	● 운동 처방 ○ 운동 달성률										
기간	○ 1개월 ○ 3개월 ○ 6개월 ○ 1년 ○ 직접설정 2021.09.01 - 2021.09.30										
재활 운동	○ 전체 ○ 보행 운동 ○ 앉았다 일어서기 ○ 보행 운동 ○ 앉았다 일어서기 ○ 운동 명 ○ 운동 명										
성별	○ 전체 ○ 남자 ○ 여자										
연령대	○ 전체 ○ 10대 ○ 20대 ○ 30대 ○ 40대 ○ 50대 ○ 60대 ○ 70대 ○ 80대 ○ 90대										

통계 다운로드

조회

초기화

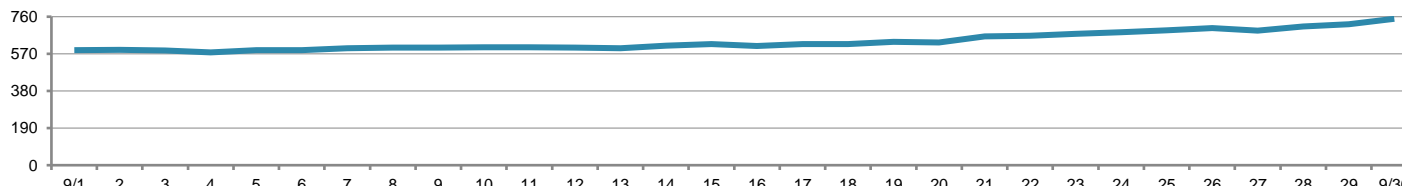

	전체 환자	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대
09/30	749	300	449	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/29	721	300	421	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/28	710	300	410	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/27	689	289	400	000	000	000	000	000	000	000	000	000
09/26	701	270	431	000	000	000	000	000	000	000	000	000

1. 통계 조건

- 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
- 재활 운동 : 전체, 운동 명 선택
- 성별 : 전체, 남자, 여자
- 연령대 : 전체, 10~90대

2. 조회, 초기화

- 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
- 초기화 : 통계 초기화

3. 통계 다운로드

- 조회된 통계 자료 다운로드

4. 차트

- 처방된 운동 수 표시

5. 차트&데이터

- 재활 운동 : 전체, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방 환자 수(차트 및 표에 표시)
 - > 남자/여자/ 전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 전체, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방 된 환자 수(차트 및 표에 표시)
 - > 남자/여자/ 전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 선택 운동 처방 된 환자 수
 - > 남자/여자/전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 전체
 - > 선택 운동 처방 된 환자 수
 - > 선택 성별/전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 선택
 - > 선택 운동 처방 된 선택 성별 환자 수
 - > 선택 연령대 표시

SALTED

SALTED

○○○님 환영합니다 | 로그아웃


홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계	운동 통계	환자별 통계			

통계 종류	● 운동 처방 ○ 운동 달성률											
기간	○ 1개월 ○ 3개월 ○ 6개월 ○ 1년 ○ 직접설정 2021.09.01 - 2021.09.30											
재활 운동	○ 전체 ○ 보행 운동 ○ 앉았다 일어서기 ○ 보행 운동 ○ 앉았다 일어서기 ○ 운동 명 ○ 운동 명											
질환	○ 전체 ○ 선택 질환 명 ▼ ○ 전체 ○ 남자 ○ 여자											
연령대	○ 전체 ○ 10대 ○ 20대 ○ 30대 ○ 40대 ○ 50대 ○ 60대 ○ 70대 ○ 80대 ○ 90대											

통계 다운로드

조회

초기화

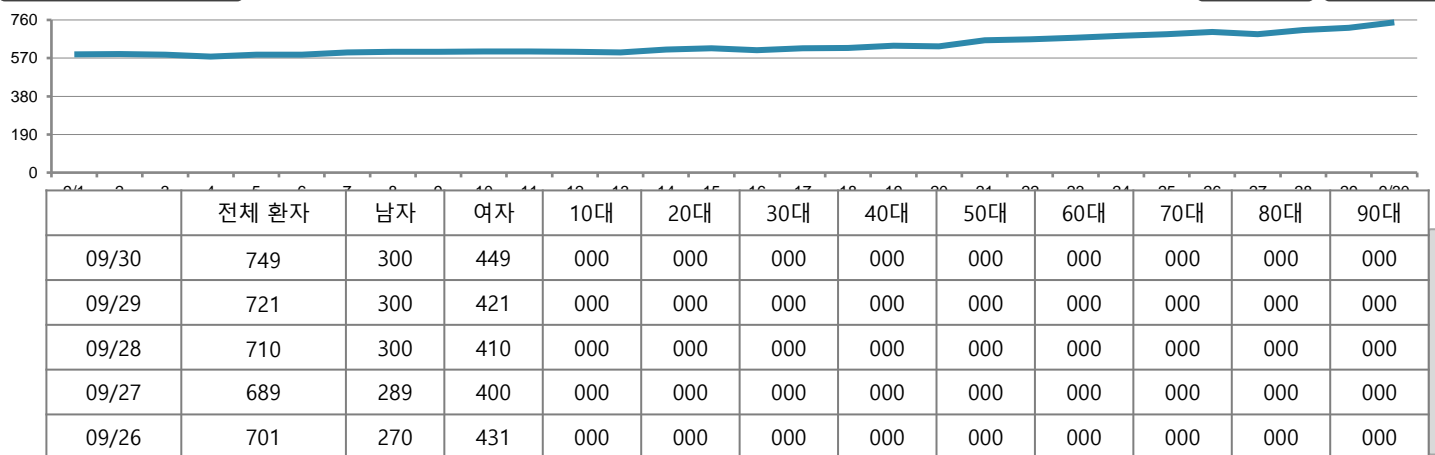

1. 통계 조건

- 통계 종류 : 운동처방, 운동 달성률
- 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
- 재활 운동 : 전체, 운동 명 선택
- 질환 : 전체, 질환 선택
- 성별 : 전체, 남자, 여자
- 연령대 : 전체, 10~90대

2. 조회, 초기화

- 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
- 초기화 : 통계 초기화

3. 통계 다운로드

- 조회된 통계 자료 다운로드

4. 차트

- 조회된 환자수 표시

5. 데이터

- 재활 운동 : 전체, 질환 : 전체, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방&전체 질환 수 환자 수
 - > 남자/여자/ 전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 전체, 질환 : 선택, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방 된 환자에서 선택 질환을 가진 환자 수
 - > 남자/여자/ 전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 전체, 질환 : 선택, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방 된 환자에서 선택 질환을 가진 환자 수
 - > 남자/여자/ 전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 선택, 질환 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 전체
 - > 선택 운동 처방 된 환자에서 선택 질환을 가진 환자 수
 - > 선택 성별/전체 연령대 표시
- 재활 운동 : 선택, 질환 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 선택
 - > 선택 운동 처방 된 환자에서 선택 질환을 가진 환자 수
 - > 선택 성별/선택 연령대 표시

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃


홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계 운동 통계 환자별 통계					

통계 종류	○ 운동 처방 • 운동 달성률											
기간	○ 1개월 ○ 3개월 ○ 6개월 ○ 1년 ○ 직접설정 2021.09.01 - 2021.09.30											
재활 운동	○ 전체 ○ 보행 운동 ○ 앉았다 일어서기 ○ 보행 운동 ○ 앉았다 일어서기 ○ 운동 명 ○ 운동 명											
성별	○ 전체 ○ 남자 ○ 여자											
연령대	○ 전체 ○ 10대 ○ 20대 ○ 30대 ○ 40대 ○ 50대 ○ 60대 ○ 70대 ○ 80대 ○ 90대											

통계 다운로드

조회

초기화

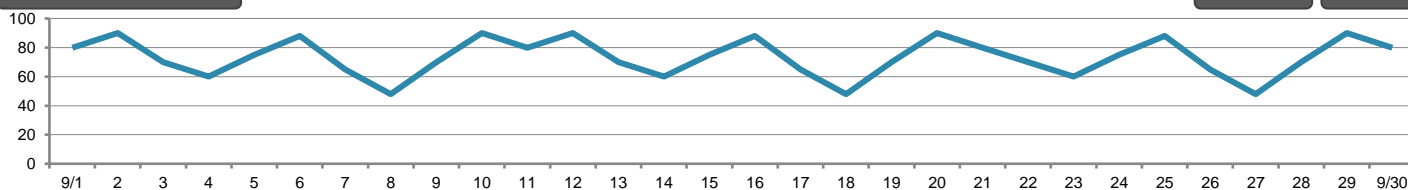

	달성률	남자	여자	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대
09/30	90%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/29	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/28	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/27	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/26	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%

1. 통계 조건

- 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
- > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
- 재활 운동 : 전체, 운동 명 선택
- 성별 : 전체, 남자, 여자
- 연령대 : 전체, 10~90대

2. 조회, 초기화

- 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
- 초기화 : 통계 초기화

3. 통계 다운로드

- 조회된 통계 자료 다운로드

4. 차트

- 운동 달성률 표시

5. 차트&데이터

- 재활 운동 : 전체, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
- > 전체 운동 처방 환자 달성률(차트 및 표에 표시)
- > 남자/여자/ 전체 연령대 달성률 표시
- 재활 운동 : 전체, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
- > 전체 운동 처방 된 환자 달성률(차트 및 표에 표시)
- > 남자/여자/ 전체 연령대 달성률 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
- > 선택 운동 처방 된 환자 달성률
- > 남자/여자/전체 연령대 달성률 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 전체
- > 선택 운동 처방 된 환자 달성률
- > 선택 성별/전체 연령대 달성률 표시
- 재활 운동 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 선택
- > 선택 운동 처방 된 선택 성별 환자 달성률
- > 선택 연령대 달성률 표시

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD





ooo님 환영합니다 | 로그아웃


홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계 운동 통계 환자별 통계					

통계 종류	<input type="radio"/> 운동 처방 <input checked="" type="radio"/> 운동 달성률									
기간	<input type="radio"/> 1개월	<input type="radio"/> 3개월	<input type="radio"/> 6개월	<input type="radio"/> 1년	<input type="radio"/> 직접설정	<div>2021.09.01</div>	-	<div>2021.09.30</div>		
재활 운동	<input type="radio"/> 전체	<input type="radio"/> 보행 운동	<input type="radio"/> 앉았다 일어서기	<input type="radio"/> 보행 운동	<input type="radio"/> 앉았다 일어서기	<input type="radio"/> 운동 명	<input type="radio"/> 운동 명			
질환	<input type="radio"/> 전체	<input type="radio"/> 선택	<div>질환 명 ▼</div>	<div>성별</div>	<input type="radio"/> 전체	<input type="radio"/> 남자	<input type="radio"/> 여자			
연령대	<input type="radio"/> 전체	<input type="radio"/> 10대	<input type="radio"/> 20대	<input type="radio"/> 30대	<input type="radio"/> 40대	<input type="radio"/> 50대	<input type="radio"/> 60대	<input type="radio"/> 70대	<input type="radio"/> 80대	<input type="radio"/> 90대

통계 다운로드

조회

초기화

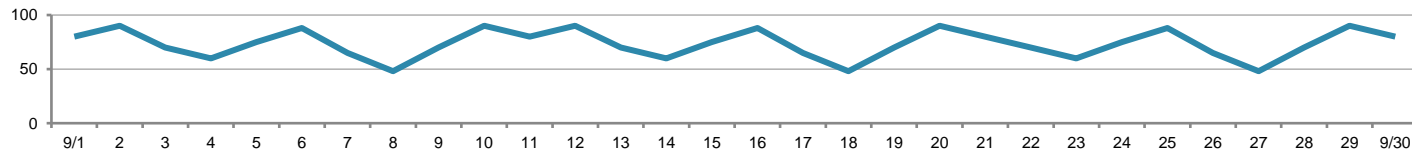[illegible]


1. 통계 조건
 - 통계 종류 : 운동처방, 운동 달성률
 - 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
 - 재활 운동 : 전체, 운동 명 선택
 - 질환 : 전체, 질환 선택
 - 성별 : 전체, 남자, 여자
 - 연령대 : 전체, 10~90대
2. 조회, 초기화
 - 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
 - 초기화 : 통계 초기화
3. 통계 다운로드
 - 조회된 통계 자료 다운로드
4. 차트
5. 데이터
 - 재활 운동 : 전체, 질환 : 전체, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방&전체 질환 수 환자 수
 - > 남자/여자/ 전체 연령대 표시
 - 재활 운동 : 전체, 질환 : 선택, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방 된 환자에서 선택 질환을 가진 환자 수
 - > 남자/여자/ 전체 연령대 표시
 - 재활 운동 : 전체, 질환 : 선택, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 전체 운동 처방 된 환자에서 선택 질환을 가진 환자 수
 - > 남자/여자/전체 연령대 표시
 - 재활 운동 : 선택, 질환 : 선택, 성별 : 전체, 연령대 : 전체
 - > 선택 운동 처방 된 환자에서 선택 질환을 가진 환자 수
 - > 남자/여자/전체 연령대 표시
 - 재활 운동 : 선택, 질환 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 전체
 - > 선택 운동 처방 된 환자에서 선택 질환을 가진 환자 수
 - > 선택 성별/전체 연령대 표시
 - 재활 운동 : 선택, 질환 : 선택, 성별 : 선택, 연령대 : 선택
 - > 선택 운동 처방 된 환자에서 선택 질환을 가진 환자 수
 - > 선택 성별/선택 연령대 표시

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계 운동 통계 환자별 통계					

환자	선택	이름 : OOO 생년월일 : 1900.00.00	환자코드 : A123456789	질환 명 : OOOOO
기간	<input type="radio"/> 1개월 <input type="radio"/> 3개월 <input type="radio"/> 6개월 <input type="radio"/> 1년 <input type="radio"/> 지난달 <input type="radio"/> 작년 <input type="radio"/> 직접설정	2021.09.01 - 2021.09.30		
재활 운동	<input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 보행 운동 <input type="radio"/> 앉았다 일어서기 <input type="radio"/> 보행 운동 <input type="radio"/> 앉았다 일어서기 <input type="radio"/> 운동 명 <input type="radio"/> 운동 명			
통계 다운로드		<div>조회</div> <div>초기화</div>		

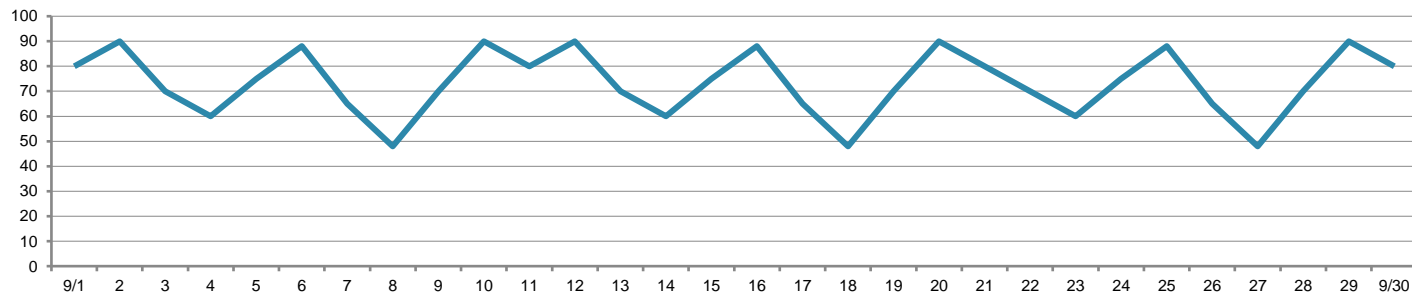

	평균 달성률	운동명1	운동명2	운동명3	운동명4	운동명5
09/30	90%	00%	00%	00%	00%	00%
09/29	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/28	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/27	00%	00%	00%	00%	00%	00%
09/26	00%	00%	00%	00%	00%	00%

- 통계 조건
 - 환자 : 환자 선택
 - > 환자 선택 시 환자 선택 팝업 표시(스케줄의 환자선택 팝업과 동일)
 - 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
 - 재활 운동 : 전체, 운동 명 선택
- 조회, 초기화
 - 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
 - 초기화 : 통계 초기화
- 통계 다운로드
 - 조회된 통계 자료 다운로드
- 차트
 - 조회된 환자수 표시
- 데이터
 - 전체 운동 평균 달성률, 개별 운동 달성률

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃


홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
환자 통계 운동 통계 환자별 통계					

환자	선택	이름 : OOO 생년월일 : 1900.00.00 환자코드 : A123456789 질환 명 : OOOOO			
기간	<input type="radio"/> 1개월 <input type="radio"/> 3개월 <input type="radio"/> 6개월 <input type="radio"/> 1년 <input type="radio"/> 지난달 <input type="radio"/> 작년 <input type="radio"/> 직접설정	2021.09.01 - 2021.09.30			
재할 운동	<input type="radio"/> 전체 <input checked="" type="radio"/> 보행 운동 <input type="radio"/> 앉았다 일어서기 <input type="radio"/> 보행 운동 <input type="radio"/> 앉았다 일어서기 <input type="radio"/> 운동 명 <input type="radio"/> 운동 명				

통계 다운로드

조회

초기화

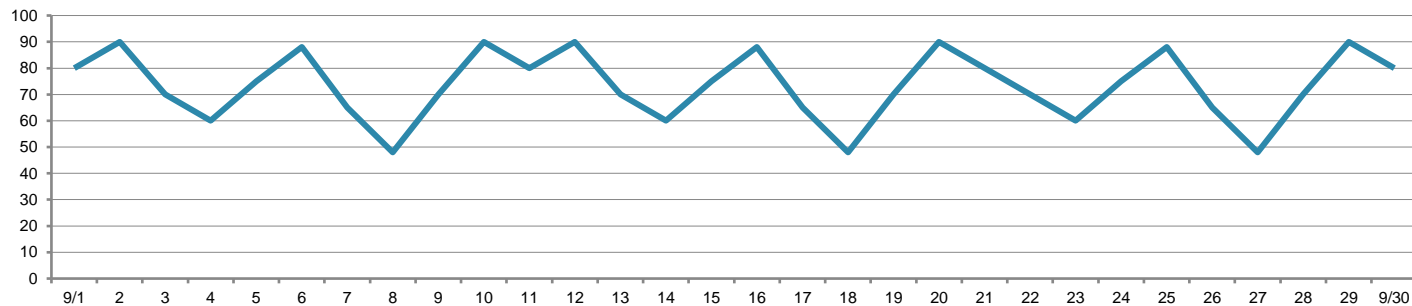

	보행운동
09/30	00%
09/29	00%
09/28	00%
09/27	00%
09/26	00%

- 통계 조건
 - 환자 : 환자 선택
 - > 환자 선택 시 환자 선택 팝업 표시
 - 기간 조회 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 직접 설정
 - > 직접 설정 : 시작/종료일 선택
 - 재할 운동 : 전체, 운동 명 선택
- 조회, 초기화
 - 조회 : 설정 값을 이용하여 조회
 - 초기화 : 통계 초기화
- 통계 다운로드
 - 조회된 통계 자료 다운로드
- 차트
 - 조회된 환자수 표시
- 데이터
 - 선택 운동 달성률

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



설정

Page Description

설정 > 계정 정보

Screen ID

HCP-W-10

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

계정 정보 | 공지사항 | 자주 묻는 질문 | 시스템 문의 | 이용약관 | 개인정보처리방침

계정 정보

1

수정

2

국가

한국

이름

제갈훈

이메일

hoon.jg@salted.ltd

비밀번호

●●●●●●●●

휴대폰 번호

01012345678

계정 코드

SULASN123456

직군

의료진

3

의료진 계정 삭제

1. 클릭 시 “계정 정보 수정” 페이지 로드

2. 회원정보 출력

3. 클릭 시 “의료진 계정 삭제” 페이지 로드

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

CES

Consumer Technology Association

ISPO Munich

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
계정 정보	공지사항	자주 묻는 질문	시스템 문의	이용약관	개인정보처리방침

1 계정 정보 수정

2

취소

3

저장

국가 한국

이름 제갈훈

이메일 hoon.jg@salted.ltd

4

비밀번호

a

비밀번호를 입력해 주세요.

b

비밀번호를 한 번 더 입력해 주세요.

5

휴대폰 번호

휴대폰 번호를 입력해 주세요.

계정 코드 SULASN123456

직군



의료진



간호사



물리치료사



직접 입력

6

진료과를 직접 입력해 주세요.

1. "계정 정보 수정"으로 바뀐 타이틀
2. 1) 수정 내역이 없는 상태에서 버튼 클릭 시 "계정 정보" 페이지 로드
2) 수정 내역이 있는 상태에서 버튼 클릭 시 변경 내용 폐기 Confirm 팝업: "정보 수정을 취소하고 변경 사항을 폐기하시겠습니까?; 이 작업은 복구할 수 없습니다.: 수정 계속, 변경사항 폐기"
3. 버튼 클릭 시 내용 저장, "계정 정보" 페이지 로드
4. 1) [a], [b]를 입력하지 않은 상태에서 정보 수정 및 저장 가능
2) [a], [b] 중 하나를 입력하지 않은 상태에서 후 "저장" 버튼 클릭 시 Alert: "변경할 비밀번호가 입력되지 않았습니다."
3) [a], [b]의 입력 내용이 다를 경우 [a] 아래에 가이드 문구 출력: "비밀번호가 일치하지 않습니다."
4) [a], [b]의 입력 내용이 같을 경우 [a] 아래에 가이드 문구 출력: "비밀번호가 일치합니다."
5. 1) 11자 제한, 숫자만 입력 가능
2) 유효성 체크
> 앞 3자리 010, 나머지 8자 입력
3) 유효성이 맞지 않는 휴대폰 번호 입력 시 text box 하단 안내 문구 표시: "유효하지 않은 번호입니다. 입력하신 내용을 다시 한 번 확인해 주세요."
6. 1) 직군 "직접 입력" 라디오 선택 시 텍스트필드 활성화
2) 특수문자, 이모지 입력 불가

SALTED

Page Description	설정 > 계정 정보 (국가 : 국외)	Screen ID	HCP-W-10-3	Description
<div> <div>SALTED</div> <div>ooo님 환영합니다 로그아웃</div> </div> <div> <div> <div>홈</div> <div>환자</div> <div>스케줄</div> <div>문의</div> <div>통계</div> <div>설정</div> </div> <div> <div>계정 정보</div> <div>공지사항</div> <div>자주 묻는 질문</div> <div>시스템 문의</div> <div>이용약관</div> <div>개인정보처리방침</div> </div> </div> <div> <div> <div>계정 정보</div> <div>수정</div> </div> <div> <div> <div>국가</div> <div>한국 외</div> </div> <div> <div>이름</div> <div>훈성제갈</div> </div> <div> <div>이메일</div> <div>hoon.jg@salted.ltd</div> </div> <div> <div>비밀번호</div> <div>●●●●●●●●</div> </div> <div> <div>휴대폰 번호</div> <div>01012345678</div> </div> <div> <div>계정 코드</div> <div>SULASN123456</div> </div> <div> <div>직군</div> <div>의료진</div> </div> <div> <div>의료진 계정 삭제</div> </div> </div> </div>				<div> <div>1. 클릭 시 "계정 정보 수정" 페이지 로드</div> <div>2. 회원정보 출력</div> <div>3. 클릭 시 "의료진 계정 삭제" 페이지 로드</div> </div>
<div> <div>SALTED</div> <div> <div>사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호</div> <div>대표자 : 조형진 개인정보보호 책임자 : 김대성 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F</div> <div>© Copyright 2021 SALTED.LTD</div> </div> <div> <div>CES</div> <div>Consumer Technology Association</div> <div>ISPO Munich</div> </div> </div>				79

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
계정 정보	공지사항	자주 묻는 질문	시스템 문의	이용약관	개인정보처리방침

1 계정 정보 수정

2

취소

3

저장

국가 한국 외

이름 훈 성 제갈

이메일 hoon.jg@salted.ltd

4

비밀번호

a

비밀번호를 입력해 주세요.

b

비밀번호를 한 번 더 입력해 주세요.

5

휴대폰 번호

휴대폰 번호를 입력해 주세요.

계정 코드 SULASN123456

직군



의료진



물리치료사



운동치료사



직접 입력

6

진료과를 직접 입력해 주세요.

1. "계정 정보 수정"으로 바뀐 타이틀
2. 1) 수정 내역이 없는 상태에서 버튼 클릭 시 "계정 정보" 페이지 로드
2) 수정 내역이 있는 상태에서 버튼 클릭 시 변경 내용 폐기 Confirm 팝업: "정보 수정을 취소하고 변경 사항을 폐기하시겠습니까?; 이 작업은 복구할 수 없습니다.: 수정 계속, 변경사항 폐기"
3. 버튼 클릭 시 내용 저장, "계정 정보" 페이지 로드
4. 1) [a], [b]를 입력하지 않은 상태에서 정보 수정 및 저장 가능
2) [a], [b] 중 하나를 입력하지 않은 상태에서 후 "저장" 버튼 클릭 시 Alert: "변경할 비밀번호가 입력되지 않았습니다."
3) [a], [b]의 입력 내용이 다를 경우 [a] 아래에 가이드 문구 출력: "비밀번호가 일치하지 않습니다."
4) [a], [b]의 입력 내용이 같을 경우 [a] 아래에 가이드 문구 출력: "비밀번호가 일치합니다."
5. 1) 11자 제한, 숫자만 입력 가능
2) 유효성 체크
> 앞 3자리 010, 나머지 8자 입력
3) 유효성이 맞지 않는 휴대폰 번호 입력 시 text box 하단 안내 문구 표시: "유효하지 않은 번호입니다. 입력하신 내용을 다시 한 번 확인해 주세요."
6. 1) 직군 "직접 입력" 라디오 선택 시 텍스트필드 활성화
2) 특수문자, 이모지 입력 불가

SALTED

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
계정 정보	공지사항	자주 묻는 질문	시스템 문의	이용약관	개인정보처리방침

회원 탈퇴

의료진 계정은 환자의 민감정보 보호를 위해 삭제 후 동일한 계정으로 재가입할 수 없으며 서비스를 재이용하실 경우 계정 승인을 받아야 합니다.

또한 환자 정보와 검사 기록은 다시 조회하거나 다운로드 받을 수 없습니다.

1 ☐ 위의 내용을 이해하였으며, 회원에서 탈퇴하겠습니다.

2

1. 회원 탈퇴 동의
2. 회원 탈퇴 버튼
1번 체크 하지 않을 경우 버튼 비활성화
체크 시 버튼 활성화
클릭 시 계정 삭제, "로그인" 페이지로 이동

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 언주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD



SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
---	----	-----	----	----	----

계정 정보 | **공지사항** | 자주 묻는 질문 | 시스템 문의 | 이용약관 | 개인정보처리방침

공지사항

2

검색

전체 ▼

NO	카테고리	제목	등록일자
중요	카테고리1	3 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.08.02
중요	카테고리2	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.08.01
중요	카테고리3	4 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.08.01
35	카테고리4	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.31
34	카테고리1	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30
33	카테고리2	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30
32	카테고리1	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30
31	카테고리2	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30
30	카테고리3	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30
29	카테고리4	일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트	2021.07.30

◀◀ ◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ▶ ▶▶

1. 클릭 시 카테고리 펼침

전체 ▼

전체
카테고리1
카테고리2
카테고리3
카테고리4

2. 검색 조건 : 제목/내용

3. 카테고리 명, 제목, 등록일자 표시
> 상단 3개 공지글은 master
admind에서 상단 고정으로 설정한
공지글 표시
> 고정 기준 : 최근 수정일 기준
4. 리스트 클릭 시 공지사항 상세
화면으로 이동

관리자에서 등록된 콘텐츠 출력

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD



Page Description

설정 > 공지사항

Screen ID

HCP-W-17

Description

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈

환자

스케줄

문의

통계

설정

계정 정보 | 공지사항 | 자주 묻는 질문 | 시스템 문의 | 이용약관 | 개인정보처리방침

1

공지사항

카테고리

[카테고리명]

제목

일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트

등록일

2021.11.17


내용

나만 아는 '솔티드 스마트 인솔'

함께 알면 골프가, 운동이 2배, 3배 재밌을 텐데!

솔티드, 어떻게 소문낼 수 있을까?

코로나19이후 언택트 시대가 가속화되면서 김남기프로'가 솔티드 '스마트인솔'을 활용하여 언택트 레슨을 진행하였는데요!

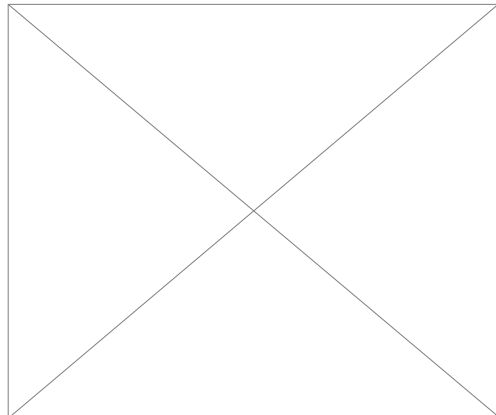

첨부 파일

abcd.pdf abcd.gif abcd.zip

2

목록

1. 공지 사항 콘텐츠

2. 목록

- 이전 화면으로 이동

관리자에서 등록된 콘텐츠 출력

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 연주로 603 서진빌딩 6F
© Copyright 2021 SALTED.LTD

CES

Consumer Technology Association

ISPO Munich

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
계정 정보	공지사항	자주 묻는 질문	시스템 문의	이용약관	개인정보처리방침

자주 묻는 질문

전체 ▼

[카테고리명]

인술 구매 문의는 어디로 해야 하나요?

인술 구매 문의는 고객 센터로 연락해주세요.

문의 전화 080-4048-3912

고객 센터 운영시간 09:30 ~ 17:30

[인술 제품 소개서.pdf](#)

[카테고리명]

문의는 어디로 해야 하나요?

[카테고리명]

문의는 어디로 해야 하나요?

[카테고리명]

문의는 어디로 해야 하나요?

SALTED

사업자 등록번호 : 611 - 81 - 27282 | 통신판매업신고 : 제 2017-서울강남-00305호
 대표자 : 조형진 | 개인정보보호 책임자 : 김대성 | 서울특별시 강남구 언주로 603 서진빌딩 6F
 © Copyright 2021 SALTED.LTD



1. 클릭 시 카테고리 펼침

전체 ▼

전체

카테고리1

카테고리2

카테고리3

카테고리4

2. 클릭 시 내용이 펼쳐짐 (아코디언)

재 클릭 시 내용이 닫힘

3. 시스템 문의 이메일 링크 :

cs@salted.ltd

관리자에서 등록된 콘텐츠 출력

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
계정 정보	공지사항	자주 묻는 질문	시스템 문의	이용약관	개인정보처리방침

서비스 이용 약관

2

2021.10.10 서비스 이용약관 ▼

제1장 약관의 적용

제1조 목적

솔티드㈜(이하 '회사')가 제공하는 서비스를 이용해 주셔서 감사합니다. 회사는 이용자(이 약관에 동의하지 않은 비회원을 말합니다) 또는 회원(이 약관에 동의하여 회사와 이용계약을 체결하고 회사가 제공하는 서비스를 이용할 수 있는 자를 말합니다)이 회사가 제공하는 솔티드 서비스(이하 '서비스')에 통합 적용될 수 있는 솔티드㈜ 통합 약관(이하 '본 약관')을 마련하였습니다. 본 약관은 이용자가 서비스를 이용하는 데 필요한 권리, 의무 및 책임사항, 이용조건 및 절차 등 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

• '솔티드 서비스'라 함은 회사가 제공하는 "SALTED" 브랜드를 사용하는 서비스(예: SALTED Golf)를 의미합니다.

제2조 약관의 명시, 효력 및 변경

1. 본 약관의 내용은 회사가 제공하는 개별 서비스 또는 서비스 초기 화면에 게시하거나 기타의 방법으로 공지하고, 본 약관에 동의한 이용자와 회원 모두(이하 '이용자')에게 그 효력이 발생합니다.

2. 회사는 필요한 경우 관련법령을 위배하지 않는 범위 내에서 본 약관을 변경할 수 있습니다. 본 약관이 변경되는 경우 회사는 변경사항을 시행일자 7일 전부터 이용자에게 홈페이지의 공지사항에서 공지하는 것을 원칙으로 하며, 이용자에게 불리한 내용으로 변경할 경우에는 30일 이전의 사전 유예기간을 두고 홈페이지에 게시하거나, 이용자가 등록한 메일 주소로 이메일을, 휴대폰번호로 문자메시지를 보내는 등 합리적으로 가능한 방법으로 변경사항을 공지 또는 통지합니다.

3. 회사가 전 항에 따라 공지 또는 통지를 하면서 공지 또는 통지일로부터 개정약관 시행일까지 거부의료진을 표시하지 아니하면 승인한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 고지하였음에도 이용자의 의의진표시가 없는 경우에는 변경된 약관을 승인한 것으로 봅니다. 이용자가 개정약관에 동의하지 않을 경우 이용자는 제13조 제1항에 따라 이용계약을 해지할 수 있습니다.

제3조 약관 외 준칙

본 약관에 규정되지 않은 사항에 대해서는 관련법령 또는 회사가 정한 서비스의 개별 이용약관, 운영정책 및 규칙 등(이하 '세부지침')의 규정에 따릅니다. 또한 본 약관과 세부지침의 내용이 충돌할 경우 세부지침에 따릅니다.

제2장 회원

제4조 회원가입

1. SALTED 계정이란

- 이용 약관 전문 출력
- 가장 최근 약관 세팅
개정된 약관 히스토리를 볼 수 있도록 목록 출력 (개정일 기준)

약관 콘텐츠 수급 대기 중

SALTED

SALTED

ooo님 환영합니다 | 로그아웃

홈	환자	스케줄	문의	통계	설정
계정 정보	공지사항	자주 묻는 질문	시스템 문의	이용약관	개인정보처리방침

개인정보 처리방침

2

2021.10.10 개인정보 처리방침 ▼

제1장 약관의 적용

제1조 목적

솔티드㈜(이하 '회사')가 제공하는 서비스를 이용해 주셔서 감사합니다. 회사는 이용자(이 약관에 동의하지 않은 비회원을 말합니다) 또는 회원(이 약관에 동의하여 회사와 이용계약을 체결하고 회사가 제공하는 서비스를 이용할 수 있는 자를 말합니다)이 회사가 제공하는 솔티드 서비스(이하 '서비스')에 통합 적용될 수 있는 솔티드㈜ 통합 약관(이하 '본 약관')을 마련하였습니다. 본 약관은 이용자가 서비스를 이용하는 데 필요한 권리, 의무 및 책임사항, 이용조건 및 절차 등 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

• '솔티드 서비스'라 함은 회사가 제공하는 "SALTED" 브랜드를 사용하는 서비스(예: SALTED Golf)를 의미합니다.

제2조 약관의 명시, 효력 및 변경

1. 본 약관의 내용은 회사가 제공하는 개별 서비스 또는 서비스 초기 화면에 게시하거나 기타의 방법으로 공지하고, 본 약관에 동의한 이용자와 회원 모두(이하 '이용자')에게 그 효력이 발생합니다.

2. 회사는 필요한 경우 관련법령을 위배하지 않는 범위 내에서 본 약관을 변경할 수 있습니다. 본 약관이 변경되는 경우 회사는 변경사항을 시행일자 7일 전부터 이용자에게 홈페이지의 공지사항에서 공지하는 것을 원칙으로 하며, 이용자에게 불리한 내용으로 변경할 경우에는 30일 이전의 사전 유예기간을 두고 홈페이지에 게시하거나, 이용자가 등록한 메일 주소로 이메일을, 휴대폰번호로 문자메시지를 보내는 등 합리적으로 가능한 방법으로 변경사항을 공지 또는 통지합니다.

3. 회사가 전 항에 따라 공지 또는 통지를 하면서 공지 또는 통지일로부터 개정약관 시행일까지 거부의료진을 표시하지 아니하면 승인한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 고지하였음에도 이용자의 의의진표시가 없는 경우에는 변경된 약관을 승인한 것으로 봅니다. 이용자가 개정약관에 동의하지 않을 경우 이용자는 제13조 제1항에 따라 이용계약을 해지할 수 있습니다.

제3조 약관 외 준칙

본 약관에 규정되지 않은 사항에 대해서는 관련법령 또는 회사가 정한 서비스의 개별 이용약관, 운영정책 및 규칙 등(이하 '세부지침')의 규정에 따릅니다. 또한 본 약관과 세부지침의 내용이 충돌할 경우 세부지침에 따릅니다.

제2장 회원

약관 콘텐츠 수급 대기 중

SALTED

End Of Document