



솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발

화면설계서 – NEUROGAIT – Patient App

Document Version : V1.3

Release Date : 2021.11.24

Organization : 솔티드

Author : 유병규


구분	소속	역할	담당자	확인일	확인
작성	솔티드(주)	PA	유병규		
동료검토	솔티드(주)	기획PA	제갈훈		
동료검토	픽스프레임	기획PL	정수화		
동료검토	솔티드(주)	개발PL	최성찬		
동료검토	픽스프레임	PM	김상환		
검토	솔티드	사업총괄	연상근		
인수/승인	솔티드	총괄PM	강경훈		


날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.10.05	0.1	최초 작성	<ul style="list-style-type: none">최초 작성	유병규
2021.10.07	0.2	업데이트	<ul style="list-style-type: none">이용안내 작성로그인, 회원가입, 홈 수정	유병규
2021.10.07	0.3	업데이트	<ul style="list-style-type: none">회원가입 수정<ul style="list-style-type: none">매칭 번호 입력 추가이용 약관 정책 및 흐름 수정홈 수정<ul style="list-style-type: none">병원 변경 기능 제거스케줄 관리<ul style="list-style-type: none">처방 운동 아이콘 삭제 및 바 추가	유병규
2021.10.14	0.4	업데이트	<ul style="list-style-type: none">회원가입 - 문진 정보, 추가 정보 입력 화면 추가걸음 수 화면 추가종합 결과 화면 추가	유병규
2021.10.15	0.5	업데이트	<ul style="list-style-type: none">문서 통합	유병규
2021.10.15	0.9	업데이트	<ul style="list-style-type: none">문서 통합	제갈훈
2021.10.18	0.45	업데이트	<ul style="list-style-type: none">회원가입 수정<ul style="list-style-type: none">발 사이즈, 다리 길이 입력 추가홈 데이터 수정아이디 비밀번호 찾기 수정설정 수정	유병규/정수화
2021.10.19	0.46	업데이트	<ul style="list-style-type: none">회원가입 수정<ul style="list-style-type: none">거주지 추가홈 수정<ul style="list-style-type: none">보행 데이터 변경	유병규
2021.10.21	0.47	업데이트	<ul style="list-style-type: none">메인화면<ul style="list-style-type: none">보행 데이터 변경날짜별 데이터 표시 방안 추가회원가입 수정<ul style="list-style-type: none">국내/국외 회원 가입 시 휴대폰/이메일 인증 수단 변경아이디/비밀번호 찾기<ul style="list-style-type: none">인증 수단 변경오늘의 운동<ul style="list-style-type: none">오늘 운동 추가 시 종료 날짜 선택, 요일 선택 삭제운동 촬영 시나리오 변경설정<ul style="list-style-type: none">이메일/휴대폰/비밀번호 변경 화면 수정알림<ul style="list-style-type: none">메뉴 이동 기능 추가	유병규

날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.10.22	0.48	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 오늘의 운동 <ul style="list-style-type: none"> - 오늘 운동 추가 시 종료 날짜 선택, 요일 선택 삭제 - 운동 촬영 시나리오 변경 스케줄 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 운동 추가 화면 변경 인솔 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 인솔 이름 변경 팝업 추가 	유병규
2021.10.29	0.496	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 로그인- 로그인 실패, 휴면, 차단 시나리오 추가 문진정보- 1,2번 항목 답변 순서 변경 및 기타 tap시 입력박스 추가 홈- 화면 구성 변경 운동- 과거 운동 선택 시 결과 보기 시나리오 변경 종합 결과- 종합 결과 전체 수정 설정- 이벤트, 공지사항, FAQ 메뉴 위치 변경 	유병규
2021.11.01	0.497	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 로그인 화면- Native > hybrid 변경 	유병규
2021.11.04	0.498	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 회원가입 <ul style="list-style-type: none"> - 국가 외국일 경우 성 입력 칸 추가 회원정보 수정 <ul style="list-style-type: none"> - 국가 외국일 경우 성 수정 칸 추가 - 거주지 수정 추가 	유병규
2021.11.05	1.0	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 병원 정보 <ul style="list-style-type: none"> - 코드 입력 시나리오 삭제 - 코드 보기 추가 회원 정조 <ul style="list-style-type: none"> - 문진 보기 화면 추가 전체 : 운동 횟수, #회 > 세트로 변경 	유병규
2021.11.08	1.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 스케줄 <ul style="list-style-type: none"> - 스케줄 추가 화면 시나리오 변경 운동 <ul style="list-style-type: none"> - # 회차 > 세트 # 으로 변경 	유병규
2021.11.11	1.1.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> Screen ID 최신화 	제갈훈
2021.11.18	1.2	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 회원가입 <ul style="list-style-type: none"> - 국외 환자 이름 입력 순서 : 이름, 성 순서로 변경 - 매칭코드 이용한 회원가입 시나리오 삭제 스케줄 추가 <ul style="list-style-type: none"> - 날짜 선택 UI 변경 	유병규
2021.11.18	1.2.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 약관 동의 html 페이지 추가 	제갈훈


2021.11.18 수정

날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.11.24	1.3	업데이트	<div><ul style="list-style-type: none">• 아이디 찾기- 휴대폰 번호 입력 시 국가 선택 추가• 비밀번호 재설정- 휴대폰 번호 입력 시 국가 선택 추가• 비밀번호 재설정- 휴대폰 번호 표시 시 국가 번호도 함께 표시• 오늘의 걸음 - 걸음 시간 변경• 운동 - 운동 부위 썸네일 삭제• 설정<ul style="list-style-type: none">- 국가에 따른 회원 명 표시 방법 추가• - 한국 회원 이름/ 성 구분 삭제- 국외 회원 정보 화면 추가• - 휴대폰 번호 /이메일 변경<ul style="list-style-type: none">> 회원의 국가에 따른 별도 화면 추가</div> <div>2021.11.24 수정</div>	유병규

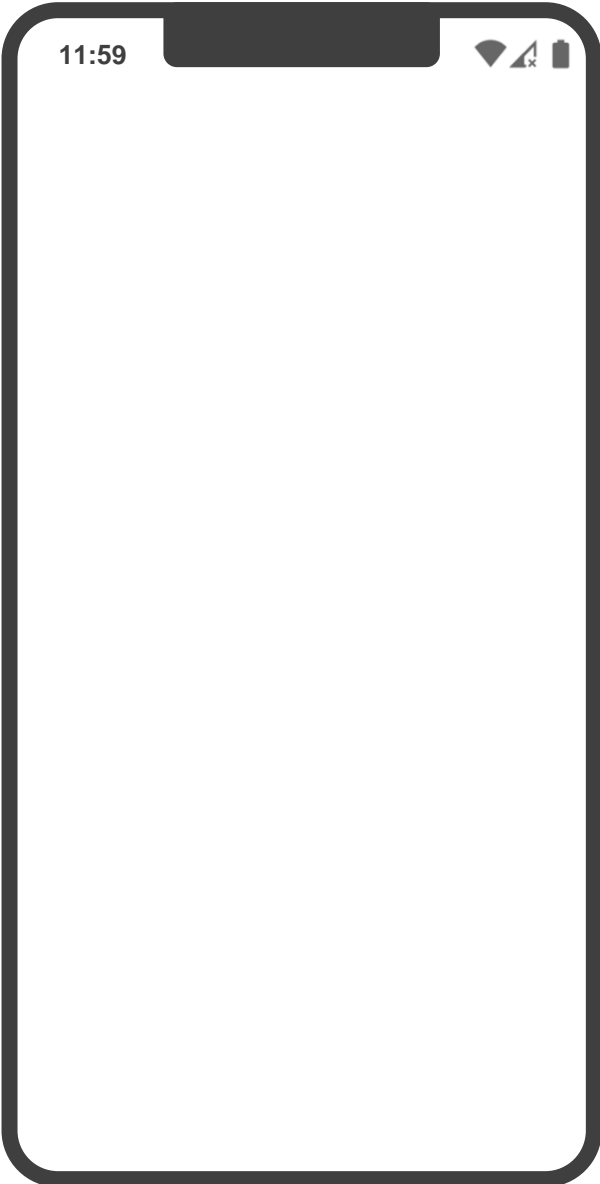Page Description	스플래쉬	Screen ID	PT-A-01	Description
	<div data-bbox="306 749 393 778">native</div> 			<p>스플래쉬</p> <p>스플래쉬에서 모바일 데이터 연결 확인</p> <ul style="list-style-type: none">- 모바일 미연결 시 기존 로그인 정보를 이용하여 로그인 후 stand alone 으로 APP 이용


Page Description	필수/선택 접근 권한 안내	Screen ID	PT-A-01-1	Description
	<div data-bbox="279 749 372 778">native</div> <div data-bbox="497 121 1108 1306"><div data-bbox="569 164 642 192">11:59</div><div data-bbox="984 164 1087 192"></div><div data-bbox="590 307 631 349">1</div><div data-bbox="631 349 984 449">NEUROGAIT의 원활한 서비스 사용을 위해 접근 권한을 허용해 주세요</div><div data-bbox="569 564 735 599">필수 접근 권한</div><div data-bbox="569 621 631 678"></div><div data-bbox="652 621 901 678">카메라 운동 영상 촬영 또는 사진 촬영</div><div data-bbox="569 706 631 763"></div><div data-bbox="652 706 1004 763">앨범 프로필 변경, 문의글 작성 시 사진, 영상 첨부</div><div data-bbox="569 792 631 849"></div><div data-bbox="652 792 963 849">저장공간 앱에서 만든 영상, 사진 등 데이터 저장</div><div data-bbox="569 878 631 935"></div><div data-bbox="652 878 870 935">마이크 음성이 포함된 동영상 촬영</div><div data-bbox="507 1206 549 1249">2</div><div data-bbox="787 1242 828 1270">확인</div></div>			<div data-bbox="1585 92 1989 335"><ol style="list-style-type: none">1. 필수 접근 권한 안내 페이지2. 확인 버튼<ul style="list-style-type: none">- Tap<ul style="list-style-type: none">> 안드로이드 : 권한 요청 팝업 표시> ios : APP 처음 실행 시 인솔 안내3. 안드로이드 이전버튼 tap<ul style="list-style-type: none">- 1번 : '뒤로 가기 버튼을 한 번 더 누르면 종료됩니다.' 토스트 메시지 표시- 2번 : APP 종료</div>

native

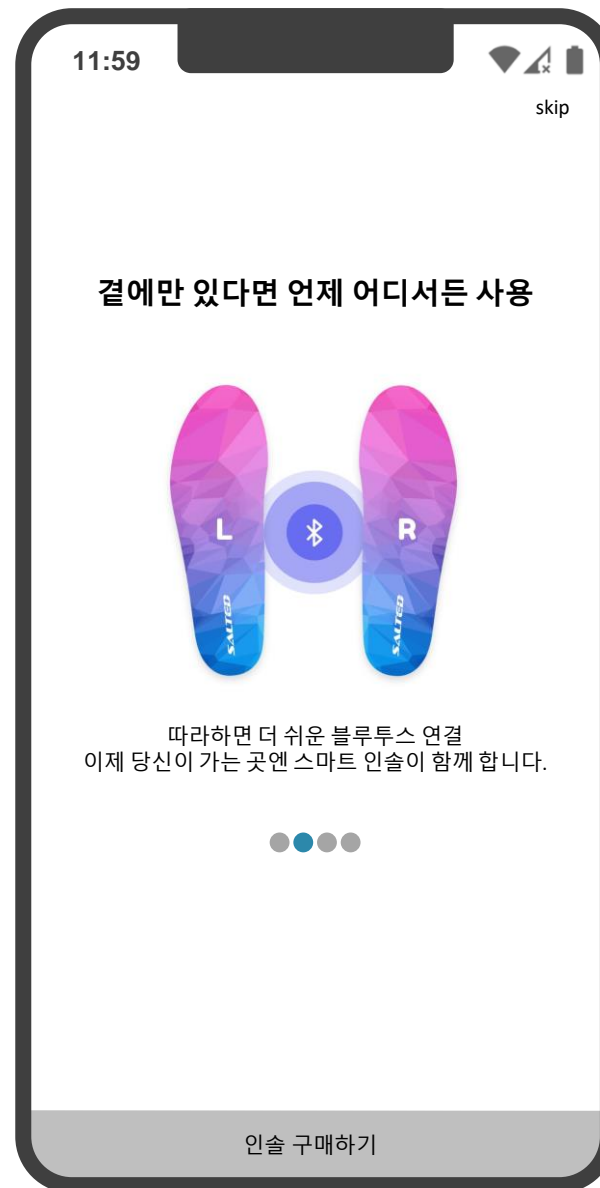

- 인솔 소개 페이지
 - 앱 최초 실행 시 표시
 - > 이후 앱 실행 시 바로 이용안내 화면으로 이동
 - 좌/우 swipe를 이용하여 페이지 전환
 - 첫 페이지 : 좌 swipe 막기
 - 마지막 페이지 : 우 swipe 막기
- 인솔 구매하기 버튼
 - 버튼 tap시 인솔 구매 링크로 이동
- skip
 - 앱 이용안내 화면으로 이동
- 안드로이드 이전버튼 tap
 - 앱 이용안내 화면으로 이동

native

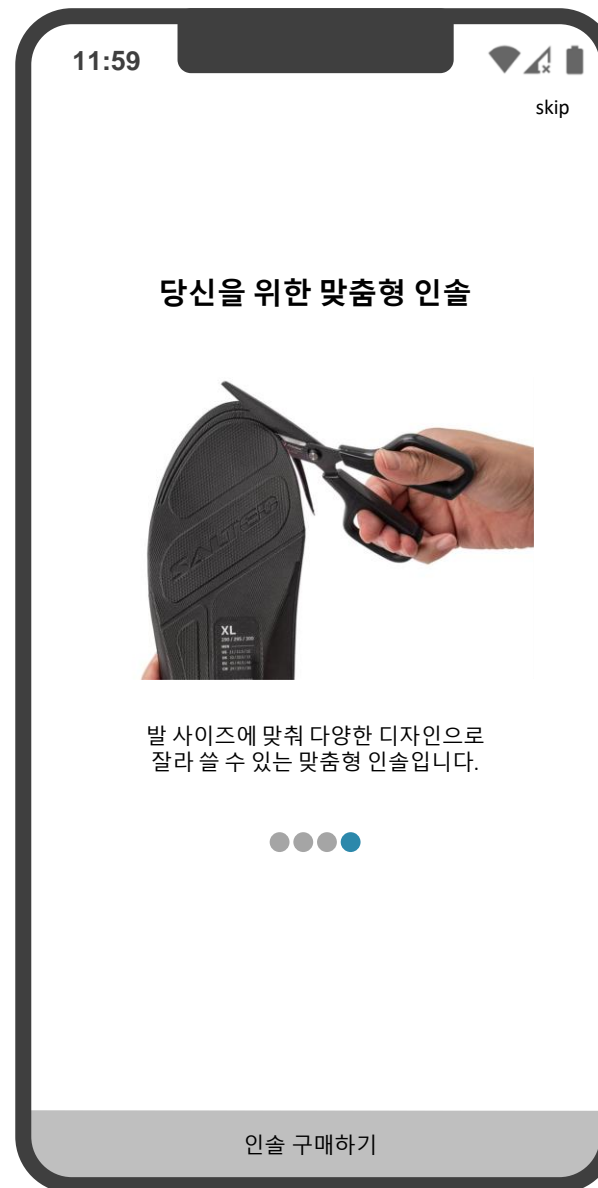


1. 인솔 소개 페이지
 - 앱 최초 실행 시 표시
 - > 이후 앱 실행 시 바로 이용안내 화면으로 이동
 - 좌/우 swipe를 이용하여 페이지 전환
 - 첫 페이지 : 좌 swipe 막기
 - 마지막 페이지 : 우 swipe 막기
2. 인솔 구매하기 버튼
 - 버튼 tap시 인솔 구매 링크로 이동
3. skip
 - 앱 이용안내 화면으로 이동
4. 안드로이드 이전버튼 tap
 - 앱 이용안내 화면으로 이동

native



1. 앱 이용안내 페이지
- 좌/우 swipe를 이용하여 페이지 전환
- 첫 페이지 : 좌 swipe 막기
- 마지막 페이지 : 우 swipe 막기
2. 다음
- tap 시 앱 이용안내 다음 페이지로 이동
- > 마지막 페이지에서 로그인 버튼으로 변경
3. 다시 보지 않기
- 앱 실행 시 이용안내 표시 하지 않음
- 로그인 화면으로 이동
4. skip
- 로그인 화면으로 이동
- > 마지막 페이지에서는 비노출
5. 안드로이드 이전버튼 tap
- 로그인 화면으로 이동

native

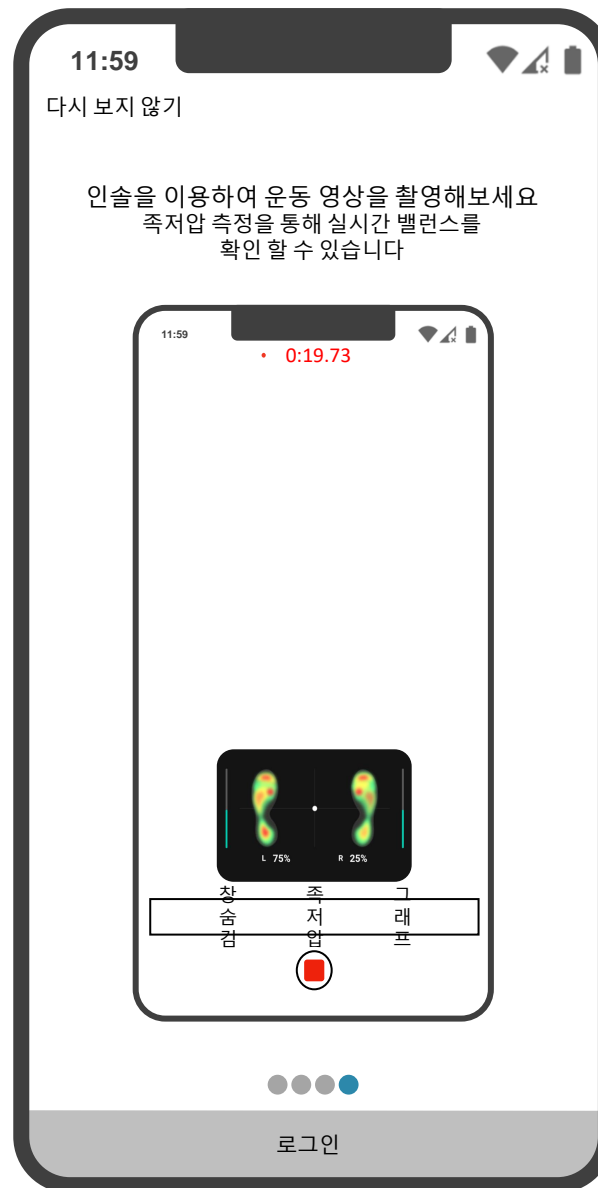

1. 앱 이용안내 페이지
 - 좌/우 swipe를 이용하여 페이지 전환
 - 첫 페이지 : 좌 swipe 막기
 - 마지막 페이지 : 우 swipe 막기
2. 다음
 - tap 시 앱 이용안내 다음 페이지로 이동
 - > 마지막 페이지에서 로그인 버튼으로 변경
3. skip
 - 로그인 화면으로 이동
 - > 마지막 페이지에서는 비노출
4. 안드로이드 이전버튼 tap
 - 로그인 화면으로 이동

Page Description	로그인	Screen ID	PT-A-03	Description
<div data-bbox="513 129 1112 1305"> <div> 11:59 <div> </div> </div> <div>NEUROGAIT</div> <div>로그인</div> <div> <div>1</div> 아이디 </div> <div> <div>비밀번호</div> <div>2</div> <input type="password"/> <div>3</div> <div>아이디 찾기</div> <div>비밀번호 찾기</div> </div> <div> <div>2</div> <input type="radio"/> 자동 로그인 </div> <div> <div>4</div> 로그인 <div>5</div> 회원가입 </div> </div>				<ol style="list-style-type: none"> 아이디, 비밀번호 입력 <ul style="list-style-type: none"> 비밀번호 마스킹 처리 자동 로그인 <ul style="list-style-type: none"> APP 종료 후 재 진입 시 자동 로그인 아이디/비밀번호 찾기 화면으로 이동 로그인 시도 <ul style="list-style-type: none"> 로그인 성공 : 홈으로 이동 로그인 실패 : 로그인 실패 팝업[㉠] 표시 <ul style="list-style-type: none"> > 로그인 시도 5회 실패 시 1시간 계정 잠김, 잠김 안내 - 로그인 제한 <ul style="list-style-type: none"> > 로그인 재시도 시 남은 시간 안내 팝업[㉡] 표시 <ul style="list-style-type: none"> > 1분 이하로 시간 남았을 때 '1분간 로그인할 수 없습니다'로 팝업문구 표시, 별도 초단위 표시 하지 않음 회원가입 <ul style="list-style-type: none"> 회원 가입 화면으로 이동 안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> - 1번 : <ul style="list-style-type: none"> > 로그인 화면 : '뒤로 가기 버튼을 한 번 더 누르면 종료됩니다.' 토스트 메시지 표시 > 팝업: 팝업 닫기 - 2번 : APP 종료
<div data-bbox="1166 756 1699 1290"> <div> a <div> 로그인 실패 로그인 실패하였습니다. 다시 시도해주시기 바랍니다. <div>※5회 실패 시 계정이 1시간 동안 접속 제한됩니다.</div> 확인 </div> </div> <div> b <div> 로그인 실패 로그인 실패 연속 5회 초과되어 계정 접속 제한 하였습니다. ##분간 로그인 할 수 없습니다. 확인 </div> </div> </div>				

Page Description	로그인(로그인 휴면/동시로그인)	Screen ID	PT-A-03	Description
				<p>1. 계정 휴면</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사용자가 1년동안 APP 로그인 하지 않았을 경우 계정 휴면처리됨 - 휴면계정 되기 30일 전 휴면계정 전환 안내 메일or문자 발송 - 로그인 시도 시 계정 비활성화 안내 팝업㉔ 표시 <p>1. 동시 로그인</p> <ul style="list-style-type: none"> - 로그인시 다른 디바이스에서 자동 로그아웃 된다는 안내 팝업㉕ 표시 - 확인 : 로그인 처리 후 홈화면으로 이동 - 취소 : 로그인 처리 x <p>1. 안드로이드 이전버튼 tap</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1번 : 팝업 닫힘 > 동시 로그인 팝업 : 취소처리

Page Description	아이디 찾기	Screen ID	PT-A-03-01	Description
<div data-bbox="507 128 1108 1306"> <div> <div>5</div> <div>11:59</div> <div>취소</div> <div>아이디 찾기</div> </div> <div> <div>1</div> <div>회원가입 시 인증한 수단으로 진행하시기 바랍니다</div> <div> <div>휴대폰</div> <div>이메일</div> </div> <div> <div>2</div> <div>휴대폰 번호</div> <div>국가 선택 ▼</div> <div>*휴대폰 번호로 비밀번호를 변경할 수 있는 재설정 코드를 보내드립니다.</div> </div> <div> <div>3</div> <div>이메일</div> <div>*이메일 주소로 비밀번호를 변경할 수 있는 재설정 코드를 보내드립니다.</div> </div> <div> <div>4</div> <div>아이디 찾기</div> </div> </div> </div>				<ol style="list-style-type: none"> 안내 문구 <ul style="list-style-type: none"> - 회원가입시 인증한 수단으로 진행 요청 문구 표시 휴대폰 <ul style="list-style-type: none"> - 휴대폰 번호 입력 이메일 주소 <ul style="list-style-type: none"> - 이메일 주소 입력 아이디 찾기 <ul style="list-style-type: none"> - 입력된 휴대폰&이메일로 아이디 전송 - 회원 가입시 인증한 휴대폰 & 이메일 없을 경우 인증 수단 확인 팝업⑥ 표시 - 아이디 전송 후 홈으로 이동 취소 <ul style="list-style-type: none"> - 로그인 화면으로 이동 인증수단 확인 실패 <ul style="list-style-type: none"> - 인증 수단으로 등록된 회원이 없을 경우 인증 수단 확인 안내 팝업 표시 안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> - 이전 화면으로 이동
<div data-bbox="1160 885 1699 1170"> <div>6</div> <div>인증수단 확인 필요</div> <div>해당 번호로 회원가입된 회원이 없습니다. 인증 수단을 확인해주세요</div> <div>확인</div> </div>				
				<div data-bbox="1616 1220 1999 1349"> <div>아이디 찾기- 휴대폰 번호 입력 시 국가 선택 추가 (2021.11.24)</div> </div>

Page Description	비밀번호 재설정(1/2 step)	Screen ID	PT-A-03-02	Description
<div data-bbox="507 128 1108 1306"> <div> <div>5</div> <div>11:59</div> <div>취소</div> <div>비밀번호 재설정</div> </div> <div> <div>1</div> <div>회원이가입 시 인증한 수단으로 진행하시기 바랍니다</div> <div> <div>휴대폰</div> <div>이메일</div> </div> <div> <div>2</div> <div>휴대폰 번호</div> <div>국가 선택 ▼</div> <div>*휴대폰 번호로 비밀번호를 변경할 수 있는 재설정 코드를 보내드립니다.</div> </div> <div> <div>3</div> <div>이메일</div> <div>*이메일 주소로 비밀번호를 변경할 수 있는 재설정 코드를 보내드립니다.</div> </div> <div> <div>4</div> <div>재설정코드 받기</div> </div> </div> <div> <div>6</div> <div>인증수단 확인 필요</div> <div>해당 번호로 회원가입된 회원이 없습니다. 인증 수단을 확인해주세요</div> <div>확인</div> </div> </div>				<ol style="list-style-type: none"> 안내 문구 <ul style="list-style-type: none"> - 회원가입시 인증한 수단으로 진행 요청 문구 표시 휴대폰 <ul style="list-style-type: none"> - 휴대폰 번호 입력 이메일 주소 <ul style="list-style-type: none"> - 이메일 주소 입력 재설정 코드 받기 <ul style="list-style-type: none"> - 입력된 휴대폰&이메일로 재설정 코드 전송 - 회원 가입시 인증한 휴대폰&이메일 없을 경우 인증 수단 확인 팝업⑥ 표시 - 재설정코드 전송 후 다음 화면으로 이동 취소 <ul style="list-style-type: none"> - 로그인 화면으로 이동 인증수단 확인 실패 <ul style="list-style-type: none"> - 인증 수단으로 등록된 회원이 없을 경우 인증 수단 확인 안내 팝업 표시 안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> - 이전 화면으로 이동 <div> <div>비밀번호 재설정- 휴대폰 번호 입력 시 국가 선택 추가 (2021.11.24)</div> </div>

Page Description	비밀번호 재설정(2/2 step)	Screen ID	PT-A-03-03	Description
<div><div><div>5</div><div>11:59</div><div>취소</div><div>비밀번호 재설정</div><div>휴대폰 번호</div><div>1+82 00-0000-0000</div><div>이메일</div><div>000@000.com</div><div>2</div><div>새 비밀번호(8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합)</div><div>3</div><div>재설정 코드</div><div>4</div><div>비밀번호 변경</div></div><div><div>새 비밀번호(8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합)</div><div>8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합이 아닙니다.</div><div>재설정 코드</div><div>123adsfa</div><div>재설정코드가 올바르지 않습니다. 다시 확인해주세요.</div></div></div>				<div>1. 휴대폰 번호 or 이메일 표시 - 비밀번호 재설정 코드를 받은 휴대폰 번호 or 이메일 표시</div> <div>2. 새 비밀번호 - 새 비밀번호 입력 - 오류 시 텍스트 박스 하단 오류 문구 표시</div> <div>3. 재설정 코드 - 휴대폰 or 이메일로 받은 재설정 코드 입력</div> <div>4. 비밀번호 변경 - 비밀번호 변경</div> <div>5. 안드로이드 이전버튼 tap - 이전 화면으로 이동</div> <div>비밀번호 재설정- 휴대폰 번호 표시 시 국가 번호도 함께 표시 (2021.11.24)</div>

Page Description	회원가입 – 국가 선택	Screen ID	PT-A-04-1	Description
	<div data-bbox="507 128 1108 1306"><div>11:59</div><div>취소</div><div>회원가입</div><div>1</div><div>국가 선택</div><div>2</div><div>다음</div></div>		<div data-bbox="1160 521 1632 599">국가 선택 선택</div>	<div>1. 국가 선택</div> <ul style="list-style-type: none">- admin에서 생성된 국가 리스트 표시- 로그인 전까지 모바일 기준의 언어로 출력- 국가 선택 후 회원 가입 화면부터 선택 국가의 언어로 표시 <div>2. 다음</div> <ul style="list-style-type: none">- 국가 선택 선택 전까지 비활성화- 국가 선택 후 다음 tap 시 회원가입 다음 단계로 이동 <div>3. 이전</div> <ul style="list-style-type: none">- 로그인 화면으로 이동 <div>4. 안드로이드 이전버튼 tap</div> <ul style="list-style-type: none">- 로그인 화면으로 이동

Page Description	회원가입 - 연구&일반 선택	Screen ID	PT-A-04-1	Description
	<div data-bbox="505 129 1110 1305"></div>			<div data-bbox="1583 97 2011 339"><ol style="list-style-type: none">1. 국가 선택 - 연구, 일반 선택2. 다음 - 연구&일반 선택 전까지 비활성화 - 다음 tap 시 회원가입 다음 단계로 이동3. 이전 - 로그인 화면으로 이동4. 안드로이드 이전버튼 tap - 이전 화면으로 이동</div>

11:59

취소

회원가입

1 아이디 중복확인

2 비밀번호 (8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합)

3 이름(실명 입력)

4 이메일

5 ☐ 남자 ☐ 여자

6 생년월일

7 거주지

8 발 사이즈 ____cm

다리 길이(선택) 왼쪽 : ____cm / 오른쪽 : ____cm

9 국가 선택 ▼ 휴대폰 번호

10 인증번호 받기

11 인증번호 인증번호 확인

이용약관, 개인정보 수집 및 이용, 민감정보 제공, 블루투스 통신, 위치정보 이용, 마케팅정보 수신 (선택), 개인정보 제3자 제공(선택) 동의 하십니까?

☐ 전체 동의

☐ 이용약관

☒ 개인정보처리방침

☐ 민감정보 제공 동의

☐ 블루투스 통신 동의

전문보기

전문보기

전문보기

전문보기

전문보기

12 회원 가입

14

발 사이즈 / 다리 길이 측정 방법

1. 발 사이즈

- 발을 종이 위에 올리고 가장 긴 발가락 끝과 발뒤꿈치를 기준으로 체크 합니다.

1. 다리 길이

- 골반에서 안쪽 복사뼈까지 길이를 기준으로 체크 합니다.



확인

- 아이디 입력
 - 10자 제한
 - 중복 확인 버튼
 - > 아이디 중복 시 text box 하단 아이디 중복 문구 표시
- 비밀번호
 - 16자리 제한
 - 8~16 자리, 영문/숫자/특수문자
 - 입력 비밀번호 마스킹 처리
 - > 눈 아이콘 tap시 마스킹 해제
 - 유효성이 맞지 않는 비밀번호 입력 시 text box 하단 안내 문구 표시
- 이름
 - 10자 제한
- 이메일
 - 기본 이메일 입력
- 성별
 - default 미선택
 - 선택 시 박스와 폰트 색상 변경
- 생년월일
 - 8자 제한
 - 영역 tap 시 숫자 키패드 표시
 - 유효성 체크
 - > DATA 체크
- 거주지
 - 거주지 입력
- 발 사이즈 / 다리 길이
 - 발 사이즈 / 다리길이 단위는 국가 선택에 따라 변경 됨
 - > 한국 선택 시 한국식 단위, 한국 이외 국가 시 영국식 단위 표시
 - 다리길이 왼쪽/ 오른쪽 2개 입력
 - 발 사이즈/ 다리 길이 입력 영역 tap 시 숫자 + 소수점 키패드 표시
 - 우측 도움말 아이콘 tap 시 안내 팝업 표시
- 휴대폰 번호
 - 한국 가입자는 휴대폰 인증 제공
 - 휴대폰 번호 국가 선택
 - 앞 단계에서 선택한 국가의 코드가 자동 세팅
 - > 리스트 : 국가명(국가번호) 표시
 - 11자 제한, 숫자 키패드 제공
 - 유효성 체크(국내 기준)
 - > 앞 3자리 010, 나머지 8자 입력
 - 유효성이 맞지 않는 휴대폰 번호 입력 시 text box 하단 안내 문구 표시
- 인증번호 받기 버튼
 - 입력한 휴대폰 번호로 인증번호 전송
 - 인증번호 확인 버튼을 이용하여 인증 번호 유효성 체크

Page Description	회원가입 - 정보 입력 (국가 : 한국)	Screen ID	PT-A-04-2	Description
	<p>11:59</p> <p>취소</p> <h2>회원가입</h2> <p>1 아이디 중복확인</p> <p>2 비밀번호 (8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합)</p> <p>3 이름(실명 입력)</p> <p>4 이메일</p> <p>5 남자 여자</p> <p>6 생년월일</p> <p>7 거주지</p> <p>8 발 사이즈 ____cm</p> <p>다리 길이(선택) 왼쪽 : ____cm / 오른쪽 : ____cm</p> <p>9 국가 선택 ▼ 휴대폰 번호</p> <p>10 인증번호 받기</p> <p>인증번호 인증번호 확인</p> <p>11 이용약관, 개인정보 수집 및 이용, 민감정보 제공, 블루투스 통신, 위치정보 이용, 마케팅정보 수신 (선택), 개인정보 제3자 제공(선택) 동의 하십니까?</p> <p><input type="checkbox"/> 전체 동의</p> <p><input type="checkbox"/> 이용약관</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 개인정보처리방침</p> <p><input type="checkbox"/> 민감정보 제공 동의</p> <p><input type="checkbox"/> 블루투스 통신 동의</p> <p>전문보기</p> <p>전문보기</p> <p>전문보기</p> <p>전문보기</p> <p>전문보기</p> <p>12 회원 가입</p>			<p>11. 약관</p> <ul style="list-style-type: none"> - 개별 약관 체크박스/전문 보기 Tap시 해당 약관 화면으로 이동 <ul style="list-style-type: none"> > 약관 화면에서 동의 버튼 tap 시 해당 약관 체크박스 체크 된 상태로 변경 > 체크 해제 가능 - 전체 약관 동의 시 전체 약관 화면 표시 <ul style="list-style-type: none"> > 약관화면에서 동의 시 회원가입 화면으로 이동 후 '전체 동의' 체크 박스가 체크 된 상태로 변경 - 약관 종류 <ul style="list-style-type: none"> > 필수 : 이용약관, 개인정보수집 및 동의, 민감정보 제공 동의, > 선택블루투스 통신 동의, 위치정보 이용 동의, 마케팅정보 수신 동의, 개인정보 제 3자 제공 동의 > 약관 종류 수정 가능 <p>12. 회원 가입</p> <ul style="list-style-type: none"> - 필수 입력 사항 미 입력 시 비활성화 - 회원가입 완료 팝업 표시박스 - 오류 있을 때 각 텍스트 박스 하단 오류 문구 표시 <ul style="list-style-type: none"> > 유효성 체크 실패 : 텍스트 <p>13. 취소</p> <ul style="list-style-type: none"> - 로그인 화면으로 이동 <p>14. 안드로이드 이전버튼 tap</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국가 선택 화면으로 이동

Page Description	회원가입 – 정보 입력(국가 : 국외)	Screen ID	PT-A-04-3	Description
<div> <div> <div>11:59</div> <div> <div>취소</div> <div>회원가입</div> </div> </div> <div> <div>아이디<div>중복확인</div></div> <div>비밀번호 (8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합)</div> <div> <div>3</div> <div>이름성</div> </div> <div> <div>2</div> <div>국가 선택 ▼ 휴대폰 번호(선택)</div> </div> <div> <div>남자여자</div> </div> <div>생년월일</div> <div>거주지</div> <div>발 사이즈 ____cm</div> <div> <div>1</div> <div>다리 길이(선택) 왼쪽 : ____cm / 오른쪽 : ____cm</div> <div>?</div> </div> <div> <div>이메일 주소</div> <div>인증번호 받기</div> </div> <div> <div>인증번호<div>인증번호 확인</div></div> <div> <div>이용약관, 개인정보 수집 및 이용, 민감정보 제공, 블루투스 통신, 위치정보 이용, 마케팅정보 수신 (선택), 개인정보 제3자 제공(선택) 동의 하십니까?</div> <div> <div> <input type="checkbox"/> 이용약관 <input checked="" type="checkbox"/> 개인정보처리방침 <input type="checkbox"/> 민감정보 제공 동의 <input type="checkbox"/> 블루투스 통신 동의 </div> <div> <div><input type="checkbox"/> 전체 동의</div> <div> <div>전문보기</div> <div>전문보기</div> <div>전문보기</div> <div>전문보기</div> <div>전문보기</div> </div> </div> </div> <div>회원 가입</div> </div> </div> </div></div>				<ol style="list-style-type: none"> 국가 한국 외 가입자는 이메일 인증을 통한 회원가입 진행 휴대폰 선택 입력 해외일 경우 이름, 성 입력


Page Description	회원가입(의료진 매칭을 통한 회원 가입)	Screen ID	PT-A-04-4	Description
	<div><div><div>11:59</div><div>1</div><div>취소</div><div>회원가입</div></div><div><div>아이디</div><div>중복확인</div></div><div><div>비밀번호 (8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합)</div></div><div><div>이름(실명 입력)</div></div><div><div>이메일</div></div><div><div>남자</div><div>여자</div></div><div><div>매칭코드 이용한 회원가입 시나리오 삭제 (2021.11.18)</div></div><div><div>다리 길이(선택) 왼쪽 : ____cm</div></div><div><div>국가 선택 ▼</div><div>휴대폰 번호</div></div><div><div>인증번호 받기</div></div><div><div>인증번호</div><div>인증번호 확인</div></div><div><div>2 매칭코드</div><div>ABCD12345</div></div><div><div>이용약관, 개인정보 수집 및 이용, 민감정보 제공, 블루투스 통신, 위치정보 이용, 마케팅정보 수신 (선택), 개인정보 제3자 제공(선택) 동의 하십니까?</div><div><div><input type="checkbox"/> 이용약관</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 개인정보처리방침</div><div><input type="checkbox"/> 민감정보 제공 동의</div><div><input type="checkbox"/> 블루투스 통신 동의</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 전체 동의</div><div><input type="checkbox"/> 전문보기</div><div><input type="checkbox"/> 전문보기</div><div><input type="checkbox"/> 전문보기</div><div><input type="checkbox"/> 전문보기</div></div></div><div><div>회원 가입</div></div></div>	<div><div>1. HCP에서 보낸 링크를 통한 회원가입</div><div>1) HCP App에서 환자 휴대폰 or 이메일로 링크 전송</div><div>2) 환자 링크 tap</div><div>- APP 설치 여부 확인</div><div>> y : APP 실행 및 로그인 여부 판단 후 로그인 되어 있지 않다면 국가 선택 화면 표시, 국가 선택 후 회원 가입 화면으로 이동</div><div>> n : APP 설치, APP 실행 및 국가 선택 화면 표시, 국가 선택 후 회원 가입 화면으로 이동</div><div>2. 매칭 코드 입력</div><div>- 링크에 해당 입력 칸 자동 입력</div><div>> 수정 불가</div></div> <div><div>1. 안드로이드 이전버튼 tap</div><div>- 국가 선택 화면으로 이동</div></div> <div><div>* 국가 상관 없이 지원</div></div>		

Page Description	회원가입 - 입력 및 오류 발생 텍스트 박스	Screen ID	PT-A-04	Description
	<div><div>11:59</div><div>회원가입</div><div><div>아이디</div><div>중복확인</div></div><div><div>비밀번호 (8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합)</div></div><div><div>이름(실명 입력)</div></div><div><div>이메일</div></div><div><div>남자</div><div>여자</div></div><div><div>생년월일</div></div><div><div>거주지</div></div><div><div>발 사이즈 ____cm</div><div>?</div></div><div><div>다리 길이(선택) 왼쪽 : ____cm / 오른쪽 : ____cm</div></div><div><div>국가 선택 ▼ 휴대폰 번호</div></div><div><div>인증번호 받기</div></div><div><div>인증번호</div><div>인증번호 확인</div></div><div><div>이용약관, 개인정보 수집 및 이용, 민감정보 제공, 블루투스 통신, 위치정보 이용, 마케팅정보 수신 (선택), 개인정보 제3자 제공(선택) 동의 하십니까?</div><div><div><input type="checkbox"/> 전체 동의</div><div><input type="checkbox"/> 이용약관</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 개인정보처리방침</div><div><input type="checkbox"/> 민감정보 제공 동의</div><div><input type="checkbox"/> 블루투스 통신 동의</div></div><div><div>회원 가입</div></div></div></div> <div><div>아이디</div><div>OOOOO</div><div>중복확인</div></div> <div><div>아이디</div><div>중복확인</div></div> <div><div>이미 사용중인 아이디 입니다.</div></div> <div><div>남자</div><div>여자</div></div> <div><div>휴대폰 번호</div><div>'-'를 제외한 휴대폰 번호 입력</div><div>인증번호 받기</div></div> <div><div>휴대폰 번호</div><div>010-0000-000</div><div>인증번호 받기</div></div> <div><div>휴대폰 번호를 확인해 주세요.</div></div> <div><div>비밀번호</div><div>(8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합)</div></div> <div><div>비밀번호</div><div>(8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합)</div></div> <div><div>8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합이 아닙니다.</div></div> <div><div>생년월일 (8자리)</div><div>19XX/XX/XX</div></div> <div><div>생년월일 (8자리)</div><div>19001335</div></div> <div><div>생년월일을 확인해 주세요.</div></div> <div><div>이메일</div><div>abc@example.com</div></div> <div><div>이메일</div><div>abc@examplecom</div></div> <div><div>이메일 주소를 확인해 주세요.</div></div> <div><div>매칭코드</div><div>XXXXXXXXX</div></div> <div><div>유효하지 않은 매칭 코드 입니다.</div></div>	<div>11. 매칭 코드</div> <div>- HCP APP에서 생성한 매칭 코드 입력</div> <div>- 유효성이 맞지 않은 매칭 코드 입력 시 text box 하단 안내 문구 표시</div> <div>12. 약관</div> <div>- 개별 약관 체크박스/전문 보기 Tap시 해당 약관 화면으로 이동</div> <div>> 약관 화면에서 동의 버튼 tap 시 해당 약관 체크박스 체크 된 상태로 변경</div> <div>> 체크 해제 가능</div> <div>- 전체 약관 동의 시 전체 약관 화면 표시</div> <div>> 전체 동의 시 회원가입 화면으로 이동 후 '전체 동의' 체크 박스가 체크 된 상태로 변경</div> <div>13. 회원 가입</div> <div>- 필수 입력 사항 미 입력 시 비활성화</div> <div>- 회원가입 완료 팝업 표시박스</div> <div>- 오류 있을 때 각 텍스트 박스 하단 오류 문구 표시</div> <div>> 유효성 체크 실패 : 텍스트</div> <div>14. 취소</div> <div>- 로그인 화면으로 이동</div> <div>15. 안드로이드 이전버튼 tap</div> <div>- 국가 선택 화면으로 이동</div>		

Page Description	약관	Screen ID	PT-A-04-5 PT-A-04-6	Description
<div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>이용약관</div><div>1</div><div>2</div><div>동의</div></div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>개인정보처리방침</div><div>1</div><div>2</div><div>동의</div></div></div>				<div>1. 약관 영역 - 내부 스크롤 필요</div> <div>2. 동의 버튼 - 약관 스크롤이 하단까지 내려와야 활성화 - 동의 버튼 tap 시 회원가입 화면으로 이동 및 해당 약관 체크박스 체크 된 상태로 변경</div> <div>3. 이전 버튼 - 이전 화면으로 이동</div> <div>4. 안드로이드 이전버튼 tap - 이전 화면으로 이동</div>

Page Description	약관	Screen ID	PT-A-04-7 PT-A-04-8	Description
<div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>민감정보 제공 동의</div><div></div><div>2</div><div>동의</div></div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>블루투스 통신 동의</div><div></div><div>2</div><div>동의</div></div></div>				<div>1. 약관 영역 - 내부 스크롤 필요</div> <div>2. 동의 버튼 - 약관 스크롤이 하단까지 내려와야 활성화 - 동의 버튼 tap 시 회원가입 화면으로 이동 및 해당 약관 체크박스 체크 된 상태로 변경</div> <div>3. 이전 버튼 - 이전 화면으로 이동</div> <div>4. 안드로이드 이전버튼 tap - 이전 화면으로 이동</div>

Page Description	약관	Screen ID	PT-A-04-9 PT-A-04-10	Description
<div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>위치정보 이용 동의</div><div>1</div><div>2</div><div>동의</div></div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>마케팅 정보 수신 동의</div><div>1</div><div>2</div><div>동의</div></div></div>				<div>1. 약관 영역 - 내부 스크롤 필요</div> <div>2. 동의 버튼 - 약관 스크롤이 하단까지 내려와야 활성화 - 동의 버튼 tap 시 회원가입 화면으로 이동 및 해당 약관 체크박스 체크 된 상태로 변경</div> <div>3. 이전 버튼 - 이전 화면으로 이동</div> <div>4. 안드로이드 이전버튼 tap - 이전 화면으로 이동</div>

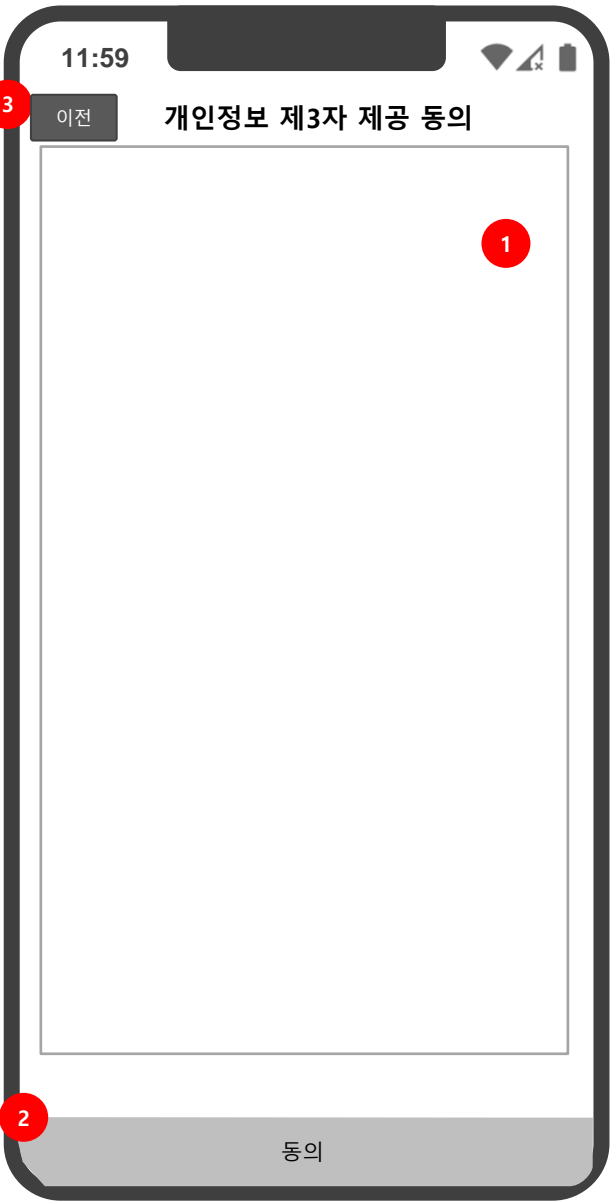Page Description	약관	Screen ID	PT-A-04-11	Description
<div><p>The image shows a mobile application screen titled '개인정보 제3자 제공 동의' (Personal Information Third-Party Provision Consent). At the top left, there is a button labeled '이전' (Previous) with a red circle '3' next to it. The main content area is a large white rectangle with a red circle '1' in its top right corner. At the bottom, there is a grey bar with the text '동의' (Consent) and a red circle '2' next to it. The status bar at the very top shows the time '11:59' and various icons.</p></div>				<div><div>1. 약관 영역</div><div>- 내부 스크롤 필요</div><div>2. 동의 버튼</div><div>- 약관 스크롤이 하단까지 내려와야 활성화</div><div>- 동의 버튼 tap 시 회원가입 화면으로 이동 및 해당 약관 체크박스 체크 된 상태로 변경</div><div>3. 이전 버튼</div><div>- 이전 화면으로 이동</div><div>4. 안드로이드 이전버튼 tap</div><div>- 이전 화면으로 이동</div></div>

Page Description	회원 가입 완료	Screen ID	PT-A-04-13	Description
	<div data-bbox="507 128 1108 1306"><div data-bbox="569 164 642 199">11:59</div><div data-bbox="984 164 1087 199"></div><div data-bbox="507 471 549 521">1</div><div data-bbox="631 478 984 599"><p>환영합니다. NEUROGAIT 회원 가입이 완료 되었습니다.</p></div><div data-bbox="569 599 1025 628"><p>원활한 APP 사용을 위해 몇 가지 필수 및 추가 정보가 필요합니다.</p></div><div data-bbox="507 1199 549 1249">2</div><div data-bbox="756 1235 859 1270"><p>시작하기</p></div></div>			<div data-bbox="1574 92 1999 307"><ol style="list-style-type: none">1. 환영 인사<ul style="list-style-type: none">- APP 가입 환영 인사 표시- 필수 및 추가 정보 필요 안내 문구 표시2. 시작하기<ul style="list-style-type: none">- 필수 및 추가 정보 입력 화면으로 이동- 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 문진 정보 입력 화면 표시3. 안드로이드 이전버튼 tap<ul style="list-style-type: none">- 반응 없음</div>

11:59

1 문진 정보 4 skip

2

1. 가족 병력을 선택해 주세요.

없음	고혈압	당뇨
뇌혈관 질환	심장 질환	골다공증
암	기타	

a

3 다음

- 문진 정보
 - 선택 항목
 - 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시
- 질문 1
 - 없음을 제외한 나머지 항목 중복 선택 가능
 - 없음 선택 시 다른 항목 선택 불가능
 - 기타 선택 시 직접입력 텍스트박스@ 표시
- 다음
 - 다음 문진 정보 입력 화면으로 이동
- Skip
 - skip 버튼 tap시 홈으로 이동
- 안드로이드 이전버튼 tap
 - 1번: '뒤로 가기 버튼을 한 번 더 누르면 종료됩니다.' 토스트 메시지 표시
 - 2번: APP 종료

문진 정보 순서 변경 및 기타 선택
시 텍스트 박스 추가
(2021.10.28)

Page Description	필수 및 추가 정보(문진 정보)	Screen ID	PT-A-04-12	Description
<div><p>11:59</p><p>이전</p><p>1 문진 정보</p><p>4 skip</p><p>2</p><p>2. 병원 진단 및 수술 이력을 선택해 주세요.</p><p>없음</p><p>근골격계 질환</p><p>심혈관계 질환</p><p>호흡계 질환</p><p>신경계 질환</p><p>내분비계 질환</p><p>디스크 질환</p><p>기타</p><p>a</p><p>3</p><p>다음</p><p>5</p></div>				<ol style="list-style-type: none">문진 정보<ul style="list-style-type: none">- 선택 항목- 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시질문 2<ul style="list-style-type: none">- ‘없음’을 제외한 나머지 항목 중복 선택 가능- 없음 선택 시 다른 항목 선택 불가능- 기타 선택 시 직접입력 텍스트박스^a 표시다음<ul style="list-style-type: none">- 질문 답변 미 입력 시 비활성화- 다음 문진 정보 입력 화면으로 이동Skip<ul style="list-style-type: none">- skip 버튼 tap시 홈으로 이동이전<ul style="list-style-type: none">- 이전 화면으로 이동 <ol style="list-style-type: none">안드로이드 이전버튼 tap<ul style="list-style-type: none">- 1번 : 이전 화면으로 이동

Page Description	필수 및 추가 정보(문진 정보)	Screen ID	PT-A-04-12	Description
				<ol style="list-style-type: none"> 문진 정보 <ul style="list-style-type: none"> - 선택 항목 - 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시 질문 3 <ul style="list-style-type: none"> - 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시 - 숫자 입력 후 '없음' tap 시 입력 박스 초기화 질문 4 <ul style="list-style-type: none"> - 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시 > 시간 및 분 개별 선택 - 숫자 입력 후 '확실하지 않음' tap 시 입력 박스 초기화 다음 <ul style="list-style-type: none"> - 질문 답변 미 입력 시 비활성화 - 질문 3 <ul style="list-style-type: none"> > '있음(숫자 입력)' 선택 후 다음 Tap 시 질문 4번으로 이동 > '없음' 선택 후 다음 Tap 시 질문 5번으로 이동 - 질문 4 <ul style="list-style-type: none"> > 질문 5번으로 이동 Skip <ul style="list-style-type: none"> - skip 버튼 tap 시 홈으로 이동 이전 <ul style="list-style-type: none"> - 이전 화면으로 이동
				<ol style="list-style-type: none"> 안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> - 1번 : 이전 화면으로 이동




- 문진 정보
 - 선택 항목
 - 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시
- 질문 3
 - 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시
 - 숫자 입력 후 '없음' tap 시 입력 박스 초기화
- 질문 4
 - 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시
 - > 시간 및 분 개별 선택
 - 숫자 입력 후 '확실하지 않음' tap 시 입력 박스 초기화
- 다음
 - 질문 답변 미 입력 시 비활성화
 - 질문 3
 - > '있음(숫자 입력)' 선택 후 다음 Tap 시 질문 4번 으로 이동
 - > '없음' 선택 후 다음 Tap 시 질문 5번 으로 이동
 - 질문 4
 - > 질문 5번으로 이동
- Skip
 - skip 버튼 tap시 홈으로 이동
- 이전
 - 이전 화면으로 이동
- 안드로이드 이전버튼 tap
 - 1번 : 이전 화면으로 이동

Page Description	필수 및 추가 정보(문진 정보)	Screen ID	PT-A-04-12	Description
				<ol style="list-style-type: none"> 문진 정보 <ul style="list-style-type: none"> 선택 항목 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시 질문 5 <ul style="list-style-type: none"> 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시 숫자 입력 후 '없음' tap 시 입력 박스 초기화 질문 6 <ul style="list-style-type: none"> 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시 > 시간 및 분 개별 선택 숫자 입력 후 '확실하지 않음' tap 시 입력 박스 초기화 다음 <ul style="list-style-type: none"> 질문 답변 미 입력 시 비활성화 질문 5 <ul style="list-style-type: none"> > '있음(숫자 입력)' 선택 후 다음 Tap 시 질문 6번으로 이동 > '없음' 선택 후 다음 Tap 시 질문 7번으로 이동 질문 6 <ul style="list-style-type: none"> > 질문 7번으로 이동 Skip <ul style="list-style-type: none"> - skip 버튼 tap 시 홈으로 이동 이전 <ul style="list-style-type: none"> - 이전 화면으로 이동
				<ol style="list-style-type: none"> 안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> - 1번 : 이전 화면으로 이동

- 문진 정보
 - 선택 항목
 - 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시
- 질문 5
 - 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시
 - 숫자 입력 후 '없음' tap 시 입력 박스 초기화
- 질문 6
 - 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시
 - > 시간 및 분 개별 선택
 - 숫자 입력 후 '확실하지 않음' tap 시 입력 박스 초기화
- 다음
 - 질문 답변 미 입력 시 비활성화
 - 질문 5
 - > '있음(숫자 입력)' 선택 후 다음 Tap 시 질문 6번 으로 이동
 - > '없음' 선택 후 다음 Tap 시 질문 7번 으로 이동
 - 질문 6
 - > 질문 7번으로 이동
- Skip
 - skip 버튼 tap시 홈으로 이동
- 이전
 - 이전 화면으로 이동
- 안드로이드 이전버튼 tap
 - 1번 : 이전 화면으로 이동

Page Description	필수 및 추가 정보(문진 정보)	Screen ID	PT-A-04-12	Description
<div> <div> <div>6</div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>1</div> <div>문진 정보</div> <div>5</div> <div>skip</div> <div>2</div> <div>7. 지난 7일 간, 한 번에 적어도 10분 이상 걸은 날이 며칠입니까?</div> <div> <div>일주일에 ____ 일</div> <div>없음</div> </div> <div>4</div> <div>다음</div> </div> <div> <div>6</div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>문진 정보</div> <div>5</div> <div>skip</div> <div>8. 그런 날 중 하루에 걸으면서 보낸 시간이 보통 얼마나 됩니까?</div> <div> <div>하루에 ____ 시간 ____ 분</div> <div>확실하지 않음</div> </div> <div>4</div> <div>다음</div> </div> </div>				<ol style="list-style-type: none"> 문진 정보 <ul style="list-style-type: none"> - 선택 항목 - 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시 질문 7 <ul style="list-style-type: none"> - 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시 - 숫자 입력 후 '없음' tap 시 입력 박스 초기화 질문 8 <ul style="list-style-type: none"> - 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시 > 시간 및 분 개별 선택 - 숫자 입력 후 '확실하지 않음' tap 시 입력 박스 초기화 다음 <ul style="list-style-type: none"> - 질문 답변 미 입력 시 비활성화 - 질문 7 <ul style="list-style-type: none"> > '있음(숫자 입력)' 선택 후 다음 Tap 시 질문 8번으로 이동 > '없음' 선택 후 다음 Tap 시 질문 9번으로 이동 - 질문 8 <ul style="list-style-type: none"> > 질문 9번으로 이동 Skip <ul style="list-style-type: none"> - skip 버튼 tap시 홈으로 이동 이전 <ul style="list-style-type: none"> - 이전 화면으로 이동 안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> - 1번 : 이전 화면으로 이동

Page Description	필수 및 추가 정보(문진 정보)	Screen ID	PT-A-04-12	Description
				<ol style="list-style-type: none"> 문진 정보 <ul style="list-style-type: none"> - 선택 항목 - 현재 화면에서 APP 종료 후 로그인 시 홈 표시 질문 9 <ul style="list-style-type: none"> - 입력 박스 tap 시 숫자 입력 키보드 표시 > 시간 및 분 개별 선택 - 숫자 입력 후 '확인하지 않음' tap 시 입력 박스 초기화 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 질문 답변 미 입력 시 비활성화 - 완료 버튼 tap시 홈으로 이동 Skip <ul style="list-style-type: none"> - skip 버튼 tap시 홈으로 이동 이전 <ul style="list-style-type: none"> - 이전 화면으로 이동 <ol style="list-style-type: none"> 안드로이드 이전버튼 tap <ul style="list-style-type: none"> - 1번 : 이전 화면으로 이동

Page Description	회원 가입_문진 작성 완료	Screen ID	PT-A-04-12	Description
	<div data-bbox="507 128 1108 1306"><div data-bbox="569 164 642 199">11:59</div><div data-bbox="984 164 1087 199"></div><div data-bbox="507 471 549 521">1</div><div data-bbox="600 478 1025 521">문진 작성이 완료 되었습니다.</div><div data-bbox="621 535 994 564">문진 운동은 설정에서 확인 및 신규 작성 가능합니다.</div><div data-bbox="507 1199 549 1249">2</div><div data-bbox="756 1235 859 1270">시작하기</div></div>			<div data-bbox="1574 92 1792 171"><ol style="list-style-type: none">1. 무진 작성 완료 문구2. 시작하기<ul style="list-style-type: none">- 홈으로 이동</div>

Page Description	팝업&띠배너 화면	Screen ID	PT-A-05-11	Description
<div>   </div>				<div> <p>1. 팝업 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 앱 진입 시 이벤트 팝업 - master admin에서 관리 <p>1. 팝업 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 앱 사용 중 알림 팝업 - master admin에서 관리 가능 - 예) 낙상 위험 안내, 보행 이상, 운동 스케줄 안내 - 버튼 1 : 이동하기(알림에 관련된 화면으로 이동하기), 확인 - 버튼 2 : 닫기 <p>1. 푸시메시지</p> <ul style="list-style-type: none"> - 앱 사용 중 알림 배너 - 썸네일 및 텍스트 표시 <ul style="list-style-type: none"> > 텍스트 영역 넘어가면 넘어가는 텍스트 ... 표시 - master admin에서 관리 <p>1. 안드로이드 이전버튼 tap</p> <ul style="list-style-type: none"> - 팝업,띠배너 닫힘 </div>

10/10

native

hybrid

native



a

오늘의 결과

아직 운동을 진행하지 않았어요
운동 후 결과를 확인 하세요



- 홈
 - 주 캘린더, To-Do, 오늘 운동 달성률, 오늘 운동 밸런스 종합 결과, 보행 분석 결과, 보행 분석 결과 표시
- 주 캘린더
 - 앱 진입 시 default 오늘 날짜 표시
 - > 운동이 등록된 요일은 일 하단 '표시'
 - 다른 날짜 선택 시 하단 '오늘의 운동 스케줄'에 해당 날짜의 운동 스케줄 표시
- 오늘의 운동 달성률
 - 오늘의 운동 달성률, 오늘의 운동 수, 미진행 운동 수 표시
 - 달성률
 - > 진행 전 : 0%,
 - > 진행중 : 세트 수에 따라 변경
 - 1세트 : N, 1세트 완료하지 않았을 경우 0%
 - 전체 5세트 중 N세트 진행 완료 시
 - 5/N: 달성률(소수점 1자리 이하 버림)
 - 완료 : 100%
 - 전체 운동(n)의 달성률(x)을 계산하여 표시
 - > $x1+x2+x3+.../n$: 오늘 전체 운동 달성률 (소수점 1자리 이하 버림)
- 오늘의 운동 수
 - 오늘의 운동 : 오늘 스케줄에 등록된 운동 수 표시
 - 미진행 : 완료 되지 않은 운동 수
 - 운동이 없을 경우 추천 운동 표시
- 오늘의 결과
 - 오늘 자신이 운동한 운동의 결과 등급 표시
 - > 보행운동 종합 결과 : 오늘의 걸음 데이터 제외
 - 과거 날짜는 선택 날짜의 등급 표시
 - 운동을 진행하지 않았을 경우 ㉠ 표시
- 오늘의 운동
 - 의료진/직접 추가한 운동 카드 색상 구분 필요
 - master admin에서 운동 부위 추가 하지 않았을 경우 해당영역 숨김처리
 - 운동 스케줄이 등록되어 있지 않을 경우 '추천 운동' 카드 표시
 - 카드 tap 시 해당 운동의 운동 화면으로 이동
- 오늘의 걸음
 - 걸음 분석 데이터 표시
 - 오늘 자을 보행을 진행하지 않았을 경우 기록하기 버튼 표시
 - 기록하기 버튼 tap 시 걸음 기록 *화면으로 이동
 - 오늘의 걸음은 오늘날 가능
- 메뉴
 - 메뉴 5개 표시
 - 메뉴 선택 시 각 메뉴 화면으로 이동
- 안드로이드 이전버튼 tap
 - 1번 : '뒤로 가기 버튼을 한 번 더 누르면 종료됩니다.' 토스트 메시지 표시
 - 2번 : APP 종료



- 오늘의 걸음
 - 오늘 걸음 데이터를 이용하여 분석 데이터 표시
 - 오늘 걸음 시간
 - > 오늘의 걸음 측정한 총 시간 표시
 - 좌/우 밸런스
 - > 오늘 걸음 평균 좌/우 밸런스 표시
 - > 그래프 내 문구 하단 표 참조
 - 걸음 수
 - > 오늘 걸음 총 걸음 수 표시
 - 상세 결과 보기
 - > 오늘의 걸음 종합 결과 화면으로 이동
- 기록하기
 - 오늘의 걸음 재실행 버튼

보행 밸런스 등급	문구	텍스트 색상
균형잡힘	good	green
약한 왼쪽 또는 오른쪽 치우침	약한 왼쪽 치우침	orange
	약한 오른쪽 치우침	
심한 왼쪽 또는 오른쪽 치우침	심한 왼쪽 치우침	red
	심한 오른쪽 치우침	



1. **오늘의 결과**
- 오늘 이전 날짜에서 오늘의 운동을 진행하지 않았을 경우 '오늘은 휴식을 취하셨습니다' 문구 표시
2. **오늘의 걸음**
- '걸음 데이터가 없습니다. 오늘의 걸음을 기록해보세요.' 문구 표시
- 기록하기 버튼 표시



1. 추천 운동
 - 운동 리스트 표시
 - 전체, 보행, 밸런스 선택하여 표시
 - > 보행 운동 : 보행, 왼발 부분부하, 오른발 부분부하
 - > 밸런스 운동 : 제자리 서기, 스쿼트, 왼발 외발 서기, 오른발 외발 서기, 계단 오르기/내리기, 의자에서 앉기/서기, 까치발
2. 오늘의 걸음
 - '걸음 데이터가 없습니다. 오늘의 걸음을 기록해보세요.' 문구 표시
 - 기록하기 버튼 표시




- 오늘의 운동 달성률
 - 오늘의 운동 달성률, 오늘의 운동 수, 미진행 운동 수 표시
 - 달성률
 - > 진행 전 : 0%,
 - > 진행중 : 세트 수에 따라 변경
 - 1세트 : N, 1세트 완료하지 않았을 경우 0%
 - 전체 5세트 중 N세트 진행 완료 시 5/N: 달성률(소수점 1자리 이하 버림)
 - 완료 : 100%
 - 전체 운동(n)의 달성률(x)을 계산하여 표시
 - > $x1+x2+x3+.../n$: 오늘 전체 운동 달성률 (소수점 1자리 이하 버림)
- 오늘의 운동 수
 - 오늘의 운동 : 스케줄에 등록된 운동 수 표시
 - 미진행 : 완료 되지 않은 운동 수
- 오늘의 결과
 - 운동 미진행 카드 표시
- 오늘의 운동
 - 의료진/직접 추가한 운동 카드 색상 구분 필요
 - 운동 스케줄이 등록되어 있지 않을 경우 '추천 운동' 카드 표시
 - 카드 tap 시 해당 운동의 운동 화면으로 이동
- 오늘의 걸음
 - 기록하기 tap 시 기록하기 화면으로 이동
 - 오늘 날짜의 데이터로 기록



1. 추천 운동
 - 운동 리스트 표시
 - 전체, 보행, 밸런스 선택하여 표시
 - > 보행 운동 : 보행, 왼발 부분부하, 오른발 부분부하
 - > 밸런스 운동 : 제자리 서기, 스쿼트, 왼발 외발 서기, 오른발 외발 서기, 계단 오르기/내리기, 의자에서 앉기/서기, 까치발
2. 오늘의 걸음
 - '오늘의 걸음을 기록해보세요. 분석을 통해 자신의 보행 패턴을 확인 할 수 있습니다.' 문구 표시
 - 기록하기 tap 시 기록하기 화면으로 이동
 - 오늘 날짜의 데이터로 기록


Page Description	홈 > 오늘의 걸음 > 기록하기 > 시간 선택	Screen ID	PT-A-05-7	Description
<div><div><div>3</div><div>11:59</div><div>이전</div><div>오늘의 걸음</div></div><div><div>걸고자 하는 시간을 선택해 주세요</div><div><div>1</div><div>1</div><div>분</div></div><div>5</div><div>10</div><div>15</div><div>20</div><div>분</div></div><div><div>2</div><div>시작</div></div></div>				<div>1. 보행 시간 선택 - 시간 선택 시 선택된 시간 포커스</div> <div>2. 시작 시작 tap 시 측정 화면으로 이동</div> <div>3. 이전 - 홈으로 이동</div> <div>4. 안드로이드 이전버튼 tap - 1번 : 홈으로 이동</div>
<div><div>시간 변경 1, 5, 10, 15, 20분 (2021.11.24)</div></div>				

Page Description	Screen ID	Description
홈 > 오늘의 걸음 > 기록하기 > 걸음 측정 하기- 실행	PT-A-05-8	
<div>native</div> <div></div>	<div>1. 타이머 표시 - 타이머 종료 시 홈으로 이동 - 홈에서 분석된 데이터 표시</div> <div>2. 족저압 - 측정 중 실시간 족저압 및 밸런스 표시</div> <div>3. 종료 - 측정 강제 종료 - 측정 시간에 종료 버튼 tap한 시간까지 계산하여 표시</div>	

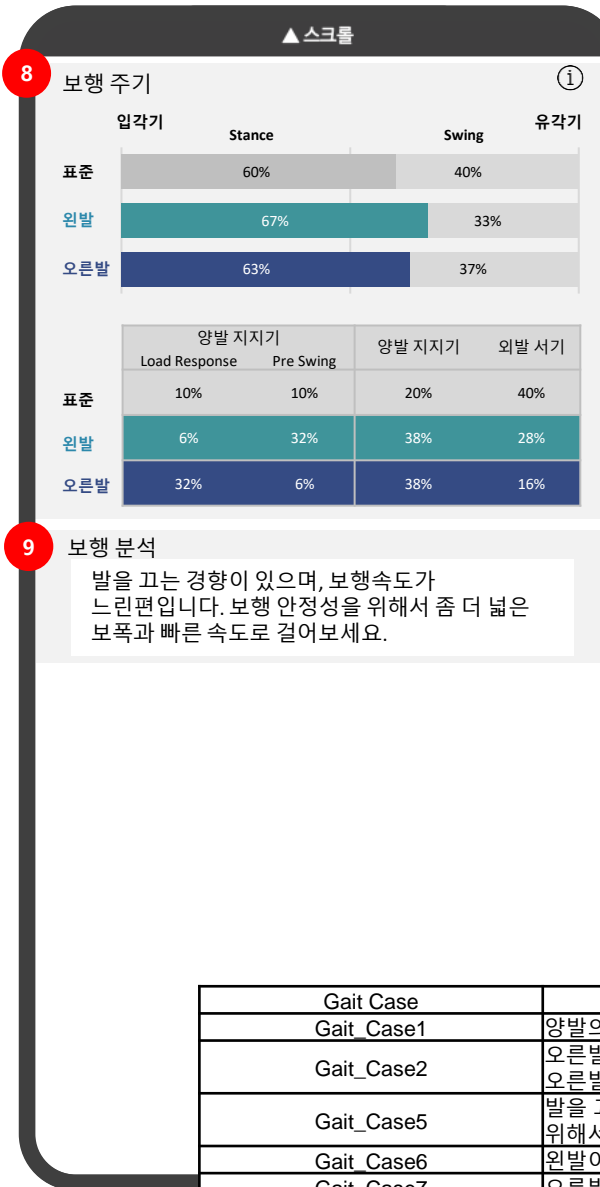

- 치우침 그래프
 - 일별 치우침을 그래프로 표시
 - 하루 평균 데이터를 이용하여 표시
 - 당일 데이터 점으로 표시, 데이터는 선으로 이어서 표시
 - > 데이터가 없을 경우 표시 하지 않음
- 날짜 선택
 - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
 - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
 - > 오늘 이후 날짜 선택 불가
 - > 오늘의 걸음을 하지 않은 날짜 선택 불가
 - 날짜 선택 시 하단에 자율 보행 측정된 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
 - 전체, 자율 보행을 한 시간 선택
 - 자율 보행 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 자율 보행 전체 데이터 평균
 - 시간 : 측정 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 측정 시간
 - 전체 : 오늘 총 걸음 시간,
 - 시간 : 선택 시간 걸음 시간
- 걸음 데이터
 - 측정 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 좌/우 GCT 밸런스
 - 좌우 밸런스 및 분석 결과 표시
 - 분석 결과 하단 보행 밸런스 등급 문구 참조
 - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 길이
 - 신규 인술에서 제공하는 데이터
 - 신규 인술 판매 전까지 미표시
 - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 주기
 - 측정 시간 내 보행 주기 표시
 - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 분석
 - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
 - 하단 보행 분석 문구 참조

Gait Case	문구
Gait_Case1	양발의 보행 안정성이 좋습니다.
Gait_Case2	오른발을 끄는 경향이 있습니다. 오른발의 안정성을 위해 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로 걸어보세요.
Gait_Case5	발을 끄는 경향이 있으며, 보행속도가 느린편입니다. 보행 안정성을 위해서 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로 걸어보세요.
Gait_Case6	왼발이 안정성이 떨어지며 차고 나가는 능력이 부족합니다.
Gait_Case7	오른발이 안정성이 떨어지며 차고 나가는 능력이 부족합니다.
Gait_Case8	왼발을 끄는 경향이 있으며, 보행속도가 느린편입니다. 보행 안정성을 위해서 좀 더 넓은 보폭과 빠른 속도로 걸어보세요.

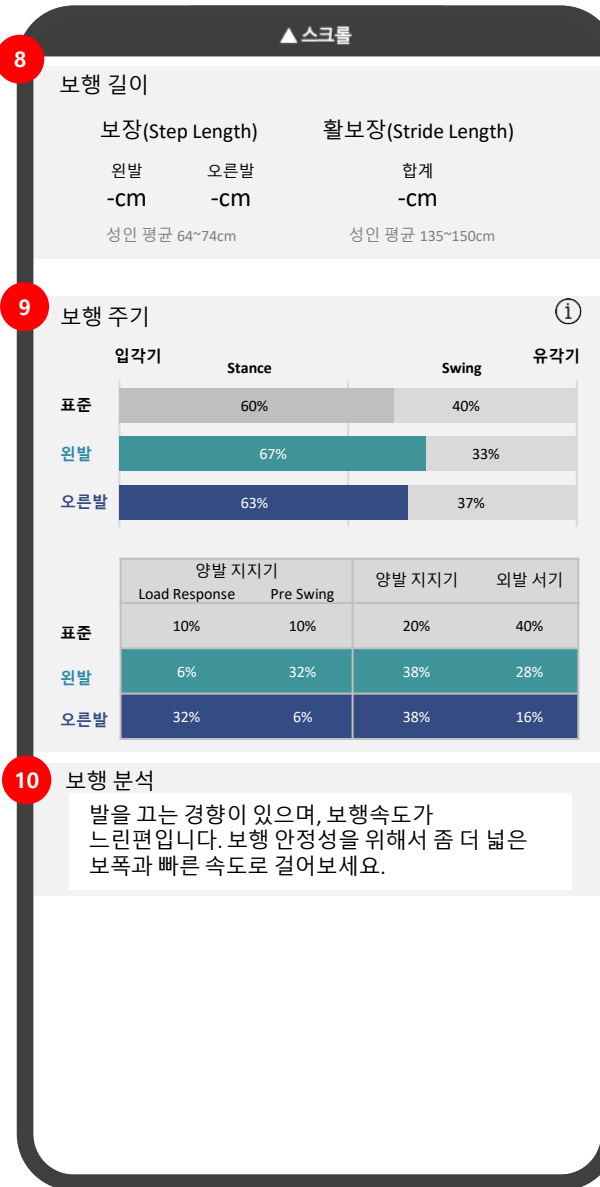

- 치우침 그래프
 - 일별 치우침을 그래프로 표시
 - 하루 평균 데이터를 이용하여 표시
 - 당일 데이터 점으로 표시, 데이터는 선으로 이어서 표시
 - > 데이터가 없을 경우 표시 하지 않음
- 날짜 선택
 - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
 - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
 - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
 - 날짜 선택 시 하단에 자음 보행 측정 한 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
 - 전체, 오늘의 걸음을 시작한 시간 표시
 - 오늘의 걸음 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 오늘의 걸음 전체 데이터 평균
 - 시간 : 오늘의 걸음 측정 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 걸음 시간
 - 전체 : 오늘 총 걸음 시간,
 - 시간 : 선택 시간 걸음 시간
- 걸음 데이터
 - 측정 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 압력 중심 이동 패턴
 - 측정 시간 동안 압력 중심 이동 패턴 표시
- 지면 접촉 시간
 - 좌우 밸런스 및 분석 결과 표시
- 보행 길이
 - 신규 인솔에서 제공하는 데이터
 - 신규 인솔 판매 전까지 미표시
 - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 주기
 - 측정 시간 내 보행 주기 표시
 - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 분석
 - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
 - 하단 보행 분석 문구 참조

Page Description	홈 > 자율 보행 > 상세 결과 보기 > ① 아이콘 선택	Screen ID	PT-A-05-10	Description
	<div data-bbox="43 159 779 418"> <div data-bbox="78 178 747 225"> <div data-bbox="78 178 126 225">i</div> <div data-bbox="147 182 401 218">지면 접촉 시간 (GCT)</div> <div data-bbox="714 187 747 215">✕</div> </div> <div data-bbox="126 257 607 332"> <p>각발이 지면에 닿아있는 시간이 각발의 GCT입니다. GCT밸런스는 각 시간을 비율로 환산한 값으로 51.2% 이내이면 정상 밸런스로 간주합니다.</p> <p>GCT밸런스 차이가 클 수록 좌우의 비대칭을 보여 줍니다.</p> </div> </div> <div data-bbox="43 439 779 1025"> <div data-bbox="78 458 747 505"> <div data-bbox="78 458 126 505">i</div> <div data-bbox="147 462 408 498">보행 주기 (Gait Cycle)</div> <div data-bbox="714 466 747 495">✕</div> </div> <div data-bbox="68 536 671 993"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stance (입각기) / Swing (유각기) 보행 주기는 크게 지면에 닿아 있는 Stance(입각기)와 Swing (유각기)로 분류됩니다. 해당 주기는 60:40의 비율이 일반적입니다. 2. Stance 주기 내 Double / Single support Stance 주기는 크게 양발을 동시에 디디는 Double support와 한발만 디디는 Single Support 로 구분됩니다. 해당 비율은 20:40의 비율이 일반적입니다. Double support는 Stance 시작시 발생하는 Load response 구간과 Stance 끝날 때 발생하는 Pre swing 구간으로 나뉘며, 이는 10:10의 비율이 일반적입니다. 3. 분석 포인트 보행 주기별 왼발 오른발 비율이 큰 차이없이 나타나야 합니다. 특히 보행 안정성이 떨어지거나 균형 능력이 떨어졌을 때 Double support의 비율이 길어지게 됩니다 </div> </div> <div data-bbox="803 439 1535 765"> <div data-bbox="837 458 1506 505"> <div data-bbox="837 458 884 505">i</div> <div data-bbox="905 462 1183 498">보행 길이 (Gait Length)</div> <div data-bbox="1473 466 1506 495">✕</div> </div> <div data-bbox="828 536 1471 739"> <ol style="list-style-type: none"> 1. 보장 (Step Length) 보장은 양발이 동시에 디딜 때 두 발 사이의 거리이며 한쪽 발의 뒤꿈치와 반대편 발의 뒤꿈치 사이의 거리를 의미합니다. 2. 활보장 (Stride Length) 활보장은 입각기와 유각기 전체 보행주기의 거리로 한 발의 입각기 초기 접지점에서 같은 발의 말기 유각기 접지점 사이의 거리입니다. </div> </div>			

스케줄



- 캘린더
 - 주/월 캘린더 제공
 - 오늘 버튼 선택 시 오늘 날짜로 이동
 - default 오늘 요일 표시
 - 스케줄이 있는 요일의 일 하단에 '표시'
 - 오늘 날짜와 선택된 날짜 색상 별도 표시
 - 선택된 날짜 하단에 해당 날짜의 스케줄 표시
 - > 스케줄이 없을 경우 '스케줄이 없습니다'
- 스케줄
 - 스케줄에 등록 된 운동 리스트 표시
 - 스케줄 순서
 - > 1순위 : 의료진 등록한 운동
 - > 2순위 : 자신이 등록한 운동
 - > 3순위 : 진행중, 미진행, 완료 순서
 - 카드형 데이터 표시
 - > 카드 좌측에 의료진 처방 운동/본인 등록 운동 구분 색상 바 표시
 - > 의료진이 처방한 스케줄이 있을 경우 본인이 등록한 운동은 하단으로 이동 후 불투명 처리
 - 의료진 코멘트가 있을 경우 해당 카드 하단에 의료진 코멘트 표시
 - > 의료진 코멘트 2줄 이상 시 ... 처리
 - 카드 tap 시 선택 '운동 > 해당요일 > 선택 운동' 화면으로 이동
- 스케줄 추가
 - 신규 스케줄 추가
- 이전
 - 홈으로 이동
- 안드로이드 이전버튼 tap
 - 홈으로 이동

11:59

취소

스케줄 추가

날짜 선택

추가 하려는 날짜 및 시간을 택하세요

0000.00.00 - 0000.00.00

다음

2021.09-2021.10

일 월 화 수 목 금 토

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1 2

3 4 5 6 7 8 9



10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23


24 25 26 27 28 29 30

취소 선택 완료

- 스케줄
 - 시작 및 종료 날짜 선택
 - > 영역 탭시 ④팝업 표시
- 날짜 표시 및 다음 버튼
 - 선택된 날짜 표시
 - 버튼 Tap 시 운동 선택 화면으로 이동
- 취소
 - 이전 화면으로 이동
- 날짜 선택
 - 2달씩 표시
 - 캘린더에서 시작 날짜, 종료 날짜 선택
 - 우측 ◀▶ Tap 시 2달 씩 이동
 - 시작 날짜를 종료 날짜 이후 선택 시 기존 선택 되었던 시작 날짜가 종료 날짜로 변경
 - 선택 완료
 - > 선택 된 날짜 캘린더에 표시
 - 취소 : 팝업 닫힘

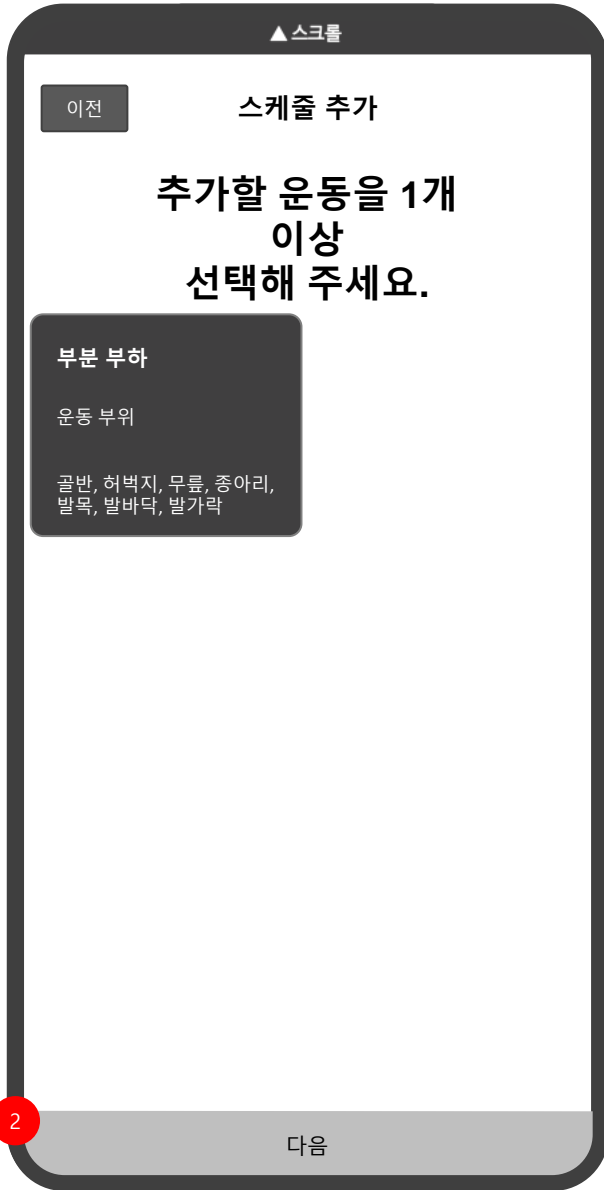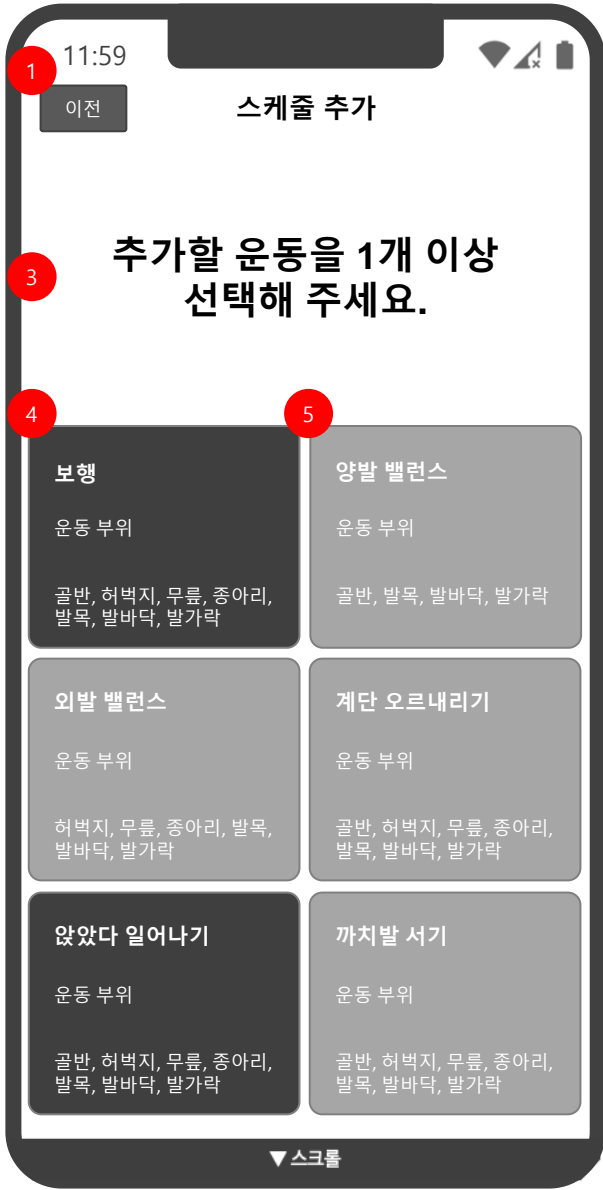

1. 이전
- 날짜 선택 화면으로 이동
2. 다음
- 선택한 운동이 없는 상태에서 비활성화
- 운동 선택 시 다음 단계로 진행
3. 운동 선택 가이드
4. 선택 상태의 운동 카드
5. 미선택 상태의 운동 카드

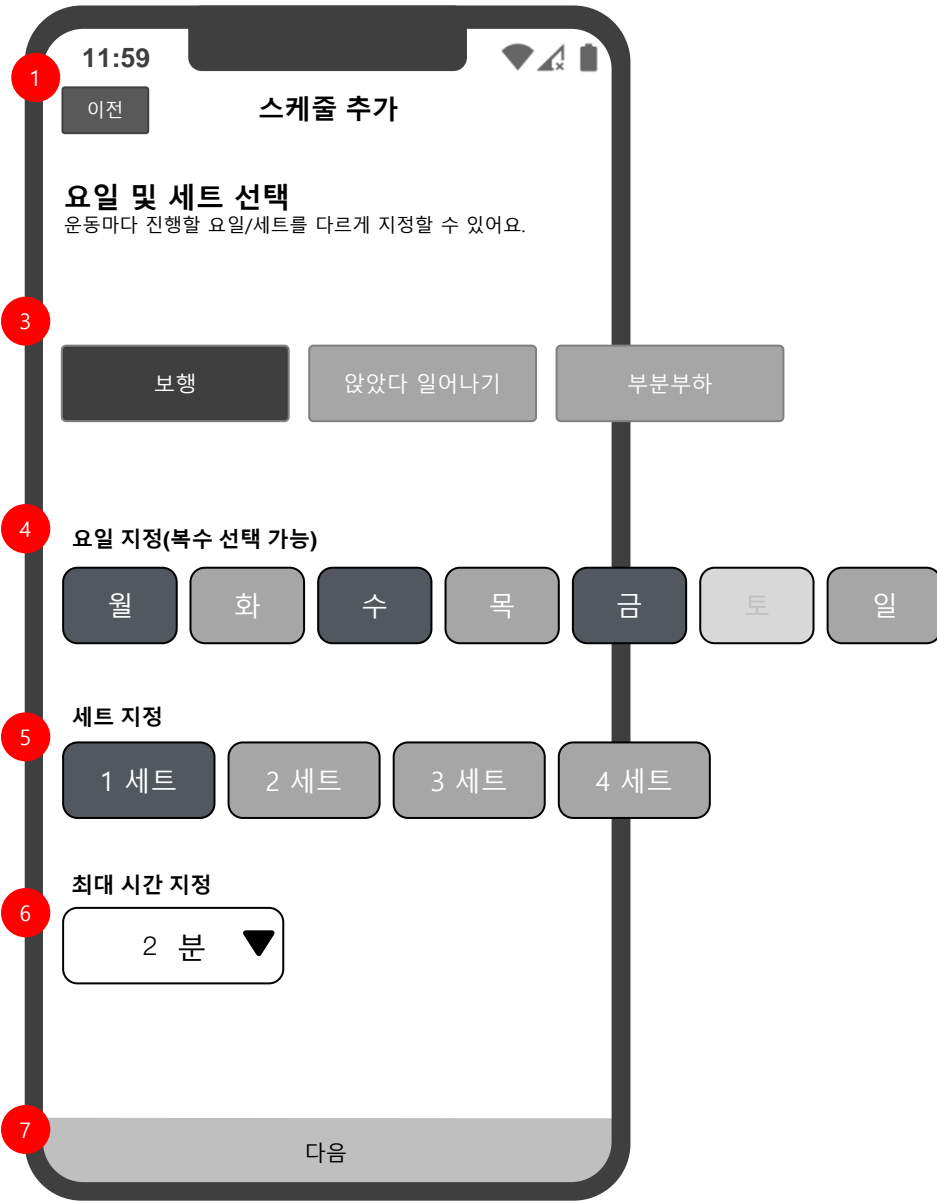Page Description	신규 스케줄 추가 > 운동 선택 > 요일, 세트 지정	Screen ID	PT-A-07-3	Description
				<ol style="list-style-type: none"> 이전 버튼: - Tap 시 운동 선택 단계로 복귀, 선택한 운동 상태 유지 추가 버튼: 1) ㉠와 모든 항목이 요일과 세트가 지정되지 않을 경우 비활성화 2) Tap 시 입력 및 선택 내용 스케줄 추가에 표시 선택한 운동 표시: - 맨 왼쪽 카드 선택 상태로 페이지 로드 요일 지정 영역: - 미선택 상태로 페이지 로드 - 중복 선택 가능 - 미지정 불가능 - 선택한 스케줄 기간에 해당되지 않은 요일은 비활성화 세트 지정 영역: 1) 1세트 선택 상태로 페이지 로드 2) 중복 선택 불가능 3) 미지정 불가능 보행 시간 선택 -보행 선택 시에만 입력 가능하도록 활성화됨 -시간은 서버에서 설정 다음 - 순서 변경 화면으로 이동

Page Description	신규 스케줄 추가 > 운동 선택 > 요일, 세트 지정 > 날짜 및 운동 추가	Screen ID	PT-A-07-4	Description
	<div data-bbox="424 128 1025 1306"><div><div>11:59</div><div><div>4</div><div>이전</div></div><div><div>1</div><div>스케줄 추가</div><div>0000-00-00 - 0000-00-00</div></div><div><div>순서 변경</div><div>해당하는 운동을 꼭 눌러 이동해보세요.</div><div><div>2</div><div><div>보행</div><div>≡</div></div><div><div>앉았다 일어나기</div><div>≡</div></div><div><div>부분 부하</div><div>≡</div></div></div><div><div>3</div><div>추가</div></div></div></div></div>			<div><div>1. 스케줄</div><div>- 시작&종료 날짜 표시</div><div>2. 운동 리스트</div><div>- 순서 변경</div><div>> 추가된 운동 우측 순서 변경 아이콘을 drag&drop 하여 순서 변경</div><div>3. 운동 추가</div><div>운동 추가 및 스케줄 화면으로 이동</div><div>4. 운동 요일/세트 지정 화면으로 이동</div></div>



Page Description	신규 스케줄 추가 > 운동 선택 > 요일, 세트 지정 > 날짜 및 운동 추가> 순서 변경(drag&drop)	Screen ID	PT-A-07-4	Description
	<div data-bbox="424 128 1025 1306"><div>11:59</div><div>이전스케줄 추가</div><div>0000-00-00 — 0000-00-00</div><div><div>순서 변경</div><div>해당하는 운동을 꼭 눌러 이동해보세요.</div><div><div>보행</div><div>앉았다 일어나기</div><div>보부 보하</div><div><div>1</div>앉았다 일어나기</div></div><div>추가</div></div></div>			<div>1. 순서 변경</div> <ul style="list-style-type: none">- 우측 순서변경 아이콘 tap 시 선택된 항목의 박스 색상 변경 및 크기 변경- 위치 변경 후 tap stop 시 기본 박스로 변경 <div>디자인 및 시나리오 변경 (2021.11.08)</div>

HO
OH

Page Description	운동(의료진이 추가한 운동)	Screen ID	PT-A-06-1	Description
	<div> <div> <div>8</div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>운동</div> <div>1</div> <div>2021.10</div> <div>일</div> <div>월</div> <div>화</div> <div>수</div> <div>목</div> <div>금</div> <div>토</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>2</div> <div>운동 리스트</div> <div>무릎 들어올리기 (진행중)</div> <div>운동 부위 : 무릎, 엉덩이, 허벅지</div> <div>무릎 들어올리기</div> <div>운동 부위 : 무릎, 엉덩이, 허벅지</div> <div>+</div> <div>운동 추가</div> <div>3</div> <div>아래의 부위를 사용합니다.</div> <div>골반</div> <div>허벅지</div> <div>무릎</div> <div>종아리</div> <div>발목</div> <div>발바닥</div> <div>발가락</div> <div>4</div> <div>운동 방법</div> <div>스크롤</div> <div>5</div> <div>도움말</div> <div>무릎이 욱신거리면 운동을 중단하고 이후 같은 운동을 하실 때 세트를 1번씩 줄이세요.</div> <div>6</div> <div>의료진에게 문의</div> <div>문의 페이지로 이동</div> <div>7</div> <div>운동 진행</div> </div> </div>			<ol style="list-style-type: none"> 스케줄 <ul style="list-style-type: none"> - 주 캘린더 표시 - 오늘 요일 표시 운동 리스트 <ul style="list-style-type: none"> - 카드형 데이터 표시 - > default 첫번째 카드 표시 - 의료진과 내가 추가한 운동 색상을 다르게 표시 - 마지막 카드에서 운동 생성 카드 표시 - > 운동 추가는 당일 운동만 추가 가능 - > 오늘 이전 날짜의 운동리스트에서 '운동 추가' 미표시 - 운동 추가 버튼 tap 시 운동 추가 화면으로 이동 - > 운동에서 운동 추가는 당일 운동만 추가 운동 부위: <ul style="list-style-type: none"> - master admin에서 등록된 이미지 및 레이블 표시 - master admin에서 운동 부위 추가 하지 않았을 경우 해당 영역 숨김처리 - 서버에 등록된 운동 부위 표시 - > 운동 부위 없을 경우 해당 영역 숨김 운동 방법 동영상: <ol style="list-style-type: none"> 1) 썸네일: 마스터 관리자가 첨부한 정방향 이미지 출력 2) Tap 시 동영상 플레이어 팝업; 동영상 비율은 landscape 16:9 도움말 <ul style="list-style-type: none"> - 의료진이 등록한 코멘트 표시 의료진에게 문의 <ul style="list-style-type: none"> - Tap 시 "의료진에게 문의" 페이지 팝업 - 오늘 이후 날짜의 운동에서 미노출 운동 진행 버튼: <ul style="list-style-type: none"> - Tap 시 운동 진행 - 운동 완료 : 결과 보기로 변경 - 오늘 이전 운동 : <ul style="list-style-type: none"> - > 운동 진행했을 경우 : 결과 보기로 변경, 과거 운동 결과 화면으로 이동 - 오늘 이후 운동 : 운동 진행 버튼 미노출 이전 <ul style="list-style-type: none"> - 이전 Tap 시 홈으로 이동 <div>운동 부위 썸네일 삭제 (2021.11.24)</div>

Page Description	운동(의료진이 추가한 운동) > 의료진에게 문의	Screen ID	PT-A-06-14	Description
<div> </div>				<ol style="list-style-type: none"> 이전 버튼: - Tap 시 back 문의 내용 작성 영역: a. 인풋 박스 영역을 초과할 시 내부 스크롤 b. 버튼 전체 Tap 시 첨부 파일 삭제 confirm 출력 c. Tap 시 디바이스 앨범 팝업 d-1. @에 입력한 내용이 없는 경우 버튼 비활성화 d-2. Tap 시 본 페이지 새로 고침, ②의 가장 상단에 작성글 출력 Q&A 내역 영역: 1) 환자/의료진 작성글 분리 2) 작성 일시 기준 최신순 정렬 첨부파일 보기 버튼: 1) 각 작성글 아래에 출력, 2) Tap 시 플레이어(동영상) 또는 뷰어(이미지) 팝업
57				



Page Description	운동(내가 추가한 운동)	Screen ID	PT-A-06-2	Description
<div> <div>기 (진행중)</div> <div>영덩이, 허벅지</div> </div>	<p>11:59</p> <p>이전 운동 삭제</p> <p>2021.10 일 월 화 수 목 금 토</p> <p>3 4 5 6 7 8 9</p> <p>운동 리스트</p> <p>무릎 들어올리기 운동 부위 : 무릎, 엉덩이, 허벅지</p> <p>운동 추가</p> <p>아래의 부위를 사용합니다. 골반 무릎</p> <p>운동 방법</p> <p>스크롤</p> <p>메모</p> <p>메모 내용입니다. 메모 내용입니다. 메모 내용입니다. 메모 내용입니다. 메모 내용입니다. 메모 내용입니다.</p> <p>메모 작성</p> <p>취소 저장</p> <p>운동 진행</p>			<ol style="list-style-type: none"> 스케줄 <ul style="list-style-type: none"> -주 캘린더 표시 -오늘 요일 표시 운동 리스트 <ul style="list-style-type: none"> -카드형 데이터 표시 -> default 첫번째 카드 표시 -의료진과 내가 추가한 운동 색상 다르게 표시 -마지막 카드에서 운동 생성 카드 표시 운동 부위: <ul style="list-style-type: none"> - master admin에서 운동 부위 추가 하지 않았을 경우 해당영역 숨김처리 운동 방법 동영상: <ol style="list-style-type: none"> 1) 썸네일: 마스터 관리자가 첨부한 정방향 이미지 출력 2) Tap 시 동영상 플레이어 팝업; 동영상 비율은 landscape 16:9 메모: <ul style="list-style-type: none"> - 사용자가 운동 진행 또는 본 화면에서 입력한 메모 내용 출력 a. Tap 시 메모 작성 인풋박스 팝업 b-1. 100자 제한 b-2. "취소" 버튼 Tap 시 팝업 닫음, "저장" 버튼 Tap 시 인풋박스에 입력한 내용이 화면에 출력 운동 진행 버튼: <ul style="list-style-type: none"> - Tap 시 운동 진행 - 운동 완료 : 결과보기로 변경 - 오늘 이전 운동 <ul style="list-style-type: none"> > 운동 진행했을 경우 : 결과 보기로 변경, 과거 운동 결과 화면으로 이동 - 오늘 이후 운동 : 운동 진행 버튼 미노출 삭제 버튼: <ul style="list-style-type: none"> - 환자 본인이 생성한 운동 삭제 > 의료진이 생성한 운동에서는 삭제 버튼 없음 - 삭제 tap 시 삭제 확인 팝업 표시

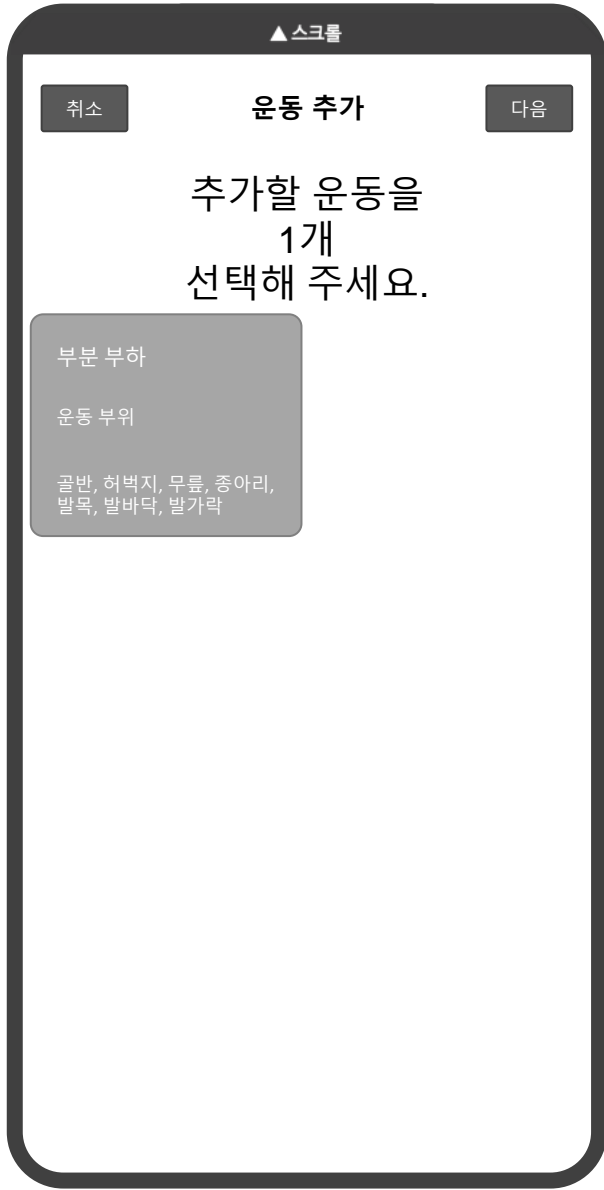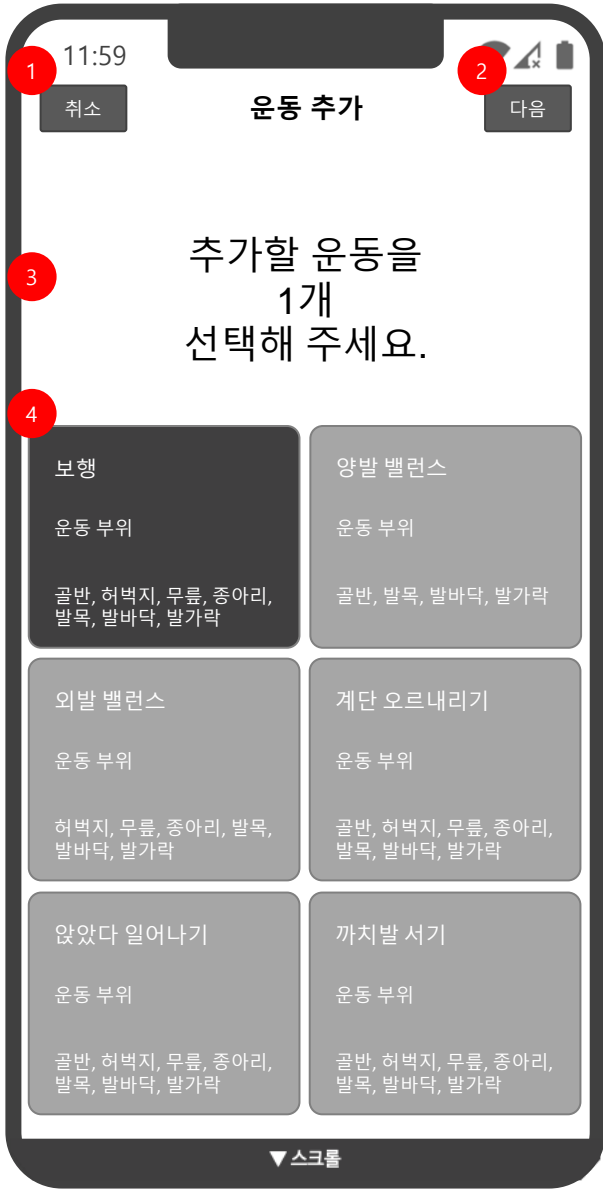

1. 취소 버튼:
 - 이전 화면으로 이동
2. 다음 버튼:
 - 선택한 운동이 없는 상태에서 비활성화
 - 다음 화면으로 이동
3. 운동 선택 가이드:
 - 가이드 위아래 여백 배치
 - 래로 스크롤 시 위아래 여백 최소화하여 헤더와 붙어 고정 표시
4. 운동
 - 운동 선택 시 운동 카드 색상 변경
 - 다른 카드 선택 시 이전 카드 선택 취소 처리
 - ~~master admin에서 서버에서~~ 운동 부위 추가 하지 않았을 경우 해당영역 숨김처리

Page Description	운동 > 운동 추가 > 세트 지정	Screen ID	PT-A-06-4	Description
<div></div>				<ol style="list-style-type: none">이전<ul style="list-style-type: none">- Tap 시 운동 선택 단계로 이동, 선택한 운동 상태 유지선택한 운동 표시:<ul style="list-style-type: none">- 주요 키워드 강조 표시세트 지정 영역:<ul style="list-style-type: none">- default : 1세트 선택- 중복 선택 불가능- 미지정 불가능보행 시간 선택<ul style="list-style-type: none">- 보행 선택 시에만 선택 가능하도록 활성화됨- 분 선택 시 드롭 다운 메뉴 표시운동 별 최종 일정 확인 영역:<ul style="list-style-type: none">- 3,4에서 선택한 값이 즉각 반영완료<ul style="list-style-type: none">- 모든 항목이 입력 상태가 아닐 경우 비활성화- Tap 시 운동 화면으로 이동 후 해당 운동 포커스


native

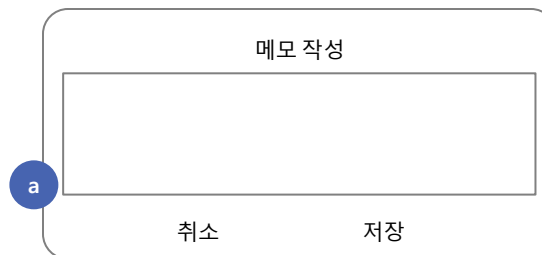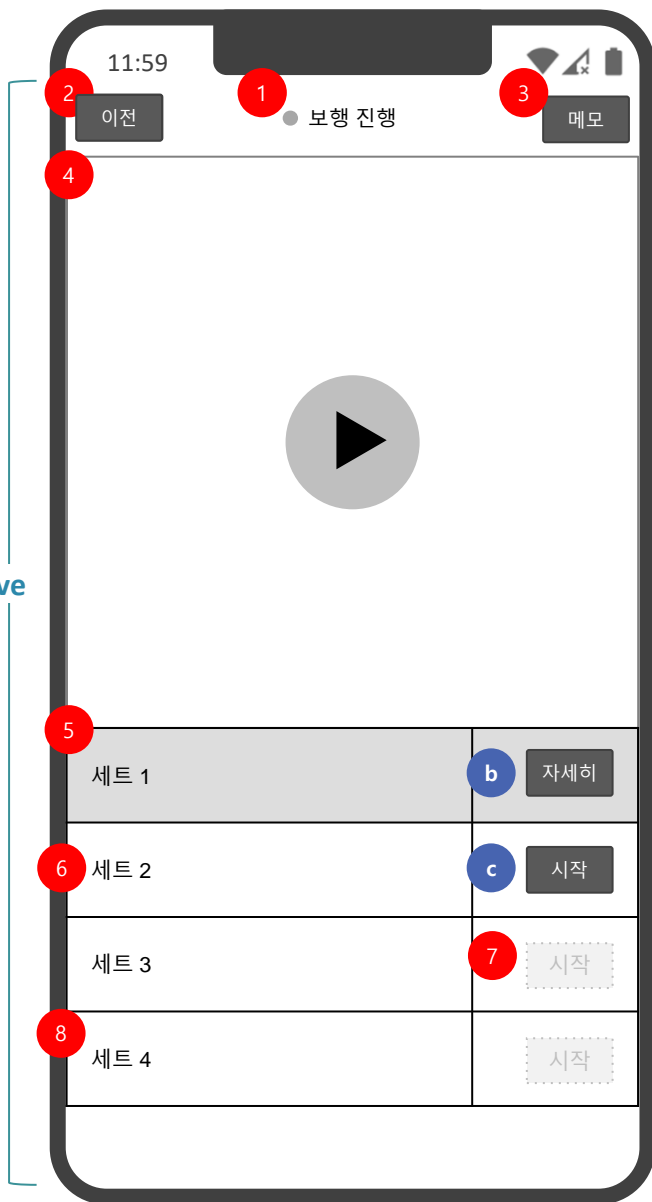


- 타이틀:
 - 1) 진행하는 운동명 출력
 - 2) 본인 추가 운동 뱃지 표시
- 이전 버튼:
 - Tap 시 이전 화면으로 이동
 - 진행률 재산정
- 메모 버튼:
 - Tap 시 메모 작성 인풋박스 팝업
 - a. "취소" 버튼 Tap 시 팝업 닫음, "저장" 버튼 Tap 시 인풋박스에 입력한 내용이 화면에 출력
- 정방향 운동 가이드 동영상:
 - 1) 페이지 로드 시 일시정지 상태
 - 2) 반복 재생 없음
- 1회 차:
 - 완료된 상태 배경색 적용
 - b. Tap 시 즉저합 확인 화면으로 이동
- 2회차:
 - 미진행 상태 배경색 표시
 - c. 버튼 Tap 시 즉저합 운동 페이지 팝업 표시
- 미진행 상태의 시작 버튼
 - 직전 세트를 완료하기 전 버튼 비활성화
- 마지막 세트 완료 시 운동 완료 피드백 팝업 표시


Page Description	운동(내가 추가한 운동 , 이전 날짜의 운동) > 결과 보기(동영상 비촬영)	Screen ID	PT-A-06-16	Description
<div><div>native</div><div><div><div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>보행 진행</div><div>1</div><div>메모</div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>세트 1</div><div>2</div><div>자세히</div></div><div><div>세트 2</div><div>미진행</div></div><div><div>세트 3</div><div>미진행</div></div><div><div>세트 4</div><div>미진행</div></div></div></div><div><div><div>메모 작성</div><div>a</div><div><div></div></div><div>취소</div><div>저장</div></div></div></div>	<div><div>1. 메모</div><div>- 메모 기능 유지</div><div>2. 버튼</div><div>- 운동 완료한 운동 우측에 자세히 버튼 표시</div><div>- 운동을 진행하지 않았을 경우 미진행 표시</div></div>			

결과보기 화면 추가
(2021.10.28)

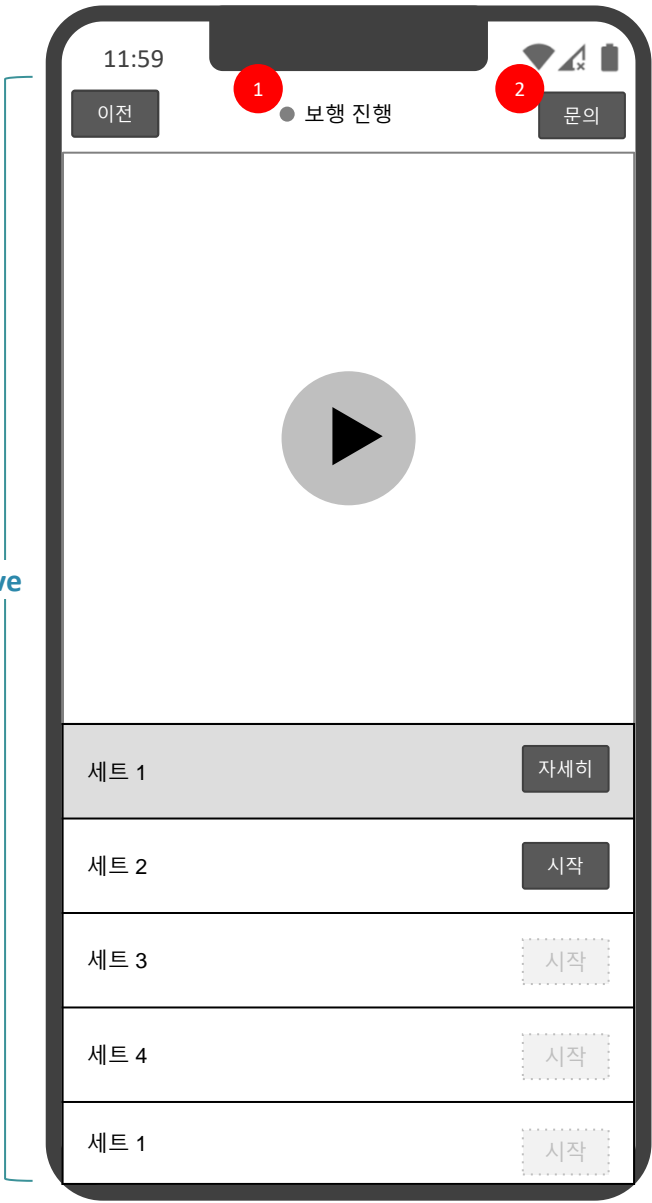Page Description	운동(의료진이 추가한 운동) > 운동 대기(동영상 미촬영)	Screen ID	PT-A-06-6	Description
native				<div>1. 타이틀: 1) 진행하는 운동명 출력 2) 의료진 추가 운동 배지 표시</div> <div>2. 문의 버튼: - Tap 시 "의료진에게 문의" 화면으로 이동</div>
				<div>Screen ID 수정</div>


Page Description	운동(의료진이 추가한 운동, 이전 날짜의 운동) > 결과보기(동영상 미촬영)	Screen ID	PT-A-06-17	Description
<div>native</div> <div></div>	<div><div>1. 문의</div><div>- 오늘 이전 운동에 대한 문의 기능 유지</div><div>2. 버튼</div><div>- 운동 완료한 운동 우측에 자세히 버튼 표시</div><div>- 운동을 진행하지 않았을 경우 미진행 표시</div></div> <div><div>결과보기 화면 추가</div><div>(2021.10.28)</div></div> <div>Screen ID 수정</div>			

native

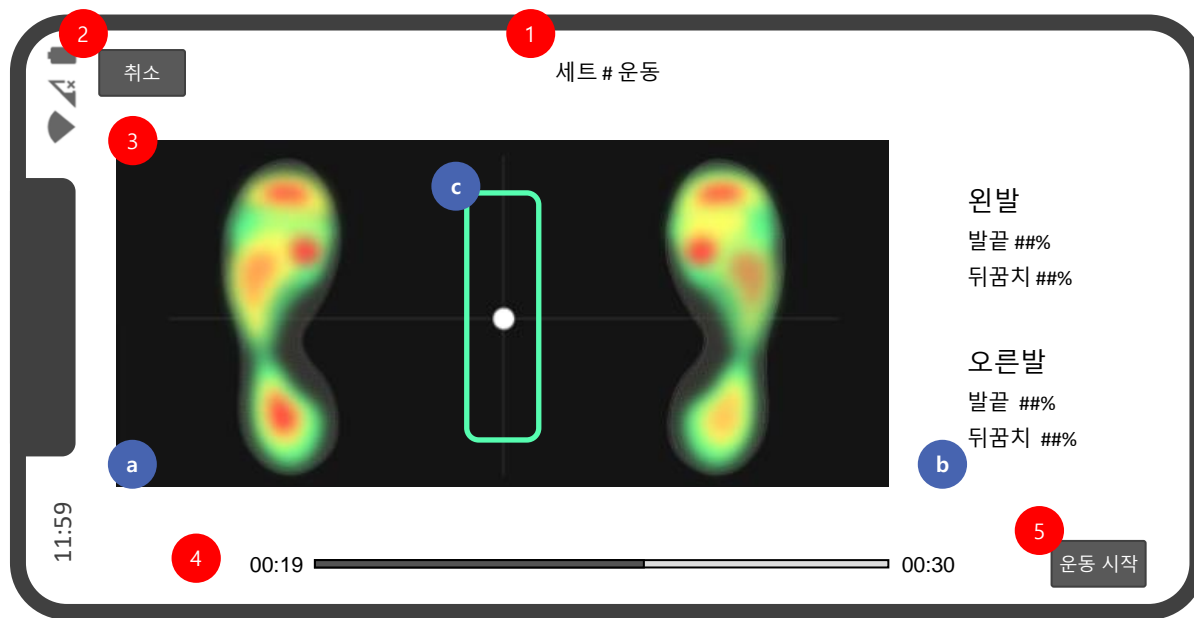

- 타이틀:
- 운동 세트 # 출력
- 취소 버튼:
- Tap 시 이전 화면으로 이동
- 족저압 운동 영역:
a. 족저압 출력
b. 양쪽 밸런스 비중 출력
c. 밸런스 가이드 출력
- 족저압 운동 게이지:
1) ⑤ 버튼이 "운동 시작"인 상태에서 Tap 시 3초 카운트다운 후 운동 시작
2) ⑤ 버튼이 "중지"인 상태에서 Tap 시 게이지 및 시간 초기화
- 족저압 운동 컨트롤 버튼:
1) 페이지 진입 시 "운동 시작" 레이블 출력, Tap 시 운동 진행, 운동 완료 시 자동으로 운동 조회 화면으로 이동
2) 운동 진행 중 "중지" 레이블 출력, Tap 시 운동 중지, 운동 초기화
- 인솔 연결 끊김 알럿 메시지
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화, 컨트롤 버튼 운동 시작으로 변경
2) "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 세트 운동 페이지 닫음
3) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

native

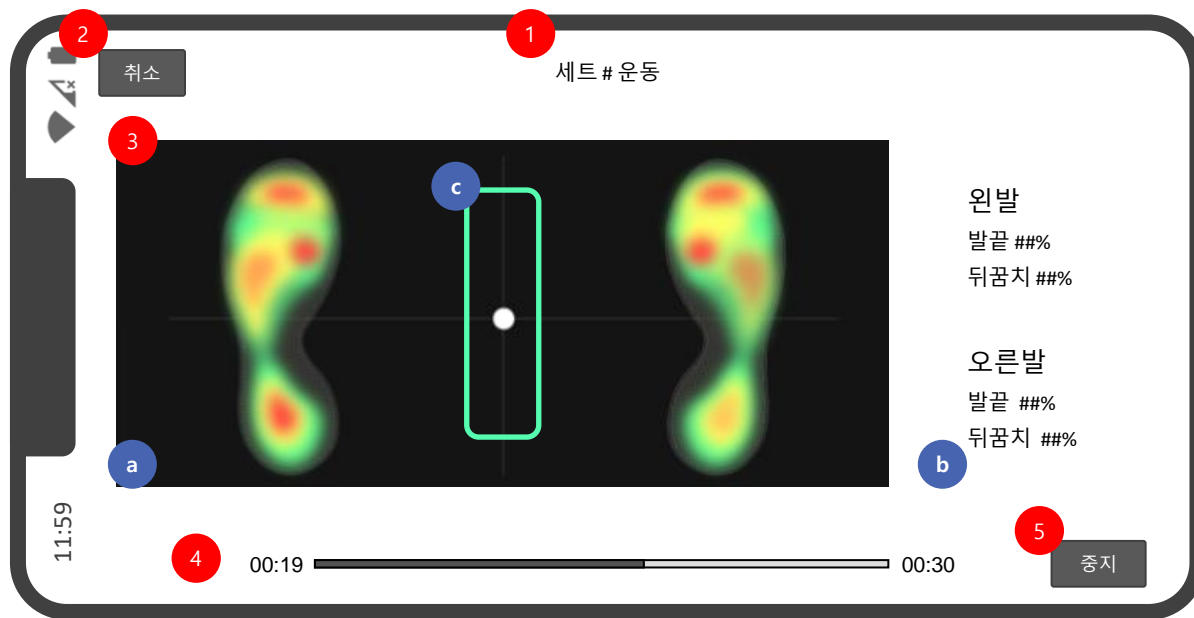

6

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고 운동을
재개하시겠어요?


중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이
연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.

운동 중단

인솔 연결


- 타이틀:
- 운동 세트 출력
- 취소 버튼:
- Tap 시 이전 화면으로 이동
- 족저압 운동 영역:
a. 족저압 출력
b. 양쪽 밸런스 비중 출력
c. 밸런스 가이드 출력
- 족저압 운동 게이지:
1) ⑤ 버튼이 "운동 시작"인 상태에서 Tap 시 3초 카운트다운 후 운동 시작
2) ⑤ 버튼이 "중지"인 상태에서 Tap 시 게이지 및 시간 초기화
- 족저압 운동 컨트롤 버튼:
1) 페이지 진입 시 "운동 시작" 레이블 출력, Tap 시 운동 진행, 운동 완료 시 자동으로 운동 조회 화면으로 이동
2) 운동 진행 중 "중지" 레이블 출력, Tap 시 운동 중지, 운동 초기화
- 인솔 연결 끊김 알럿 메시지
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화, 컨트롤 버튼 운동 시작으로 변경
2) "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 세트 운동 페이지 닫음
3) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

native

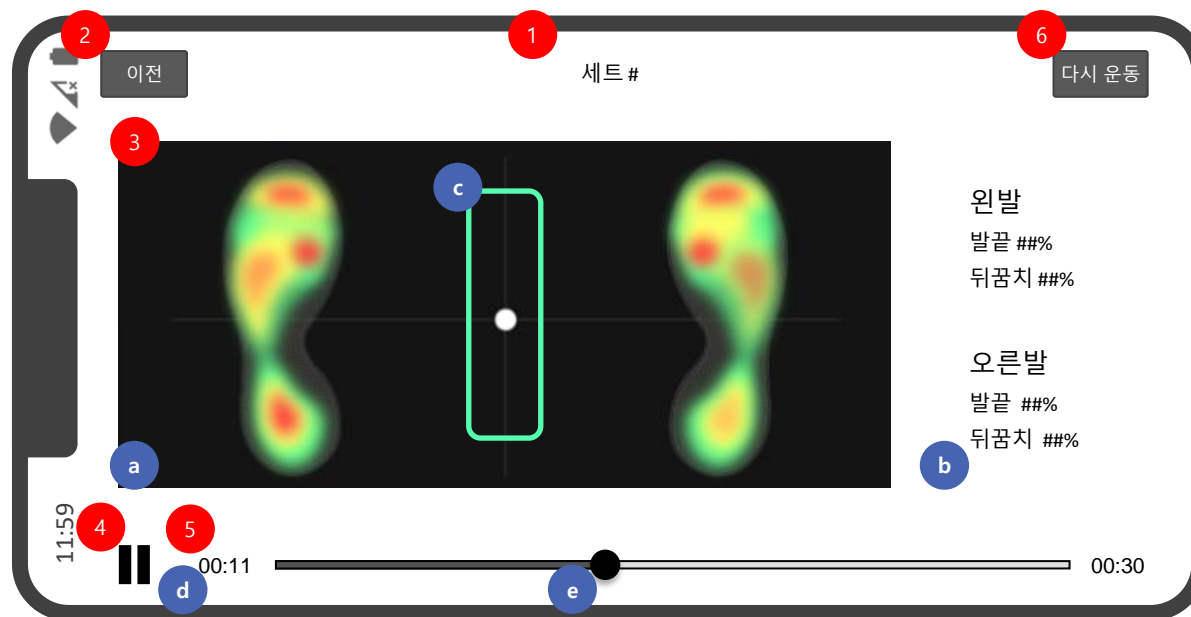


- 타이틀:
- 세트 # 출력
- 이전 버튼:
1) Tap 시 이전 화면으로 이동
- 족저압 영역:
a. 운동된 족저압 출력
b. 양쪽 밸런스 비중 출력
c. 밸런스 가이드 출력
- 재생/일시정지 버튼:
- Tap 시 ⑤ 타임라인 재생 및 ③의 데이터 재생/일시정지
- 타임라인:
d. 현재 ④가 위치한 시점 출력
e. seeker: 좌우 스와이프하여 해당 시점의 ③의 데이터 출력
- 다시 운동
- 현재 데이터 제거 후 해당 운동 족저압 녹화 화면으로 이동
- 오늘 이전 날짜의 운동 운동 확인 시 다시 운동 버튼 비노출

Page Description	운동(의료진이 추가한 운동) > 운동 대기(동영상 촬영)	Screen ID	PT-A-06-10	Description
<div><div>native</div><div>11:59</div><div>이전</div><div>보행 진행</div><div>문의</div><div>세트 1</div><div>세트 2</div><div>세트 3</div><div>세트 4</div><div>세트 5</div><div>동영상 촬영</div><div>동영상 촬영</div><div>동영상 촬영</div><div>동영상 촬영</div><div>동영상 촬영</div></div> <div><div>1. 타이틀:<div>1) 진행하는 운동명 출력</div><div>2) 본인 추가 운동 배지 표시</div></div><div>2. 이전 버튼:<div>- Tap 시 이전 화면으로 이동</div><div>- 진행률 재산정</div></div><div>3. 문의 버튼:<div>- Tap 시 "의료진에게 문의" 페이지 팝업</div></div><div>4. 정방향 운동 가이드 동영상:<div>1) 페이지 로드 시 일시정지 상태</div><div>2) 반복 재생 없음</div></div><div>5. 1세트:<div>- 배경색 적용</div></div><div>6. 동영상 썸네일:<div>1) 동영상 파일의 첫 프레임 출력</div><div>2) Tap 시 동영상 플레이어 화면으로 이동</div></div><div>7. 동영상 촬영 버튼:<div>1) Tap 시 동영상 촬영 카메라 화면으로 이동</div><div>2) 동영상 촬영 완료 시 ⑥으로 변경</div></div><div>8. 미진행 상태의 동영상 촬영 버튼:<div>- 직전 세트를 완료하기 전 버튼 비활성화</div></div><div>9. 마지막 세트 완료 시 운동 완료 피드백 팝업 표시</div></div>				

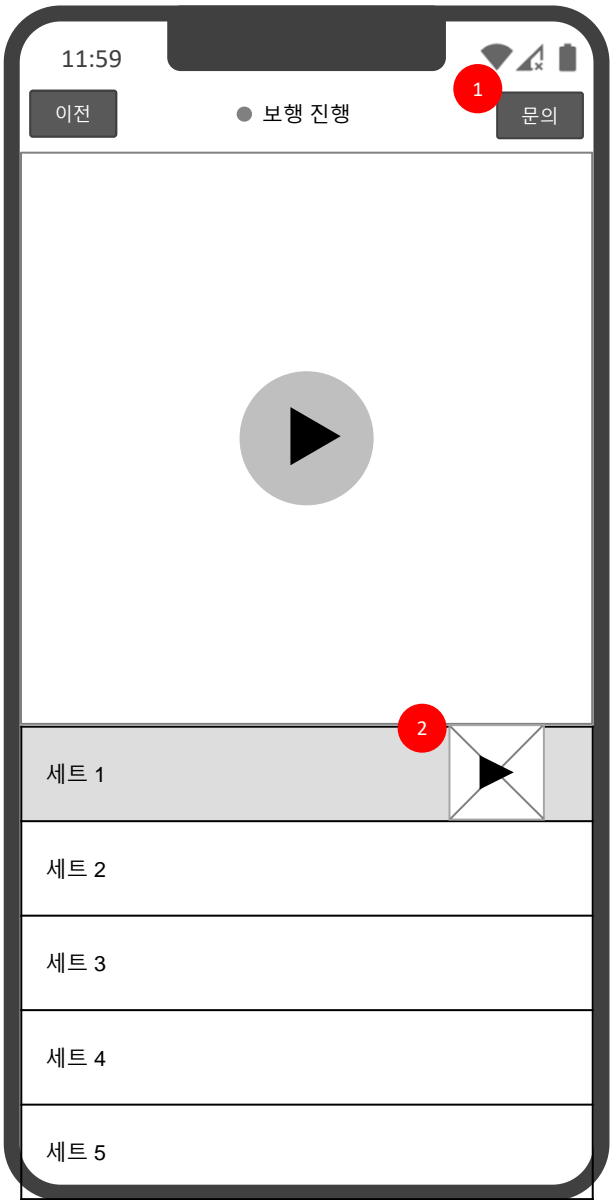Page Description	운동(의료진이 추가한 운동, 이전 날짜의 운동) > 결과 보기(동영상 촬영)	Screen ID	PT-A-06-10	Description
<div data-bbox="37 753 124 782">native</div>	<div data-bbox="155 142 762 1332"></div>			<div data-bbox="1570 89 1968 204"><ol style="list-style-type: none">1. 문의<ul style="list-style-type: none">- 오늘 이전 운동에 대한 문의 기능 유지2. 버튼<ul style="list-style-type: none">- 운동 완료한 운동 우측에 썸네일 표시- 운동을 진행하지 않았을 경우 버튼 미표시</div> <div data-bbox="1618 811 1999 939"><div>결과보기 화면 추가 (2021.10.28)</div></div>

native

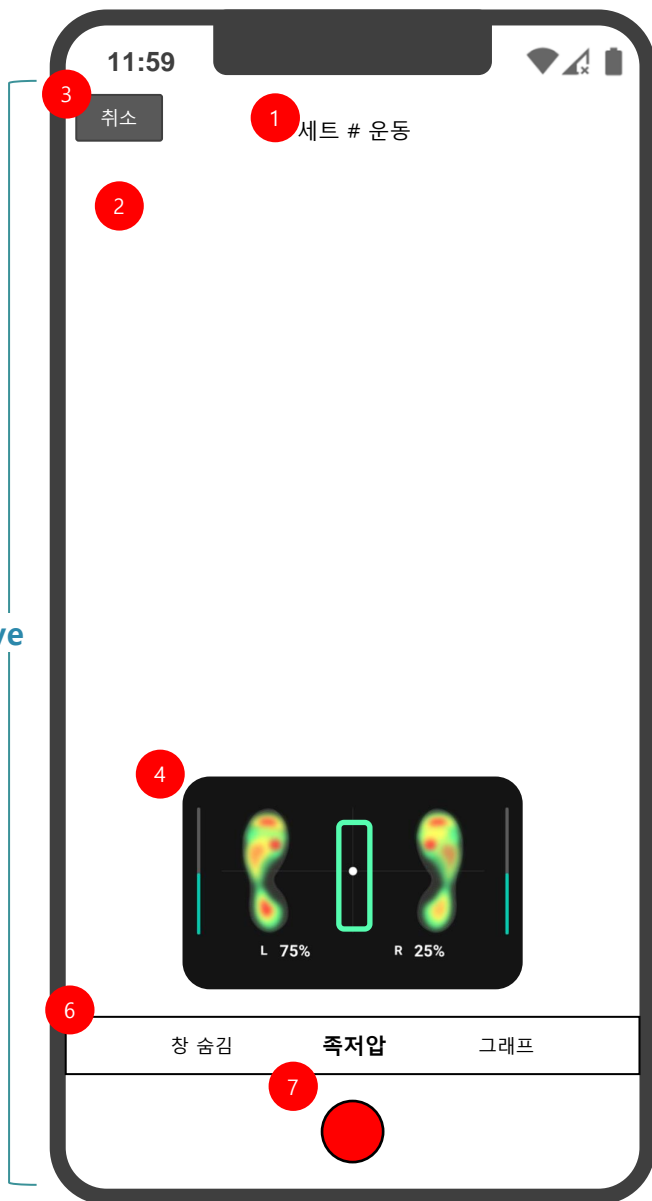


7

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하시겠어요?

인솔이 연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.

운동 중단 인솔 연결

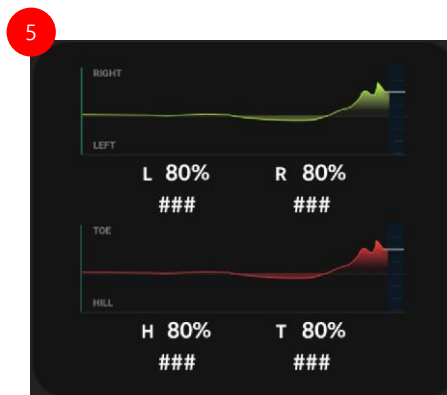

1. 타이틀:
- 촬영 세트 출력
2. 뷰파인더
1) 화면 전체 범위
2) 족저압 레이어와 별개로 촬영
3. 취소 버튼:
- Tap 시 이전 화면으로 이동
4. 족저압 레이어
5. 그래프 레이어
6. 레이어 컨트롤 바:
1) 현재 상태 레이블 강조
2) 창 숨김 Tap 시 레이어 숨김
3) 족저압 Tap 시 족저압 레이어 표시
4) 그래프 Tap 시 그래프 레이어 표시
7. 녹화 버튼
- Tap 시 녹화 시작
8. 인솔 연결 끊김 알럿 메시지:
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화
2) "운동 중단" Tap 시 운동 진행 화면으로 이동
2) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

native



3

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고
운동을 재개하시겠어요?


중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이
연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수
없습니다.

운동 중단

인솔 연결


- 촬영 타이머:
 - 운동별 시간에 맞춰 타이머 재생
 - 타이머 만료 시 촬영 완료 후 운동 조회 화면으로 이동
- 녹화 중단 버튼:
 - Tap 시 녹화 중단, 운동 초기화
- 인솔 연결 끊김 알럿 메시지:
 - 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화
 - "운동 중단" Tap 시 촬영 동영상 휘발, 카메라 닫음
 - "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

native

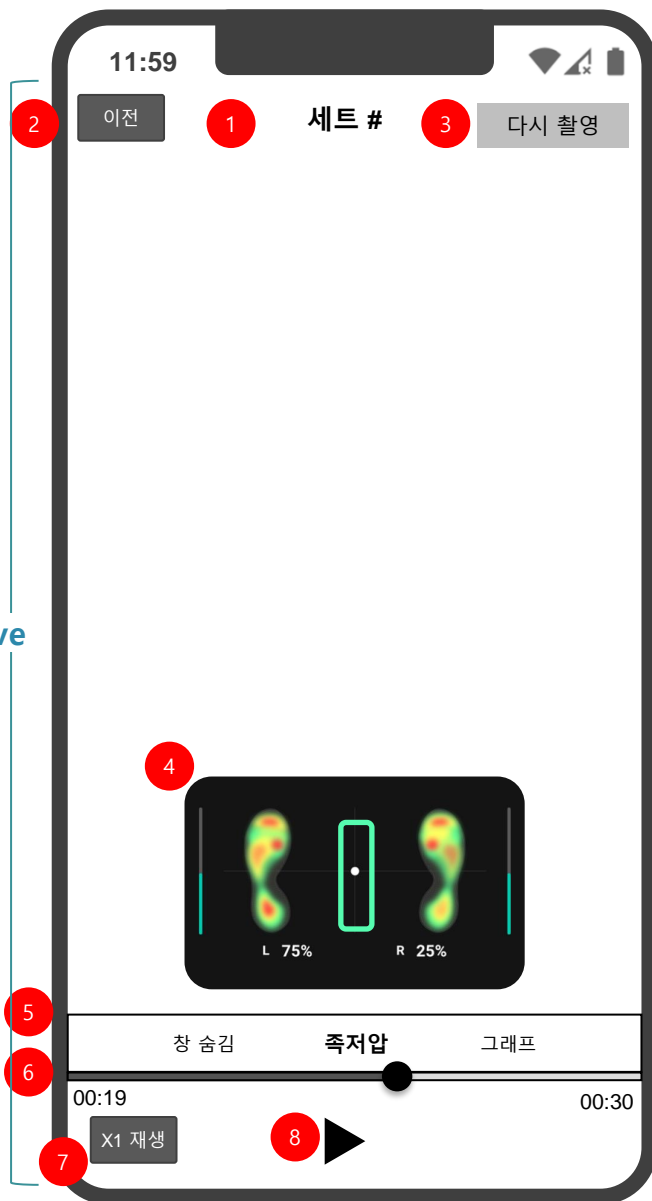

1. 타이틀:
 - 촬영 세트 출력
2. 닫기 버튼:
 - Tap 시 운동 대기 화면으로 이동
3. 다시 촬영 버튼:
 - Tap 시 운동 다시 촬영,
 - 오늘 이전 날짜의 운동 운동 확인 시 다시 운동 버튼 비노출
4. 족저압 레이어
5. 레이어 컨트롤 바:
 - 1) 현재 상태 레이블 강조
 - 2) 창 숨김 Tap 시 레이어 숨김
 - 3) 족저압 Tap 시 족저압 레이어 표시
 - 4) 그래프 Tap 시 그래프 레이어 표시
 - 5) ⑥ 조작에 따라 데이터 출력
6. 비디오 Seeker:
 - 좌우로 슬라이드하여 재생 컨트롤
 - 좌측 하단 영상 현재 시간 표시
 - 우측 하단 영상 전체 시간 표시
7. 재생 속도 조절 버튼:
 - Tap 시 "x1", "x1/2", "x1/4" 순서로 버튼 레이블 로테이션 및 동영상 재생 속도 조절
8. 재생/일시정지 버튼:
 - 터치하여 동영상 재생 또는 일시정지

native


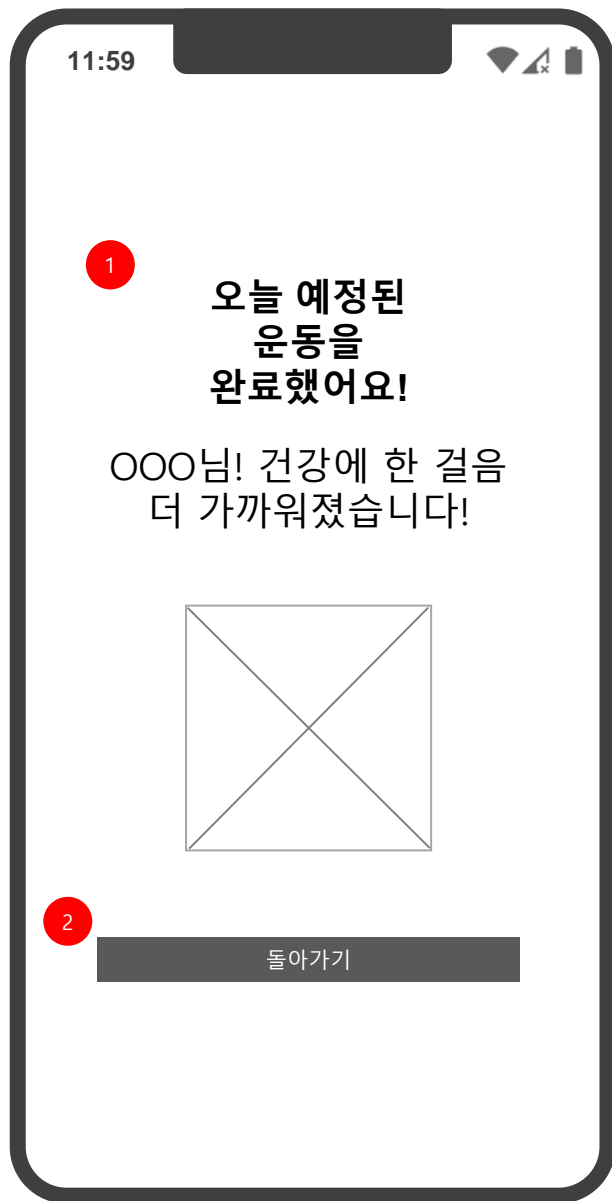


1. 운동 완료 피드백:
 - 오늘 예정된 운동 전체 진행 시 나타나는 화면
 - 마지막 운동의 운동 확인 화면에서 이전 버튼 tap 하여 운동 대기 화면으로 이동 시 해당 팝업 표시
 - 사용자 이름 출력
 - 안내 문구 아래 운동 완료를 나타내는 일러스트 출력
2. 돌아가기 버튼:
 - Tap 시 팝업창 닫음

인솔


Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 - 빈 데이터	Screen ID	PT-A-08	Description
<div data-bbox="20 749 134 778" data-label="Text">native</div>	<div data-bbox="155 142 762 1332" data-label="Image">A mobile application interface for '인솔 관리' (Instructor Management). The screen displays a message stating '등록된 인솔이 없습니다.' (No registered instructors). Below the message, it says '아래 버튼을 눌러 인솔을 등록해 주세요.' (Please press the button below to register the instructor). At the bottom of the screen, there is a button labeled '신규 등록' (New Registration). Three red numbered callouts are present: '1' points to a back button in the top left corner, '2' points to the message text, and '3' points to the '신규 등록' button at the bottom. The status bar at the top shows the time as 11:59 and various system icons. A blue bracket on the left side of the screen is labeled 'native'.</div>			<div data-bbox="1580 97 1877 254" data-label="List-Group"><ol style="list-style-type: none">1. 터치 시 홈으로 이동2. 빈 데이터 출력<ul style="list-style-type: none">- 등록된 인솔이 없을 시 출력3. 터치 시 인솔 연결 가이드 팝업<ul style="list-style-type: none">- 인솔 등록 프로세스 진행</div>

native

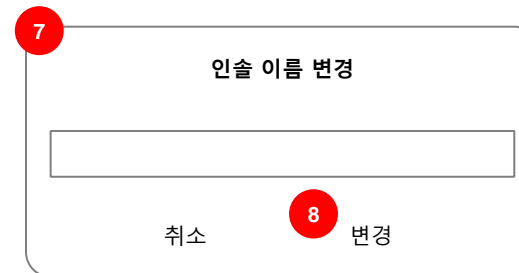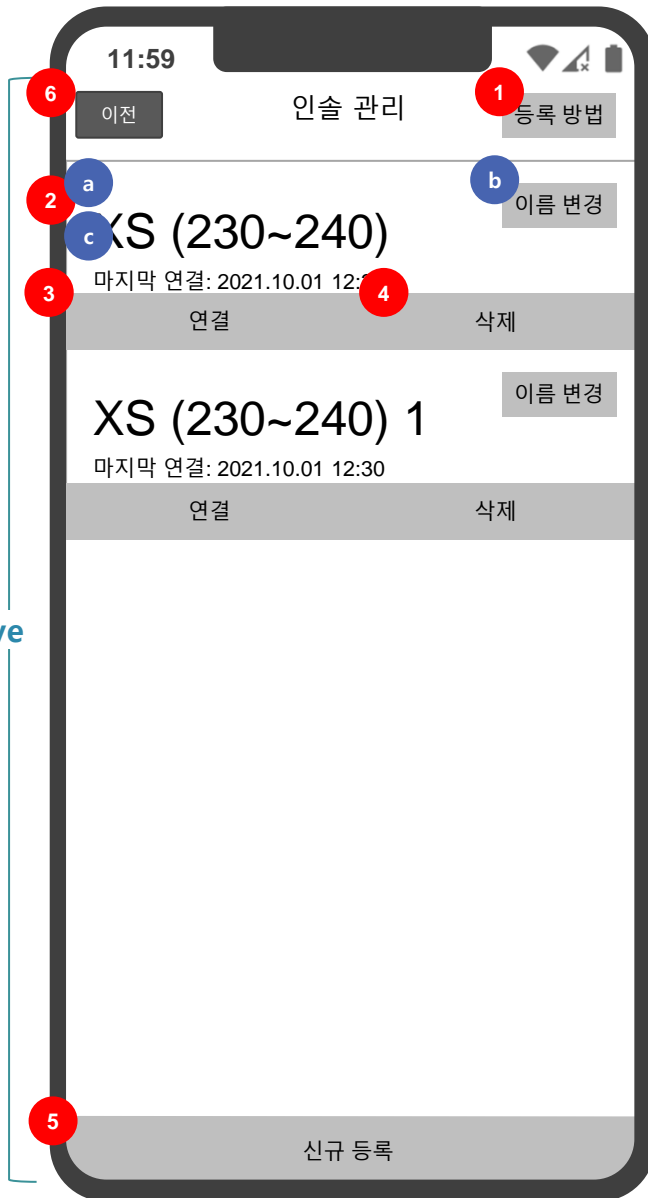

1. 터치 시 인술 연결 가이드 팝업
2. 1) 정렬 기준: 등록 일시 기준 최고(最古)순
2) 인터페이스:
 - a) 등록 또는 변경한 인술 이름 출력
 - b) 터치 시 기준 이름이 입력된 상태로 이름 변경
인풋 필드 팝업
 - c) 사용자의 디바이스와의 연결 일시 출력
3. 터치 시 디바이스와 “연결 중” 상태 화면 팝업
4. 터치 시 등록 정보 삭제 confirm 출력
(confirm 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBshkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276
5. 터치 시 인술 연결 가이드 팝업
- 인술 등록 프로세스 진행
6. 이전
- 홈으로 이동
7. 인술 이름 변경
- 모든 문자 입력 가능, 20자 초과 입력 시 입력
불가
8. 변경
- 변경 Tap 시 입력한 이름 유효성 검사 기등록
인술과 이름 겹칠 시 알럿 메시지 출력
- 겹치는 이름이 없을 경우 인술 등록



native

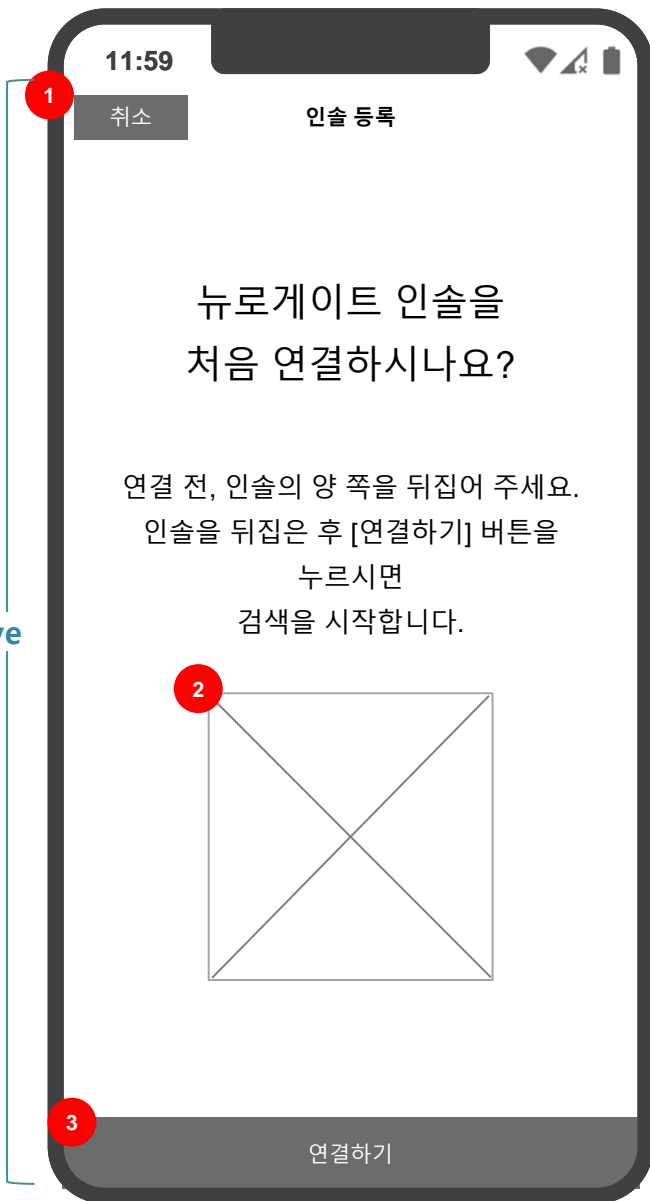

1. 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음
2. 인솔을 뒤집는 액션을 시각적으로 표현하는 이미지 표시
3. 터치 시 인솔 블루투스 검색 진행

Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 > 신규 등록 - 검색중	Screen ID	PT-A-08_2	Description
<div><div>11:59</div><div><div>1 취소</div><div>인솔 등록</div></div><div><div>2 인솔 검색 > 왼발 검색 > 오른발 검색</div></div><div><div>3 a 휴대폰 근처의 스마트 인솔을 찾고 있어요...</div><div>b </div></div></div> <div>native</div>				<div>1. 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음</div> <div>2. 인솔 등록 프로세스 표시 UI<div>1) 인솔 등록 전체 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조</div><div>2) 5초간 검색, 검색 시 바로 왼발 검색 프로세스로 진행, 미검색 시 실패 피드백</div></div> <div>3. "인솔 검색 중" 문구 및 인솔을 검색하는 액션을 시각적으로 표현하는 애니메이션 또는 gif 표시</div>


native

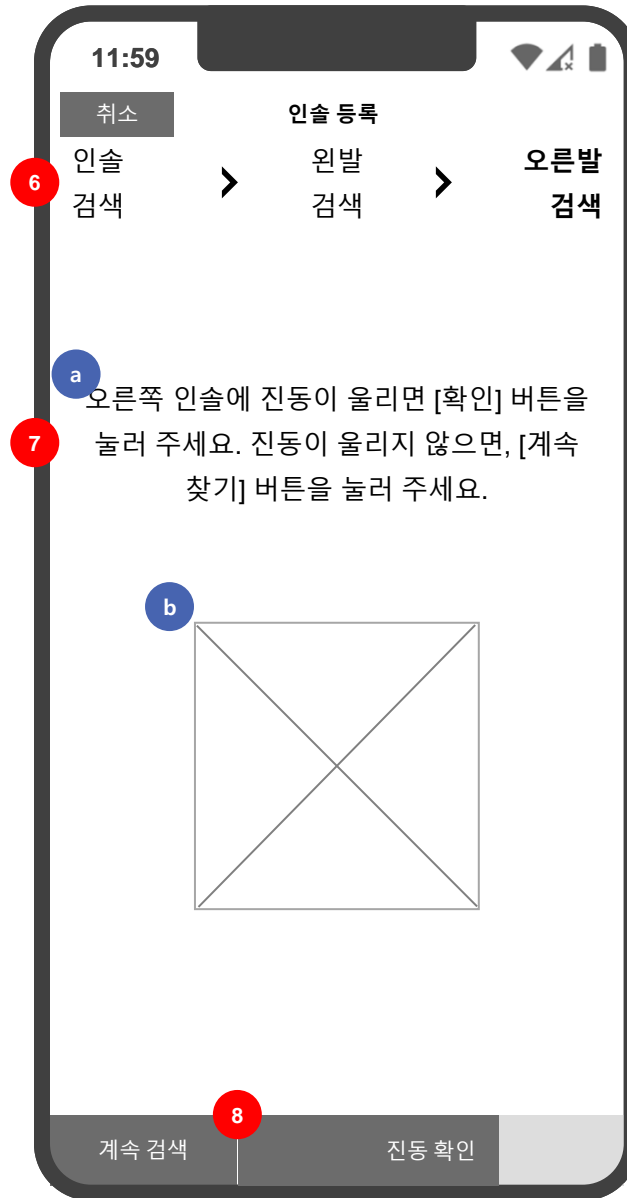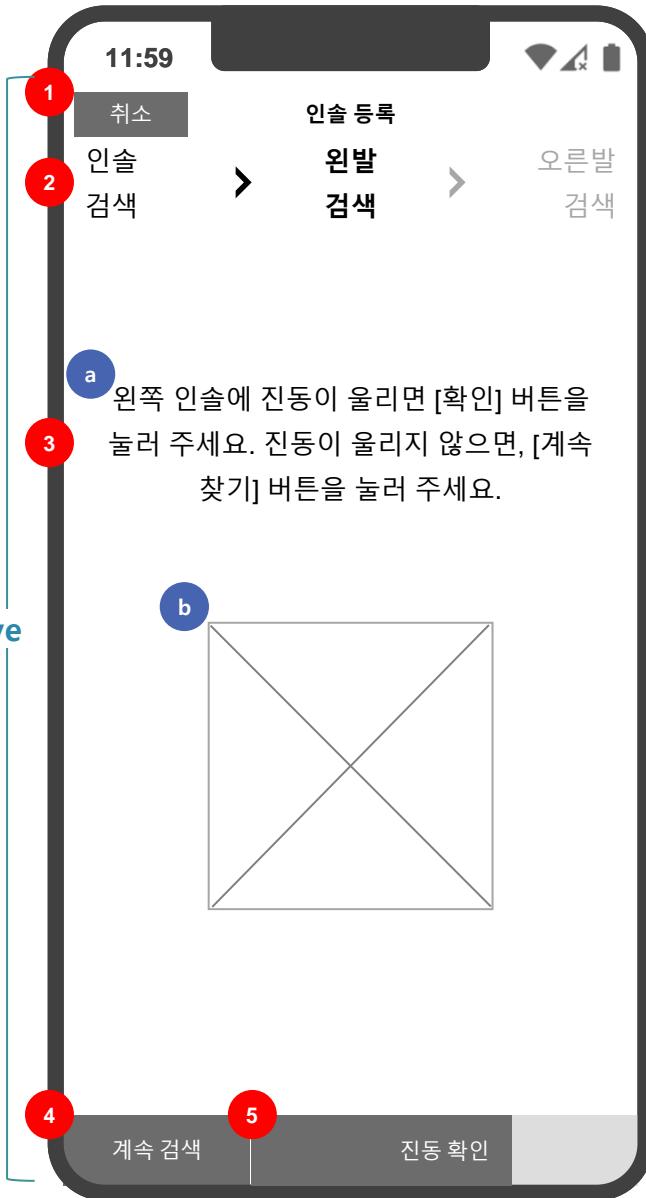

1. 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음
2. 인솔 등록 프로세스 표시 UI
 - 1) 인솔 등록 전체 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조
 - 2) 5초간 검색, 검색 시 바로 원발 검색 프로세스로 진행, 미검색 시 실패 피드백
3. 왼쪽 검색 확인 UI
 - a) 인솔 확인 안내 문구 출력
 - b) 인솔 진동을 시각적으로 표현하는 이미지 표시
4.
 - 1) ⑤ 버튼의 게이지가 다 채워진 후에 터치 가능
 - 2) 터치 시 검색된 인솔에 진동 명령
5.
 - 1) 화면 로드 시 버튼 내 게이지가 왼쪽에서부터 채워지며 왼쪽 인솔에 진동 명령
 - 2) 게이지가 다 채워진 후에 터치 가능
 - 3) 터치 시 오른쪽 진동 명령
6. 오른쪽 검색 확인 UI
 - a) 인솔 확인 안내 문구 출력
 - b) 인솔 진동을 시각적으로 표현하는 이미지 표시

Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 > 신규 등록 - 검색 실패	Screen ID	PT-A-08_3	Description
<div><div>11:59</div><div><div>취소</div><div>인솔 > 왼발 > 오른발</div><div>검색 > 검색 > 검색</div></div><div><div>a</div><div>인솔 검색에 실패했습니다.</div><div>다시 한 번 시도해 주세요.</div><div><div>b</div><div></div></div></div><div><div>다시 시도</div></div></div> <div>native</div>				<div>1. 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음</div> <div>2. 검색 실패 피드백 UI<div>a) 인솔 검색 실패 문구 출력</div><div>b) 인솔 검색 실패 상태를 시각적으로 표현하는 이미지 표시</div></div> <div>3. 터치 시 인솔 재검색 진행, 검색중 UI 출력</div>

native

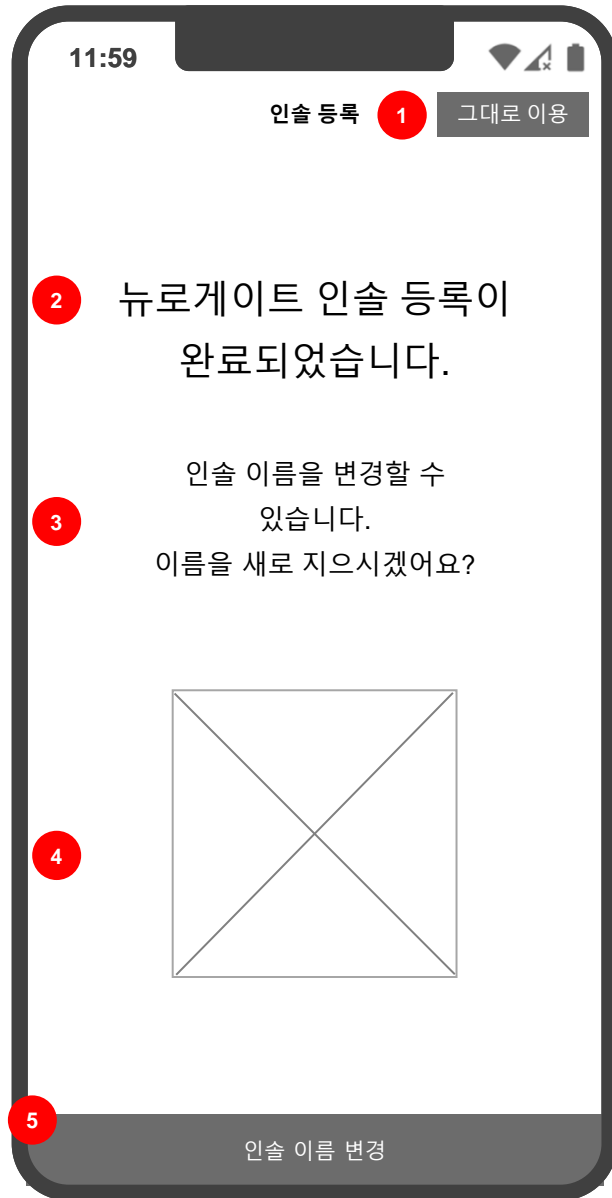

0. 안드로이드의 경우 back 시 창 닫음, "인솔 보정" 화면 로드


1. 터치 시 창 닫음, "보정" 프로세스 진행
2. 인솔 등록 완료 문구 출력
3. 인솔 이름 변경 가능 문구 출력

4. 인솔 연결
완료를
시각적으로
표현하는
이미지
표시

5. 터치 시 이름 변경 페이지 로드


Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 > 신규 등록 - 연결 완료	Screen ID	PT-A-08_5	Description
<div data-bbox="37 749 132 782">native</div>	<div data-bbox="155 145 762 1332"><div data-bbox="211 187 283 211">11:59</div><div data-bbox="412 239 505 265">인솔 등록</div><div data-bbox="526 232 561 275">1</div><div data-bbox="598 239 712 265">다음에 변경</div><div data-bbox="192 425 223 461">2</div><div data-bbox="234 446 677 488">뉴로게이트 인솔 이름 변경</div><div data-bbox="225 616 685 692">나만의 인솔을 구분하기 쉽도록 변경해 주세요.</div><div data-bbox="171 725 203 761">3</div><div data-bbox="379 779 532 803">XS (230~240) 1</div><div data-bbox="171 1239 203 1275">4</div><div data-bbox="352 1268 561 1292">입력한 이름으로 변경</div></div>			<div data-bbox="1580 97 2032 658"><div>1. 터치 시 페이지 닫음, "인솔 정보" 화면 로드</div><div>2. 인솔 이름 변경 타이틀 및 변경 안내 문구 출력</div><div>3. 1) 검색된 인솔의 사이즈가 인풋박스에 자동 입력, 기등록 인솔 중 이미 해당 이름이 있는 경우 자동 입력된 이름 뒤에 숫자 추가 입력 * ex) XS (230~240) 1 2) 사이즈별 이름 자동 입력 품: - XS: XS (230~240) - S: S (245~255) - M: M (260~270) - L: L (275~285) - XL: XL (290~300) 3) 모든 문자 입력 가능, 20자 초과 입력 시 입력 불가</div><div>4. 1) 터치 시 입력한 이름 유효성 검사 기등록 인솔과 이름 겹칠 시 알럿 메시지 출력 2) 겹치는 이름이 없을 경우 인솔 등록</div></div>

native

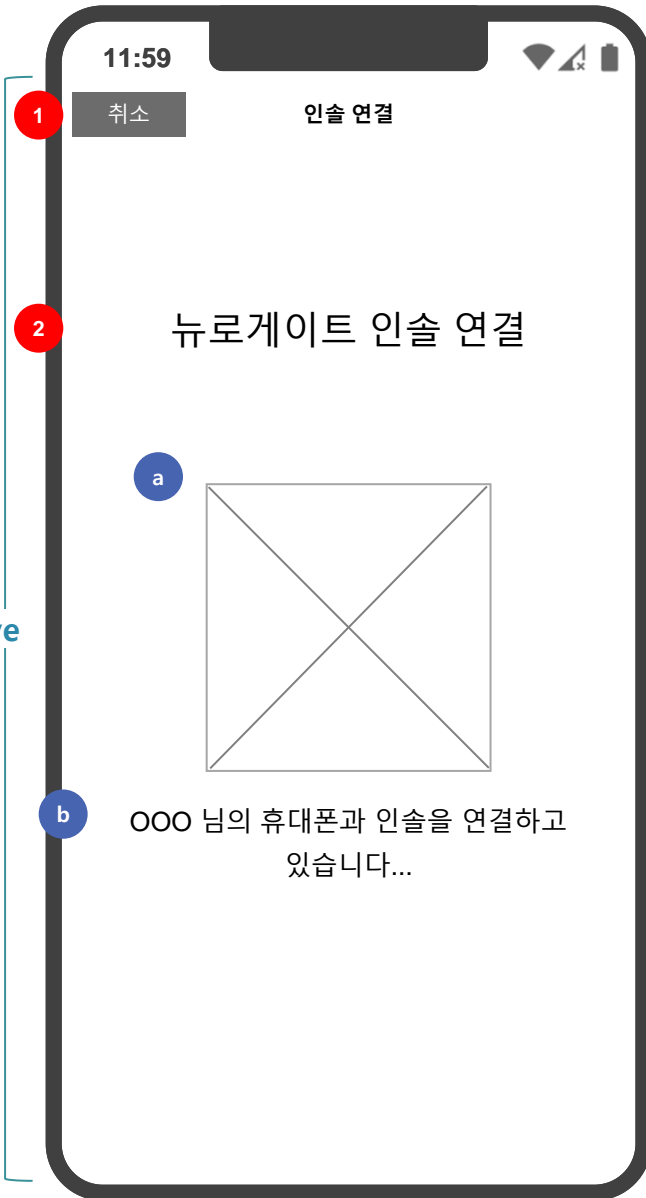

1. 터치 시 연결 중단, "연결 중" 상태 창 닫음
2. 인솔 연결 상태 안내 UI
 - a. 인솔과 디바이스의 연결 시도 액션을 시각적으로 표현하는 애니메이션 또는 gif 표시
 - b. 인솔 연결 중 문구 출력

native

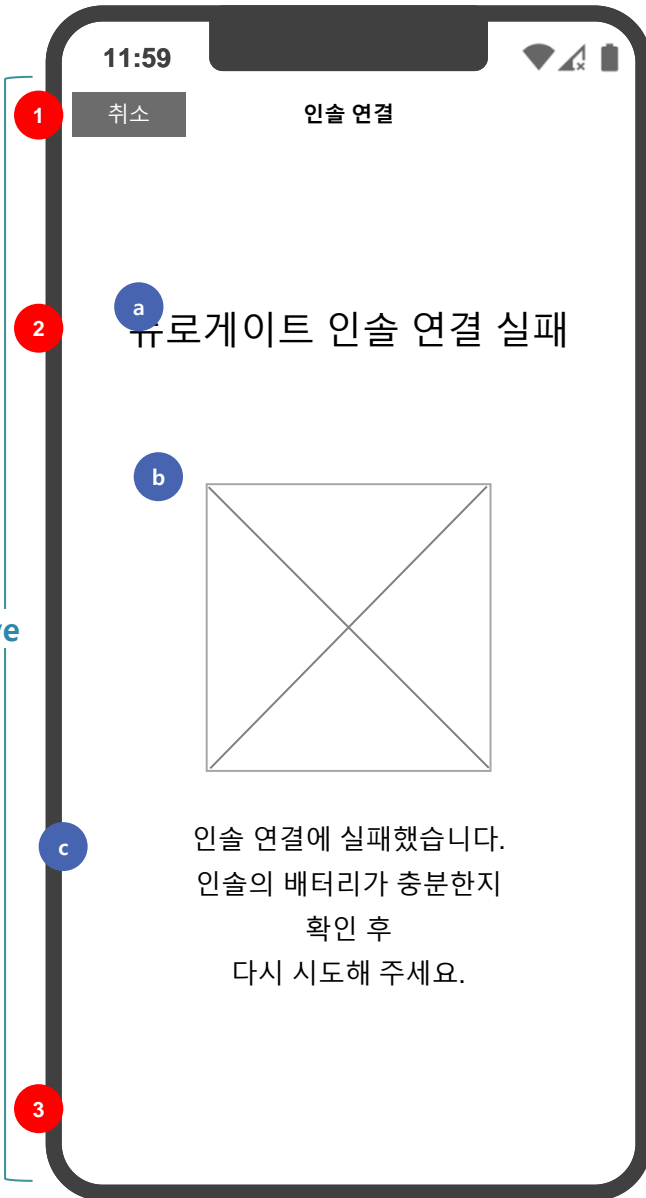


1. 터치 시 연결 중단, 창 닫음
2. 인솔 연결 상태 안내 UI
 - a) 타이틀 출력
 - b) 인솔과 디바이스와의 연결 실패를 시각적으로 표현하는 이미지
 - c) 인솔 연결 실패 피드백 문구 출력
3. 터치 시 인솔 연결 재시도

Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 > 신규 등록 - 보정 물음	Screen ID	PT-A-08_8	Description
<div data-bbox="37 753 132 782">native</div>	<div data-bbox="155 145 762 1332"><div data-bbox="213 187 283 211">11:59</div><div data-bbox="412 239 505 265">인솔 보정</div><div data-bbox="530 234 561 277">1</div><div data-bbox="598 239 712 265">다음에 보정</div><div data-bbox="192 419 223 462">2</div><div data-bbox="223 416 696 516"><p>지금 바로 뉴로게이트 인솔을 보정하시겠어요?</p><p>정확한 인솔 데이터의 측정과 운동을 위해 스마트 인솔 보정이 필요합니다.</p><p>일어난 상태에서 가이드에 따라 보정을 진행해 주세요.</p></div><div data-bbox="171 1243 192 1265">3</div><div data-bbox="410 1268 505 1293">보정 시작</div></div>			<div data-bbox="1580 97 1982 189"><ol style="list-style-type: none">터치 시 페이지 닫음, "인솔 정보" 화면 로드인솔 보정 물음 타이틀 및 안내 문구 출력터치 시 보정 프로세스 진행</div>


Page Description	전체 메뉴 > 인슐 관리 - 인슐 보정	Screen ID	PT-A-08_9	Description
<div data-bbox="20 742 134 785">native</div>	<div data-bbox="113 142 762 1335"></div>			<div data-bbox="1562 88 2051 192"><ol style="list-style-type: none">1. 터치 시 인슐 보정 프로세스 중단, 가이드 닫음2. 인슐 보정 가이드 문구 표시3. 터치 시 원발 보정 프로세스 진행</div>

Page Description	전체 메뉴 > 인슐 관리 - 인슐 보정 안내	Screen ID	PT-A-08_10	Description
<div>native</div>	<div>1. 터치 시 페이지 닫음</div> <div>2. 인슐 보정 가이드 문구 표시</div> <div>3. 터치 시 원발 보정 프로세스 진행</div>			

Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 - 인솔 보정	Screen ID	PT-A-08_11	Description
<div> <div>native</div> <div> </div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 터치 시 인솔 보정 프로세스 중단, 가이드 다음 인솔 보정 프로세스 표시 UI <ol style="list-style-type: none"> 인솔 왼발/오른발 보정 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조 “인솔 보정” 타이틀 및 문구 출력 <ol style="list-style-type: none"> 화면 로드 시 숫자 출력되지 않음 왼발/오른발 인솔에서 측정되는 데이터의 크기의 최소값이 유지될 경우 3초 카운트 3초 카운트 동안 데이터 크기가 변하지 않을 경우 오른발 보정 진행 3초 카운트 동안 데이터 크기가 변할 경우 보정 실패 피드백 			

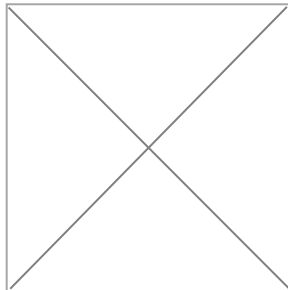
Page Description	전체 메뉴 > 인슐 관리 - 인슐 보정 완료	Screen ID	PT-A-08_12	Description
<div><div>native</div><div><div><div>11:59</div><div>인슐 보정</div><div><div>1</div><div>a</div><div>뉴로게이트 인슐 보정 완료</div></div><div><div>b</div><div>스마트 인슐 보정이 완료되었습니다. 센서의 정확도를 위해 한 달에 한 번 주기적으로 보정을 진행해 주세요.</div></div><div><div>c</div><div></div></div><div><div>2</div><div>확인</div></div></div></div></div> <div><div>1. 인슐 보정 완료 안내 UI</div><div>a) 타이틀 출력</div><div>b) 인슐 보정 완료 문구 출력</div><div>c) 인슐 보정 완료를 시각적으로 표현하는 이미지 표시</div><div>2. 터치 시 창 닫음</div></div>				

native

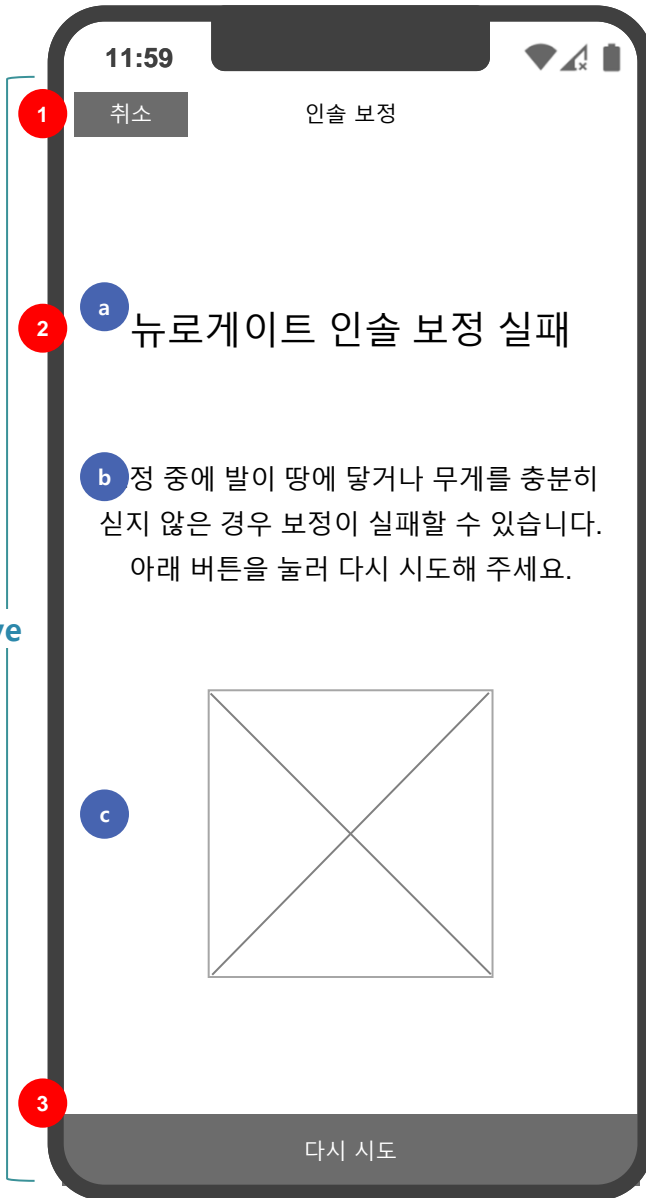


1. 터치 시 보정 취소 confirm 출력
(confirm 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276
2. 인솔 보정 완료 안내 UI
 - a) 타이틀 출력
 - b) 인솔 보정 완료 문구 출력
 - c) 인솔 보정 완료를 시각적으로 표현하는 이미지 표시
3. 터치 시 인솔 보정 프로세스 진행
- 왼쪽 보정 진행

native

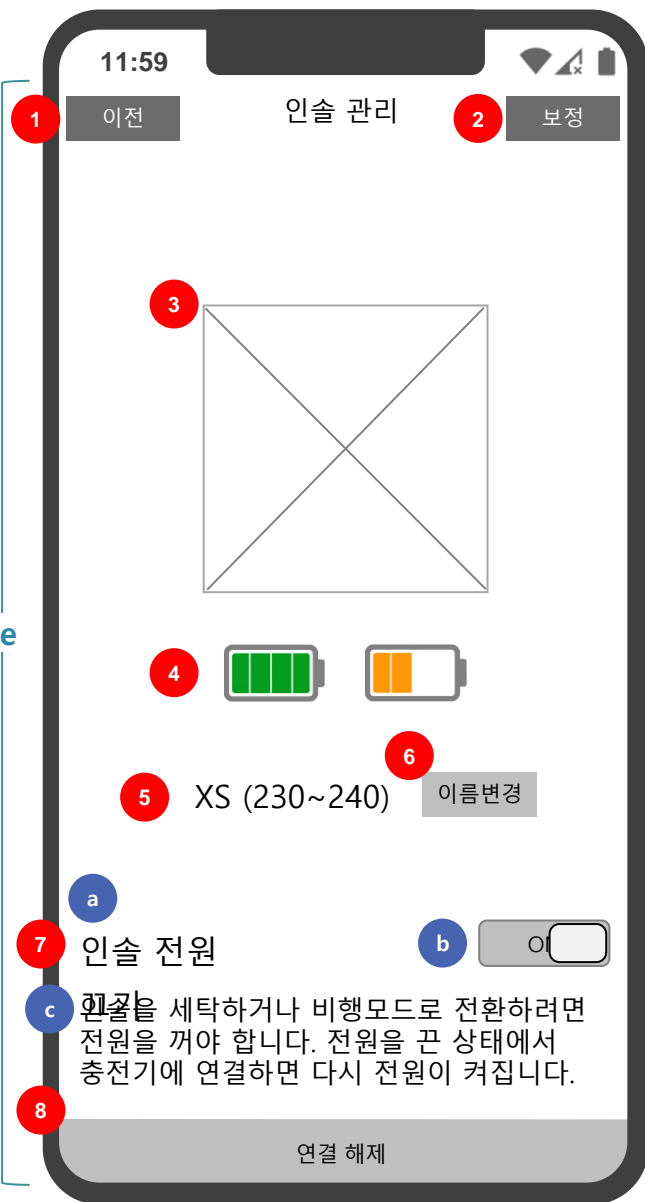

- 터치 시 홈으로 이동
- 터치 시 인솔 보정 가이드 팝업
- 인솔 보정 프로세스 진행
- 인솔 이미지 표시
- 양쪽 인솔의 배터리 잔량 출력:
 - 배터리 80~100%
 - 배터리 양호 : 50~79%
 - 배터리 부족 : 11~49%
 - 배터리 충전 필요 : 1~10%
- 연결된 인솔의 이름 출력
- 터치 시 기존 이름이 입력된 상태로 이름 변경 인풋 필드 팝업
- 인솔 전원 차단 UI:
 - 섹션 타이틀
 - off 시 연결 해제 및 인솔 전원 차단
 - 전원 off 상황 및 on 가이드
- 터치 시 인솔 연결 해제 confirm 출력
(confirm 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276


종합 결과

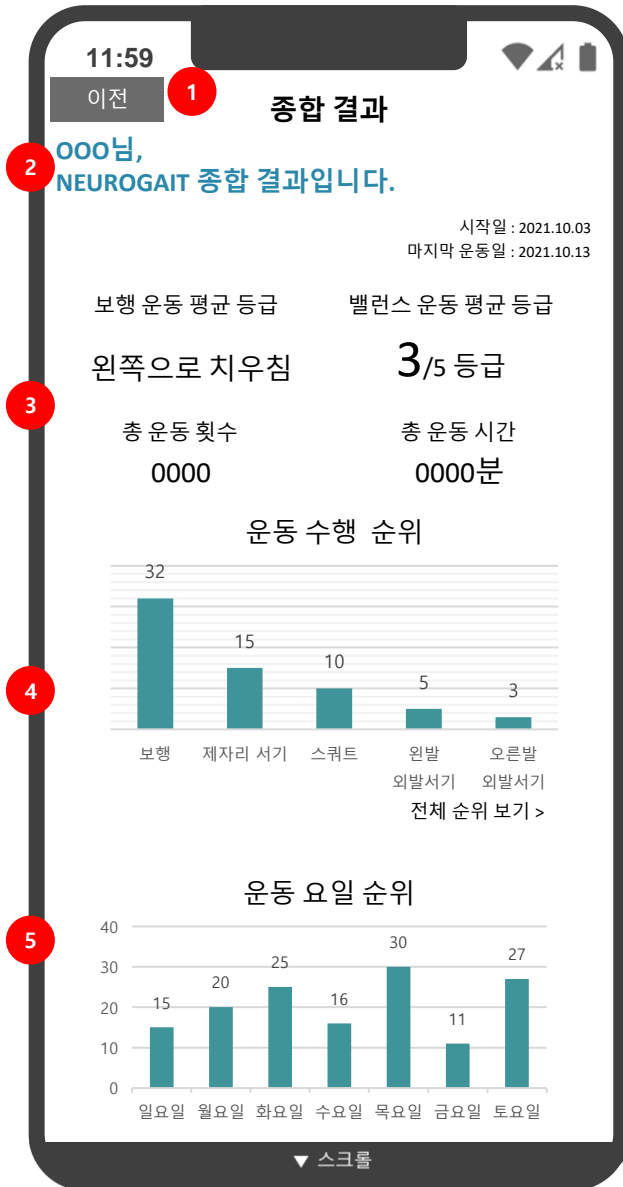



- 종합 결과
 - APP 사용 기간의 전체 운동 결과 표시
 - 운동 등급, 운동 수행 순위, 운동 요일, 운동별 결과 보기 제공
- 환영 문구
 - 고객 명 + 환영 문구 표시
 - 운동 시작일, 마지막 운동일 표시
- 밸런스 종합 등급
 - 완료된 운동들의 평균을 계산하여 종합 등급 표시
 - 보행 운동 평균 등급, 밸런스 운동 평균 등급 표시
 - > 보행 운동 평균 등급 하단 표 참조
 - > 밸런스 운동 평균 등급 표시 시 '5'
 - 총 운동 횟수, 시간 표시
- 운동 수행 순위
 - 완료된 운동들의 수행 순위 표시
 - 5위 까지 표시
 - 전체 순위 Tap 시 전체 리스트 확인 화면으로 이동
- 운동 수행 요일
 - 완료된 운동들의 수행 요일 순위 표시
 - 5위 까지 표시
 - 더보기 Tap 시 전체 리스트 확인 화면으로 이동
- 운동별 결과 보기
 - 보행 운동, 밸런스 운동 표시
 - > 보행 운동 : 보행, 왼발 부분부하, 오른발 부분부하
 - > 밸런스 운동 : 제자리 서기, 스쿼트, 왼발 외발 서기, 오른발 외발 서기, 계단 오르기/내리기, 의자에서 앉기/서기, 까치발
 - 운동 Tap 시 운동 별 결과 화면으로 이동

보행 밸런스 등급	문구	텍스트 색상
균형잡힘	good	green
약한 왼쪽 또는 오른쪽 치우침	약한 왼쪽 치우침	orange
	약한 오른쪽 치우침	
심한 왼쪽 또는 오른쪽 치우침	심한 왼쪽 치우침	red
	심한 오른쪽 치우침	

Page Description	홈 > 종합 결과 > 전체 순위 보기 선택	Screen ID	PT-A-09-1	Description																					
<div><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>운동 수행 순위</div><div>시작일 : 2021.10.03 마지막 운동일 : 2021.10.13</div><table><tr><th>순위</th><th>운동 명</th><th>수행 횟수</th></tr><tr><td>1</td><td>OOOOOO</td><td>33</td></tr><tr><td>2</td><td>OOOOOO</td><td>32</td></tr><tr><td>3</td><td>OOOOOO</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>OOOOOO</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>OOOOOO</td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td>OOOOOO</td><td>0</td></tr></table></div></div></div>				순위	운동 명	수행 횟수	1	OOOOOO	33	2	OOOOOO	32	3	OOOOOO	15	4	OOOOOO	10	5	OOOOOO	6	6	OOOOOO	0	1. 전체 운동 수행 순위 표시
순위	운동 명	수행 횟수																							
1	OOOOOO	33																							
2	OOOOOO	32																							
3	OOOOOO	15																							
4	OOOOOO	10																							
5	OOOOOO	6																							
6	OOOOOO	0																							

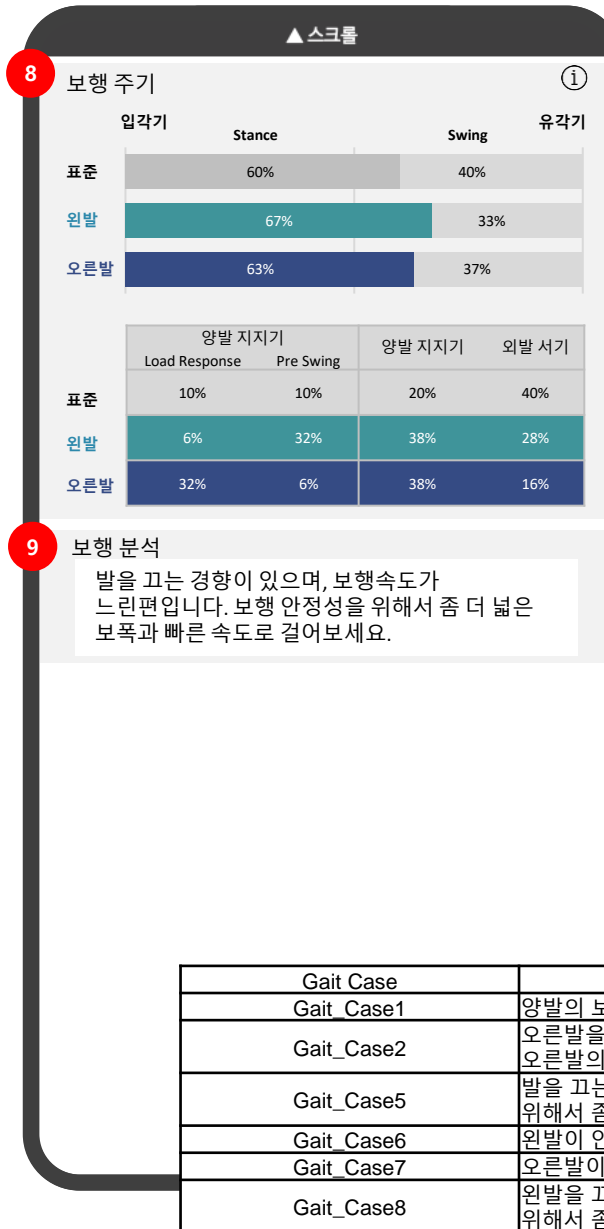

- 치우침 그래프
 - 일별 치우침을 그래프로 표시
 - 하루 평균 데이터를 이용하여 표시
 - 당일 데이터 점으로 표시, 데이터는 선으로 이어서 표시
 - > 데이터가 없을 경우 표시 하지 않음
- 날짜 선택
 - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
 - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
 - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
 - 보행 운동을 하지 않은 날짜 선택 불가
 - > 해당 날짜 색상 변경
 - 날짜 선택 시 하단에 보행 운동 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
 - 전체, 보행 운동을 한 시간 선택
 - 보행 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 보행 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 보행 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 세트 표시, 오늘 총 보행 운동 시간
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 시간 표시
- 걸음 데이터
 - 운동 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 보행 길이
 - 신규 인솔에서 제공하는 데이터
 - 신규 인솔 판매 전까지 미표시
 - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
 - 지면 접촉 시간
- 보행 주기
 - 운동 시간 내 보행 주기 표시
 - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 분석
 - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
 - 하단 보행 분석 문구 참조
- 기간 조회
 - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
 - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동

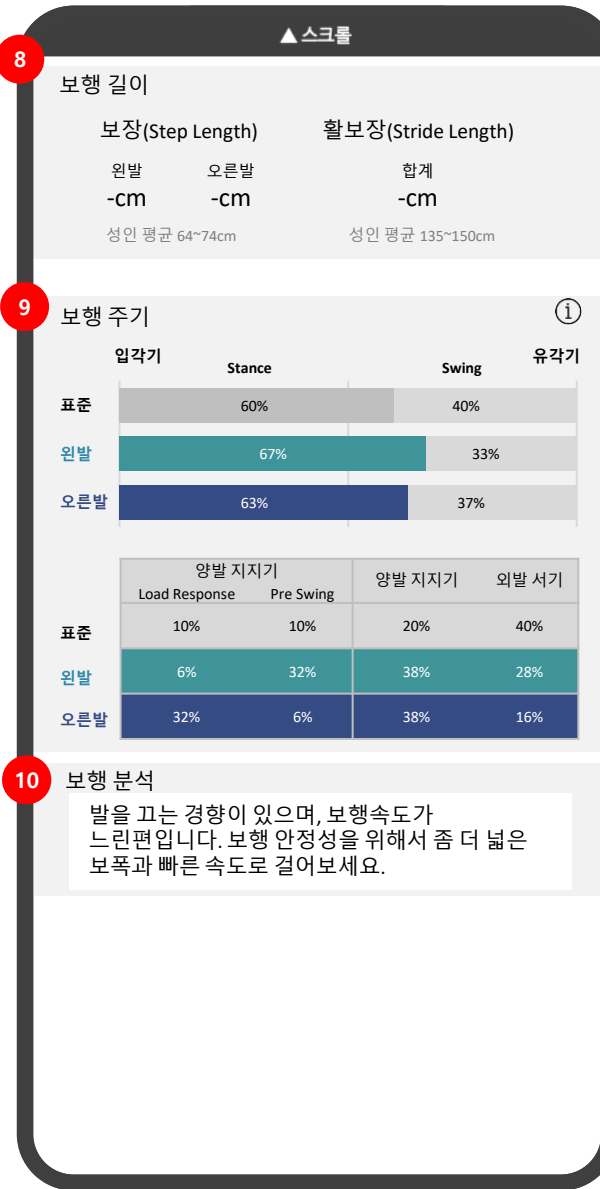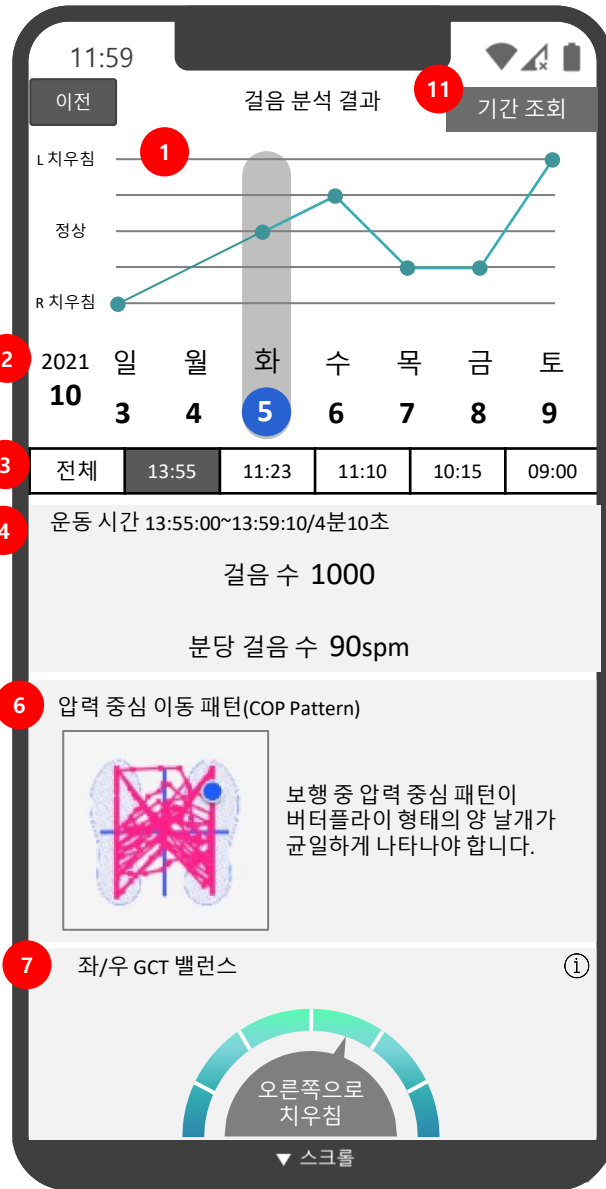

- 치우침 그래프
 - 일별 치우침을 그래프로 표시
 - 하루 평균 데이터를 이용하여 표시
 - 당일 데이터 점으로 표시, 데이터는 선으로 이어서 표시
 - > 데이터가 없을 경우 표시 하지 않음
- 날짜 선택
 - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
 - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
 - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
 - 보행 운동을 하지 않은 날짜 선택 불가
 - > 해당 날짜 색상 변경
 - 날짜 선택 시 하단에 보행 운동 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
 - 전체, 보행 운동을 한 시간 선택
 - 보행 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 보행 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 보행 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 세트 표시, 오늘 총 보행 운동 시간
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 보행 운동 시간 표시
- 걸음 데이터
 - 운동 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 압력 중심 이동 패턴
 - 운동 시간 동안 압력 중심 이동 패턴 표시
 - 패턴 Tap 시 해당 세트의 운동 영상 or 족저압 조회 화면으로 이동
- 좌/우 GCT 밸런스
 - 좌우 밸런스 및 분석 결과 표시
 - 분석 결과 하단 보행 밸런스 등급 문구 참조
 - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 길이
 - 신규 인술에서 제공하는 데이터
 - 신규 인술 판매 전까지 미표시
 - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 주기
 - 측정 시간 내 보행 주기 표시
 - ① 아이콘 Tap 시 팝업 표시
- 보행 분석
 - 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
 - 하단 보행 분석 문구 참조
- 기간 조회
 - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
 - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동




- 날짜 선택
 - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
 - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
 - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
 - 날짜 선택 시 하단에 운동 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
 - 전체, 선택된 운동을 한 시간 선택
 - 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 선택 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
- 평균 밸런스
 - 좌/우, 앞/뒤 밸런스 표시
- 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
- 밸런스 분석
 - 밸런스 계산하여 문구 표시
- 기간 조회
 - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
 - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동

제자리 서기

분석 포인트	요약 문구
정 중앙에 고정 (GOOD)	올바른 밸런스를 보입니다.
왼쪽 치우침	왼쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.
오른쪽 치우침	오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.
앞쪽 치우침	앞쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.
뒤쪽 치우침	뒤쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.
왼쪽 앞쪽 치우침	왼쪽으로 치우치고 앞쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.
왼쪽 뒤쪽 치우침	왼쪽으로 치우치고 뒤쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.
오른쪽 앞쪽 치우침	오른쪽으로 치우치고 앞쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.
오른쪽 뒤쪽 치우침	오른쪽으로 치우치고 뒤쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.
앞뒤 편차 심한 경우	앞뒤 흔들림이 심한 경향을 보입니다.
좌우 편차 심한 경우	좌우 흔들림이 심한 경향을 보입니다.
좌/우, 앞/뒤 편차 모두 심한경우	좌우, 앞뒤 모두 흔들림이 심한 경향을 보입니다.

스쿼트

분석 포인트	요약 문구
올바른 자세	올바른 움직임을 보입니다.
왼쪽 치우침	왼쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.
오른쪽 치우침	오른쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.
좌/우 흔들림	좌/우 지나치게 흔들리는 움직임을 보입니다.
뒤쪽 치우침	뒤쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.
앞쪽 치우침	앞쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.
앞/뒤 흔들림	앞/뒤 지나치게 흔들리는 움직임을 보입니다.

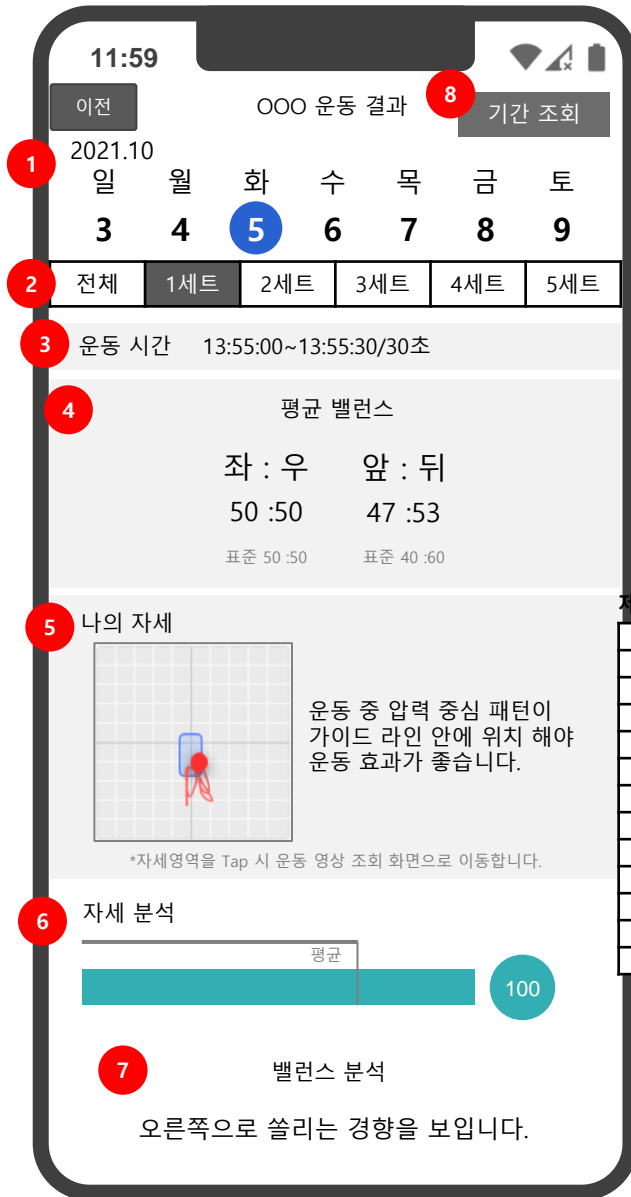


제자리 서기

분석 포인트	요약 문구
정 중앙에 고정 (GOOD)	올바른 밸런스를 보입니다.
왼쪽 치우침	왼쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.
오른쪽 치우침	오른쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.
앞쪽 치우침	앞쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.
뒤쪽 치우침	뒤쪽으로 쏠리는 경향을 보입니다.
왼쪽 앞쪽 치우침	왼쪽으로 치우치고 앞쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.
왼쪽 뒤쪽 치우침	왼쪽으로 치우치고 뒤쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.
오른쪽 앞쪽 치우침	오른쪽으로 치우치고 앞쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.
오른쪽 뒤쪽 치우침	오른쪽으로 치우치고 뒤쪽으로 쏠린 경향을 보입니다.
앞뒤 편차 심한 경우	앞뒤 흔들림이 심한 경향을 보입니다.
좌우 편차 심한 경우	좌우 흔들림이 심한 경향을 보입니다.
좌/우, 앞/뒤 편차 모두 심한 경우	좌우, 앞뒤 모두 흔들림이 심한 경향을 보입니다.

스쿼트


분석 포인트	요약 문구
올바른 자세	올바른 움직임을 보입니다.
왼쪽 치우침	왼쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.
오른쪽 치우침	오른쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.
좌/우 흔들림	좌/우 지나치게 흔들리는 움직임을 보입니다.
뒤쪽 치우침	뒤쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.
앞쪽 치우침	앞쪽으로 치우치는 움직임을 보입니다.
앞/뒤 흔들림	앞/뒤 지나치게 흔들리는 움직임을 보입니다.

- 날짜 선택
 - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
 - 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
 - 오늘 이후 날짜 선택 안됨
 - 날짜 선택 시 하단에 운동 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
 - 전체, 선택된 운동을 한 시간 선택
 - 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 선택 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
- 평균 밸런스
 - 좌/우, 앞/뒤 밸런스 표시
- 나의 자세
 - cop 이동 패턴 표시
 - 패턴 Tap 시 해당 세트의 운동 영상 or 족저압 조회 화면으로 이동
- 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
- 밸런스 분석
 - 밸런스 계산하여 문구 표시
- 기간 조회
 - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
 - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동

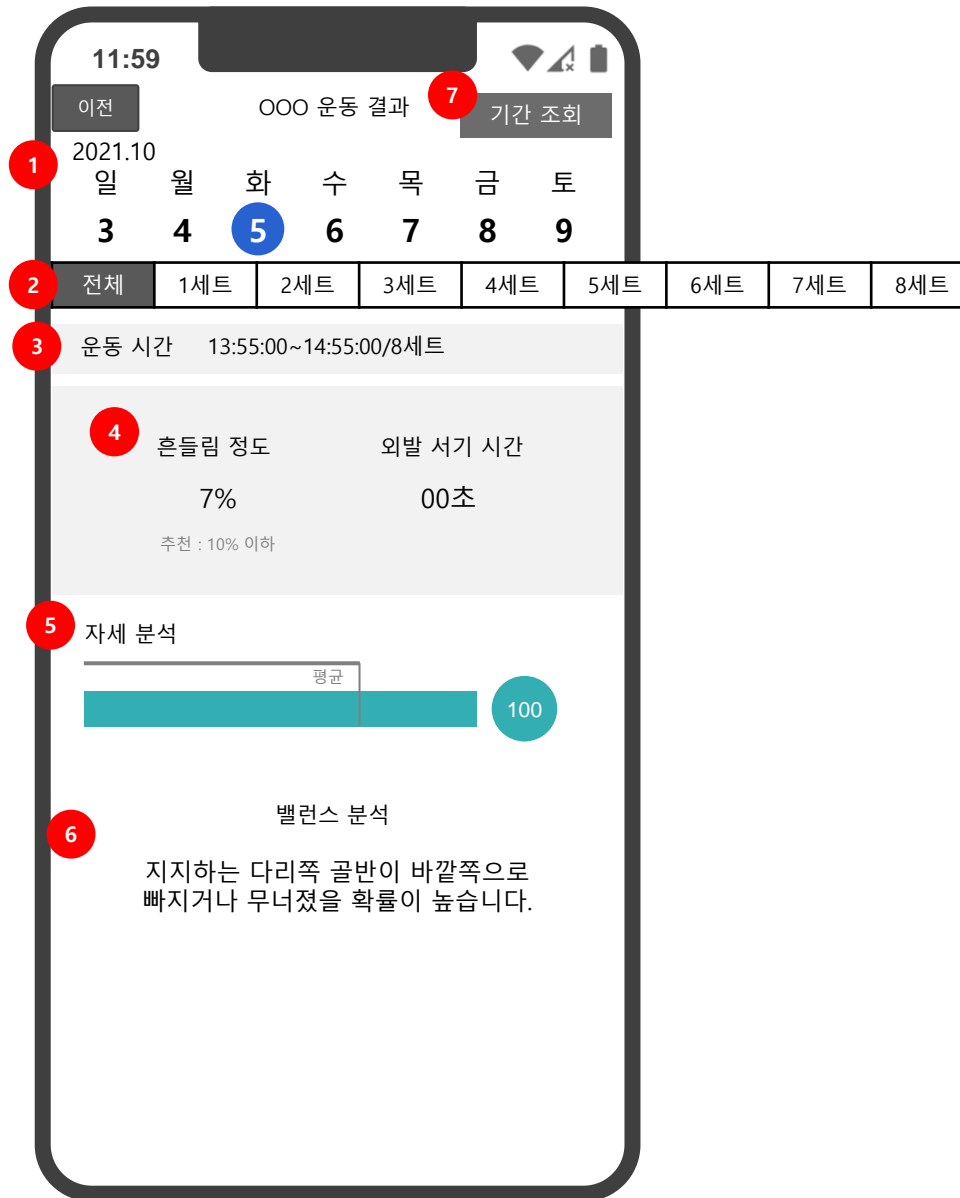

1. 날짜 선택
 - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
 - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
 - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
 - 날짜 선택 시 하단에 운동 시간 및 전체 표시
2. 시간 선택
 - 전체, 선택된 운동을 한 시간 선택
 - 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 선택 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
3. 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
4. 흔들림 정도, 외발 서기 시간
 - 흔들림 정보, 외발 서기 시간 표시
5. 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
6. 밸런스 분석
 - 밸런스 계산하여 문구 표시
7. 기간 조회
 - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
 - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동



분석 포인트	요약문구
균형	균형감이 매우 좋습니다.
내측 쏠림	(내측 쏠림) 골반이 지지하는 다리 안쪽으로 틀어졌거나 반대 쪽 골반이 올라가 있을 확률이 높습니다.
외측 쏠림	(외측 쏠림) 지지하는 다리쪽 골반이 바깥쪽으로 빠지거나 무너졌을 확률이 높습니다.
흔들림 (불균형)	흔들림이 크고 균형감이 떨어집니다.

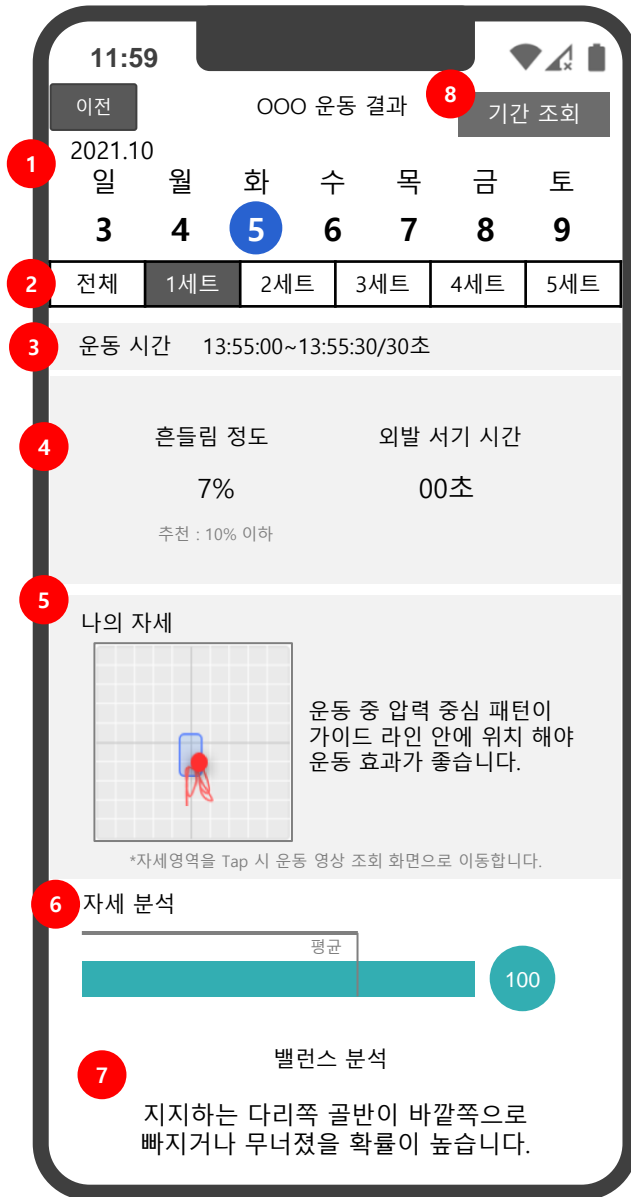



- 날짜 선택
 - 주간 달력을 선택하여 원하는 날짜 선택
 - > 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
 - > 오늘 이후 날짜 선택 안됨
 - 날짜 선택 시 하단에 운동 시간 및 전체 표시
- 시간 선택
 - 전체, 선택된 운동을 한 시간 선택
 - 운동 1회 진행 시 시간 선택 탭 미노출
 - 2건 이상일 때 표시
 - 전체 : 선택된 날의 선택 운동 전체 데이터 평균
 - 시간 : 운동 시작 시간 표시, 시:분 표시
- 운동 시간
 - 전체 : 하루의 처음 운동 시작 시간~마지막 운동 종료 시간 표시, 운동 세트 표시
 - 시간 : 운동 시작 시간 ~ 운동 종료 시간 표시, 운동 시간 표시
- 흔들림 정도, 외발 서기 시간
 - 흔들림 정보, 외발 서기 시간 표시
- 나의 자세
 - cop 이동 패턴 표시
 - 패턴 Tap 시 해당 세트의 운동 영상 or 족저압 조회 화면으로 이동
- 자세 분석
 - 운동 점수 표시
 - > 평균 : 70 고정
 - 바 색상
 - > 70 이상 : 블루, 70 미만 : 주황
- 밸런스 분석
 - 밸런스 계산하여 문구 표시
- 기간 조회
 - 기간 조회를 하여 기간 내 데이터 표시
 - 기간 조회 tap 시 기간 조회 화면으로 이동

분석 포인트	요약문구
균형	균형감이 매우 좋습니다.
내측 쓸림	(내측 쓸림) 골반이 지지하는 다리 안쪽으로 틀어졌거나 반대 쪽 골반이 올라가 있을 확률이 높습니다.
외측 쓸림	(외측 쓸림) 지지하는 다리쪽 골반이 바깥쪽으로 빠지거나 무너졌을 확률이 높습니다.
흔들림 (불균형)	흔들림이 크고 균형감이 떨어집니다.


Page Description	홈 > 종합 결과 > 운동 선택 > 기간 조회 선택 > 기간 조회	Screen ID	PT-A-09-8	Description
<div><div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>기간 조회</div><div>10000-00-00</div><div>20000-00-00</div><div>조회</div></div></div><div><div>a</div><div>안내</div><div>조회는 최대 1개월까지 조회 할 수 있습니다.</div><div>확인</div></div></div>				<div>1. 시작 종료일 선택</div> <div>- 시작 및 종료 날짜 표시</div> <div>> 시작 날짜, 종료 날짜 영역 Tap 시 데이터 피커 표시</div> <div>> 시작 날짜/종료 날짜를 오늘 및 오늘 이후 날짜로 선택 불가</div> <div>- 전체 기간 최대 31일까지 선택 가능</div> <div>> 31일 이상 시 @팝업 표시</div> <div>2. 조회</div> <div>- 조회 Tap 시 하단에 결과 표시</div>

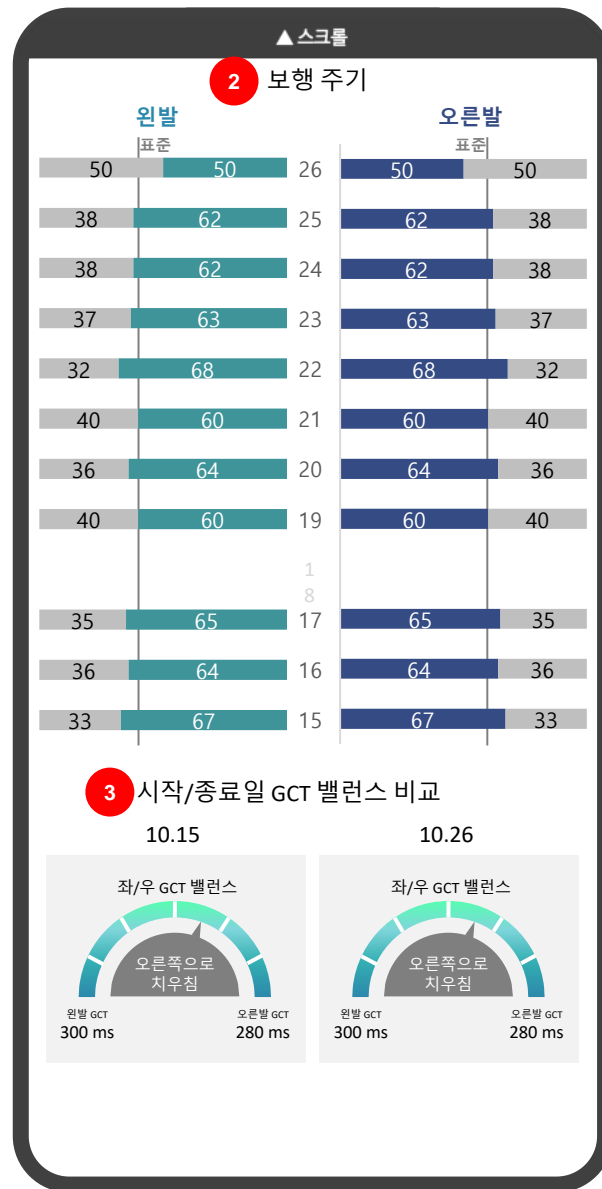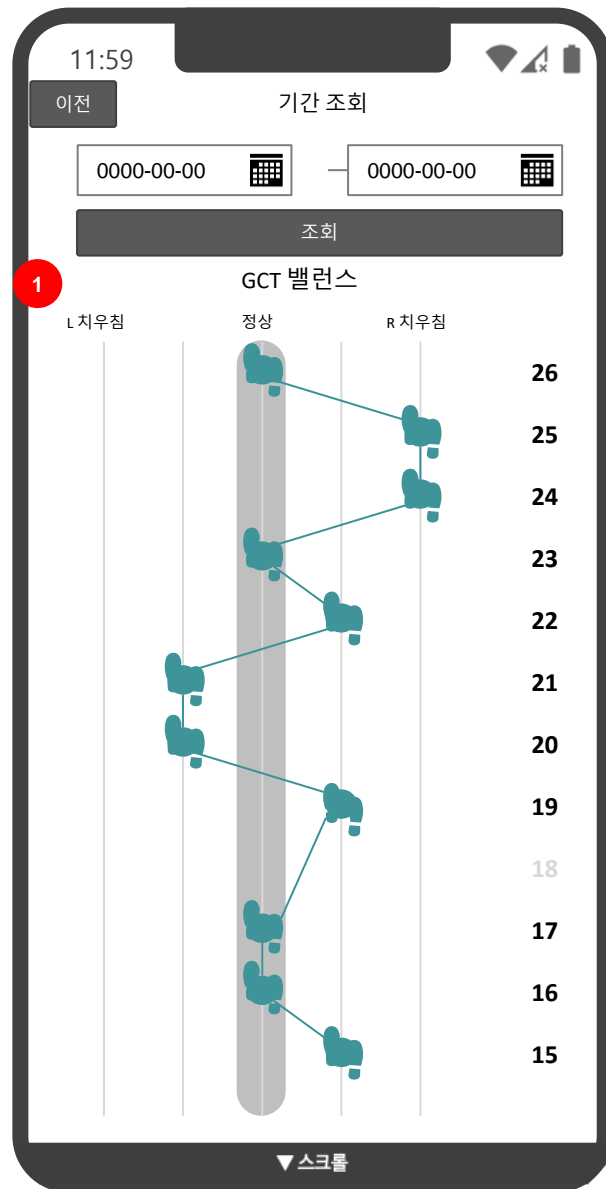

- GCT 밸런스
 - 5단계 표시
 - > 1: 심한 왼쪽 치우침
 - > 2: 약한 왼쪽 치우침
 - > 3: 정상
 - > 4: 약한 오른쪽 치우침
 - > 5: 심한 오른쪽 치우침
 - 정상 라인에 별도 색상 필요
 - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
 - > 그래프는 전날과 다음날 이어서 표시
 - 상하 스와이프를 이용하여 날짜 이동
- 보행주기
 - 왼발, 오른발 100% 가로 그래프 표시
 - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
 - > 그래프 빈 부분으로 표시
 - 상하 스와이프를 이용하여 날짜 이동
- 시작/종료일 GCT 밸런스 비교
 - 조회 시작 및 종료일 GCT 밸런스 표시

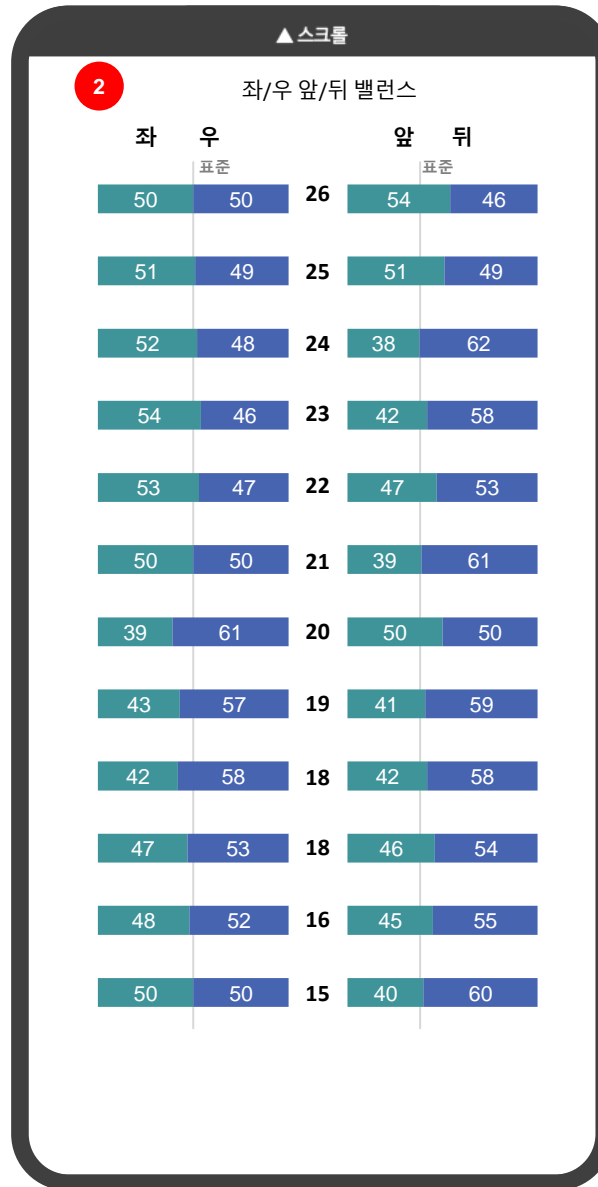
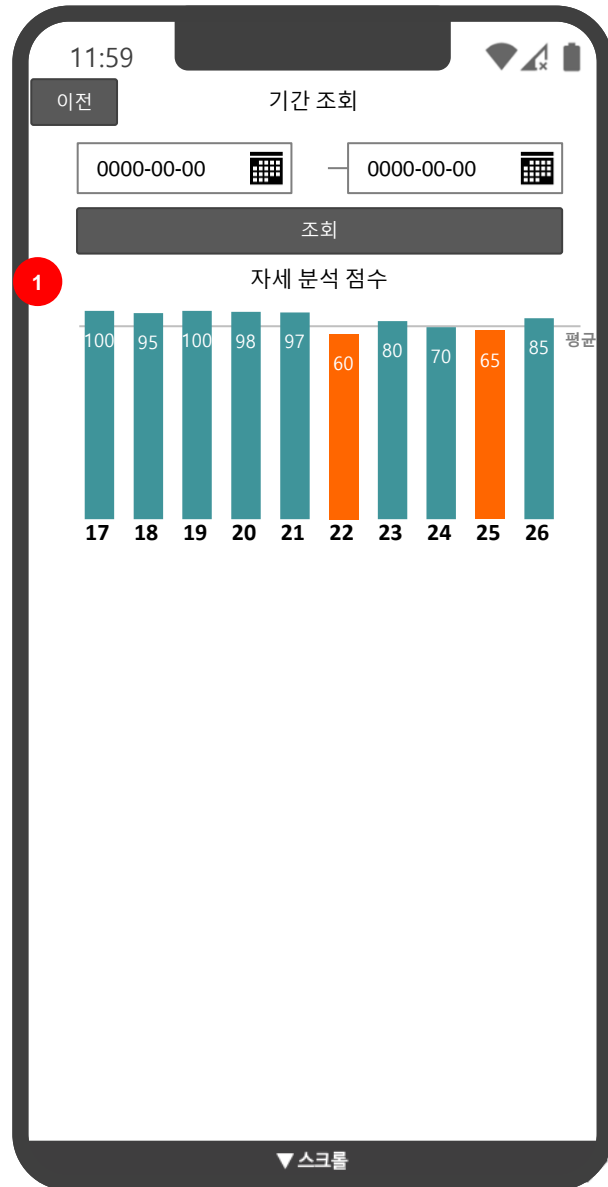


- 자세 분석 점수
 - 선택 운동의 자세 점수 표시
 - 평균 : 70점
 - > 평균 이하 점수 주황색 표시
 - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
 - > 그래프 빈 부분으로 표시
 - 상하 스와이프를 이용하여 날짜 이동
- 좌/우 앞/뒤 밸런스
 - 100% 가로 그래프 표시
 - 좌/우 표준
 - > 50:50
 - 앞/뒤 표준
 - > 40:60
 - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
 - > 그래프 빈 부분으로 표시
 - 상하 스와이프를 이용하여 날짜 이동

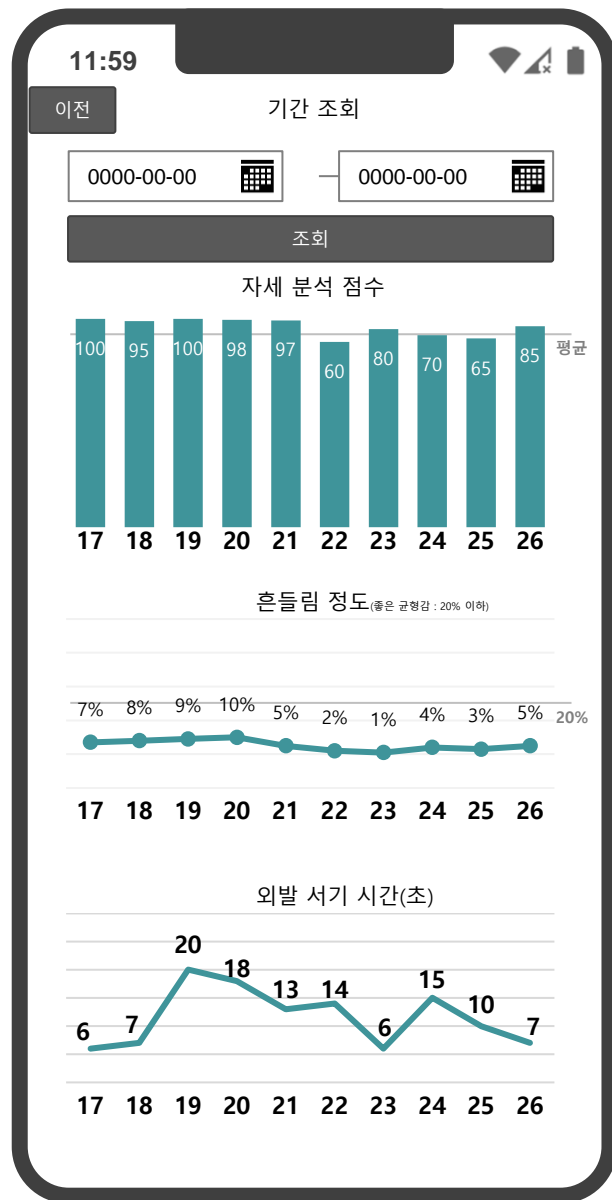

- 자세 분석 점수
 - 선택 운동의 자세 점수 표시
 - 평균 : 70점
 - > 평균 이하 점수 주황색 표시
 - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
 - > 그래프 빈 부분으로 표시
 - 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
- 흔들림 정도
 - 단위 : %
 - 흔들림 퍼센트 그래프 표시
 - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
 - > 그래프 빈 부분으로 표시
 - 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동
- 외발 서기 시간
 - 단위 : 초
 - 데이터 없는 날짜는 날짜 회색 표시
 - > 그래프 빈 부분으로 표시
 - 좌우 스와이프를 이용하여 날짜 이동

설정

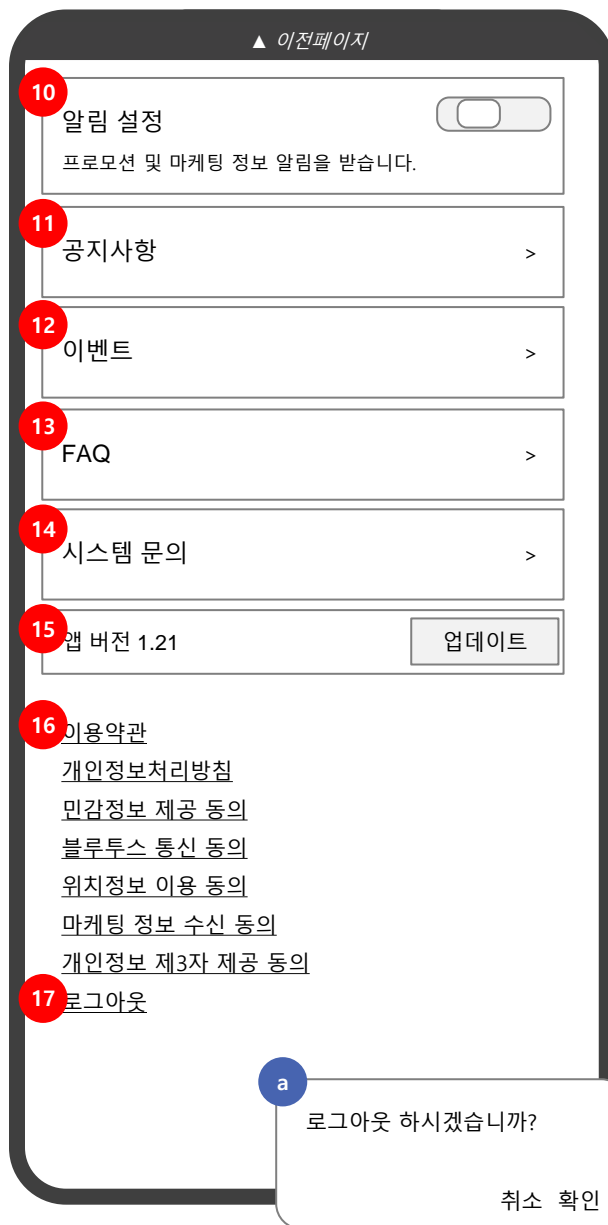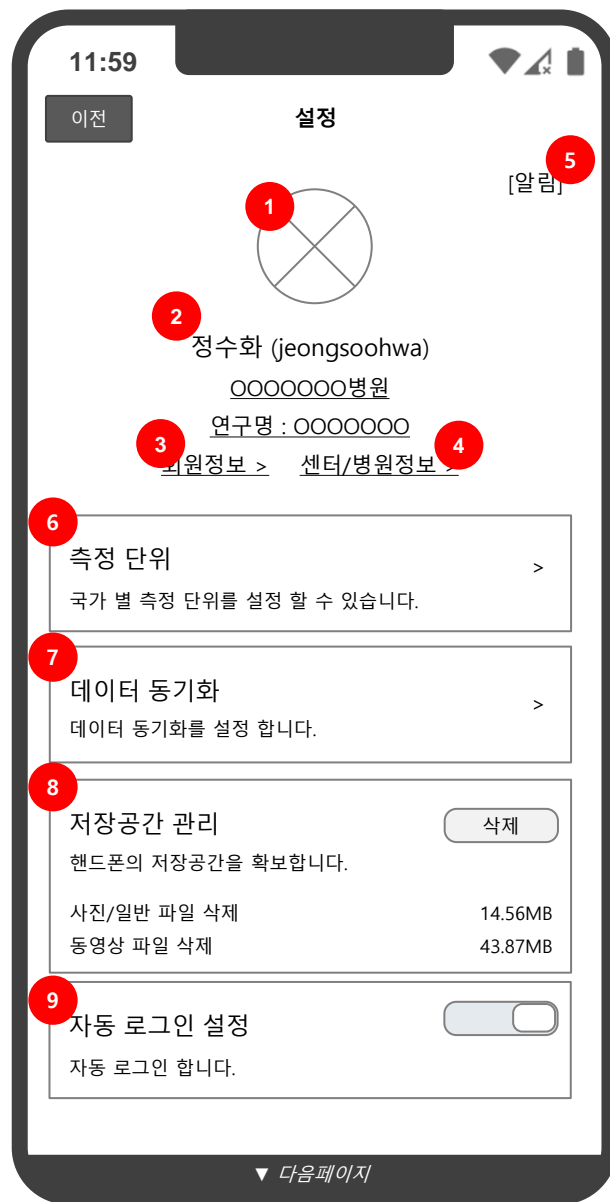

1. 등록된 이미지 출력
2. 회원명, 센터 정보
 - 한국 회원 : 이름 전체, 국외 회원 : 이름만 표시
 - 센터 매칭 되었을 때
 - > 매칭 국가에 따른 회원 명 표시 방법 추가 (2021.11.24)
3. 회원정보 상세 화면으로 이동
4. 병원 정보 화면으로 이동
5. 알림 메시지함으로 이동
6. 측정 단위 설정 화면으로 이동
7. 데이터 동기화 설정 화면으로 이동
8. 삭제 시 앱 폴더 내 저장된 사진/일반 파일/동영상 파일 전체 삭제
9. 로그인 시 자동 로그인 체크된 경우 on 상태 유지
off 시 앱 종료 후 실행 시 로그인 화면부터 진입
10. 일반 알림 설정으로 기본 알림 off로 설정 (필수 알림에 대한 알림 설정 관리는 별도로 존재하지 않으며 선택 사항(광고성)에 대한 알림 설정만 관리함)
11. 공지사항 페이지로 이동
12. 이벤트 페이지로 이동
13. FAQ 페이지로 이동
14. 메일 실행
15. 최신 버전일 경우 '최신버전' 표시, 버튼 비활성화처리

최신버전
1. 로그아웃 Tap 시 아래 알럿 출력
확인 Tap 시 로그인 화면으로 이동

회원정보(일반회원)

1. Tap 시 이미지 업로드 가능
썸네일 사이즈는 디자인 시 협의
최초 프로필 사진 디폴트 이미지로 세팅
2. 선택 후 회원 정보 수정 버튼 Tap 시 변경
3. 생년월일 입력 박스 Tap 시 재 입력 가능
(OS 기본 데이터피커 제공)



4. 작성한 문진보기 화면으로 이동
5. 회원 가입 시 선택한 국가 출력
국가 번호는 코드 관리함
6. 거주지 입력하여 변경
7. 변경하기 Tap 시 정보 수정 및 인증
페이지로 이동
- 국가가 한국 일 경우 이메일 인증 없음
> 이메일 영역 입력 박스로 변경
- 국가가 한국 이외 나라 일 경우 휴대폰
인증 없음
> 휴대폰 영역 입력 박스로 변경
8. 회원탈퇴 페이지로 이동
9. 프로필 사진 삭제
디폴트 이미지 출력
10. 변경된 내용 저장

한국 회원 정보 수정
- 이름/성 구분 삭제
(2021.11.24)

회원정보(일반회원)

11:59

이전 회원정보 완료

1 9

프로필 사진 변경

아이디 soohwajeong

이름 수화

성 정

성별 2 ○ 남성 ● 여성

생년월일 1999.01.01 3

문진보기 문진보기 4

국가 대한민국 5

거주지 서울 6

휴대폰번호 +82 10-1234-5678 변경하기 >

7

이메일 abcd@salted.ltd 변경하기 >

비밀번호 ***** 변경하기 >

8 회원탈퇴

1. Tap 시 이미지 업로드 가능
썸네일 사이즈는 디자인 시 협의
최초 프로필 사진 디폴트 이미지로 세팅
2. 선택 후 회원 정보 수정 버튼 Tap 시 변경
3. 생년월일 입력 박스 Tap 시 재 입력 가능
(OS 기본 데이터피커 제공)



4. 작성한 문진보기 화면으로 이동
5. 회원 가입 시 선택한 국가 출력
국가 번호는 코드 관리함
6. 거주지 입력하여 변경
7. 변경하기 Tap 시 정보 수정 및 인증
페이지로 이동
 - 국가가 한국 일 경우 이메일 인증 없음
> 이메일 영역 입력 박스로 변경
 - 국가가 한국 이외 나라 일 경우 휴대폰
인증 없음
> 휴대폰 영역 입력 박스로 변경
8. 회원탈퇴 페이지로 이동
9. 프로필 사진 삭제
디폴트 이미지 출력
10. 변경된 내용 저장

국외 회원 정보 화면 추가
(2021.11.24)

Page Description	설정 > 회원정보 > 문진 보기 > 데이터 없음	Screen ID	PT-A-10-11	Description
	<div data-bbox="155 145 762 1333"></div>			<div data-bbox="1583 97 2030 542"><ol style="list-style-type: none">1. 문진 보기<ul style="list-style-type: none">- 작성된 문진이 없을 경우 문진 작성 요청 문구 표시2. 신규 작성<ul style="list-style-type: none">- 신규 문진 작성- 회원가입 > 필수 및 추가 정보(문진 정보)화면 표시<ul style="list-style-type: none">> 작성 완료 화면에서 '시작하기' 버튼이 '나가기' 버튼으로 변경> 나가기 시 문진 보기 화면으로 이동3. 이전<ul style="list-style-type: none">이전 화면으로 이동</div>

- 기존 문진 보기
 - 기존 작성된 문진 표시
 - 기존 문진은 수정 불가
- 신규 작성
 - 신규 문진 작성
 - 회원가입 > 필수 및 추가 정보(문진 정보)화면 표시
 - > 작성 완료 화면에서 '시작하기' 버튼이 '나가기' 버튼으로 변경
 - > 나가기 시 문진 보기 화면으로 이동
- 이전
 - 이전 화면으로 이동

11:59

3 이전 1 문진 보기 2 신규 작성

1. 환자분에게 해당하는 가족력을 모두 선택해 주세요.

없음	고혈압	당뇨	뇌혈관 질환	심장질환
골다공증	암	기타		

2. 병원 진단이나 수술을 받은 이력이 있다면 모두 선택해 주세요.

없음	근골격계 질환	심혈관계 질환	호흡계 질환	신경계 질환
내분비계 질환	디스크 질환	기타		

3. 지난 일주일 동안 격렬한 신체활동(무거운 물건 나르기, 달리기, 빠른 속도로 자전거 타기 등)을 며칠 하셨나요?

일주일애 _____ 일

4. 3번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?

하루에 ____ 시간 ____ 분

5. 지난 일주일 동안 중간 정도의 신체활동(가벼운 물건 나르기, 복식 테니스, 중간 속도로 자전거 타기 등)을 며칠 하셨나요?

일주일애 _____ 일

6. 5번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?

하루에 ____ 시간 ____ 분

7. 지난 일주일 동안 10분 이상 걸은 날은 며칠인가요?

일주일애 _____ 일

8. 7번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?

하루에 ____ 시간 ____ 분

9. 지난 일주일 동안 하루에 평균 몇 시간을 앉아 계시나요?

하루에 ____ 시간 ____ 분

▼ 다음페이지

▲ 이전페이지

5. 지난 일주일 동안 중간 정도의 신체활동(가벼운 물건 나르기, 복식 테니스, 중간 속도로 자전거 타기 등)을 며칠 하셨나요?

안 함 일주일애 _____ 일

6. 5번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?

하루에 ____ 시간 ____ 분

7. 지난 일주일 동안 10분 이상 걸은 날은 며칠인가요?

안 함 일주일애 _____ 일

8. 7번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?

하루에 ____ 시간 ____ 분

9. 지난 일주일 동안 하루에 평균 몇 시간을 앉아 계시나요?

하루에 ____ 시간 ____ 분

a 휴대폰 번호

국가 선택 ▼ 010-0000-000

휴대폰 번호를 확인해 주세요.

b

입력하신 번호로 인증번호가
발송되었습니다.

확인

c 인증번호


dadf

인증번호를 확인해 주세요.

1. Tap 시 해당 핸드폰으로 인증 번호 발송
 - a. 휴대폰 번호 오입력 또는 정보 없을 경우 오류 문구 표시
 - b. 인증번호 발송 시 알럿 메시지 출력
2. 인증번호 재발송
 - b. 인증번호 발송 시 알럿 메시지 출력
3. 완료
 - 인증번호가 일치 할때 변경된 정보 업데이트
 - c. 인증번호가 일치 하지 않을 경우 오류 문구 표시

국가에 따른 휴대폰/ 이메일
변경 화면 추가
(2021.11.24)

Page Description	설정 > 회원정보 > 휴대폰번호 변경하기(국가 : 국외)	Screen ID	PT-A-10_12	Description
<div><div><div><div>11:59</div><div><div>취소</div><div>휴대폰번호 변경</div><div>완료</div></div></div><div>아이디, 비밀번호 찾기 등 본인 확인이 필요한 경우 사용할 휴대폰 번호입니다.</div><div>변경할 휴대폰번호</div><div><div>국가 선택 ▼</div><div>핸드폰 번호 입력</div></div></div></div> <div></div>				<div>1. 완료</div> <div>- 변경된 정보 업데이트</div>
				<div>국가에 따른 휴대폰/ 이메일 변경 화면 추가 (2021.11.24)</div>

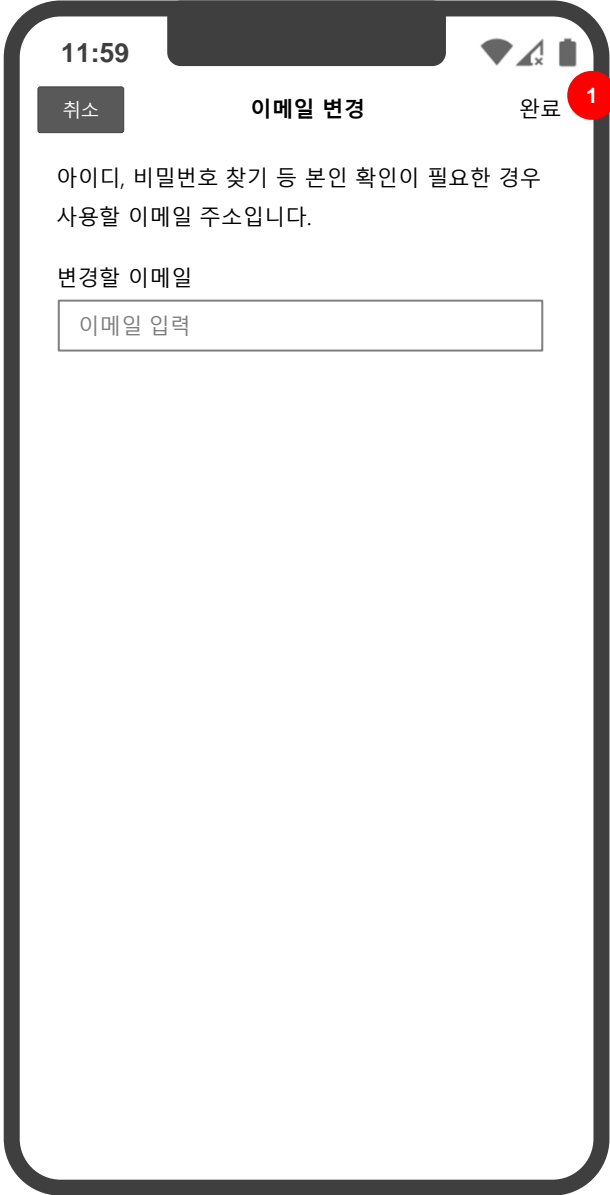Page Description	설정 > 회원정보 > 이메일 변경하기 (국가 : 한국)	Screen ID	PT-A-10_03	Description
				<p>1. 완료</p> <p>- 변경된 정보 업데이트</p> <div data-bbox="1696 1051 2026 1176" style="border: 2px solid red; padding: 5px; transform: rotate(-2deg); color: red; text-align: center;">국가에 따른 휴대폰/이메일 변경 화면 추가 (2021.11.24)</div>

a 이메일 인증번호 받기

이메일 주소를 확인해 주세요.

b 입력하신 이메일 주소로 인증번호가 발송되었습니다.

확인

c 인증번호

인증번호를 확인해 주세요.

1. 입력한 메일 주소로 인증 번호 발송
 - a. 이메일 오입력 또는 정보 없을 경우 오류 문구 표시
 - b. 인증번호 발송 시 알럿 메시지 출력
2. 인증번호 재발송
 - b. 인증번호 발송 시 알럿 메시지 출력
3. 완료
 - 인증번호가 일치 할때 변경된 정보 업데이트
 - c. 인증번호가 일치 하지 않을 경우 오류 문구 표시

국가에 따른 휴대폰/ 이메일
변경 화면 추가
(2021.11.24)

11:59

취소 비밀번호 변경 3 완료

비밀번호를 변경할 수 있습니다.
주기적인 비밀번호 업데이트로 개인정보를 안전하게 보호하세요.

1 현재 비밀번호

새로운 비밀번호

비밀번호 입력(8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합)

비밀번호 재입력

2 현재 비밀번호

a 비밀번호

비밀번호가 일치 하지 않습니다.

b 비밀번호 (8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합)

8~16 자리, 영문/숫자/특수문자 조합이 아닙니다.


c 비밀번호 재입력

신규 비밀번호와 일치하지 않습니다.


- 비밀번호 입력 후 키패드 닫을 때 현재 비밀번호 정보가 맞는지 확인
정보 확인이 완료 된 후 변경할 새로운 비밀번호 입력란 활성화
 - 비밀번호 오입력 시 오류 문구 표시
- 비밀번호 입력 시 마스킹 처리
- 오류 발생
 - 신규 비밀번호가 비밀번호 조건과 맞지 않을 경우 오류 문구 표시
 - 재입력 비밀번호가 신규 비밀번호와 일치 하지 않을 경우 오류 문구 표시

Page Description	설정 > 회원탈퇴	Screen ID	PT-A-10_05	Description
<div> <div> <div>회원탈퇴</div> <div> <div>취소</div> <div>회원탈퇴</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> 회원탈퇴 시 등록된 프로그램, 보행 패턴 분석 데이터, 의사 선생님 코멘트, 스케줄 등 ‘뉴로게이트’ 앱의 서비스를 이용하실 수 없습니다. 회원탈퇴 시 회원님의 회원 정보가 모두 삭제되며 복구할 수 없습니다. 회원탈퇴 후 재가입은 가능하지만 탈퇴한 회원 ID로 재가입을 하실 수 없습니다. <div> <div>회원탈퇴의 사유를 알려주세요. 서비스 개선에 중요한 자료로 활용하겠습니다.</div> <div> <div>1</div> <div> <input type="checkbox"/> 앱 사용이 불편함 <input type="checkbox"/> 나에게 필요한 데이터가 없음 <input type="checkbox"/> 사용 빈도가 낮음 <input type="checkbox"/> 개인 정보 및 재활 운동 삭제 목적 <input type="checkbox"/> 기타 </div> </div> <div>2</div> <div>3</div> <div>○ 모든 정보를 삭제하는 것에 동의합니다.</div> <div>탈퇴하기</div> <div>4</div> </div> </div> </div> <div> <div>회원탈퇴 완료</div> <div> <div>회원탈퇴</div> <div> <div>회원탈퇴가 완료되었습니다. 그동안 NEUROGAIT 앱을 이용해 주셔서 감사합니다.</div> <div>5</div> <div>로그인으로 가기</div> </div> </div> </div> </div> </div>				<p>선택 : 서비스 개선 설문 사항(1번 내용) 필수 : 정보 삭제 동의(3번 내용)</p> <ol style="list-style-type: none"> 다중 선택 가능 기타 선택 시 텍스트 입력란 활성화 체크 시 탈퇴하기 버튼 활성화되며 탈퇴 가능 탈퇴하기 버튼 Tap 시 완료 페이지로 이동 탈퇴 안내 메일 발송 회원탈퇴 시 일반, 소속 센터에서의 데이터 등 모든 정보 일괄 삭제 Tap 시 로그인 화면으로 이동

매칭된 병원이 없는 경우

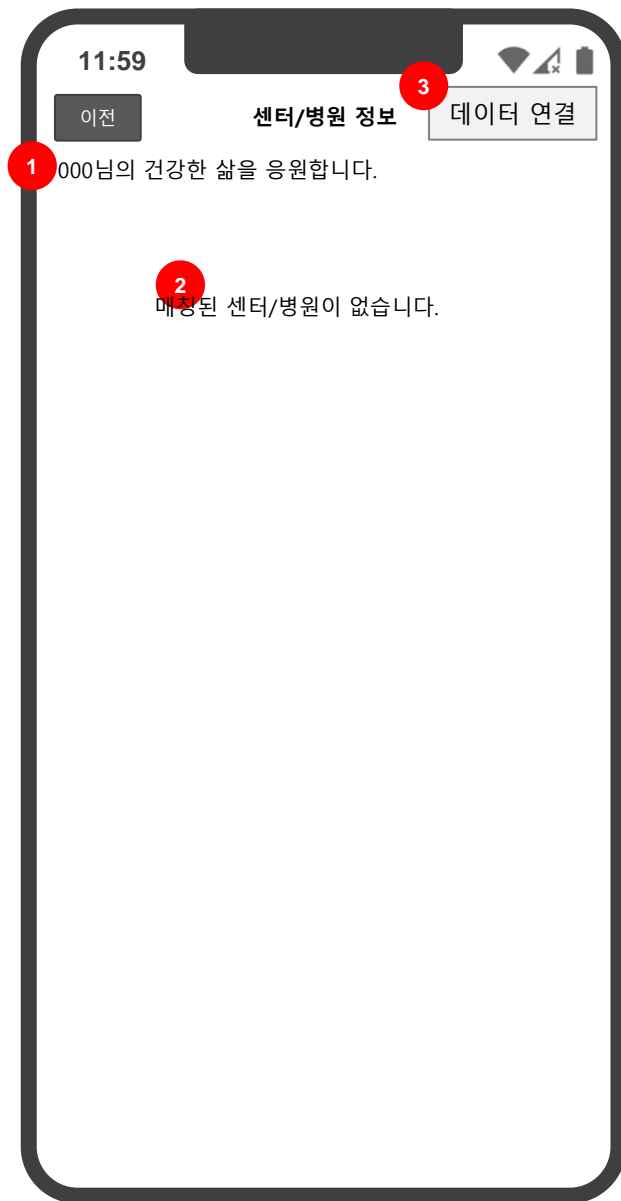

매칭된 병원이 있는 경우

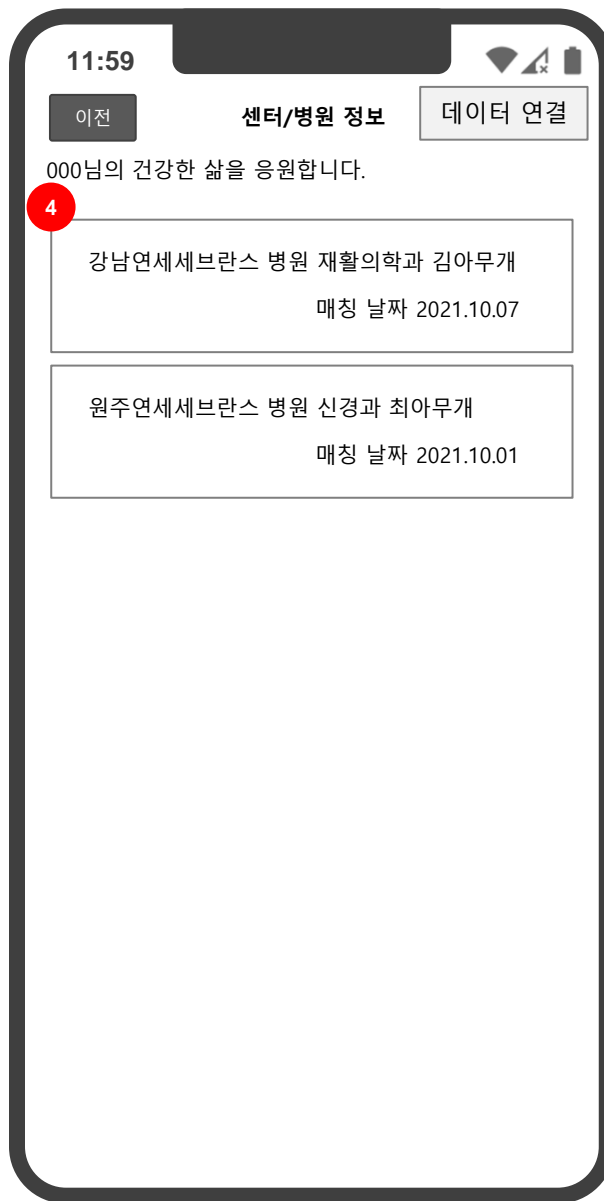


1. 환자(사용자) 이름 출력
2. 매칭된 병원 없을 경우 문구 출력
3. 데이터 연결
 - 병원이 연결하기 위한 데이터 연결 코드 볼 수 있는 버튼
 - tap 시 데이터 연결 코드 팝업 표시
4. 병원 리스트
 - 매칭되었던 병원 목록 출력
 - 현재 진료중인 병원이 가장 상단으로 출력되며 매칭 날짜 기준으로 나열
5. 데이터 연결 코드 보기 팝업
 - 나의 코드 표시

5

데이터 연결 코드

나의 코드 : 000000

확인

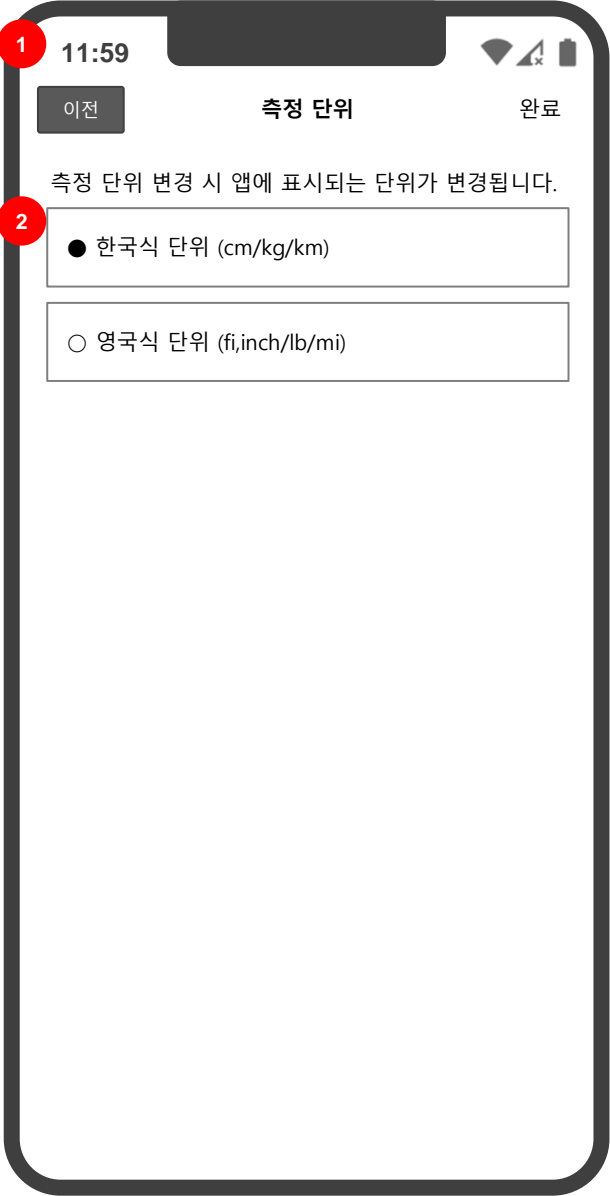Page Description	설정 > 측정 단위	Screen ID	PT-A-10_7	Description
				<ol style="list-style-type: none">1. master admin 코드관리>국가에 등록이 되고 서비스 오픈된 지역에 한해 목록에 출력2. 기본 설정은 회원가입 시 등록한 국가 기준


Page Description	설정 > 데이터 백업	Screen ID	PT-A-10_8	Description
<div><div><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>데이터 동기화</div><div>완료</div></div></div><div><div><div>○ 와이파이 연결 시</div><div>1</div></div><div>와이파이가 연결 되었을 때에만 데이터를 동기화 합니다.</div></div><div><div><div>● 항상</div><div>인터넷 연결과 상관없이 항상 데이터를 동기화 합니다. ※ 요금제에 따라 추가 데이터 요금이 발생 될 수 있습니다.</div></div></div><div><div><div>지금 데이터 백업</div><div>2</div></div><div>백업된 데이터가 없을 경우 정확한 분석 결과를 확인 할 수 없습니다.</div></div></div></div>				<div><div>1. 기본 설정 값 – 와이파이 연결 시 자동 데이터 백업 백업 주기는 정책에 따름(정책정의서 내 동기화 항목 참고) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TP1nqiWv0WUQ_XSvczVF0rHppW_u1Nb_aJpGRI4sHmc/edit#gid=1535546166</div><div>2. Tap 시 데이터 백업(동기화 진행) a. 데이터 백업이 완료될 때까지 페이지 이동 불가</div></div>

Page Description	설정 > 알림	Screen ID	PT-A-10_9	Description
<div><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>알림</div></div><div><div>전체 ▼</div><div>1</div></div><div><div>2</div><div><div>icon</div><div>2021.10.10 연세세브란스병원 재활의학과 김아무개 선생님이 매칭 요청을 승인하였습니다.</div></div></div><div><div><div>icon</div><div>2021.10.08 최고의 서비스 제공을 위해 앱을 업데이트 하였습니다.지금 최신 버전으로 앱을 업데이트 하세요!</div></div></div><div><div><div>icon</div><div>2021.10.07 [인솔 리뉴얼기념 1+1 행사] 인솔이 리뉴얼 되었습니다. 더 편하고 예뻐진 인솔을 지금 만나보세요.</div><div><div>3</div><div>img</div></div></div><div><div><div>4</div><div>[바로가기]</div></div></div></div></div></div>				<div><div>1. 메뉴 변경</div><div>- default : 알림</div><div>- 메뉴 종류 : 알림, 이벤트, 공지사항</div><div>2. 카테고리 선택</div><div>- default : 전체</div><div>3. 리스트</div><div>- 최근 등록일 순으로 표시</div><div>- 등록일, 내용, 이미지 출력(등록 시) /</div><div>이미지 사이즈는 디자인 시 협의</div><div>- 별도 상세페이지 없으며 알림 메시지</div><div>모두 펼침</div><div>4. 바로가기</div><div>- 내용 내 링크 입력된 경우 Tap 시 해당</div><div>페이지로 이동</div><div>> 외부 웹페이지 오픈</div></div>


게시판
공통 UI

Page Description	게시판 공통 UI	Screen ID	Description
목록 페이지	<div> </div>		<ol style="list-style-type: none"> 이전버튼 / 메뉴명 영역은 상단 고정 Tap 시 카테고리 목록 펼침 카테고리는 관리자 화면에서 코드관리하며 카테고리가 없는 경우 해당 영역 사라짐 (UI는 이후 페이지 참조) Tap 시 안내 키워드 사라지며 키보드 활성화 (UI는 이후 페이지 참조) 관리자 화면에서 게시물 등록 시 상단 고정 체크된 게시물 출력 상단 고정 체크된 게시물 중 최근 등록순으로 출력 상단 고정 게시물은 최대 3개까지 가능 (관리자 기능은 관리자 화면설계서 참조) 게시글은 카테고리명, 등록일, 제목 순으로 출력 (항목이 없을 경우 노출 안됨) << 1페이지로 이동 >> 마지막 페이지로 이동 < , > 10페이지 씩 이동 숫자 Tap 시 해당 페이지로 이동 현재 페이지 숫자는 굵게 또는 밑줄 또는 컬러로 표시 (디자인 시 협의)

목록 페이지 > 카테고리 Tap 시

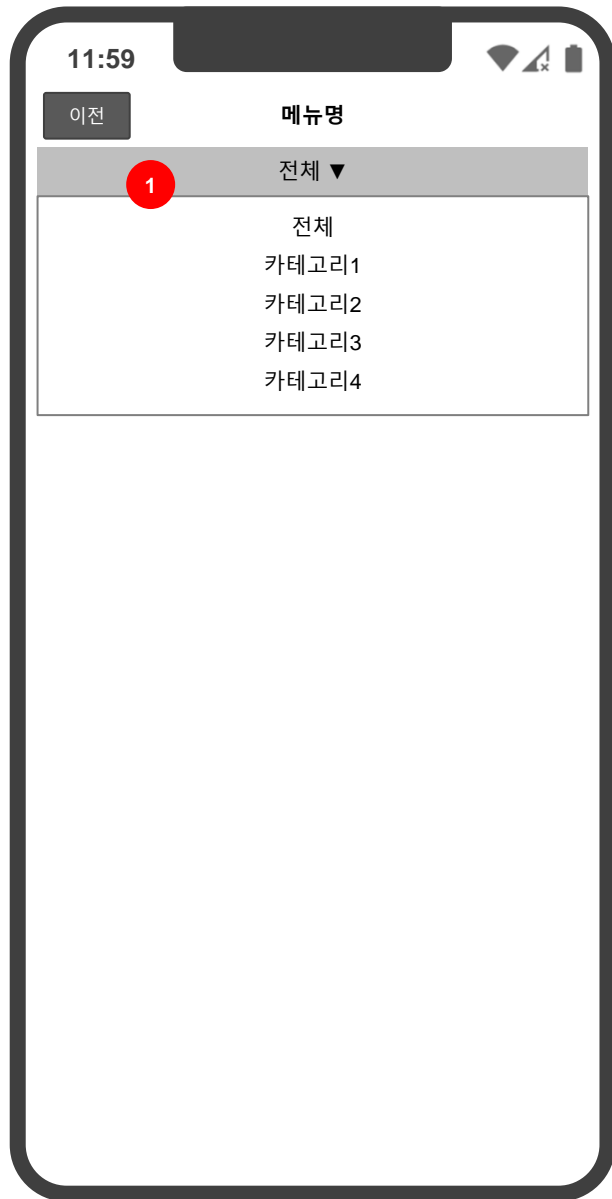

상세페이지

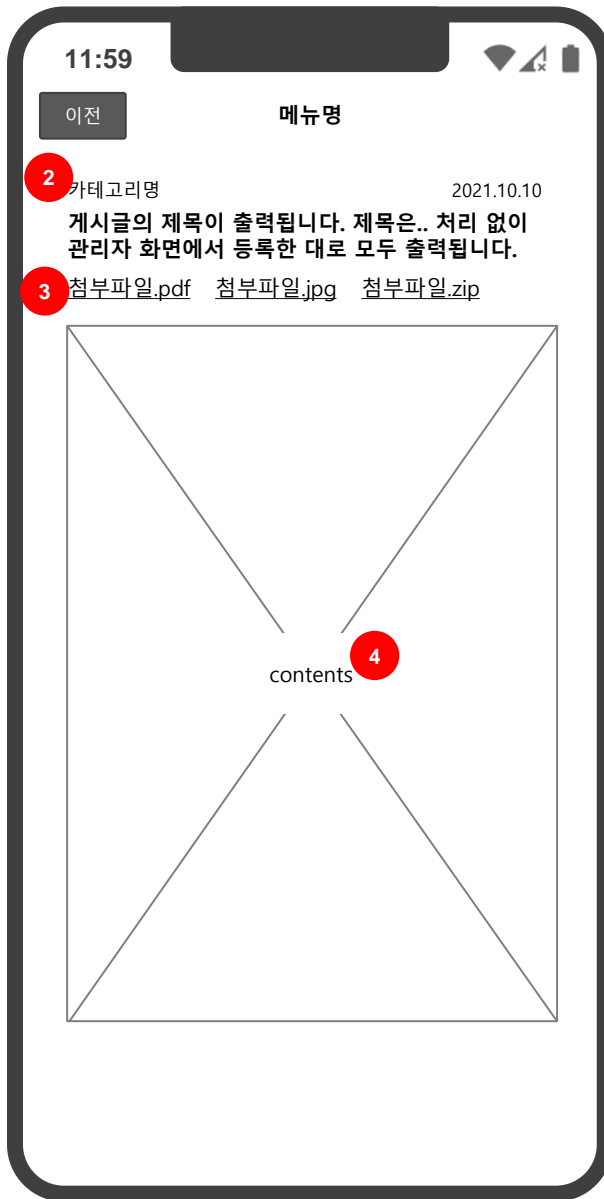


1. 카테고리, 메뉴 공통
 - Tap 시 카테고리, 메뉴 목록 출력
 - 카테고리 : 관리자에서 세팅된 카테고리가 없는 경우 해당 영역 나타나지 않음
2. 상세페이지 내 상단은 카테고리명, 등록일, 타이틀 순으로 출력
카테고리 관리를 하지 않는 메뉴일 경우 해당 영역에 카테고리명 출력 안됨
3. 관리자 화면에서 등록 한 첨부파일의 이름출력
Tap 시 다운로드
4. 등록된 게시글/이미지 출력

Page Description	게시판 공통 UI	Screen ID	Description
<div> <div> <div>검색결과 있을 때</div> <div> <div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>메뉴명</div> <div>전체 ▼</div> <div> <div>솔티드</div> <div>1</div> <div>🔍</div> </div> <div> <div>[카테고리명]</div> <div>2021.09.30</div> <div>일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div> </div> <div> <div>[카테고리명]</div> <div>2021.09.30</div> <div>솔티드 스마트 게이트 앱이 출시하였습니다.</div> </div> <div> <div>[카테고리명]</div> <div>2021.01.01</div> <div>올 한해도 많은 성원과 관심 부탁드립니다.</div> </div> <div>⋮</div> <div> <div><<</div> <div><</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>></div> <div>>></div> <div>3</div> </div> </div> </div> <div> <div>검색결과 없을 때</div> <div> <div> <div>11:59</div> <div>이전</div> <div>메뉴명</div> <div>전체 ▼</div> <div> <div>솔티드</div> <div></div> <div>🔍</div> </div> <div> <div>찾으시는 검색 결과가 없습니다.</div> <div>4</div> </div> <div> <div>5</div> <div>전체 목록 보기</div> </div> </div> </div> </div> </div></div>			<ol style="list-style-type: none"> <div> <div>- 검색 : 제목&내용 내 키워드 검색 결과를 출력함</div> <div>- 결과 페이지에 상위 고정된 게시글은 보여 주지 않음</div> <div>- 입력한 검색어는 검색 결과 페이지에서도 입력란에 유지되어 어떤 키워드로 검색하였는지 확인 할 수 있도록 함</div> <div>- 등록순 기준으로 출력</div> </div> <div> <div>검색 키워드 강조(컬러 또는 볼드 처리</div> <div>내용 내 검색 키워드가 있을 경우 상세 페이지에서 별도로 키워드를 강조 하지 않음</div> </div> <div> <div>검색 결과가 15개 이상일 경우 페이지징 처리하여 보여줌</div> <div>상세 페이지에서 이전 버튼 Tap 시 검색 결과 화면(해당 게시물이 있던 이전 목록화면)으로 이동</div> </div> <div> <div>검색 결과가 없을 경우 안내 문구 출력</div> </div> <div> <div>Tap 시 전체 목록 1페이지로 이동</div> </div>

이벤트

목록

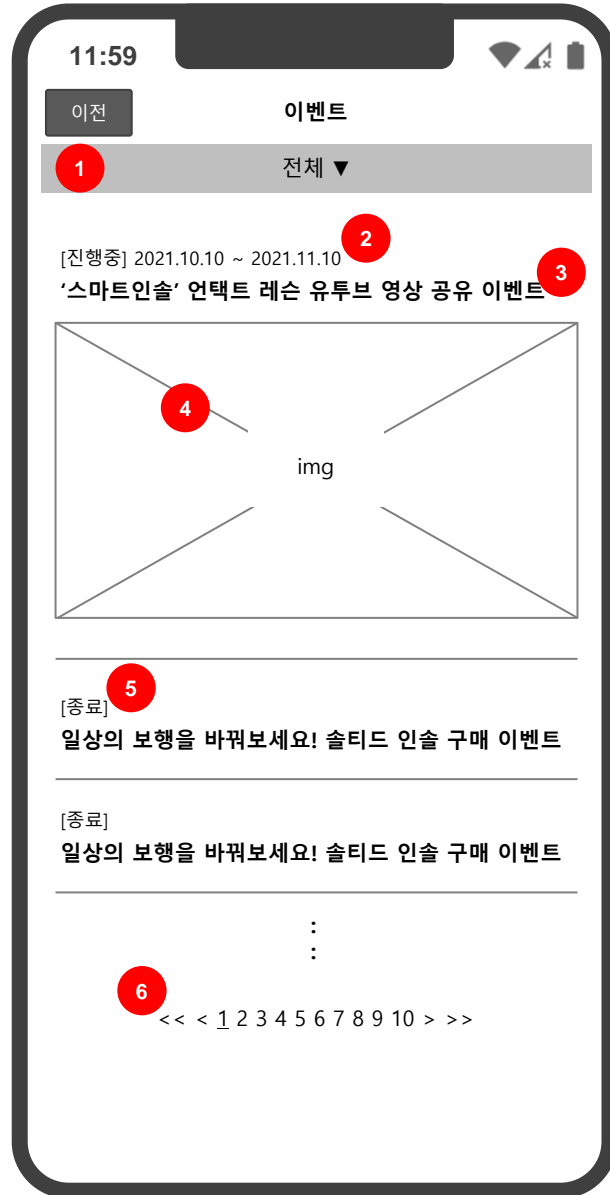

1. 전체, 진행중, 종료
2. 기본 전체로 보여지며 선택 시 해당 상태의 이벤트만 출력됨
3. 제목 출력
최대 글자수는 디자인 시 협의
4. 이미지 등록 시 출력
이미지 사이즈는 디자인 시 협의
5. 기간이 지난 이벤트의 경우 종료 처리됨
종료된 이벤트의 진행 기간은 보여지지 않음
6. 목록은 1페이지당 15개 목록 출력
게시글 영역 클릭 시 이벤트 안내 상세페이지로 이동
상세 페이지는 별도 추가 개발된 페이지로 링크 연결되도록 함
7. 첨부파일 있을 경우 제공
업로드 가능한 파일은
이미지/사진/문서(pdf)
8. 이미지 등록 시 출력
이미지 사이즈는 디자인 시 협의
9. 내용 출력(텍스트)

공지사항

Page Description	공지사항	Screen ID	PT-A-12	Description
	<div><div>목록</div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>공지사항</div><div>전체 ▼</div><div>6 제목/내용</div><div>1 [카테고리명] 2021.09.30 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div><div>2 [카테고리명] 2021.09.30 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트 3</div><div>[카테고리명] 2021.09.30 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div><div>[카테고리명] 2021.09.30 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div><div>[카테고리명] 2021.09.30 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div><div>⋮</div><div><< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >></div></div></div>	<div><div>상세</div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>공지사항</div><div>[카테고리명] 2021.09.30 일상의 보행을 바꿔보세요! 솔티드 인솔 구매 이벤트</div><div>4 abcd.pdf abcd.gif abcd.zip</div><div>나만 아는 '솔티드 스마트 인솔' 함께 알면 골프가, 운동이 2배, 3배 재밌을 텐데! 솔티드, 어떻게 소문낼 수 있을까? 코로나19이후 언택트 시대가 가속화되면서 김남기프로'가 솔티드 '스마트인솔'을 활용하여 언택트 레슨을 진행하였는데요! 그래서 솔티드가 여러분에게 소문낼 수 있게 판을 열었습니다!</div><div>5</div></div></div>	<div><div>1. 상위 고정 게시글 제목 출력 관리자에서 공지사항 등록 시 상위 고정으로 체크된 게시글 제목이 상단에 출력됨 고정 게시물은 최대 3일 이며 최신 수정일 기준으로 출력 상위 고정 게시물은 1페이지에서만 출력 상위 고정 게시물을 제외한 15개의 목록이 한 페이지에서 출력됨</div><div><div>2. 카테고리 설정하여 관리 시 카테고리명 출력 카테고리 설정이 되어 있지 않을 경우 출력 안됨</div><div><div>3. 등록일 / 제목 출력 제목 출력 글자수는 디자인 시 협의</div><div><div>4. 첨부 파일 있을 경우 다운로드 제공</div><div><div>5. 이미지 등록 시 텍스트 이후 하단에 출력</div><div><div>6. 카테고리 터치, 검색 기능은 게시판 공통 UI 기능 적용함</div></div></div></div></div></div></div>	


FAQ

Page Description	FAQ	Screen ID	PT-A-13	Description
	<div><div>목록</div><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>FAQ ▼</div><div>전체 ▼ 1</div></div><div><div>[카테고리명]</div><div>인솔 구매 문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div></div><div><div>[카테고리명]</div><div>문의는 어디로 해야 하나요? 2 ▼</div></div><div><div>[카테고리명]</div><div>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div></div><div><div>[카테고리명]</div><div>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div></div><div><div>[카테고리명]</div><div>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div></div><div><div>[카테고리명]</div><div>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div></div></div></div>	<div><div>목록(펼침)</div><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>FAQ ▼</div><div>전체 ▼</div></div><div><div>[카테고리명]</div><div>인솔 구매 문의는 어디로 해야 하나요? 2 ▼</div><div>인솔 구매 문의는 고객 센터로 연락해주세요. 문의 전화 080-4048-3912 고객 센터 운영시간 09:30 ~ 17:30 인솔 제품 소개서.pdf</div></div><div><div>[카테고리명]</div><div>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div></div><div><div>[카테고리명]</div><div>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div></div><div><div>[카테고리명]</div><div>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div></div><div><div>[카테고리명]</div><div>문의는 어디로 해야 하나요? ▼</div></div></div></div>	<div>1. 선택 시 카테고리 펼침</div> <div>2. Tap 시 내용이 펼쳐짐 재 Tap 시 내용이 닫힘</div>	

Page Description	설정 > 약관	Screen ID	PT-A-15	Description
	<div data-bbox="155 147 762 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>이용약관</div></div><div><div>변경일 2021.10.07 ▼</div><div>1</div></div><div><div>contents</div><div>2</div></div></div></div> <div data-bbox="818 147 1425 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>개인정보처리방침</div></div><div><div>변경일 2021.10.07 ▼</div><div>1</div></div><div><div>contents</div><div>2</div></div></div></div>			<div data-bbox="1580 97 1914 168"><div>1. 가장 최신 변경 이력 내용 세팅</div><div>2. 내용 출력</div></div> <div data-bbox="1616 961 1943 1110"><div>콘텐츠 수급 필요</div></div>

Page Description	설정 > 약관	Screen ID	PT-A-15	Description
	<div data-bbox="155 147 762 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>민감정보 제공 동의</div><div>변경일 2021.10.07 ▼ 1</div><div>contents 2</div></div></div></div> <div data-bbox="818 147 1425 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>블루투스 통신 동의</div><div>변경일 2021.10.07 ▼ 1</div><div>contents 2</div></div></div></div>			<div data-bbox="1580 97 1914 168"><div>1. 가장 최신 변경 이력 내용 세팅</div><div>2. 내용 출력</div></div> <div data-bbox="1616 961 1943 1110"><div>콘텐츠 수급 필요</div></div>

Page Description	설정 > 약관	Screen ID	PT-A-15	Description
	<div data-bbox="155 147 762 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>위치정보 이용 동의</div><div>변경일 2021.10.07 ▼ 1</div><div>contents 2</div></div></div><div data-bbox="818 147 1425 1332"><div><div>11:59</div><div><div>이전</div><div>마케팅 정보 수신 동의</div><div>변경일 2021.10.07 ▼ 1</div><div>contents 2</div></div></div></div></div>			<div data-bbox="1580 97 1912 168"><div>1. 가장 최신 변경 이력 내용 세팅</div><div>2. 내용 출력</div></div> <div data-bbox="1616 961 1943 1110"><div>콘텐츠 수급 필요</div></div>

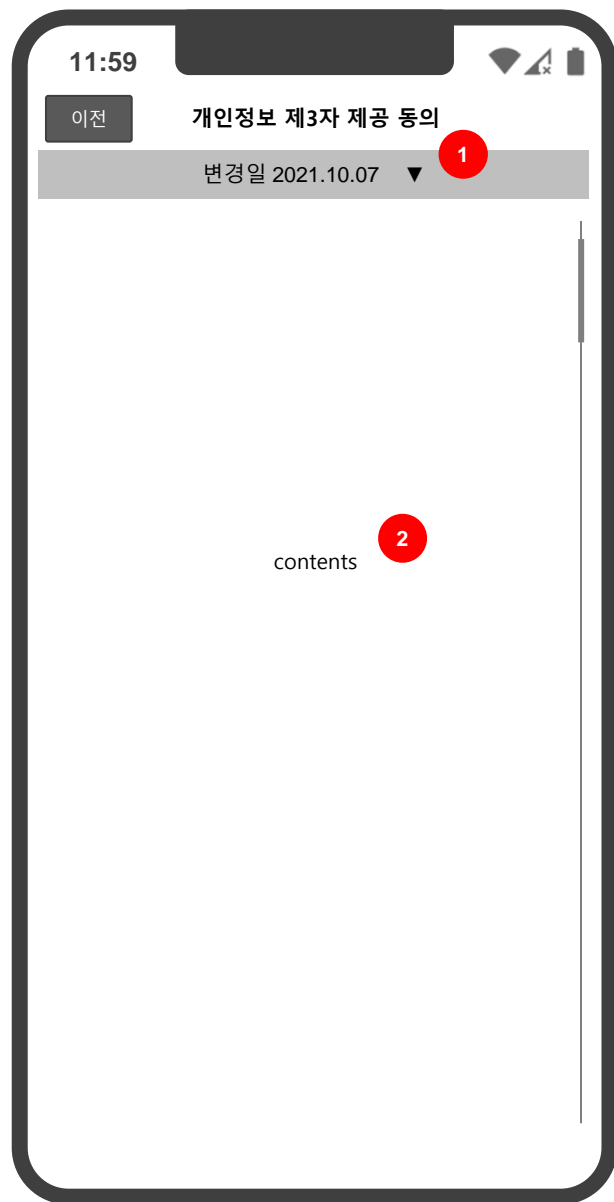

1. 가장 최신 변경 이력 내용 세팅
2. 내용 출력

콘텐츠 수급 필요

Page Description	앱 사용중 모바일 데이터 연결이 끊겼을 경우	Screen ID	Care-E-07	Description
	<div data-bbox="155 142 762 1332"><div><div>11:59</div><div>NEUROGAIT</div><div>00000병원</div></div><div><div>1</div><div>모바일 데이터(5G/LTE/WiFi) 연결이 끊겼습니다. Offline모드로 앱 사용을 계속 합니다. *offline 모드는 앱 전체 기능을 이용 할 수 없습니다. 확인</div></div><div><div>icon</div><div>홈</div><div>icon</div><div>스케줄</div><div>icon</div><div>운동</div><div>icon</div><div>인슐</div><div>icon</div><div>종합 결과</div></div></div>			<div>1. 앱 사용중 모바일 데이터가 끊겼을 경우 나오는 팝업</div> <div><div>- 현재 화면에서 홈화면으로 강제 이동 후 stand alone으로 앱 변경</div><div>- 운동 중이었을 경우 운동 완료 후 팝업 표시</div></div>

Page Description	HCP 환자 등록 시 SMS 약관 동의	Screen ID	Care-E-16	Description
<div><div><div>11:59</div><div>뉴로게이트 약관 동의</div><div><div>1</div><div>○ 전체 동의(필수, 선택 모두 포함)</div></div><div><div>2</div><div><div>○ 뉴로게이트 서비스 이용 약관(필수) ></div><div>○ 개인정보 수집 및 이용 동의(필수) ></div><div>○ 민감정보 수집 및 이용 동의(필수) ></div><div>○ 위치정보 수집 및 이용 동의(필수) ></div><div>○ 개인정보 제3자 제공 동의(필수) ></div><div>○ 개인정보 처리방침(필수) ></div><div>○ 블루투스 통신 동의(필수) ></div><div>○ 마케팅 정보 수신 동의(선택) ></div></div></div><div><div>3</div><div>다음</div></div></div></div> <div><div>1. 터치 시 전체 항목 체크박스 체크</div><div>2. 각 항목 레이블 터치 시 약관 전문 페이지 새 탭 열기</div><div>3. - 필수 항목 전체 동의 시까지 비활성화 - 활성화 상태에서 터치 시 동의 완료, 동의 완료 페이지 로드</div></div> <div><div>약관 동의 HTML 페이지 추가 (2021.11.18)</div></div>				

Page Description	HCP 환자 등록 시 SMS 약관 동의 완료	Screen ID	Care-E-17	Description
				<p>1. 동의 완료 문구</p> <div data-bbox="1616 1219 2001 1348">약관 동의 HTML 페이지 추가 (2021.11.18)</div>

End Of Document