



솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발

화면설계서 – NEUROGAIT – HCP App (Tablet)

Document Version : V1.2.1

Release Date : 2021.11

Organization : 솔티드㈜

Author : 제갈훈 주임


구분	소속	역할	담당자	확인일	확인
작성	솔티드	기획PA	제갈훈		
동료검토	솔티드	기획PA	유병규		
동료검토	픽스프레임	기획PL	정수화		
동료검토	솔티드	개발PL	최성찬		
동료검토	솔티드	디자인PL	박지혜		
동료검토	픽스프레임	PM	김상환		
검토	솔티드	사업총괄	연상근		
인수/승인	솔티드	총괄PM	강경훈		

날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.09.03	0.1	최초 작성	<ul style="list-style-type: none">최초 작성	정수화
2021.09.06	0.2	업데이트	<ul style="list-style-type: none">디스크립션 보완, 확인 사항 추가	정수화
2021.09.24	0.3	업데이트	<ul style="list-style-type: none">Screen ID 추가로그인 화면 확인 사항 확정	제갈훈
2021.09.27	0.4	업데이트	<ul style="list-style-type: none">누락 및 보완 사항 체크	정수화
2021.10.01	0.4.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none">디스크립션 보완	제갈훈
2021.10.07	0.5	업데이트	<ul style="list-style-type: none">브랜드명 확정: NEUROGAIT(뉴로게이트)의료진 정보 추가: 진료과	제갈훈
2021.10.26	0.5	업데이트	<ul style="list-style-type: none">브랜드명 확정: NEUROGAIT(뉴로게이트)의료진 정보 추가: 진료과	제갈훈
2021.10.26	0.5.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none">용어 변경 (Neuro Gait □ NEUROGAIT, 뉴로 게이트 □ 뉴로게이트)Menu map 추가모든 화면 통합 (메뉴별 화면설계서 모두 통합)	김상환
2021.11.03	0.8.5	업데이트	<ul style="list-style-type: none">업데이트 화면(12월 반영) 설계 추가Phase 2 기능 포함 설계 추가이메일 찾기 추가	제갈훈
2021. 11. 04	0.9	동료검토	<ul style="list-style-type: none">문서 보완	정수화
2021.11.05	1.0	동료검토	<ul style="list-style-type: none">문서 보완, 디스크립션 보완	정수화
2021.11.08	1.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none">Screen ID 추가인솔 연결/미연결 상태의 UI 수정디스크립션 보완	제갈훈

날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.11.08	1.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none">• Screen ID 추가• 인솔 연결/미연결 상태의 UI 수정• 디스크립션 보완	제갈훈
2021.11.09	1.2	업데이트	<ul style="list-style-type: none">• 용어 통일: 휴대폰 번호, 이메일• 알림 화면 추가• 신규 등록 환자 정보 UI 수정• 통계 메뉴 유지, 화면 삭제; 메뉴 터치 시 알럿 메시지 출력	제갈훈
2021.11.09	1.2.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none">• 용어 통일: 발 사이즈• 신규 등록 환자 정보 UI 수정	제갈훈


2021.11.09 수정

진입

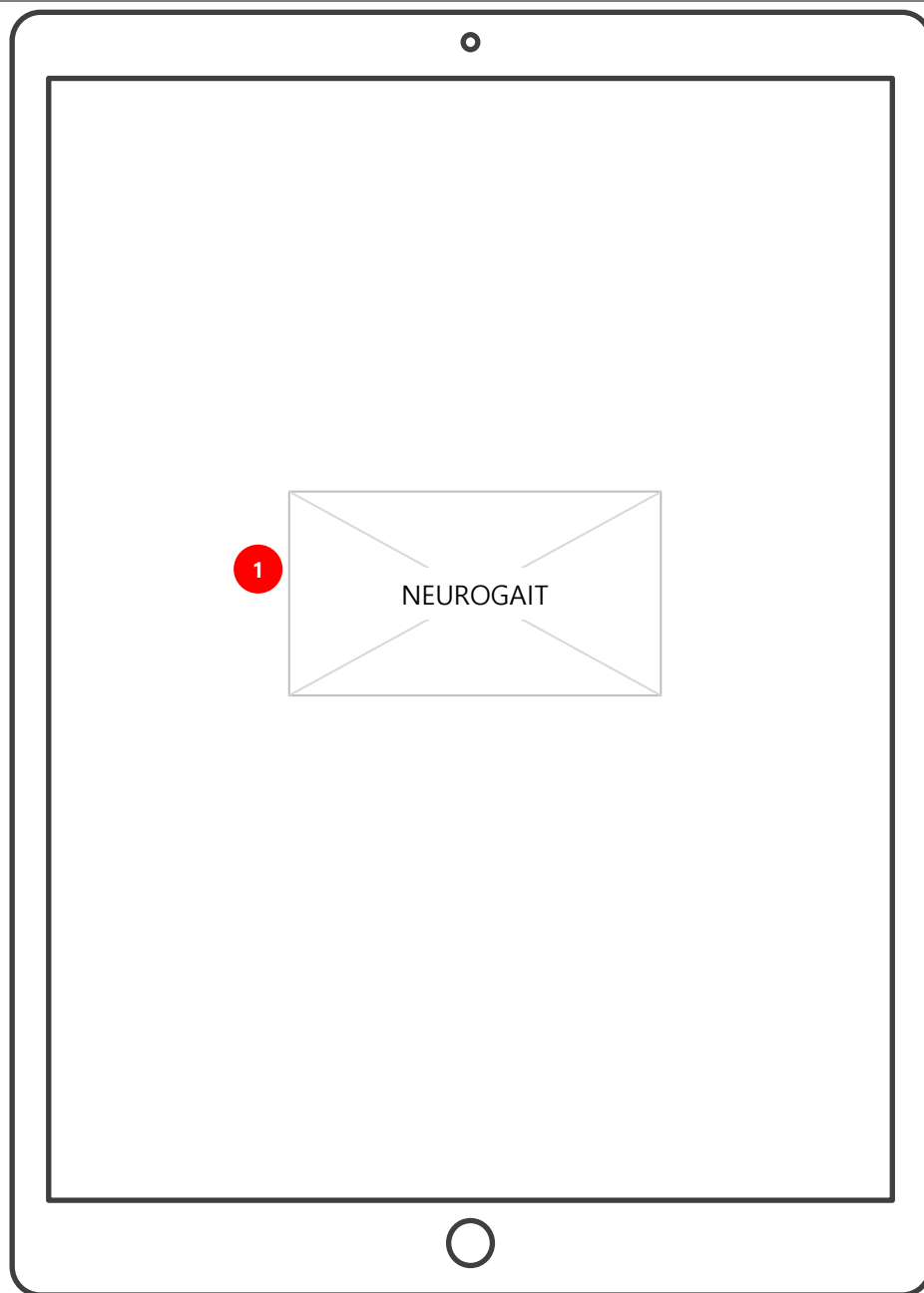

1. 흰색의 빈 화면 로드
위치 이동 없이 BI가 1초 동안 Fade-in

스플래쉬 화면에서 인터넷 연결 여부 체크
인터넷 연결 시 온라인 버전 진입
인터넷 연결 끊김 시 오프라인 버전 진입

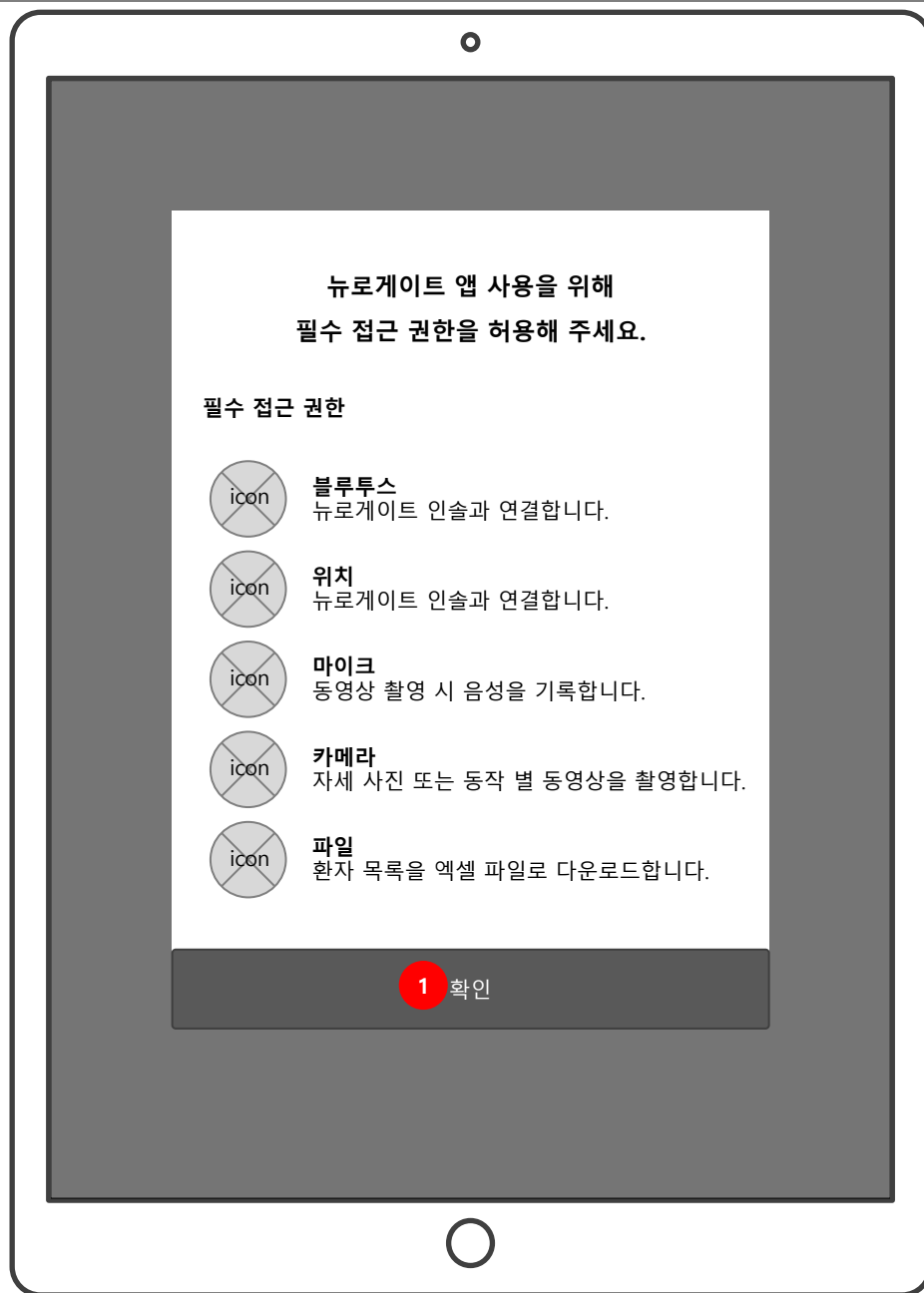

1. 터치 시 다음 화면으로 이동

로그인


Page Description	로그인	Screen ID	HCP-A-02	Description
<div><div>NEUROGAIT</div><div>뉴로게이트에 오신 것을 환영합니다.</div><div>뉴로게이트는 재활 운동인의 보행 측정을 통해 질환을 예측하고 치료에 따른 개선을 알기 위한 모니터링 시스템입니다.</div><div><div>1</div>이메일 <div>업무에서 사용하시는 이메일을 입력해 주세요.</div></div><div><div>a</div>비밀번호 <div>영문, 숫자, 특수문자를 조합하여 8자 이상 입력해 주세요. <div>icon</div> <div>b</div></div></div><div><div>c</div>계정 코드 <div>가입 이메일로 받은 계정 코드를 입력해 주세요.</div></div><div><div>2</div><div><input type="radio"/> 자동 로그인</div></div><div><div>3</div>이메일을 잊으셨나요? 비밀번호를 잊으셨나요?</div><div><div>4</div>회원가입</div><div><div>5</div>로그인</div></div>				<div>1. 이메일, 비밀번호,계정코드 입력</div> <div>a. 비밀번호</div> <div>- 비밀번호 마스킹 처리</div> <div>- 비밀번호 입력 시에 잠깐 문자 보여진 후 가려짐</div> <div>- 터치 전 입력 값에 대한 안내 문구 출력</div> <div>터치 후 안내 문구 사라지며 키패드 노출</div> <div>b. 눈 가림 아이콘</div> <div>c. 계정코드</div> <div>- 계정코드 마스킹 처리</div> <div>- 터치 시 마스킹 처리 해제되며 입력 값 노출</div> <div>2. 터치 시 자동 로그인 활성화</div> <div>자동 로그인 설정 후 로그인 시 로그인 화면 skip</div> <div>3. 각각 이메일 찾기 / 비밀번호 재설정 페이지로 이동</div> <div>4. 회원가입 페이지로 이동</div> <div>5. 이메일, 비밀번호, 계정코드 모두 입력되었을 경우 활성화(버튼 컬러값 변경)</div> <div>정보가 맞을 경우 메인 화면으로 이동</div> <div>정보가 맞지 않을 경우 알럿 메시지 출력 (알럿 메시지 확인은 아래 url 참고)</div> <div>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276</div>

이메일 찾기

Page Description	이메일 찾기	Screen ID	HCP-A-02-1	Description
				<ol style="list-style-type: none">이름, 휴대폰번호 입력터치 시 페이지 이동, 입력한 정보와 중복되는 이메일 출력 중복되는 정보가 없을 경우 알럿 메시지 출력 (알럿 메시지 확인은 아래 url 참고) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vqBshkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276 54번 메시지 “입력하신 정보에 맞는 이메일을 찾을 수 없습니다.”이전 화면으로 이동

Page Description	이메일 안내	Screen ID	HCP-A-02-1	Description
	<div data-bbox="327 97 1251 1378"><div data-bbox="364 165 1214 1285"><h3 data-bbox="692 205 886 245">이메일 찾기</h3><div data-bbox="526 376 1015 459"><div data-bbox="526 376 576 425">1</div><p data-bbox="567 411 1015 459">OOOOOO 님의 이메일은 다음과 같습니다. 개인정보 보호를 위해 일부 정보가 가려집니다.</p></div><div data-bbox="430 579 1147 708"><div data-bbox="443 619 493 668">2</div><p data-bbox="625 631 953 659">emailaddr***@neurogait.io</p></div><div data-bbox="617 925 907 971"><div data-bbox="617 925 667 973">3</div><p data-bbox="671 939 907 968"><u>비밀번호를 잊으셨나요?</u></p></div><div data-bbox="348 1182 1210 1285"><div data-bbox="348 1182 397 1230">4</div><p data-bbox="683 1228 895 1256">로그인 화면으로 이동</p></div></div></div>			<div data-bbox="1578 94 2005 282"><ol style="list-style-type: none">1. 출력되는 메일 계정의 이름 출력2. 이메일 정보 출력, 아이디 영역 뒤 3글자 마스킹 처리3. 터치 시 비밀번호 재설정 화면으로 이동4. 터치 시 로그인 화면으로 이동</div>

비밀번호 재설정

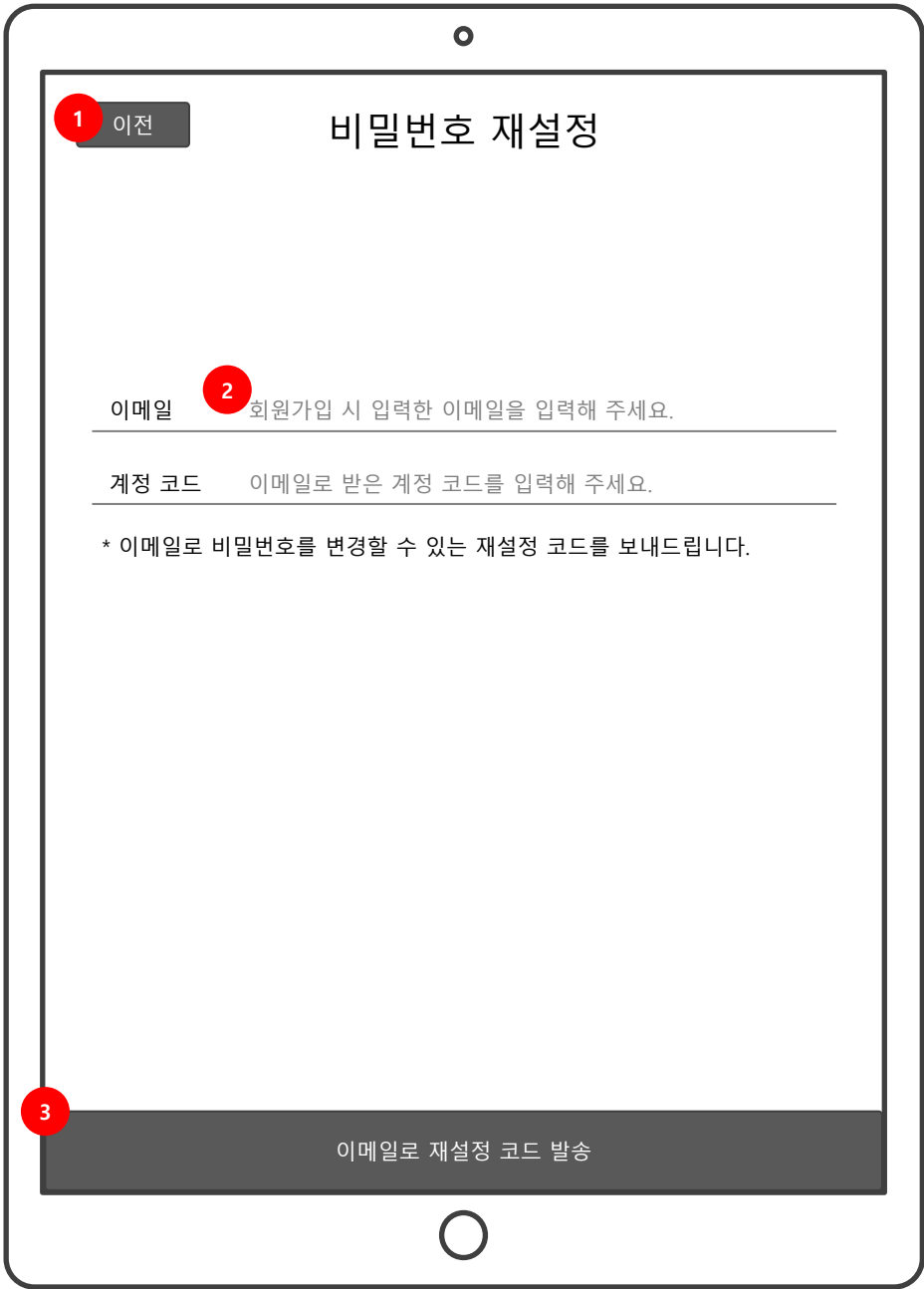Page Description	비밀번호 찾기 (재설정코드받기)	Screen ID	HCP-A-03	Description
				<ol style="list-style-type: none">1. 이전 화면(로그인 화면)으로 이동2. 터치 전 입력 값에 대한 안내 문구 출력 터치 후 안내 문구 사라지며 키패드 노출3. 이메일, 계정코드 모두 입력되었을 경우 활성화(버튼 컬러값 변경) 정보가 맞을 경우 비밀번호 재설정 화면으로 이동 정보가 맞지 않을 경우 알럿 메시지 출력 (알럿 메시지 확인은 아래 url 참고) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

Page Description	비밀번호 찾기 (비밀번호 재설정)	Screen ID	HCP-A-03-1	Description
				<ol style="list-style-type: none">1. 이전 화면(비밀번호 재설정 > 이메일 인증)으로 이동2. 터치 전 입력 값에 대한 안내 문구 출력 터치 후 안내 문구 사라지며 키패드 노출3. 이메일, 새 비밀번호, 재설정 코드 모두 입력되었을 경우 활성화(버튼 컬러값 변경) 정보가 맞을 경우 메인 화면으로 이동 정보가 맞지 않을 경우 알럿 메시지 출력 (알럿 메시지 확인은 아래 url 참고) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vqBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=2287972764. 눈 가림 아이콘

회원가입

10 이전

회원가입

1

*는 필수 항목입니다.

이름*

이름을 띄어쓰기 없이 입력해 주세요.

2

이메일*

업무에 사용하시는 이메일을 입력해 주세요.

3

비밀번호*

영문, 숫자, 특수문자를 조합하여 8자 이상 입력해 주세요.

4

휴대폰번호

'-' 없이 숫자만 입력해 주세요.

5

계정 코드*

이메일로 받은 계정 코드를 입력해 주세요.

6

직군*

○ 의료진

○ 물리치료사

○ 운동치료사

○ 직접입력

소속 병원명과 진료과를 입력해 주세요.

7

○ 가입과 동시에 이용약관, 개인정보 취급방침에 동의합니다.

9

회원가입

1. 터치 전 입력 값에 대한 안내 문구 출력
터치 후 안내 문구 사라지며 키패드 노출
띄어쓰기, 숫자, 특수문자, 이모지 입력
불가
2. 이메일 유효성 검사: '@','.'으로 확인
- 유효성이 맞지 않는 이메일 입력 시 알럿
메시지 출력
3. 비밀번호 입력 시 문자가 보이고 가려짐
(기본 비밀번호는 마스킹 처리됨)
a. 비밀번호보기 off 상태, on일 경우
비밀번호 보여짐
4. 숫자만 입력 가능, 이외 문자 입력 불가
5. 계정 코드 입력
6. 직군 선택 시 하단 입력창 활성화
입력창 내 입력 여부는 선택 사항이며
입력창에는 특수문자, 이모지 입력 불가
7. 클릭 시 해당 약관 내용 안내(팝업 /이후
페이지 참조) / 입력한 데이터는 임시
저장되어 삭제되지 않음
8. 텍스트 클릭 시 해당 약관 안내 페이지로
9. 입력필드에 값이 모두 채워진 경우 버튼이
활성화 됨
오입력된 내용이 없는 경우 가입완료 절차
진행
오입력된 항목이 있는경우 터치 시 알럿
메시지 출력
(알럿 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276
완료 후 로그인 화면으로 이동
10. 이전 화면(약관동의 페이지)로 이동

Page Description	회원가입 > 앱 서비스 이용약관	Screen ID	HCP-A-05	Description
	<div data-bbox="327 97 1251 1378"><div data-bbox="379 189 518 242"><div>1</div>이전</div><div data-bbox="627 204 955 247">앱 서비스 이용 약관</div><div data-bbox="399 304 507 321">제1장 약관의 적용</div><div data-bbox="399 327 466 344">제1조 목적</div><div data-bbox="399 349 1181 459"><p>솔티드㈜(이하 '회사')가 제공하는 서비스를 이용해 주셔서 감사합니다. 회사는 이용자(이 약관에 동의하지 않은 비회원을 말합니다) 또는 회원(이 약관에 동의하여 회사와 이용계약을 체결하고 회사가 제공하는 서비스를 이용할 수 있는 자를 말합니다)이 회사가 제공하는 솔티드 서비스(이하 '서비스')에 통합 적용될 수 있는 솔티드㈜ 통합 약관(이하 '본 약관')을 마련하였습니다. 본 약관은 이용자가 서비스를 이용하는 데 필요한 권리, 의무 및 책임사항, 이용조건 및 절차 등 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 합니다.</p><p>• '솔티드 서비스'라 함은 회사가 제공하는 "SALTED" 브랜드를 사용하는 서비스(예:SALTED Golf)를 의미합니다.</p></div><div data-bbox="399 488 582 505">제2조 약관의 명시, 효력 및 변경</div><div data-bbox="399 511 1181 714"><p>1. 본 약관의 내용은 회사가 제공하는 개별 서비스 또는 서비스 초기 화면에 게시하거나 기타의 방법으로 공지하고, 본 약관에 동의한 이용자와 회원 모두(이하 '이용자')에게 그 효력이 발생합니다.</p><p>2. 회사는 필요한 경우 관련법령을 위반하지 않는 범위 내에서 본 약관을 변경할 수 있습니다. 본 약관이 변경되는 경우 회사는 변경사항을 시행일자 7일 전부터 이용자에게 홈페이지의 공지사항에서 공지하는 것을 원칙으로 하며, 이용자에게 불리한 내용으로 변경할 경우에는 30일 이전의 사전 유예기간을 두고 홈페이지에 게시하거나, 이용자가 등록한 메일 주소로 이메일을, 휴대폰번호로 문자메시지를 보내는 등 합리적으로 가능한 방법으로 변경사항을 공지 또는 통지합니다.</p><p>3. 회사가 전 항에 따라 공지 또는 통지를 하면서 공지 또는 통지일로부터 개정약관 시행일까지 거부의를 표시하지 아니하면 승인한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 고지하였음에도 이용자의 의사표시가 없는 경우에는 변경된 약관을 승인한 것으로 봅니다. 이용자가 개정약관에 동의하지 않을 경우 이용자는 제13조 제1항에 따라 이용계약을 해지할 수 있습니다.</p></div><div data-bbox="399 719 509 736">제3조 약관 외 준칙</div><div data-bbox="399 742 1152 782"><p>본 약관에 규정되지 않은 사항에 대해서는 관련법령 또는 회사가 정한 서비스의 개별 이용약관, 운영정책 및 규칙 등(이하 '세부지침')의 규정에 따릅니다. 또한 본 약관과 세부지침의 내용이 충돌할 경우 세부지침에 따릅니다.</p></div><div data-bbox="399 788 466 805">제2장 회원</div><div data-bbox="399 811 491 828">제4조 회원가입</div><div data-bbox="399 833 1181 1012"><p>1. SALTED 계정이란 이용자가 SALTED 서비스를 사용하기 위하여 필요한 로그인 계정을 의미합니다. SALTED 계정은 이용자가 약관에 동의하고 SALTED 계정 생성을 위해 필요한 일정 정보를 입력하면, 회사가 입력된 일정 정보를 인증한 후 가입을 승낙하는 절차로 생성됩니다.</p><p>2. 소셜 로그인 아이디란 이용자가 SALTED 서비스에서 본인을 식별하기 위해 이용자가 미리 가입했던 타 서비스(네이버, SALTED, Apple, Facebook, Google) 계정으로, 이용자가 개별 서비스 약관 또는 본 약관에 동의하고 회원등록에 필요한 필수사항을 입력한 후 이용신청을 하면 회사가 승낙하는 절차로 생성됩니다.</p><p>3. SALTED 서비스를 이용하기 위하여 반드시 SALTED 계정이 필요한 것은 아니나, 어떤 솔티드 서비스는 소셜 로그인 계정이 반드시 필요합니다. 개별 서비스약관에 동의한 소셜 로그인 아이디로는 개별 서비스만 이용할 수 있습니다.</p></div><div data-bbox="399 1018 760 1035">제5조 SALTED 계정 또는 소셜 로그인 아이디 생성 거절 및 유보</div><div data-bbox="399 1041 1181 1266"><p>1. 회사는 아래와 같은 경우에는 이용자의 SALTED 계정 및/또는 소셜 로그인 아이디의 생성을 승낙하지 않을 수 있습니다. 특히, 이용자가 14세 미만인 경우에는 부모님 등 법정대리인의 동의가 있는 경우에만 SALTED 계정 아이디를 생성할 수 있습니다.</p><ul style="list-style-type: none">• 회사가 본 약관에 의해 이용자의 SALTED 계정 또는 소셜 로그인 아이디를 삭제하였던 경우• 타인의 명의를 도용한 경우• 회원가입 시 필요한 정보를 입력하지 않거나 허위의 정보를 입력한 경우• 기타 관련법령에 위배되거나 세부지침 등 회사가 정한 기준에 반하는 경우<p>2. 만약, 이용자가 위 조건에 위반하여 SALTED 계정 및/또는 소셜 로그인 아이디를 생성한 것으로 판명된 때에는 회사는 즉시 이용자의 서비스 이용을 중단하거나 SALTED 계정 및 소셜 로그인 아이디를 삭제하는 등 적절한 제한을 할 수 있습니다.</p><p>3. 회사는 아래와 같은 경우에는 이용자의 SALTED 계정 및/또는 소셜 로그인 아이디 생성을 유보할 수 있습니다.</p><ul style="list-style-type: none">• 제공 서비스 설비용량에 현실적인 여유가 없는 경우</div><div data-bbox="399 1272 781 1289"><p>서비스 제공을 위한 기술적안부분에 문제가 있다고 판단되는 경우</p></div></div>			<div data-bbox="1583 97 1912 121">1. 이전 화면(회원가입)으로 이동</div> <div data-bbox="1583 1239 2034 1360"><div>최종 약관 내용 확인 필요</div></div>

Page Description

회원가입 > 개인정보 처리방침

Screen ID

HCP-A-05-1

Description

1

이전

개인정보 처리방침

제1장 약관의 적용

제1조 목적

솔티드㈜(이하 '회사')가 제공하는 서비스를 이용해 주셔서 감사합니다. 회사는 이용자(이 약관에 동의하지 않은 비회원을 말합니다) 또는 회원(이 약관에 동의하여 회사와 이용계약을 체결하고 회사가 제공하는 서비스를 이용할 수 있는 자를 말합니다)이 회사가 제공하는 솔티드 서비스(이하 '서비스')에 통합 적용될 수 있는 솔티드㈜ 통합 약관(이하 '본 약관')을 마련하였습니다. 본 약관은 이용자가 서비스를 이용하는 데 필요한 권리, 의무 및 책임사항, 이용조건 및 절차 등 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

• '솔티드 서비스'라 함은 회사가 제공하는 "SALTED" 브랜드를 사용하는 서비스(예:SALTED Golf)를 의미합니다.

제2조 약관의 명시, 효력 및 변경

1. 본 약관의 내용은 회사가 제공하는 개별 서비스 또는 서비스 초기 화면에 게시하거나 기타의 방법으로 공지하고, 본 약관에 동의한 이용자와 회원 모두(이하 '이용자')에게 그 효력이 발생합니다.

2. 회사는 필요한 경우 관련법령을 위반하지 않는 범위 내에서 본 약관을 변경할 수 있습니다. 본 약관이 변경되는 경우 회사는 변경사항을 시행일자 7일 전부터 이용자에게 홈페이지의 공지사항에서 공지하는 것을 원칙으로 하며, 이용자에게 불리한 내용으로 변경할 경우에는 30일 이전의 사전 유예기간을 두고 홈페이지에 게시하거나, 이용자가 등록한 메일 주소로 이메일을, 휴대폰번호로 문자메시지를 보내는 등 합리적으로 가능한 방법으로 변경사항을 공지 또는 통지합니다.

3. 회사가 전 항에 따라 공지 또는 통지를 하면서 공지 또는 통지일로부터 개정약관 시행일까지 거부의를 표시하지 아니하면 승인한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 고지하였음에도 이용자의 의사표시가 없는 경우에는 변경된 약관을 승인한 것으로 봅니다. 이용자가 개정약관에 동의하지 않을 경우 이용자는 제13조 제1항에 따라 이용계약을 해지할 수 있습니다.

제3조 약관 외 준칙

본 약관에 규정되지 않은 사항에 대해서는 관련법령 또는 회사가 정한 서비스의 개별 이용약관, 운영정책 및 규칙 등(이하 '세부지침')의 규정에 따릅니다. 또한 본 약관과 세부지침의 내용이 충돌할 경우 세부지침에 따릅니다.

제2장 회원

제4조 회원가입

1. SALTED 계정이란 이용자가 SALTED 서비스를 사용하기 위하여 필요한 로그인 계정을 의미합니다. SALTED 계정은 이용자가 약관에 동의하고 SALTED 계정 생성을 위해 필요한 일정 정보를 입력하면, 회사가 입력된 일정 정보를 인증한 후 가입을 승낙하는 절차로 생성됩니다.

2. 소셜 로그인 아이디란 이용자가 SALTED 서비스에서 본인을 식별하기 위해 이용자가 미리 가입했던 타 서비스(네이버, SALTED, Apple, Facebook, Google) 계정으로, 이용자가 개별 서비스 약관 또는 본 약관에 동의하고 회원등록에 필요한 필수사항을 입력한 후 이용신청을 하면 회사가 승낙하는 절차로 생성됩니다.

3. SALTED 서비스를 이용하기 위하여 반드시 SALTED 계정이 필요한 것은 아니나, 어떤 솔티드 서비스는 소셜 로그인 계정이 반드시 필요합니다. 개별 서비스약관에 동의한 소셜 로그인 아이디로는 개별 서비스만 이용할 수 있습니다.

제5조 SALTED 계정 또는 소셜 로그인 아이디 생성 거절 및 유보

1. 회사는 아래와 같은 경우에는 이용자의 SALTED 계정 및/또는 소셜 로그인 아이디의 생성을 승낙하지 않을 수 있습니다. 특히, 이용자가 14세 미만인 경우에는 부모님 등 법정대리인의 동의가 있는 경우에만 SALTED 계정 아이디를 생성할 수 있습니다.

- 회사가 본 약관에 의해 이용자의 SALTED 계정 또는 소셜 로그인 아이디를 삭제하였던 경우
- 타인의 명의를 도용한 경우
- 회원가입 시 필요한 정보를 입력하지 않거나 허위의 정보를 입력한 경우
- 기타 관련법령에 위배되거나 세부지침 등 회사가 정한 기준에 반하는 경우

2. 만약, 이용자가 위 조건에 위반하여 SALTED 계정 및/또는 소셜 로그인 아이디를 생성한 것으로 판명된 때에는 회사는 즉시 이용자의 서비스 이용을 중단하거나 SALTED 계정 및 소셜 로그인 아이디를 삭제하는 등 적절한 제한을 할 수 있습니다.

3. 회사는 아래와 같은 경우에는 이용자의 SALTED 계정 및/또는 소셜 로그인 아이디 생성을 유보할 수 있습니다.

- 제공 서비스 설비용량에 현실적인 여유가 없는 경우


서비스 제공을 위한 기술적·인사적 부분에 문제가 있다고 판단되는 경우

1. 이전 화면(회원가입)으로 이동

최종 약관 내용 확인 필요


101

12월 ver

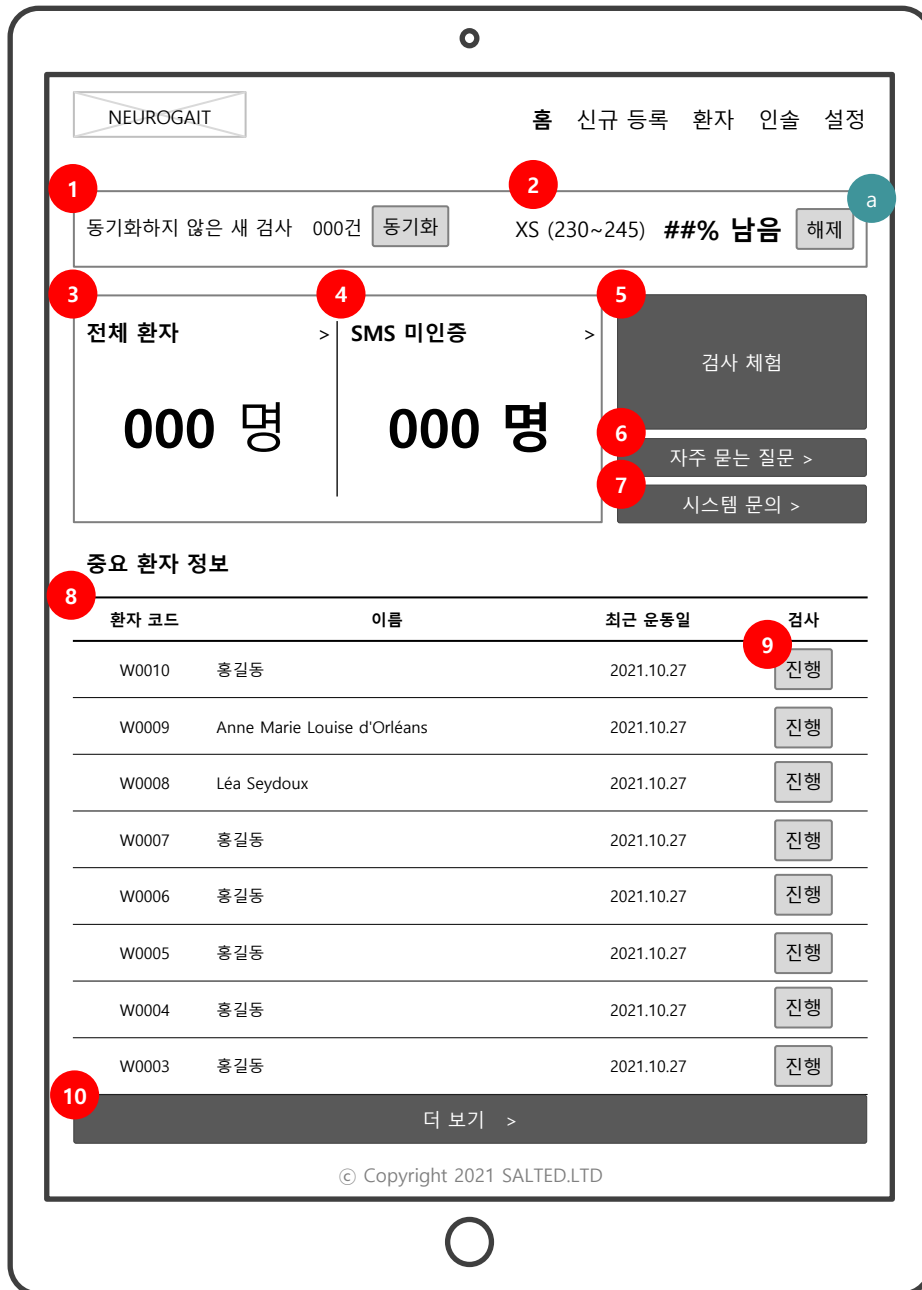

- 동기화하지 않은 새 검사:
 - SMS 인증 환자 중 금일 기준 동기화하지 않은 신규 검사 건수 출력
 - 동기화 버튼 터치 시 전 항목 클라우드 동기화, 동기화에 실패한 항목 건수만 re-load
- 사용자가 등록 한 인솔 이름이 보여지며 양발 중 배터리가 낮은 쪽을 보여줌
 - 해제 버튼 터치 시 인솔 연결 해제 및 미연결 상태 안내 문구 출력(연결 해제 시 화면은 이후 페이지 참조)
- 전체 환자 수:
 - 본 계정에 등록된 환자수 출력
 - 영역 터치 시 환자 메뉴로 이동
- SMS 미인증 수:
 - 영역 터치 시 환자 메뉴로 이동
 - 미인증 환자가 없는 경우 "0명"으로 출력
- 검사 체험 버튼:
 - 터치 시 인솔 선택창 팝업
- 자주 묻는 질문 버튼: 자주 묻는 질문 메뉴 화면으로 이동(FAQ 관리자 관리)
- 시스템 문의 버튼: 터치 시 메일 보내기 연결 (mail to : cs@salted.ltd)
- 중요 환자 목록:
 - 환자 코드, 이름, 최근 운동일 출력
 - 최대 10명 출력
- 진행 추가 버튼:
 - 터치 시 검사 작성 / 사진 촬영 / 동영상 촬영 액션 시트 팝업
- 더 보기 버튼:
 - 터치 시 환자 목록으로 이동, 중요 환자 필터 적용

12월 ver

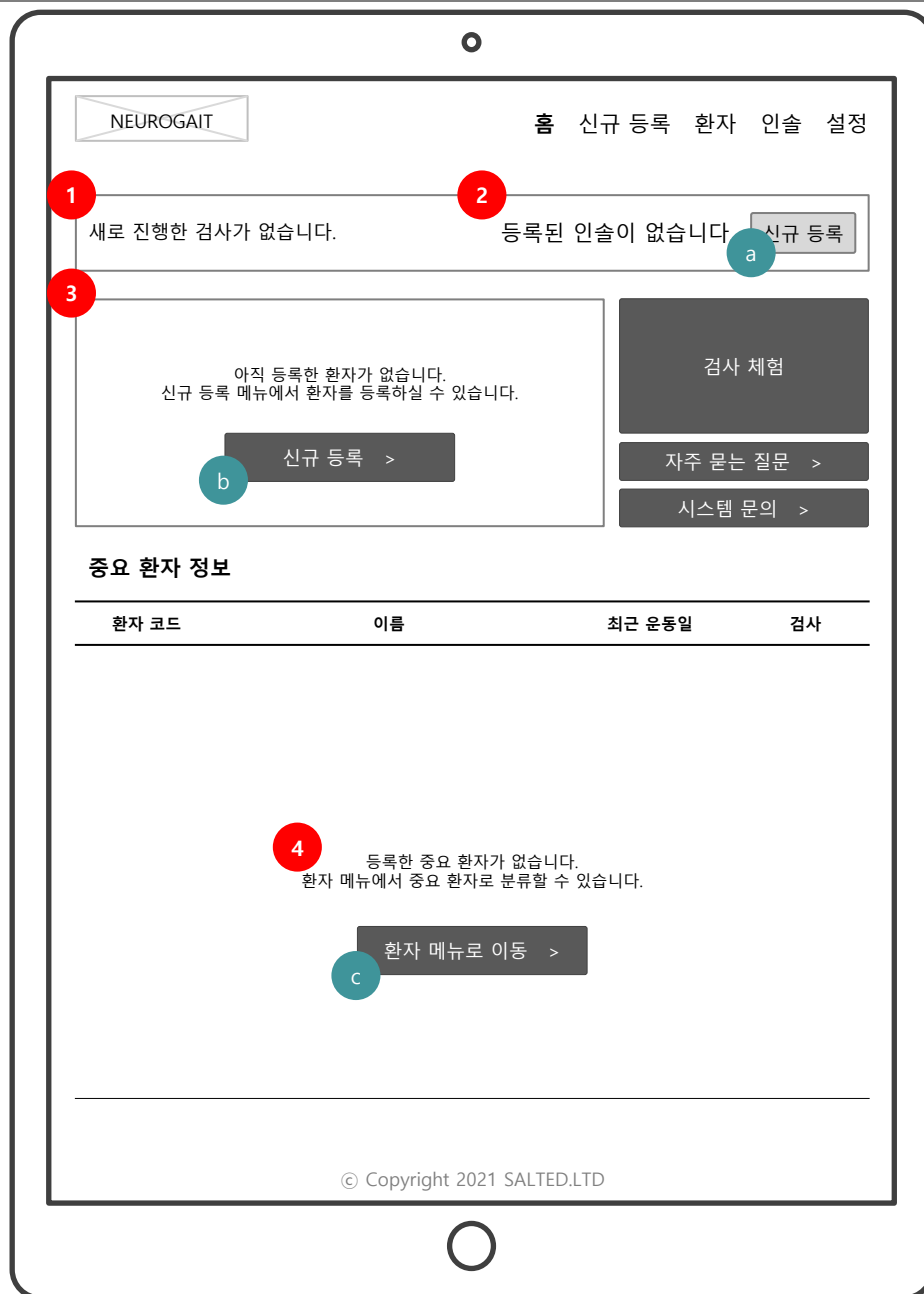


1. 새로 진행한 검사가 없을 경우 출력
2. 등록된 인솔의 내역이 없을 경우 등록 버튼 출력
그 외 기능 동일
 - a. 등록 터치 시 인솔 등록 진행
3. 등록 환자가 0명일 경우 출력
 - b. 터치 시 신규 등록 메뉴로 이동
4. 설정한 주요 환자가 없을 경우 안내 문구출력
 - b. 터치 시 환자 메뉴로 이동

12월 ver




1. 연결된 인솔이 없는 경우 인솔 미연결 안내 문구 출력
 - a. 버튼 터치 시 인솔 선택창 팝업

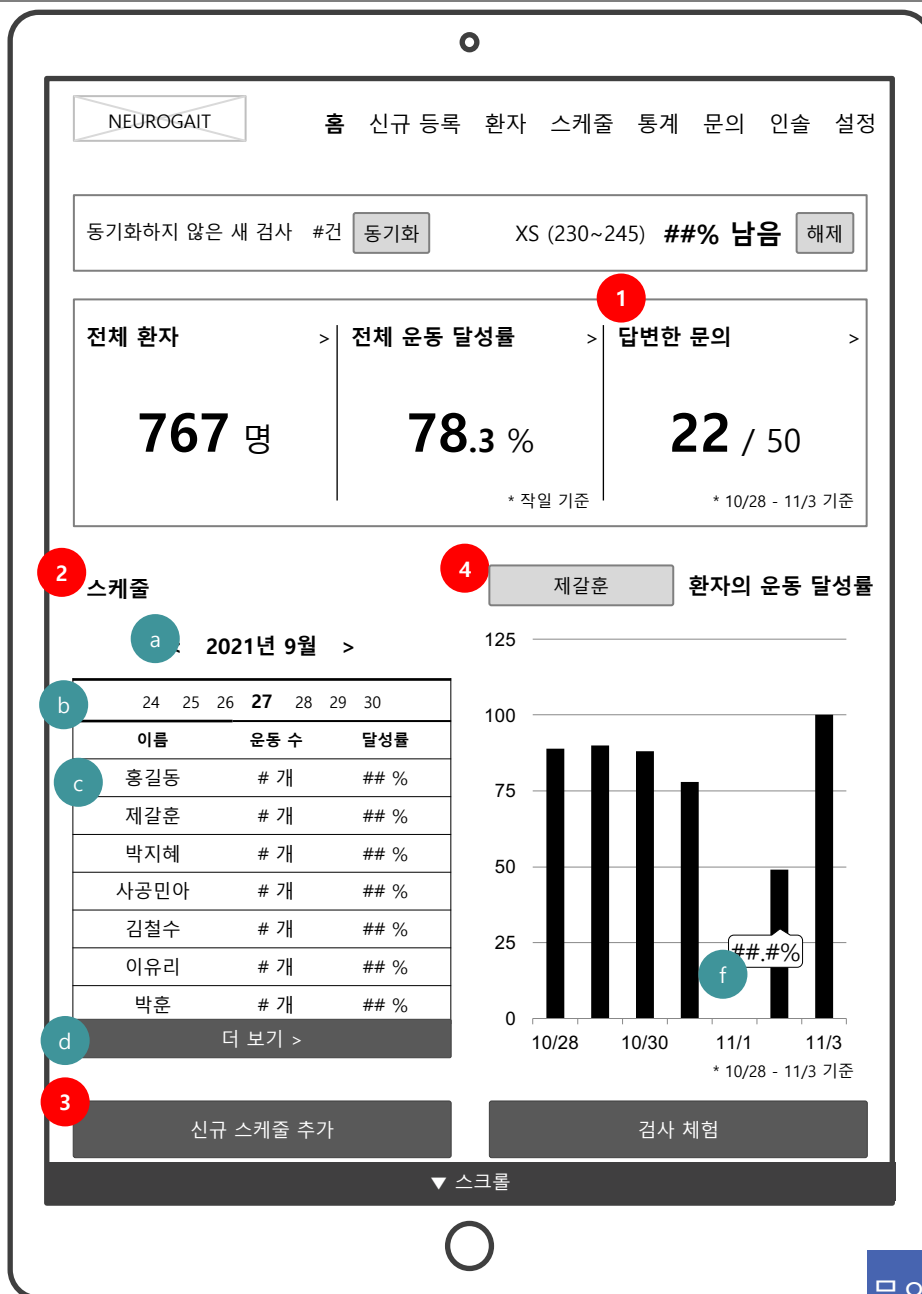

- 문의 건수 영역:
 - 오늘 기준 1주일 전부터 오늘까지의 문의 개수 및 답변한 문의 개수 출력
 - 해당 기간에 답변한 문의가 없는 경우 분자 데이터 0으로 출력
 - 영역 터치 시 문의 메뉴로 이동
- 스케줄:
 - 좌우 arrow 터치 시 월 단위 캘린더 이동
 - 좌우로 스와이프 하여 주 단위 날짜 이동, 숫자 터치 시 해당 날짜 스케줄의 환자 목록 출력(Ⓢ) 영역
 - Ⓢ에서 선택한 날짜에 예정된 스케줄(환자 및 운동 개수) 및 환자의 총 운동 달성률 항목이 최대 10명 정보 출력
 - 터치 시 스케줄 메뉴로 이동, Ⓢ에서 선택한 날짜의 데이터 로드
- 신규 스케줄 추가 버튼:
 - 터치 시 스케줄 메뉴로 이동, 신규 스케줄 추가 진행
- 개별 환자의 주간 달성률 추이:
 - 오늘 기준 7일 전부터 오늘까지의 데이터 출력
 - 가장 최근에 촬영 검사를 진행한 환자 자동 선택
 - 터치 시 환자 선택 창 팝업(이후 화면 참고)
 - f. 막대 영역 터치 시 수치 데이터 출력, 다시 화면 터치 시 인디케이터 숨김 인디케이터가 출력된 상태에서 좌우로 스와이프 시 이동한 날짜로 인디케이터 이동, 해당 날짜의 데이터 출력

이후 기능 12월 적용 내용과 동일

문의 기간 기준 확인 필요

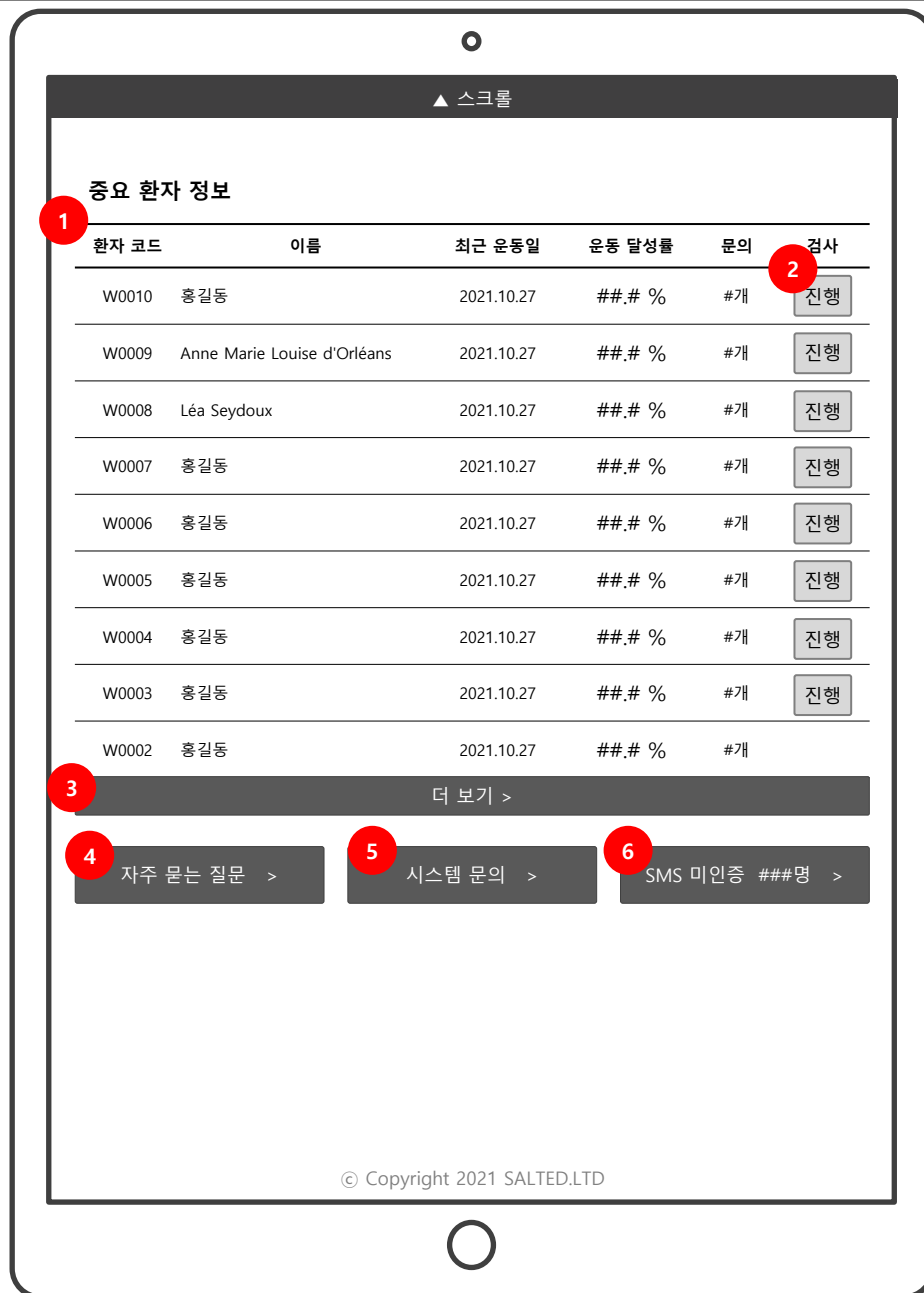

- 중요 환자 목록:
 - 환자 코드, 이름, 최근 운동일, 운동 총 달성률, 문의 개수 출력
 - 영역 내 최대 10명 출력
- 검사 추가 버튼:
 - 터치 시 검사 작성 / 사진 촬영 / 동영상 촬영 액션 시트 팝업
- 터치 시 환자 메뉴로 이동, 중요 환자 필터 적용
- 버튼 터치 시 자주 묻는 질문 메뉴 화면으로 이동(콘텐츠 관리자 관리)
- 시스템 문의 버튼: 터치 시 메일 보내기 연결 (mail to: cs@salted.ltd)
- SMS 미인증 수:
 - 영역 터치 시 환자 메뉴로 이동

연구 환자인 경우

운동 달성률 조회 환자 선택

2


질환 전체 ▼

검색

환자 코드	질환	이름
A1234	당뇨	홍길동
A1235	고혈압	사공민아
A1236	뇌손상	김민준
A1237	고혈압	김민지
A1238	뇌손상	이무개
A1239	고혈압	제갈훈
A1240	뇌손상	유병규
A1241	고혈압	박지혜
A1242	뇌손상	김상환
A1243	고혈압	정수화


1. 터치 시 창 닫음
2. 질환 필터:
 - 질환명 기준으로 검색 간으
 - 클릭 시 질환 목록 출력

Page Description	홈 > 운동 달성률 조회 환자 선택(일반 환자인 경우)	Screen ID	HCP-A-07-2	Description																						
<div><div>일반 환자인 경우</div><div><div>운동 달성률 조회 환자 선택</div><div><div>1</div><div>검색</div></div><table><tr><th>환자 코드</th><th>이름</th></tr><tr><td>A1234</td><td>홍길동</td></tr><tr><td>A1235</td><td>사공민아</td></tr><tr><td>A1236</td><td>김민준</td></tr><tr><td>A1237</td><td>김민지</td></tr><tr><td>A1238</td><td>이무개</td></tr><tr><td>A1239</td><td>제갈훈</td></tr><tr><td>A1240</td><td>유병규</td></tr><tr><td>A1241</td><td>박지혜</td></tr><tr><td>A1242</td><td>김상환</td></tr><tr><td>A1243</td><td>정수화</td></tr></table></div></div>				환자 코드	이름	A1234	홍길동	A1235	사공민아	A1236	김민준	A1237	김민지	A1238	이무개	A1239	제갈훈	A1240	유병규	A1241	박지혜	A1242	김상환	A1243	정수화	1. 키워드 기준으로 검색
환자 코드	이름																									
A1234	홍길동																									
A1235	사공민아																									
A1236	김민준																									
A1237	김민지																									
A1238	이무개																									
A1239	제갈훈																									
A1240	유병규																									
A1241	박지혜																									
A1242	김상환																									
A1243	정수화																									

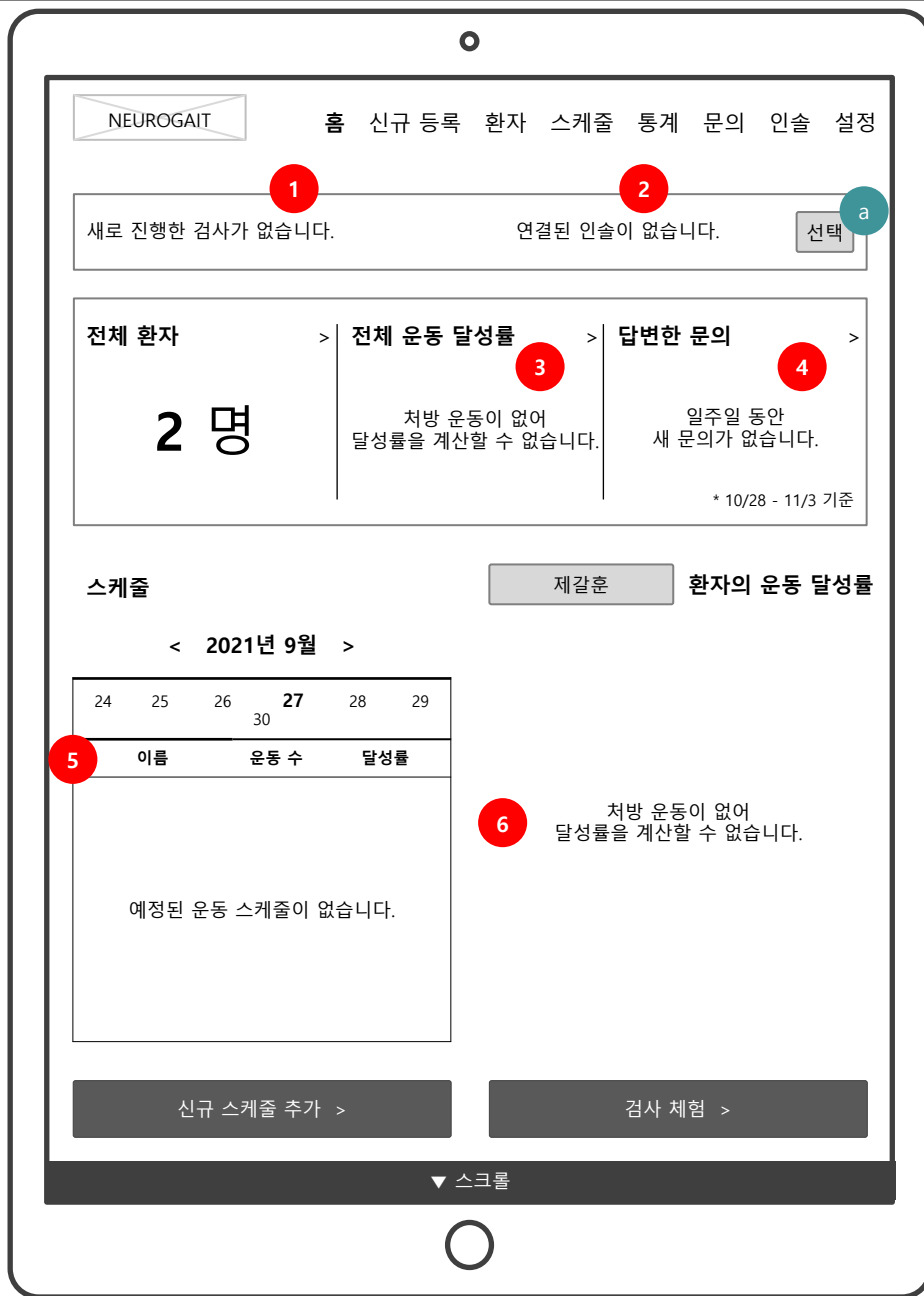


1. 새로 진행한 검사가 없을 경우 출력
2. 등록 인솔이 있는 상태에서 연결된 인솔이 없는 경우 인솔 미연결 안내 문구 출력
 - a. 터치 시 인솔 선택창 팝업
3. 환자에게 처방한 운동이 없는 경우 출력
 - b. 터치 시 신규 등록 메뉴로 이동
4. 기준 기간 동안 새 문의가 없는 경우 출력
5. 캘린더 당일에 예정된 스케줄이 없는 경우 출력
6. 선택한 환자에게 처방된 운동이 없는 경우 출력


Page Description	홈 (등록 환자가 있는 경우 빈 데이터 화면) – 2월 업데이트	Screen ID	HCP-A-07-3	Description																		
<div><div><div><div><div><div>▲ 스크롤</div><div><div>1</div><div>중요 환자 정보</div><table><tr><th>환자 코드</th><th>이름</th><th>최근 운동일</th><th>운동 달성률</th><th>문의</th><th>검사</th></tr><tr><td colspan="6">등록한 중요 환자가 없습니다. 환자 메뉴에서 중요 환자로 분류할 수 있습니다.</td></tr><tr><td colspan="6"><div>환자 메뉴로 이동 ></div><div>2</div></td></tr></table></div><div><div>자주 묻는 질문 ></div><div>시스템 문의 ></div><div>SMS 미인증 #명 ></div></div><div>© Copyright 2021 SALTED.LTD</div></div></div></div></div></div>				환자 코드	이름	최근 운동일	운동 달성률	문의	검사	등록한 중요 환자가 없습니다. 환자 메뉴에서 중요 환자로 분류할 수 있습니다.						<div>환자 메뉴로 이동 ></div> <div>2</div>						<div><div>1. 등록 환자가 없는 중요 환자 목록</div><div>2. 환자 메뉴로 화면 이동</div></div> <div>그 외 기능 동일</div>
환자 코드	이름	최근 운동일	운동 달성률	문의	검사																	
등록한 중요 환자가 없습니다. 환자 메뉴에서 중요 환자로 분류할 수 있습니다.																						
<div>환자 메뉴로 이동 ></div> <div>2</div>																						

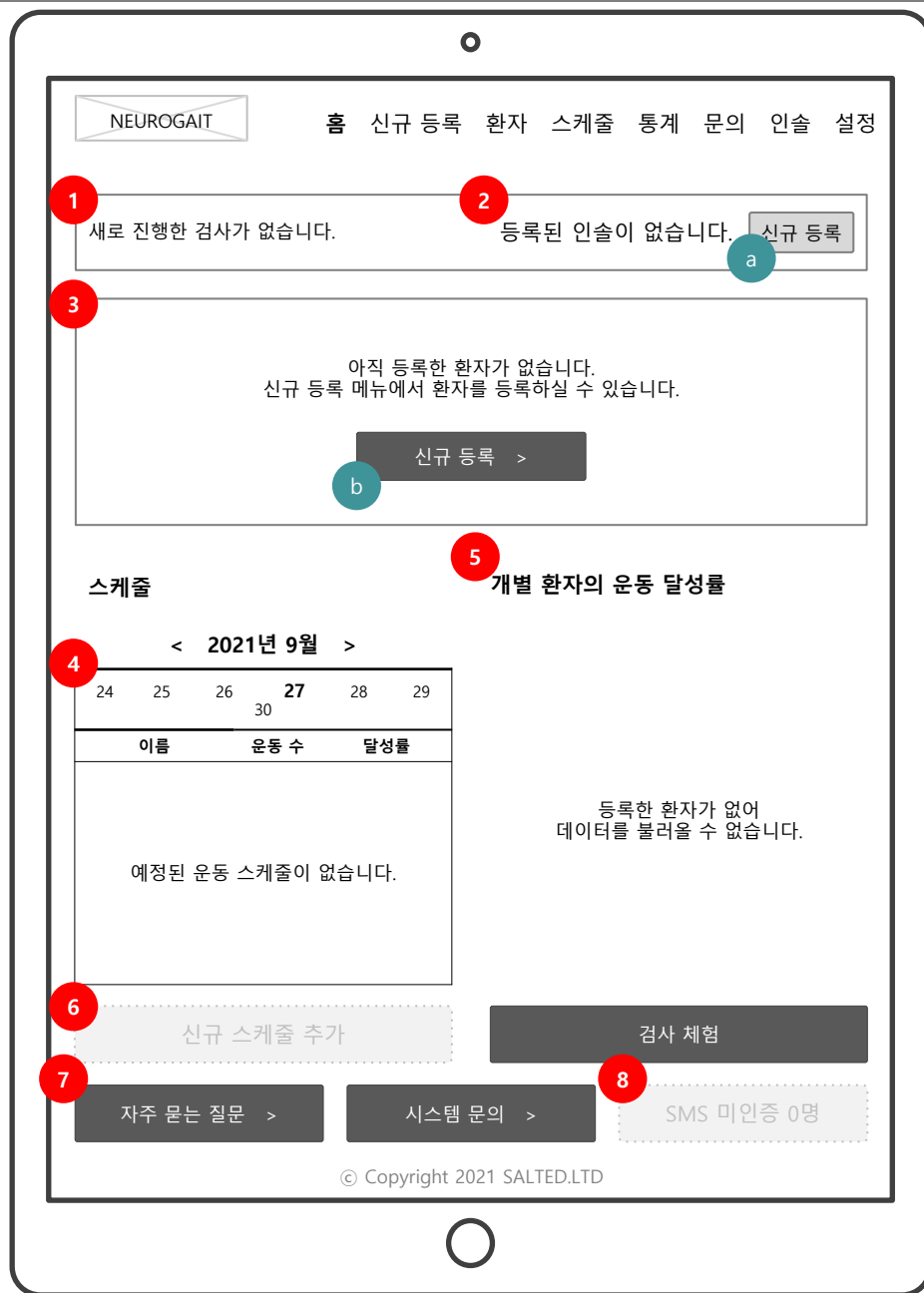


1. 새로 진행한 검사가 없을 경우 출력
2. 등록된 인솔의 내역이 없을 경우 등록 버튼 출력
 - a. 등록 터치 시 인솔 등록 진행
3. 기등록 환자가 0명일 경우 출력
 - b. 터치 시 신규 등록 메뉴로 이동
4. 캘린더 당일에 예정된 스케줄이 없는 경우 출력
5. 기등록 환자가 없는 경우 셀렉트가 개별 환자 레이블로 대치
6. 환자가 없는 경우 스케줄 추가 버튼 비활성화
7. 기등록 환자가 없는 경우 중요 환자 목록 영역 숨김
8. 기등록 환자가 없는 경우 0명으로 레이블 출력, 버튼 비활성화

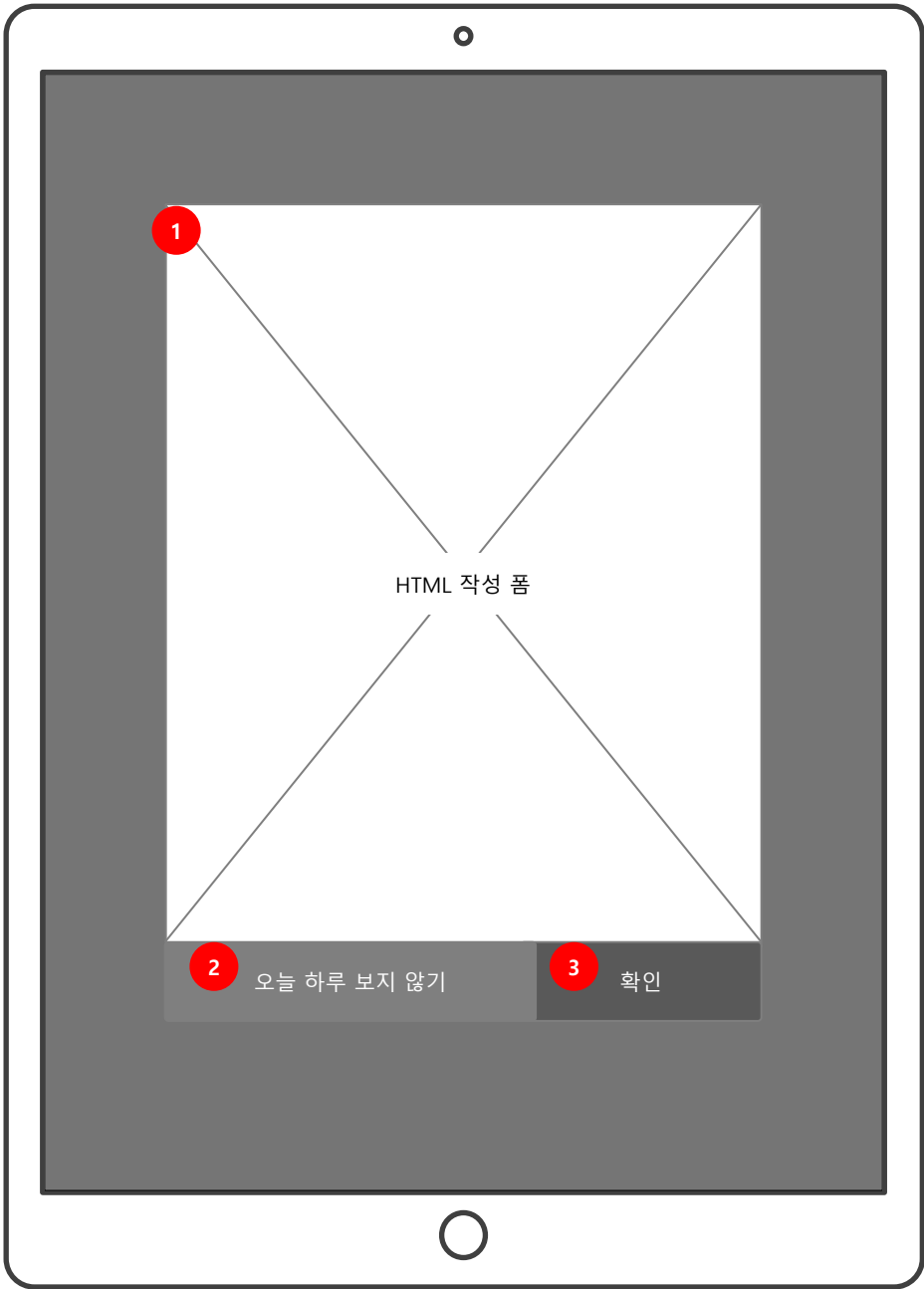Page Description	팝업창(HTML 폼 페이지)	Screen ID	HCP-A-07-5	Description
				<ol style="list-style-type: none">1. 관리자 > 팝업관리에서 HTML 에디터 작성2. 오늘 기준 00시까지 보여지지 않음3. 팝업창 닫힘

1. 관리자에서 등록된 텍스트 출력

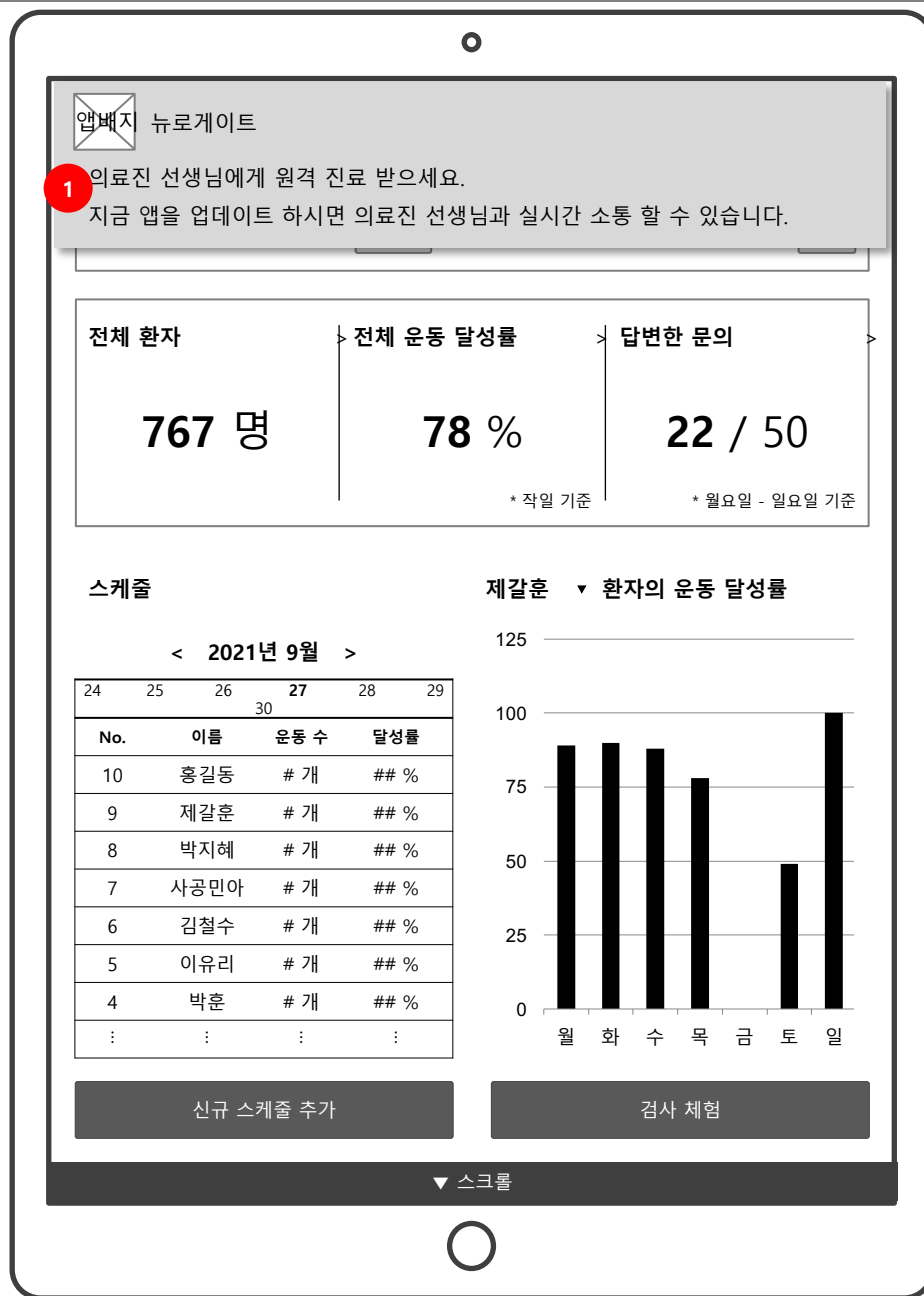

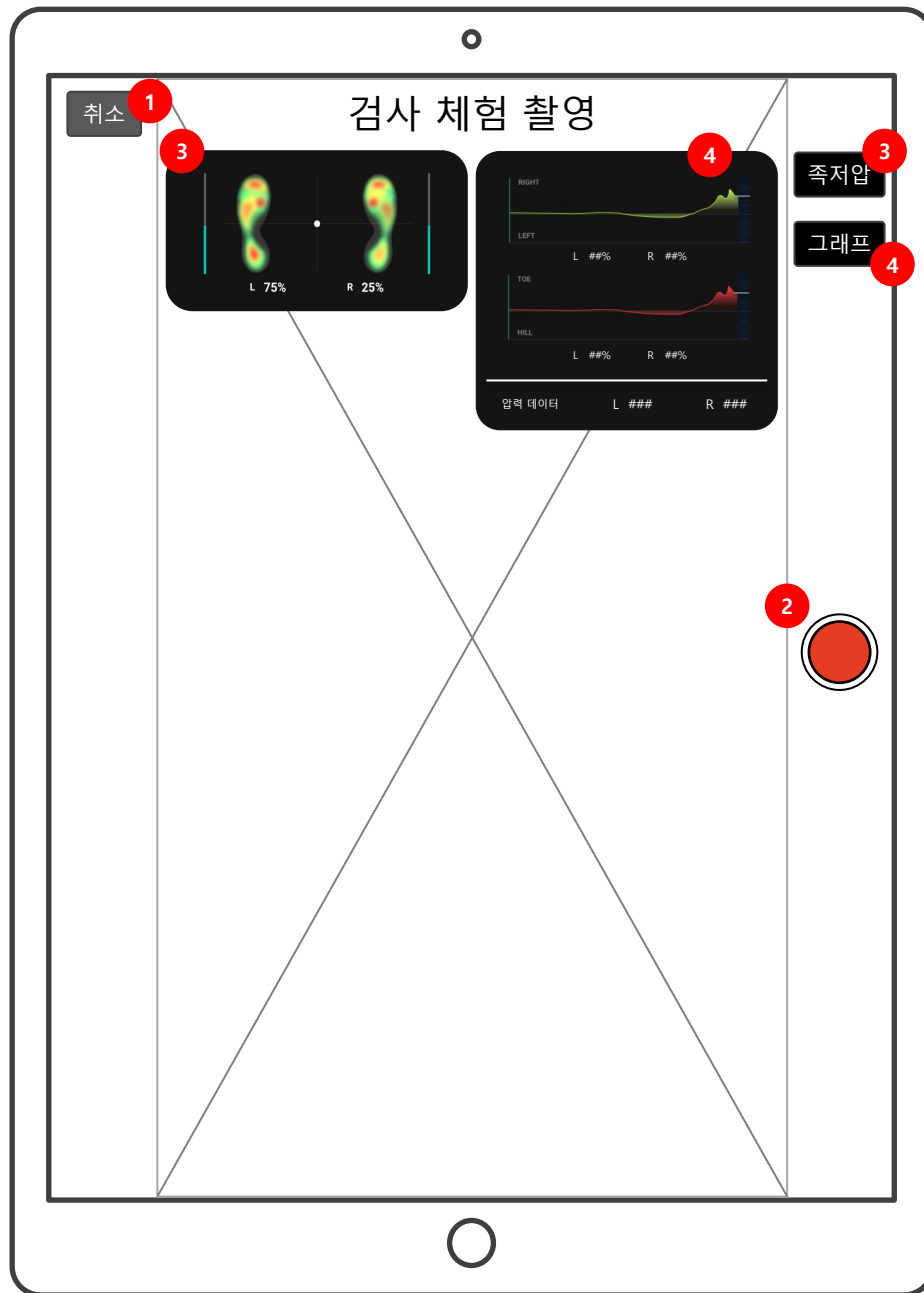

1. 취소 버튼:
- 동영상 촬영 중 숨김
2. 셔터 버튼:
- 동영상 촬영 완료 시 instant player 팝업
3. 족저압 버튼 터치 시 족저압 레이어 화면
달함
다시 터치 시 노출
4. 그래프 버튼 터치 시 그래프 레이어 화면
달함
다시 터치 시 노출

신규등록

NEUROGAIT 홈 신규 등록 환자 스케줄 통계 문의 인솔 설정

1 신규 등록

2 환자 정보 환자 데이터 연결 **7**

일반 정보 *은 필수 항목입니다.

a 환자 코드* b 국적* 선택

c 성* d 이름*

e 생년월일* 1993.03.16 성별* 남자 여자

거주지 시/도 휴대폰 번호 010 1234 5678

이메일주소 patient@neurogait.ai

3 신체 정보

키* ? cm 체중* kg

다리 길이(선택) 왼쪽 cm 오른쪽 cm

발 사이즈* mm

* 문진 작성 완료 시 환자 분에게 서비스 이용 약관 및 수집한 개인 정보의 처리 방침에 대한 동의를 받는 SMS가 발송됩니다. 서비스 이용을 위해 환자분에게 동의를 받아 주시기 바랍니다.

4 환자 추가 등록

5 문진작성 ▼

6 작성 완료

데이터 코드 입력

취소 | 연결

환자 연결

'환자이름'과 연결 되었습니다.

f 확인

1. - 상단 GNB에서 "신규 등록" 터치 시 환자 정보 입력 섹션 및 공양식 문진 로드

- 작성 중 앱 종료 시 입력 내용 삭제

2. 환자 정보 입력 영역:

a. 환자 데이터 연결 시 출력

b. 국적: admin에서 등록한 국적 목록 출력

c. 성: 문자만 입력 가능, 최대 20 bytes

d. 이름: 문자만 입력 가능, 최대 30 bytes

e. 생년월일: 숫자만 입력 가능, 비정상적 날짜 폼 입력 불가

3. 신체 정보 입력 영역:

- 단위: 설정 메뉴에서 설정한 단위 출력

- 가이드 아이콘 터치 시 치수 측정 가이드 팝업

- 신체 정보는 숫자만 입력 가능

4. 환자 추가 등록 버튼:

- 터치 시 입력 항목에 유효성 검사 진행하며 이상이 없을 경우 환자 정보가 등록된 후 페이지 새로 고침(신규 환자 등록 가능)

5. 문진 항목 펼침 : 다음 페이지 참조

6. 작성 완료 버튼:

- 터치 시 문진 작성 완료 confirm 출력

7. 클릭 시 매칭 코드 입력 팝업 출력

f. 확인 클릭 시 데이터 자동 세팅

(confirm 메시지 확인은 아래 url 참고)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

UI 수정: 일반정보 셀 추가 오류 수정, ⑥ 버튼 추가

▲ 스크롤

문진작성 ▲ 7

4

1. 환자분에게 해당하는 가족력을 모두 선택해 주세요.

없음 고혈압 당뇨 뇌혈관 질환 심장질환 골다공증 암 기타

직접 입력

2. 병원 진단이나 수술을 받은 이력이 있다면 모두 선택해 주세요.

없음 근골격계 질환 심혈관계 질환 호흡계 질환 신경계 질환 내분기계 질환 디스크 질환 기타

직접 입력

5

3. 지난 일주일 동안 격렬한 신체활동(무거운 물건 나르기, 달리기, 빠른 속도로 자전거 타기 등)을 며칠 하셨나요?

안 함 h

* '안 함'을 선택한 경우 5번 항목으로

6

4. 3번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?

i _ 시간 _ 분

확실하지 않음

▼ 스크롤

4. 문진 항목 1, 2:
 - "없음" 항목 이외 다중 선택 가능
 - "기타" 선택 시 영역 아래 입력 필드 생성
5. 문진 항목 3:
 - 텍스트 필드 또는 안 함 둘 중 하나만 선택 가능
 - 텍스트 필드 focused 시 영역 테두리 강조
 - h. 0 또는 8 이상의 숫자 입력 불가
6. 문진 항목 4:
 - 텍스트 필드 또는 확실하지 않음 둘 중 하나만 선택 가능
 - ⑤에서 안 함을 선택한 경우 입력 필드 비활성화
 - i. 시간: 0-24까지 입력 가능
 - 분: 60 이상 입력 불가
7. 문진 영역 접힘

▲ 스크롤

7. 지난 일주일 동안 중간 정도의 신체활동(가벼운 물건 나르기, 복식 테니스, 중간 속도로 자전거 타기 등)을 며칠 하셨나요?

안 함 * '안 함'을 선택한 경우 7번 항목으로
* 걷기는 포함하지 않습니다.

8. 5번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?

시간 분

9. 지난 일주일 동안 10분 이상 걷은 날은 날은 며칠인가요?

안 함 * '안 함'을 선택한 경우 9번 항목으로

10. 7번의 신체 활동은 하루에 얼마나 하셨나요?

시간 분

11. 지난 일주일 동안 하루에 평균 몇 시간을 잤아 계시나요?

시간 분

작성 완료

7. 문진 항목 5:
- 텍스트 필드 또는 안 함 둘 중 하나만 선택 가능
- 텍스트 필드 focused 시 영역 테두리 강조
j. 0 또는 8 이상의 숫자 입력 불가
8. 문진 항목 6:
- 텍스트 필드 또는 확실하지 않음 둘 중 하나만 선택 가능
- ⑦에서 "안 함"을 선택한 경우 입력 필드 비활성화
k. 시간: 0-24까지 입력 가능
분: 60 이상 입력 불가
9. 문진 항목 7:
- 텍스트 필드 또는 안 함 둘 중 하나만 선택 가능
- 텍스트 필드 focused 시 영역 테두리 강조
l. 0 또는 8 이상의 숫자 입력 불가
10. 문진 항목 8:
- 텍스트 필드 또는 확실하지 않음 둘 중 하나만 선택 가능
- ⑨에서 "안 함"을 선택한 경우 입력 필드 비활성화
m. 시간: 0-24까지 입력 가능
분: 60 이상 입력 불가
11. 문진 항목 9:
- 텍스트 필드 또는 확실하지 않음 둘 중 하나만 선택 가능
- ⑩에서 "안 함"을 선택한 경우 입력 필드 비활성화
n. 시간: 0-24까지 입력 가능
분: 60 이상 입력 불가

(confirm 또는 얼럿 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

12. 터치 시 팝업창 닫음


발 사이즈, 다리 길이 측정 방법

12




1. 발 사이즈

- 발을 종이 위에 올리고 가장 긴 발가락 끝과 발뒤꿈치를 기준으로 잽니다.

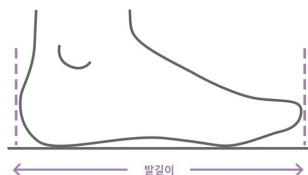

2. 다리 길이

- 안쪽 복사뼈에서 골반 뼈가 만져지는 위치까지의 직선 길이를 잽니다.

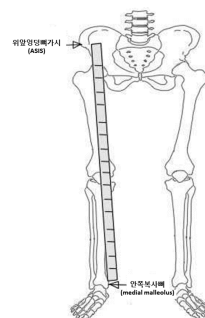




1. 입력한 환자의 이름 출력
2. 터치 시 닫힘
3. 연결된 인술 정보:
 - 인술 목록의 최상단 정렬
 - 연결중 상태 및 연결 버튼이 배터리 잔량 표시로 대치
4. 미연결 인술 목록:
 - 정렬 기준: BLE 연결 시각 기준 최신순
 - “연결” 버튼 터치 시 버튼 레이블이 spinner로 바뀌며 연결 중 상태 출력
 - 3-- 연결 성공 시 연결 성공 toast 팝업
 - 3-- 연결 실패 시 연결 실패 toast 팝업
5. 다음 단계 선택 버튼:
 - 사진 촬영부터 진행: 터치 시 정자세 촬영 카메라 팝업
 - 밸런스 운동부터 진행: 터치 시 밸런스 운동 카메라 팝업
 - 보행 운동만 진행: 터치 시 보행 운동 카메라 팝업

(confirm 또는 알럿 메시지 확인은 아래 url 참고)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276


Page Description	신규 등록 > 인솔 보정	Screen ID	HCP-A-10	Description
				<ol style="list-style-type: none"> 터치 시 보정 skip confirm 출력 터치 시 보정 진행 3초 간 인솔의 데이터가 일정할 시 게이지 채움(④) - 인솔 보정 게이지: 3초간 게이지가 채워짐 - 게이징 중 인솔 데이터 변화 시 보정 실패 처리, 보정 실패 알럿 메시지 출력 - 보정 성공 시 버튼 활성화 - 터치 시 “사진 촬영” 단계 진행 <p>(confirm 또는 알럿 메시지 확인은 아래 url 참고)</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBshKtmAzC8RB3TbH30/edit#gid=228797276</p>

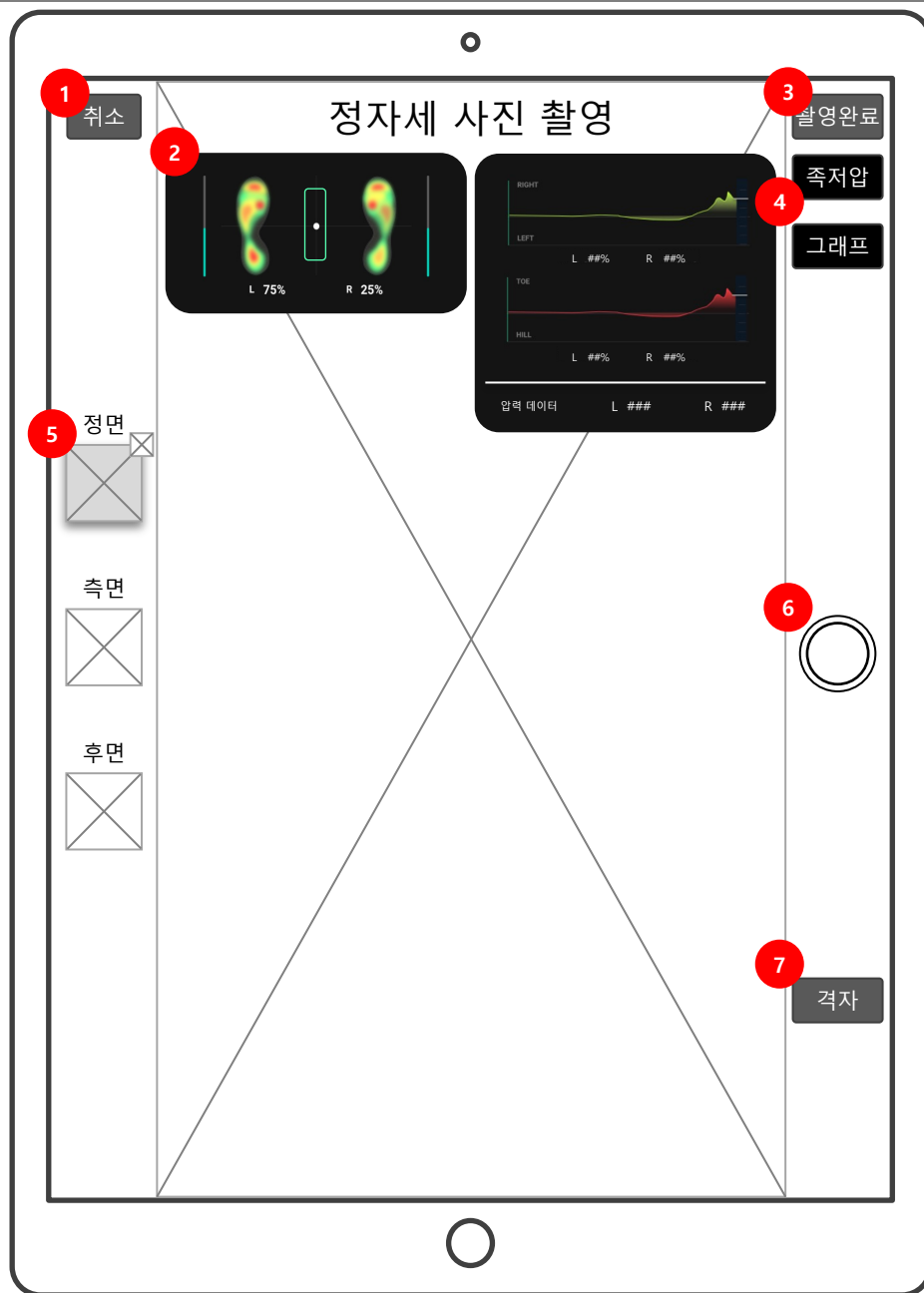

- 터치 시 검사 진행 취소 confirm 출력
- 인솔 데이터 레이어: 압력분포(족저압), 그래프 등 2개 플로팅
- 터치 시 사진 촬영 완료 및 다음단계로 진행 confirm 출력
- 그래프, 족저압 레이어 스위치:
 - On 기본값
 - 정면, 측면, 후면 선택 시 스위치 상태 유지
- 촬영 자세 선택 영역:
 - 각 썸네일 터치 시 해당 사진 촬영 가능
 - 촬영하는 자세 타이틀 및 썸네일 프레임 강조
 - 촬영 후 썸네일과 영역 우측 상단에 삭제 버튼 생성, 다음 자세 썸네일 자동 선택
 - 삭제 버튼 터치 시 삭제 confirm 출력
- 셔터:
 - 터치 시 촬영 프레임 영역 스크린샷
 - 인솔 데이터 레이어 on 시 프레임 영역에 뜬 레이어도 같이 기록
 - 이미 찍은 사진 썸네일 선택 또는 모든 자세 촬영 시 버튼 숨김
- 격자 버튼:
 - off 기본값, on시 촬영 프레임 영역에 50 픽셀 간격의 격자무늬 생성
 - 정면, 측면, 후면 선택 시 스위치 상태 유지

(confirm 메시지 확인은 아래 url 참고)


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

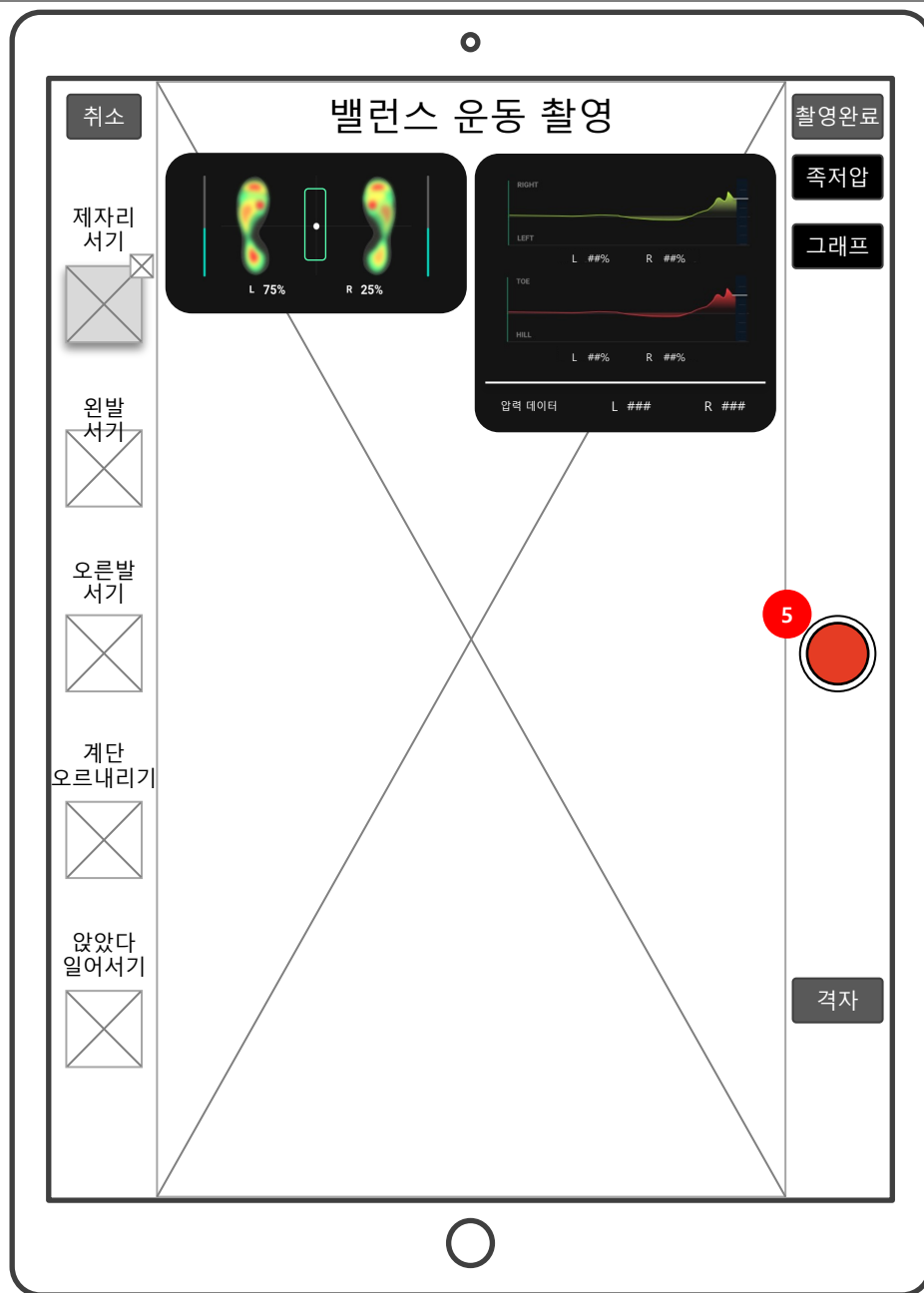

5. 서터:
 - 이미 찍은 동영상 썸네일 선택 또는 모든 자세 촬영 시 버튼 숨김
6. -
7. 촬영 추가로 썸네일이 여역을 벗어날 경우 상단 영역을 제외하고 스크롤하여 확인 가능


(confirm 및 알럿 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

그 외 기능 동일

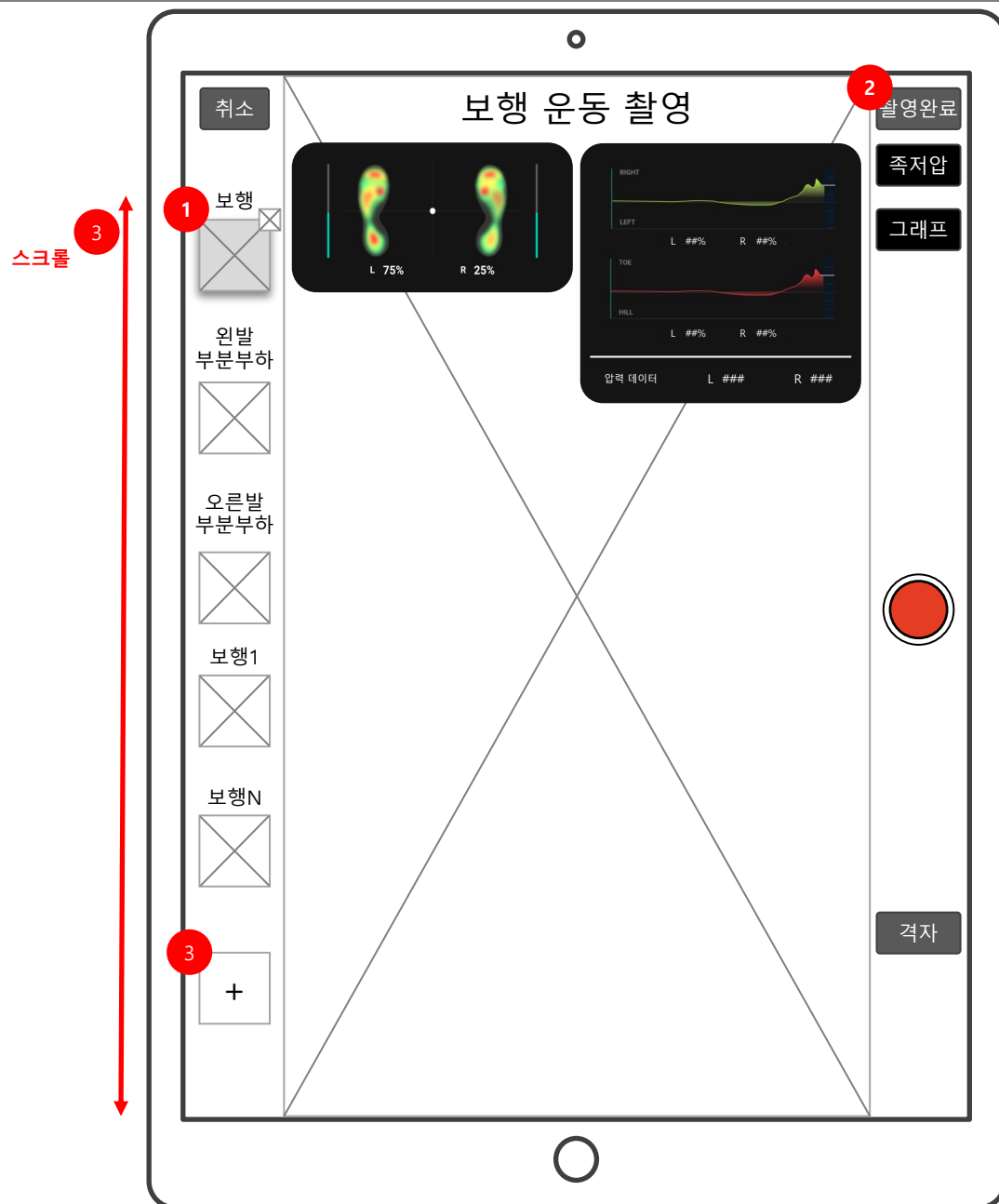


1. 촬영 운동 선택 영역:
 - 각 썸네일 터치 시 해당 사진 촬영 가능
 - 촬영하는 자세 타이틀 및 썸네일 프레임 강조
 - 촬영 후 촬영 동영상의 첫 프레임을 썸네일로 삽입, 썸네일의 영역 우측 상단에 삭제 버튼 생성, 터치 시 삭제 confirm 출력
2. 촬영 완료 버튼:
 - 동영상 촬영 중 숨김
 - 터치 시 보행 운동 촬영 종료 confirm 출력
3. 동영상 추가 촬영 버튼:
 - 터치 시 썸네일 위 "보행 N" 레이블 표시 최대 30초 길이의 동영상 추가 촬영 가능
 - 하단으로 추가한 동영상 리스트 쌓이며 스크롤 발생

5
스크롤

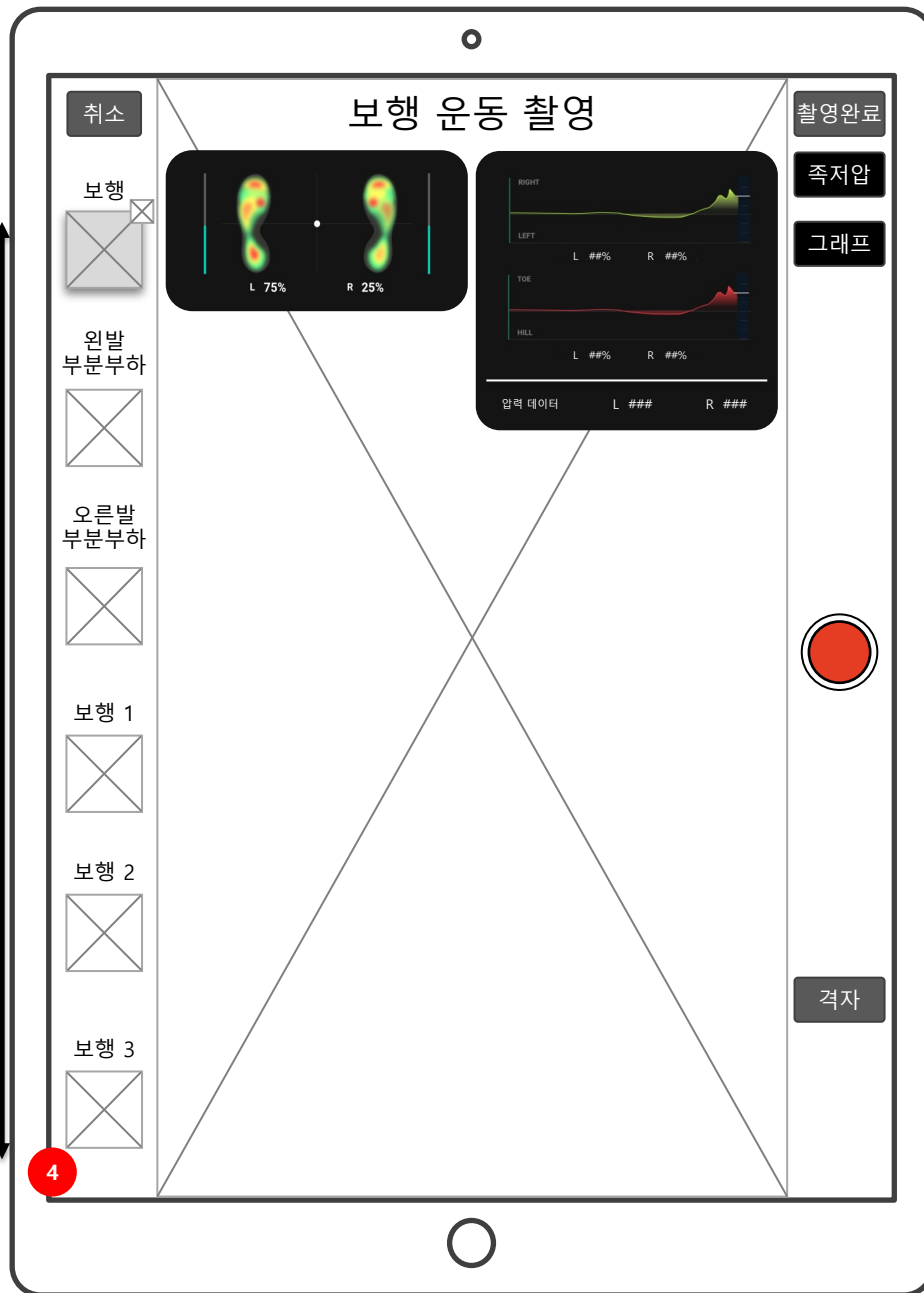

4. 동영상 3개 추가 시 동영상 추가 촬영 버튼 숨김
5. 촬영 추가로 썸네일이 여역을 벗어날 경우 상단 영역을 제외하고 스크롤하여 확인 가능

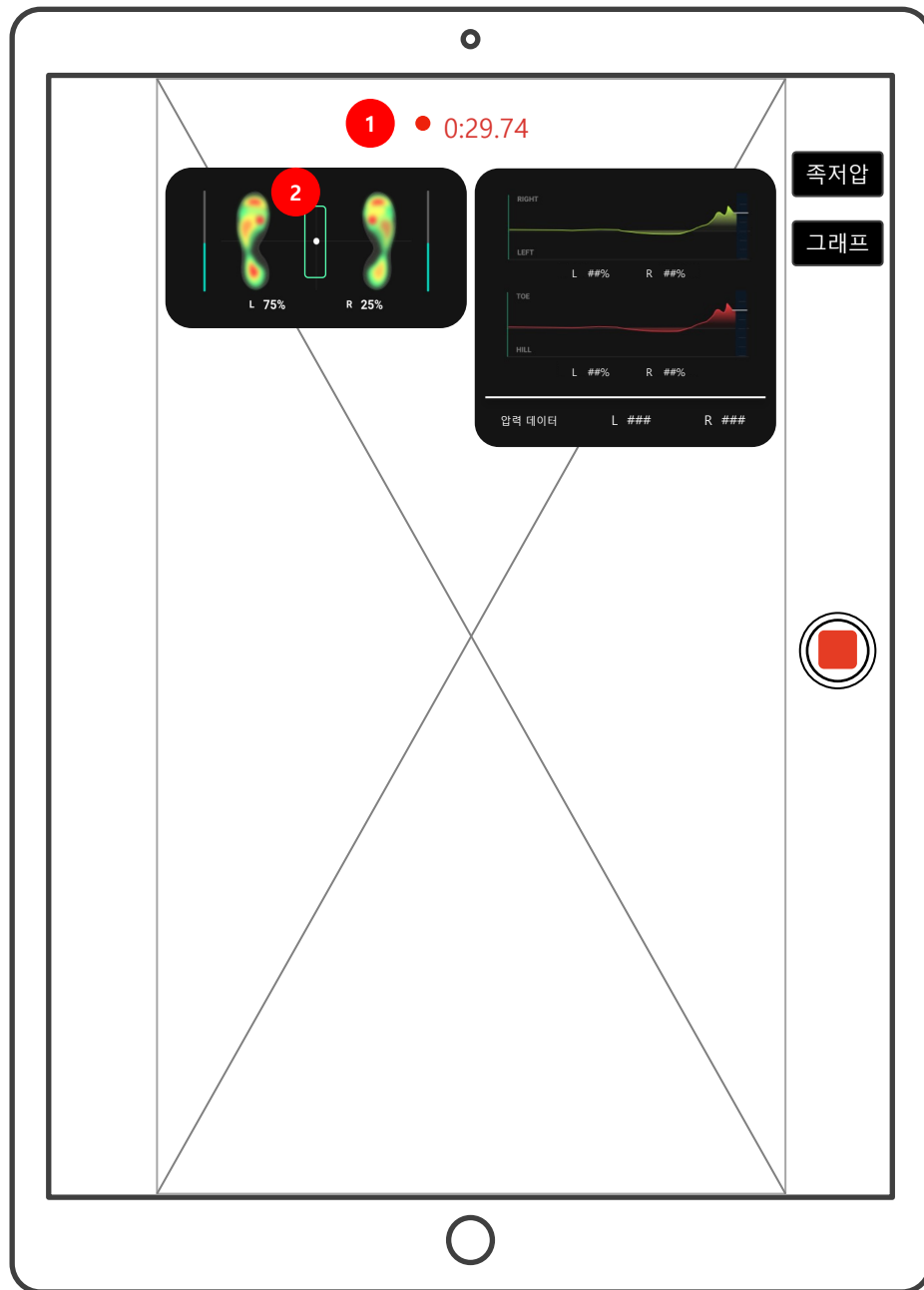

- 촬영 제한 시간 타이머:
 - admin에서 등록한 운동 별 제한시간 타이머 재생
 - 타이머 만료 시 동영상 촬영 중단, 촬영한 동영상 자동 저장
- 밸런스 운동 촬영의 경우 족저압 레이어에 밸런스 가이드 표시

고정

1 이전 2021.10.29 검사 2 전체 보기

3 일반 정보 a ▲

환자 코드	W1234	국적	미국
성	Richard	이름	Leon
생년월일	1993.03.16	성별	남자
거주지	서울	연락처	18001234***
이메일	patient@neurogait.ai		

신체 정보

키	181.1	cm	체중	80.3	kg	
다리 길이(선택)	왼쪽	103.4	cm	오른쪽	104.4	cm
발 사이즈	265.0	mm				

4

문진 정자세 밸런스 운동 보행 운동

1. 환자분에게 해당하는 가족력을 모두 선택해 주세요.

없음	고혈압	당뇨	뇌혈관 질환	심장질환	골다공증	암	기타
----	-----	----	--------	------	------	---	----

2. 병원 진단이나 수술을 받은 이력이 있다면 모두 선택해 주세요.

없음	근골격계 질환	심혈관계 질환	호흡계 질환	신경계 질환	내분기계 질환	디스크 질환	기타
----	---------	---------	--------	--------	---------	--------	----

▼ 스크롤

a

접힘 영역

1. 이전 버튼: 신규 등록 메뉴 로드
2. 전체 보기 버튼: 터치 시 환자 목록으로 이동
3. 환자 일반정보 영역:
- 신규 등록 시 입력한 내용 출력
a. 터치 시 이름 셀까지의 행 제외 나머지 셀 숨김처리(다음 슬라이드 참고)
4. 환자 검사정보 영역:
- 문진 선택 기본값

이전

2021.10.29 검사

히스토리

일반 정보

환자 코드	W1234	국적	미국
성	Richard	이름	Leon

문진

정자세

밸런스 운동

보행 운동

5

정면

b

c

- 정상(이상 없음)
- 전신 왼쪽 편중
- 전신 오른쪽 편중
- 어깨 불균형
- 골반 불균형
- O다리
- X다리

6

측면

○ 정상(이상 없음)

○ 거북목

○ 일자목


● 골반 전방 변위

○ 골반 후방 변위


7

○ 정상(이상 없음)

5. 정자세 촬영 결과 콘텐츠 영역:
 - 정면, 측면, 후면 별 촬영한 사진 및 의료진이 체크한 밸런스 이상 징후 출력
 - b. 사진 출력, 촬영한 사진이 없는 경우 기본 이미지 출력
 - c. 의료진이 체크한 항목이 없는 경우 빈 체크박스 및 목록 출력
6. 상세화면으로 이동
7. 해당 날짜 기준의 검사 및 운동기록 화면으로 이동

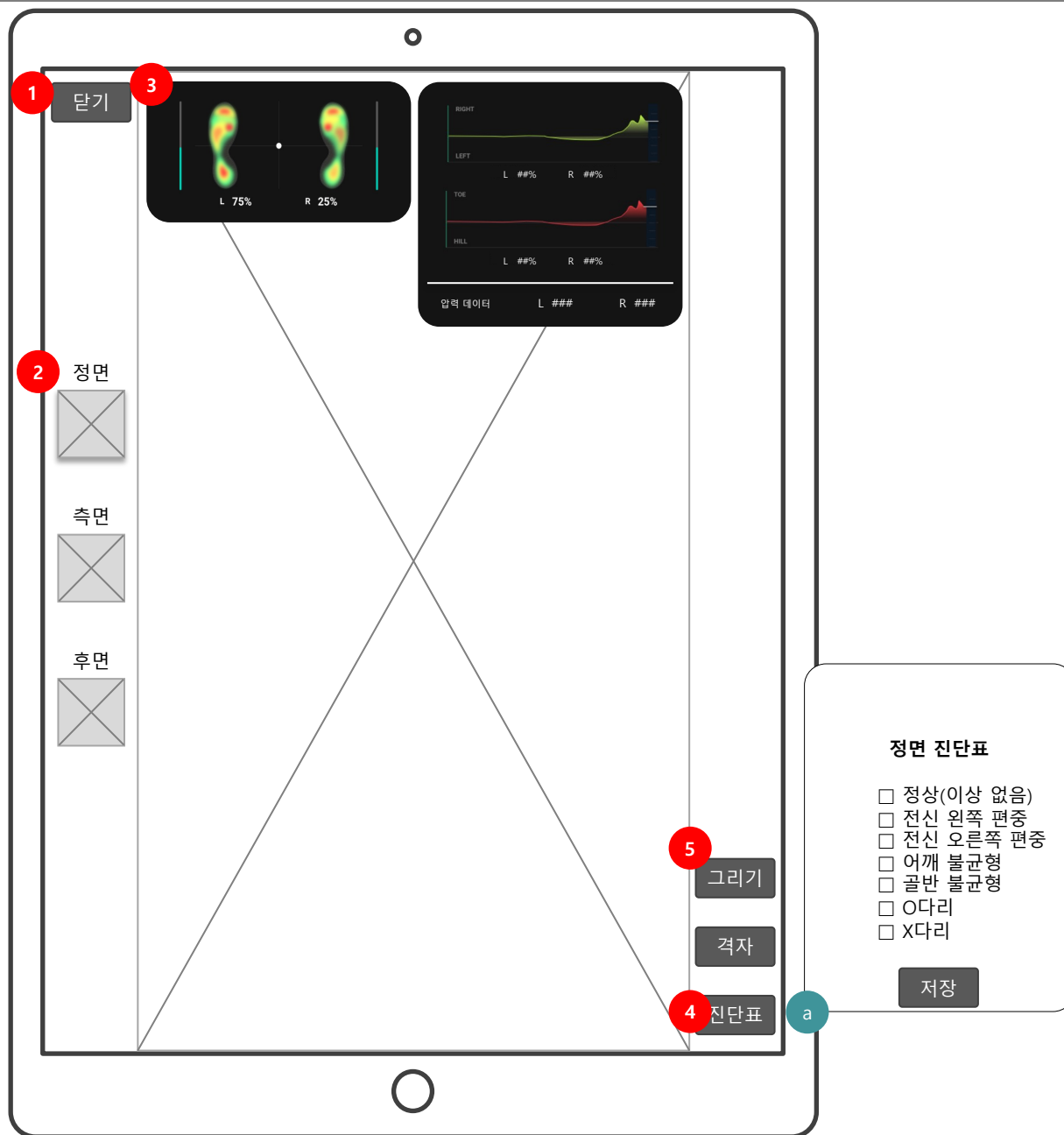

1. 터치 시 뷰어 닫음
2. 촬영 영역:
 - 촬영하지 않은 항목 숨김
 - 선택 시 레이블 및 썸네일 프레임 강조
3. 이미지와 결합된 인솔 데이터, off 불가
4. 진단표 레이어 스위치:
 - Off 기본값, 터치 시 진단표 레이어 팝업
 - a. 체크박스 체크 가능, 저장 버튼 터치 시 체크 항목 저장
5. 그리기 툴 출력(이후 페이지 참조)

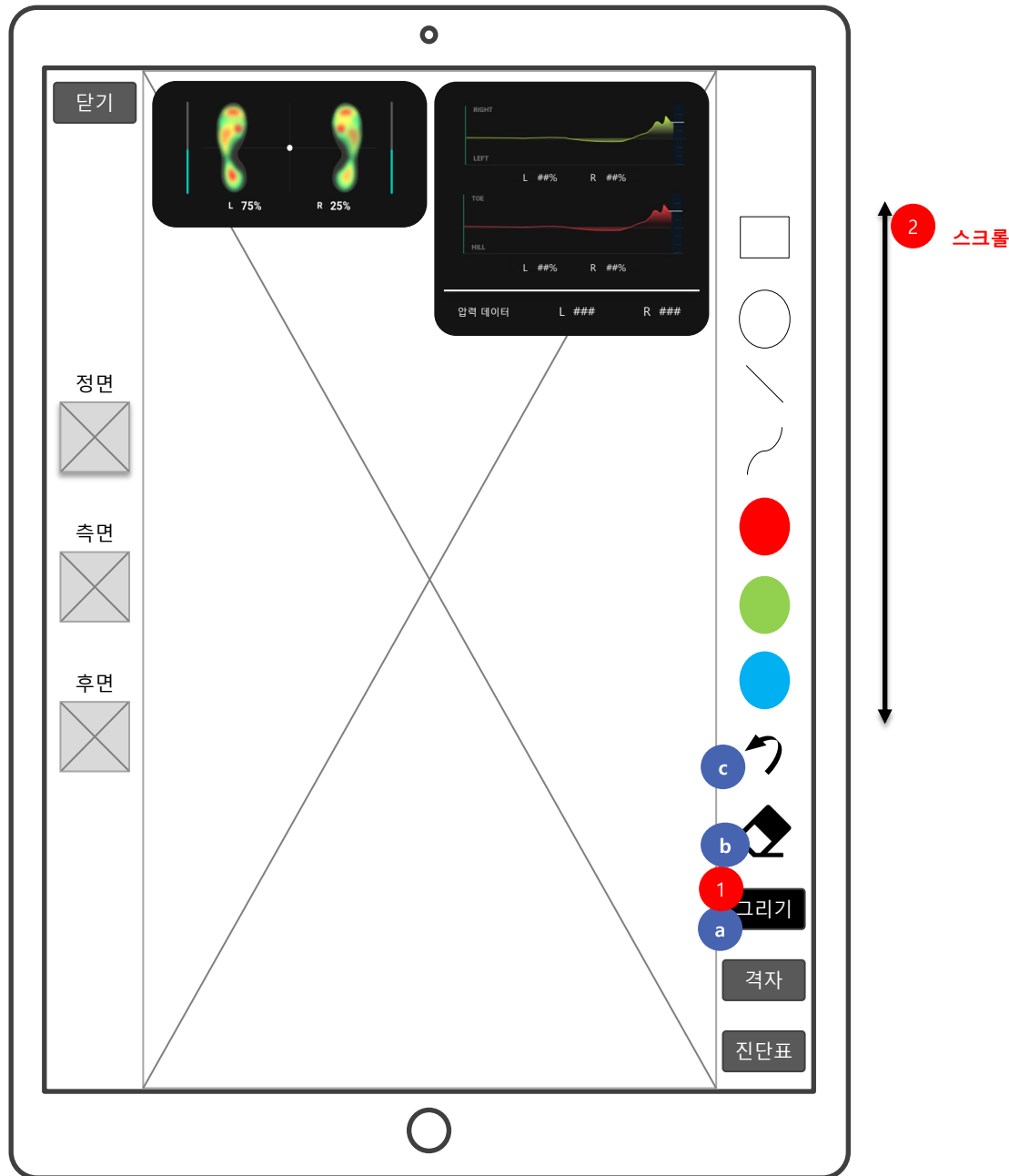

1. 그리기 툴(펼침):
 - a. 스위치 on 시 버튼 위로 툴 펼침
 - b. 전체 지우기 터치 시 모든 작업 되돌리기
 - c. 실행 취소 터치 시 마지막 작업 되돌리기
2. 그리기 툴의 개수가 많을 경우 영상 촬영 시 생기는 상단 버튼 3개 자리를 제외한 영역에서 스크롤 발생

이전

2021.10.29 검사

히스토리

일반 정보

환자 코드	W1234	국적	미국
성	Richard	이름	Leon

문진

정자세

밸런스 운동

보행 운동

6

제자리 서기

0:30

d

e

f

좌 : 우
50 : 50

앞 : 뒤
47 : 53

자세히

원발 서기

0:30

g

흔들림 정도
7%

자세히

계단 오르내리기

0:30

좌 : 우
50 : 50

앞 : 뒤
47 : 53

자세히

6. 밸런스 운동 결과 콘텐츠 영역:
- 의료진이 촬영한 항목만 출력: 제자리 서기, 원발 서기, 오른발 서기, 계단 오르내리기, 앉았다 일어나기, 스쿼트, 뒤꿈치 들기 순서
 - 촬영하지 않은 항목은 비출력
 - d. 촬영한 동영상의 첫 프레임 출력, 촬영한 사진이 없는 경우 기본 이미지 출력
 - e. 촬영 시 기록된 인솔 데이터의 COP 이동 경로 출력
 - f. 촬영 시 기록된 인솔 데이터의 평균 밸런스 출력
 - g. 외발 서기 중 기록된 인솔 데이터의 평균 흔들림 정도 출력: 양발 지지 시의 원발 밸런스 기준 운동 중 밸런스 변화량의 평균값 출력

이전

2021.10.29 검사

히스토리

일반 정보

환자 코드

W1234

국적

미국

성

Richard

이름

Leon

문진

정자세

밸런스 운동

보행 운동

7

보행

0:30

좌 : 우

50 : 50

앞 : 뒤

47 : 53

자세히

원발 부분부하

0:30

좌 : 우

50 : 50

앞 : 뒤

47 : 53

자세히

오른발 부분부하

0:30

좌 : 우

50 : 50


앞 : 뒤

47 : 53

자세히


7. 보행 운동 결과 콘텐츠 영역:
- 의료진이 촬영한 항목만 출력: 보행, 왼발 부분부하, 오른발 부분부하 순서
 - 촬영하지 않은 운동 항목은 비출력

이외 UI 동일

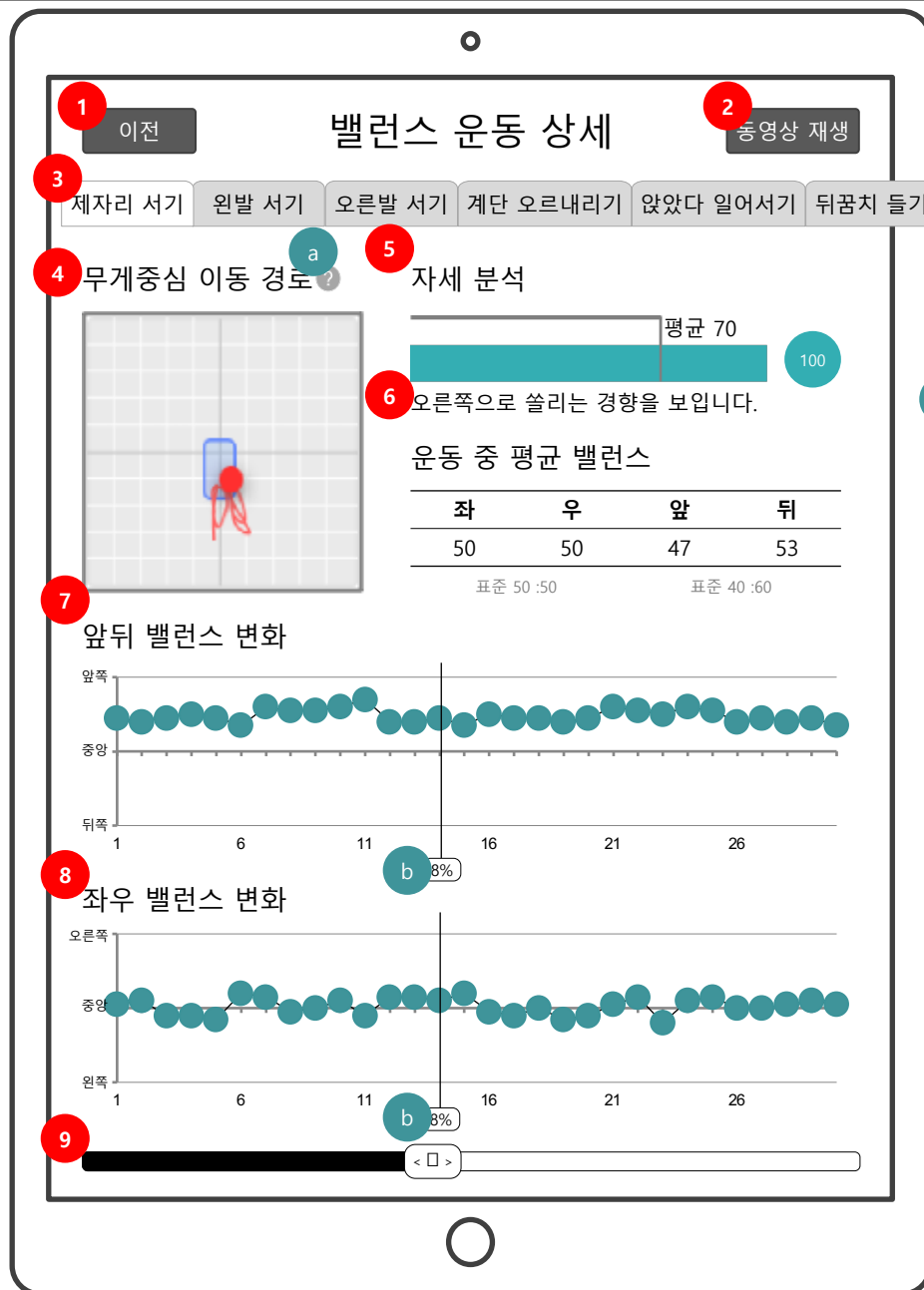

- 터치 시 신규 등록 메뉴로 이동
- 터치 시 동영상 플레이어 팝업
- 밸런스 운동 결과 콘텐츠 영역:
 - 의료진이 촬영한 항목만 출력: 제자리 서기, 원발 서기, 오른발 서기, 계단 오르내리기, 앉았다 일어서기, 스쿼트, 뒤꿈치 돌기 순서
 - 촬영하지 않은 항목은 비출력
- 운동 항목 탭:
 - 촬영한 항목만 표시
- 무게중심 이동 경로 영역:
 - 동영상 촬영 중 기록된 COP의 전체 경로 라인(Line) 출력
 - a. 터치 시 이동경로 분석 툴팁 팝업
- 자세 분석 영역:
 - 해당 운동의 점수 표시, 평균점수 70 고정
 - 색상: 70 이상은 블루, 70 미만은 주황
 - 운동 중 평균 밸런스 영역:
 - 동영상 촬영 중 기록된 인슐 데이터 중 각 센서 별 평균값 출력
- 앞뒤 밸런스 변화 그래프 영역:
 - x축: 초(s), 촬영한 동영상 길이가 그래프의 최대값으로 출력
 - y 축: 각 센서의 밸런스 비중을 100% 기준으로 설정, 동영상의 첫 프레임 기준 앞/뒤 밸런스 변화량 출력
 - 동영상 촬영 중 기록된 인슐 데이터를 초 단위로 계산하여 그래프 출력
 - b. 페이지 로드 시 그래프 왼쪽에 노출
- 좌우 밸런스 변화 그래프 영역: ㉠과 UI 동일
- Seeker 영역:
 - 동영상 시간이 긴 경우 좌우 스와이프하여 데이터 볼 수 있도록 하며 sddker와 그래프 b영역과 일치하지 않아도 됨

최대 한 화면에 나올 수 있는 프레임은 디자인 시 결정하도록 함

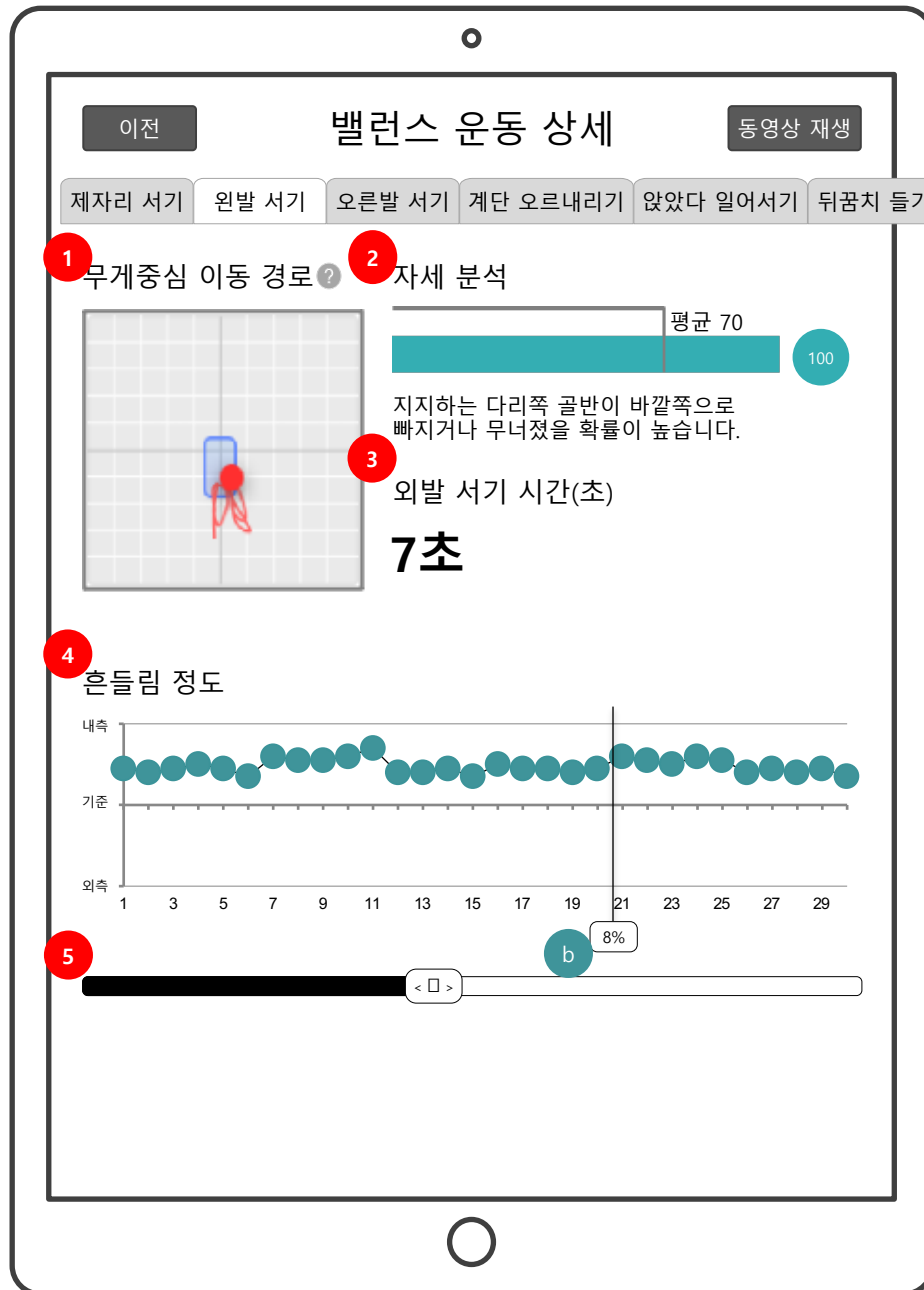

- 무게중심 이동 경로 영역:
 - 동영상 촬영 중 기록된 COP의 전체 경로 라인(Line) 출력
- 자세 분석 영역:
 - 해당 운동의 점수 표시, 평균점수 70 고정
 - 색상: 70 이상은 블루, 70 미만은 주황
- 운동중 외발 서기 시간(초):
 - 동영상 촬영 중 반대쪽 인솔 데이터가 기록된 시각까지의 시간 출력
- 흔들림 정도 그래프 영역:
 - x축: 초(s), 촬영한 동영상 길이가 그래프의 최대값으로 출력
 - y축: 흔들림 정도의 최대치가 그래프의 최대값으로 출력
 - 동영상 촬영 중 기록된 인솔 데이터를 초 단위로 계산하여 그래프 출력
- Seeker 영역:
 - 동영상 촬영 시간을 전체 width로 지정, 좌우로 스와이프하여 시각 이동
 - 스와이프 시 ㉔에서 해당 시각에 맞는 COP 점 위치, ㉕, ㉖에서 해당 시각에 맞는 데이터가 인디케이터로 출력



- 보행운동
보행 운동 추가 시 가로 스와이프 모션으로 추가
보행 n 시간 기록으로 타이틀 자동 세팅
- 무게중심 이동 경로
- 운동 시간 동안 무게 중심 이동 경로 출력
- 보행 분석
- 알고리즘을 이용한 보행 분석 표시
- 걸음 수
- 운동 시간 내 걸음 수, 분당 걸음 수 표시
- 보행 길이
- 신규 인솔에서 제공하는 데이터
- 신규 인솔 판매 전까지 미표시
- ① 아이콘 터치 시 설명에 대한 팝업 표시
- 지면 접촉 시간
- 좌우 밸런스 및 분석 결과 표시
- ① 아이콘 터치 시 팝업 표시
- 보행 주기
① 아이콘 클릭 시 팝업 내용 다음 페이지 참조
- 운동 시간 내 보행 주기 표시
- ① 아이콘 터치 시 팝업 표시

Page Description	신규 등록 > 검사 결과 > 보행 운동 상세 - 보행	Screen ID	HCP-A-16	Description									
<div><div><div><div><div>6</div><div><div><div>▲ 스크롤</div><div><div><div>입각기</div><div>유각기</div></div><table><tr><td>표준</td><td>60%</td><td>40%</td></tr><tr><td>왼발</td><td>67%</td><td>33%</td></tr><tr><td>오른발</td><td>63%</td><td>37%</td></tr></table></div></div></div></div></div></div></div>				표준	60%	40%	왼발	67%	33%	오른발	63%	37%	6. 보행 주기 - 운동 시간 내 보행 주기 표시
표준	60%	40%											
왼발	67%	33%											
오른발	63%	37%											

① 아이콘 클릭 시 팝업 내용



지면 접촉 시간 (GCT)



각발이 지면에 닿아있는 시간이 각발의 GCT입니다.
GCT밸런스는 각 시간을 비율로 환산한 값으로 51.2%
이내이면 정상 밸런스로 간주합니다.

GCT밸런스 차이가 클 수록 좌우의 비대칭을 보여 줍니다.



보행 주기 (Gait Cycle)



1. Stance (입각기) / Swing (유각기)
보행 주기는 크게 지면에 닿아 있는 Stance(입각기)와 Swing (유각기)로 분류됩니다. 해당 주기는 60:40의 비율이 일반적입니다.
2. Stance 주기 내 Double / Single support
Stance 주기는 크게 양발을 동시에 디디는 Double support와 한발만 디디는 Single Support 로 구분됩니다.
해당 비율은 20:40의 비율이 일반적입니다.


Double support는 Stance 시작시 발생하는 Load response 구간과 Stance 끝날 때 발생하는 Pre swing 구간으로 나뉘며,
이는 10:10의 비율이 일반적입니다.
3. 분석 포인트
보행 주기별 왼발 오른발 비율이 큰 차이없이 나타나야 합니다.
특히 보행 안정성이 떨어지거나 균형 능력이 떨어졌을 때 Double support의 비율이 길어지게 됩니다




보행 길이 (Gait Length)



1. 보장 (Step Length)
보장은 양발이 동시에 디딜 때 두 발 사이의 거리이며
한쪽 발의 뒤꿈치와 반대편 발의 뒤꿈치 사이의 거리를 의미합니다.
2. 활보장 (Stride Length)
활보장은 입각기와 유각기 전체 보행주기의 거리로
한 발의 입각기 초기 접지점에서 같은 발의
말기 유각기 접지점 사이의 거리입니다.

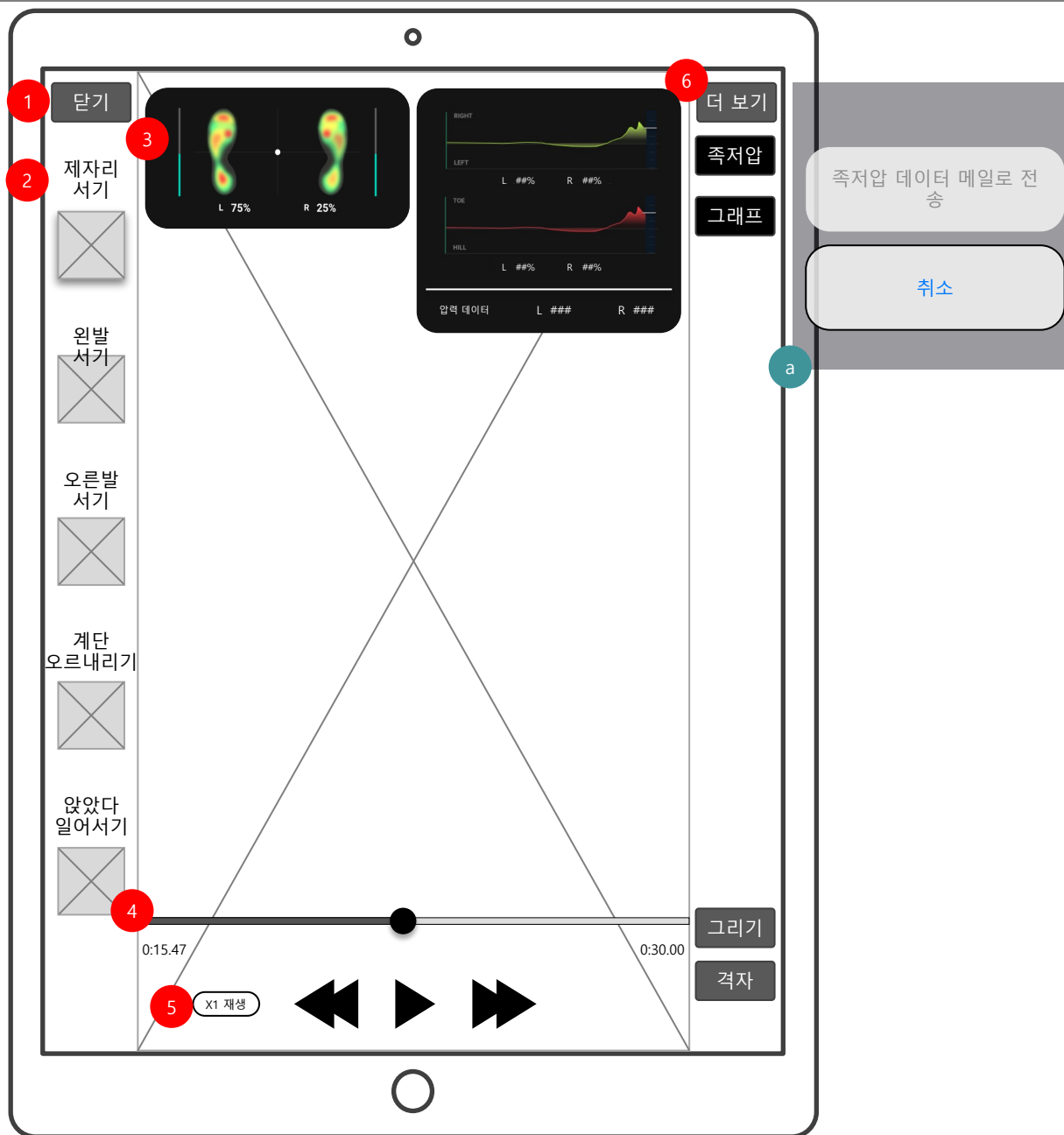

- 터치 시 플레이어 닫음
- 촬영하지 않은 항목은 선택 불가(비활성화)
- 선택 시 레이블 및 썸네일 프레임 강조
- 그래프 스위치 on 시 그래프 레이어 출력, 인술 스위치 off 시 족저압 및 밸런스 레이어 영역에 레이어 출력
- 인술 스위치 on 시 족저압 및 밸런스 레이어 출력
- 좌우 Swipe 하여 seeker 이동
- 분:초 단위로 재생 시간 및 영상 길이 출력
- Backward/Forward 버튼 터치 시 이전/다음 동영상 선택
- "x1 재생" 버튼 터치 시 레이블이 "x1/2 재생", "x1/4" 순으로 변경
- 레이블에 맞게 동영상 재생 순서 조정
- 더 보기 버튼:
 - 연구 환자 계정에서만 출력
 - 터치 시 액션 시트 팝업
 - 족저압 데이터 메일로 전송 액션 터치 시 메일 앱 전환, 회원가입 시 입력한 이메일을 수신자로 입력, 메일 작성

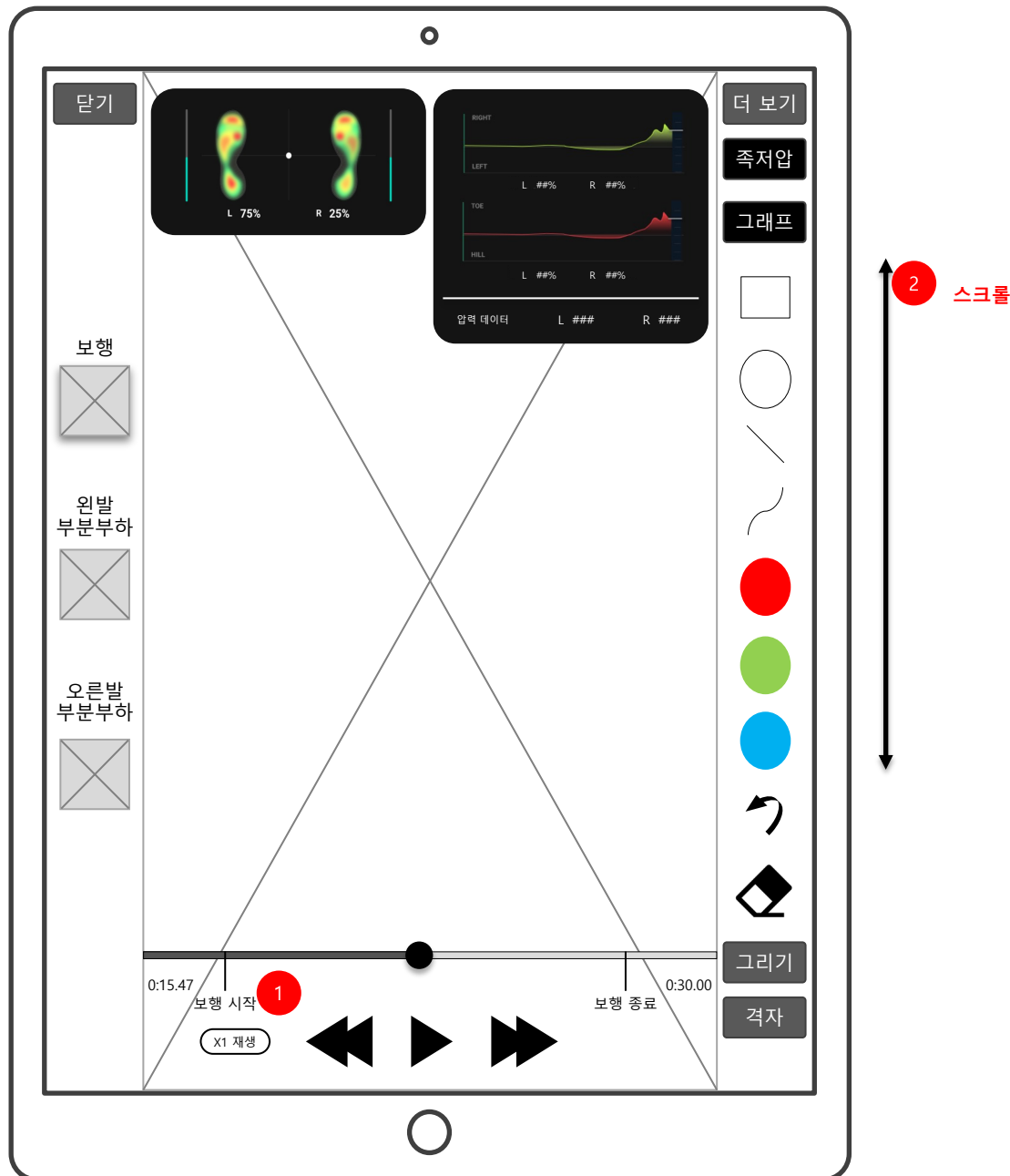

1. 보행 시작/종료 마커:
- 보행 운동 시에만 출력
2. 그리기 툴 개수가 많을 경우 고정된 영역에서 스크롤로 제공

환자

12월 ver

NEUROGAIT

홈 신규 등록 환자 인출 설정

환자 동기화

검색

중요 환자만 정렬


중요	최근 운동	환자 코드	환자이름	SMS 인증
☆	2021.07.28	A1234	홍길동	지정연락처
★	2021.07.29	A1235	사공민아	SMS 재발송
☆	2021.07.30	A1236	김민준	지정연락처
★	2021.07.31	A1237	김민지	지정연락처
★	2021.08.01	A1238	이무개	SMS 재발송
☆	2021.08.02	A1239	제갈훈	SMS 재발송
☆	2021.08.01	A1240	유병규	지정연락처
★	2021.08.02	A1241	박지혜	SMS 재발송
☆	2021.08.01	A1242	김상환	SMS 재발송
☆	2021.08.02	A1243	정수화	SMS 재발송

5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

© Copyright 2021 SALTED.LTD

- 동기화 버튼:
 - 터치 시 SMS 인증이 완료된 환자 중 동기화를 진행하지 않은 검사 기록을 서버에 업로드
 - 동기화 진행 중 레이블 옆 아이콘이 spin
- 검색창:
 - 키워드 입력 시 그 키워드와 겹치는 항목이 아래 목록으로 필터링
 - 키워드 칼럼: 이름, 환자코드
 - 특수문자, 띄어쓰기, 이모지 입력 불가; 키패드 터치 시에도 입력되지 않음
- 중요 환자 정렬 스위치:
 - 터치 시 환자 목록(- 중 "중요" 표시가 되어 있는 환자들 상위 정렬
 - 스위치 off일 경우 등록 순으로 출력
- 환자 목록:
 - 정렬: 최근 검사일시 기준 최신순
 - 중요 별 아이콘 터치 시 중요 표시 On/off
 - a-1. "신규 등록" 시에 환자가 SMS 인증(서비스 약관 및 개인정보 처리방침 동의)을 완료하지 않은 경우 버튼으로 노출
 - a-2. 터치 시 "발송 완료"로 버튼 대치
 - 페이지 re-load 시 상태 다시 출력
 - b. 환자 번호에 지정 연락처 입력 시 SMS 재발송 버튼이 대치
- 페이지 영역:
 - 10 단위로 페이징 범위 고정: 1-10, 11-20
 - 10 페이지 이하인 상태에서 좌/우 화살표 터치 시 이전/다음 페이지로 이동
 - 10 페이지 초과인 상태에서 좌/우 화살표 터치 시 10단위의 이전/다음 페이지로 이동
 - * 2페이지에서 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 터치 시 반응 없음 또는 11페이지로 이동

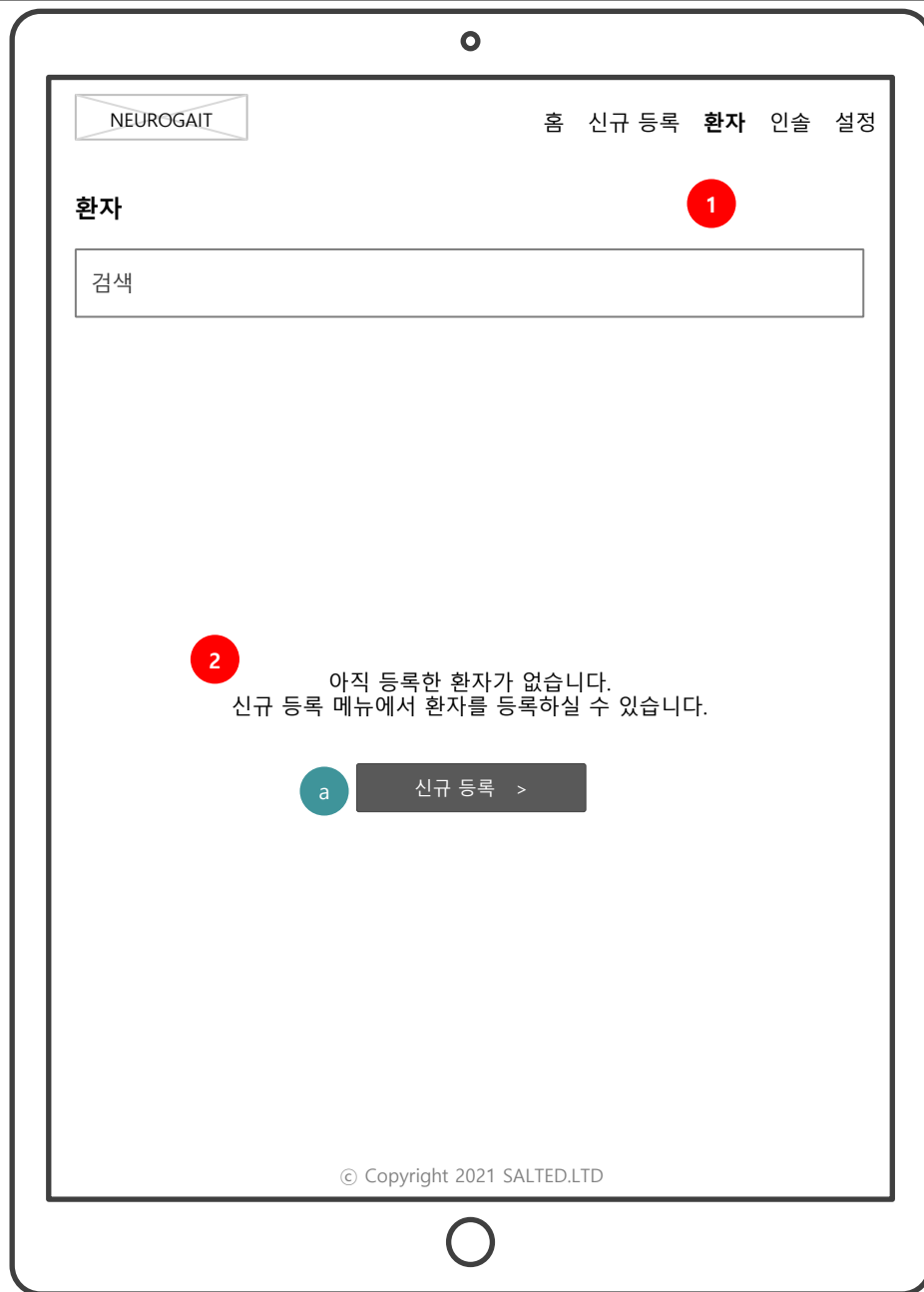12월 ver

- 숨겨진 동기화 버튼:
 - 등록 환자 없을 시 버튼 숨김
- 빈 데이터 콘텐츠:
 - 환자 등록 가이드 출력
 - a. 터치 시 신규 등록 메뉴로 이동

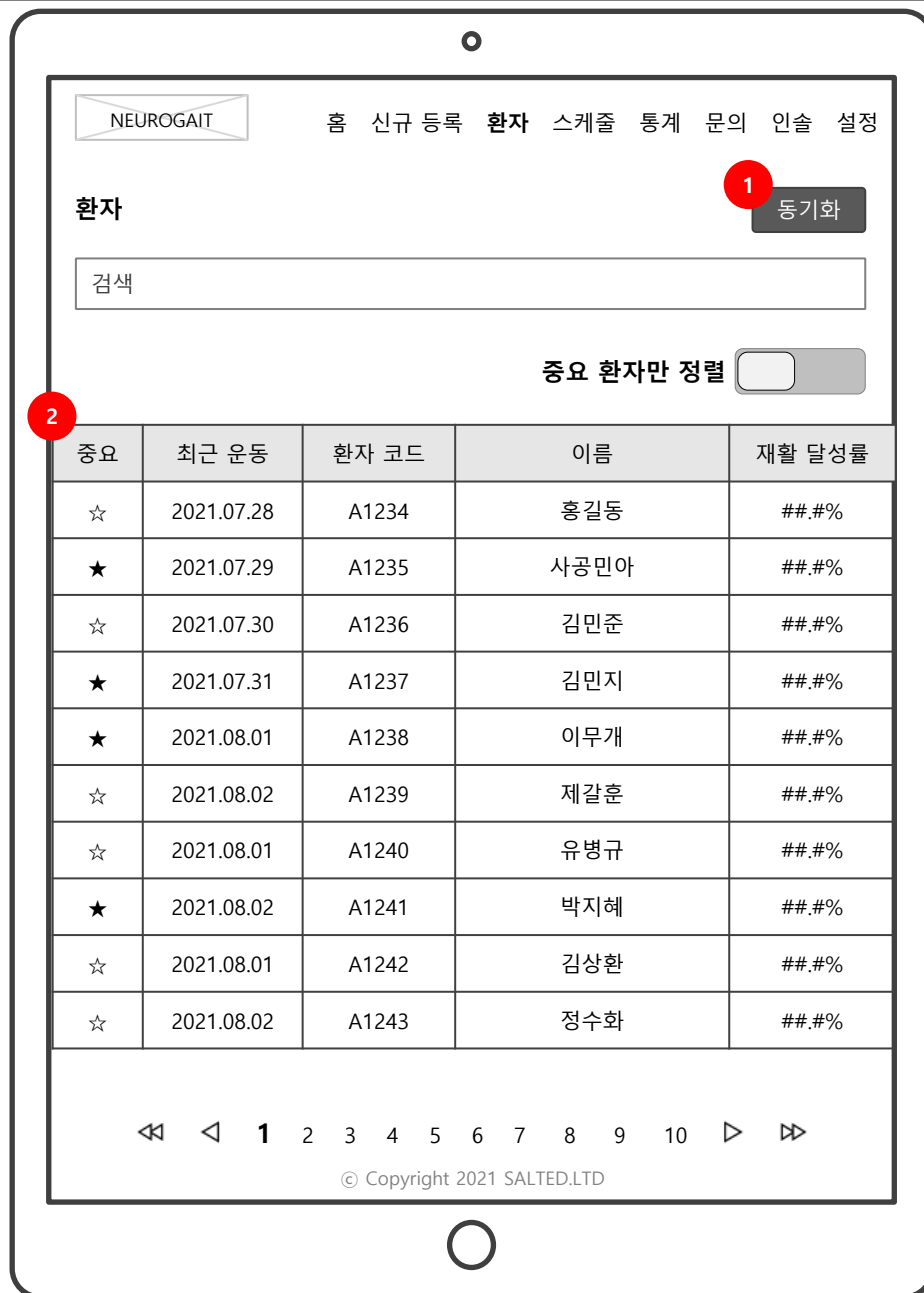

- 동기화 버튼:
 - 터치 시 SMS 인증이 완료된 환자 중 동기화를 진행하지 않은 검사 기록을 서버에 업로드
 - 동기화 진행 중 레이블 옆 아이콘이 spin
- 환자 목록:
 - 정렬: 최근 운동 일시 기준 최신순
 - 중요 별 아이콘 터치 시 중요 표시 On/off
 - 재활 달성률 소수점 아래 첫째 자리 폰트 크기 작게 표시

환자 정보

이전

환자 데이터 연결

정보 수정

환자 정보

일반 정보

환자 코드	W1234	국적	미국
성	Richard	이름	Leon
생년월일	1993.03.16	성별	남자
거주지	서울	연락처	010 1234 5678
이메일	patient@neurogait.ai		

신체 정보

키	181	cm	체중	80.9	kg
다리 길이	왼쪽	103.2	cm	오른쪽	103.5
					cm
발 사이즈	265	mm			

문진

최근 2021.09.10 작성 >

정자세

최근 2021.09.10 촬영 >

정면 측면 후면

새로 촬영

신규 검사 추가

스크롤

- 터치 시 이전 화면으로 이동
- 클릭 시 매칭 코드 입력 팝업 출력
 - 확인 클릭시 데이터 자동 세팅
- 환자/의료진 입력 정보 탭:
 - 의료진 입력 정보 선택 기본값
 - 우측 화살표 터치 시 이름 셀까지의 행 제외 나머지 셀 숨김처리
- 정보 수정 버튼:
 - 터치 시 정보 수정 창 팝업
- 문진 영역:
 - 가장 최근 문진 작성일자 출력
 - 터치 시 문진 히스토리 페이지로 이동
- 정자세 영역:
 - 가장 최근에 촬영한 정자세 사진 출력
 - 터치 시 정자세 촬영 이력 페이지로 이동
 - 터치 시 인솔 선택 화면 팝업
- 신규 검사 추가 버튼:
 - 하단에 고정 버튼으로 제공
 - 터치 시 인솔 선택 화면 팝업


데이터 코드 입력

취소 | 연결

환자 연결

'환자이름'과 연결 되었습니다.

확인

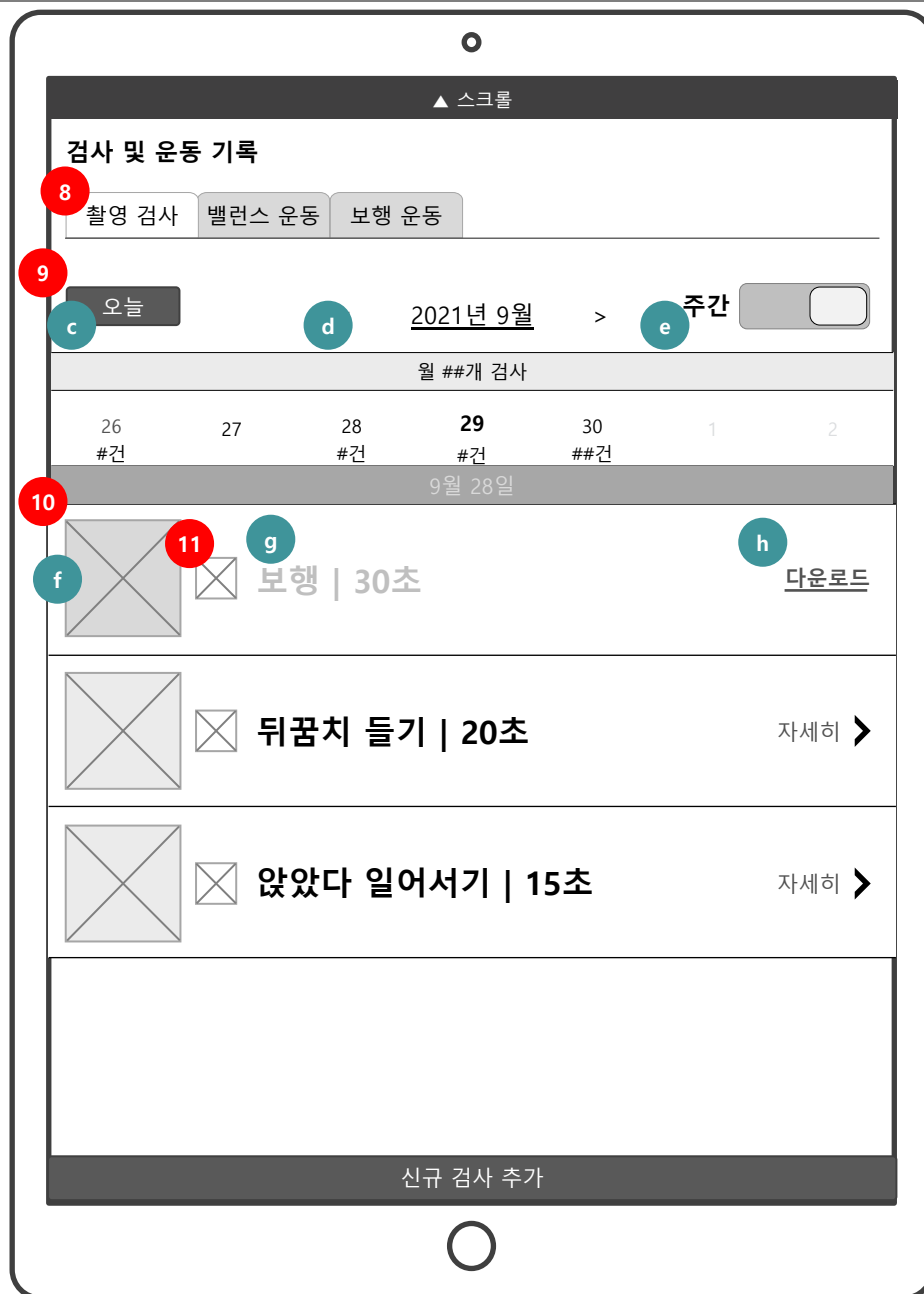

8. 운동 및 검사 탭 – 촬영 검사:
 - 촬영 검사 탭 선택 기본값
9. 캘린더 영역 – 주간:
 - c. 터치 시 오늘 날짜로 캘린더 이동
 - d. 좌우 arrow 터치 시 월 단위 이동, 날짜 레이블 터치 시 월별 캘린더 선택 picker 팝업
 - e. 터치 시 월간 캘린더로 스위치
10. 촬영 검사 콘텐츠 – 과거 기록:
 - ㉠ 영역에서 셀 선택 시 해당 일자의 검사 항목이 오래된순 정렬
 - 정렬: 콘텐츠 생성 일시 기준 최신순
 - f. 동영상의 첫 프레임 출력
 - g. 동영상 길이 초 단위 출력, 데시초(0.1n초) 이하 단위 버림
 - h. 클라우드 기록의 경우 자세히 버튼이 다운로드 버튼으로 대체
11. 클라우드 동기화 상태 아이콘:
 - 동기화 미완료, 동기화 완료 상태 출력
 - 의료진이 진행한 검사, 환자가 진행한 현재 또는 과거의 운동 기록만 업로드

Page Description	일반 환자 > 미매칭 환자 정보 > 정보 수정 팝업	Screen ID	HCP-A-20-1	Description																																							
<div><div><div>1</div><div>취소</div></div><div>환자 정보 수정</div><div><div>2</div><div>저장</div></div></div> <div><div>환자 정보</div><div><div>일반 정보</div><table><tr><td>환자 코드</td><td>W1234</td><td>국적</td><td>미국</td></tr><tr><td>성</td><td>Richard</td><td>이름</td><td>Leon</td></tr><tr><td>생년월일</td><td>1993.03.16</td><td>성별</td><td>남자</td></tr><tr><td>거주지</td><td>서울</td><td>연락처</td><td>010 1234 5678</td></tr><tr><td>이메일</td><td colspan="3">patient@neurogait.ai</td></tr></table><div><div>3</div><div>신체 정보</div></div><table><tr><td>키</td><td>181.3</td><td>cm</td><td>체중</td><td>80.5</td><td>kg</td></tr><tr><td>다리 길이</td><td>왼쪽</td><td>103.5</td><td>cm</td><td>오른쪽</td><td>102.5</td><td>cm</td></tr><tr><td>발 사이즈</td><td>265.5</td><td>mm</td><td colspan="3"></td></tr></table></div></div> <div><div>4</div></div>				환자 코드	W1234	국적	미국	성	Richard	이름	Leon	생년월일	1993.03.16	성별	남자	거주지	서울	연락처	010 1234 5678	이메일	patient@neurogait.ai			키	181.3	cm	체중	80.5	kg	다리 길이	왼쪽	103.5	cm	오른쪽	102.5	cm	발 사이즈	265.5	mm				<div>1. 정보 수정 취소 버튼:<ul style="list-style-type: none">- 내용 수정이 없는 상태에서 터치 시 정보 수정 취소, 팝업창 닫음- 내용 수정이 있는 상태에서 터치 시 정보 수정 취소 confirm 출력</div> <div>2. 터치 시 수정 내용 저장, 팝업창 닫음</div> <div>3. 정보 수정 가능한 항목 텍스트필드 출력</div> <div>4. 신체정보 소주점 첫번째 자리까지 입력 가능</div>
환자 코드	W1234	국적	미국																																								
성	Richard	이름	Leon																																								
생년월일	1993.03.16	성별	남자																																								
거주지	서울	연락처	010 1234 5678																																								
이메일	patient@neurogait.ai																																										
키	181.3	cm	체중	80.5	kg																																						
다리 길이	왼쪽	103.5	cm	오른쪽	102.5	cm																																					
발 사이즈	265.5	mm																																									

▲ 스크롤

10

검사 및 운동 기록

촬영 검사

밸런스 운동

보행 운동

재활 달성률 ##.##%

11

오늘

< 2021년 9월 >

k 월간

월 ##개 운동

28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12 #건	13	14 #건	15 #건	16	17 #건	18
26 #건	20	21	26 #건	23	26 #건	25
26 #건	27	28 #건	29 #건	30 #건	1	2

9월 29일

12

왔었다 일어서기 | 세트 # 완료

자세히 >

문의 답변 완료

m 동영상

원발 서기 | 미진행

다운로드

30초 | 문의 없음

신규 스케줄 추가

10. 운동 및 검사 탭 - 밸런스 운동:
 - 영역 우측에 전체 재활 달성률 출력
11. 캘린더 영역 - 월간:
 - k. 터치 시 주간 캘린더로 스위치
 - l. 검사 기록이 있는 날짜의 아래 항목 있음 어포던스 출력
12. 밸런스 운동 기록 목록:
 - ㉠에서 선택한 날짜의 운동 항목 정렬
 - 진행할 수 있는 운동(오늘 운동), 진행할 수 없는 운동(과거 기록, 미래 기록) 색상 구분
 - m. 동영상 촬영이 필요한 운동의 경우 동영상 뱃지 출력
 - n-1. 동영상 촬영이 필요한 운동의 경우 촬영이 필요한 동영상 길이 출력
 - n-2. 운동 문의 상태 출력: 문의 없음, 문의 미확인, 임시 저장, 문의 답변 완료

Page Description	일반 환자 > 미매칭 환자 정보 2 – 보행 운동, 주간 캘린더	Screen ID	HCP-A-20-3	Description
<div> </div>				<p>12. 운동 및 검사 탭 – 보행 운동</p> <p>13. 미래의 운동 항목:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각 셀 터치 시 인터랙션 또는 피드백 없음 - 썸네일: admin에서 등록한 썸네일 표시 <p>이외 UI 동일</p>

Page Description	일반 환자 > 매칭 환자 정보 - 의료진 입력	Screen ID	HCP-A-21	Description																																							
<div><div><div>이전</div><div>환자 정보</div><div>연결 끊기</div></div><div><div>환자 정보</div><div><div>1</div><div>일반 정보</div><table><tr><td>환자 코드</td><td>W1234</td><td>국적</td><td>미국</td></tr><tr><td>성</td><td>Richard</td><td>이름</td><td>Leon</td></tr><tr><td>생년월일</td><td>1993.03.16</td><td>성별</td><td>남자</td></tr><tr><td>거주지</td><td>서울</td><td>연락처</td><td>010 1234 5678</td></tr><tr><td>이메일</td><td colspan="3">patient@neurogait.ai</td></tr></table><div><div>신체 정보</div><table><tr><td>키</td><td>181</td><td>cm</td><td>체중</td><td>80.9</td><td>kg</td></tr><tr><td>다리 길이</td><td>왼쪽</td><td>103.2</td><td>cm</td><td>오른쪽</td><td>103.5</td><td>cm</td></tr><tr><td>발 사이즈</td><td>265</td><td>mm</td><td colspan="3"></td></tr></table><div><div>문진</div><div>최근 2021.09.10 작성 ></div></div><div><div>정자세</div><div>최근 2021.09.10 촬영 ></div></div><div><div>정면</div><div>측면</div><div>후면</div><div><div>새로 촬영</div></div></div></div></div><div><div>▼ 스크롤</div></div></div></div>				환자 코드	W1234	국적	미국	성	Richard	이름	Leon	생년월일	1993.03.16	성별	남자	거주지	서울	연락처	010 1234 5678	이메일	patient@neurogait.ai			키	181	cm	체중	80.9	kg	다리 길이	왼쪽	103.2	cm	오른쪽	103.5	cm	발 사이즈	265	mm				<div><div>1. 환자 정보는 의료진, 환자가 입력한 것 중 가장 최근 데이터로 업데이트 하여 보여줌</div><div>2. 환자와 의료진 매칭 끊기 유휴환자로 상태 변경 처리</div><div>이외 동일</div></div>
환자 코드	W1234	국적	미국																																								
성	Richard	이름	Leon																																								
생년월일	1993.03.16	성별	남자																																								
거주지	서울	연락처	010 1234 5678																																								
이메일	patient@neurogait.ai																																										
키	181	cm	체중	80.9	kg																																						
다리 길이	왼쪽	103.2	cm	오른쪽	103.5	cm																																					
발 사이즈	265	mm																																									

이전

환자 정보

환자 데이터 연결

환자 정보

정보 수정

일반 정보

환자 코드	W1234	국적	미국
성	Richard	이름	Leon
생년월일	1993.03.16	성별	남자
거주지	서울	연락처	010 1234 5678
이메일	patient@neurogait.ai		

연구 정보

프로젝트	프로젝트 1	질환명	질환 1
------	--------	-----	------

신체 정보

키	181	cm	체중	80.9	kg	
다리 길이	왼쪽	103.2	cm	오른쪽	103.5	cm
발 사이즈	265	mm				

문진

최근 2021.09.10 작성 >

정자세

최근 2021.09.10 촬영 >

정면

측면

후면

새로 촬영

스크롤

1. 클릭 시 매칭 코드 입력 팝업 출력

f. 확인 클릭시 데이터 자동 세팅

2. 수정 화면으로 이동

1

데이터 코드 입력

취소

연결

환자 연결


'환자이름'과 연결 되었습니다.

확인

6

Page Description	연구 환자 > 미매칭 환자 정보 > 정보 수정	Screen ID	HCP-A-22-1	Description																																												
<div><div><div>1</div><div>취소</div></div><div>환자 정보 수정</div><div>2</div><div>저장</div></div> <div><div>환자 정보</div><div><div>일반 정보</div><table><tr><td>환자 코드</td><td>W1234</td><td>국적</td><td>미국</td></tr><tr><td>성</td><td>Richard</td><td>이름</td><td>Leon</td></tr><tr><td>생년월일</td><td>1993.03.16</td><td>성별</td><td>남자</td></tr><tr><td>거주지</td><td>서울</td><td>연락처</td><td>010 1234 5678</td></tr><tr><td>이메일</td><td colspan="3">patient@neurogait.ai</td></tr></table><div><div>연구 정보</div><table><tr><td>프로젝트</td><td>프로젝트 1</td><td>질환명</td><td>질환 1</td></tr></table><div><div>신체 정보</div><table><tr><td>키</td><td>181</td><td>cm</td><td>체중</td><td>80</td><td>kg</td></tr><tr><td>다리 길이</td><td>왼쪽</td><td>103</td><td>cm</td><td>오른쪽</td><td>102</td><td>cm</td></tr><tr><td>발 사이즈</td><td>265</td><td>mm</td><td colspan="3"></td></tr></table></div></div></div></div>					환자 코드	W1234	국적	미국	성	Richard	이름	Leon	생년월일	1993.03.16	성별	남자	거주지	서울	연락처	010 1234 5678	이메일	patient@neurogait.ai			프로젝트	프로젝트 1	질환명	질환 1	키	181	cm	체중	80	kg	다리 길이	왼쪽	103	cm	오른쪽	102	cm	발 사이즈	265	mm				<div>1. 정보 수정 취소 버튼: - 내용 수정이 없는 상태에서 터치 시 정보 수정 취소, 팝업창 닫음 - 내용 수정이 있는 상태에서 터치 시 정보 수정 취소 confirm 출력</div> <div>2. 터치 시 수정 내용 저장, 팝업창 닫음</div> <div>3. 정보 수정 가능한 항목 텍스트필드 표시</div>
환자 코드	W1234	국적	미국																																													
성	Richard	이름	Leon																																													
생년월일	1993.03.16	성별	남자																																													
거주지	서울	연락처	010 1234 5678																																													
이메일	patient@neurogait.ai																																															
프로젝트	프로젝트 1	질환명	질환 1																																													
키	181	cm	체중	80	kg																																											
다리 길이	왼쪽	103	cm	오른쪽	102	cm																																										
발 사이즈	265	mm																																														

Page Description	연구 환자 > 매칭 환자 정보 1	Screen ID	HCP-A-23	Description																																											
<div><div><div><div>이전</div><div>환자 정보</div><div>1 연결 끊기</div><div>2 정보 수정</div></div><div><div>환자 정보</div><div><div>일반 정보</div><table><tr><td>환자 코드</td><td>W1234</td><td>국적</td><td>미국</td></tr><tr><td>성</td><td>Richard</td><td>이름</td><td>Leon</td></tr><tr><td>생년월일</td><td>1993.03.16</td><td>성별</td><td>남자</td></tr><tr><td>거주지</td><td>서울</td><td>연락처</td><td>010 1234 5678</td></tr><tr><td>이메일</td><td colspan="3">patient@neurogait.ai</td></tr></table><div><div>연구 정보</div><table><tr><td>프로젝트</td><td>프로젝트 1</td><td>질환명</td><td>질환 1</td></tr></table><div><div>신체 정보</div><table><tr><td>키</td><td>181</td><td>cm</td><td>체중</td><td>80.9</td><td>kg</td></tr><tr><td>다리 길이</td><td>왼쪽</td><td>103.2</td><td>cm</td><td>오른쪽</td><td>103.5</td><td>cm</td></tr><tr><td>발 사이즈</td><td>265</td><td>mm</td><td colspan="3"></td></tr></table><div><div>문진</div><div>최근 2021.09.10 작성 ></div><div>정자세</div><div>최근 2021.09.10 촬영 ></div></div><div><div>정면</div><div>측면</div><div>후면</div><div>새로 촬영</div></div><div>▼ 스크롤</div></div></div></div></div></div></div>				환자 코드	W1234	국적	미국	성	Richard	이름	Leon	생년월일	1993.03.16	성별	남자	거주지	서울	연락처	010 1234 5678	이메일	patient@neurogait.ai			프로젝트	프로젝트 1	질환명	질환 1	키	181	cm	체중	80.9	kg	다리 길이	왼쪽	103.2	cm	오른쪽	103.5	cm	발 사이즈	265	mm				<div>1. 터치 시 본 계정에서 환자 정보 삭제 confirm 출력</div> <div>2. 수정 페이지로 이동</div> <div>이외 UI 동일</div>
환자 코드	W1234	국적	미국																																												
성	Richard	이름	Leon																																												
생년월일	1993.03.16	성별	남자																																												
거주지	서울	연락처	010 1234 5678																																												
이메일	patient@neurogait.ai																																														
프로젝트	프로젝트 1	질환명	질환 1																																												
키	181	cm	체중	80.9	kg																																										
다리 길이	왼쪽	103.2	cm	오른쪽	103.5	cm																																									
발 사이즈	265	mm																																													

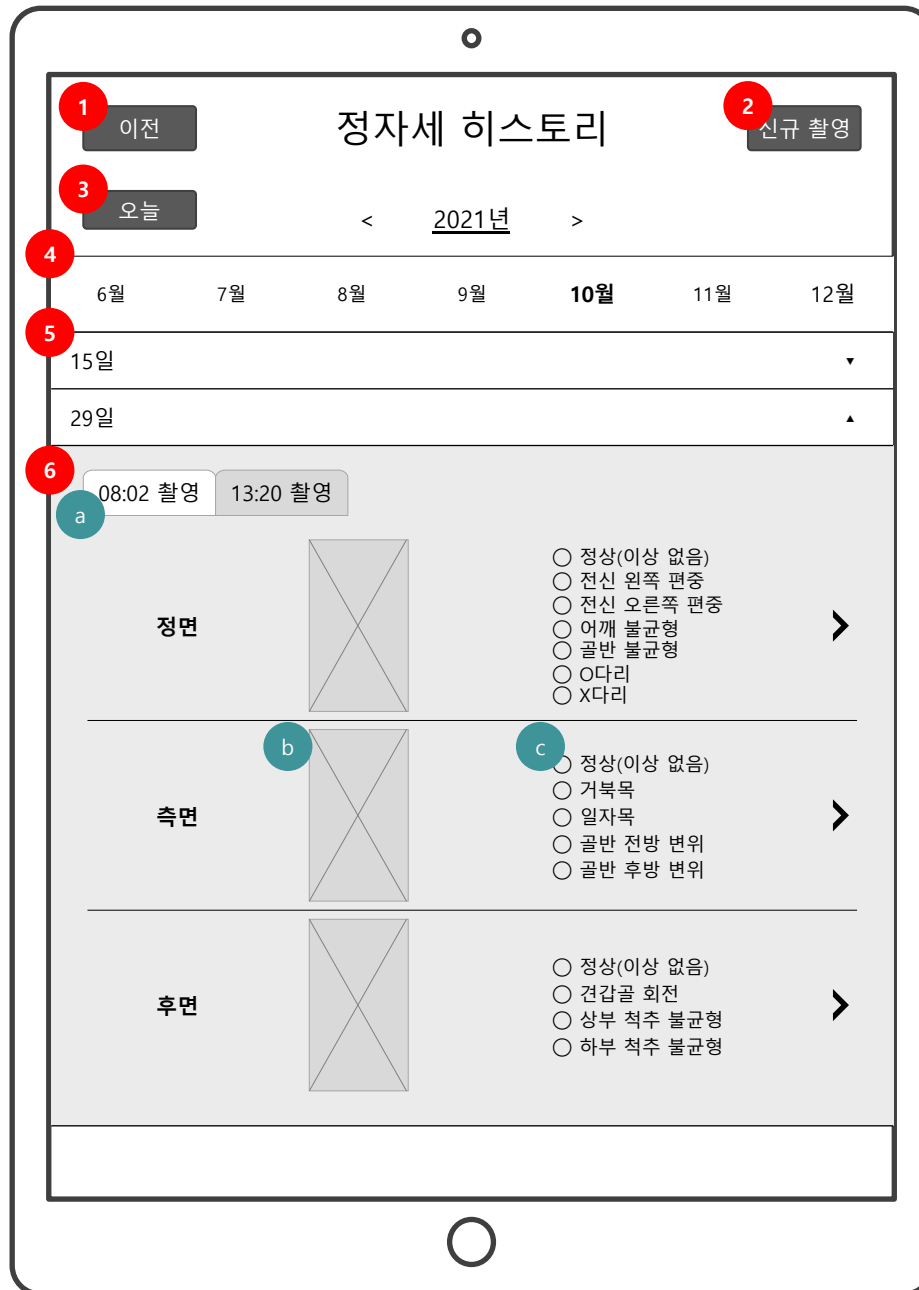

- 터치 시 환자 정보 화면으로 이동
- 터치 시 인슐 선택 창 팝업
- 터치 시 ③, ④, ⑤ 영역의 오늘 일자 선택 및 콘텐츠 로드
- 월 단위 캘린더 영역:
 - 이번 달 선택 기본값
 - 좌우 스와이프하여 가로 스크롤, 연 단위 이동 불가
- 정자세 촬영 일자 목록:
 - 날짜 터치 시 정자세 정보 영역 아코디언 펼침/접음
- 정자세 촬영 결과 콘텐츠 영역:
 - 정면, 측면, 후면 별 촬영한 사진 및 의료진이 체크한 밸런스 이상 징후 출력
 - a. 같은 날 촬영 시 해당 정자세를 촬영한 시각(시:분)을 24시간제 레이블로 탭 구분, 왼쪽부터 오래된 순 노출
 - b. 사진 출력, 촬영한 사진이 없는 경우 기본 이미지 출력
 - c. 의료진이 체크한 항목이 없는 경우 빈 체크박스 및 목록 출력

고정

1 이전 2 2021.09.29 밸런스 운동

3 원발 서기 앉았다 일어서기

4 운동 개요


운동 세트	5 회	운동 시간	세트 당 최대 15초	운동 달성률	##.##%
운동 부위				운동 방법	
좌측 내전근	좌측 중둔근	우측 중둔근	우측 내전근		
좌측 가자미근	좌측 대퇴이두근	우측 대퇴이두근	우측 가자미근		
좌측 앞정강근	좌측 대퇴사두근	우측 대퇴사두근	우측 앞정강근		
좌측 대퇴근막장근	좌측 장요근	우측 대퇴근막장근	우측 장요근		
복근	척추기립근				

5 운동 기록


세트 1 세트 2 세트 3 세트 4 세트 5

▼ 스크롤


1. 터치 시 환자 정보 화면으로 이동
2. 타이틀:
 - 밸런스 운동 일자 출력
3. 밸런스 운동 탭
4. 운동 개요 영역:
 - 스케줄 등록 시에 입력한 세트 및 admin에서 등록한 운동 정보 출력
 - a. 해당 운동의 전체 세트 중 환자가 진행한 세트로 달성률 퍼센티지 출력
 - b. 운동 방법 썸네일 출력, 터치 시 운동 방법 비디오 플레이어 팝업
 - c. admin에서 등록한 운동 부위 강조
5. 운동 기록 영역: 다음 슬라이드 참고

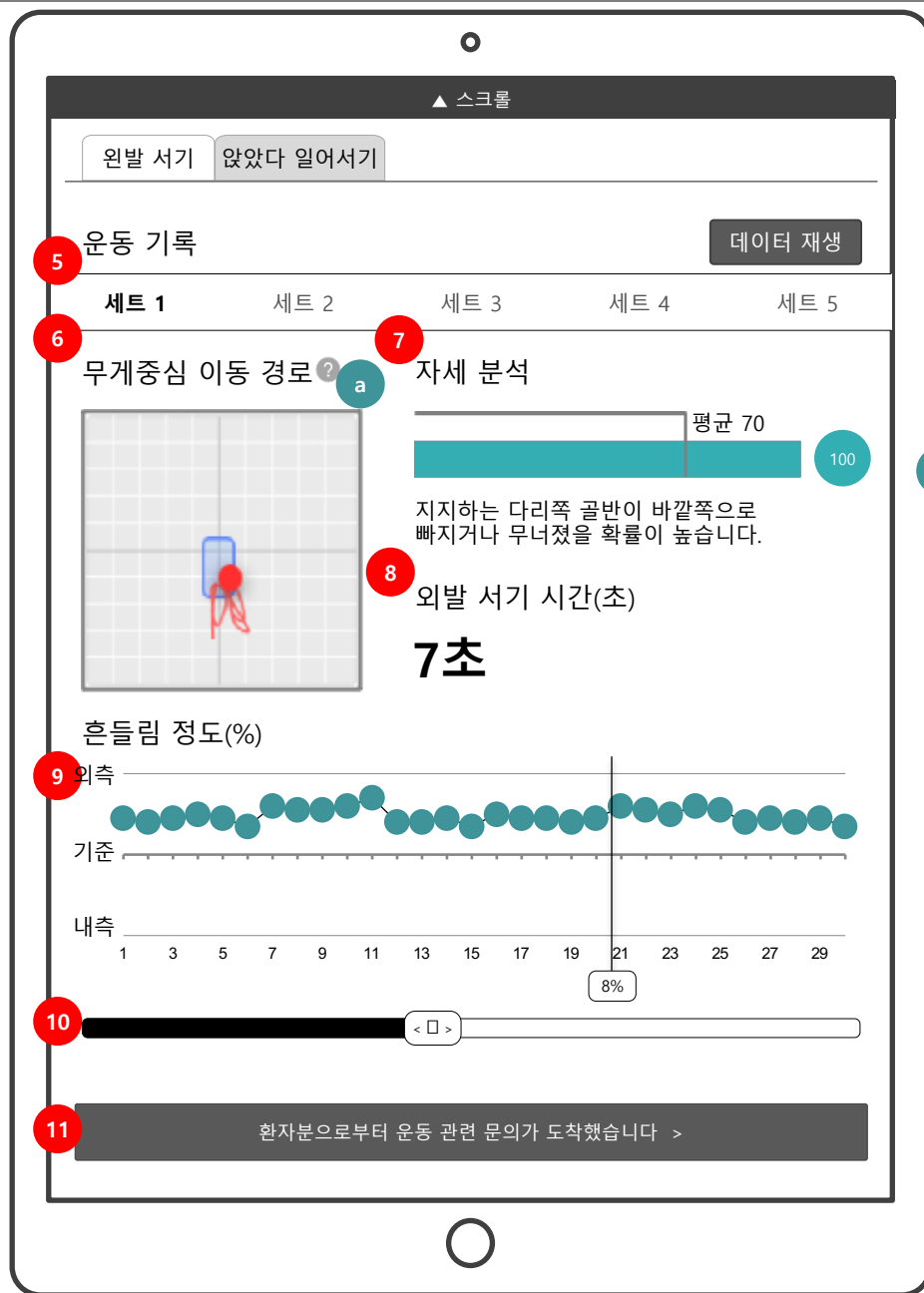


5. 운동 기록 탭:
각 세트 별 환자 운동 기록 출력
6. 무게중심 이동 경로 영역:
- 동영상 촬영 중 기록된 COP의 전체 경로 라인(Line) 출력
7. 자세 분석 영역:
- 해당 운동의 점수 표시, 평균점수 70 고정
- 색상: 70 이상은 블루, 70 미만은 주황
8. 운동중 외발 서기 시간(초):
- 동영상 촬영 중 반대쪽 인솔 데이터가 기록된 시각까지의 시간 출력
9. 흔들림 정도 그래프 영역:
- x축: 초(s), 촬영한 동영상 길이가 그래프의 최대값으로 출력
- y축: 흔들림 정도의 최대치가 그래프의 최대값으로 출력
- 동영상 촬영 중 기록된 인솔 데이터를 초 단위로 계산하여 그래프 출력
10. Seeker 영역:
- 동영상 촬영 시간을 전체 width로 지정, 좌우로 스와이프하여 시각 이동
- 스와이프 시 ㉔에서 해당 시각에 맞는 COP 점 위치, ㉕, ㉖에서 해당 시각에 맞는 데이터가 인디케이터로 출력
11. 문의 확인 버튼
- 환자로부터 문의가 있는 경우에만 출력
- 버튼 터치 시 문의 상세 페이지 팝업

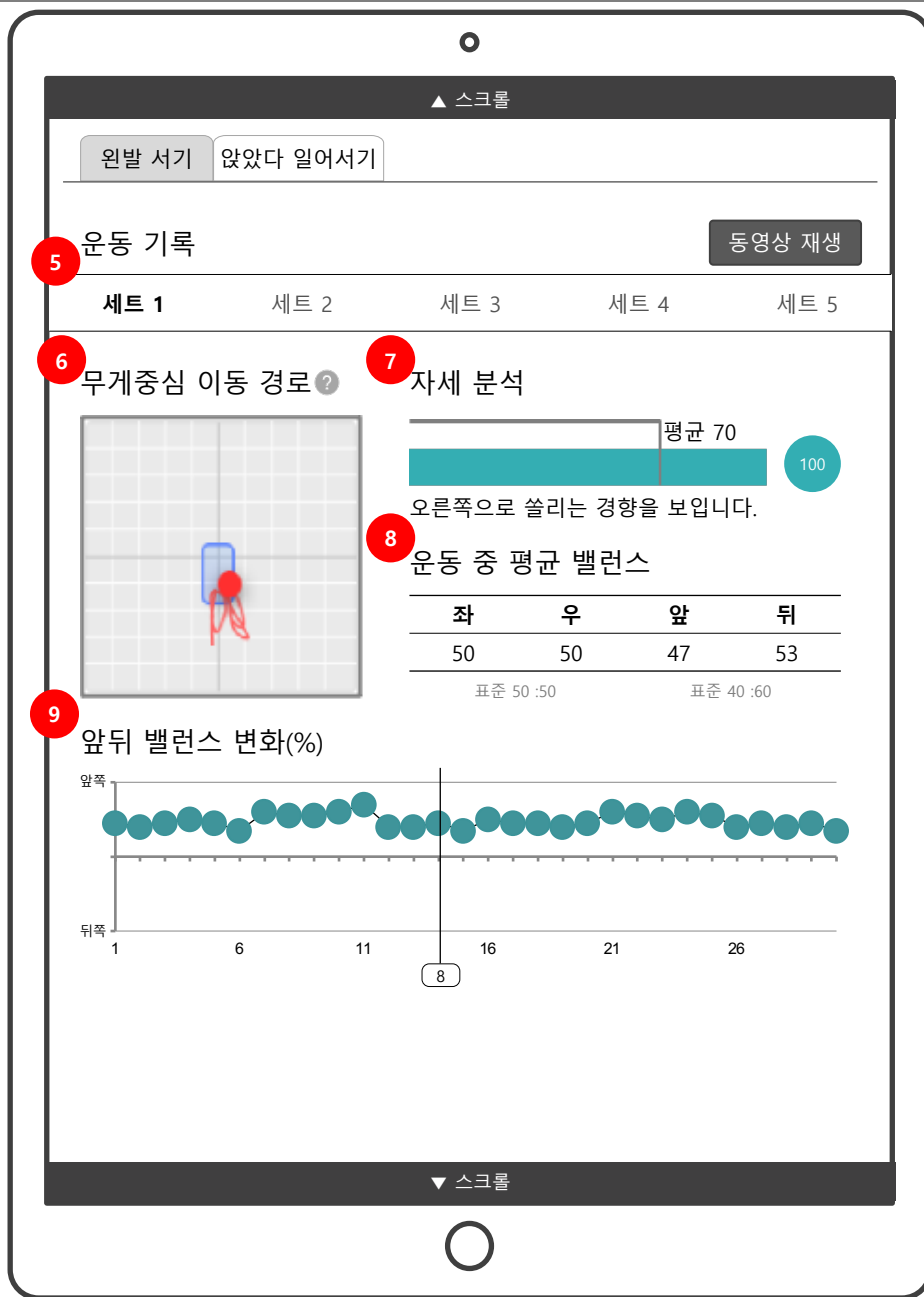


5. 운동 기록 탭:
각 세트 별 환자 운동 기록 출력
 6. 무게중심 이동 경로 영역:
- 동영상 촬영 중 기록된 COP의 전체 경로 라인(Line) 출력
 7. 자세 분석 영역:
- 해당 운동의 점수 표시, 평균점수 70 고정
- 색상: 70 이상은 블루, 70 미만은 주황
 8. 운동중 평균 밸런스 영역:
- 동영상 촬영 중 기록된 인솔 데이터 중 각 센서 별 평균값 출력
 9. 앞뒤 밸런스 변화 그래프 영역:
- x축: 초(s), 촬영한 동영상 길이가 그래프의 최대값으로 출력
- y 축: 각 센서의 밸런스 비중을 100% 기준으로 설정, 동영상의 첫 프레임 기준 앞/뒤 밸런스 변화량 출력
- 동영상 촬영 중 기록된 인솔 데이터를 초 단위로 계산하여 그래프 출력
- b. 페이지 로드 시 그래프 왼쪽에 노출

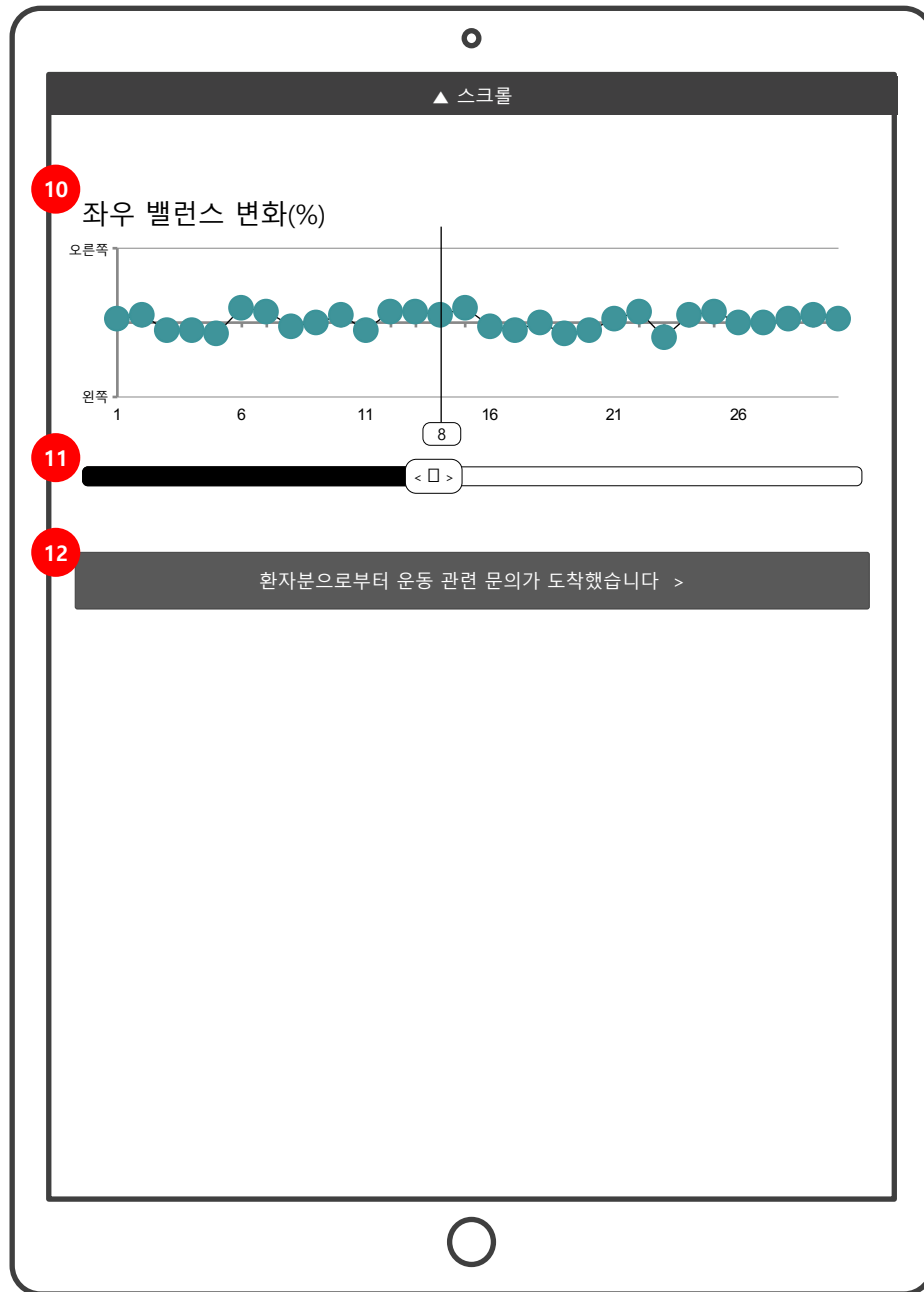

10. 좌우 밸런스 변화 그래프 영역: ㉠과 UI 동일
11. Seeker 영역:
- 동영상 촬영 시간을 전체 width로 지정, 좌우로 스와이프하여 시각 이동
 - 스와이프 시 ㉠에서 해당 시각에 맞는 COP 점 위치, ㉡, ㉢에서 해당 시각에 맞는 데이터가 인디케이터로 출력 업
12. 문의 확인 버튼
- 환자로부터 문의가 있는 경우에만 출력
 - 버튼 터치 시 문의 상세 페이지 팝업

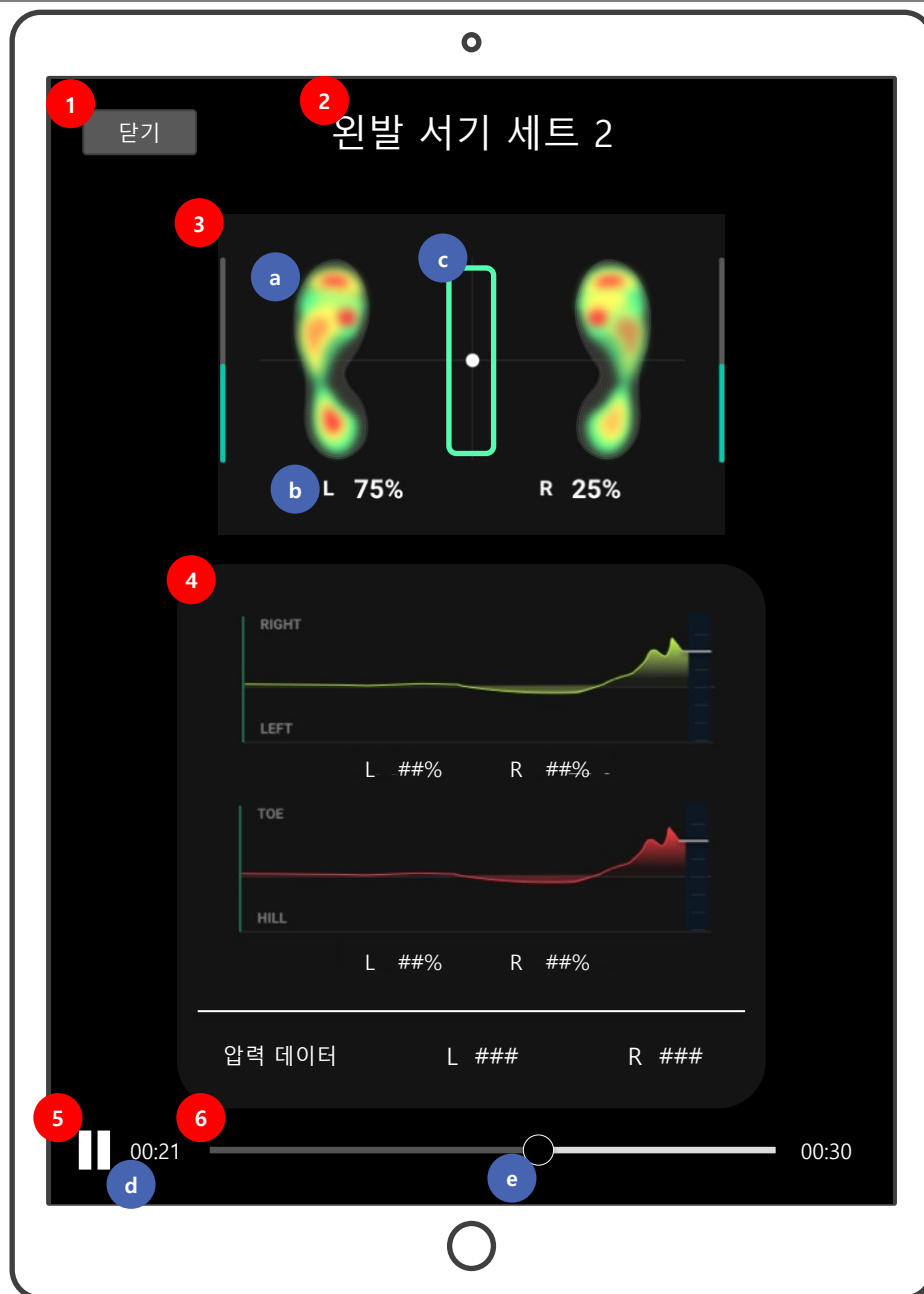

- 닫기 버튼:
- 터치 시 이전 화면으로 이동
- 타이틀:
- 운동 및 세트 출력
- 족저압 영역:
- ⑤ 영역의 Seeker가 이동함에 따라 데이터 출력
a. 운동 시 기록된 족저압 출력
b. 양쪽 밸런스 비중 출력
c. 밸런스 가이드 출력
- 그래프 영역:
- ⑤ 영역의 Seeker가 이동함에 따라 데이터 출력
- 재생/일시정지 버튼:
- 터치 시 ⑤ 타임라인 재생 및 ③, ④의 데이터 재생/일시정지
- 타임라인 영역:
d. 현재 @가 위치한 시점 출력
e. seeker: 좌우 스와이프하여 해당 시점의 ③의 데이터 출력

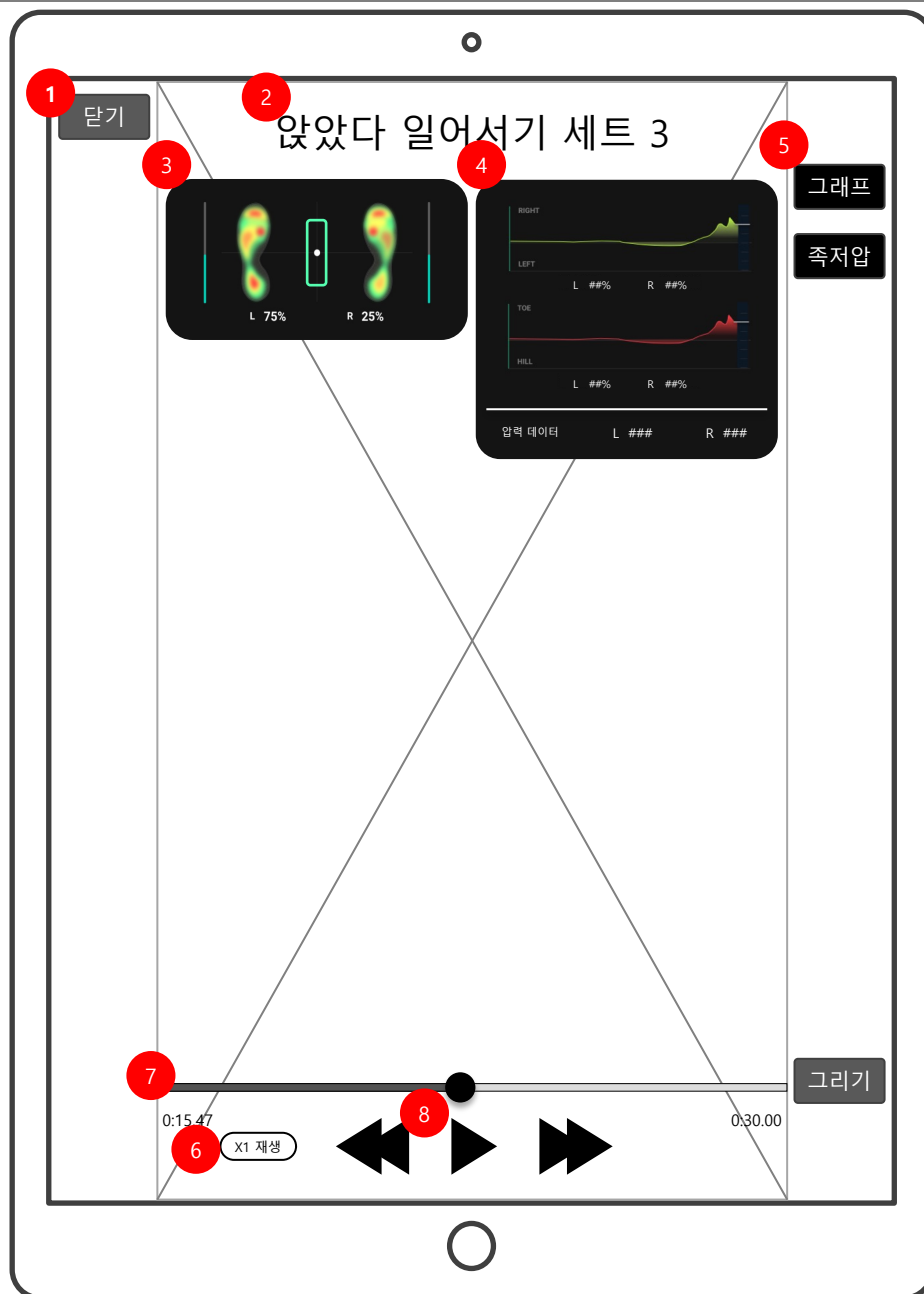

- 닫기 버튼:
- 터치 시 이전 화면으로 이동
- 타이틀:
- 운동 및 세트 출력
- 족저압 영역:
- ⑤ 영역의 Seeker가 이동함에 따라 데이터 출력
a. 운동 시 기록된 족저압 출력
b. 양쪽 밸런스 비중 출력
c. 밸런스 가이드 출력
- 그래프 영역:
- ⑤ 영역의 Seeker가 이동함에 따라 데이터 출력
- 인쇄 데이터 레이어 스위치:
- 터치 시 스위치 on/off
- 재생 속도 조절 스위치:
- x1 기본값
- 터치 시 x1, x1/2, x1/4 재생 속도가 순서대로 전환
- 타임라인 영역:
d. 현재 @가 위치한 시점 출력
e. seeker: 좌우 스와이프하여 해당 시점의 ③의 데이터 출력
- 동영상 컨트롤러 영역:
- 재생/일시정지 버튼 터치 시 동영상 재생 및 ③, ④의 데이터 재생/일시정지
- 좌우 Forward/backward 버튼 터치 시 1초 단위로 되감기/빨리감기

Page Description	환자 공통 > 환자 정보 > 정자세 히스토리 > 인솔 선택 창	Screen ID	HCP-A-28	Description
	<div data-bbox="327 97 1251 1379"><div data-bbox="364 165 1214 1285"><div data-bbox="721 434 857 474">인솔 연결</div><div data-bbox="1114 428 1168 482">✕</div><div data-bbox="526 519 1052 548">촬영 검사를 진행하기 전 사용할 인솔을 선택해 주세요.</div><div data-bbox="430 599 596 634">XS(230~240)</div><div data-bbox="430 674 654 705">연결중 ### 남음</div><div data-bbox="1023 634 1135 674">1 계속 진행</div><div data-bbox="430 751 571 785">S(245~255)</div><div data-bbox="1052 791 1102 816">연결</div><div data-bbox="430 828 762 856">마지막 연결: 2021.07.30 12:30</div><div data-bbox="430 905 584 939">M(260~270)</div><div data-bbox="1052 942 1102 968">연결</div><div data-bbox="430 982 762 1011">마지막 연결: 2021.07.30 12:30</div></div></div>			<div data-bbox="1578 94 1980 234"><div data-bbox="1578 94 1777 119">1. 계속 진행 버튼:</div><div data-bbox="1628 131 1980 234"><div data-bbox="1628 131 1980 157">- 이미 연결된 인솔의 경우 계속 진행</div><div data-bbox="1628 168 1740 194">레이블 출력</div><div data-bbox="1628 205 1935 234">- 터치 시 사진 촬영 카메라 팝업</div></div></div>

스케줄

고정

NEUROGAIT 홈 신규 등록 환자 스케줄 통계 문의 인출 설정

1 환자 전체 2 신규 스케줄 추가

3 오늘 2021년 9월 >

28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12 ##명	13	14 ##명	15 ##명	16	17 ##명	18
26 ##명	20	21	26 ##명	23	26 ##명	25
26 ##명	27	28 ##명	29 ##명	30	31 ##명	1

4 밸런스 운동 보행 운동

5 제갈훈 W1234 월 ##.##% 달성

6 왔었다 일어서기 | 세트 # 완료 다운로드

6 원발 서기 | 미진행 자세히 >

© Copyright 2021 SALTED.LTD

- 환자 필터:
 - 전체 적용 기본값
 - 터치 시 환자 선택 창 팝업
- 터치 시 신규 스케줄 추가 진행
- 캘린더 영역 - 월:
 - 화면의 top에서 아래로 스크롤 또는 캘린더 위로 스와이프 시 주 단위 캘린더 UI로 축소
 - * 참고: Toss > 홈 > 소비 > 전체 내역 > 더 보기
 - a. 터치 시 오늘 날짜로 캘린더 이동
 - b. 좌우 arrow 터치 시 월 단위 이동, 날짜 레이블 터치 시 월별 캘린더 선택 picker 팝업
 - c. 운동 스케줄이 있는 날짜의 숫자 아래 환자수 출력
- 밸런스 운동/보행 운동 분류 스위치
- 운동 스케줄 목록 영역:
 - ③ 영역에서 선택한 날짜에 예정된 스케줄 로드
 - 일반 환자 정렬: 이름, 환자 코드, 월 운동 달성률 출력
 - 월 달성률 산정 기준: 당일이 포함된 달의 1일부터 말일까지의 달성률 평균
 - 환자 셀 터치 시 예정 운동 목록 아코디언 UI 펼침/접음
 - e. ③의 날짜 셀 터치 시 ⑤ 영역의 날짜 헤더(㉔)가 목록 영역 top에 물림
 - f. 오늘 이외의 스케줄의 운동 셀(과거, 미래)은 자세히 버튼이 노출되지 않으며, 터치 시 액션 없음
- 클라우드 동기화 상태 아이콘:
 - 동기화 미완료, 동기화 완료 상태 출력
 - 의료진이 진행한 검사, 환자가 진행한 현재 또는 과거의 운동 기록만 업로드

NEUROGAIT 홈 신규 등록 환자 스케줄 통계 문의 인출 설정

환자 전체 ▾ 신규 스케줄 추가

오늘 < 2021년 9월 >

1	26 ##명	27	28 ##명	29 ##명	30	31 ##명	1
---	-----------	----	-----------	-----------	----	-----------	---

스케줄 밸런스 운동 보행 운동

9월 29일

제갈훈 W1234 월 ##.##% 달성 ▲

2 4 보행 | #분 보행 자세히 >
1 3 동영상 원발 부분부하 | 세트 # 완료 다운로드
 30초 | 답변 임시저장

9월 30일

연상근 W1234 월 ##.##% 달성 ▲

동영상 원발 부분부하 | 세트 # 완료 자세히 >
 30초 | 답변 임시저장

© Copyright 2021 SALTED.LTD

- 주간 캘린더:
 - top에서 위로 스크롤 또는 캘린더 아래로 스와이프 시 월 단위 캘린더로 확장
 - 좌우로 스와이프하여 주 단위 이동, 월 단위 이동 불가
 - 데이터가 해당하는 날짜로 포커스 이동이 되어야 함 / 모션 참고 : 토스 > 홈 > 소비 > 전체 내역 더보기
- 족저압 기록 운동:
 - 동영상 बै지 숨김 및 족저압 기록 문구 출력
- 동영상 촬영 운동:
 - 동영상 बै지 표시 및 촬영 동영상의 길이 출력
- 클라우드 동기화 상태 아이콘:
 - 동기화 미완료, 동기화 완료 상태 출력
 - 의료진이 진행한 검사, 환자가 진행한 현재 또는 과거의 운동 기록만 업로드

Page Description

연구 환자 스케줄 - 월간 > 보행 운동

Screen ID

HCP-A-29-2

Description

NEUROGAIT

홈

신규 등록

환자

스케줄

통계

문의

인솔

설정

환자 전체 ▾

신규 스케줄 추가

오늘

< 2021년 9월 >

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
##명

13

14
##명

15
##명

16

17
##명

18

26
##명

20

21

26
##명

23

26
##명

25

26
##명

27

28
##명

29
##명

30

31
##명

1

밸런스 운동

보행 운동

9월 29일

1

제갈훈

W1234

PD

월 ##.## 달성 ▴

4

보행 | #분 보행

자세히 >

문의 없음

동영상

원발 부분부하 | 세트 # 완료

다운로드


30초 | 답변 임시저장

1. 연구 환자 운동 스케줄 영역:

- 환자 정렬: 이름, 환자 코드, 질환명, 월

운동 달성률 출력

-

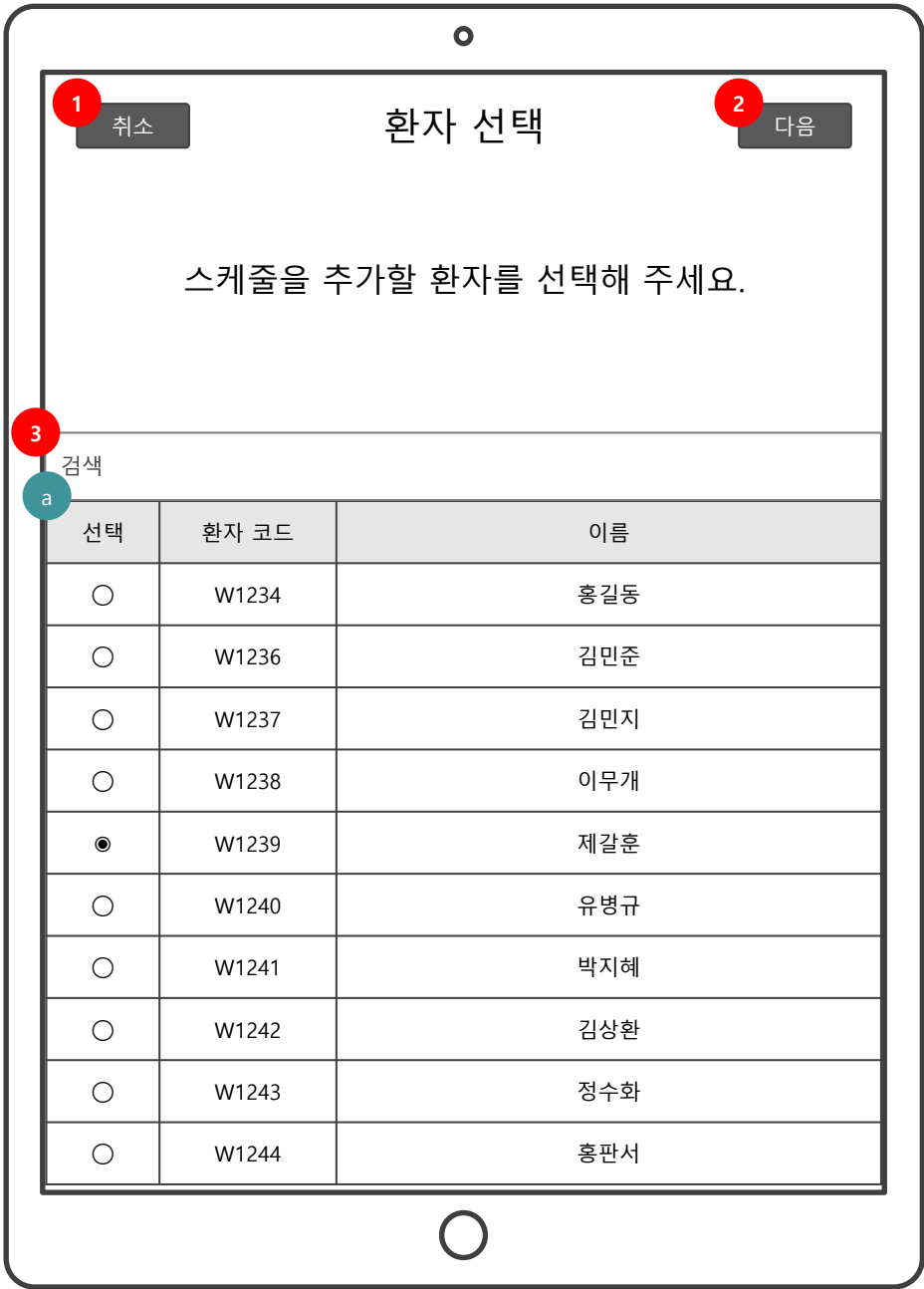

- 터치 시 스케줄 추가 취소
- 다음 버튼:
 - 환자 미선택 상태에서 비활성화
 - 버튼 터치 시 운동 추가 단계로 진행
- 환자 선택 영역:
 - 이름 또는 환자코드 입력 시 아래 목록에 결과 출력



- 환자 선택 영역:
 - 이름, 질환 또는 환자코드 입력 시 아래 목록에 결과 출력

3 이전

신규 스케줄 추가

추가

000 환자에게 다음 기간 동안
지정한 운동이 예정됩니다.

1 기간

a 2021.09.29 - 2021.11.04

b < 2021년 9월 >

28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

2 운동

c 운동 선택

- 기간 선택 캘린더:
 - 캘린더에서 날짜 터치하여 시작, 종료일 선택
 - 선택 입력란과 달력 포커싱 동시에 보여짐
 - a-1. 화면 진입 시 오늘부터 30일 이후까지의 기간 자동 입력
 - a-2. 터치 시 아래 캘린더 UI 아코디언 펼침
 - a-3. ㉠에서 날짜 선택 시 시작일, 종료일 반영
 - * 종료일보다 시작일이 뒤에 있을 경우 종료일 지정 삭제, 시작일 재지정
 - * 시작일보다 종료일이 앞에 있을 경우 시작일 재지정
- 운동 추가 영역:
 - c. 버튼 터치 시 운동 선택 페이지 팝업
- 버튼 터치 시 스케줄 추가 취소 confirm 출력

Page Description	일반/연구 환자 스케줄 > 신규 스케줄 추가 - 운동 미선택	Screen ID	HCP-A-32-1	Description
<div><div><div><div>1</div><div>이전</div></div><div><div>운동 선택</div><div>선택 완료</div></div></div><div><div>처방할 운동을 모두 선택해 주세요.</div><div><div>밸런스 운동</div><div>보행 운동</div></div></div><div><div>2</div><div><div>제자리 서기</div><div>최근 진행일: 2021. 10. 12</div></div><div><div>왼발 서기</div><div>최근 진행일: 2021. 10. 12</div></div><div><div>오른발 서기</div><div>최근 진행일: 2021. 10. 12</div></div><div><div>계단 오르내리기</div><div>최근 진행일: 2021. 10. 12</div></div><div><div>앉았다 일어서기</div><div>최근 진행일: 2021. 10. 12</div></div><div><div>뒤꿈치 들기</div></div></div></div>				<div><div>1. 버튼 터치 시 운동 선택 창 닫음</div><div>2. 운동 목록:<ul style="list-style-type: none">- 정렬: 최근 진행일 기준 최신순- 다중 선택 가능</div></div>

Page Description	일반/연구 환자 스케줄 > 신규 스케줄 추가 - 운동 선택	Screen ID	HCP-A-32-2	Description
<div><div><div><div><div>1</div><div>이전</div></div><div><div>운동 선택</div><div>2</div><div>선택 완료</div></div></div><div><div>운동을 총 3개 선택하셨습니다.</div><div><div>a</div><div>밸런스 운동</div><div>보행 운동</div></div></div><div><div>3</div><div><div><div>제자리 서기</div><div>최근 진행일: 2021. 10. 12</div></div><div><div>왼발 서기</div><div>최근 진행일: 2021. 10. 12</div></div><div><div>오른발 서기</div><div>최근 진행일: 2021. 10. 12</div></div><div><div>계단 오르내리기</div><div>최근 진행일: 2021. 10. 12</div></div><div><div>앉았다 일어서기</div><div>최근 진행일: 2021. 10. 12</div></div><div><div>뒤꿈치 들기</div></div></div></div></div></div>				<div><div>1. 버튼 터치 시 운동 선택 창 닫음</div><div>2. 터치 시 다음 단계로 진행</div><div>3. 운동 목록:<div><div>- 정렬: 최근 진행일 기준 최신순</div><div>- 다중 선택 가능</div><div>a. 다른 메뉴로 이동 시에도 ③에서 선택한 항목이 초기화되지 않음</div></div></div></div>

Page Description	일반/연구 환자 스케줄 > 신규 스케줄 추가 - 항목 입력 후	Screen ID	HCP-A-32-3	Description
				<ol style="list-style-type: none"> 1. 버튼 터치 시 운동 선택 취소 Confirm 출력 2. 운동 추가 버튼: <ul style="list-style-type: none"> - 각 운동 모두 ③ - ⑤의 정보를 입력한 모두 입력한 상태에서 활성화 - 터치 시 입력한 정보로 운동 추가 3. 운동 항목 탭: <ul style="list-style-type: none"> - 항목 영역이 화면 width를 초과할 경우 좌우 스와이프 가능 4. 요일 & 세트 지정 영역: <ul style="list-style-type: none"> - 비선택 상태로 페이지 로드 - 요일: 다중 선택 가능 - 선택한 스케줄 기간에 해당되지 않은 요일은 비활성화 - 세트: 1개 항목만 선택 가능 5. 최대 시간 지정 셀렉트: <ul style="list-style-type: none"> - admin에서 지정한 항목 정렬 6. 도움말 영역: <ul style="list-style-type: none"> - 선택 입력 항목

Page Description	일반 환자 스케줄 > 신규 스케줄 추가 - 입력 후	Screen ID	HCP-A-32-4	Description
<div><div><div><div>1 취소</div><div>2 추가</div></div><div>3</div><div>4 기간</div><div>5 운동</div><div>6</div></div><div><div>신규 스케줄 추가</div><div>OOO 환자에게 다음 기간 동안 지정한 운동이 예정입니다.</div><div>2021.10.29 ~ 2021.11.04</div><div><div>운동</div><div>보행 운동 왼발 부분부하</div><div>월, 수, 금 # 세트 도움말 내용입니다. 도움말 내용입니다. 도움말...</div><div>밸런스 운동 왼발 서기</div><div>월, 수, 금 # 세트 도움말 내용입니다. 도움말 내용입니다. 도움말...</div><div>운동 추가</div></div></div></div> <div><div>1. 버튼 터치 시 스케줄 추가 취소 Confirm 출력</div><div>2. 스케줄 추가 버튼: - 터치 시 입력한 정보로 운동 추가</div><div>3. 운동 항목 탭: - 항목 영역이 화면 width를 초과할 경우 좌우 스와이프 가능</div><div>4. 설정한 기간 출력</div><div>5. 각 운동 카드 드래그 앤 드롭 하여 순서 변경 가능</div><div>6. 터치 시 운동 선택 페이지 팝업</div></div>				


문의

Page Description	문의 목록	Screen ID	HCP-A-33	Description																																											
<div><div>NEUROGAIT</div><div>홈신규 등록환자스케줄통계문의인솔설정</div><div>문의</div><div><div>모든 운동</div><div>1</div><div>▼</div></div><div>검색</div><div>답변 대기만 정렬</div><div>2</div><div>3</div><table><thead><tr><th>운동명</th><th>작성자</th><th>작성일</th><th>답변 상태</th></tr></thead><tbody><tr><td>앉았다 일어서기</td><td>홍길동</td><td>2021.07.28</td><td>답변 대기</td></tr><tr><td>보행</td><td>사공민아</td><td>2021.07.29</td><td>답변 완료</td></tr><tr><td>보행</td><td>김민준</td><td>2021.07.30</td><td>답변 대기</td></tr><tr><td>왼발 부분부하</td><td>김민지</td><td>2021.07.31</td><td>답변 완료</td></tr><tr><td>왼발 부분부하</td><td>이무개</td><td>2021.08.01</td><td>답변 완료</td></tr><tr><td>왼발 서기</td><td>제갈훈</td><td>2021.08.02</td><td>임시 저장</td></tr><tr><td>보행</td><td>유병규</td><td>2021.08.01</td><td>답변 완료</td></tr><tr><td>오른발 부분부하</td><td>박지혜</td><td>2021.08.02</td><td>답변 대기</td></tr><tr><td>뒤꿈치 들기</td><td>김상환</td><td>2021.08.01</td><td>답변 대기</td></tr><tr><td>제자리 서기</td><td>정수화</td><td>2021.08.02</td><td>답변 대기</td></tr></tbody></table><div><div>◀◀</div><div>◀</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>▶</div><div>▶▶</div></div><div>© Copyright 2021 SALTED.LTD</div></div> <div><div>1. 운동 선택</div><div>2. 답변 대기, 임시저장 게시물만 출력</div><div>3. 답변 완료 컬러 연하게 표현</div></div>				운동명	작성자	작성일	답변 상태	앉았다 일어서기	홍길동	2021.07.28	답변 대기	보행	사공민아	2021.07.29	답변 완료	보행	김민준	2021.07.30	답변 대기	왼발 부분부하	김민지	2021.07.31	답변 완료	왼발 부분부하	이무개	2021.08.01	답변 완료	왼발 서기	제갈훈	2021.08.02	임시 저장	보행	유병규	2021.08.01	답변 완료	오른발 부분부하	박지혜	2021.08.02	답변 대기	뒤꿈치 들기	김상환	2021.08.01	답변 대기	제자리 서기	정수화	2021.08.02	답변 대기
운동명	작성자	작성일	답변 상태																																												
앉았다 일어서기	홍길동	2021.07.28	답변 대기																																												
보행	사공민아	2021.07.29	답변 완료																																												
보행	김민준	2021.07.30	답변 대기																																												
왼발 부분부하	김민지	2021.07.31	답변 완료																																												
왼발 부분부하	이무개	2021.08.01	답변 완료																																												
왼발 서기	제갈훈	2021.08.02	임시 저장																																												
보행	유병규	2021.08.01	답변 완료																																												
오른발 부분부하	박지혜	2021.08.02	답변 대기																																												
뒤꿈치 들기	김상환	2021.08.01	답변 대기																																												
제자리 서기	정수화	2021.08.02	답변 대기																																												



- 터치 시 안내 문구 삭제되며 키패드 활성화
- 파일 최대 5개 첨부 가능

인솔

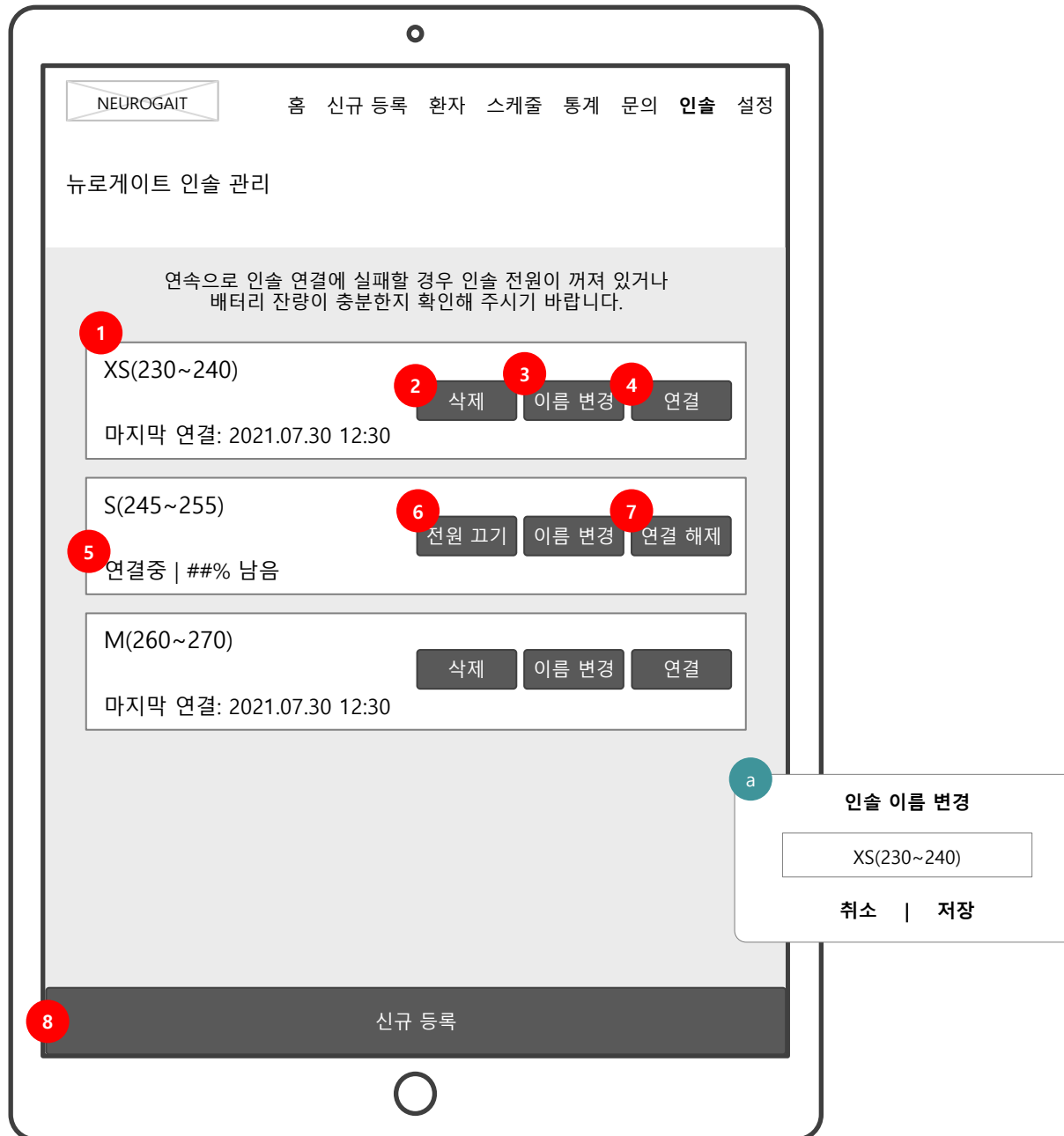

- 등록된 인슐 목록:
 - 최근 마지막 연결 시점 기준으로 정렬
 - 기존 이름이 입력된 상태의 텍스트 입력 화면이 출력(팝업창)
- 버튼 터치 시 등록 인슐 삭제 confirm 출력
- 터치 시 인슐 이름 변경 텍스트 필드 팝업
 - 변경 전 이름이 입력된 상태로 팝업
- 연결 버튼:
 - 연결되지 않은 인슐의 경우 버튼 표시
 - 버튼 터치 시 해당 인슐과 블루투스 연결 시도
 - 연결 중 버튼 레이블이 프로그레스 spinner로 변경
 - 연결 실패 시 토스트 팝업 출력, 메시지는 "인슐 연결에 실패하였습니다. 배터리가 부족하지 않은지 확인 후 다시 연결해 주시기 바랍니다."
 - 연결 성공 시 레이블이 연결 해제로 변경, 마지막 연결 일시 표시 영역이 배터리 잔량 표시로 변경
- 연결된 인슐:
 - 연결된 인슐의 경우 배터리 잔여량 표시
 - 배터리가 10% 미만일 경우 빨강으로 표시
- 터치 시 인슐 전원 차단 confirm 출력
- 터치 시 등록 화면으로 이동

(알럿 메시지 확인은 아래 url 참고)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

Page Description	환자 > 환자 정보 > 인슐 보정 1	Screen ID	HCP-A-35	Description
<p>1 취소</p> <h2>뉴로게이트 인슐 등록</h2> <p>뉴로게이트 인슐 등록을 진행합니다. 아래 단계 별 가이드를 따라주세요. 도중 인슐이 원래대로 뒤집어질 경우 연결에 실패할 수 있습니다.</p> <hr/> <p>STEP 1 뉴로게이트 인슐을 뒤집어 주세요. 2 인슐 검색</p> <hr/> <p>STEP 2 3 왼쪽 인슐에 진동이 올리면 진동 확인 버튼을 눌러주세요. 4 진동 확인 다시 찾기</p> <hr/> <p>STEP 3 오른쪽 인슐에 진동이 올리면 진동 확인 버튼을 눌러주세요. 진동확인 다시찾기</p> <hr/> <p>STEP 4 인슐 연결에 성공했습니다. 아래 등록 버튼을 눌러주세요.</p> <hr/> <p>5 등록</p>				<ol style="list-style-type: none"> 인슐 목록페이지로 이동 인슐 검색 시작 인슐 검색 실패시 다시 시도 버튼 출력 다시 찾기 진행 단계에 맞게 안내 문구 활성화 인슐 검색 시 진동 확인 버튼과 다시찾기 버튼 활성화(컬러 변경) 인슐 연결 완료 시 등록 버튼 활성화(버튼 컬러 변경)

뉴로게이트 인술 등록

다음에 변경 1

뉴로게이트 인술의 연결이 완료되었습니다.

인술 이름을 변경할 수 있습니다.
이름을 새로 지으시겠어요?

이름 XS(230~240)


입력한 이름으로 변경 2

1. 인술 목록으로 이동
2. 입력한 이름으로 등록
동일한 인술 이름이 있을 경우 알럿 메시지
알럿 메시지 참고 - 33번 메시지
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276
"이미 사용중인 인술 이름입니다. 다른 이름을 사용해 주세요."

설정

Page Description	설정	Screen ID	HCP-A-36	Description
				<ol style="list-style-type: none"> 안 읽은 알림이 있는 경우 설정에 뱃지 표시 소속 병원 및 회원가입 시에 입력한 이름 출력 알림 버튼: <ul style="list-style-type: none"> - 읽지 않은 알림 개수 뱃지 출력 - 터치 시 알림 내역 화면으로 진입 Off 상태 default - 삭제 가능한 데이터가 없는 경우 "삭제" 버튼 비활성화 - 삭제 가능한 데이터가 있는 경우 "삭제" 버튼 활성화 - 삭제 버튼 터치 시 ④에 집계된 파일 삭제 - 터치 시 토틸 팝업 - 삭제가 가능한 미디어 파일의 총합 파일 크기 출력 - 파일 크기가 0일 경우 0으로 출력 터치 시 동기화 진행 후 데이터 삭제 자주 묻는 질문 화면으로 이동 터치 시 로그아웃 confirm 출력 (confirm 메시지 확인은 아래 url 참고) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vqBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276
			<div> <div>6</div> <div> <p>이 기능은 뉴로게이트 앱을 통해 측정 후 저장한 파일을 삭제함으로써 태블릿 PC의 저장공간을 관리합니다.</p> <p>확인</p> </div> </div>	

Page Description	설정 > 알림 - 환자 문의	Screen ID	HCP-A-36-7	Description
				<ol style="list-style-type: none">터치 시 설정 메뉴로 이동터치 시 읽지 않은 알림 모두를 읽음 처리카테고리 분류 세그먼트 컨트롤:<ul style="list-style-type: none">환자 문의 기본값읽지 않은 알림이 있는 탭에 붉은 뱃지 표시안 읽은 문의 알림:<ul style="list-style-type: none">카테고리(문의/공지), 환자 이름, 문의 강조터치 시 해당 알림 항목 읽음 처리, "문의 > 문의 상세" 화면으로 이동읽은 문의 알림:<ul style="list-style-type: none">카테고리(문의/공지), 환자 이름, 문의 강조

Page Description	설정 > 알림 - 공지	Screen ID	HCP-A-36-8	Description
				<ol style="list-style-type: none">터치 시 설정 메뉴로 이동터치 시 읽지 않은 알림 모두를 읽음 처리카테고리 분류 세그먼트 컨트롤:<ul style="list-style-type: none">- 모든 알림이 읽음 처리됐을 시에 붉은 뱃지 숨김읽은 공지 알림:<ul style="list-style-type: none">- 카테고리(문의/공지), 환자 이름, 문의 강조- 터치 시 "문의 > 문의 상세" 화면으로 이동

Page Description	설정 > 계정 정보	Screen ID	HCP-A-36-1	Description												
<div><div><div>1</div><div>이전</div></div><div>계정 정보</div><div><div>2</div><div>수정</div></div></div> <table><tr><td>이름</td><td>제갈훈</td></tr><tr><td>이메일</td><td>hospital@gmail.com</td></tr><tr><td>비밀번호</td><td>●●●●●●●●●●●●●●</td></tr><tr><td>휴대폰번호</td><td>010-1234-5678</td></tr><tr><td>센터코드</td><td>AA123456</td></tr><tr><td>직군</td><td>의료진 재활치료과</td></tr></table>				이름	제갈훈	이메일	hospital@gmail.com	비밀번호	●●●●●●●●●●●●●●	휴대폰번호	010-1234-5678	센터코드	AA123456	직군	의료진 재활치료과	<div>1. 터치 시 "설정" 화면으로 복귀</div> <div>2. 터치 시 정보 수정 UI로 변환</div>
이름	제갈훈															
이메일	hospital@gmail.com															
비밀번호	●●●●●●●●●●●●●●															
휴대폰번호	010-1234-5678															
센터코드	AA123456															
직군	의료진 재활치료과															

이전 계정 정보 1 저장

2 이름	제갈훈
이메일	hospital@gmail.com
비밀번호	<p>a 비밀번호를 입력해 주세요.</p> <p>b 비밀번호를 한 번 더 입력해 주세요.</p> <p>비밀번호가 일치하지 않습니다.</p>
휴대폰 번호	010-1234-5678
센터코드	AA123456
5 직군	<p>● 의료진 ○ 물리치료사 ○ 운동치료사 ○ 직접입력</p> <p>삼성서울병원 재활의학과</p>

- “수정” 버튼에서 전환된 “저장” 버튼
- 수정 내역이 없을 경우 버튼 비활성화
- 수정 내역이 있는 상태에서 버튼 터치 시 변경 내용 저장, 일반 UI로 전환
- 이름 변경 불가
- 입력한 내용이 없는 경우 비밀번호를 변경하지 않음
 - a를 입력하지 않은 상태에서 입력한 후 “저장” 버튼 터치 시 알럿 메시지 출력
 - 두 텍스트필드의 입력 내용이 다를 경우 영역 아래에 가이드 문구 생성: “비밀번호가 일치하지 않습니다.”
 - 두 텍스트필드의 입력 내용이 같을 경우 영역 아래에 가이드 문구 생성: “비밀번호가 일치합니다.”
- 숫자만 입력 가능
- 의료진 선택한 경우 직군 선택 버튼 아래 진료과 셀렉트 표시


(알럿 메시지 확인은 아래 url 참고)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

Page Description	설정 > 앱 서비스 이용 약관 전문	Screen ID	HCP-A-36-3	Description
	<div data-bbox="327 97 1253 1378"><div><div>1</div><div>이전</div></div><div><div>2</div><div>2021.11.11 ▼</div></div><div><h3>앱 서비스 이용약관</h3></div><div><h4>제 1장 약관의 적용</h4></div><div><p>제 1조 (목적)</p><p>이 약관은 주식회사 솔티드(이하 "회사"라 합니다)가 제공하는 솔티드 골프 서비스(이하 "서비스"라 합니다)를 이용함에 있어 서비스와 이용자(이 약관에 동의하지 않은 비회원을 말합니다) 또는 회원(이 약관에 동의하여 회사와 이용계약을 체결하고 회사가 제공하는 서비스를 이용할 수 있는 자를 말합니다)의 권리 의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.</p><p>제 2조 (용어의 정의)</p><p>이 약관에서 제공하는 용어의 정의는 다음과 같으며 관계 법령 및 서비스 안내에서 정하는 바에 따릅니다.</p><ol style="list-style-type: none">1) 서비스: 골프 강의 Youtube 콘텐츠 페이지로 이동할 수 있는 링크나 골프 프로 골퍼의 클럽 별 자체 동영상 콘텐츠를 제공하고 이용자의 골프 스윙을 녹화하거나 솔티드 스마트 인솔을 연동하여 행동에 따른 인솔 데이터를 실시간으로 조회, 기록, 저장할 수 있는 모바일(Android, iOS, iPadOS) 애플리케이션 서비스를 말합니다.2) 계정: 회원 별 서비스 이용 이력을 관리하기 위해 설정한 회원 식별 단위를 말합니다.3) 회사가 제공하는 서비스를 하나의 아이디(ID)와 비밀번호로 회원 인증, 회원정보 변경, 회원 가입 및 탈퇴 등을 관리할 수 있도록 회사가 정한 로그인정책 정책을 말합니다. 이때, ID는 이용자가 가입한 기존의 카카오톡, Facebook, Google, Apple 등 최대 3개의 이메일로 제한합니다.4) 모바일 디바이스: 회원이 사용하는 휴대전화, 태블릿PC 등의 본 서비스를 이용할 수 있는 전자기기를 말합니다.5) 솔티드 스마트 인솔: 모바일 디바이스와 블루투스 통신으로 연동되어 서비스가 제공될 수 있는 사물인터넷 기술 기반 스마트 인솔 디바이스를 말합니다.6) 인솔 데이터: 회원이 솔티드 스마트 인솔을 신발에 장착하여 지면에 썼을 때 솔티드 스마트 인솔이 받는 압력을 데이터화한 것을 말합니다.7) 데이터: 회원이 직접 제작하거나 백업한 동영상 및 드릴 연습 기록 파일을 말합니다. 동영상에는 인솔 데이터가 포함될 수 있습니다.8) 백업: 회원이 모바일 디바이스에 저장한 데이터를 서버에 동기화하는 행위를 말합니다.9) 회원 탈퇴: 회원이 회사와의 이용계약을 해지하는 행위를 말합니다.</div></div>			<ol style="list-style-type: none">1. 터치 시 "설정" 화면으로 복귀2. 약관 수정일 출력 클릭 시 해당 일자의 약관 출력 약관 개정 최근일 순으로 출력/ 기본은 최근 약관 내용 세팅

Page Description	설정 > 개인정보 처리방침	Screen ID	HCP-A-36-4	Description
<div><div><div>1</div><div>이전</div></div><div><div>2</div><div>2021.11.11 ▼</div></div><div><p>주식회사 솔티드(이하 "회사")는 개인정보 보호법에 따라 회원의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리지침을 수립하여 회원에게 공개합니다.</p><p>제1조 (개인정보의 수집 및 이용목적) 회사는 다음의 목적을 위하여 개인정보를 수집하고 처리합니다. 처리하고 있는 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 이용되지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우에는 개인정보 보호법 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행할 예정입니다.</p><p>[회원 가입 및 관리] 회원 가입의료진 확인, 회원제 서비스 제공에 따른 본인 식별 및 인증, 회원자격 유지 및 관리, 제한적 본인확인제 시행에 따른 본인확인, 서비스 부정이용 방지, 만 14세 미만 아동의 개인정보 처리시 법정대리인의 동의여부 확인</p><p>[재화 또는 서비스 제공] 연령, 성별, 접속 빈도 및 통계 분석 등을 통한 서비스 개선, 이용자의 성향 추정에 따른 맞춤형 콘텐츠 및 최적화된 서비스 제공, 신규 서비스 및 콘텐츠 또는 상품 개발, 서비스 방문 및 이용 기록의 분석</p><p>[고충처리] 민원인의 신원 확인, 민원사항 확인, 사실조사를 위한 연락·통지, 처리결과 통보의 목적</p><p>[서비스 관련 공지 및 마케팅] 서비스 관련 각종 고지 및 통지, 이벤트 정보 및 광고성 정보 제공 등의 마케팅 및 프로모션, 접속 빈도 파악의 목적</p><p>제2조 (수집하는 개인정보의 항목) 회사가 수집하는 개인정보는 서비스 이용에 필요로 필요한 항목과 회원의 선택에 따라 수집되는 항목으로 나뉘며 개인정보의 수집 시점과 항목은 아래와 같습니다.</p><ol style="list-style-type: none">회원 가입 신청 시 수집<ol style="list-style-type: none">필수: 카카오, Google, Apple, Facebook 중 1개 계정의 ID(이메일)선택: 이름(닉네임), 프로필 사진, 성별, 생년월일서비스 이용 과정이나 사업처리 과정에서 다음과 같은 정보들이 자동으로 수집될 수 있음</div></div> <div><ol style="list-style-type: none">터치 시 "설정" 화면으로 복귀약관 수정일 출력 클릭 시 해당 일자의 약관 출력 약관 개정 최근일 순으로 출력/ 기본은 최근 약관 내용 세팅</div>				

Page Description	설정 > 자주 묻는 질문	Screen ID	HCP-A-36-5	Description
<div><div><div><div>1</div><div>이전</div></div><div><div>2</div><div>전체 ▼</div></div><div><div><div>3</div><div>[카테고리명] 인술 구매 문의는 어디로 해야 하나요?</div></div><div><p>인술 구매 문의는 고객 센터로 연락해 주세요. 문의 전화 080-4048-3912 고객 센터 운영시간 09:30 ~ 17:30 인술 제품 소개서.pdf</p></div><div><div>[카테고리명] 문의는 어디로 해야 하나요?</div></div><div><div>[카테고리명] 문의는 어디로 해야 하나요?</div></div><div><div>[카테고리명] 문의는 어디로 해야 하나요?</div></div></div></div></div>				<div><div>1. 터치 시 "설정" 화면으로 복귀</div><div>2. 카테고리 출력 관리자 관리에서 카테고리 설정이 되어 있지 않은 경우 해당 영역 삭제</div><div>3. 클릭 시 내용이 펼쳐짐 (아코디언) 재 클릭 시 내용이 닫힘 별도 페이지 없음</div></div>

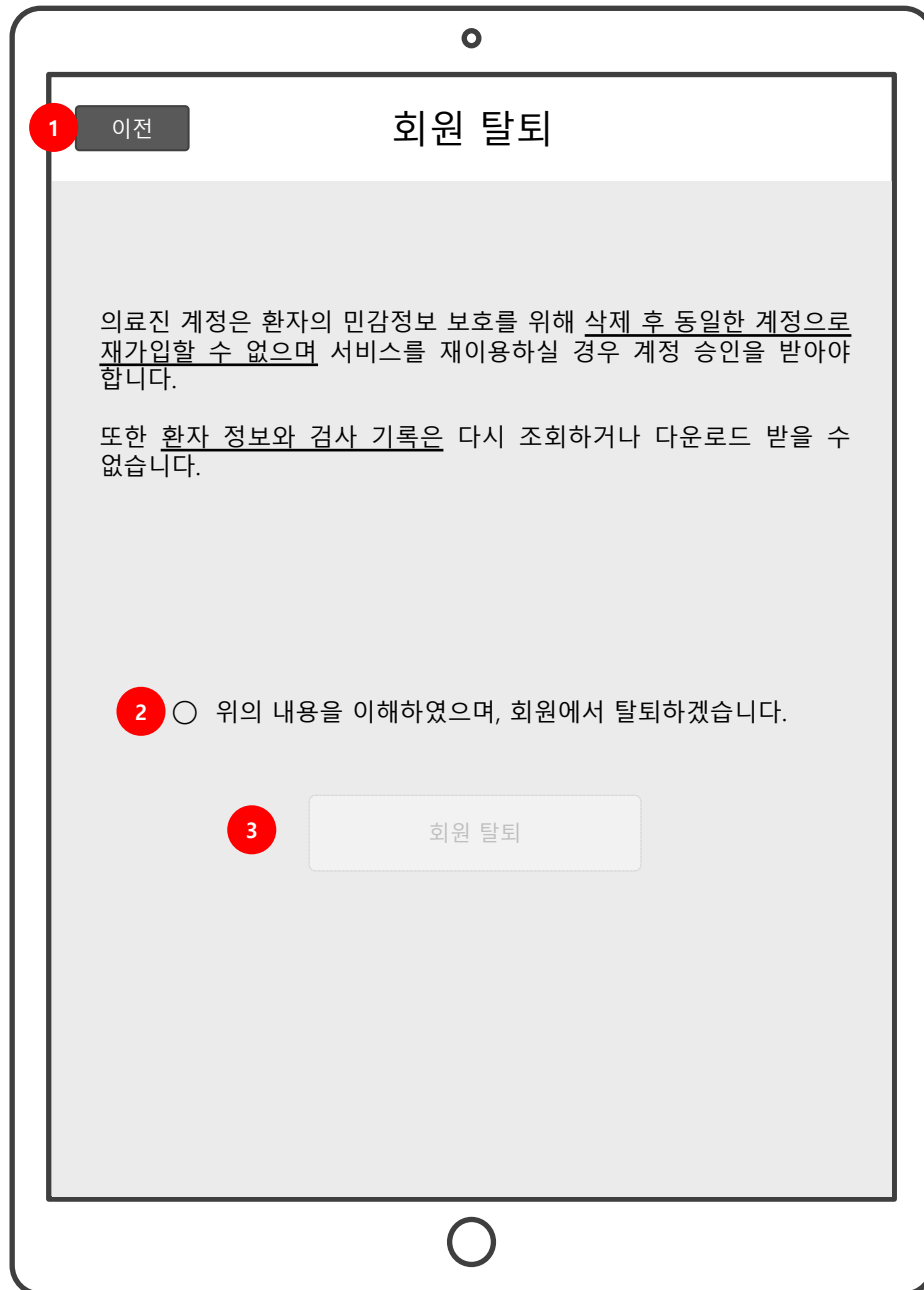

1. 터치 시 "설정" 화면으로 복귀
2. 터치 시 체크박스 체크, ③의 버튼 활성화
3. 터치 시 회원 탈퇴, "로그인" 화면 로드

End Of Document