



NEUROGAIT(App 및 Web) 시스템 개발

화면설계서 – Patient App(Offline ver)

Document Version : v1.0


Release Date : 2021.11.01

Organization : 솔티드

Author : 유병규

구분	소속	역할	담당자	확인일	확인
작성	솔티드(주)	PA	유병규		
동료검토	솔티드(주)	기획PA	제갈훈		
동료검토	픽스프레임	기획PL	정수화		
동료검토	솔티드(주)	개발PL	최성찬		
동료검토	픽스프레임	PM	김상환		
검토	솔티드	사업총괄	연상근		
인수/승인	솔티드	총괄PM	강경훈		


날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.10.19	0.1	최초 작성	<ul style="list-style-type: none"> 최초 작성 	정수화
2021.10.19	0.2	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 리뷰 이후 내용 보완 인솔 연결 화면 추가 	정수화
2021.10.22	0.3	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> Stand alone 시나리오 변경 	유병규
2021.10.25	0.4	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> Stand alone □ Offline 용어 변경 동영상 플레이 등 수정 설정화면 삭제 홈 화면에서만 메뉴바 노출 (나머지 화면에서 삭제) 	김상환
2021.10.29	0.41	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 홈 <ul style="list-style-type: none"> 화면 구성 변경 스케줄 없을 경우 시나리오 추가 	유병규
2021.11.01	1.0	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 동영상 촬영 <ul style="list-style-type: none"> 밸런스 가이드 출력 추가 	유병규

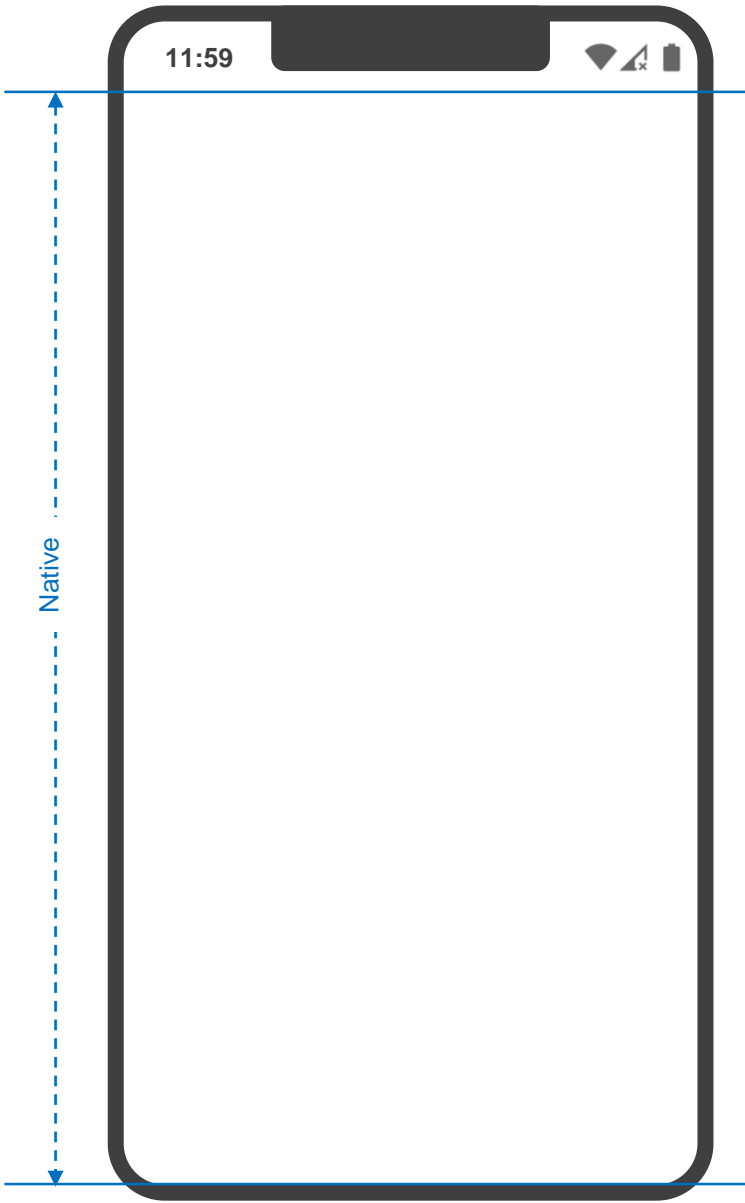Page Description	스플래쉬	Screen ID	ST-PT-A-01	Description
				<ol style="list-style-type: none">1. 스플래쉬<ul style="list-style-type: none">- 스플래쉬에서 모바일 데이터 연결 확인- 모바일 미연결 시 기존 로그인 정보를 이용하여 로그인 후 stand alone 으로 APP 이용


1. 오늘 날짜 및 요일 표시
2. 오늘 운동 달성률, 총 운동 수, 미진행 운동 수
3. 오늘의 결과 표시
 - 운동 최소 1개 진행하지 않았을 경우 @로 표시
4. 오늘의 운동 리스트 출력
 - 가로 스와이프
 - 등록된 운동 스케줄 중 아래와 같은 순서로 출력
 - 진행중 -> 대기 -> 완료
5. 마지막은 운동 화면으로 이동되도록 바로가기 배너 제공
6. 기록하기 버튼 클릭 시 측정하기 화면으로 이동




홈

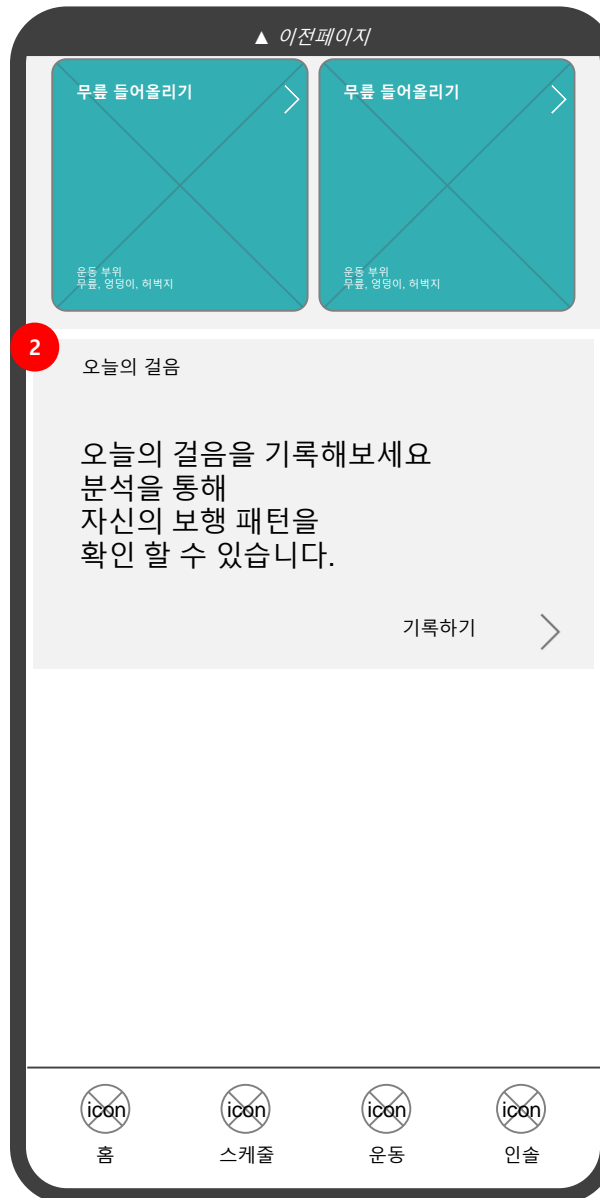

- 추천 운동
 - 추천 운동 리스트 표시
 - 전체, 보행, 밸런스 선택
 - > 보행 운동 : 보행, 왼발 부분부하, 오른발 부분부하
 - > 밸런스 운동 : 제자리 서기, 스쿼트, 왼발 외발 서기, 오른발 외발 서기, 계단 오르기/내리기, 의자에서 앉기/서기, 까치발
 - 운동 tap 시 선택된 운동을 스케줄에 추가, 운동화면으로 이동 후 해당 운동 표시
- 기록하기 버튼 클릭 시 측정하기 화면으로 이동

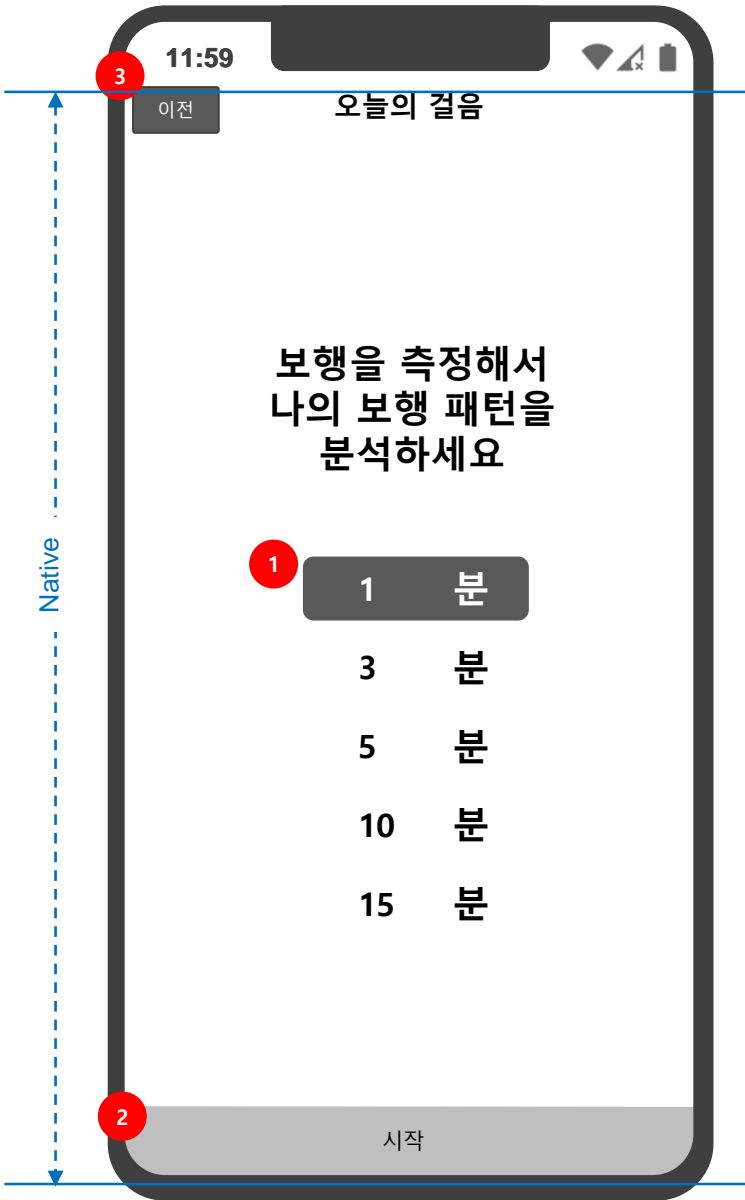Page Description	홈 > 오늘의 걸음 > 기록하기 > 시간 선택	Screen ID ST-PT-A-05-1	Description
			<ol style="list-style-type: none">보행 시간 선택<ul style="list-style-type: none">- 시간 선택 시 선택된 시간 포커스- 시간 변경 될 수 있음시작<ul style="list-style-type: none">시작 tap 시 측정 화면으로 이동이전<ul style="list-style-type: none">- 홈으로 이동안드로이드 이전버튼 tap<ul style="list-style-type: none">- 1번 : 홈으로 이동

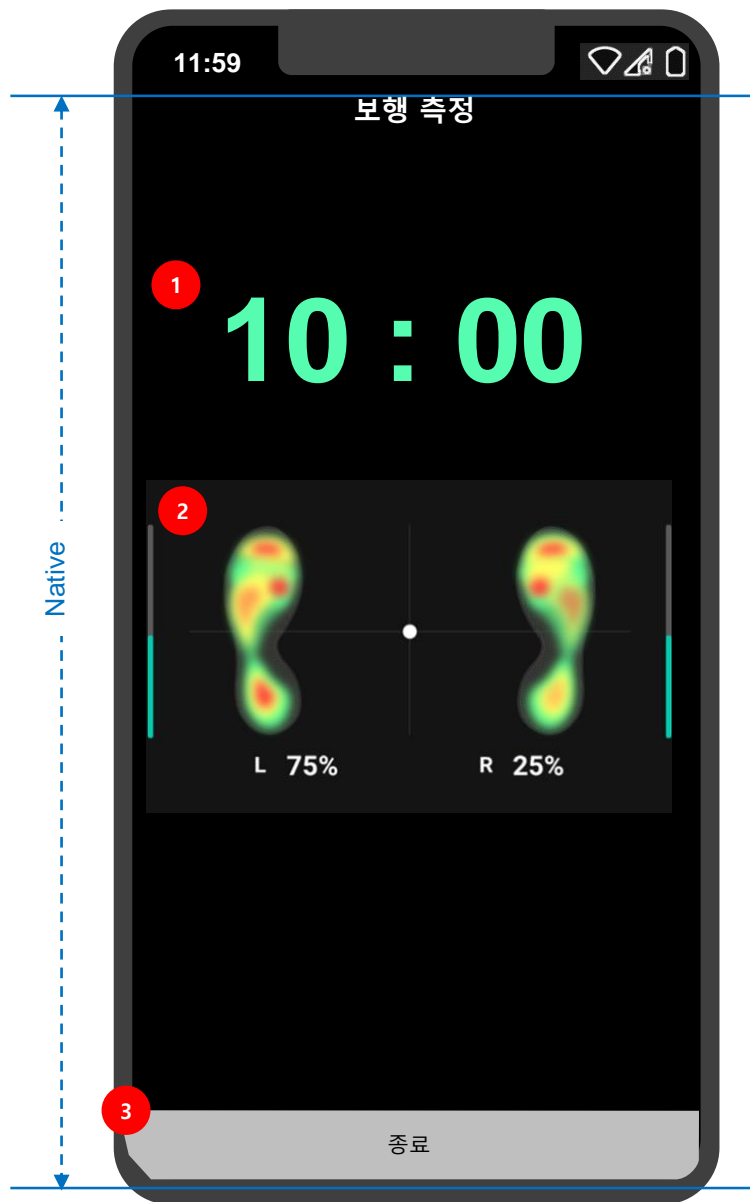


1. 타이머 표시
 - 타이머 종료 시 홈으로 이동
 - 홈에서 분석된 데이터 표시
2. 족저압
 - 측정 중 실시간 족저압 및 밸런스 표시

Native



스케줄

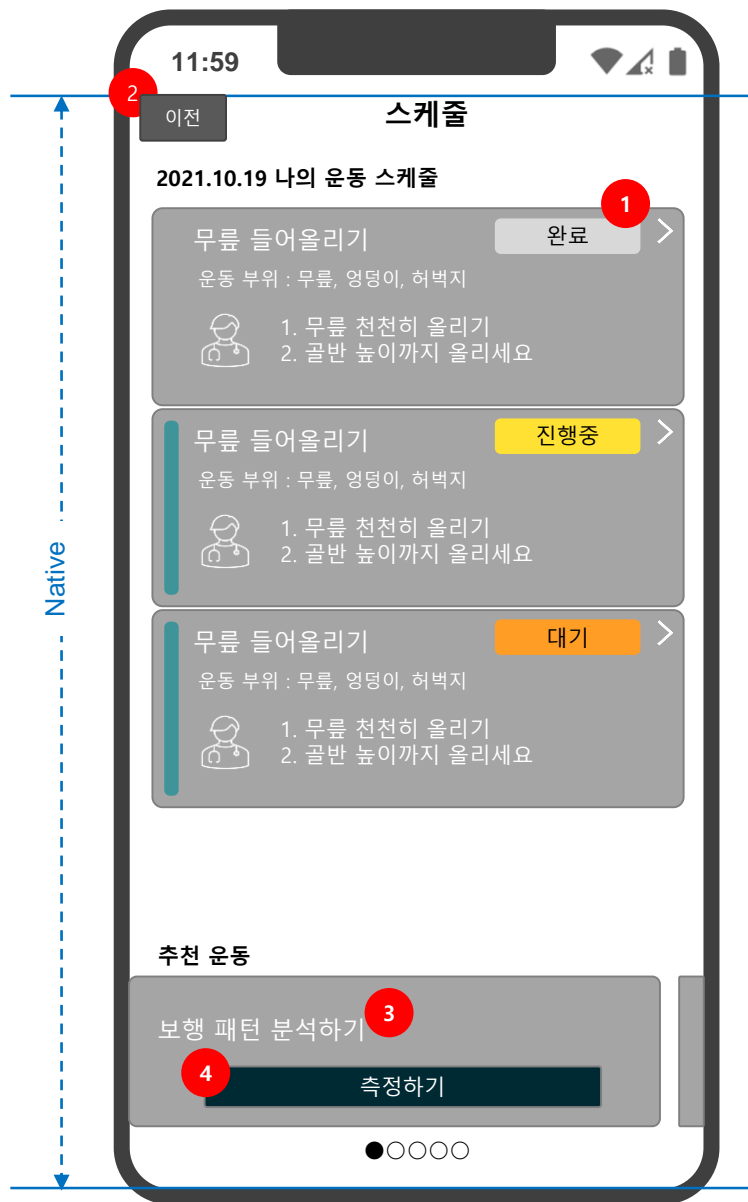


1. 진행 상태 표기
완료, 진행중, 대기
터치 시 운동 상세 페이지로 이동
2. 이전 버튼:
- Tap 시 이전 화면으로 이동
3. 추천 운동에 기본 보행 운동 측정 배너
우선 출력
- 다른 추천 운동 선택 시 해당 운동 대기
화면으로 이동
 > 운동 횟수 1회 설정
4. 측정하기 화면으로 이동

하단 메뉴바는 홈 화면에서만 노출
(10/25)


HO
OH

Page Description	운동	Screen ID	ST-PT-A-06	Description
<div><div>Native</div><div><div><div>11:59</div><div>이전</div><div>운동</div></div><div>2021.10.19 나의 운동 스케줄</div><div><div>무릎 들어올리기</div><div>진행중</div></div><div>운동 부위 : 무릎, 엉덩이, 허벅지</div><div><div><div>1. 무릎 천천히 올리기</div><div>2. 골반 높이까지 올리세요</div></div></div><div>●○○○○</div><div>아래의 부위를 사용합니다.</div><div><div><div>골반</div><div>허벅지</div><div>무릎</div><div>종아리</div><div>발목</div><div>발바닥</div></div></div><div>도움말</div><div>무릎이 욱신거리면 운동을 중단하고 이후 같은 운동을 하실 때 세트를 1번씩 줄이세요.</div><div>운동 진행</div></div></div>	<div><div>1. 운동 진행 버튼: - Tap 시 운동 진행</div><div>2. 이전 버튼: - Tap 시 이전 화면으로 이동</div><div>Offline에서 운동 영상, 문의 하기, 메모 기능 지원하지 않음</div></div>			

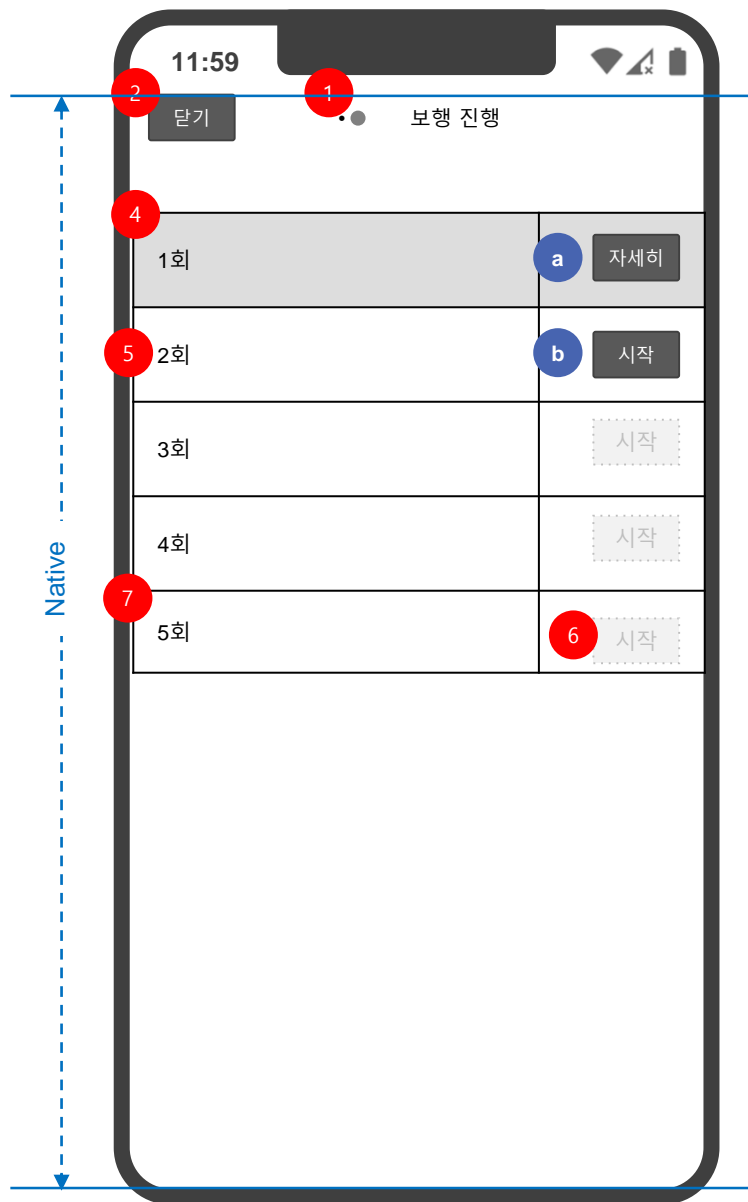


- 타이틀:
 - 1) 진행하는 운동명 출력
 - 2) 의료진 추가 운동 뱃지 표시
 - 닫기 버튼:
 - 터치 시 운동 페이지 닫음, 진행률 재산정
 - 정방향 운동 가이드 동영상:
 - 1) 페이지 로드 시 일시정지 상태
 - 2) 반복 재생 없음
 - 1회 차:
 - 완료된 상태 배경색 적용
 - a. 터치 시 족저압 페이지 팝업
 - 2회차:
 - 미진행 상태 배경색 표시
 - b. 버튼 터치 시 족저압 기록 페이지 팝업
 - 미진행 상태의 시작 버튼:
 - 직전 회차를 완료하기 전 버튼 비활성화
 - 마지막 회차 완료 시 운동 완료 피드백 팝업
- 운동 시작 시 인슐 연결이 되지 않은 상태이며 인슐 연결 프로세스로 진입

Offline 버전에서는 동영상 노출되지 않음
(10/25)

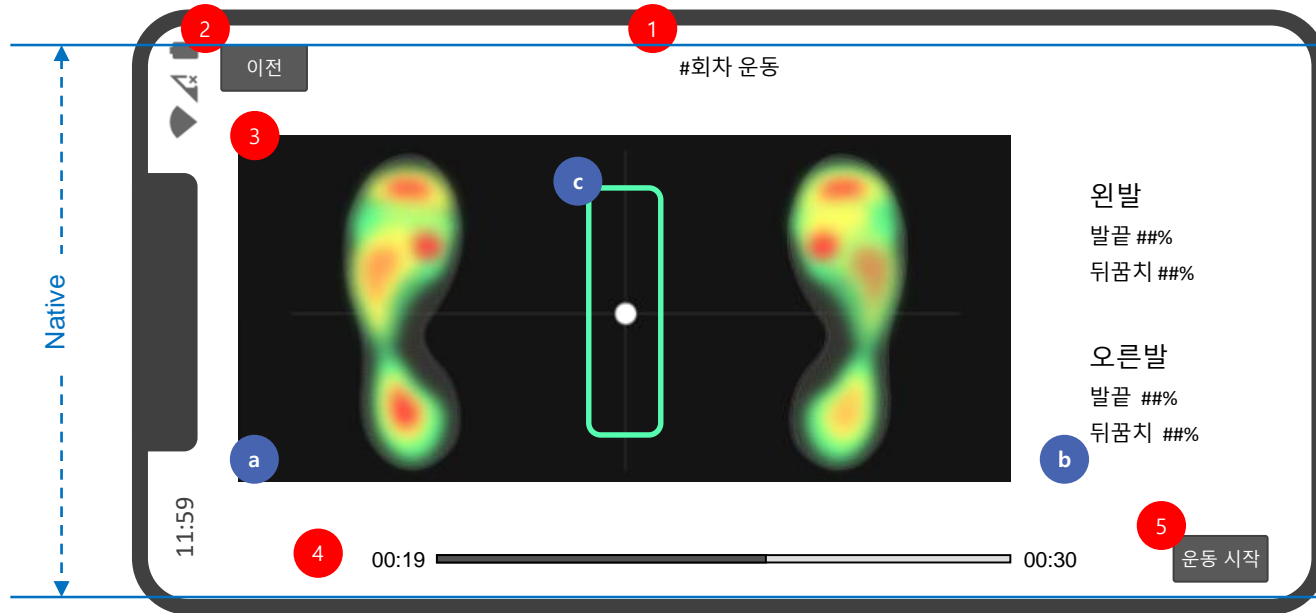

- 타이틀:
- 운동 회차 출력
- 취소 버튼:
- Tap 시 이전 화면으로 이동
- 족저압 운동 영역:
a. 족저압 출력
b. 양쪽 밸런스 비중 출력
c. 밸런스 가이드 출력
- 족저압 운동 게이지:
1) ⑤ 버튼이 "운동 시작"인 상태에서 Tap 시 3초 카운트다운 후 운동 시작
2) ⑤ 버튼이 "중지"인 상태에서 Tap 시 게이지 및 시간 초기화
- 족저압 운동 컨트롤 버튼:
1) 페이지 진입 시 "운동 시작" 레이블 출력, Tap 시 운동 진행, 운동 완료 시 자동으로 운동 조화 화면으로 이동
2) 운동 진행 중 "중지" 레이블 출력, Tap 시 운동 중지, 운동 초기화
- 인솔 연결 끊김 알럿 메시지
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화, 컨트롤 버튼 운동 시작으로 변경
2) "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 회차 운동 페이지 닫음
3) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

밸런스 가이드 추가
(11/01)

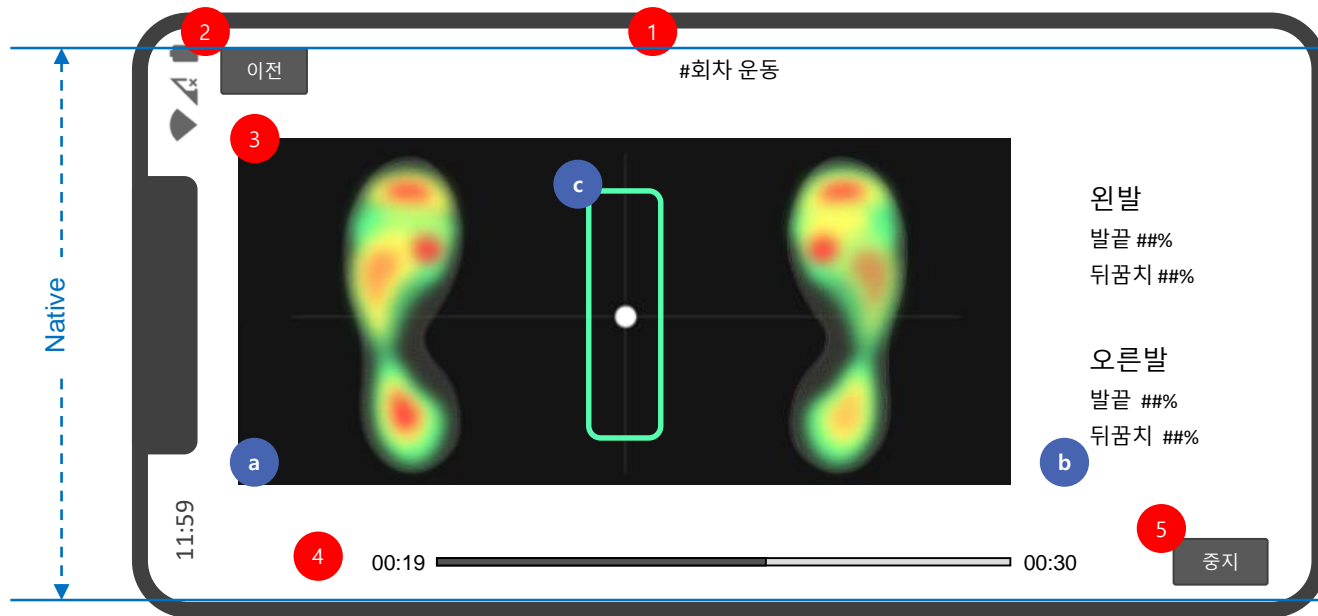

- 타이틀:
- 운동 회차 출력
- 취소 버튼:
- Tap 시 이전 화면으로 이동
- 족저압 운동 영역:
a. 족저압 출력
b. 양쪽 밸런스 비중 출력
c. 밸런스 가이드 출력
- 족저압 운동 게이지:
1) ⑤ 버튼이 "운동 시작"인 상태에서 Tap 시 3초 카운트다운 후 운동 시작
2) ⑤ 버튼이 "중지"인 상태에서 Tap 시 게이지 및 시간 초기화
- 족저압 운동 컨트롤 버튼:
1) 페이지 진입 시 "운동 시작" 레이블 출력, Tap 시 운동 진행, 운동 완료 시 자동으로 운동 조회 화면으로 이동
2) 운동 진행 중 "중지" 레이블 출력, Tap 시 운동 중지, 운동 초기화
- 인솔 연결 끊김 알럿 메시지
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화, 컨트롤 버튼 운동 시작으로 변경
2) "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 회차 운동 페이지 닫음
3) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

밸런스 가이드 추가
(11/01)


6

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고 운동을
재개하시겠어요?

중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이
연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.


운동 중단

인솔 연결

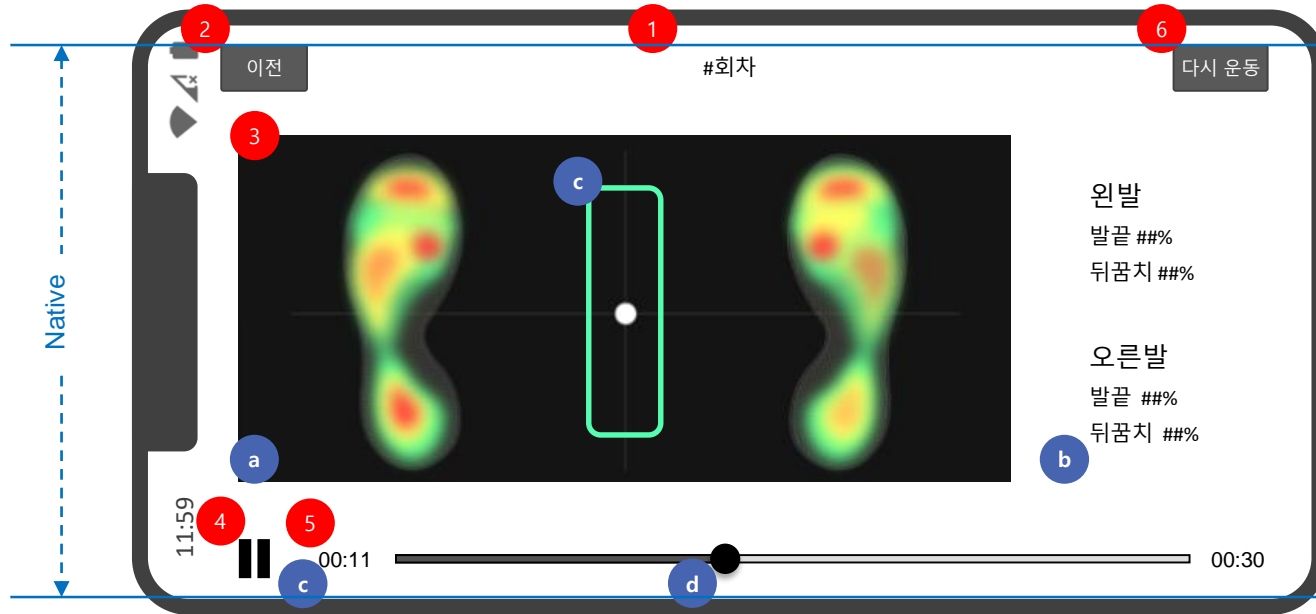


1. 타이틀:
- 회차 출력
2. 이전 버튼:
1) Tap 시 이전 화면으로 이동
3. 족저압 영역:
a. 운동된 족저압 출력
b. 양쪽 밸런스 비중 출력
c. 밸런스 가이드 출력
4. 재생/일시정지 버튼:
- Tap 시 ⑤ 타임라인 재생 및 ③의 데이터 재생/일시정지
5. 타임라인:
c. 현재 ④가 위치한 시점 출력
d. seeker: 좌우 스와이프하여 해당 시점의 ③의 데이터 출력
6. 다시 운동
- 현재 데이터 제거 후 해당 운동 족저압 녹화 화면으로 이동
- 오늘 이전 날짜의 운동 운동 확인 시 다시 운동 버튼 비노출

밸런스 가이드 추가
(11/01)

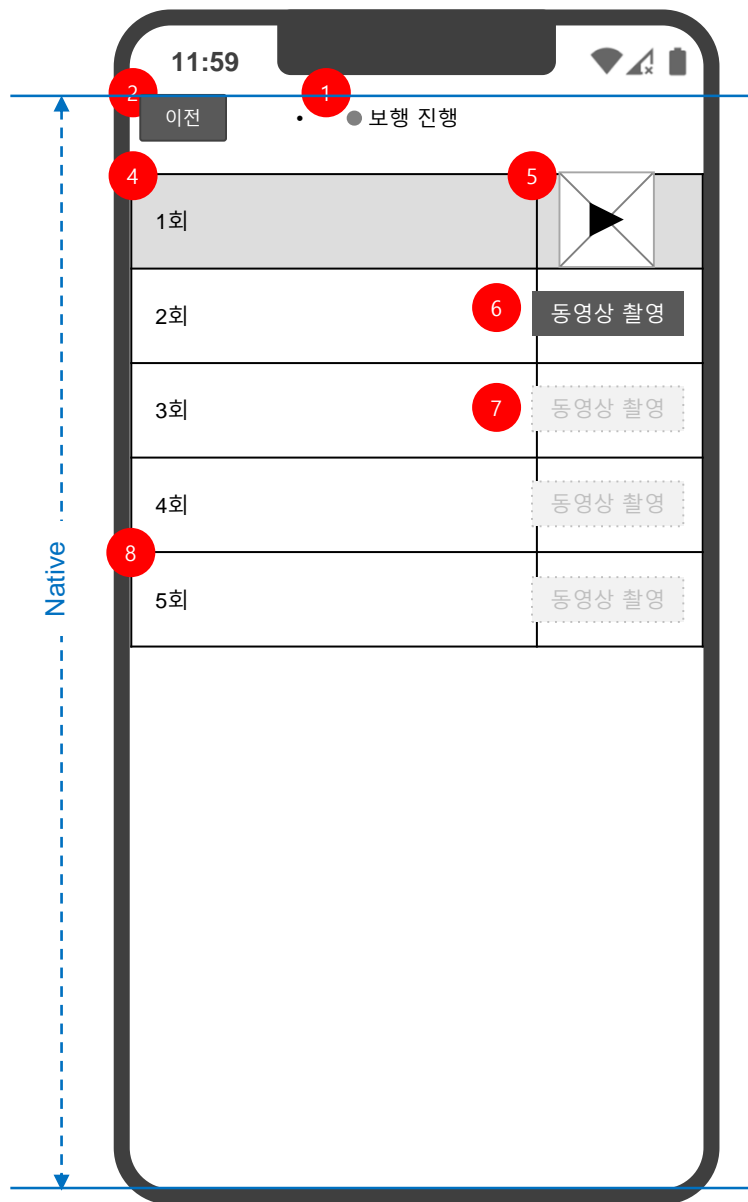

1. 타이틀:
 - 1) 진행하는 운동명 출력
 - 2) 본인 추가 운동 배지 표시
2. 이전 버튼:
 - Tap 시 이전 화면으로 이동
 - 진행률 재산정
3. 정방향 운동 가이드 동영상:
 - 1) 페이지 로드 시 일시정지 상태
 - 2) 반복 재생 없음
4. 1회차:
 - 배경색 적용
5. 동영상 썸네일:
 - 1) 동영상 파일의 첫 프레임 출력
 - 2) Tap 시 동영상 플레이어 화면으로 이동
6. 동영상 촬영 버튼:
 - 1) Tap 시 동영상 촬영 카메라 화면으로 이동
 - 2) 동영상 촬영 완료 시 ⑤으로 변경
7. 미진행 상태의 동영상 촬영 버튼:
 - 직전 회차를 완료하기 전 버튼 비활성화
8. 마지막 회차 완료 시 운동 완료 피드백 팝업 표시

Offline 버전에서는 동영상 노출되지 않음
(10/25)

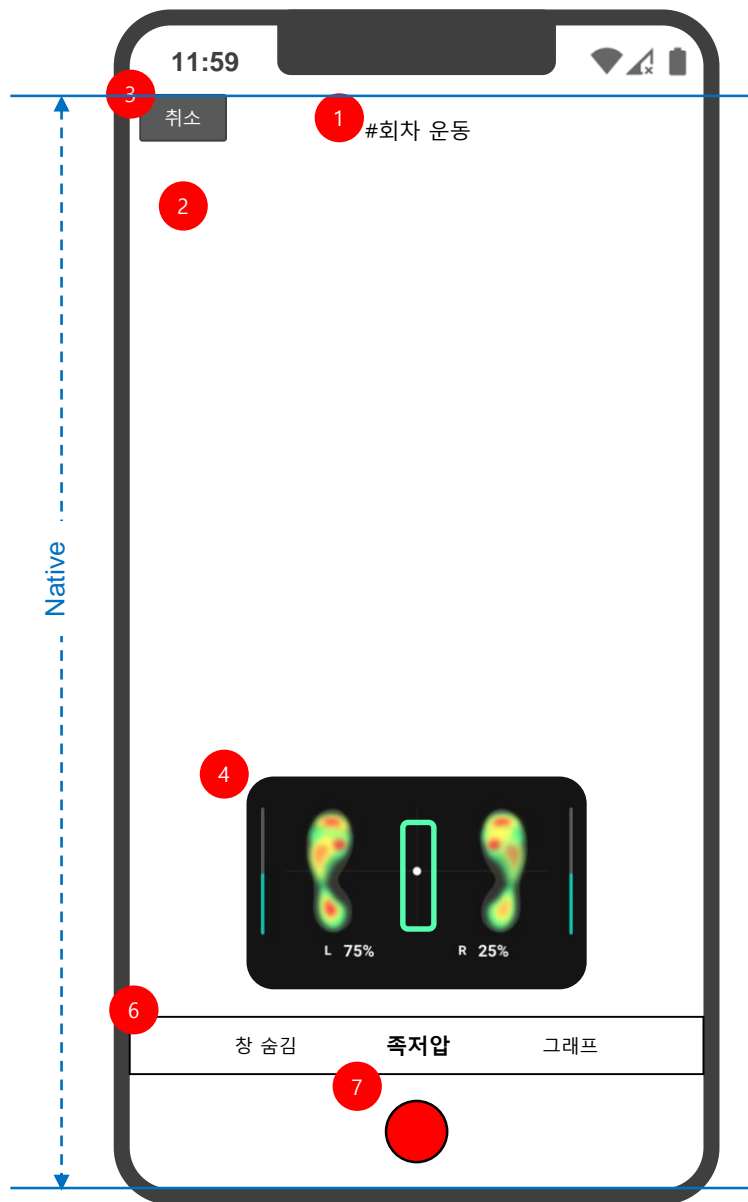

7

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하시겠어요?

인솔이 연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.


운동 중단

인솔 연결

5



1. 타이틀:
- 촬영 회차 출력
2. 뷰파인더
1) 화면 전체 범위
2) 족저압 레이어와 별개로 촬영
3. 취소 버튼:
- Tap 시 이전 화면으로 이동
4. 족저압 레이어
5. 그래프 레이어
6. 레이어 컨트롤 바:
1) 현재 상태 레이블 강조
2) 창 숨김 Tap 시 레이어 숨김
3) 족저압 Tap 시 족저압 레이어 표시
4) 그래프 Tap 시 그래프 레이어 표시
7. 녹화 버튼
- Tap 시 녹화 시작
8. 인솔 연결 끊김 알럿 메시지:
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화
2) "운동 중단" Tap 시 운동 진행 화면으로 이동
2) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

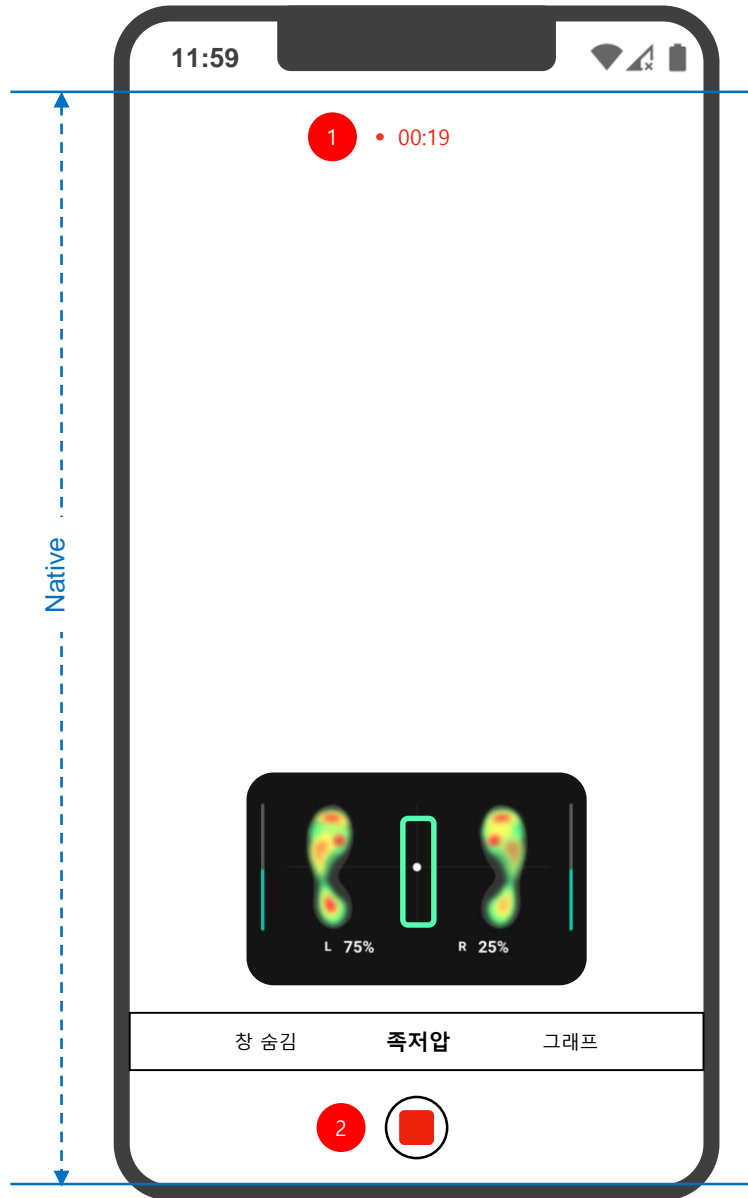

3


인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고
운동을 재개하시겠어요?

중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이
연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수
없습니다.


운동 중단

인솔 연결


- 촬영 타이머:
 - 운동별 시간에 맞춰 타이머 재생
 - 타이머 만료 시 촬영 완료 후 운동 조회 화면으로 이동
- 녹화 중단 버튼:
 - Tap 시 녹화 중단, 운동 초기화
- 인솔 연결 끊김 알럿 메시지:
 - 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화
 - "운동 중단" Tap 시 촬영 동영상 휘발, 카메라 닫음
 - "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

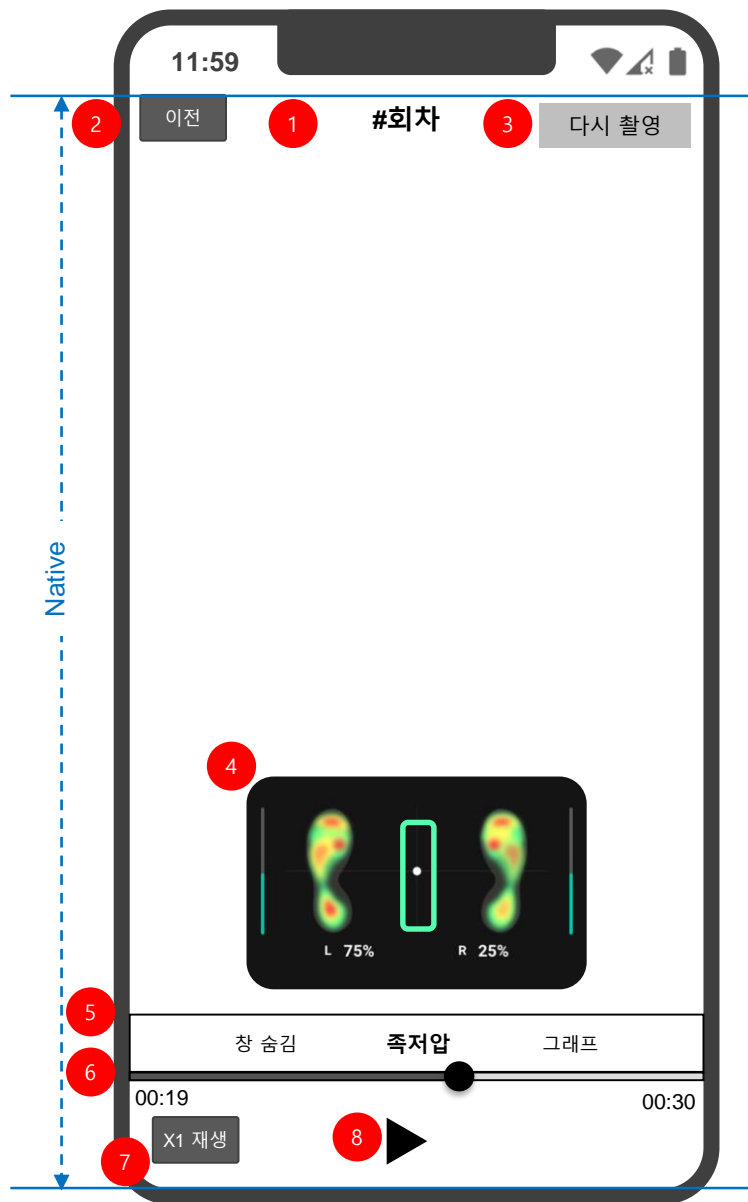



- 타이틀:
 - 촬영 회차 출력
- 닫기 버튼:
 - Tap 시 운동 대기 화면으로 이동
- 다시 촬영 버튼:
 - Tap 시 운동 다시 촬영,
- 촉저압 레이어
- 레이어 컨트롤 바:
 - 현재 상태 레이블 강조
 - 창 숨김 Tap 시 레이어 숨김
 - 촉저압 Tap 시 촉저압 레이어 표시
 - 그래프 Tap 시 그래프 레이어 표시
 - ⑥ 조작에 따라 데이터 출력
- 비디오 Seeker:
 - 좌우로 슬라이드하여 재생 컨트롤
 - 좌측 하단 영상 현재 시간 표시
 - 우측 하단 영상 전체 시간 표시
- 재생 속도 조절 버튼:
 - Tap 시 "x1", "x1/2", "x1/4" 순서로 버튼 레이블 로테이션 및 동영상 재생 속도 조절
- 재생/일시정지 버튼:
 - 터치하여 동영상 재생 또는 일시정지

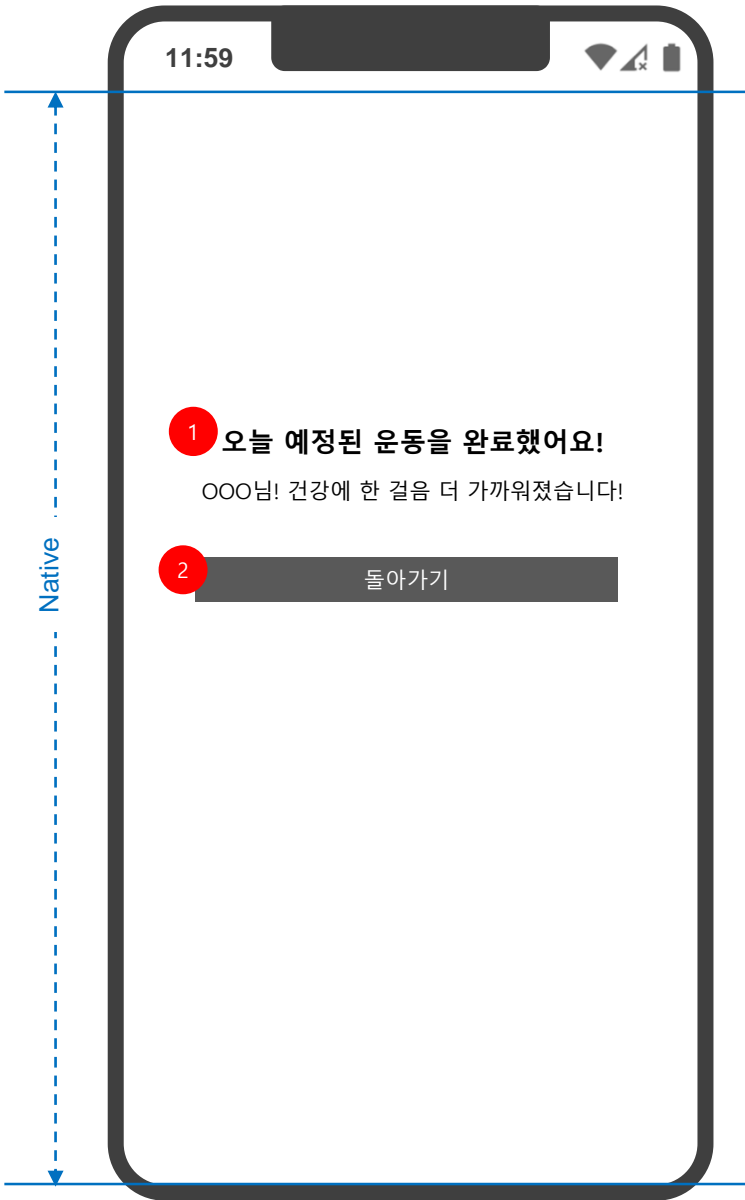Page Description	나의 운동 스케줄 > 운동 진행 > 운동 완료	Screen ID	ST-PT-A-06-12	Description
				<ol style="list-style-type: none">운동 완료 피드백:<ol style="list-style-type: none">사용자 이름 출력안내 문구 아래 운동 완료를 나타내는 일러스트 출력돌아가기 버튼:<ul style="list-style-type: none">터치 시 팝업창 닫음


인솔

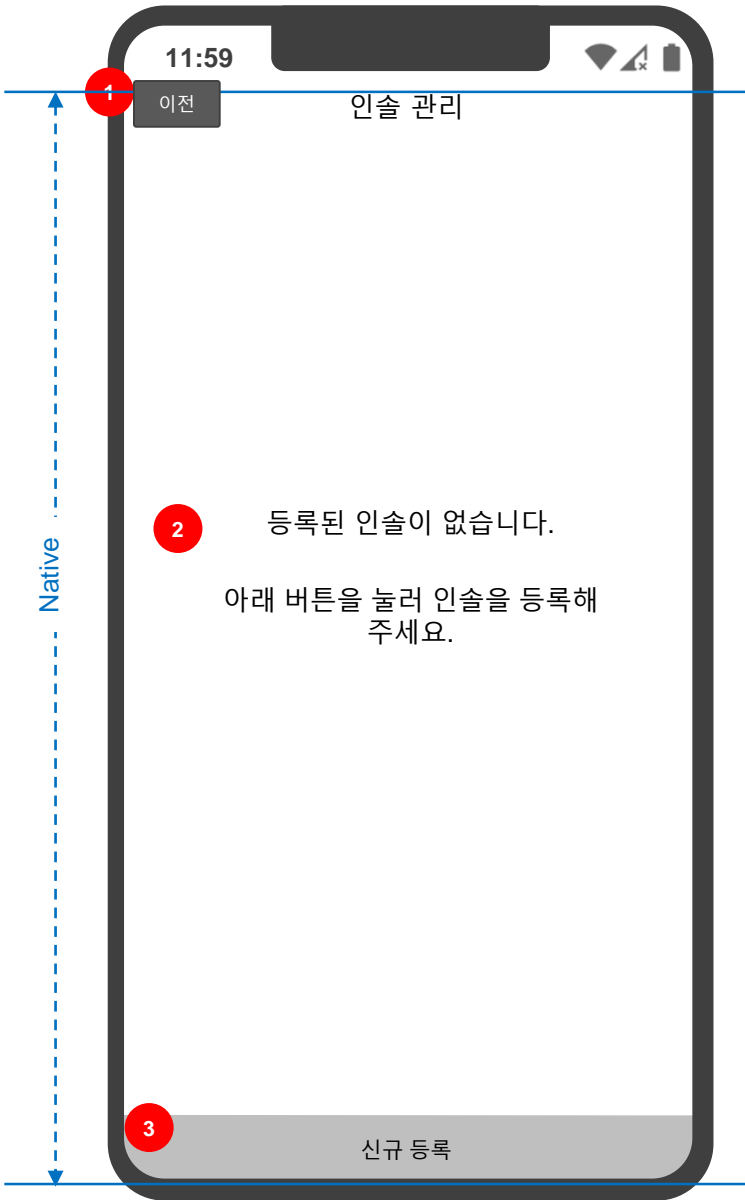Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 - 빈 데이터	Screen ID	ST-PT-A-08	Description
				<ol style="list-style-type: none">1. 터치 시 홈화면으로 이동2. 빈 데이터 출력<ul style="list-style-type: none">- 등록된 인솔이 없을 시 출력3. 터치 시 인솔 연결 가이드 팝업<ul style="list-style-type: none">- 인솔 등록 프로세스 진행

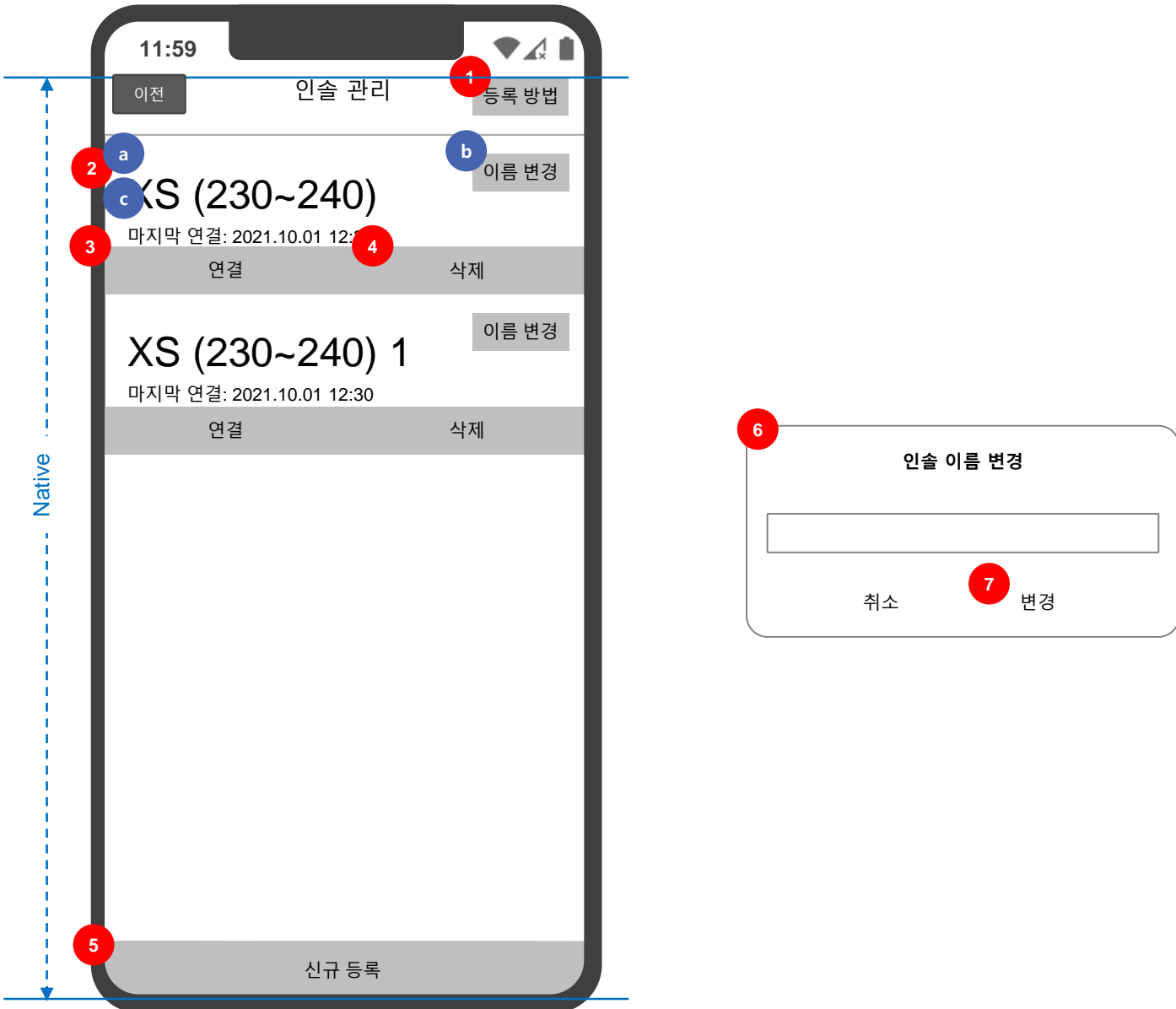
Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 - 연결 전	Screen ID	ST-PT-A-08	Description
 <p>The image shows a mobile application interface for '인솔 관리' (Driver Management). The top bar has a back button '이전', the title '인솔 관리', and a button '등록 방법'. Below the title is a list of drivers. The first driver entry is 'XS (230~240)' with a last connection time of '2021.10.01 12:30'. It has buttons for '연결' (Connect), '삭제' (Delete), and '이름 변경' (Change Name). A second entry 'XS (230~240) 1' is also shown with similar buttons. At the bottom is a '신규 등록' (New Registration) button. A modal titled '인솔 이름 변경' (Driver Name Change) is shown on the right, with a text input field and buttons for '취소' (Cancel) and '변경' (Change). Red numbered circles (1-7) and blue lettered circles (a, b, c) highlight specific UI elements and flow steps.</p>				<ol style="list-style-type: none"> 터치 시 인솔 연결 가이드 팝업 1) 정렬 기준: 등록 일시 기준 최고(最古)순 2) 인터페이스: a) 등록 또는 변경한 인솔 이름 출력 b) 터치 시 기존 이름이 입력된 상태로 이름 변경 인풋 필드 팝업 c) 사용자의 디바이스와의 연결 일시 출력 터치 시 디바이스와 “연결 중” 상태 화면 팝업 터치 시 등록 정보 삭제 confirm 출력 (confirm 메시지 확인은 아래 url 참고) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276 터치 시 인솔 연결 가이드 팝업 - 인솔 등록 프로세스 진행 인솔 이름 변경 - 모든 문자 입력 가능, 20자 초과 입력 시 입력 불가 변경 - 변경 Tap 시 입력한 이름 유효성 검사 기등록 인솔과 이름 겹칠 시 알럿 메시지 출력 - 겹치는 이름이 없을 경우 인솔 등록

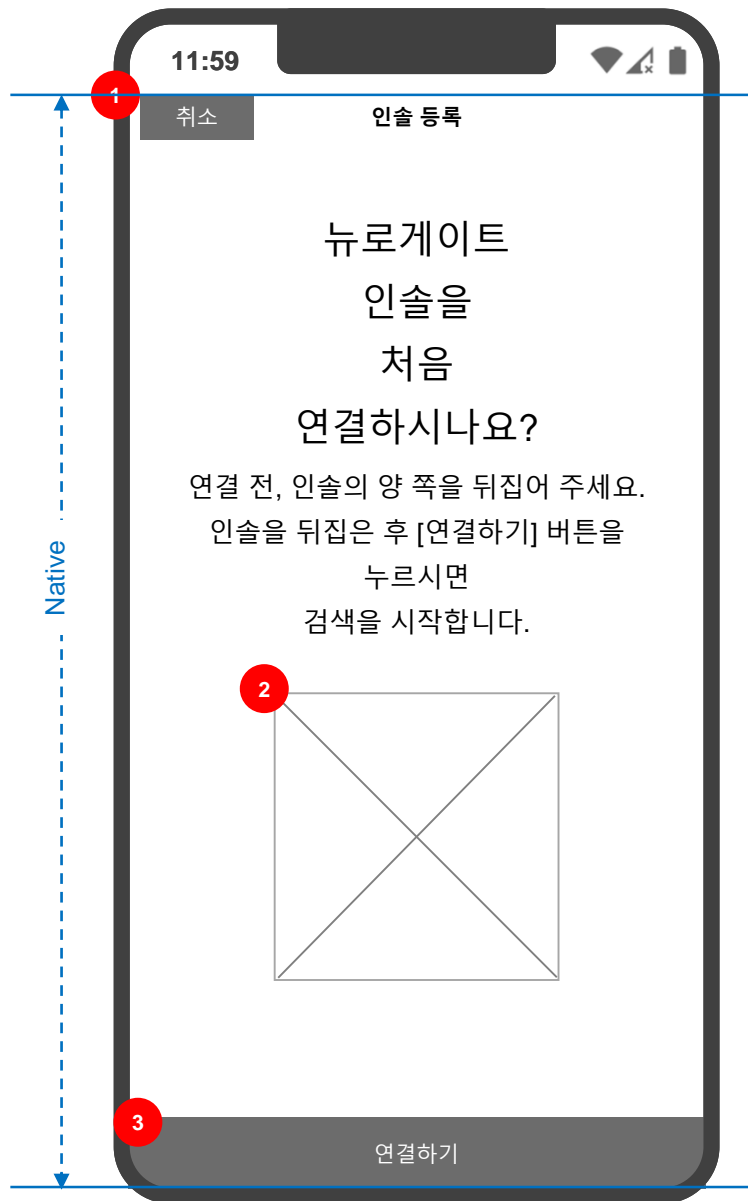

1. 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음
2. 인솔을 뒤집는 액션을 시각적으로 표현하는 이미지 표시
3. 터치 시 인솔 블루투스 검색 진행

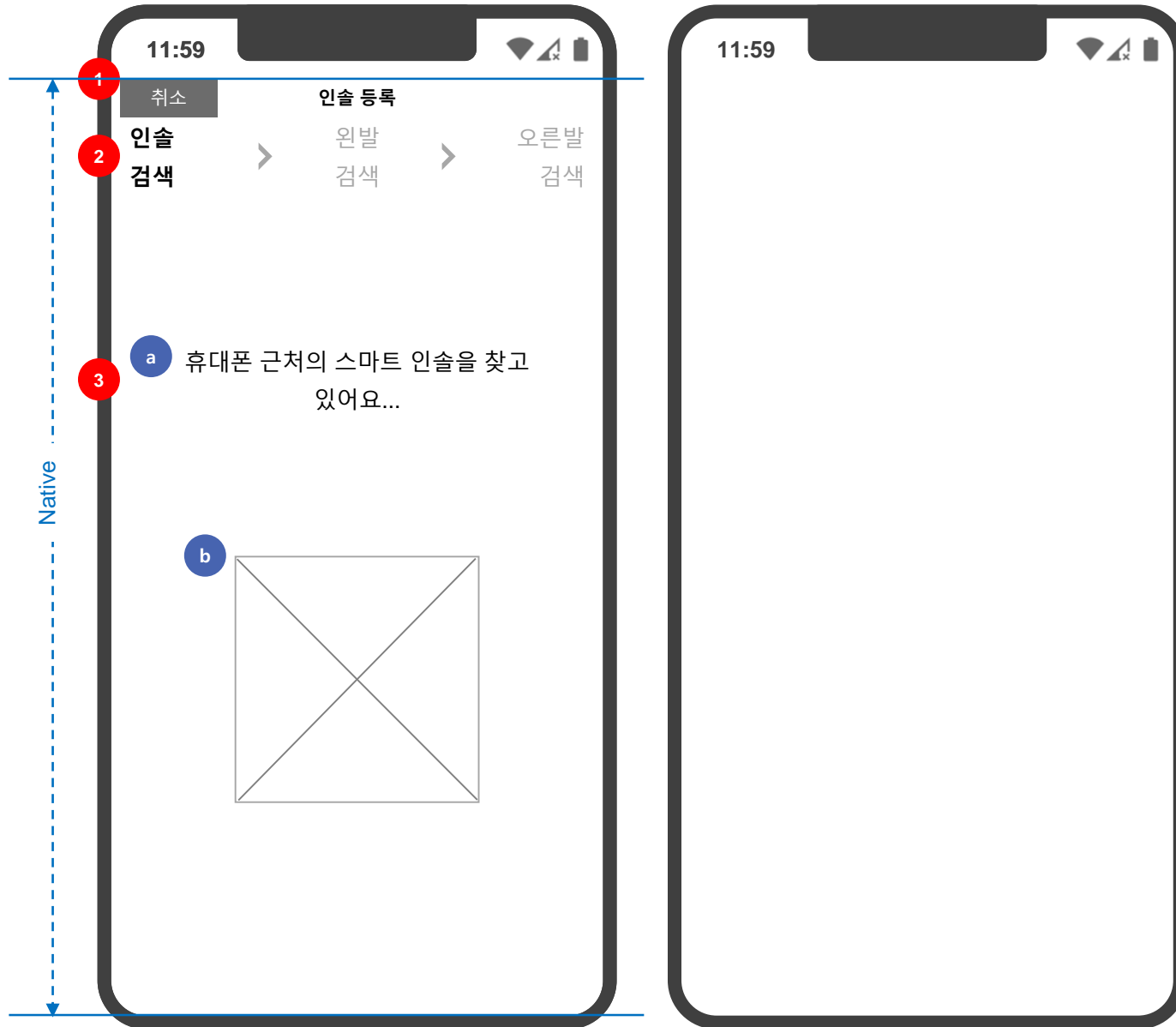


- 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음
- 인솔 등록 프로세스 표시 UI
 - 인솔 등록 전체 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조
 - 5초간 검색, 검색 시 바로 왼발 검색 프로세스로 진행, 미검색 시 실패 피드백
- "인솔 검색 중" 문구 및 인솔을 검색하는 액션을 시각적으로 표현하는 애니메이션 또는 gif 표시

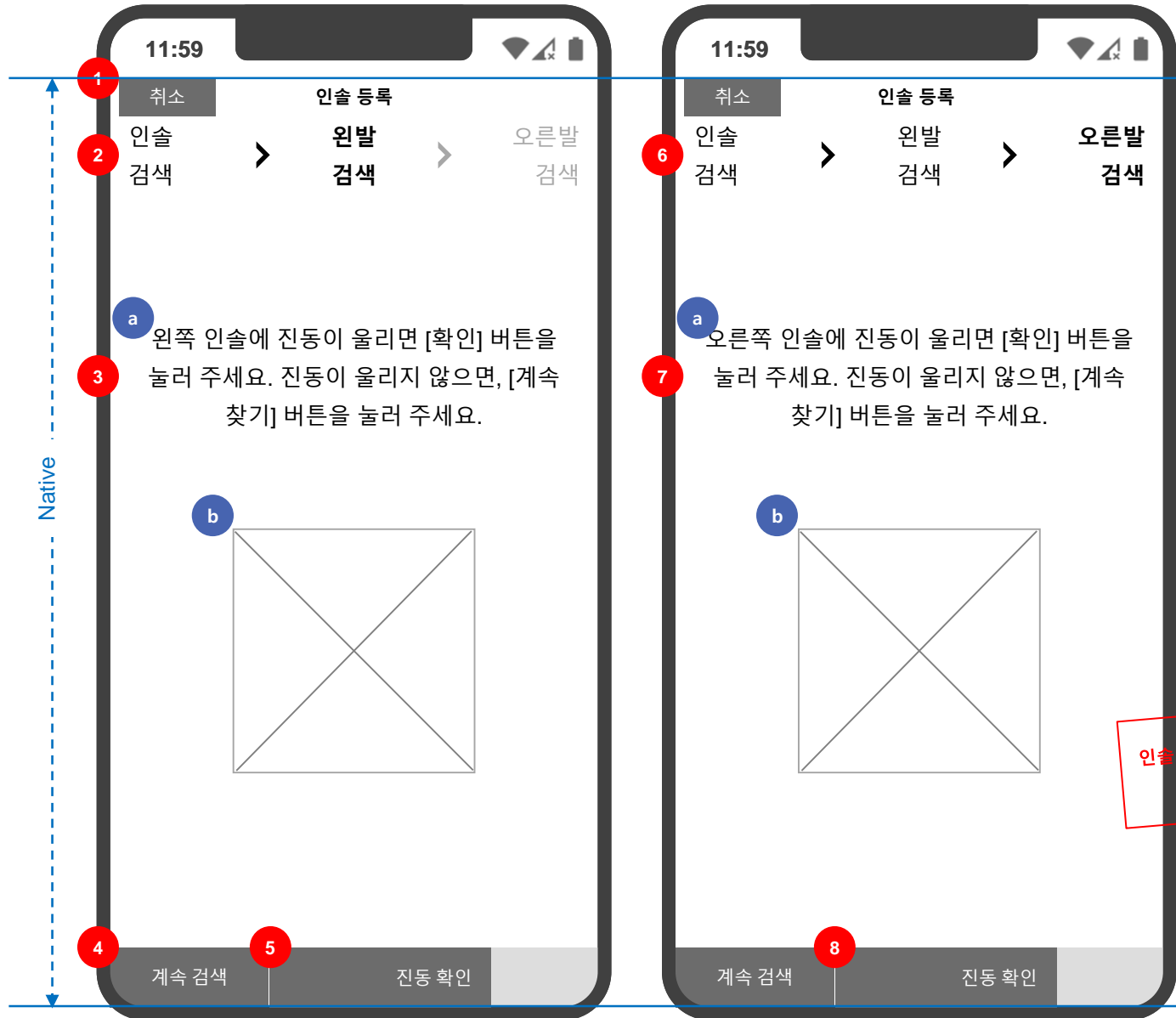


- 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음
- 인솔 등록 프로세스 표시 UI
 - 인솔 등록 전체 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조
 - 5초간 검색, 검색 시 바로 왼발 검색 프로세스로 진행, 미검색 시 실패 피드백
- 왼쪽 검색 확인 UI
 - 인솔 확인 안내 문구 출력
 - 인솔 진동을 시각적으로 표현하는 이미지 표시
- 1) ⑤ 버튼의 게이지가 다 채워진 후에 터치 가능
2) 터치 시 검색된 인솔에 진동 명령
- 1) 화면 로드 시 버튼 내 게이지가 왼쪽에서부터 채워지며 왼쪽 인솔에 진동 명령
2) 게이지가 다 채워진 후에 터치 가능
3) 터치 시 오른발 진동 명령
- 오른쪽 검색 확인 UI
 - 인솔 확인 안내 문구 출력
 - 인솔 진동을 시각적으로 표현하는 이미지 표시


인솔 등록 프로그램 디자인에 따라 변경 가능
(10/25)

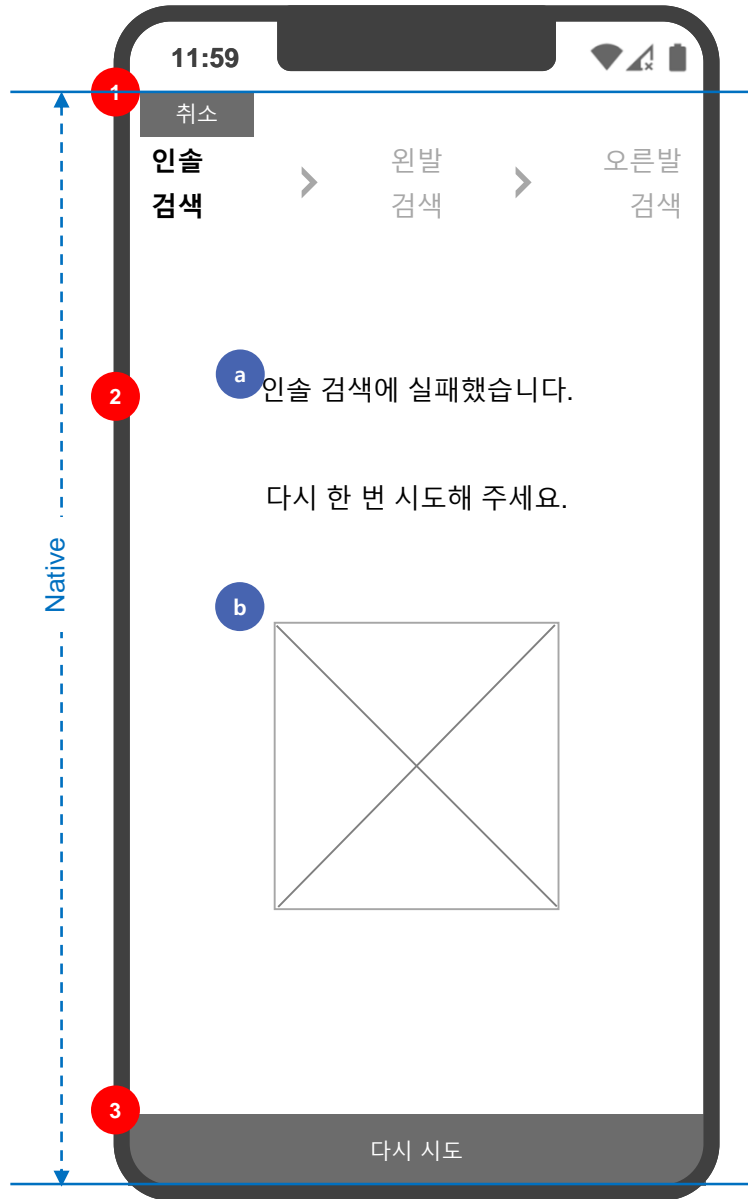


- 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음
- 검색 실패 피드백 UI
 - 인솔 검색 실패 문구 출력
 - 인솔 검색 실패 상태를 시각적으로 표현하는 이미지 표시
- 터치 시 인솔 재검색 진행, 검색중 UI 출력

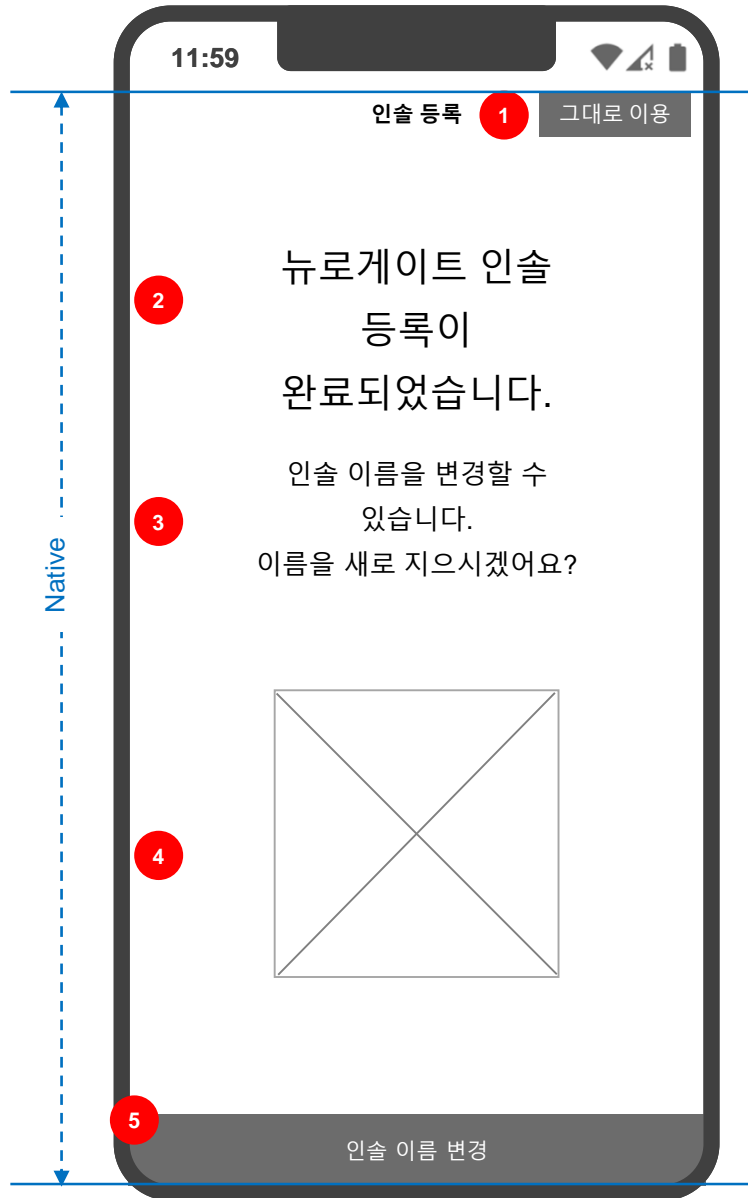


0. 안드로이드의 경우 back 시 창 닫음, "인솔 보정" 화면 로드
1. 터치 시 창 닫음, "보정" 프로세스 진행
2. 인솔 등록 완료 문구 출력
3. 인솔 이름 변경 가능 문구 출력
4. 인솔 연결 완료를 시각적으로 표현하는 이미지 표시
5. 터치 시 이름 변경 페이지 로드

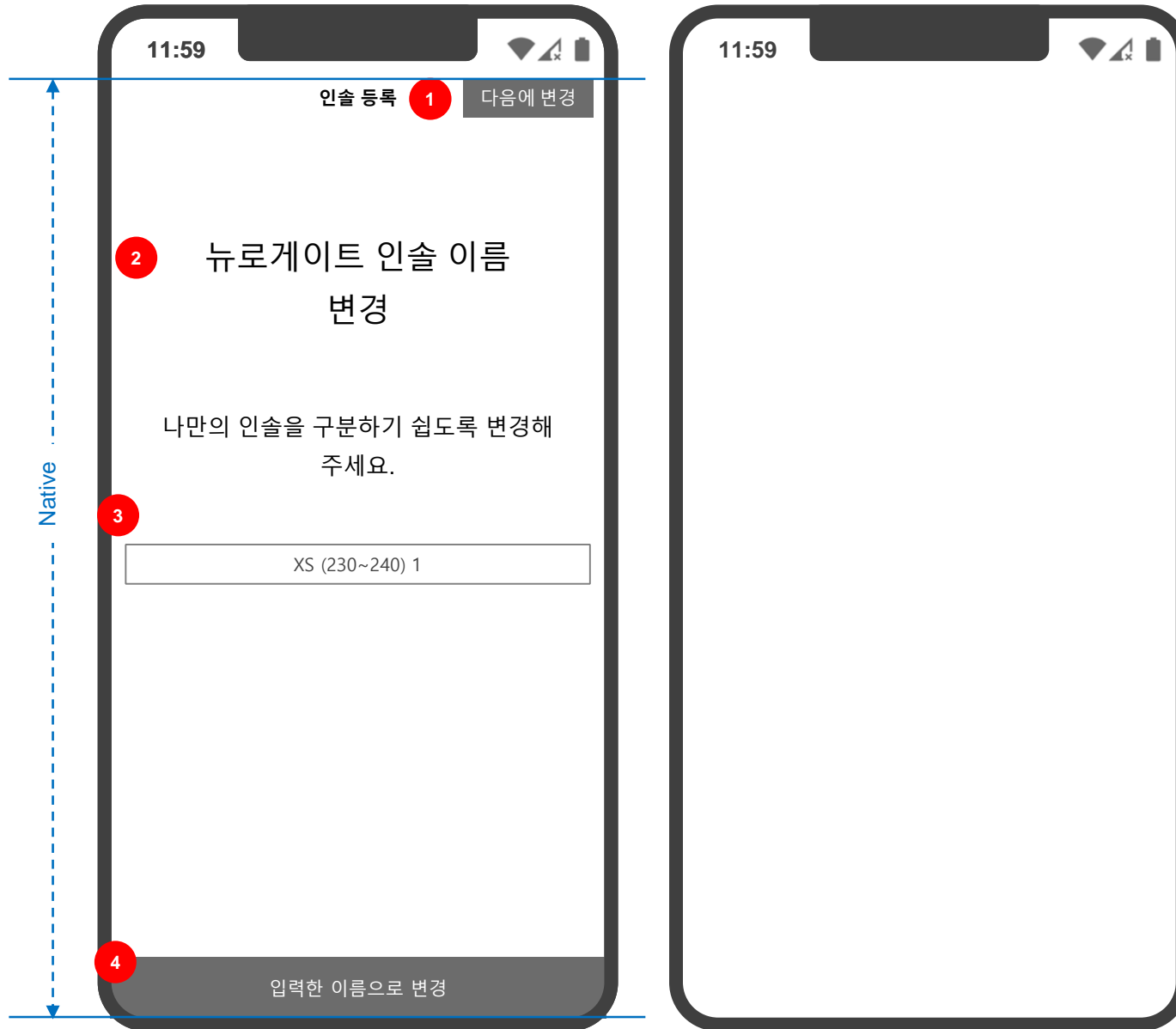

- 터치 시 페이지 닫음, "인솔 정보" 화면 로드
- 인솔 이름 변경 타이틀 및 변경 안내 문구 출력
- 검색된 인솔의 사이즈가 인풋박스에 자동 입력, 기등록 인솔 중 이미 해당 이름이 있는 경우 자동 입력된 이름 뒤에 숫자 추가 입력
 * ex) XS (230~240) 1
 - 사이즈별 이름 자동 입력 품:
 - XS: XS (230~240)
 - S: S (245~255)
 - M: M (260~270)
 - L: L (275~285)
 - XL: XL (290~300)
 - 모든 문자 입력 가능, 20자 초과 입력 시 입력 불가
- 터치 시 입력한 이름 유효성 검사 기등록 인솔과 이름 겹칠 시 알럿 메시지 출력
 - 겹치는 이름이 없을 경우 인솔 등록

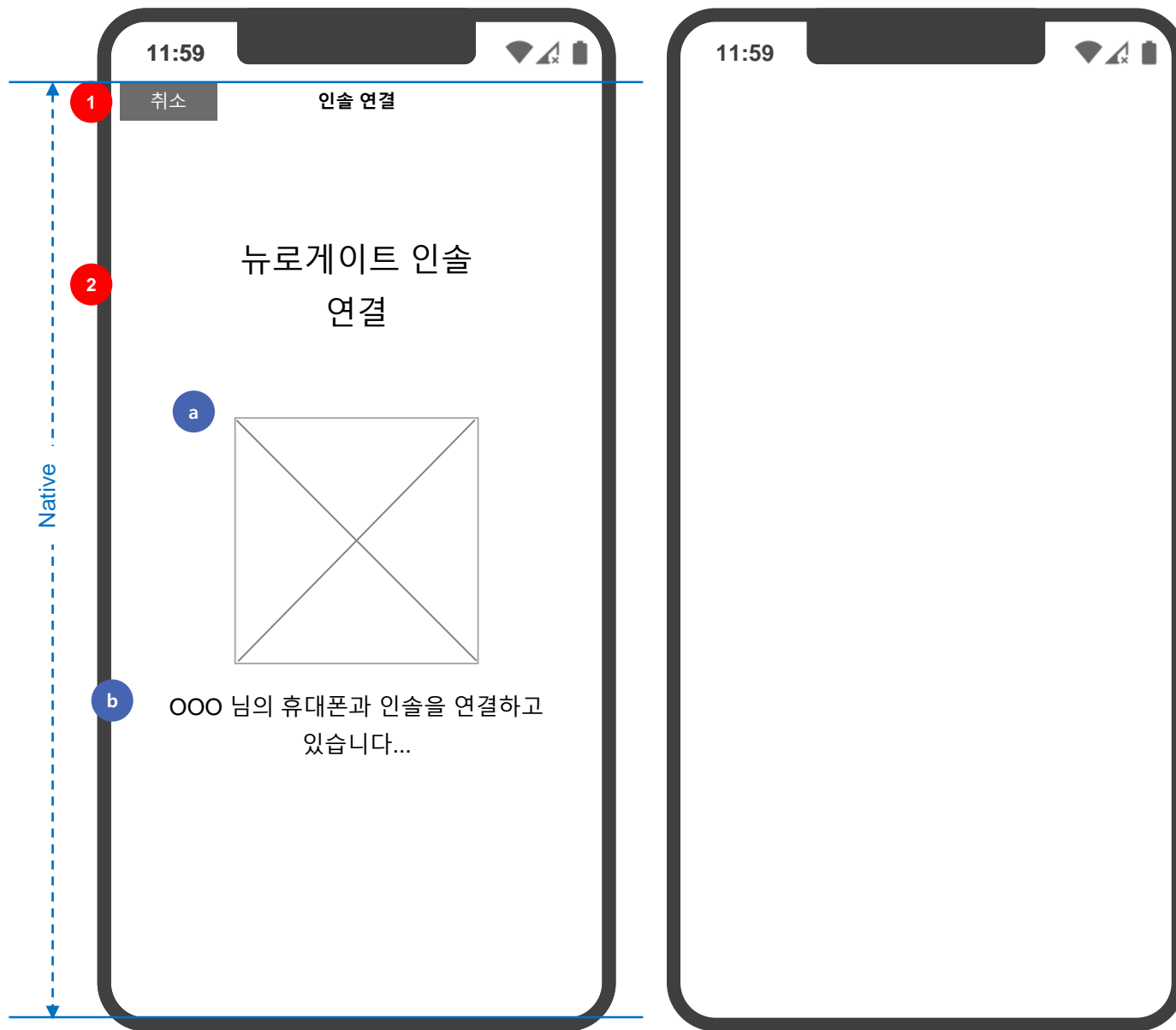

- 터치 시 연결 중단, "연결 중" 상태 창 닫음
- 인솔 연결 상태 안내 UI
 - 인솔과 디바이스의 연결 시도 액션을 시각적으로 표현하는 애니메이션 또는 gif 표시
 - 인솔 연결 중 문구 출력

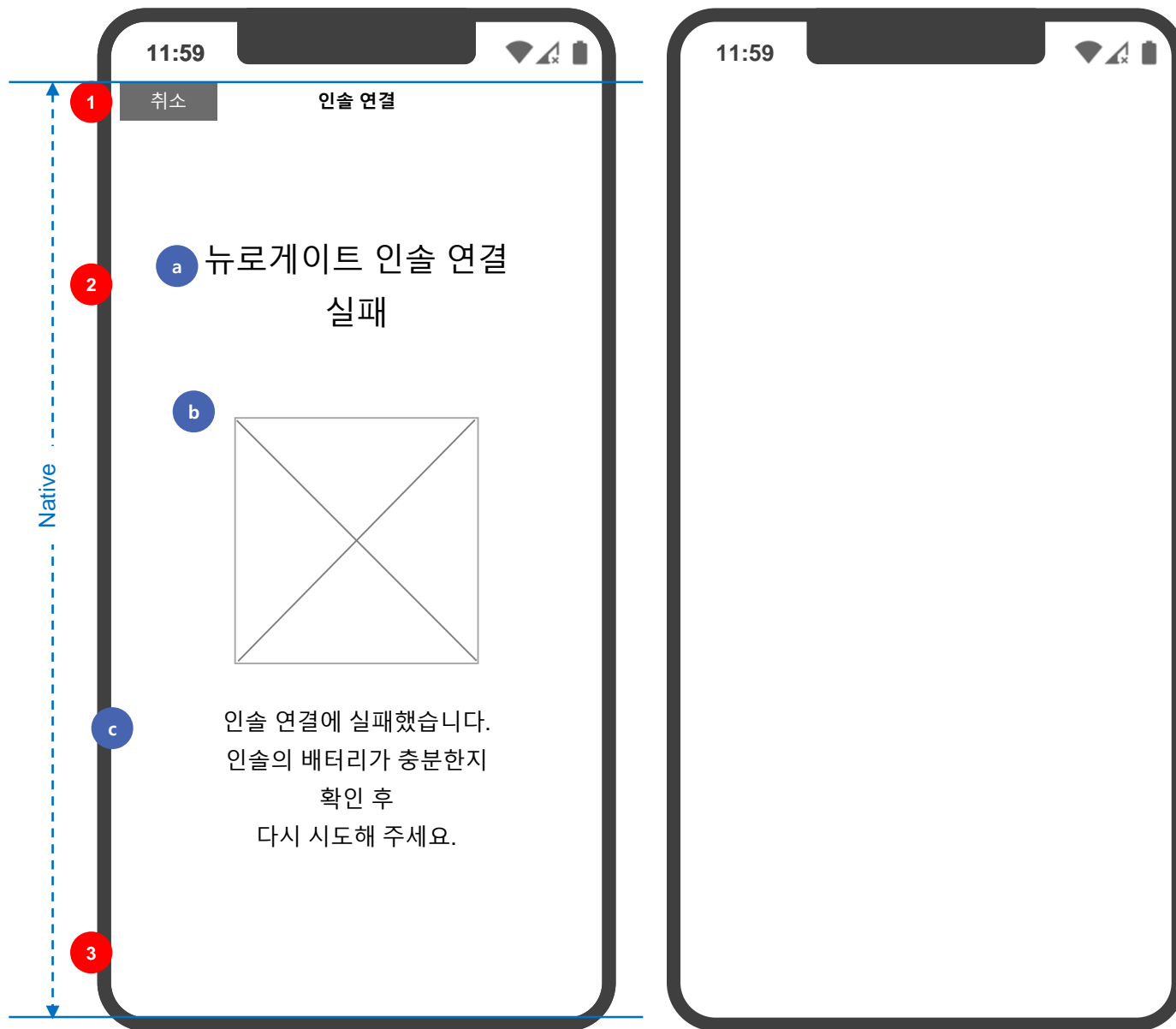

- 터치 시 연결 중단, 창 닫음
- 인슐 연결 상태 안내 UI
 - 타이틀 출력
 - 인슐과 디바이스와의 연결 실패를 시각적으로 표현하는 이미지
 - 인슐 연결 실패 피드백 문구 출력
- 터치 시 인슐 연결 재시도


Page Description	전체 메뉴 > 인슐 관리 > 신규 등록 - 보정 물음	Screen ID	ST-PT-A-08_8	Description
<div><div><div>11:59</div><div>인슐 보정 1 다음에 보정</div><div>2</div><div>지금 바로 뉴로게이트 인슐을 보정하시겠어요?</div><div>정확한 인슐 데이터의 측정과 운동을 위해 스마트 인슐 보정이 필요합니다.</div><div>일어난 상태에서 가이드에 따라 보정을 진행해 주세요.</div><div>3</div><div>보정 시작</div></div><div>Native</div><div></div></div> <div><div><div>11:59</div></div></div>				<div>1. 터치 시 페이지 닫음, "인슐 정보" 화면 로드</div> <div>2. 인슐 보정 물음 타이틀 및 안내 문구 출력</div> <div>3. 터치 시 보정 프로세스 진행</div>

Page Description	전체 메뉴 > 인슐 관리 - 인슐 보정	Screen ID	ST-PT-A-08_9	Description
	 <p>The image displays two mobile application screens side-by-side. The left screen is titled '인슐 보정' (Insulin Adjustment) and features a 'Native' design pattern. It includes a top bar with a '취소' (Cancel) button (marked with a red circle 1), a main content area with the title '뉴로게이트 인슐 보정' (Neurogate Insulin Adjustment) (marked with a red circle 2) and two lines of instructional text, and a bottom bar with a '보정 시작' (Start Adjustment) button (marked with a red circle 3). A vertical dashed blue line labeled 'Native' spans the height of the screen. The right screen is a blank white page.</p>			<ol style="list-style-type: none">1. 터치 시 인슐 보정 프로세스 중단, 가이드 닫음2. 인슐 보정 가이드 문구 표시3. 터치 시 원발 보정 프로세스 진행


Page Description	전체 메뉴 > 인슐 관리 - 인슐 보정 안내	Screen ID	ST-PT-A-08_10	Description
<div><div><div>11:59</div><div>인슐 보정 1 다음에 보정</div><div>2</div><div>뉴로게이트 인슐 보정이 필요합니다.</div><div>정확한 인슐 데이터의 측정과 운동을 위해 한 달에 한 번 스마트 인슐 보정을 진행해 주시면 좋습니다.</div><div>인슐 보정은 일어난 상태에서 가이드에 따라 진행해 주세요.</div><div>3</div><div>인슐 보정</div></div><div>Native</div><div><div>11:59</div></div></div>				<div>1. 터치 시 페이지 닫음</div> <div>2. 인슐 보정 가이드 문구 표시</div> <div>3. 터치 시 원발 보정 프로세스 진행</div>




1. 터치 시 인솔 보정 프로세스 중단, 가이드 닫음
2. 인솔 보정 프로세스 표시 UI
 - 1) 인솔 왼발/오른발 보정 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조
3. "인솔 보정" 타이틀 및 문구 출력
4.
 - 1) 화면 로드 시 숫자 출력되지 않음
 - 2) 왼발/오른발 인솔에서 측정되는 데이터의 크기의 최소값이 유지될 경우 3초 카운트
 - 3) 3초 카운트 동안 데이터 크기가 변하지 않을 경우 오른발 보정 진행
 - 4) 3초 카운트 동안 데이터 크기가 변할 경우 보정 실패 피드백

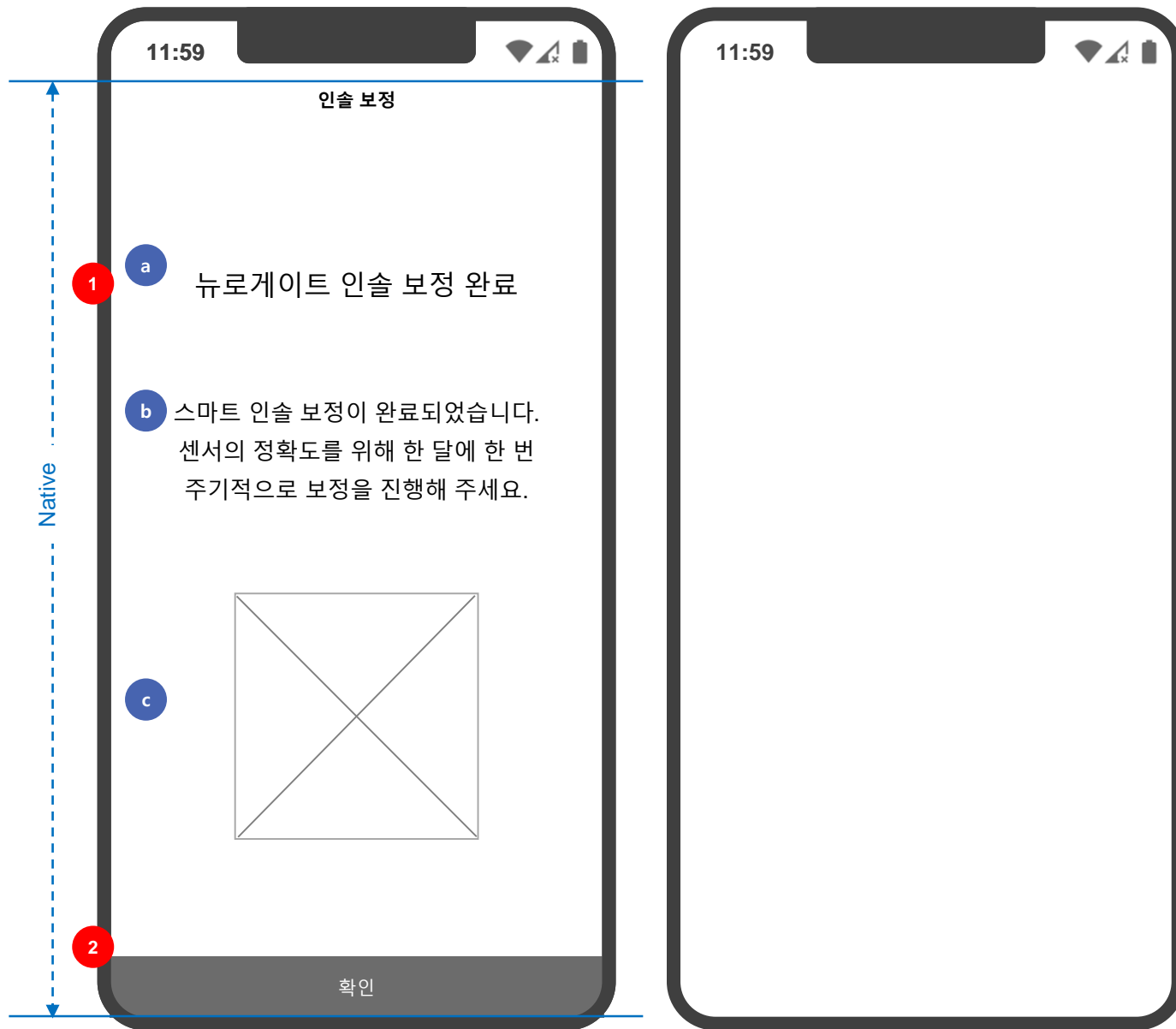

1. 인슐 보정 완료 안내 UI
 - a) 타이틀 출력
 - b) 인슐 보정 완료 문구 출력
 - c) 인슐 보정 완료를 시각적으로 표현하는 이미지 표시
2. 터치 시 창 닫음

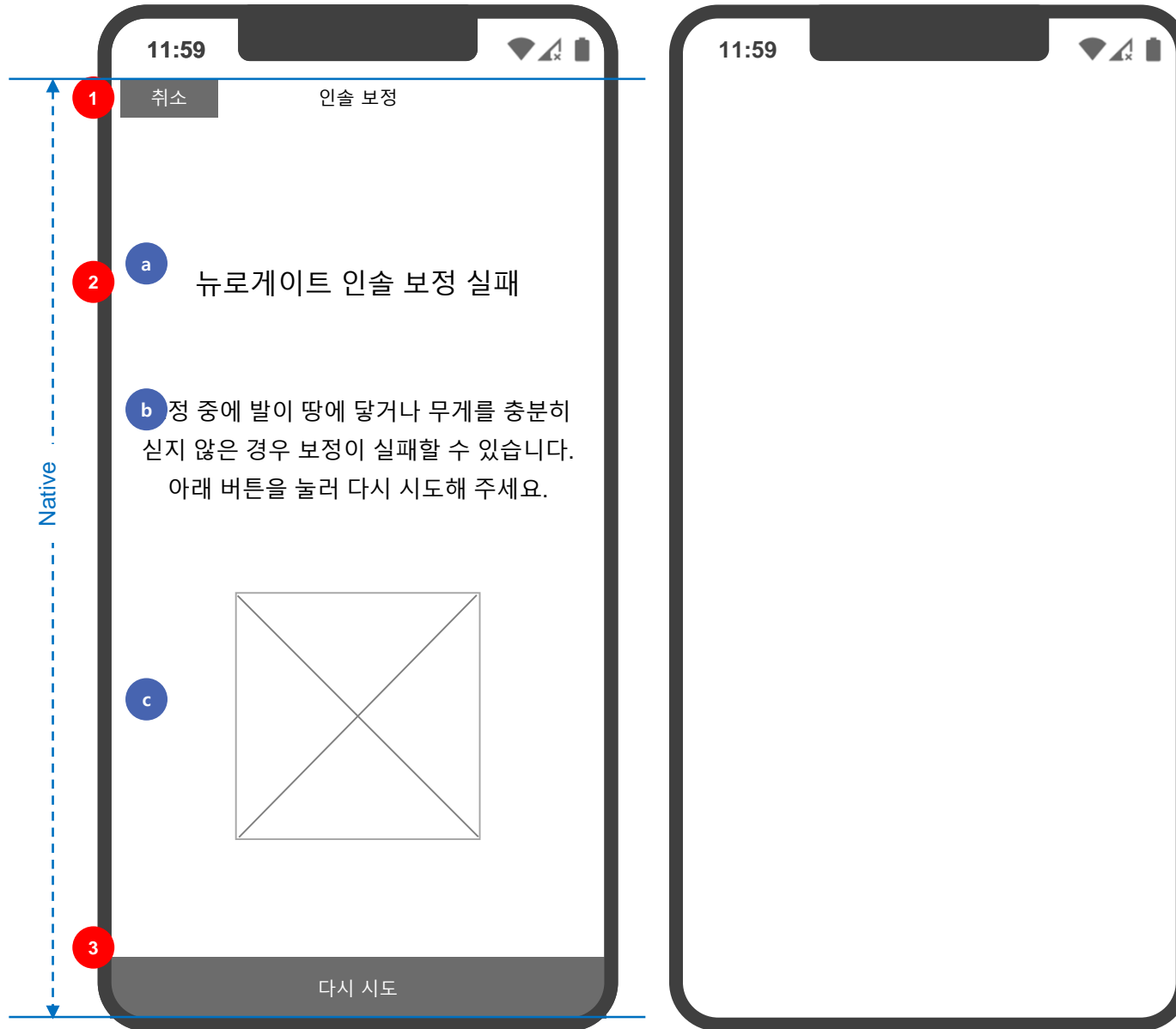

1. 터치 시 보정 취소 confirm 출력
(confirm 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276
2. 인솔 보정 완료 안내 UI
 - a) 타이틀 출력
 - b) 인솔 보정 완료 문구 출력
 - c) 인솔 보정 완료를 시각적으로 표현하는 이미지 표시
3. 터치 시 인솔 보정 프로세스 진행
- 왼쪽 보정 진행

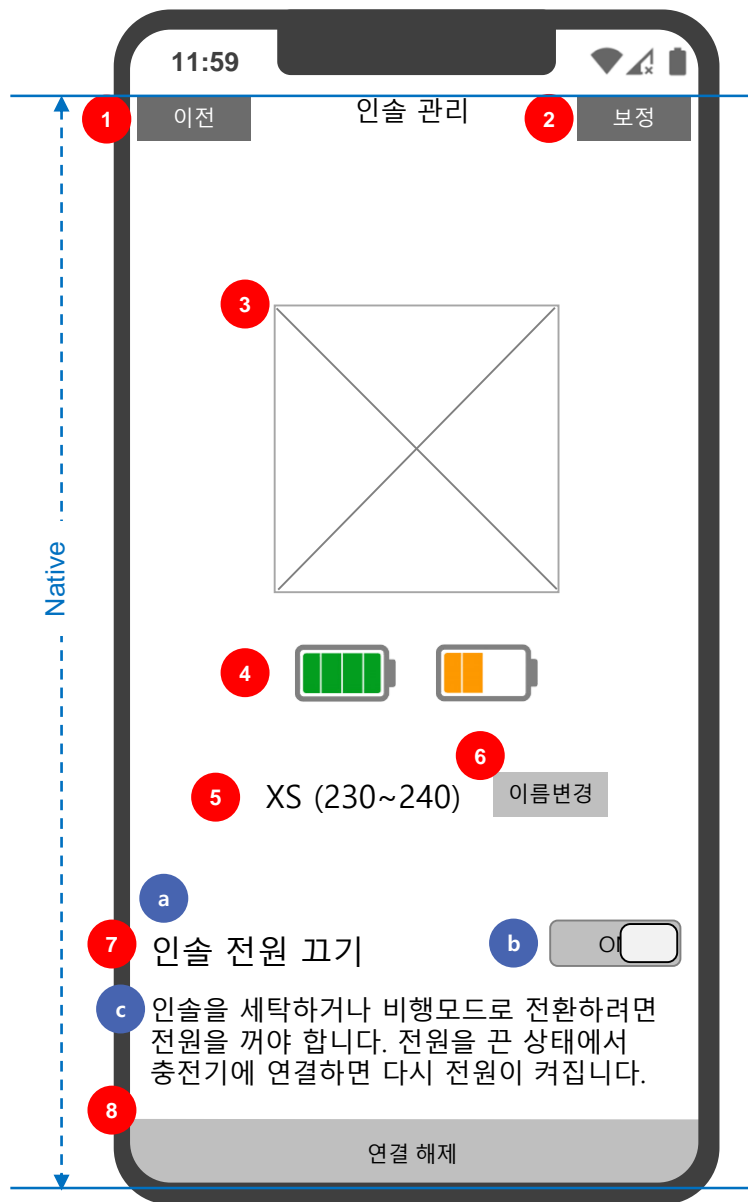

1. 터치 시 홈으로 이동
2. 터치 시 인솔 보정 가이드 팝업
- 인솔 보정 프로세스 진행
3. 인솔 이미지 표시
4. 양쪽 인솔의 배터리 잔량 출력:
 - 1) 배터리 80~100%
 - 2) 배터리 양호 : 50~79%
 - 3) 배터리 부족 : 11~49%
 - 4) 배터리 충전 필요 : 1~10%
5. 연결된 인솔의 이름 출력
6. 터치 시 기존 이름이 입력된 상태로 이름 변경 인풋 필드 팝업
7. 인솔 전원 차단 UI:
 - a) 섹션 타이틀
 - b) off 시 연결 해제 및 인솔 전원 차단
 - c) 전원 off 상황 및 on 가이드
8. 터치 시 인솔 연결 해제 confirm 출력
(confirm 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

End Of Document