



솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 화면설계서 – NEUROGAIT – Patient App(Offline ver)

Document Version : v1.3

Release Date : 2021.12

Organization : 솔티드


Author : 유병규


구분	소속	역할	담당자	확인일	확인
작성	솔티드(주)	PA	유병규		
동료검토	솔티드(주)	기획PA	제갈훈		
동료검토	픽스프레임	기획PL	정수화		
동료검토	솔티드(주)	개발PL	최성찬		
동료검토	픽스프레임	PM	김상환		
검토	솔티드	사업총괄	연상근		
인수/승인	솔티드	총괄PM	강경훈		

날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.10.19	0.1	최초 작성	<ul style="list-style-type: none"> 최초 작성 	정수화
2021.10.19	0.2	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 리뷰 이후 내용 보완 인솔 연결 화면 추가 	정수화
2021.10.22	0.3	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> Stand alone 시나리오 변경 	유병규
2021.10.25	0.4	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> Stand alone □ Offline 용어 변경 동영상 플레이 등 수정 설정화면 삭제 홈 화면에서만 메뉴바 노출 (나머지 화면에서 삭제) 	김상환
2021.10.29	0.41	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 홈 <ul style="list-style-type: none"> - 화면 구성 변경 - 스케줄 없을 경우 시나리오 추가 	유병규
2021.11.01	1.0	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 동영상 촬영 - 밸런스 가이드 출력 추가 	유병규
2021.11.08	1.1	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 운동 <ul style="list-style-type: none"> - 회, 횟수 -> 세트로 명칭 수정 	정수화
2021.11.10	1.15	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 스크린 아이디 수정 - 스케줄 스크린 아이디 수정 	정수화
2021.11.25	1.2	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 화면 추가 <ul style="list-style-type: none"> - 로그인 이력 없을 경우 - 홈 데이터 없을 경우 - 스케줄 데이터 없을 경우 - 처방 운동 없을 경우 화면 수정 <ul style="list-style-type: none"> - 운동 : 디자인 화면 구성 반영 스크린 아이디 수정 보행 측정 시간 수정 	정수화
2021.12.01	1.3	업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 추천 운동 시나리오 추가(p7, 17, 19) 운동(동영상 비촬영) > 족저압 녹화 - 러닝 운동 시 인솔 연결 끊김 발생 시나리오 추가(p24) 	유병규

2021.12.01 수정


진입

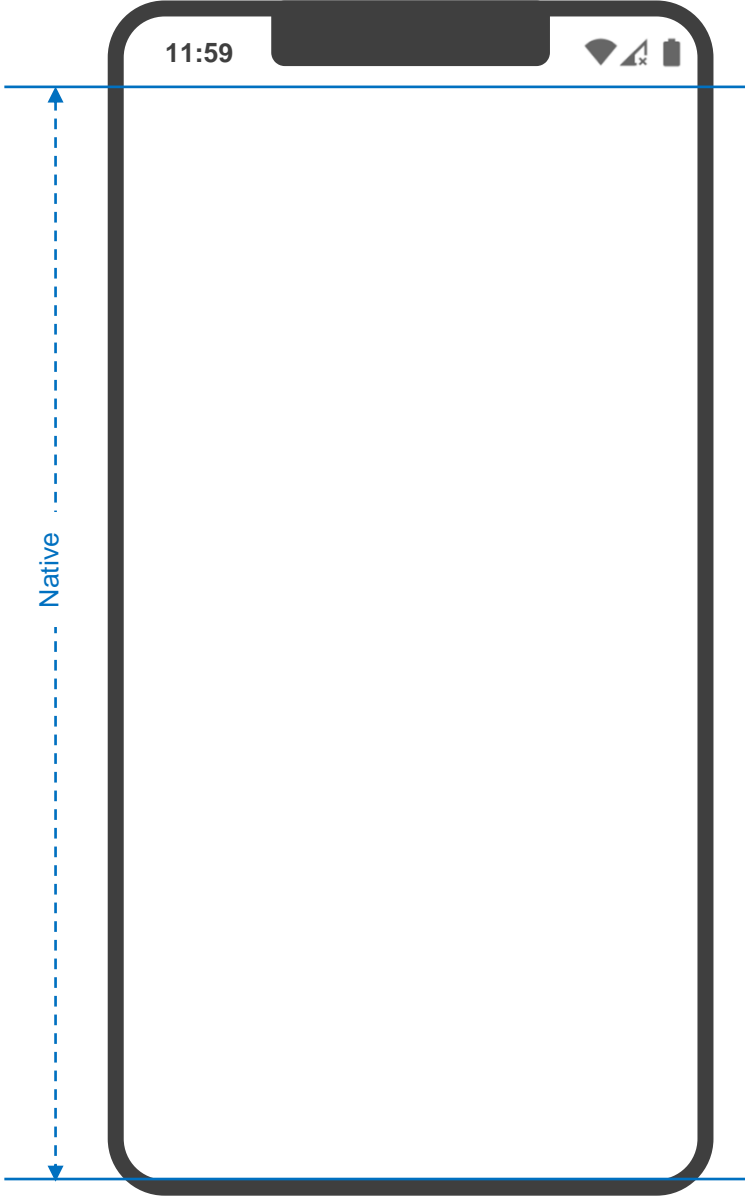Page Description스플래쉬		Screen IDST-PT-A-01	Description
			<ol style="list-style-type: none">1. 스플래쉬<ul style="list-style-type: none">- 스플래쉬에서 모바일 데이터 연결 확인- 모바일 미연결 시 기존 로그인 정보를 이용하여 로그인 후 stand alone 으로 APP 이용

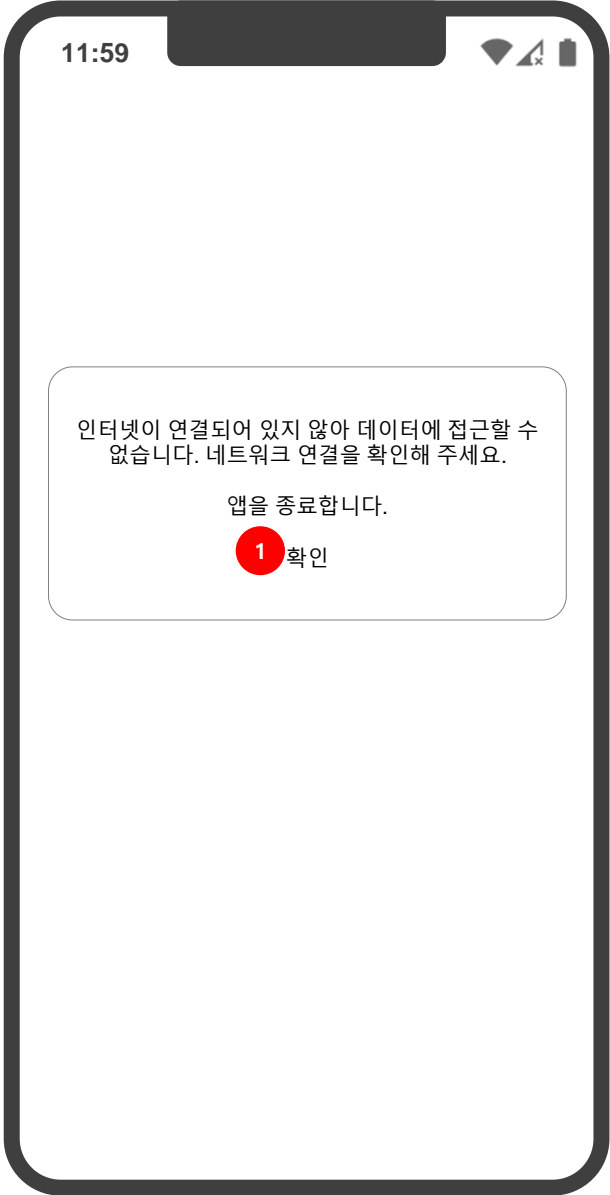Page Description	로그인 이력이 없을 경우	Screen ID	ST-PT-A-01-1	Description
				<p data-bbox="1583 104 1873 132">1. 확인 버튼 터치 시 앱 종료</p> <div data-bbox="1663 968 1974 1129"><p data-bbox="1732 1022 1906 1082">화면 추가 (2021.11.25 수정)</p></div>

홈(예정된 스케줄이 없는 경우)

홈

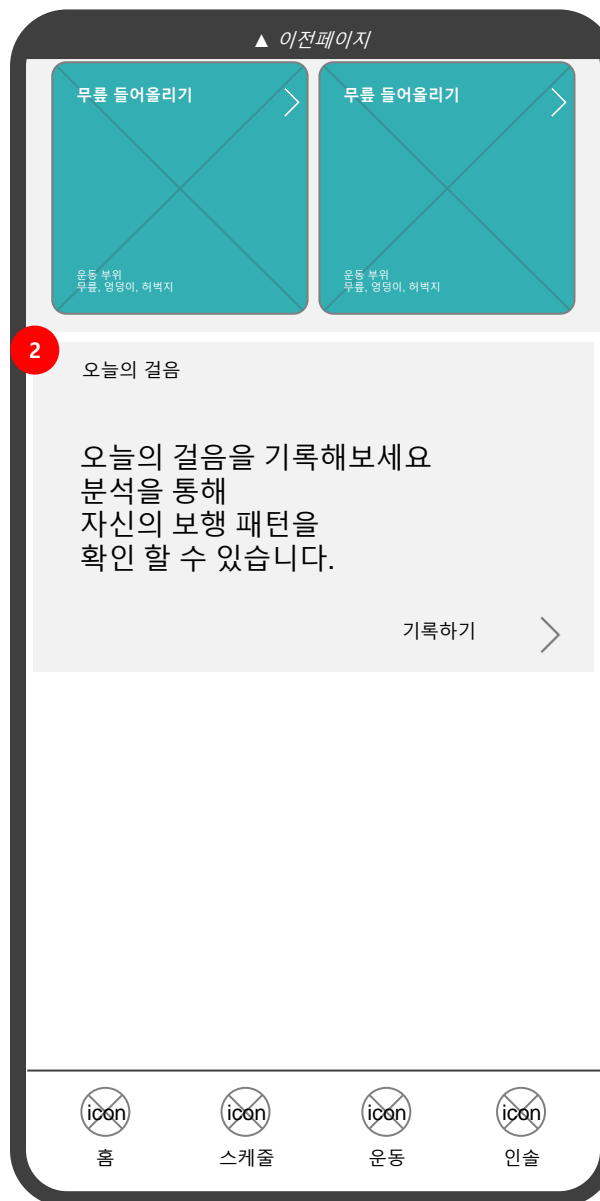

- 추천 운동
 - 추천 운동 리스트 표시
 - 전체, 보행, 밸런스 선택
 - > 보행 운동 : 보행, 왼발 부분부하, 오른발 부분부하
 - > 밸런스 운동 : 제자리 서기, 스쿼트, 왼발 외발 서기, 오른발 외발 서기, 계단 오르기/내리기, 의자에서 앉기/서기, 까치발
 - 운동 tap 시 운동의 스케줄 자동 생성 후 운동 메뉴로 이동, 선택된 운동 포커스
 - > 스케줄 : 오늘, 운동 세트 : 3세트 : 운동 시간 : 30초
- 기록하기 버튼 클릭 시 측정하기 화면으로 이동

추천 운동 tap 시 이동 시나리오
추가
(2021.12.01)

홈(데이터 있는 경우)

1. 오늘 날짜 및 요일 표시
2. 오늘 운동 달성률, 총 운동 수, 미진행 운동 수
3. 오늘의 결과 표시
4. 오늘의 운동 리스트 출력
 - 가로 스와이프
 - 등록된 운동 스케줄 중 아래와 같은 순서로 출력
 - 진행중 -> 대기 -> 완료 -> 운동 더하기
5. 마지막은 운동 화면으로 이동되도록 바로가기 배너 제공
6. 기록하기 버튼 클릭 시 측정하기 화면으로 이동






1. 오늘 날짜 및 요일 표시
2. -
3. 기본 안내 문구 출력
4. 기본 배너 출력
5. 운동 더하기 클릭 시 운동 화면으로 이동
6. 기록하기 터치 시 측정하기 화면으로 이동



1. 보행 시간 선택
 - 시간 선택 시 선택된 시간 포커스
 - 시간 변경 될 수 있음
2. 시작
 - 시작 tap 시 측정 화면으로 이동
3. 이전
 - 홈으로 이동
4. 안드로이드 이전버튼 tap
 - 1번 : 홈으로 이동

Page Description	홈 > 오늘의 걸음 > 기록하기 > 걸음 측정 하기 - 실행	Screen ID	ST-PT-A-05-2	Description
	<div data-bbox="51 142 793 1332"></div>			<div data-bbox="1583 101 2001 408"><ol style="list-style-type: none">1. 타이머 표시<ul style="list-style-type: none">- 타이머 종료 시 홈으로 이동- 홈에서 분석된 데이터 표시2. 족저압<ul style="list-style-type: none">- 측정 중 실시간 족저압 및 밸런스 표시3. 홈 화면으로 이동<ul style="list-style-type: none">측정한 데이터 기준 분석 결과 출력(다음페이지 참조)</div>

보행 측정 데이터가 있을 경우 화면

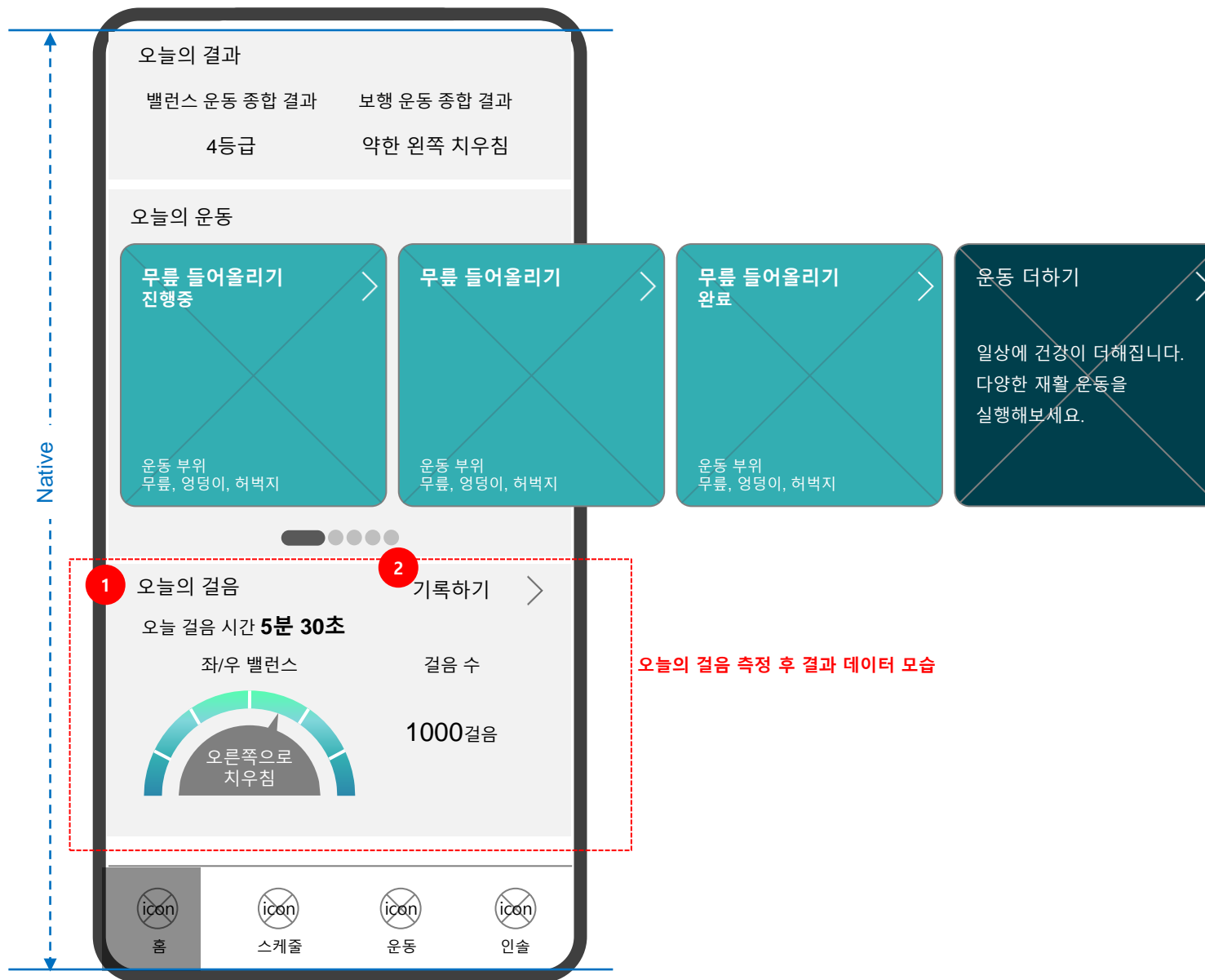

1. 오늘의 걸음

- 오늘 걸음 데이터를 이용하여 분석 데이터 표시
- 오늘 걸음 시간
 - > 오늘의 걸음 측정한 총 시간 표시(누적데이터)
- 좌/우 밸런스
 - > 오늘 걸음 평균 좌/우 밸런스 표시
 - > 그래프 내 문구 하단 표 참조
- 걸음 수
 - > 오늘 걸음 총 걸음 수 표시
- 상세 결과 보기
 - > 상세 결과는 hybrid에서만 제공


2. 기록하기

- 오늘의 걸음 재실행 버튼

스케줄(데이터 없는 경우)

Page Description	스케줄(데이터 없을 경우)	Screen ID	ST-PT-A-07-1	Description
<div data-bbox="155 145 762 1332"><div><div>11:59</div><div>NEUROGAIT2021.10.29(금요일)</div><div>달성률오늘의 운동미진행</div><div>오늘의 결과</div><div>아직 운동을 진행하지 않았어요.</div><div>오늘은 운동 스케줄이 없습니다.</div><div>확인1</div><div>일상에 건강이 더해집니다.</div><div>다양한 재활 운동을 실행해보세요.</div><div>오늘의 걸음</div><div>오늘의 걸음을 기록해보세요</div><div>분석을 통해 자신의 보행 패턴을 확인 할 수 있습니다.</div><div>기록하기 ></div><div><div>홈스케줄운동인솔</div></div></div></div> <div data-bbox="1583 101 1893 129"><div>1. 확인 버튼 터치 시 팝업 종료</div></div>				

스케줄(데이터 있는 경우)

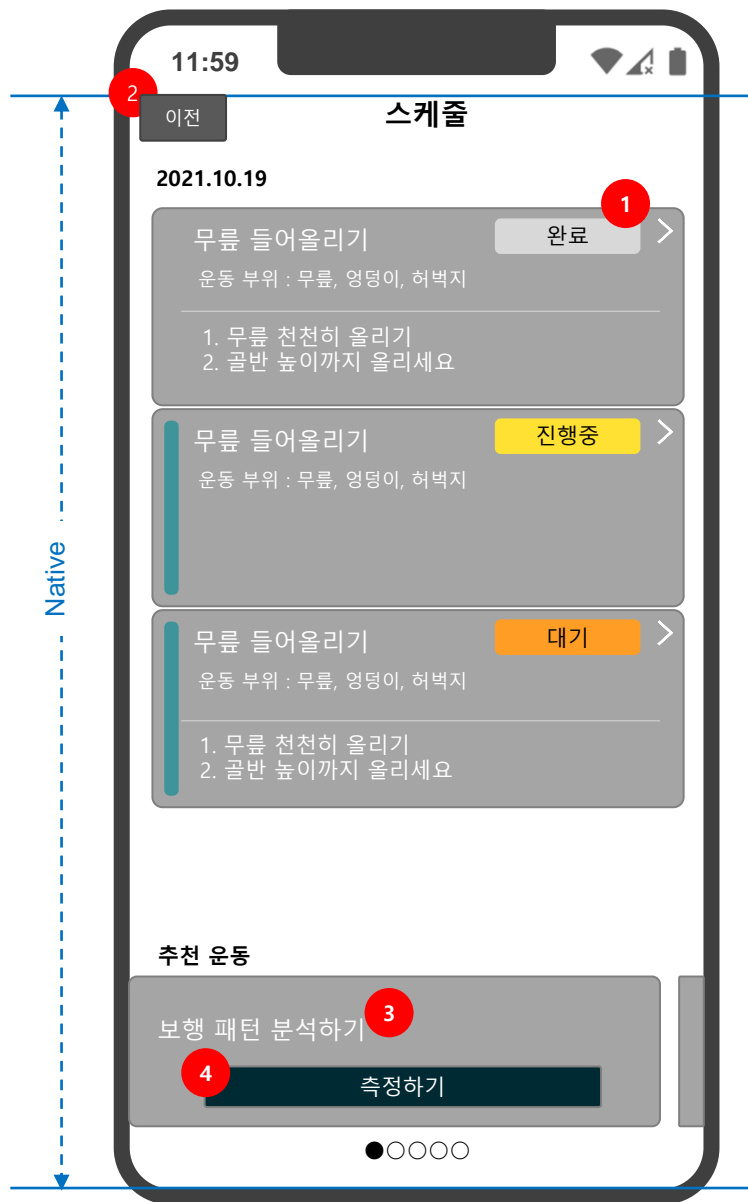

1. 진행 상태 표기
완료, 진행중, 대기
터치 시 운동 상세 페이지로 이동
2. 이전 버튼:
- Tap 시 이전 화면으로 이동
3. 추천 운동에 기본 보행 운동 측정 배너 우선 출력
- 다른 추천 운동 선택 시 해당 운동 화면으로 이동
- 운동 tap 시 운동의 스케줄 자동 생성 후 운동 메뉴로 이동, 선택된 운동 포커스
 > 스케줄 : 오늘, 운동 세트 : 3세트 : 운동 시간 : 30초
4. 측정하기 화면으로 이동

추천 운동 tap 시 이동 시나리오
추가
(2021.12.01)

운동(데이터 없는 경우)




- 추천 운동
 - 추천 운동 리스트 표시
 - 전체, 보행, 밸런스 선택
 - > 보행 운동 : 보행, 왼발 부분부하, 오른발 부분부하
 - > 밸런스 운동 : 제자리 서기, 스쿼트, 왼발 외발 서기, 오른발 외발 서기, 계단 오르기/내리기, 의자에서 앉기/서기, 까치발
 - 운동 tap 시 선택된 운동을 스케줄에 추가, 운동화면으로 이동 후 해당 운동 표시
- 터치 시 해당 운동 진행 화면으로 이동
 - 운동 tap 시 운동의 스케줄 자동 생성 후 운동 메뉴로 이동, 선택된 운동 포커스
 - > 스케줄 : 오늘, 운동 세트 : 3세트 : 운동 시간 : 30초


추천 운동 tap 시 이동 시나리오
추가
(2021.12.01)

운동(데이터 있는 경우)

Page Description	운동	Screen ID	ST-PT-A-06	Description
<div></div>				<div>1. 운동 진행 버튼: - Tap 시 운동 진행</div> <div>2. 이전 버튼: - Tap 시 이전 화면으로 이동</div> <div>Offline에서 운동 영상, 문의 하기, 메모 기능 지원하지 않음</div>

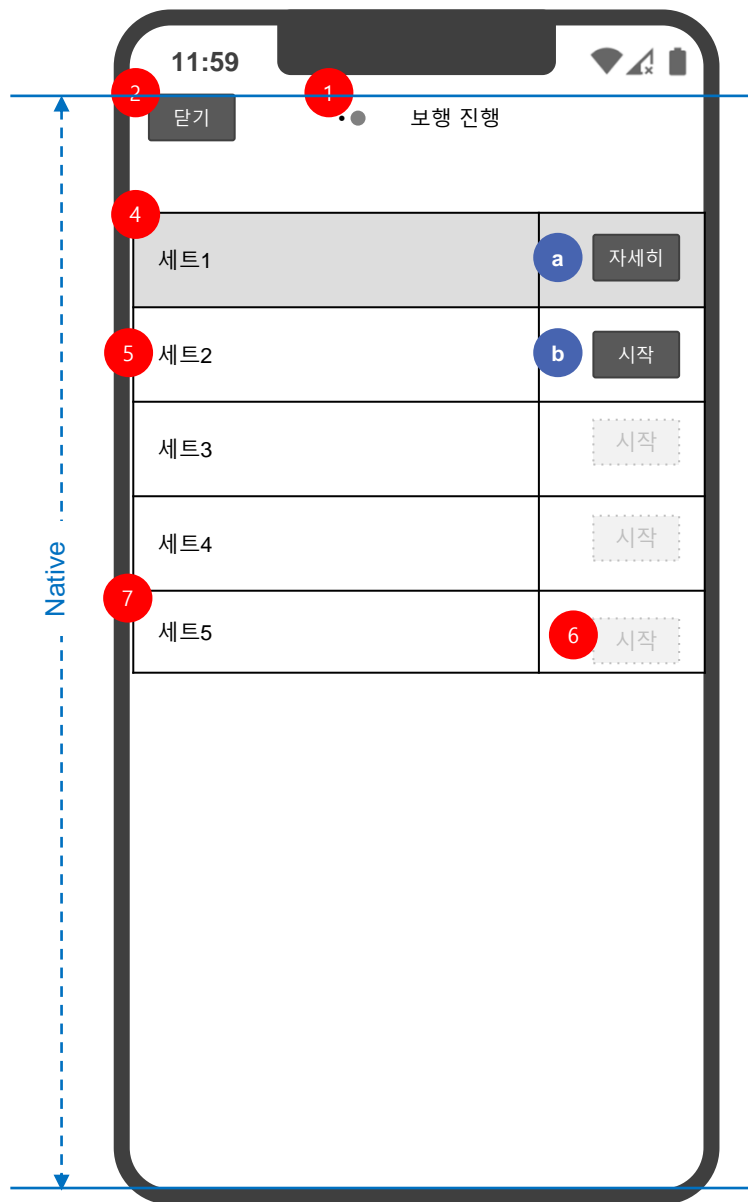

- 타이틀:
 - 1) 진행하는 운동명 출력
 - 2) 의료진 추가 운동 뱃지 표시
 - 닫기 버튼:
 - 터치 시 운동 페이지 닫음, 진행률 재산정
 - 정방향 운동 가이드 동영상:
 - 1) 페이지 로드 시 일시정지 상태
 - 2) 반복 재생 없음
 - 1회 차:
 - 완료된 상태 배경색 적용
 - a. 터치 시 족저압 페이지 팝업
 - 2회차:
 - 미진행 상태 배경색 표시
 - b. 버튼 터치 시 족저압 기록 페이지 팝업
 - 미진행 상태의 시작 버튼:
 - 직전 회차를 완료하기 전 버튼 비활성화
 - 마지막 회차 완료 시 운동 완료 피드백 팝업
- 운동 시작 시 인슐 연결이 되지 않은 상태이며 인슐 연결 프로세스로 진입

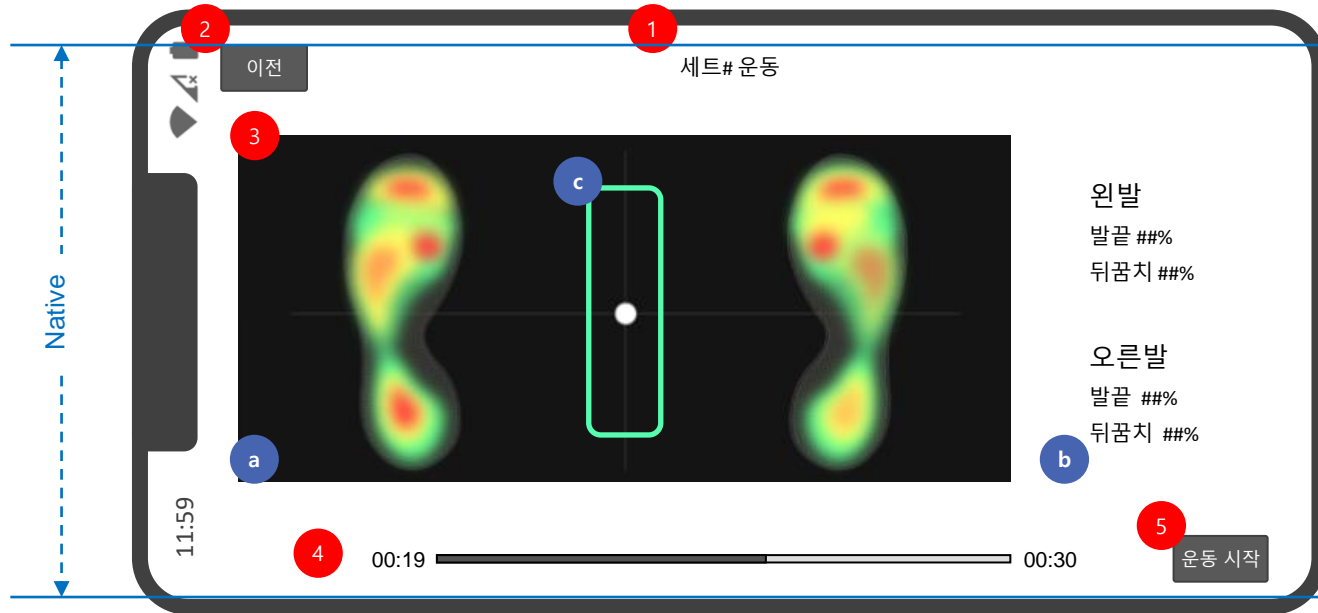

- 타이틀:
- 운동 회차 출력
- 취소 버튼:
- Tap 시 이전 화면으로 이동
- 족저압 운동 영역:
a. 족저압 출력
b. 양쪽 밸런스 비중 출력
c. 밸런스 가이드 출력
- 족저압 운동 게이지:
1) ⑤ 버튼이 "운동 시작"인 상태에서 Tap 시 3초 카운트다운 후 운동 시작
2) ⑤ 버튼이 "중지"인 상태에서 Tap 시 게이지 및 시간 초기화
- 족저압 운동 컨트롤 버튼:
1) 페이지 진입 시 "운동 시작" 레이블 출력, Tap 시 운동 진행, 운동 완료 시 자동으로 운동 조화 화면으로 이동
2) 운동 진행 중 "중지" 레이블 출력, Tap 시 운동 중지, 운동 초기화
- 인솔 연결 끊김 알럿 메시지
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화, 컨트롤 버튼 운동 시작으로 변경
2) "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 회차 운동 페이지 닫음
3) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도


6

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고 운동을
재개하시겠어요?

중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이
연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.

운동 중단

인솔 연결

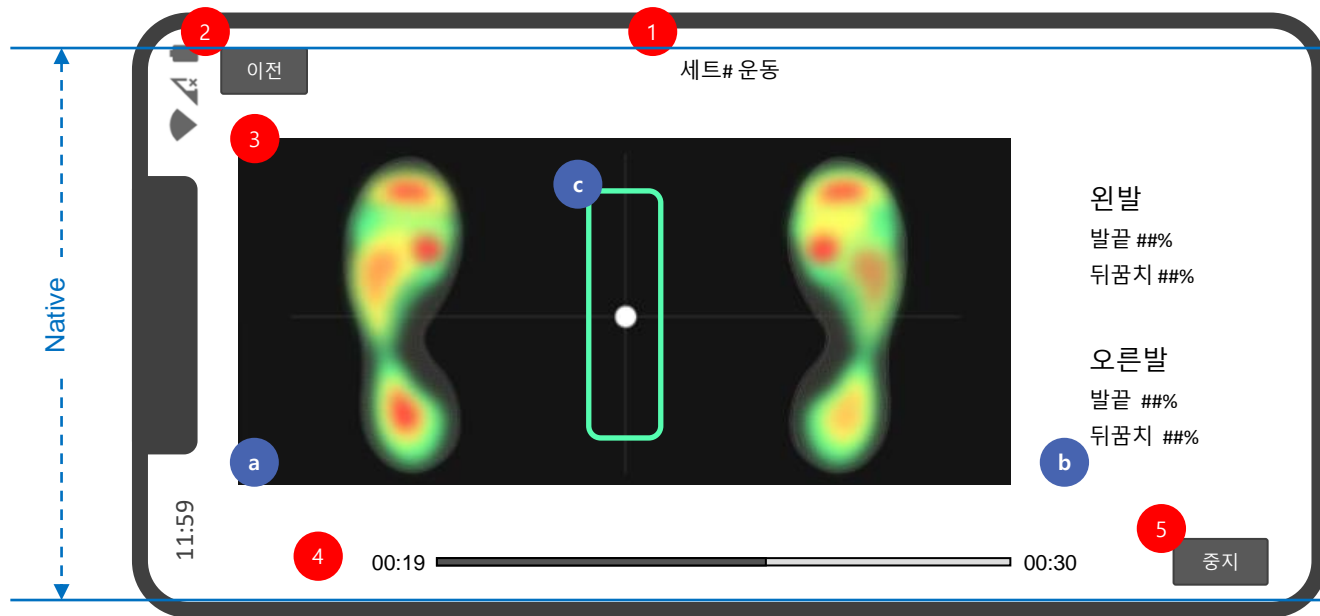

- 타이틀:
- 운동 회차 출력
- 취소 버튼:
- Tap 시 이전 화면으로 이동
- 족저압 운동 영역:
a. 족저압 출력
b. 양쪽 밸런스 비중 출력
c. 밸런스 가이드 출력
- 족저압 운동 게이지:
1) ⑤ 버튼이 "운동 시작"인 상태에서 Tap 시 3초 카운트다운 후 운동 시작
2) ⑤ 버튼이 "중지"인 상태에서 Tap 시 게이지 및 시간 초기화
- 족저압 운동 컨트롤 버튼:
1) 페이지 진입 시 "운동 시작" 레이블 출력, Tap 시 운동 진행, 운동 완료 시 자동으로 운동 조화 화면으로 이동
2) 운동 진행 중 "중지" 레이블 출력, Tap 시 운동 중지, 운동 초기화
- 인솔 연결 끊김 알럿 메시지
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화, 컨트롤 버튼 운동 시작으로 변경
2) "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 회차 운동 페이지 닫음
3) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도
- 러닝 운동 중 인솔 연결 끊김 알럿 메시지
- 러닝 운동은 동영상 촬영 시나리오 없음
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 일시정지, 컨트롤 ⑤ 버튼 '이어하기'으로 변경
2) 팝업에서 "운동 중단" Tap 시 운동 정보 휘발, 세트 운동 페이지 닫음
3) 팝업에서 "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

러닝 운동 시 인솔 연결 끊김 발생
시나리오 추가
(2021.12.01)

6

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고 운동을
재개하시겠어요?

중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이
연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.

운동 중단

인솔 연결


7

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고 운동을
이어 하시겠어요?


인솔이 연결 되면 운동을 이어서 진행 가능합니다.
인솔이 연결되어 있지 않으면
운동을 진행할 수 없습니다.

운동 중단


인솔 연결

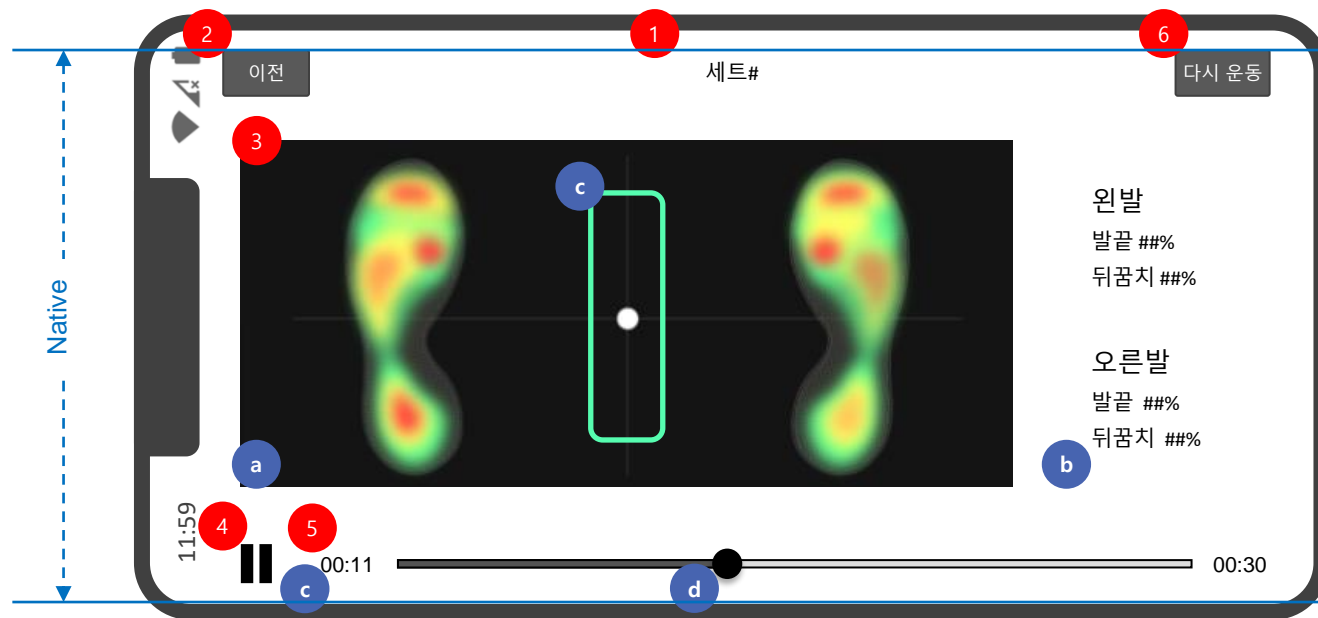

1. 타이틀:
- 회차 출력
2. 이전 버튼:
1) Tap 시 이전 화면으로 이동
3. 족저압 영역:
a. 운동된 족저압 출력
b. 양쪽 밸런스 비중 출력
c. 밸런스 가이드 출력
4. 재생/일시정지 버튼:
- Tap 시 ⑤ 타임라인 재생 및 ③의 데이터 재생/일시정지
5. 타임라인:
c. 현재 ④가 위치한 시점 출력
d. seeker: 좌우 스와이프하여 해당 시점의 ③의 데이터 출력
6. 다시 운동
- 현재 데이터 제거 후 해당 운동 족저압 녹화 화면으로 이동
- 오늘 이전 날짜의 운동 운동 확인 시 다시 운동 버튼 비노출

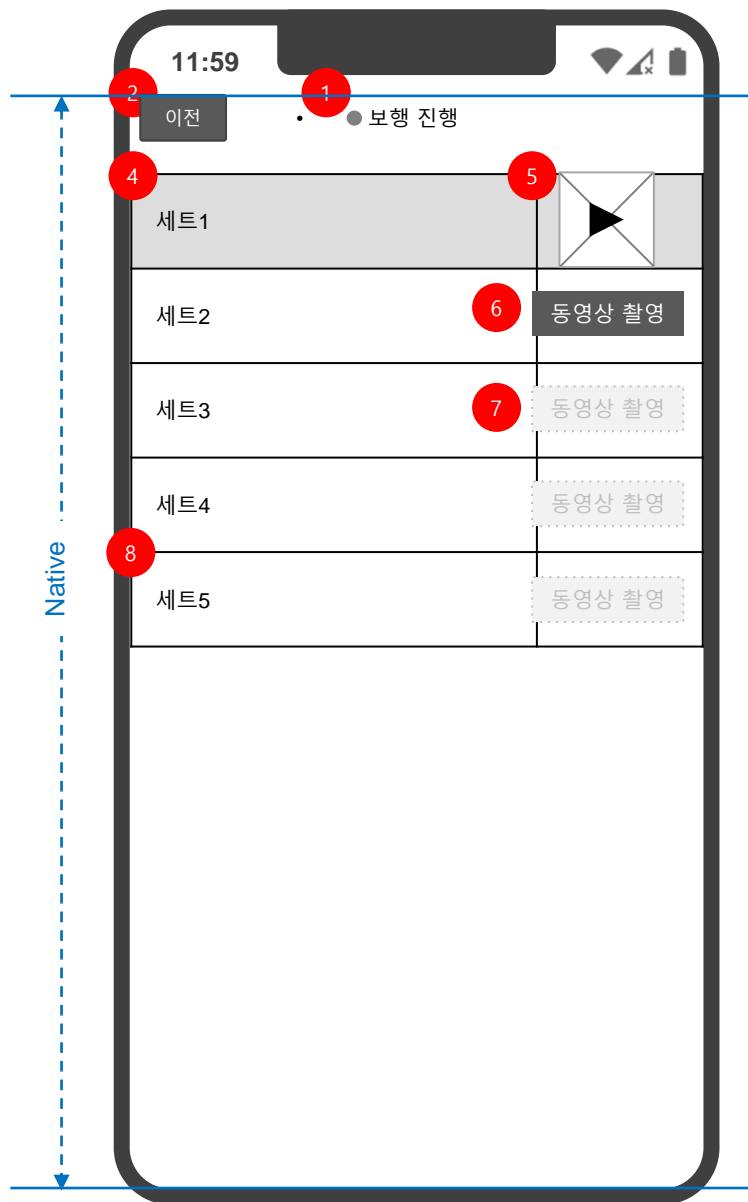

1. 타이틀:
 - 1) 진행하는 운동명 출력
 - 2) 본인 추가 운동 배지 표시
2. 이전 버튼:
 - Tap 시 이전 화면으로 이동
 - 진행률 재산정
3. 정방향 운동 가이드 동영상:
 - 1) 페이지 로드 시 일시정지 상태
 - 2) 반복 재생 없음
4. 1회차:
 - 배경색 적용
5. 동영상 썸네일:
 - 1) 동영상 파일의 첫 프레임 출력
 - 2) Tap 시 동영상 플레이어 화면으로 이동
6. 동영상 촬영 버튼:
 - 1) Tap 시 동영상 촬영 카메라 화면으로 이동
 - 2) 동영상 촬영 완료 시 ⑤으로 변경
7. 미진행 상태의 동영상 촬영 버튼:
 - 직전 회차를 완료하기 전 버튼 비활성화
8. 마지막 회차 완료 시 운동 완료 피드백 팝업 표시

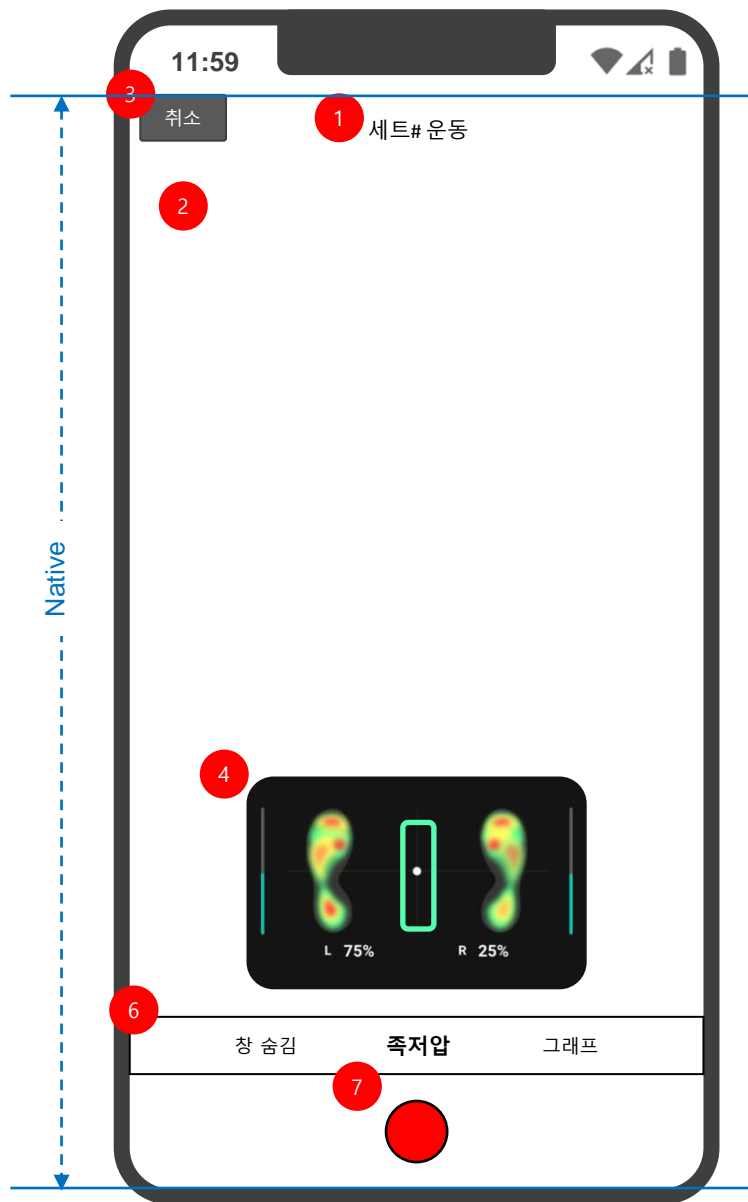

7

인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하시겠어요?

인솔이 연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수 없습니다.


운동 중단

인솔 연결

5



1. 타이틀:
- 촬영 회차 출력
2. 뷰파인더
1) 화면 전체 범위
2) 족저압 레이어와 별개로 촬영
3. 취소 버튼:
- Tap 시 이전 화면으로 이동
4. 족저압 레이어
5. 그래프 레이어
6. 레이어 컨트롤 바:
1) 현재 상태 레이블 강조
2) 창 숨김 Tap 시 레이어 숨김
3) 족저압 Tap 시 족저압 레이어 표시
4) 그래프 Tap 시 그래프 레이어 표시
7. 녹화 버튼
- Tap 시 녹화 시작
8. 인솔 연결 끊김 알럿 메시지:
1) 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화
2) "운동 중단" Tap 시 운동 진행 화면으로 이동
2) "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도

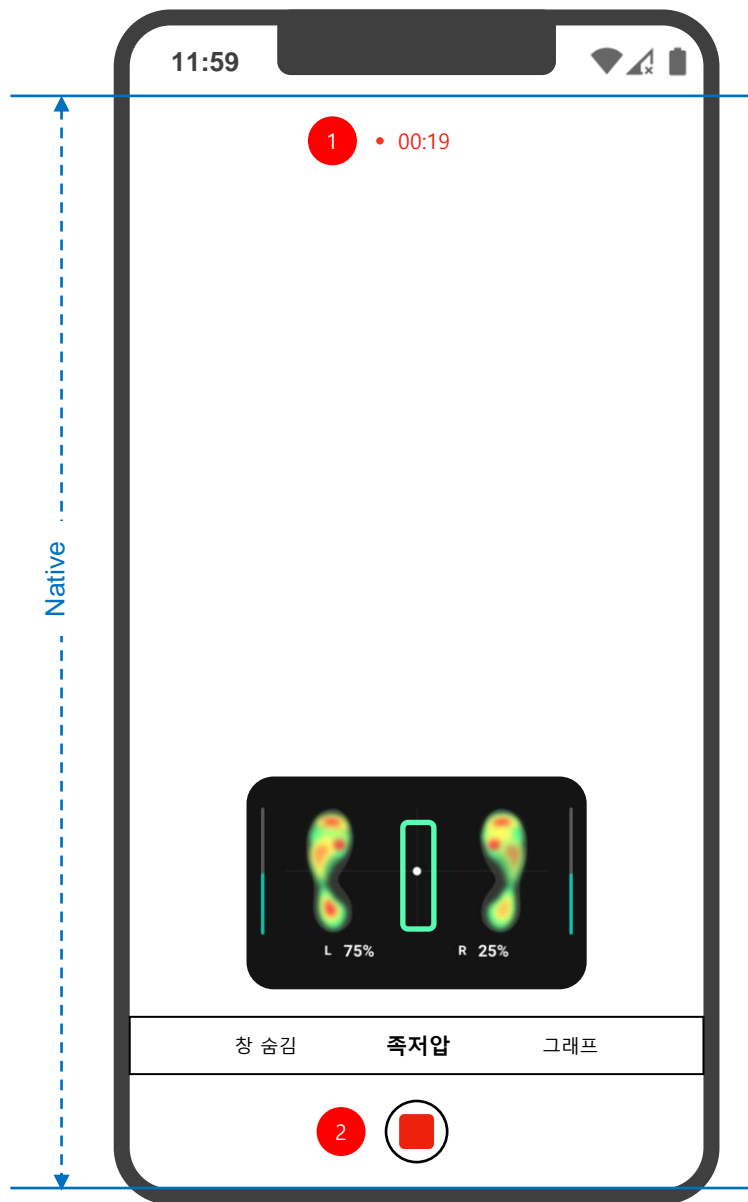

3


인솔 연결이 끊겼습니다. 다시 연결하고
운동을 재개하시겠어요?

중지된 운동은 다시 진행해야 하며 인솔이
연결되어 있지 않으면 운동을 진행할 수
없습니다.


운동 중단

인솔 연결


- 촬영 타이머:
 - 운동별 시간에 맞춰 타이머 재생
 - 타이머 만료 시 촬영 완료 후 운동 조회 화면으로 이동
- 녹화 중단 버튼:
 - Tap 시 녹화 중단, 운동 초기화
- 인솔 연결 끊김 알럿 메시지:
 - 운동 진행 중 메시지 출력 시 운동, 타이머 초기화
 - "운동 중단" Tap 시 촬영 동영상 휘발, 카메라 닫음
 - "인솔 연결" Tap 시 인솔 연결 시도


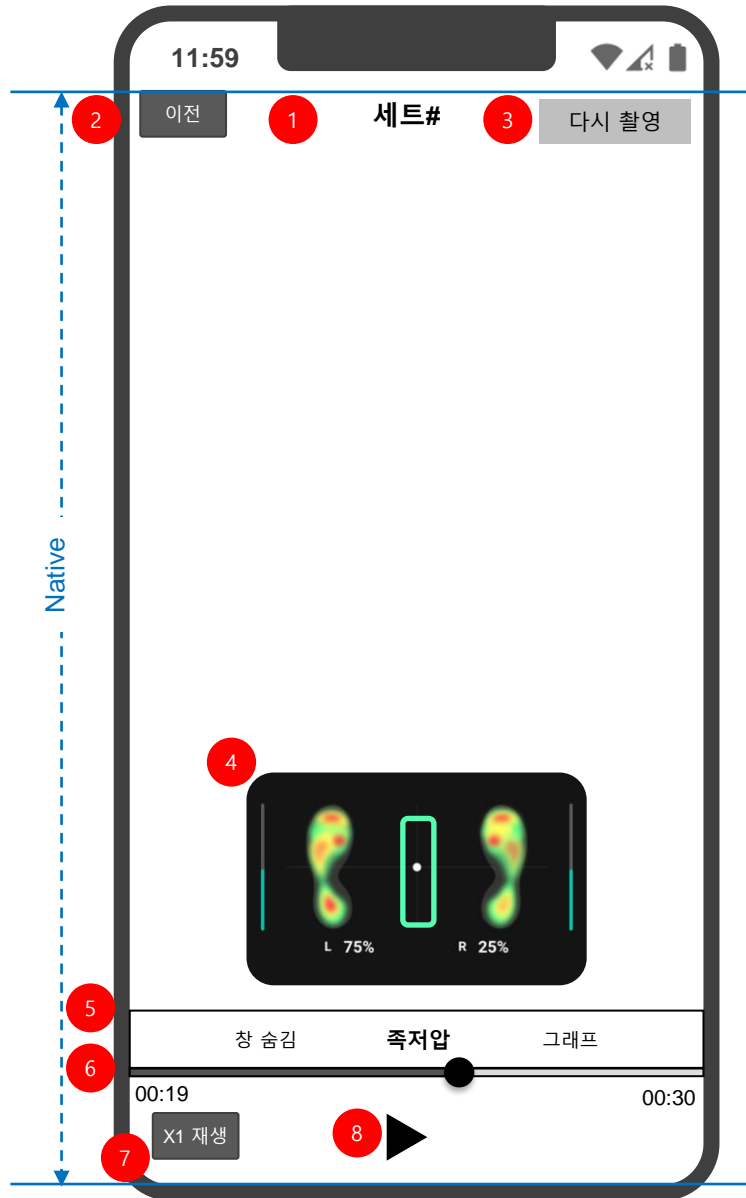


- 타이틀:
 - 촬영 회차 출력
- 닫기 버튼:
 - Tap 시 운동 대기 화면으로 이동
- 다시 촬영 버튼:
 - Tap 시 운동 다시 촬영,
- 촉지압 레이어
- 레이어 컨트롤 바:
 - 현재 상태 레이블 강조
 - 창 숨김 Tap 시 레이어 숨김
 - 촉지압 Tap 시 촉지압 레이어 표시
 - 그래프 Tap 시 그래프 레이어 표시
 - ⑥ 조작에 따라 데이터 출력
- 비디오 Seeker:
 - 좌우로 슬라이드하여 재생 컨트롤
 - 좌측 하단 영상 현재 시간 표시
 - 우측 하단 영상 전체 시간 표시
- 재생 속도 조절 버튼:
 - Tap 시 "x1", "x1/2", "x1/4" 순서로 버튼 레이블 로테이션 및 동영상 재생 속도 조절
- 재생/일시정지 버튼:
 - 터치하여 동영상 재생 또는 일시정지

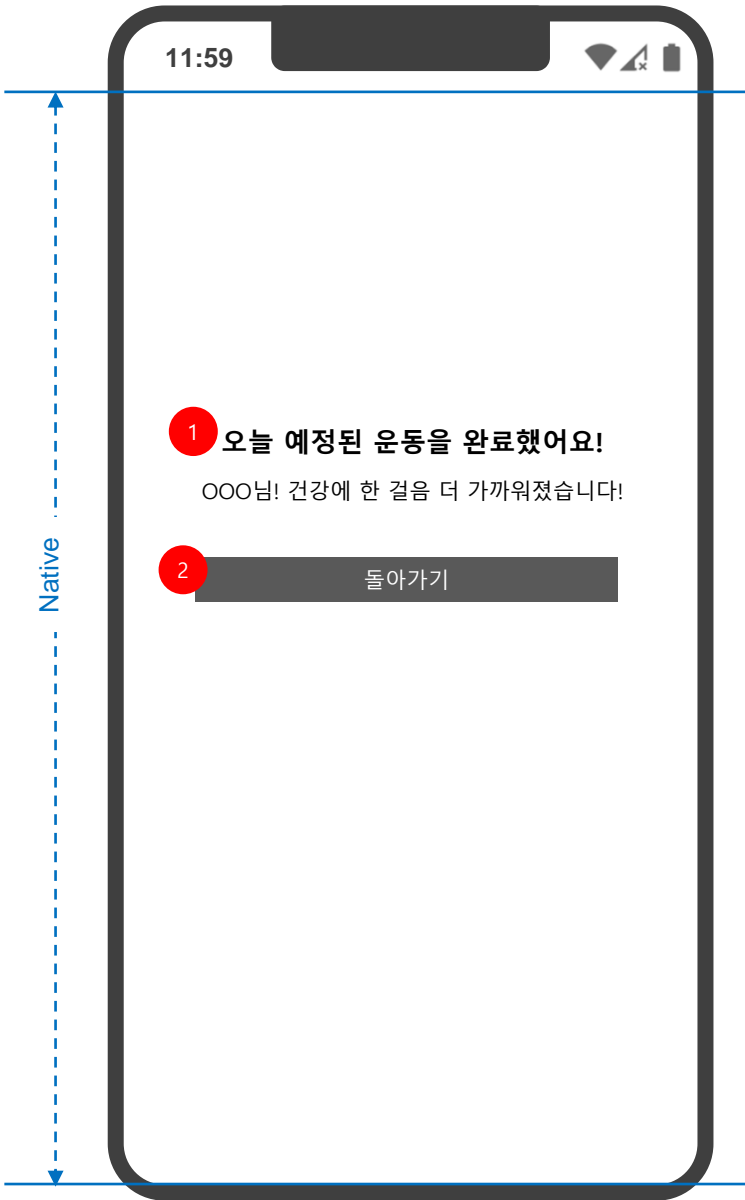
Page Description	나의 운동 스케줄 > 운동 진행 > 운동 완료	Screen ID	ST-PT-A-06-12	Description
				<ol style="list-style-type: none">운동 완료 피드백:<ol style="list-style-type: none">사용자 이름 출력안내 문구 아래 운동 완료를 나타내는 일러스트 출력돌아가기 버튼:<ul style="list-style-type: none">터치 시 팝업창 닫음

인솔

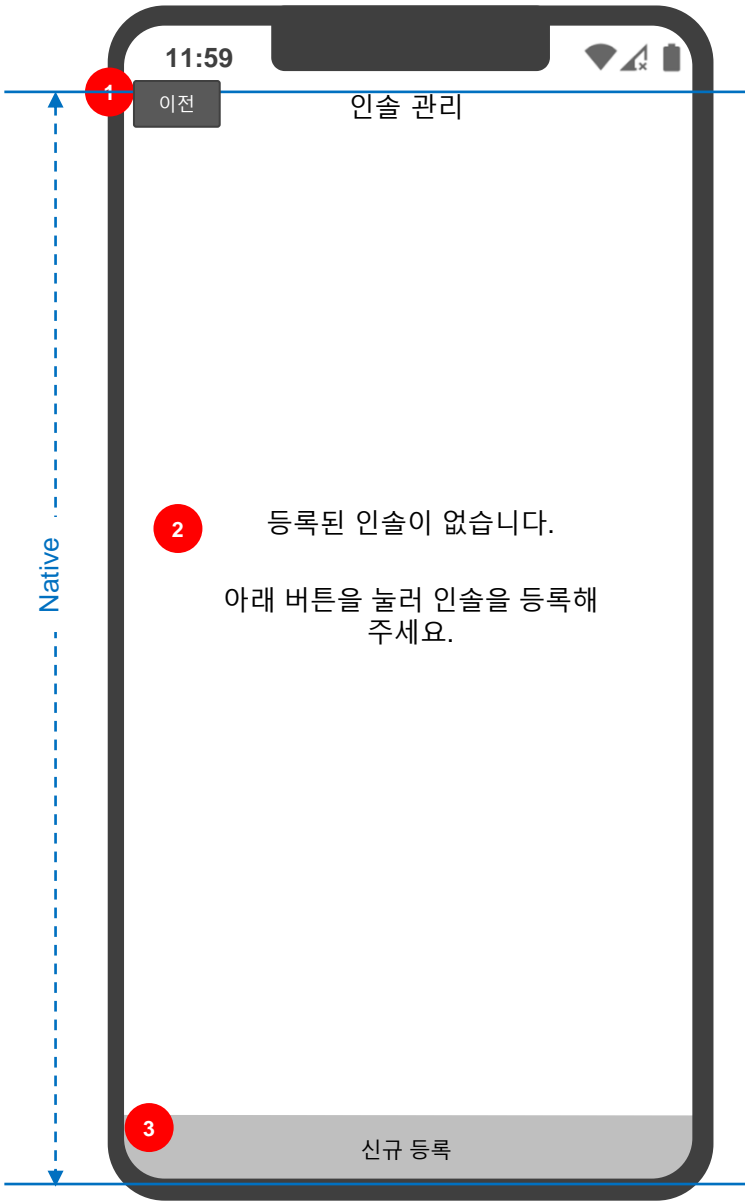Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 - 빈 데이터	Screen ID	ST-PT-A-08	Description
				<ol style="list-style-type: none">1. 터치 시 홈화면으로 이동2. 빈 데이터 출력<ul style="list-style-type: none">- 등록된 인솔이 없을 시 출력3. 터치 시 인솔 연결 가이드 팝업<ul style="list-style-type: none">- 인솔 등록 프로세스 진행

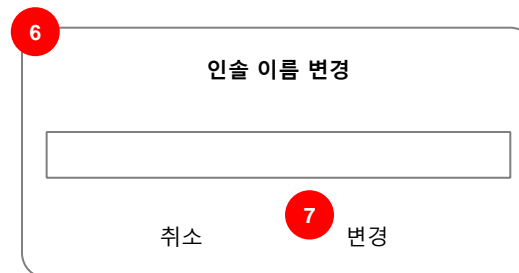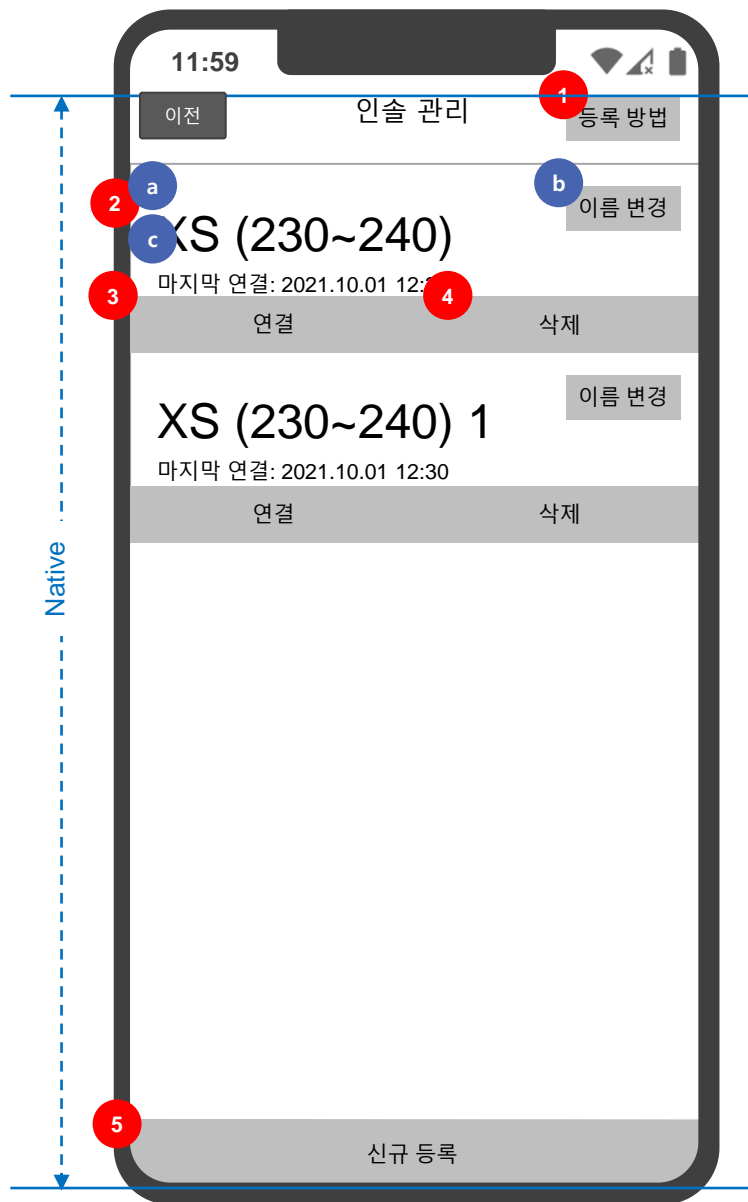


- 터치 시 인솔 연결 가이드 팝업
- 1) 정렬 기준: 등록 일시 기준 최고(最古)순
2) 인터페이스:
a) 등록 또는 변경한 인솔 이름 출력
b) 터치 시 기존 이름이 입력된 상태로 이름 변경 인풋 필드 팝업
c) 사용자의 디바이스와의 연결 일시 출력
- 터치 시 디바이스와 “연결 중” 상태 화면 팝업
- 터치 시 등록 정보 삭제 confirm 출력
(confirm 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276
- 터치 시 인솔 연결 가이드 팝업
- 인솔 등록 프로세스 진행
- 인솔 이름 변경
- 모든 문자 입력 가능, 20자 초과 입력 시 입력 불가
- 변경
- 변경 Tap 시 입력한 이름 유효성 검사 기등록 인솔과 이름 겹칠 시 알럿 메시지 출력
- 겹치는 이름이 없을 경우 인솔 등록

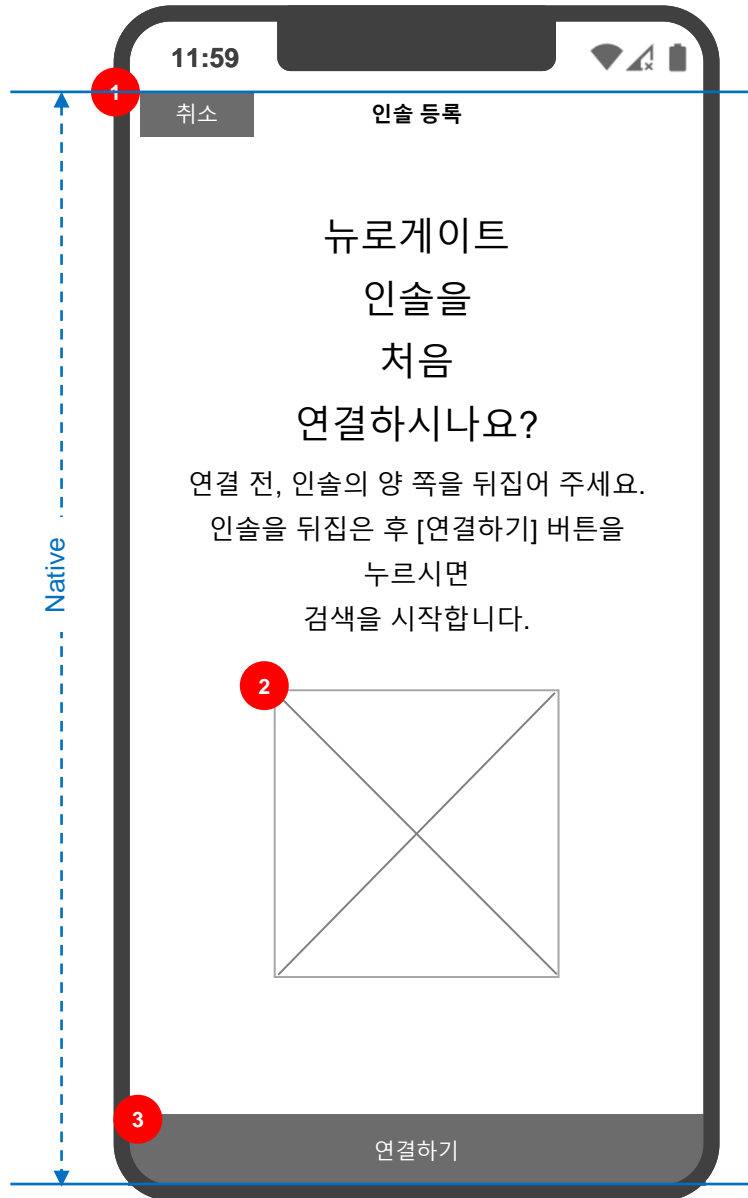


1. 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음
2. 인솔을 뒤집는 액션을 시각적으로 표현하는 이미지 표시
3. 터치 시 인솔 블루투스 검색 진행

Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 > 신규 등록 - 검색중	Screen ID	ST-PT-A-08_2	Description
 <p>The image shows a mobile application interface for 'New Registration - Search'. The screen is titled '인솔 등록' (Instructor Registration) and has a '취소' (Cancel) button. Below the title is a search bar with the text '인솔 검색' (Instructor Search) and navigation arrows pointing to '원발 검색' (Original Search) and '오른발 검색' (Right Search). A message '휴대폰 근처의 뉴로게이트 인솔을 찾고 있어요...' (Looking for Neurogate instructors near your phone...) is displayed. Below the message is a large square with an 'X' inside, indicating a search result or a placeholder. A vertical dashed line on the left side of the screen is labeled 'Native'.</p>				<ol style="list-style-type: none"> 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음 인솔 등록 프로세스 표시 UI <ol style="list-style-type: none"> 인솔 등록 전체 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조 5초간 검색, 검색 시 바로 원발 검색 프로세스로 진행, 미검색 시 실패 피드백 "인솔 검색 중" 문구 및 인솔을 검색하는 액션을 시각적으로 표현하는 애니메이션 또는 gif 표시

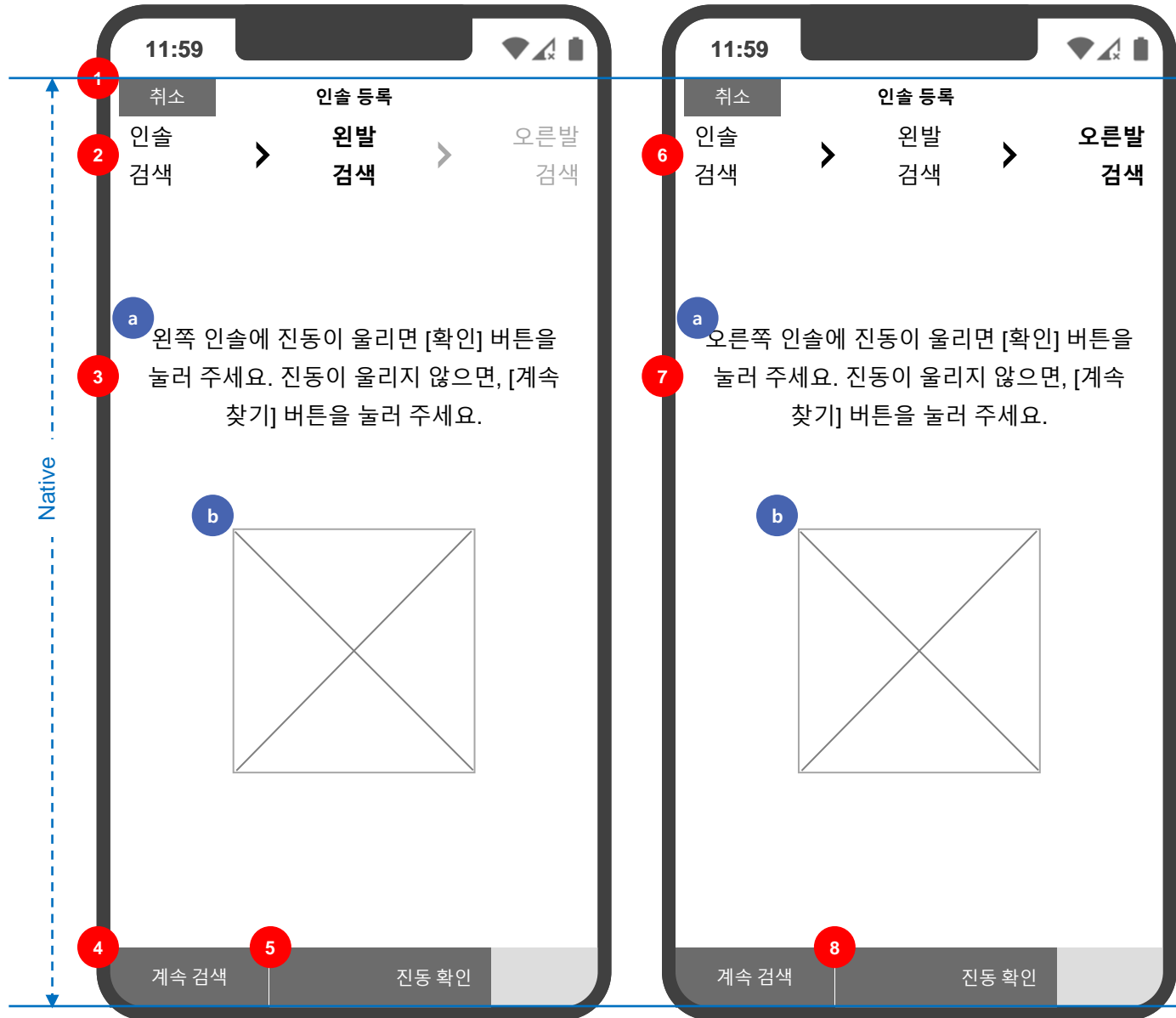


- 터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음
- 인솔 등록 프로세스 표시 UI
 - 인솔 등록 전체 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조
 - 5초간 검색, 검색 시 바로 원발 검색 프로세스로 진행, 미검색 시 실패 피드백
- 왼쪽 검색 확인 UI
 - 인솔 확인 안내 문구 출력
 - 인솔 진동을 시각적으로 표현하는 이미지 표시
- ⑤ 버튼의 게이지가 다 채워진 후에 터치 가능
 - 터치 시 검색된 인솔에 진동 명령
- 화면 로드 시 버튼 내 게이지가 왼쪽에서부터 채워지며 왼쪽 인솔에 진동 명령
 - 게이지가 다 채워진 후에 터치 가능
 - 터치 시 오른발 진동 명령
- 오른쪽 검색 확인 UI
 - 인솔 확인 안내 문구 출력
 - 인솔 진동을 시각적으로 표현하는 이미지 표시


Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 > 신규 등록 - 검색 실패	Screen ID	ST-PT-A-08_3	Description
<div></div>				<ol style="list-style-type: none">터치 시 인솔 등록 프로세스 중단, 가이드 닫음검색 실패 피드백 UI<ol style="list-style-type: none">인솔 검색 실패 문구 출력인솔 검색 실패 상태를 시각적으로 표현하는 이미지 표시터치 시 인솔 재검색 진행, 검색중 UI 출력

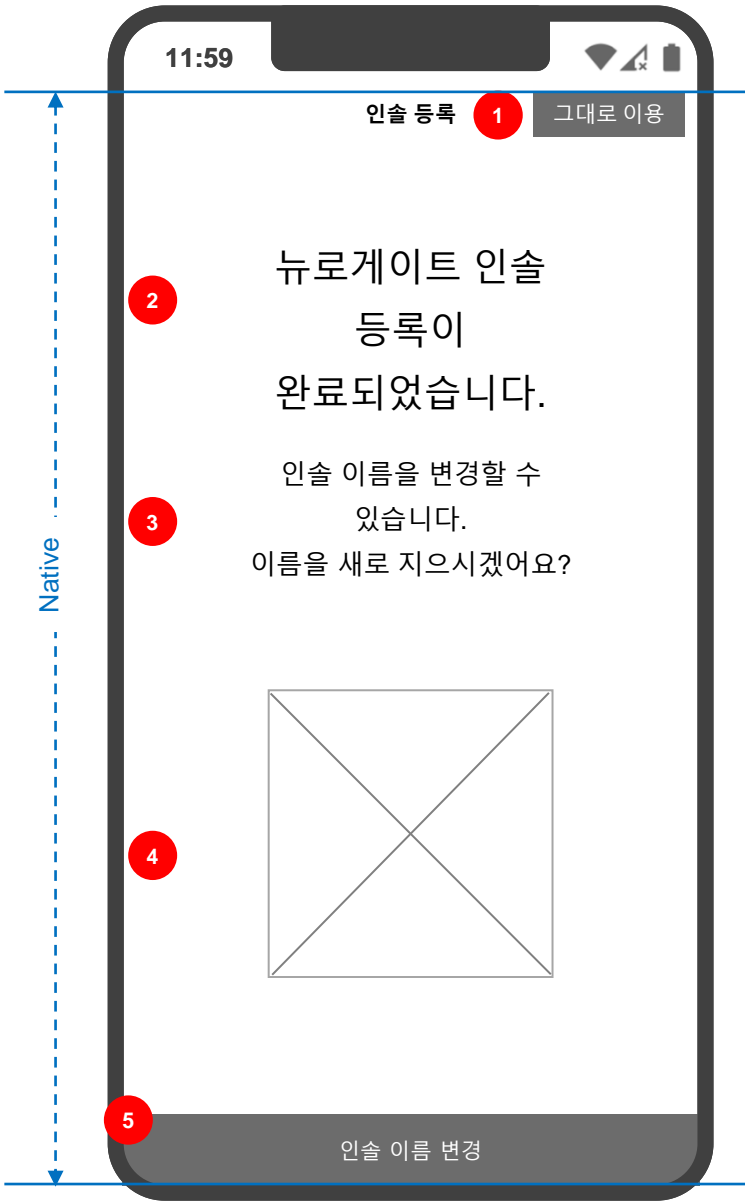Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 > 신규 등록 - 연결 완료	Screen ID	ST-PT-A-08_4	Description
				<ul style="list-style-type: none">0. 안드로이드의 경우 back 시 창 닫음, “인솔보정” 화면 로드1. 터치 시 창 닫음, “보정” 프로세스 진행2. 인솔 등록 완료 문구 출력3. 인솔 이름 변경 가능 문구 출력4. 인솔 연결 완료를 시각적으로 표현하는 이미지 표시5. 터치 시 이름 변경 페이지 로드


Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 > 신규 등록 - 연결 완료	Screen ID	ST-PT-A-08_5	Description
<div><div>Native</div><div><div>11:59</div><div>인솔 등록 1 다음에 변경</div><div>2 뉴로게이트 인솔 이름 변경</div><div>나만의 인솔을 구분하기 쉽도록 변경해 주세요.</div><div>3 XS (230~240) 1</div><div>4 입력한 이름으로 변경</div></div></div>				<div>1. 터치 시 페이지 다음, "인솔 정보" 화면 로드</div> <div>2. 인솔 이름 변경 타이틀 및 변경 안내 문구 출력</div> <div>3. 1) 검색된 인솔의 사이즈가 인풋박스에 자동 입력, 기등록 인솔 중 이미 해당 이름이 있는 경우 자동 입력된 이름 뒤에 숫자 추가 입력 * ex) XS (230~240) 1 2) 사이즈별 이름 자동 입력 품: - XS: XS (230~240) - S: S (245~255) - M: M (260~270) - L: L (275~285) - XL: XL (290~300) 3) 모든 문자 입력 가능, 20자 초과 입력 시 입력 불가</div> <div>4. 1) 터치 시 입력한 이름 유효성 검사 기등록 인솔과 이름 겹칠 시 알럿 메시지 출력 2) 겹치는 이름이 없을 경우 인솔 등록</div>

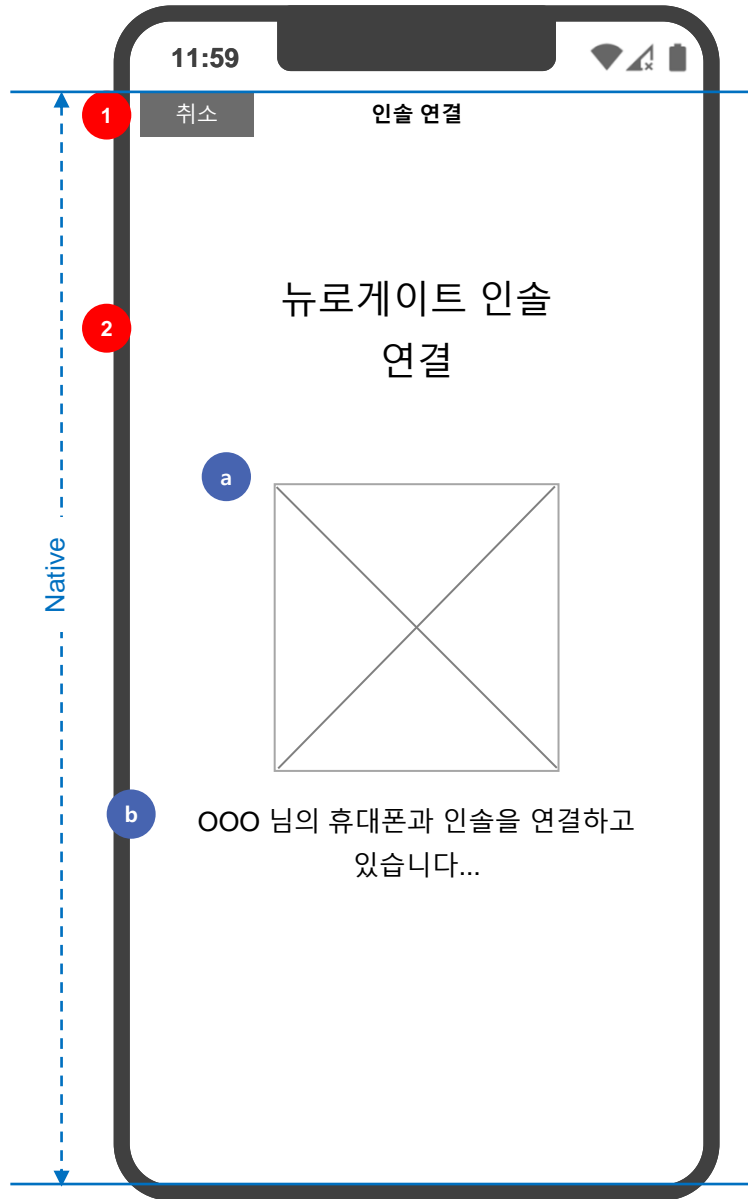


1. 터치 시 연결 중단, "연결 중" 상태 창 닫음
2. 인슐 연결 상태 안내 UI
 - a. 인슐과 디바이스의 연결 시도 액션을 시각적으로 표현하는 애니메이션 또는 gif 표시
 - b. 인슐 연결 중 문구 출력

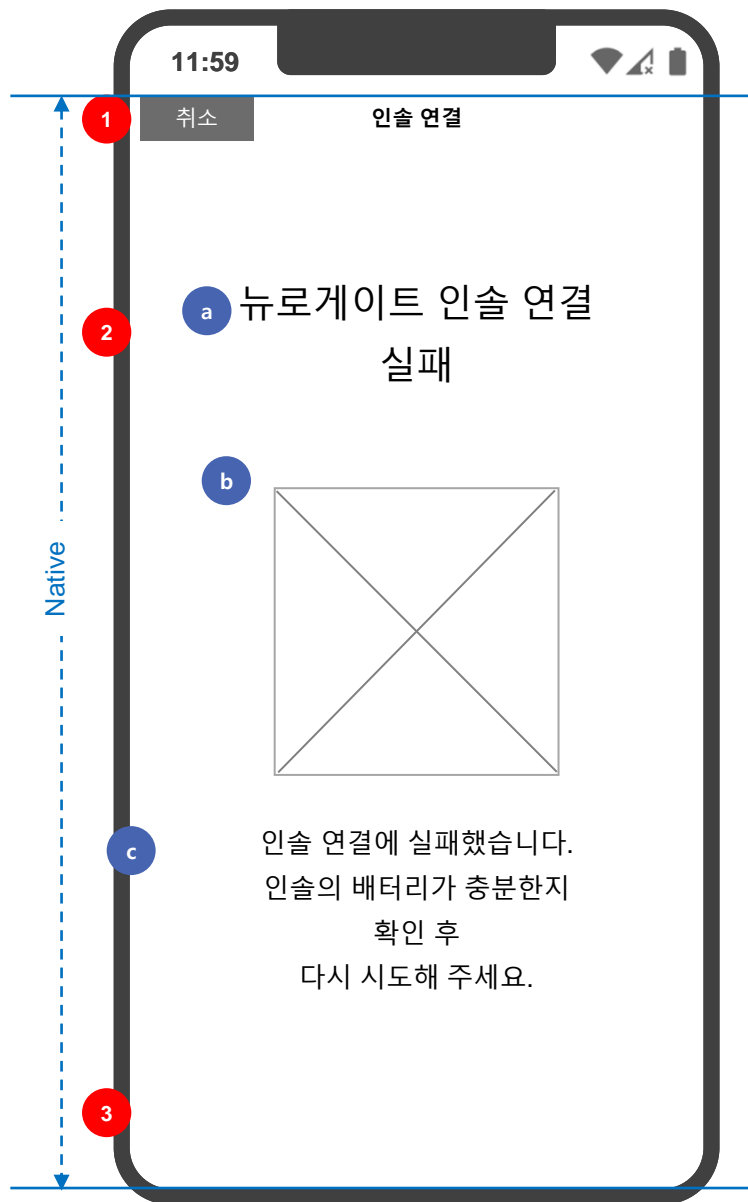

1. 터치 시 연결 중단, 창 닫음
2. 인슐 연결 상태 안내 UI
 - a) 타이틀 출력
 - b) 인슐과 디바이스와의 연결 실패를 시각적으로 표현하는 이미지
 - c) 인슐 연결 실패 피드백 문구 출력
3. 터치 시 인슐 연결 재시도

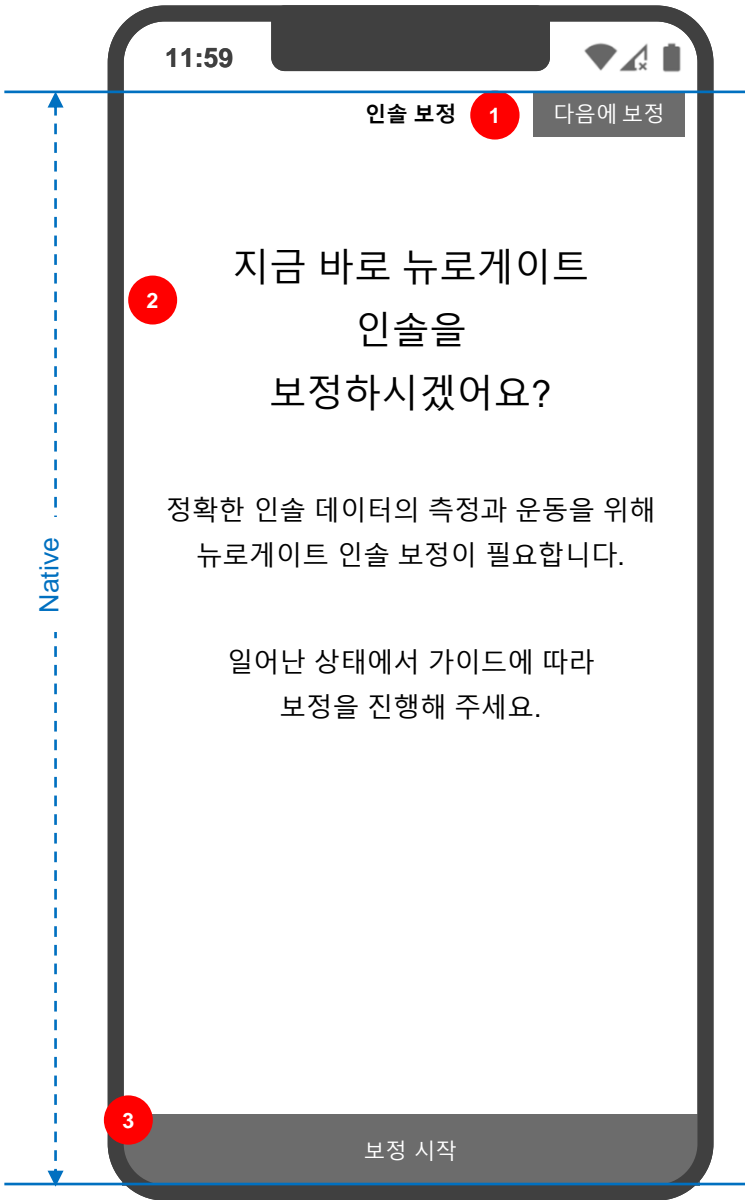Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 > 신규 등록 - 보정 물음	Screen ID	ST-PT-A-08_8	Description
				<ol style="list-style-type: none">1. 터치 시 페이지 다음, “인솔 정보” 화면 로드2. 인솔 보정 물음 타이틀 및 안내 문구 출력3. 터치 시 보정 프로세스 진행

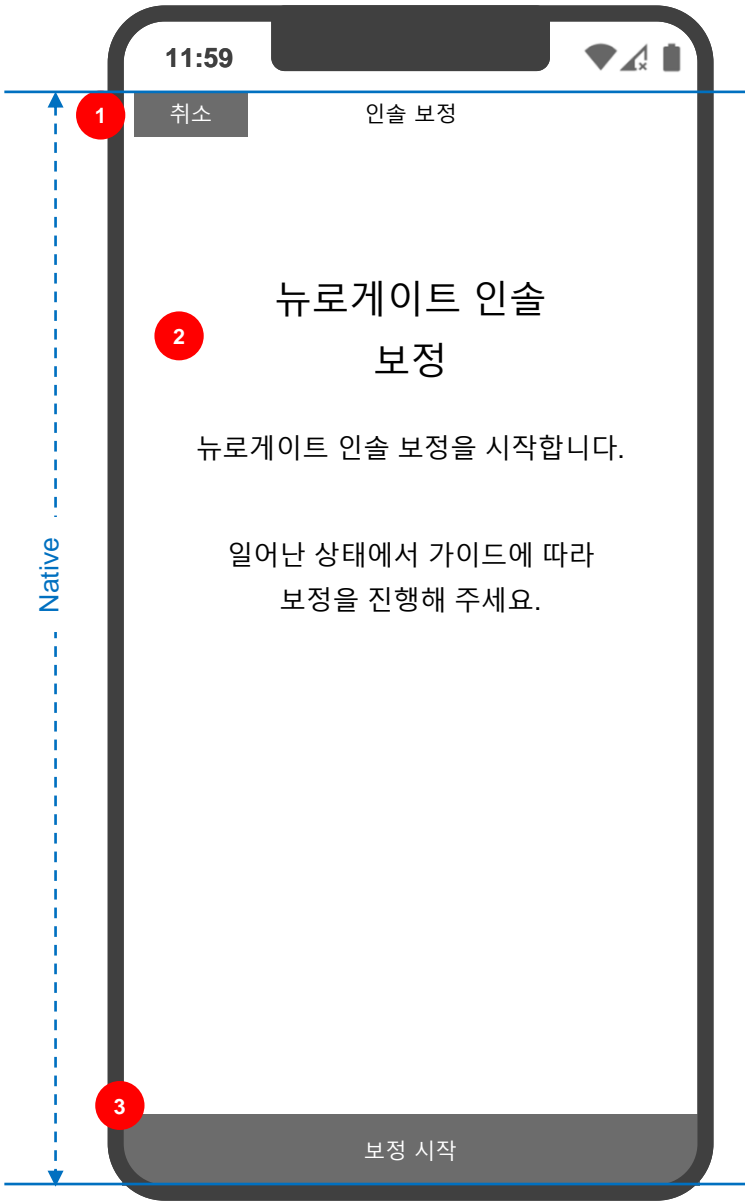
Page Description	전체 메뉴 > 인슐 관리 - 인슐 보정	Screen ID	ST-PT-A-08_9	Description
				<ol style="list-style-type: none">1. 터치 시 인슐 보정 프로세스 중단, 가이드 닫음2. 인슐 보정 가이드 문구 표시3. 터치 시 원발 보정 프로세스 진행

Page Description	전체 메뉴 > 인슐 관리 - 인슐 보정 안내	Screen ID	ST-PT-A-08_10	Description
<div><div><div>11:59</div><div>인슐 보정 1 다음에 보정</div><div>2</div><div>뉴로게이트 인슐 보정이 필요합니다.</div><div>정확한 인슐 데이터의 측정과 운동을 위해 한 달에 한 번 뉴로게이트 인슐 보정을 진행해 주시면 좋습니다.</div><div>인슐 보정은 일어난 상태에서 가이드에 따라 진행해 주세요.</div><div>3</div><div>인슐 보정</div></div><div>Native</div></div>				<div>1. 터치 시 페이지 닫음</div> <div>2. 인슐 보정 가이드 문구 표시</div> <div>3. 터치 시 원발 보정 프로세스 진행</div>



1. 터치 시 인솔 보정 프로세스 중단, 가이드 닫음
2. 인솔 보정 프로세스 표시 UI
 - 1) 인솔 왼발/오른발 보정 프로세스 표시, 현재 진행하고 있는 단계 강조
3. "인솔 보정" 타이틀 및 문구 출력
4.
 - 1) 화면 로드 시 숫자 출력되지 않음
 - 2) 왼발/오른발 인솔에서 측정되는 데이터의 크기의 최소값이 유지될 경우 3초 카운트
 - 3) 3초 카운트 동안 데이터 크기가 변하지 않을 경우 오른발 보정 진행
 - 4) 3초 카운트 동안 데이터 크기가 변할 경우 보정 실패 피드백

Page Description	전체 메뉴 > 인슐 관리 - 인슐 보정 완료	Screen ID	ST-PT-A-08_12	Description
<div></div>				<div>1. 인슐 보정 완료 안내 UI</div> <div>a) 타이틀 출력</div> <div>b) 인슐 보정 완료 문구 출력</div> <div>c) 인슐 보정 완료를 시각적으로 표현하는 이미지 표시</div> <div>2. 터치 시 창 닫음</div>

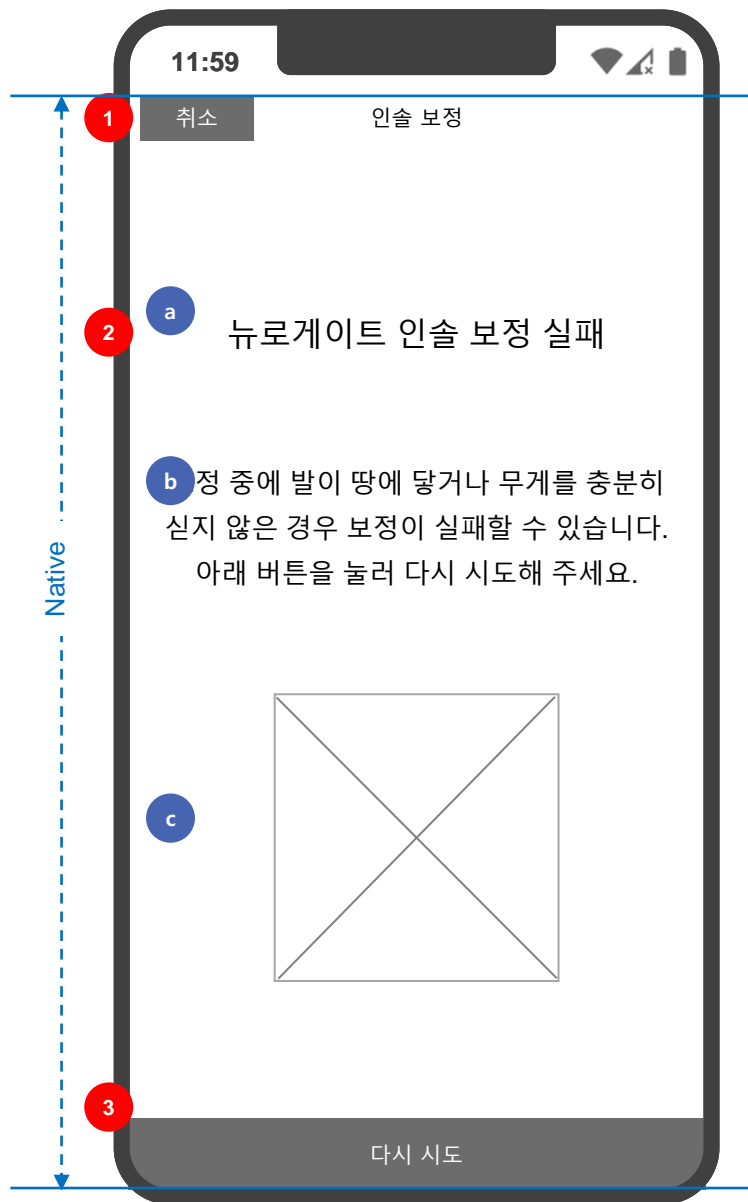

- 터치 시 보정 취소 confirm 출력
(confirm 메시지 확인은 아래 url 참고)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlb4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276
- 인솔 보정 완료 안내 UI
 - 타이틀 출력
 - 인솔 보정 완료 문구 출력
 - 인솔 보정 완료를 시각적으로 표현하는 이미지 표시
- 터치 시 인솔 보정 프로세스 진행
- 왼쪽 보정 진행

Page Description	전체 메뉴 > 인솔 관리 - 인솔 정보	Screen ID	ST-PT-A-08_14	Description
<p>Native</p>				<ol style="list-style-type: none"> 터치 시 홈으로 이동 터치 시 인솔 보정 가이드 팝업 - 인솔 보정 프로세스 진행 인솔 이미지 표시 양쪽 인솔의 배터리 잔량 출력: <ol style="list-style-type: none"> 배터리 80~100% 배터리 양호 : 50~79% 배터리 부족 : 11~49% 배터리 충전 필요 : 1~10% 연결된 인솔의 이름 출력 터치 시 기존 이름이 입력된 상태로 이름 변경 인풋 필드 팝업 인솔 전원 차단 UI: <ol style="list-style-type: none"> 섹션 타이틀 off 시 연결 해제 및 인솔 전원 차단 전원 off 상황 및 on 가이드 터치 시 인솔 연결 해제 confirm 출력 (confirm 메시지 확인은 아래 url 참고) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276

End Of Document